

# NÁVOD K OBSLUZE

Multifunkční kosmetický přístroj

**BeautyRelax BR-2932**

**ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL  
MAX PERFORMANCE**



## OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	5
UPOZORNĚNÍ	6
POUŽITÍ SONOGELU	6
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	7
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	7
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
OBSAH BALENÍ	8
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	9
METODY REDUKCE VRÁSEK	9
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	10
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	11
POPIS PŘÍSTROJE	12
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	14
VODNÍ DERMABRAZE	15
PLASMA TERAPIE	18
PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU	19
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	20
NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT	21
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE	21
OPTIMÁLNÍ POSTUP APLIAKCE PLASMOU	21
RADIOFREKVENCE	22
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	27
ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ	28
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY	31
PŮSOBENÍ CHLADU	32
NANO HYDRATACE	35

## OBSAH:

FOTONOVÁ TERAPIE	38
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	39
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	39
FOTONOVÁ TERAPIE - POZNÁMKY POUŽITÍ	42
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	43
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	44
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	45
ČAS APLIKACE	46
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	46
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	47
PÁR VĚT ZÁVĚREM	49
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	50
CERTIFIKACE	50
EU DISTRIBUTOR	50
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	51

## SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Estetický přístroj pro aplikaci pleti **BeautyRelax** pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj tohoto typu kladeny. Aby bylo možné dosáhnout vysoké efektivity aplikace pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny tak, aby působily na pleť s maximální šetrností.

### Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají výrazně zlepšit kondici pleti pomocí různých metod aplikace. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby vydržela náročný provoz při komerčním použití s vysokou frekvencí používání.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní aplikaci. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky neprotrhne kůži.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí pro aplikaci pleti, umožňuje nastavení intenzity. Pokud používáte přístroj pro komerční účely, vždy nejprve vyzkoušejte účinky každé hlavičky sami na sobě, abyste si udělali lepší představu o tom, jak daná technologie působí na pleť při každé úrovni nastavení výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic není vždy třeba nastavit nejvyšší stupeň výkonu. Výkon je třeba vždy přizpůsobit tak, aby bylo pleťová aplikace cítit, ale zároveň nepřesáhlo práh bolesti.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po aplikaci dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

### **Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.  
Tým BeautyRelax.cz

## **KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE**

ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE je přístroj, který je určen pro kosmetickou aplikaci pleti na velmi kvalitní a profesionální úrovni. Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikačních hlavic žádnou technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby poskytoval základní kosmetické použití: vyčištění pleti, hydratace pleti, zapracování kosmetických přípravků, podpora zlepšení kondice pleti, zklidnění pleti. Přístroj působení na pleť celou řadou technologií: vodní cirkulace, plazmový tok s ozonem, radiofrekvence, elektroforéza, působení chladu, nano hydratace a světelná terapie.

Rozsah licence pro využívání jednotlivých technologií za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro jednotlivé technologie, které přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost za používání přístroje za podmínek, které jsou v rozporu s legislativou v dané zemi používání. Provozovatel může veřejně pro komerční použití pracovat pouze s funkcemi a technologiemi přístroje, na které má oprávnění dle aktuálně platného znění zákona/vyhlášky. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost za škody, které vznikly v rozporu s používáním podmínek stanovených v tomto návodu k obsluze.

## KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte, zejména mřížku ventilátoru.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



## POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavici pro radiofrekvenci.



## **KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT**

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo na pleti, neplatí pro zubní implantáty a další typy náhrad v dutině ústní)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství

## **POVOLENÉ PARTIE APLIKACE**

- Obličej
- Krk
- Dekolt

## **HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE**

- Podpora tvorby kolagenu.
- Remodelace elastických vláken.
- Zvýšení pružnosti pleti.
- Zvýraznění kontur obličeje.
- Vyhlazení výrazných hlubokých vrásek.
- Maximální výživa pleti.
- Okamžitá hydratace pleti.
- Prokrvení a okysličení podkožní tkáně.
- Jemná lymfatická masáž pro redukci otoků obličeje.
- Odstranění velice drobných částíček makeupu, které ulpí v kožních pórech.
- Hlubkový peeling pleti s odstraněním černých teček.
- Uvolnění kožních pórů.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Podpora krevního oběhu.
- Vyrovnání barevného tonusu pleti.
- Mechanická masáž pokožky.
- Potlačení pigmentových skvrn.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Technologie: vodní dermabraze, plasma terapie, elektroforéza, působení chladu, nano hydratace a fotonové světlo
- Výkon: 65W
- Červené světlo: vlnová délka 630nm
- Modré světlo: vlnová délka 470nm
- Žluté světlo: vlnová délka 590nm
- Zelené světlo: vlnová délka 520nm
- Velký dotykový barevný displej 7“
- Radiofrekvence: 1MHz
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry hlavní jednotky: 37x36x30cm
- Hmotnost: 5kg

## **OBSAH BALENÍ**

- Hlavní jednotka 1x
- Aplikační hlavice s vodní dermabrazí 1x
- Vyměnitelné aplikátory pro vodní dermabrazí 3x
- Aplikační hlavice s plasma terapií 1x
- Aplikační hlavice s radiofrekvencí 1x
- Aplikační hlavice s elektroforézou (neinvazivní mezoterapie) 1x
- Aplikační hlavice s tepelnou terapií – působení chladu 1x
- Aplikační hlavice s nano hydratací 1x
- Sada ampulek 1x
- Obličejová maska s funkcí fotonové terapie 1x
- Ochranné textilní brýle 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x
- Prodlužovací napájecí kabel 220V 1x



## PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


## METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

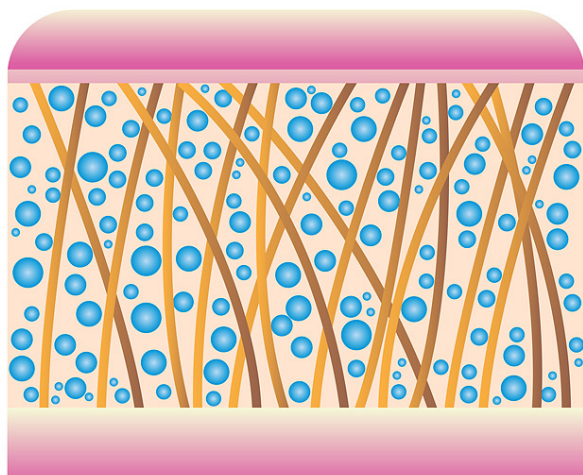

### **VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK**

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU  
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

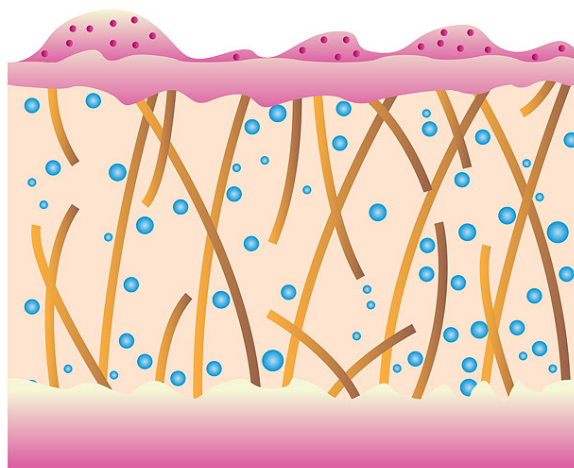

### **POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI**

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU  
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

## PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE


BeautyRelax AntiAge Oxygen Professional Max Performance je multifunkční estetický přístroj pro komplexní pleťová aplikace na té nejvyšší úrovni. Nabízí všechny důležité technologie nezbytné pro udržení zdravé a krásné pleti: čištění, zpracování kosmetických přípravků, hydratace, lifting, zklidnění pleti a regeneraci. Nahrazuje 7 různých přístrojů. Použití aplikačních hlavice je na pleti příjemné, bezpečné, bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů s maximální účinností. Přístroj nabízí kvalitní zpracování všech komponentů. Extrémně dlouhá životnost aplikačních hlavice. Určen do komerčního provozu s vysokou frekvencí použití. Vysoká užitná hodnota. Rychlá návratnost počáteční investice na pořízení přístroje. Použití je určeno pro všechny typy pleti. BeautyRelax AntiAge Oxygen Professional Max Performance, to je omlazení, zažehlení, výživa, ochlazení a hydratace pleti na jednom místě!



## POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. TECHNOLOGIE PLASMOVÉHO TOKU S OZONEM
3. RADIOFREKVENCE
4. ELEKTROFORÉZA PRO MEZOTERAPII
5. PŮSOBENÍ CHLADU
6. NANO HYDRATACE
7. FOTONOVÁ TERAPIE

### 7 APLIKAČNÍCH HLAVIC

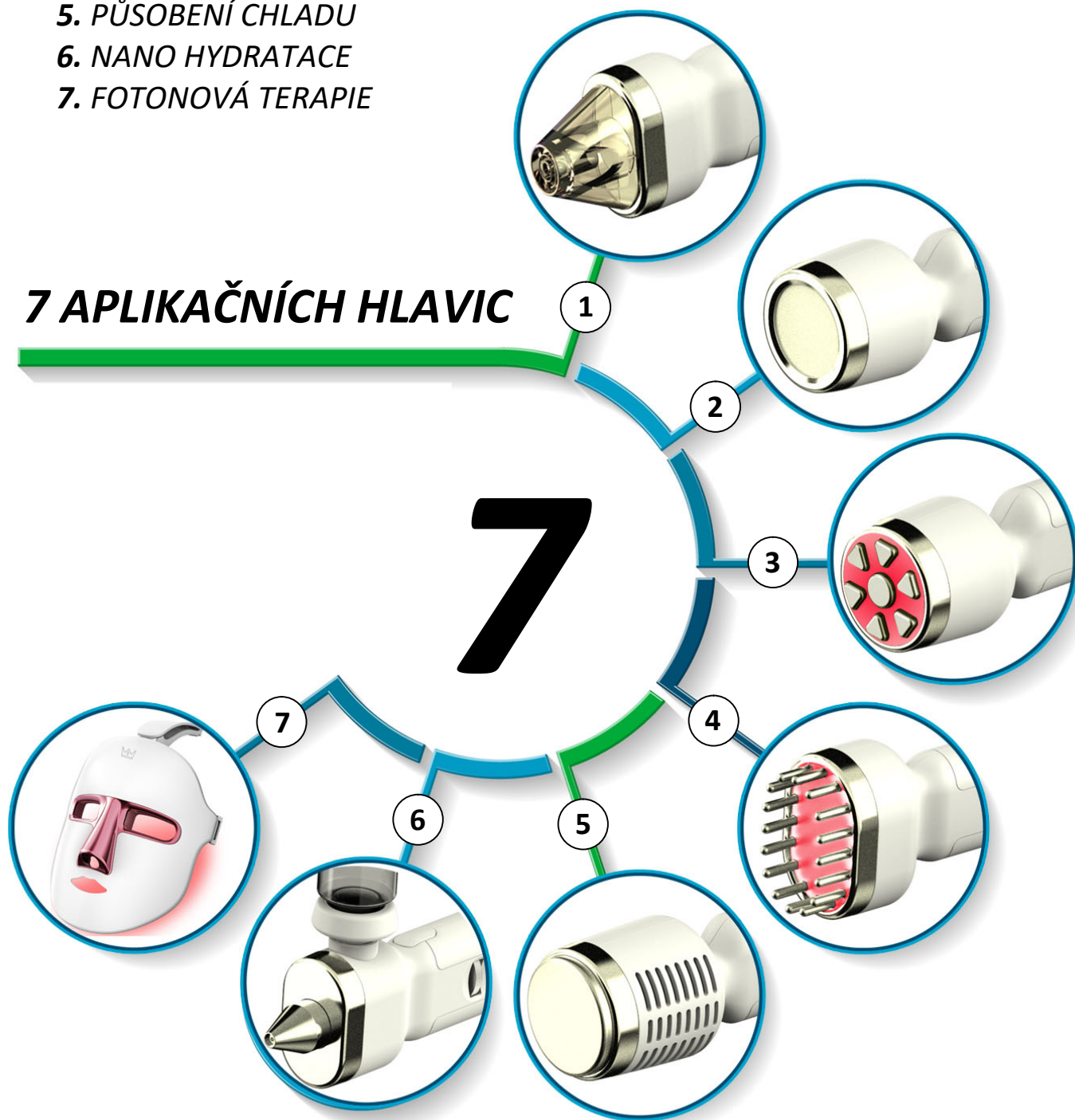

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice s elektroforézou pro mezoterapii
2. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
3. Aplikační hlavice s působením chladu
4. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
5. Aplikační hlavice s nano hydratací
6. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
7. Zásobník na tekutinu
8. Odpadní nádobka
9. Barevný dotykový displej
10. Tlačítko intenzity plazmových toků
11. Tlačítko nastavení množství cirkulace tekutiny



## POPIS PŘÍSTROJE

1. Držák na aplikační hlavice
2. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s radiofrekvencí
3. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s působením chladu
4. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s plazmovými toky
5. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s elektroforézou
6. Zdířka pro zapojení masky s fotonovou terapií
7. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s nano hydratací
8. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s vodní dermabrazí
9. Výstup chlazení přístroje (NIKDY NEZAKRÝVEJTE)
10. Tlačítko ON/OFF
11. Zdířka pro zapojení napájecího kabelu s pojistkou




## INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice. Šroubky utahujte s citem, aby nedošlo ke stržení závitu a případnému prasknutí držáku.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na zadní straně hlavní jednotky do polohy 1. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF** na zadní straně hlavní jednotky do polohy 0.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Platí pro hlavici s radiofrekvencí, působením chladu, plazmovými toky a elektroforézou. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utahení  
prstence  
zašroubováním**

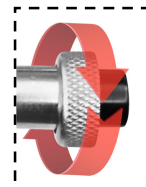

## VODNÍ DERMABRAZE



Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby pravidelně dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pletí nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny. K dispozici je 6 vyměnitelných aplikátorů různých průměrů pro aplikaci velkých i malých ploch.


### **Systém vakuového nasávání**

Estetický přístroj BeautyRelax pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupíků napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, černé tečky a nevzhledné bílé čepičky. Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Estetický přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

### **Systém vodní cirkulace**


Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby pravidelně dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pletí nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny.

# VODNÍ DERMABRAZE

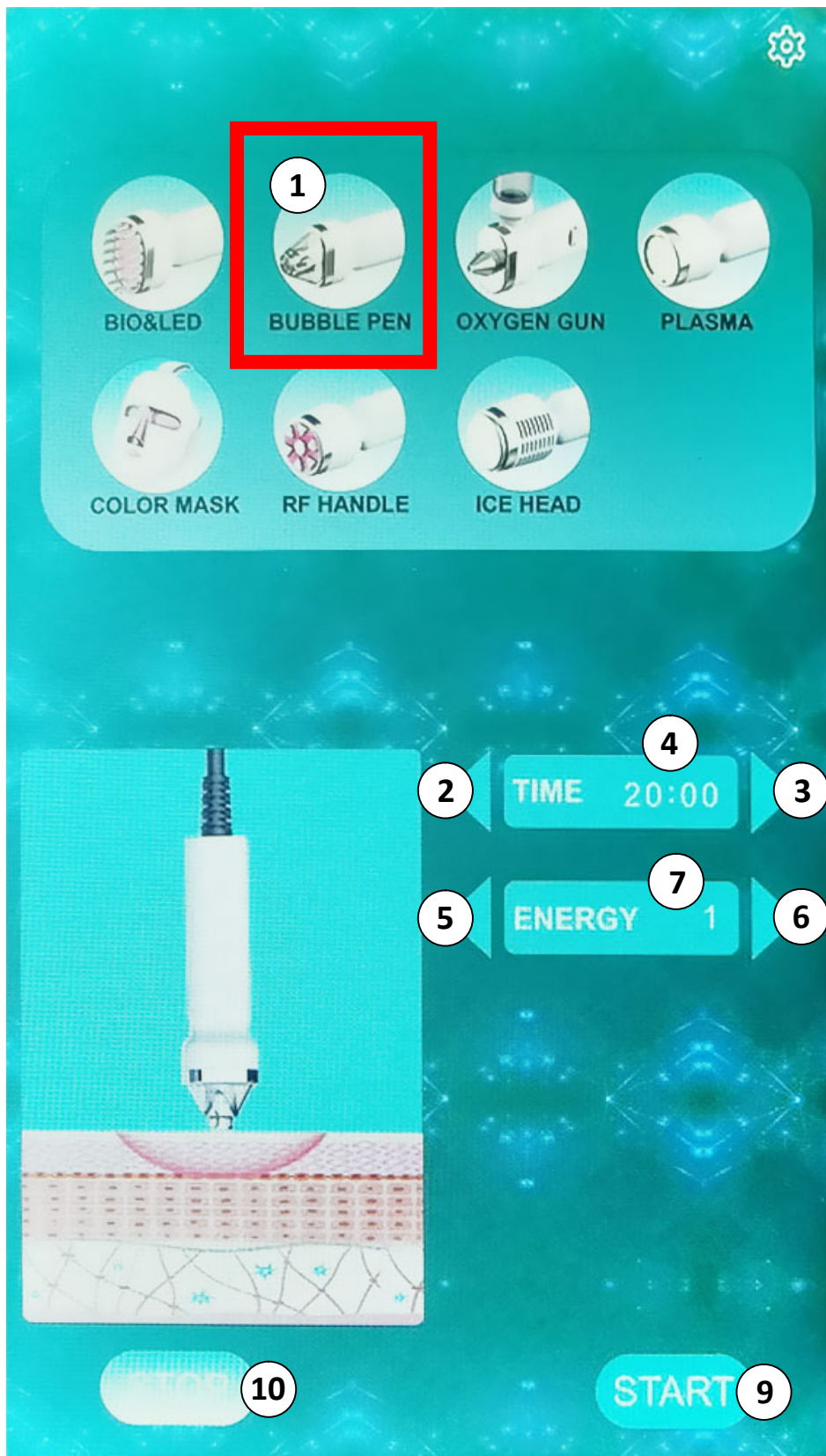



- Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte tlačítko na displeji **(1)**.
- Zásobník na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje aplikované části pleti a reliéfu povrchu pokožky.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **START (9)**. Činnost můžete zastavit pomocí tlačítka **STOP (10)**.
- Pomocí tlačítka **(6)** si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání. Pomocí tlačítka **(5)** si můžete nastavit snížení vakuového nasávání. Hodnota vakuového nasávání je zobrazena na displeji **(7)**. K dispozici jsou celkem 3 úrovně intenzity vakuového sání.
- Pomocí otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.

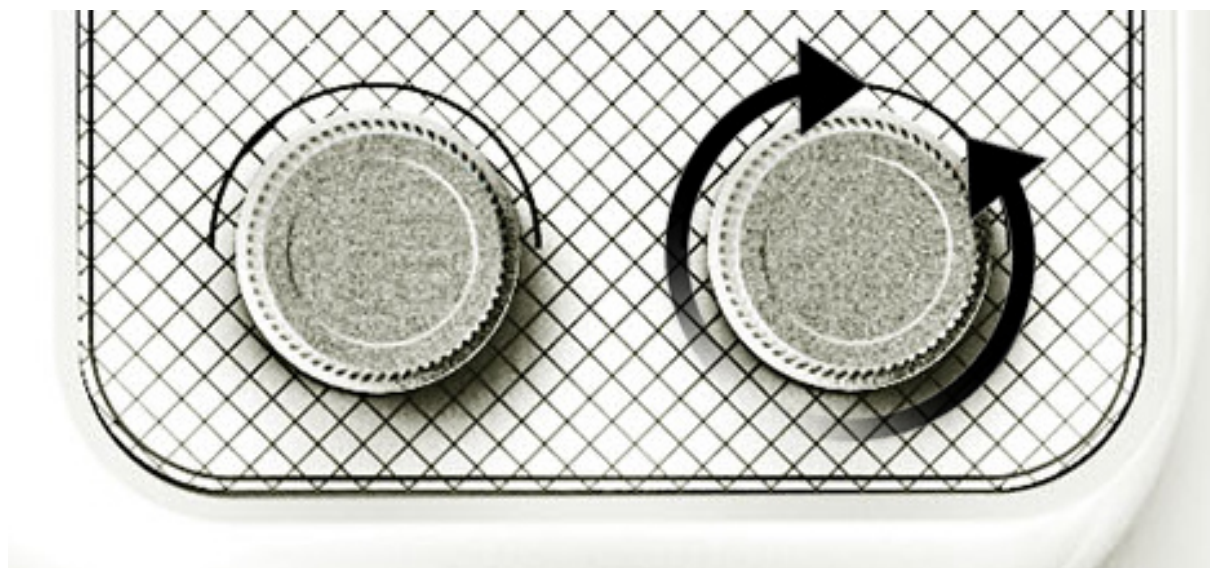

- Hlavicí se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat oba zásobníky na vodu. Pravý zásobník je určen jako zdroj tekutiny. Levý zásobník jako odpadní nádobka. Zásobník na tekutinu musí být pro správné fungování systému dostatečně naplněný. Levou odpadní nádobku pravidelně vyprazdňujte. Oba zásobníky se do přístroje instalují pomocí závitů.
- **Množství vody (pomocí otočného tlačítka)**, které je do aplikační hlavice přečerpáváno. Nastavte si takovou hodnotu, která bude poskytovat dostatečné množství tekutiny. Na druhé straně bude mít hlavice dostatečný výkon pro plynulé odsávání tekutiny. V průběhu práce s aplikační hlavicí by neměla tekutina příliš stékat po povrchu pleti.
- **Síla podtlaku (nastavení tlačítka na displeji)**, která se generuje v aplikační hlavici. Pohyb aplikační hlavice po pleti by měl být intenzivní. Na starně druhé by neměl být příliš silný, což by bránilo plynulému pohybu aplikátoru po pleti. Sílu podtlaku by měla vždy korespondovat s množstvím přečerpávané tekutiny.

## PLASMA TERAPIE




Jak naše tělo stárne, mění se vlastnosti a celkový vzhled pleti. Epidermis se v průběhu času ztenčuje. Pigmentové skvrny jsou viditelnější. Produkce kolagenu zpomaluje. Dochází ke snížení pružnosti pleti. Kontury obličeje ochabují. Vrásky se prohlubují a stávají se viditelnější. Technologie plasmového toku s ozonem představuje skutečně funkční řešení, jak průběh těchto procesů zvrátit.

Plasmový tok s ozonem přistupuje k aplikaci pleti z opačného konce. Většina technologií pro kosmetická aplikace řeší až následek. Tvorba černých teček jako následek zanedbání čištění pleti. Eliminace vrásek jako následek působení stárnutí. Ucpané kožní póry jako následek zvýšeného výskytu mastnoty pleti. Aplikace plasmou s ozonem funguje jako prevence vzniku nežádoucích kožních defektů.

Keramická plocha aplikátoru generuje stejnosměrný proud s vysokofrekvenčním napětím. Plasmový výboj vzniká mezi keramickým aplikátorem hlavice a pletí. Při výboji jsou využity atomy kyslíku obsažené ve vzduchu. Přiblížením aplikátoru k pleti dochází k plasmovému výboji, který sterilizuje pleť a nekompromisně zlikviduje veškeré bakterie na jejím povrchu. Optimální vzdálenost mezi aplikátorem přístroje a pletí jsou 4 milimetry.

# PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU

Výkon plasmového toku je přesně optimalizován, aby působil přes povrch pleti až k vrstvě dermis.

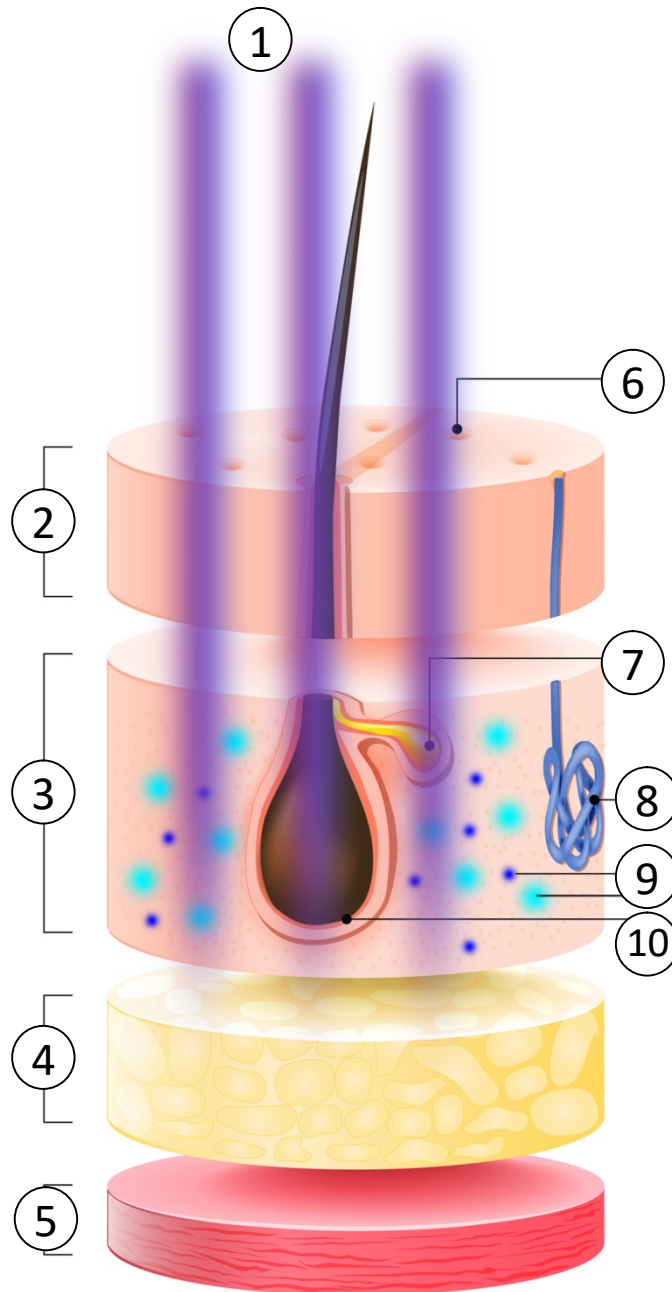

1. Působení plasmového toku

2. Epidermis

3. **Dermis**

4. Tuková tkáň

5. Svalová tkáň

6. Kožní pór

7. Mazová žláza vlasu

8. Potní žláza

9. **Kolagenní a elastická vlákna**

10. Vlasová cibulka

## IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt akné zni pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



## NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotné aplikaci pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleti se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití přístroje nebude pokožka negativně reagovat.


## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy nebo jiným velmi závažným kožním onemocněním.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po aplikaci je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém.
- Po aplikaci obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní a poté můžete aplikovat make-up podle potřeby.

## OPTIMÁLNÍ POSTUP APLIKACE PLASMOU


- Proveďte odlíčení pleti běžným způsobem. Využít můžete hlavici s vodní dermabrazí. Na pleti by neměly ulpět žádné zbytky makeupu. Jakékoliv nečistoty, které ulpí na pleti, snižují výsledný efekt plazmových toků.
- **Před aplikací pleti plazmovými toky by měla být pleť dokonale suchá.**
- Sundejte veškeré šperky jako např. náušnice, náhrdelníky, náramky, apod.
- Pleť aplikace pomocí aplikační hlavice s plazmovými toky.
- Pomalu se pohybujte aplikační hlavici po pleti. Plazmový výboj vznikne v případě, je-li aplikační hlavice v optimální vzdálenosti od pleti. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti od pleti v rozsahu od 1mm do 4mm. Během použití se snažte, aby se keramický aplikátor nacházel co nejméně v přímém kontaktu s pleť.
- Aplikace pleti je naprosto bezbolestná. Během používání můžete cítit mírné aroma, které doprovází průběh působení plazmového toku.
- Pokožka může v oblasti aplikace mírně zarudnout. Jedná se o přirozený jev. Pleť se v řádu několika minut dostane do normálu.
- Aplikační hlavice se nesmí v průběhu aplikace pleti dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
- V průběhu použití neaplikujte žádný druh kosmetického přípravku.
- Zaměřte se na vybrané části obličeje nebo dekoltu, kde potřebujete účinek přístroje nejvíce.
- Po aplikaci pleti přístrojem použijte jakýkoliv kosmetický přípravek, krém nebo sérum.

# PLASMA TERAPIE

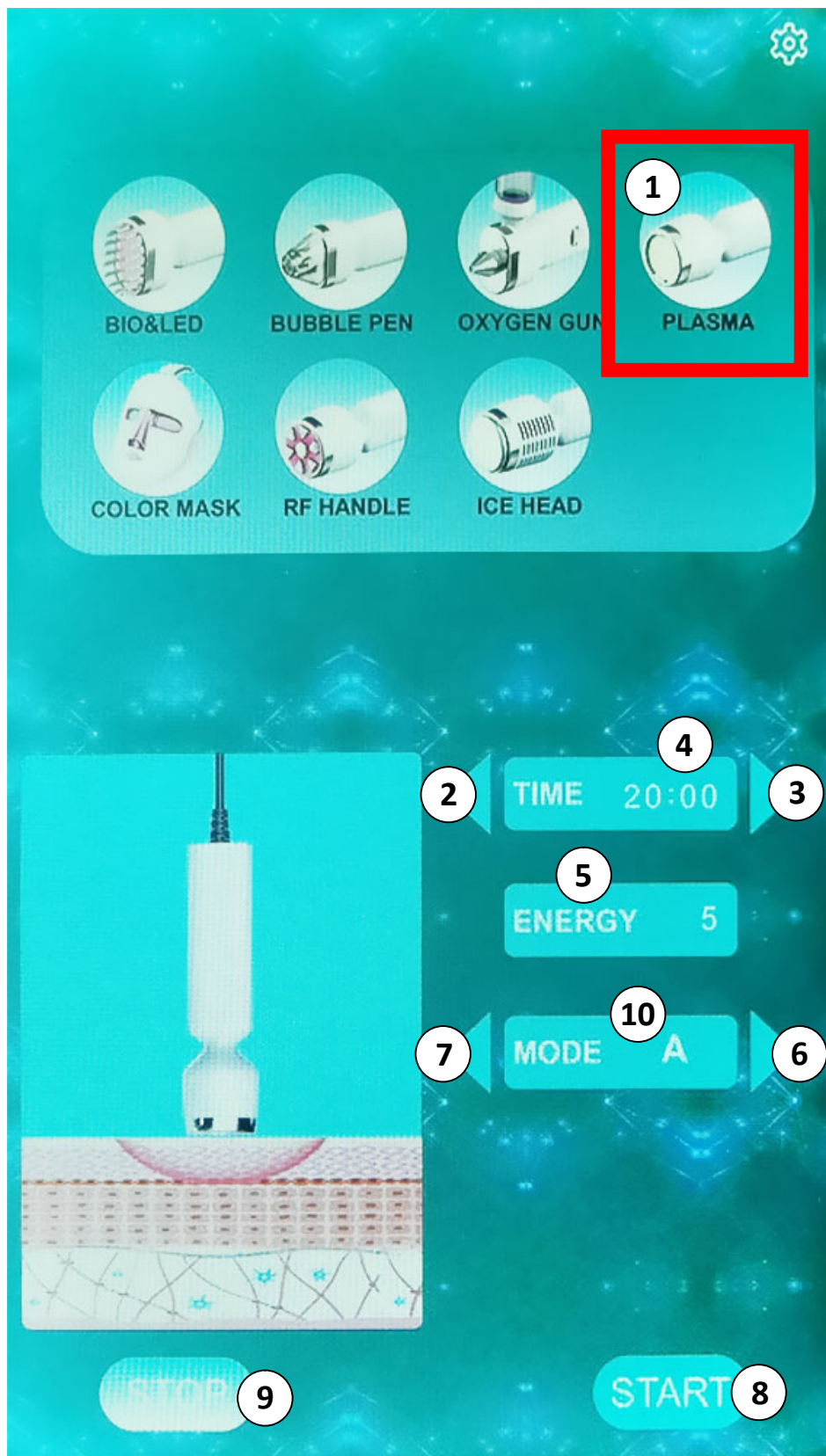

## PLASMA TERAPIE

- Pro použití funkce plasmových toků stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí otočného tlačítka si můžete nastavit intenzitu plasmových toků. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.

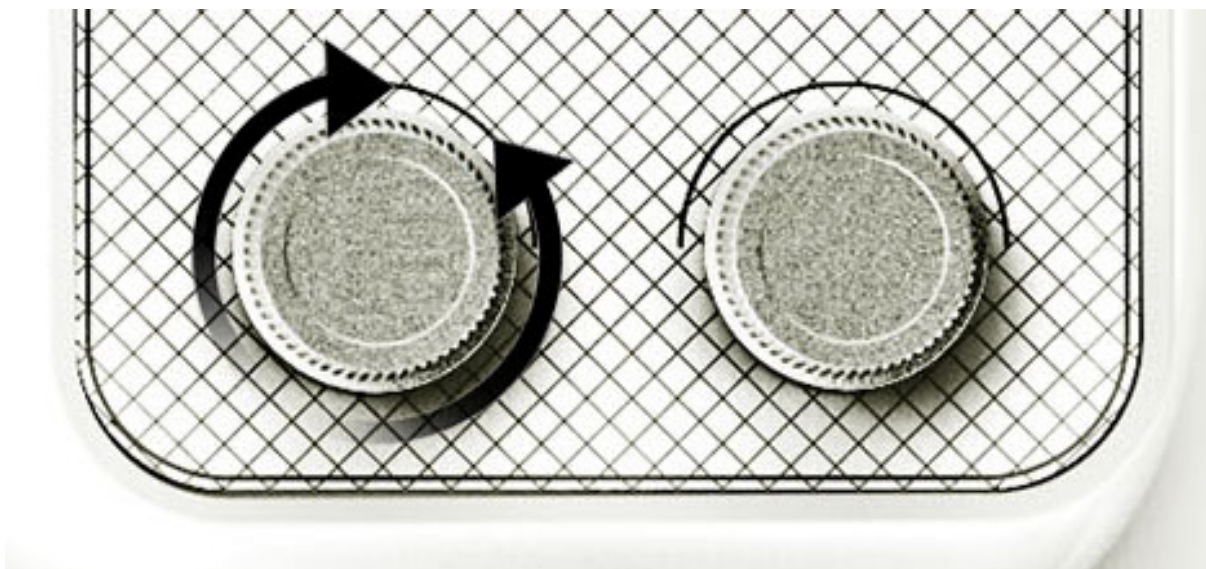

- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(5)**.
- Pomocí tlačítek **(7)** a **(6)** si můžete volit mód plasmových toků. K dispozici jsou 4 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C, D**. Každý mód má specifický režim fungování plasmových toků. (stálé působení, přerušování na 2 vteřiny, přerušování na 1 vteřinu, přerušování na 0,5 vteřin).
- Zvolte si takovou intenzitu působení plasmových toků, které vám budou na pleti stále příjemné a nebudou přesahovat hranici bolesti. Nejčastěji se pracuje v režimu kontinuálních plasmových toků, kdy plasmové toky působí stále na pleť bez přerušování. Nastavený mód je zobrazen na displeji **(10)**.
- Pomocí tlačítka **START (8)** činnost plasmových toků aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (9)** zastavíte.


## RADIOFREKVENCE



Radiofrekvence patří v oblasti estetiky mezi nejúčinnější metodu neinvazivního liftingu pleti. Aplikační hlavice přenáší do pleti radiofrekvenční vlny ve specifické frekvenci. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Přispívá k přirozené tvorbě vlastního kolagenu. V průběhu aplikace je možné na pleti cítit příjemné teplo. Maximální možné zacílení radiofrekvenční energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Účinné zejména pro aplikaci zralé pleti s výskytem viditelných hlubokých vrásek. Možnost plynulého dávkování výkonu pro aplikaci pleti s různou citlivostí.



# RADIOFREKVENCE

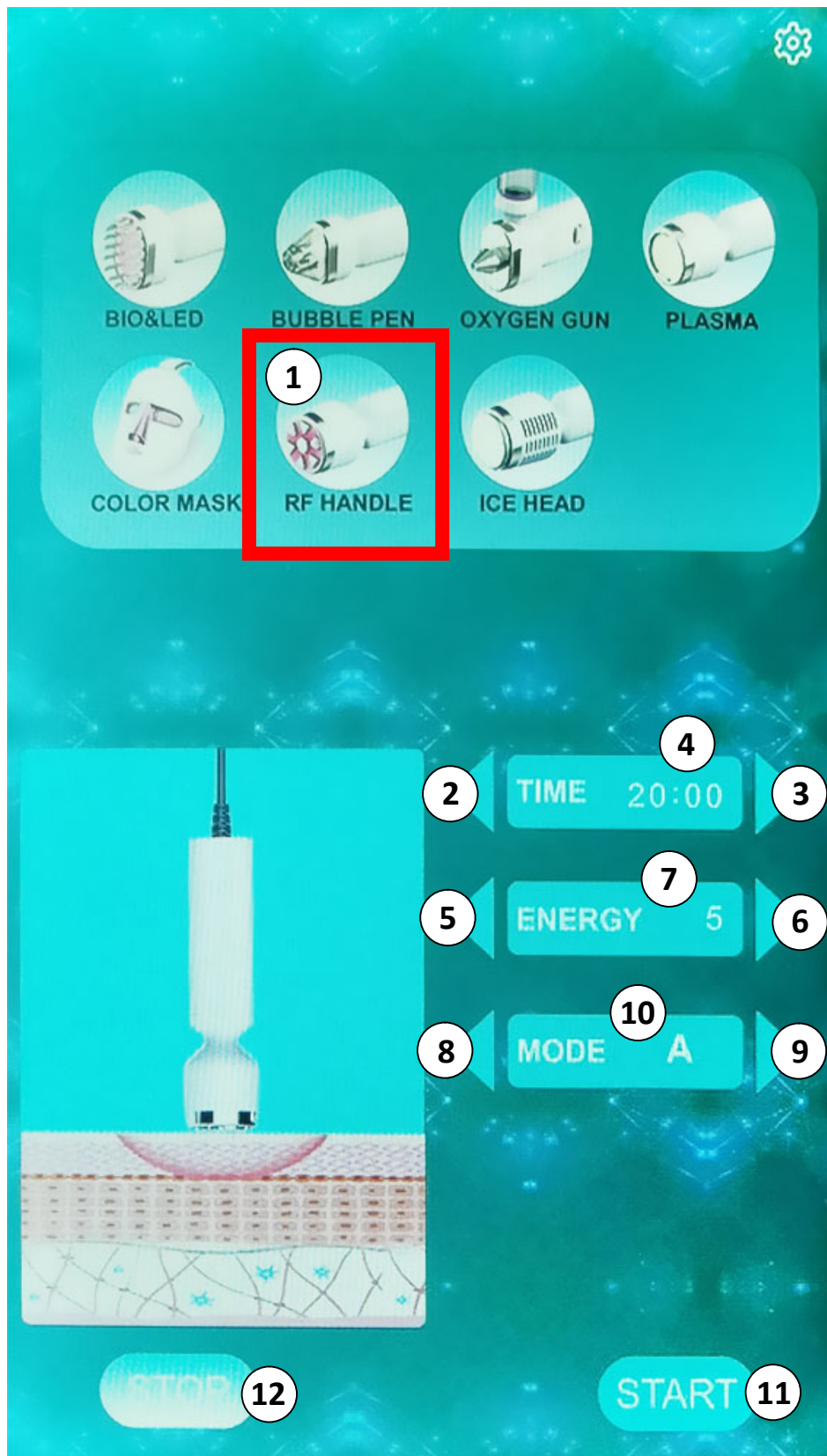

## **RADIOFREKVENCE**

- Pro použití funkce radiofrekvence stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítek **(8)** a **(9)** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C, D**. Každý mód má specifický režim fungování radiofrekvence. Na výběr je stálé působení radiofrekvenčních vln nebo přerušované. Aktuálně nastavený mód je zobrazen na displeji **(10)**.
- Zvolte si takovou intenzitu působení radiofrekvence, která vám bude na pleť stále příjemná a nebude přesahovat hranici bolesti. Nejčastěji se pracuje v režimu kontinuálního působení radiofrekvence, kdy radiofrekvenční vlny působí stále na pleť bez přerušení.
- Pomocí tlačítka **START (11)** činnost radiofrekvence aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (12)** zastavíte.

## **DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE**


- **Estetický přístroj BEAUTYRELAX** je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní aplikaci pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí nebo kosmetickém studiu. Používání přístroje nevyžaduje dohled doktora nebo dermatologa.
- **Estetický přístroj BEAUTYRELAX** je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Aplikace pomocí radiofrekvence by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem nebo jiným kosmetickým přípravkem na gelové bázi. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken. Pokud je to jen možné, vyhněte se vodivému gelu s přidanými aromaty nebo barvivy. Pleť citlivějších uživatelů by nemusela zareagovat pozitivně.
- Pokud je to jenom možné, snažte se aplikační hlavici vyhnout oblastem s velmi tenkou a citlivou pokožkou. Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně.  
**Aplikační hlavici se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krátké bodová aplikace – tzv. razítkování. Pokud budete držet hlavici příliš dlouho v kontaktu s pleť (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Před dalším přiložením na pleť proto nechejte časovou prodlevu v řádu sekund. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu. Začněte s krátkým „túkáním“ na pleť a pocitově postupně délku prodlužujte.**
- Po každé aplikaci vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.

## ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ



Aplikační hlavice pracuje na principu elektroforézy. Kosmetické přípravky jsou penetrovány pomocí působení mikroproudu v přesně optimalizované frekvenci. Žádná část aplikační hlavice nepronikne skrz povrch pleti. Nepředstavuje žádnou zátěž pro váš organismus. Skvělé dosažitelné výsledky. Aplikační hlavice s neinvazivní mezoterapií penetruje kosmetické roztoky přes povrch pleti hluboko do kožních vrstev. Penetrace přírodních extraktů a vitamínů. Aplikační hlavice má v sobě integrovaný zásobník pro opakované naplnění přípravkem na tekuté bázi. Snadné dávkování výkonu. Žádná krev. Žádné modřiny. Žádná bolest. Řekněte stop jehličkám, které způsobují nepříjemné pocity. Metoda mikro-jehličkování je minulost. Neinvazivní mezoterapie pomocí elektroforézy budoucnost, kterou můžete využívat již nyní!

# ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ

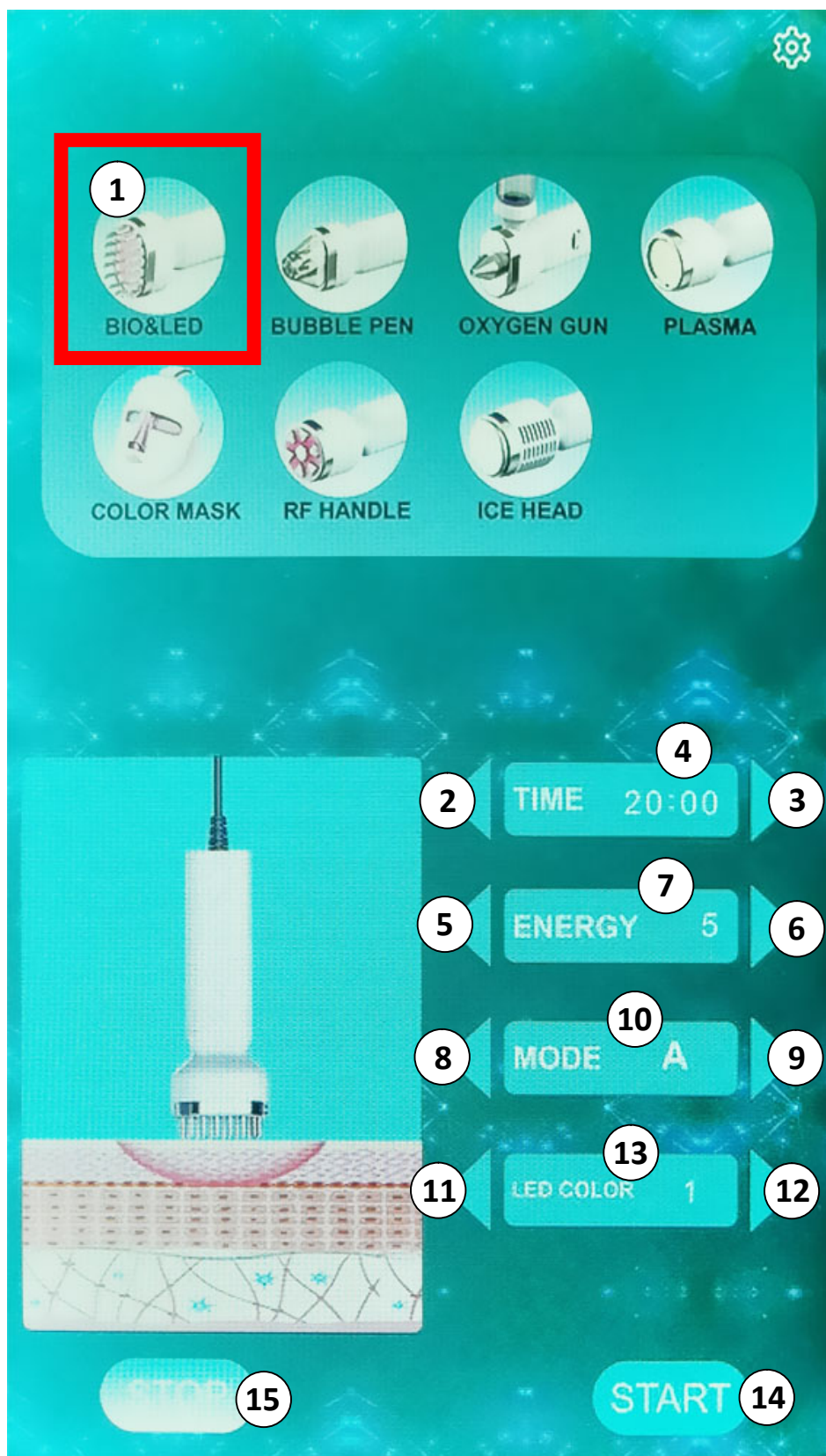

## ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ

- Pro použití funkce elektroforézy stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazena na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení elektroforézy. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítek **(8)** a **(9)** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C, D**. Každý mód má specifický režim fungování elektroforézy. Na výběr je stálé působení elektroforézy nebo přerušované. Aktuálně nastavený mód je zobrazen na displeji **(10)**.
- Zvolte si takovou intenzitu působení elektroforézy, která vám bude na pleť stále příjemná nebude přesahovat hranici bolesti. Nejčastěji se pracuje v režimu kontinuálního působení elektroforézy, kdy elektroforéza působí stále na pleť bez přerušování.
- Pomocí tlačítek **(11)** a **(12)** si můžete nastavit působení fotonového světla. Číslo zvolené barvy je zobrazeno na displeji **(13)**.
- Pomocí tlačítka **START (14)** činnost elektroforézy aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (15)** zastavíte.

## **POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY**

- 1.** Před každým použitím aplikační hlavice s elektroforézou je třeba důkladně omýt pokožku a osušit. Ideální je použití hlavice s vodní dermabrazí.
- 2.** Přístroj můžete používat i bez použití kosmetického přípravku. I samotná technologie elektroforézy má schopnost aktivně stimulovat pleť. V tomto případě aplikujte na pleť vrstvu sonogelu, aby se technologie elektroforézy mohla na povrch pokožky dokonale navázat. Sonogel postupně v průběhu použití doplňujte. Část se vstřebá do pleti a část vyschne. Nikdy nepoužívejte aplikační hlavici přístroje na sucho.
- 3.** Hlavice má speciální tvar, která umožňuje použití nejen v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu, ale také v oblasti hlavy. V případě použití vlasového séra můžete přípravek pomocí konstrukce hlavice velmi efektivně zapracovat do pleti.
- 4.** Při použití se snažte, aby byla hlavice v plném kontaktu s pletí.
- 5.** Snažte se při použití v oblasti pod bradou, krku a dekoltu vyhnout intenzivní stimulaci míst, kde se nachází lymfatické uzliny a štítná žláza. Letmý kontakt nevádí. Dlouhá, intenzivní stimulace je zakázána.
- 6.** V průběhu nastavení intenzity vždy vycházejte z vlastního pocitu, který vnímáte. Na pleti byste měli vnímat pocit, který připomíná mravenčení. Působení by pro vás však mělo být stále na snesitelné úrovni komfortu. Intenzitu v průběhu použití upravujte. V závislosti na tom, jak je citlivé místo na pleti, na kterém se s aplikátorem pohybujete.
- 7.** V průběhu působení fotonového světla není třeba mít ochranné pomůcky zraku. Přesto doporučujeme mít v průběhu aplikace zavřené oči nebo se vyhnout dlouhému přímému pohledu do zdroje světla. Vyhnete se tak případnému namáhání vašeho zraku.


## PŮSOBENÍ CHLADU



Působení chladu pro okamžité zklidnění pleti. Ideální jako závěrečná fáze pleťové aplikace. Pleť se během několika minut dostane do normální teploty. Zklidňující účinek a stažení kožních pórů. Velká plochá hlavice s ergonomickým tvarem. Dobře se drží a ochladí všechny záhyby obličeje.



# PŮSOBENÍ CHLADU

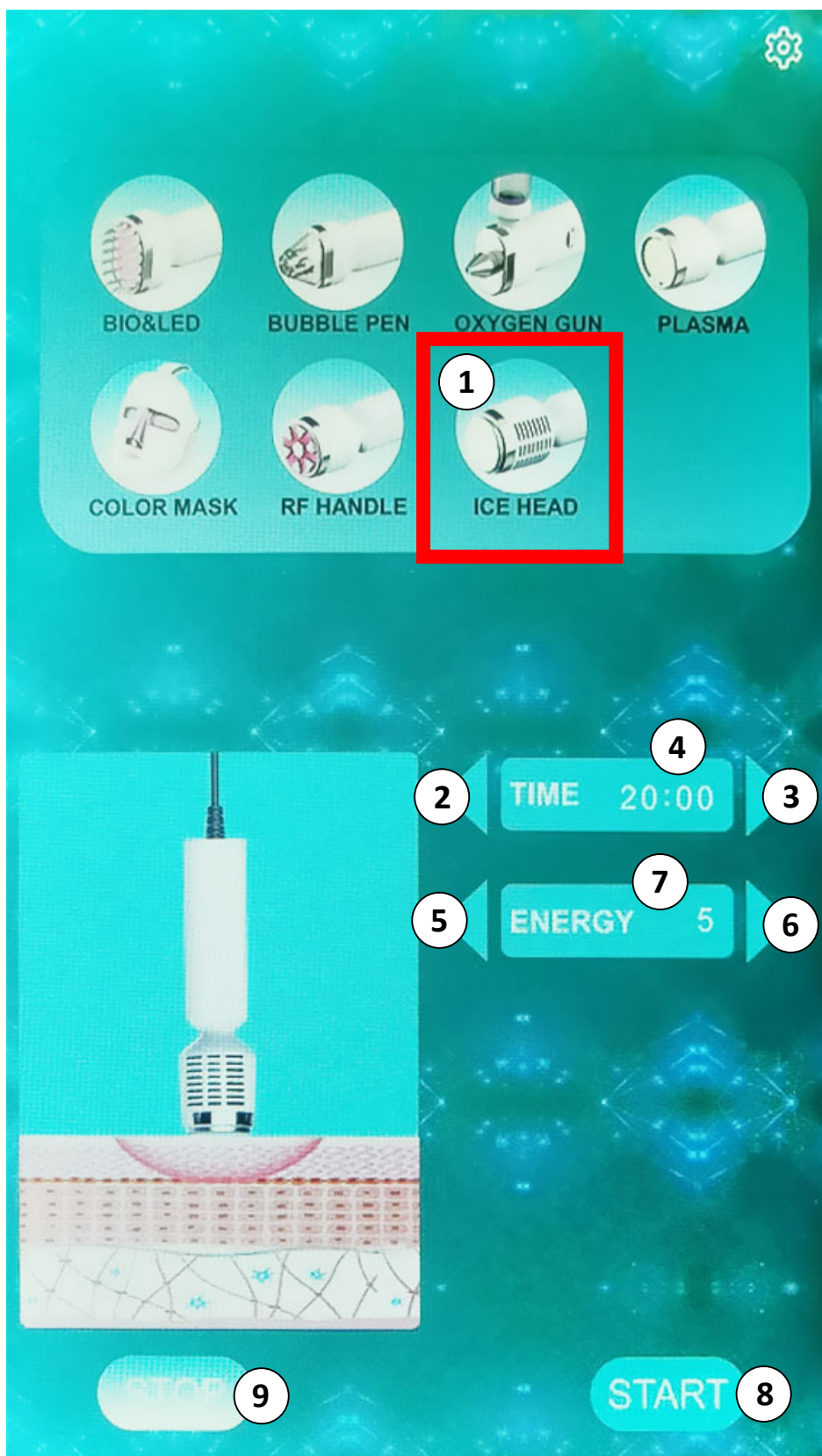

## PŮSOBENÍ CHLADU

- Pro použití funkce působení chladu stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení chladu. K dispozici je 5 úrovní nastavení výkonu: **1, 2, 3, 4, 5**. Každá hodnota symbolizuje °C povrchu aplikační hlavičky **1°C, 2°C, 3°C, 4°C, 5°C**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítka **START (8)** aktivujete působení chladu. Pomocí tlačítka **STOP (9)** působení zastavíte.


## NANO HYDRATACE



Vysoce účinná metoda pro okamžitou hydrataci pleti. Násobně zvyšuje účinnost klasických hydratačních přípravků na vodní bázi. Během několika sekund poskytnete vaší pleti dostatečnou vlhkost. Použití je vhodné pro všechny typy pleti. Kosmetický přístroj pracuje s atomizérem nové generace. Tekutina putuje ze zásobníku přímo do atomizéru, který štěpí molekuly roztoku na velikost nanočástic. Atomizér promění hydratační přípravek na ionizovanou nano mlhu. Nově vzniklé částičky kapaliny mají menší velikost než samotný kožní pór. Hydratační přípravek tak snadno pronikne přes horní vrstvu pleti. Dochází k okamžité hydrataci pleti s maximálním účinkem!

- Můžete použít jakýkoliv roztok, který není založen na olejové bázi.
- Atomizér nové generace vytvoří nano mlhu.
- Molekuly roztoku pronikají přes kožní póry přímo do pokožky.
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund.

# NANO HYDRATACE

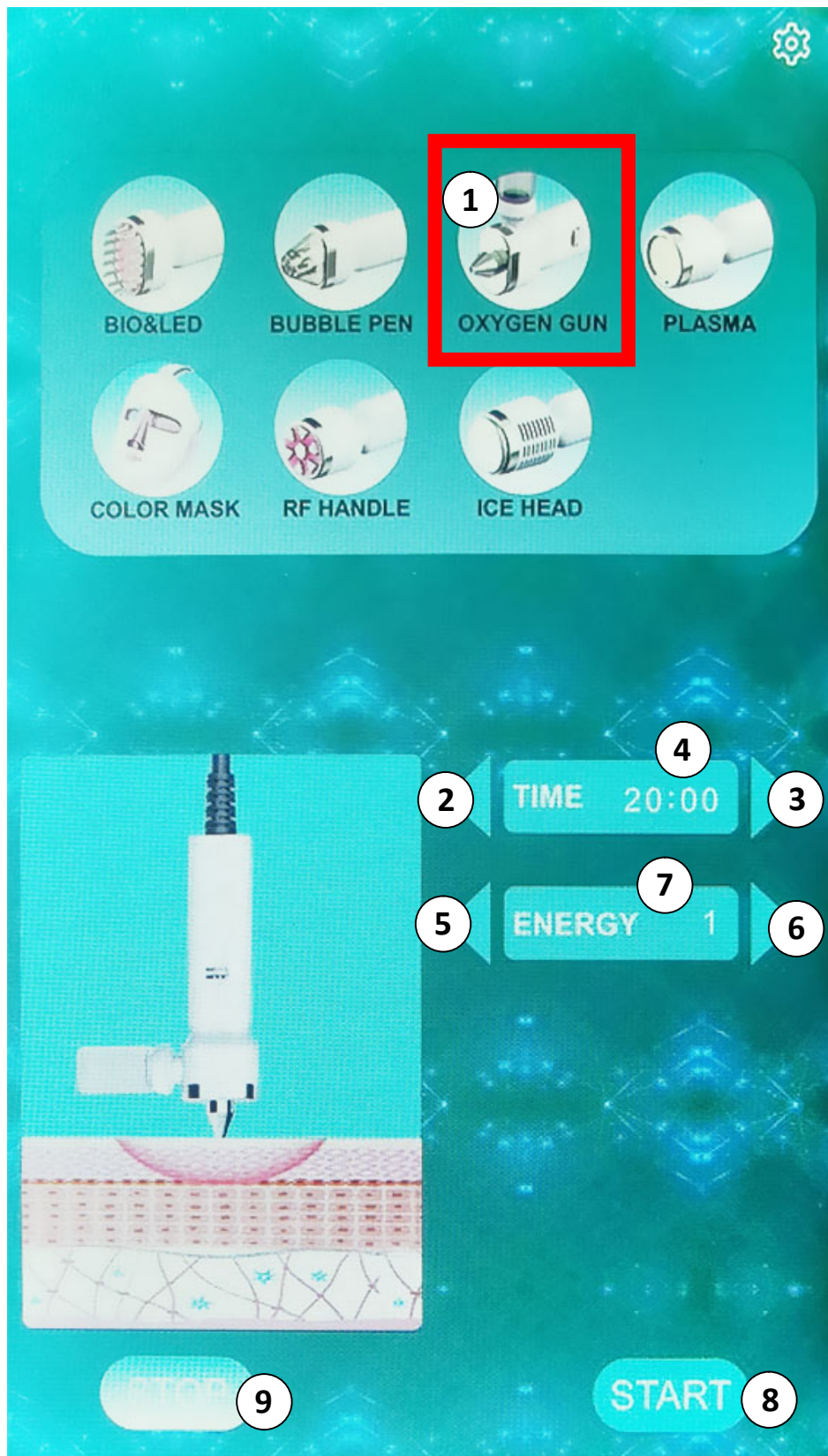

## NANO HYDRATACE

- Pro použití funkce nano hydratace stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení nano hydratace. K dispozici jsou 3 úrovně nastavení výkonu: **1, 2, 3**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítka **START (8)** aktivujete působení nano mlhy. Pomocí tlačítka **STOP (9)** působení zastavíte.
- Pomocí otočného tlačítka na boční straně aplikační hlavice si nastavíte šířku kuželovitého tvaru nano mlhy, kterou generuje atomizér.
- Využijte skleněnou ampulku, která je součástí balení. Naplňte ji tekutinou dle vaší volby. Ideální je destilovaná nebo kojenecká voda. Pokud se rozhodnete tekutinu naředit, nikdy by se neměla změnit celková hustota tekutiny. Mohlo by dojít k ucpání atomizéru.
- Ampulku instalujte do aplikační hlavice. Vždy držte ampulku hrdlem nahoru. Při instalaci otočte aplikační hlavici vzhůru nohama, aby mohlo dojít k pevnému spojení hlavice s ampulkou. Gumová část aplikační hlavice by měla být v plném kontaktu s ampulkou. Vznikne tak maximální těsnost.
- Při použití držte vždy aplikační hlavici tak, aby dno ampulky mířilo směrem nahoru.
- Aplikátor hlavice by neměl být příliš blízko, ale ani daleko od pleti.
- Při delším použití hlavice s nano hydratací může sražená tekutina na pleti stékat. Otřete případně pomocí hadříku nebo ručníku.
- Pokud na konci použití zbývá v ampulce tekutina, ampulku vyjměte z aplikátoru tak, že dno ampulky směřuje dolů.



## FOTONOVÁ TERAPIE



Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického aplikace velmi populární. Aplikace fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje. Během používání je maximálně chráněn váš zrak. Obličejová maska slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové.

## **TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM**

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



## **REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI**

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

## **BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE**

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetické aplikace na pleť.

# **FOTONOVÁ TERAPIE**

## **Červené světlo**

Stimuluje podporu tvorby kolagenu. Kolagen je základní bílkovina, která slouží k obnově poškozených a starých tkání. Zlepšení kvality pleti a zmenšení pórů.

## **Modré světlo**

Bakterie v akné obsahují porfyriny. Díky vysoké afinitě s vlnovou délkou je modré světlo schopno porfyriny ničit. Kromě toho má modré světlo zklidňující účinek, který je velmi účinný při přecitlivělosti pleti.

## **Fialové světlo**

Kombinuje červené a modré světlo, které má dvě účinné fototerapie. Zejména má dobrý účinek na potlačení příznaků akné.

## **Žluté světlo**

Má speciální vlnovou délku 590nm. Podporuje absorbování kosmetických přípravků. Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu. Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti. Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu. Napomáhá zpomalovat stárnutí kůže.

## **Zelené světlo**

Zelené světlo napomáhá vyrovnat barevný pigment a redukovat jemné vrásky. Urychluje proces hojení ran. Zesvětluje pleť.

## **Azurové světlo**


Zvyšuje buněčnou energii a má příznivé účinky pro celkový metabolismus kožní tkáně.

## **Laserové světlo**

Dokáže proniknout hluboko do pokožky. Urychluje metabolismus tkání. Rozkládá barevné skvrny. Zlepšuje vzhled jemných vrásek a stárnutí pleti.



# FOTONOVÁ TERAPIE

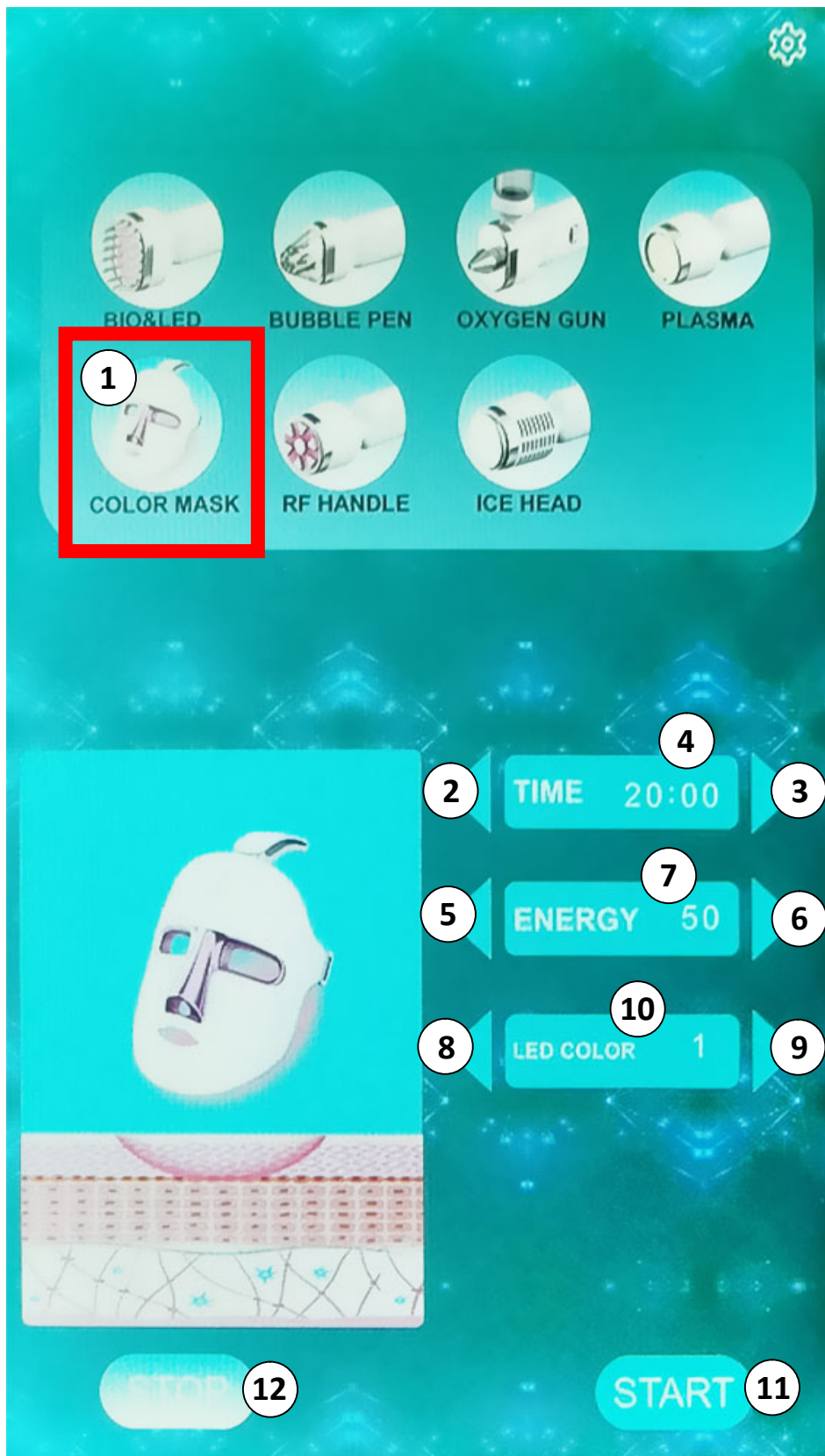

## FOTONOVÁ TERAPIE

- Pro použití funkce masky s fotonovým světlem stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení fotonového světla. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítek **(8)** a **(9)** si můžete nastavit barvu fotonového světla. K dispozici jsou tyto barvy: červené světlo, modré světlo, fialové světlo, žluté světlo, zelené světlo, azurové světlo, laserové světlo. Aktuální číslo nastavené barvy fotonového světla je zobrazeno na displeji **(10)**.
- Pomocí tlačítka **START (11)** činnost masky s fotonovým světlem aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (12)** zastavíte.
- Vždy masku nejprve nasadíte na obličej a poté aktivujete světlo fotonové terapie.

## FOTONOVÁ TERAPIE - POZNÁMKY POUŽITÍ

- Před použitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte. Ideální je použití hlavice s vodní dermabrazí.
- V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
- Přístroj si nasadíte na hlavu tak, aby vám to bylo pohodlné.
- Pokud to situace vyžaduje, můžete oblast očí překrýt kosmetickými tampónky nebo ubrousky, aby vaše oči nevnímaly okolní světlo a měli jste naprostý komfort použití.
- Abyste měli při zavřených očích úplnou tmou, využijte textilních brýlí, které jsou součástí balení.
- Průměrná délka použití masky se pohybuje od 15 do 30 minut.

## POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost aplikace na pleť pomocí všech technologií umožňuje aplikaci všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

## METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

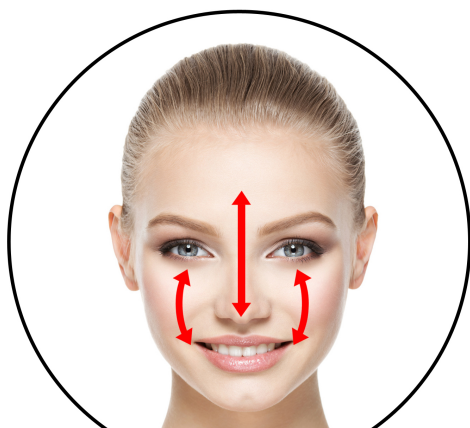

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech




**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Se zásobníky na vodu pracujte vždy, když je přístroj vypnutý. Používejte destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat žádné mechanické částice. Vodní kámen by způsobil zanesení systému cirkulace vody a poškození přístroje. Vizuálně zkontrolujte, zda není odpadní nádoba příliš plná. Zásobníky se instalují pomocí závitu. Utahujte s citem, aby nedošlo ke stržení závitu. S vodou vždy manipulujte mimo dosah přístroje, aby se v případě nehody nedošlo k zasažení přístroje vodou.
2. Do ampulky v aplikační hlavici s funkcí nano hydratace můžete k vodě přimíchat případný koncentrát, který obsahuje vitamíny pro výživu pleti libovolné značky (sérum, kyselina hyaluronová, vitamíny v tekutém stavu). Použijte pouze malé množství. Přidaný přípravek nesmí nikdy změnit hustotu vody.
3. Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na zadní straně hlavní jednotky do polohy 1. Displej přístroje se rozsvítí. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Můžete začít s přístrojem pracovat.
4. Nyní můžete všechny funkce přístroje ovládat pomocí dotykového barevného displeje. Každou aplikační hlavici můžete zapnout nebo vypnout pomocí příslušného symbolu na displeji. Vždy můžete používat pouze jednu funkci. Není možné mít současně spuštěných více technologií. Výkon nastavujte postupně.
5. U každé aplikační hlavice se světelnou maskou si můžete nastavit časovač.
6. Při nastavení parametrů pro aplikační hlavici s vodní dermabrazí je třeba dostat do rovnováhy množství vody, které se načerpává do aplikační hlavice a výkon působení vakua. Vody by nemělo být příliš málo, ale zároveň ne příliš mnoho, aby nestékala po pleti.
7. Před dalším klientem kontaktní části aplikační hlavice očistěte. Použijte v ideálním případě roztok s obsahem alkoholu. Zabráníte tak přenosu bakterií.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na zadní straně do polohy 0.
9. Vždy věnujte zvýšenou pozornost, aby nebyly zakryty průduchy větrání přístroje na zadní straně přístroje.
- 10. V rámci udržení co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnuté chlazení přístroje má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.**

## ČAS APLIKACE

Délku aplikace pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka aplikace pleti pomocí technologií přístroje výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití mělo aplikace trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně sledovat, jakým způsobem pleť reaguje na působení dané technologie a podle toho upravit úroveň nastavení výkonu tak, aby bylo pro uživatele aplikace komfortní. Délka aplikace by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlásečnicových vrásek kolem očí.

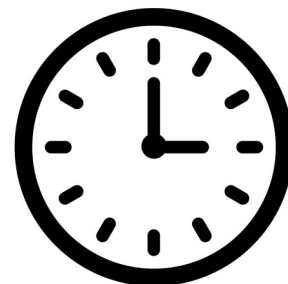

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud je přístroj používán pro komerční účely, je třeba po každém použití dezinfikovat povrch aplikační hlavice, který je v kontaktu s pletí uživatele. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do vnitřního prostoru aplikátoru. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost. Pravidelně kontrolujte stav tekutiny v odpadní nádobce. Obsah průběžně vyprazdňujte. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, všechny zásobníky na vodu vyprázdněte.



## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?**

Následné projevy na pleti po aplikaci radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po aplikaci je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvasivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba pleť průběžně takto stimulovat (v průměru 3x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelné aplikace pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi aplikacemi stejné partie doporučujeme minimálně týden.



### **Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?**

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu.

### **Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních a estetických přístrojů. Přístroj neléčí jakékoliv kožní onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, která významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

### **Představuje aplikace na pleti pomocí estetického přístroje nějaké následné omezení klienta?**

Po dokončení použití na pleti může pokožka mírně zarudnout. Tento efekt je způsoben stimulací krevního oběhu a lymfatického systému obličeje. Zbarvení v rádech minut (až hodin v případě intenzity pleťové aplikace) opadne a pokožka se dostane do normálu. Aplikace pleti vodní dermabrazí se někdy označuje jako procedura na obědovou pauzu. Společensky vás nebude následně výrazně limitovat.

### **Mohu při aplikaci pleti přístrojem cítit na pleti nepříjemné pocity až bolest?**

Každá z technologií působí na pleť jiným způsobem. Každou aplikační hlavici můžeme vnímat jinak. Při použití radiofrekvence je jako průvodní jev teplo. Při vodní dermabrazii můžete na pleti vnímat působení podtlaku a cirkulaci vody. Plasmové toky můžete na pleti cítit jako mírné štípání. Při aplikaci pleti elektroforézou mírné brnění. U většiny těchto technologií je možné nastavit výkon. Hlavním smyslem nastavení výkonu je pocit vjemu na pleti. Daná technologie musí být na pleti cítit, ale zároveň nesmí její působení překročit míru snesitelnosti.

### **Je možné do zásobníku hydratační pistole přimíchat nějaké další látky a vonné esence?**

Ano, ale pouze tak, aby se nezměnila hustota tekutiny. Pokud bude tekutina příliš hustá nebo se v ní budou nacházet mechanické částice, mohlo by dojít k ucpání atomizéru hydratační pistole.

**Použití obdobného přístroje je pro mě něco absolutně nového. Jak mám ze začátku přistupovat k použití přístroje?**

Podrobně si prostudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Nikam nespěchejte. Začněte s aplikací pleti pomalu. Působení jednotlivých aplikátorů si postupně vyzkoušejte. Pohybujte se na různých místech obličeje. Vnímejte, jak se na konkrétních místech projevují jednotlivé technologie. Vyzkoušejte pohyb hlavy. „Vytvářejte“ na pleti čárky, kolečka. Osvojíte si tak, jaká technika pohybu je pro vaši pleť optimální. Měňte postupně tempo pohybu a rychlost. Vyzkoušejte si se zvýšenou opatrností další stupně výkonu.

**Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?**

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu (aplikační hlavice s radiofrekvencí). Aplikační hlavici dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

**Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

**Je přístroj vodotěsný?**

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody. Neplatí pro vyměnitelné aplikátory vodní dermabraze a ampulku se zásobníkem na tekutinu pro hydratační pistoli. Neplatí také pro zásobník tekutiny a odpadní nádobku. Pokud je chcete propláchnout pod proudem tekoucí vody, vždy je nezbytně nutné je z přístroje vyjmout.



737 196 160



mh@santadria.cz



shop.beautyrelax.cz



www.beautyrelax.cz



facebook.com/BeautyRelaxEquipment

**Martin Hrbek**  
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454



## PÁR VĚT ZÁVĚREM

Aby bylo možné si v oblasti estetiky udržet klienty, je třeba, aby jim byly nabízeny služby, které odráží poslední trendy. Přístrojová technika tak musí být na špičkové profesionální úrovni s moderními technologiemi. ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE je multifunkční zařízení, které nabízí až 7 různých technologií přístrojové aplikace pleti. Všechny funkce se snadno ovládají pomocí velkého barevného dotykového displeje. Aplikační hlavice jsou extrémně lehké. Pro vaše ruce budou představovat při každodenním použití minimální zátěž. Všechny technologie garantují vysokou efektivitu použití s maximální šetrností k pleti. O kvalitní a hloubkové vyčištění pleti se postará vodní dermabraze a technologie plasmovými toky. Kosmetické přípravky zapracujete přes povrch pleti metodou mezoterapie technologií elektroforézy. Pro výživu použijete nano hydratační pistoli a obličejovou masku s fotonovou terapií, která pokryje celou plochu obličeje. V závěru aplikace pleti dokonale zklidní tepelná terapie chladem. Estetický přístroj ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE vám prostřednictvím aplikačních hlavic zajistí nejen kvalitní pleťovou péči, ale díky pořizovací ceně rychlou návratnost vaší investice. Technika, na kterou se můžete vždy spolehnout. To je přístroj ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE!

Martin Hrbek

[www.beautyrelax.cz](http://www.beautyrelax.cz)




## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE

 Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)



beautyrelax 

   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**  
**(420) 737 196 160**

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

**Multifunkční kosmetický přístroj**

**BeautyRelax ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2932**

EAN **8594166122079**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015**

**EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019**

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti.

Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.1.2023

Martin Hrbek, jednatel