

# NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj  
**BeautyRelax BR-3090**

**ANTIAGE OXYGEN**

**STUDIO PERFORMANCE**



## OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	6
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	6
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	7
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	8
METODY REDUKCE VRÁSEK	8
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	9
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	12
VODNÍ DERMABRAZE	13
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE	14
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE	15
VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ	16
TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY	17
PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU	18
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	19
TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY POPIS DISPLEJE	20
PLAZMOVÉ TOKY - POPIS HLAVICE	21
NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT	22
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE	22
OPTIMÁLNÍ POSTUP APLIKACE PLASMOU	22
PLAZMOVÉ TOKY - POSTUP POUŽITÍ	23
RADIOFREKVENCE	24
RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE	25
RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE	26
RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ	27

## OBSAH:

POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE	27
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	28
ULTRAZVUK	29
ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS DISPLEJE	29
ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS HLAVICE	30
ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ	31
EMS MIKROPULZY	32
EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE	32
EMS MIKROPULZY - POSTUP POUŽITÍ	33
NANO HYDRATAČE	34
NANO HYDRATAČE - POPIS DISPLEJE	35
NANO HYDRATAČE - POPIS APLIKÁTORU	36
NANO HYDRATAČE - POSTUP POUŽITÍ	37
METODA POUŽITÍ NA OBLIČEJI A KRK	38
PŮSOBENÍ CHLADU	39
PŮSOBENÍ CHLADU - POPIS DISPLEJE	39
PŮSOBENÍ CHLADU - POSTUP POUŽITÍ	40
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	41
ČAS APLIKACE	42
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	42
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	43
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	43
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	45
CERTIFIKACE	45
EU DISTRIBUTOR	45
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	46

## SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat. Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro aplikaci pleti **BeautyRelax** pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné dosáhnout vysoké efektivity aplikace pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny tak, aby bylo použití přístroje maximálně uživatelsky přívětivé.

### Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických masážních přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají výrazně zlepšit kondici pleti pomocí různých metod aplikace. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby vydržela náročný provoz při komerčním použití s vysokou frekvencí používání.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní aplikaci. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro zajištění šetrnosti pro vaši pleť. Z hlediska erudice obsluhy přístroje vždy záleží na aktuální platné legislativě v dané zemi použití přístroje. Každý stát může mít stanoven pro konkrétní technologie aplikace pleti jiná pravidla. Vždy je třeba se tímto nařízením řídit a dle toho provoz studia přizpůsobit.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí pro aplikace pleti, umožňuje nastavení intenzity. Pokud používáte přístroj pro komerční účely, vždy nejprve vyzkoušejte účinky každé hlavičky sami na sobě, abyste si udělali lepší představu o tom, jak daná technologie působí na pleť při každé úrovni nastavení výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic není vždy třeba nastavit nejvyšší stupeň výkonu. Výkon je třeba vždy přizpůsobit tak, aby bylo pleťové aplikaci cítit, ale zároveň nepřesáhlo práh bolesti.
- Rozhodně neplatí, čím častěji používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po aplikaci dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

### **Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.  
Tým BeautyRelax.cz



## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte, zejména mřížku ventilátoru.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



## POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavici pro radiofrekvenci.



## KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo aplikace pleti) - neplatí pro kovové předměty v dutině ústní
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství

## POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt

## HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Podpora tvorby kolagenu.
- Remodelace elastických vláken.
- Zvýšení pružnosti pleti.
- Zvýraznění kontur obličeje.
- Vyhlazení výrazných hlubokých vrásek.
- Maximální výživa pleti.
- Okamžitá hydratace pleti.
- Prokrvení a okysličení podkožní tkáně.
- Jemná lymfatická masáž pro redukci otoků obličeje.
- Odstranění velice drobných částecek makeupu, které ulpí v kožních pórech.
- Hlubkový peeling pleti s odstraněním černých teček.
- Uvolnění kožních pórů.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Podpora krevního oběhu.
- Vyrovnání barevného tonusu pleti.
- Mechanická masáž pokožky.
- Potlačení pigmentových skvrn.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Technologie: vodní dermabraze, terapie plasmovými toky, radiofrekvence Twin Ball, ultrazvuk, působení chladu, EMS mikropulzy, nano hydratace
- Velký dotykový barevný displej 7"
- Radiofrekvence: 1MHz
- Teplota: 42°C
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry hlavní jednotky: 40x30x30cm
- Výkon: 200W
- Hmotnost: 12kg

## **OBSAH BALENÍ**

- Aplikační hlavice s vodní dermabrazí 1x
- Aplikační hlavice s plasma terapií 1x
- Aplikační hlavice s radiofrekvencí Twin Ball 1x
- Aplikační hlavice s ultrazvukem 1x
- Aplikační hlavice s působením chladu 1x
- Aplikační hlavice s EMS pulzy 1x
- Aplikační hlavice s nano hydratací 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x
- Prodlužovací napájecí kabel 220V 1x

## PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


## METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

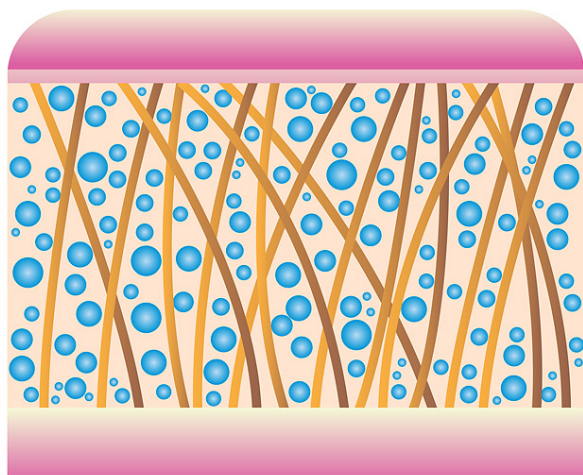

### **VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK**

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU  
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

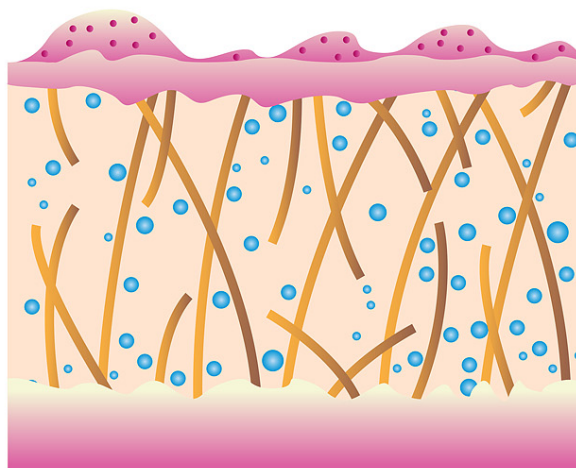

### **POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI**

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU  
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN



## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance je multifunkční přístroj, díky kterému poskytnete svým klientům maximální pleťovou péči na profesionální úrovni se špičkovými okamžitými výsledky. Přístroj je určen do komerčního provozu kosmetického studia nebo estetické kliniky pro aplikaci na obličej, krk a dekolt. Disponuje celou řadou moderních a vysoce účinných technologií z oblasti neinvazivní estetiky. Nahrazuje až 7 různých kosmetických přístrojů. BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance zajistí dokonalé vyčištění pleti, zvýšení pružnosti pleti, lifting pleti, hydrataci pleti, zapracování kosmetických přípravků nebo zklidnění pleti. K dispozici vám bude celá řada technologií: vodní dermabraze, tepelná terapie působení chladu, terapie plasmovými toky, radiofrekvence Twin Ball, ultrazvuk, EMS mikropulzy a nano hydratace. Moderní velký dotykový displej. Moderní design. Moderní technologie. To je přístroj BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance!



## POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. ULTRAZVUK
3. RADIOFREKVENCE TWIN BALL
4. EMS MIKROPULZY
5. NANO HYDRATACE
6. PŮSOBNÍ CHLADU
7. TERAPIE PLASMOVÝMI TOKY
8. SVĚTELNÁ MASKA

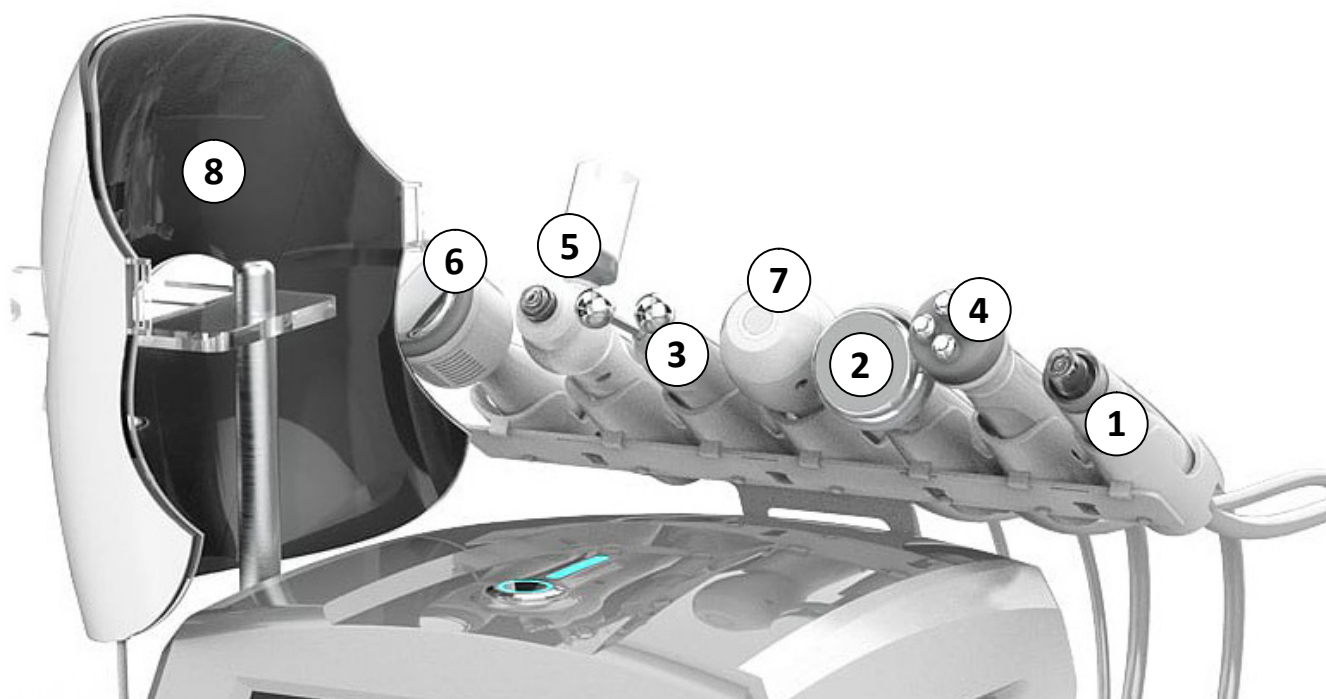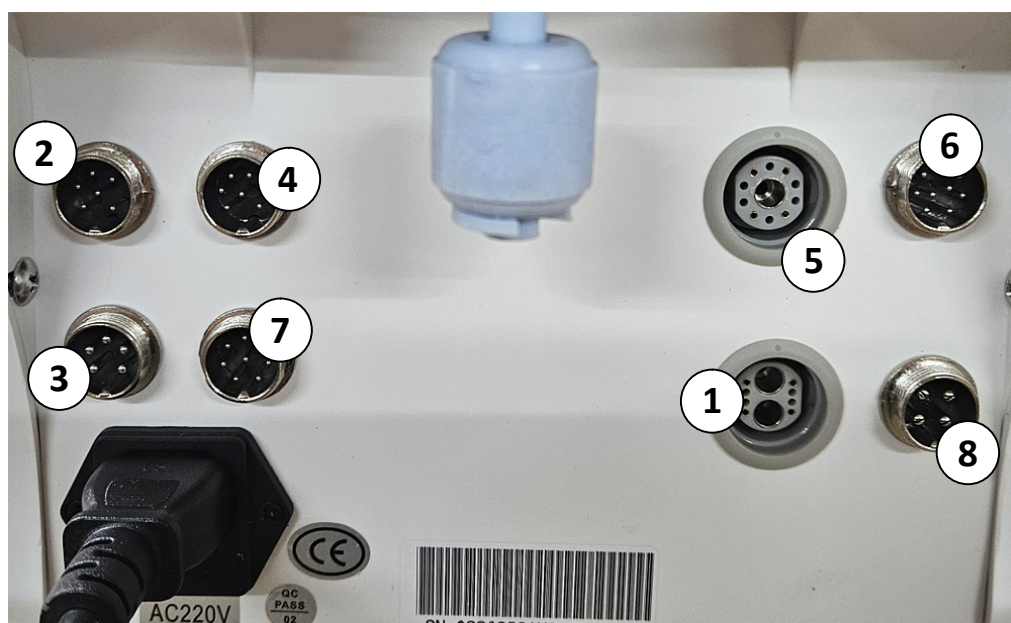



## POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice s působením chladu
2. Aplikační hlavice s nano hydratací
3. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
4. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
5. Aplikační hlavice s ultrazvukem
6. Aplikační hlavice s EMS pulzy
7. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
8. Dotykový displej
9. Tlačítko nastavení množství dávkování vody
10. Tlačítko nastavení intenzity podtlaku
11. Zásobníky na vodu na boční straně přístroje




## INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta/uživatele. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na horní straně přístroje. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Neplatí pro hlavice s vodní dermabrazí a nano hydratací. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utážení  
prstence  
zašroubováním**

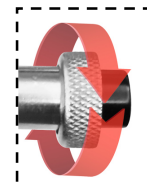



## **VODNÍ DERMABRAZE**

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby plynule dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pletí nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny. K dispozici jsou vyměnitelné aplikátory různých průměrů pro použití na velké a malé plochy.


### **Systém vakuového nasávání**

Estetický přístroj BeautyRelax pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupínků napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, černé tečky a nevzhledné bílé čepičky. Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Estetický přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

### **Systém vodní cirkulace**

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby pravidelně dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádržky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pletí nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny.


## VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE

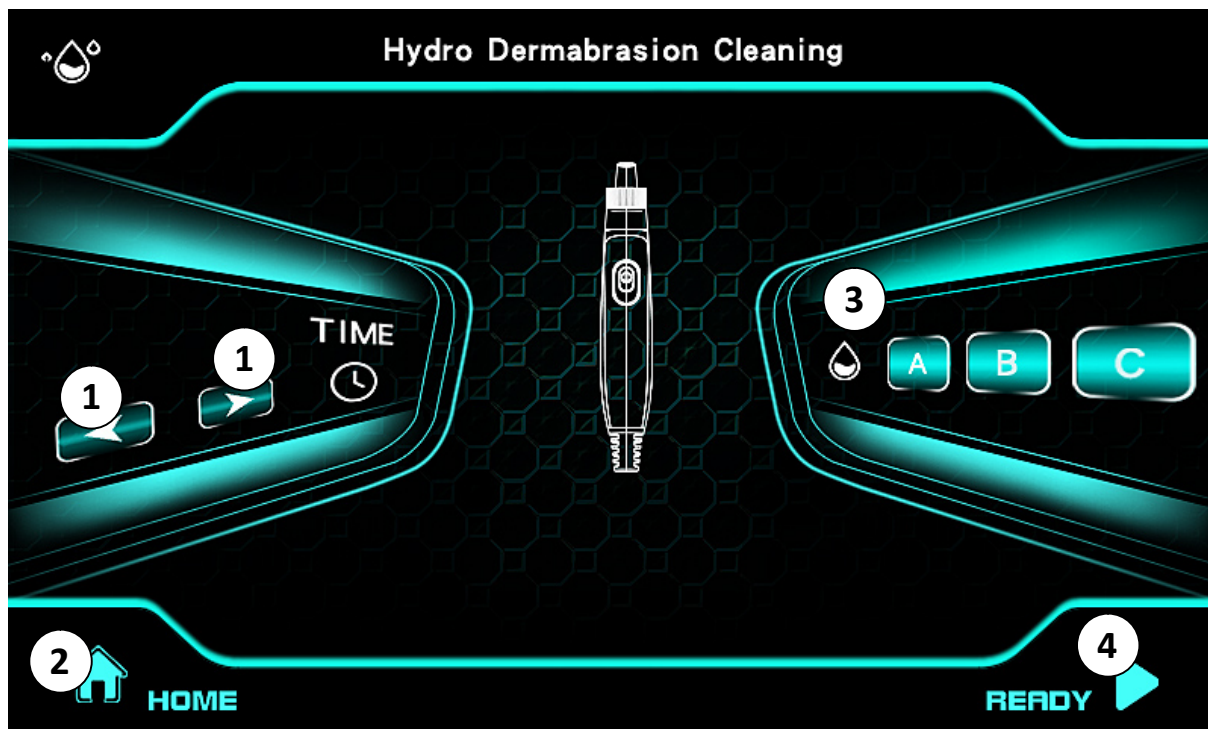

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *PŘEPNUTÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU (A-1, B-2, C-3)*
4. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

## VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE

1. VYMĚNITELNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE
2. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
3. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

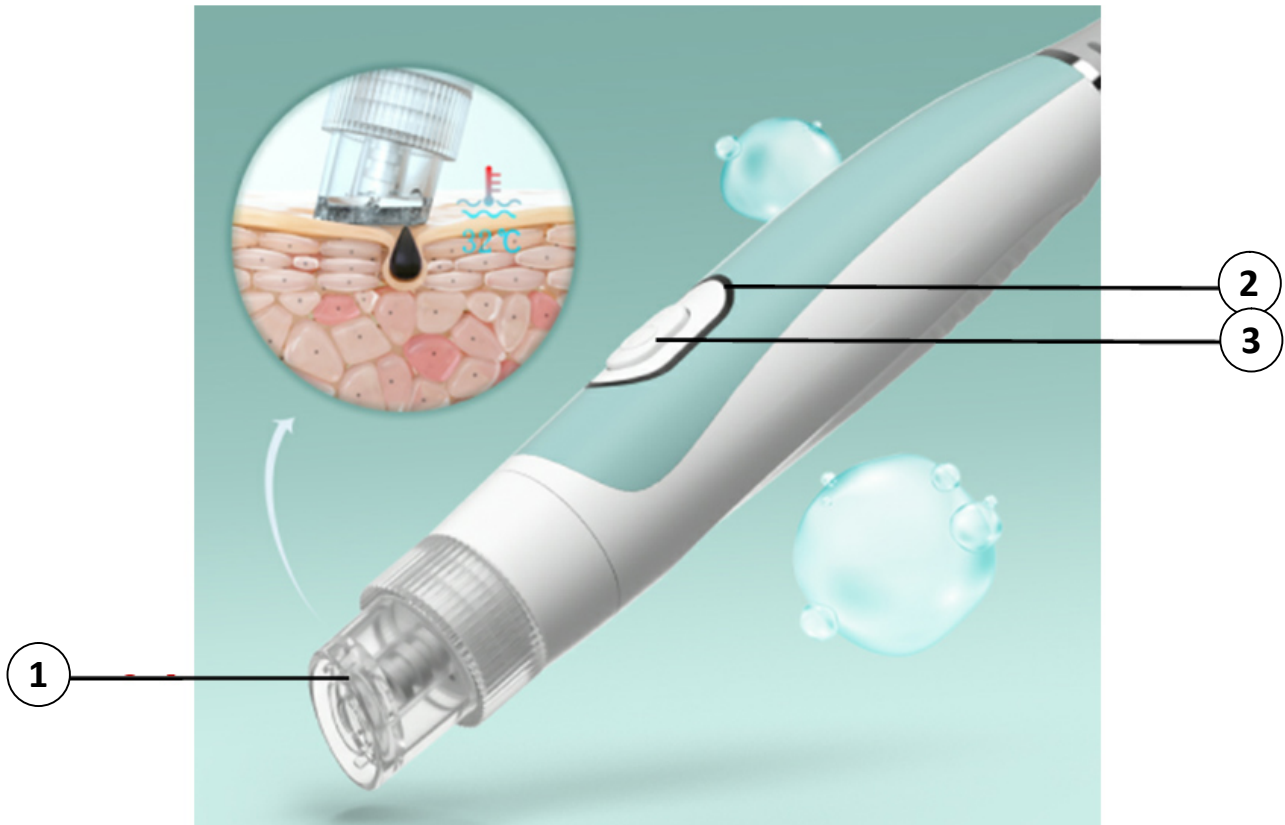

## VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte příslušné tlačítko v menu přístroje.
- Zásobníky na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje aplikace části pleti a reliéfu povrchu pokožky.
- V menu funkce vodní dermabraze si můžete nastavit čas aplikace pomocí šipek. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **READY**. Stejným tlačítkem můžete činnost přístroje přerušit. Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Pomocí pravého otočného tlačítka si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání.
- Pomocí levého otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.



- Hlavici se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat zásobníky na vodu. Na pravé straně přístroje jsou integrované 3 zásobníky. Pomocí tlačítka na displeji si můžete přepínat mezi jednotlivými zásobníky (A-1, B-2, C-3). Zásobníky na tekutinu musí být pro správné fungování systému dostatečně naplněny. Odpadní nádobku na zadní straně přístroje pravidelně vyprazdňujte.
- **Množství vody (pomocí otočného tlačítka na levé straně)**, které je do aplikační hlavice přečerpáváno. Nastavte si takovou hodnotu, která bude poskytovat dostatečné množství tekutiny. Na druhé straně bude mít hlavice dostatečný výkon pro plynulé odsávání tekutiny. V průběhu práce s aplikační hlavici by neměla tekutina příliš stékat po povrchu pleti.
- **Síla podtlaku (nastavení tlačítka na displeji na pravé straně)**, která se generuje v aplikační hlavici. Pohyb aplikační hlavice po pleti by měl být intenzivní. Na druhé straně by neměl být příliš silný, což by bránilo plynulému pohybu aplikátoru po pleti. Sílu podtlaku by měla vždy korespondovat s množstvím přečerpávané tekutiny.
- Pomocí aplikační hlavice se vždy snažte pokrýt celou plochu obličeje. Na částech pleti se zvýšenou citlivostí upravte výkon působení vakua. Po celou dobu použití by vám měla být aplikace příjemná. Není přesně stanoven čas použití. Čas je v přímé úměře s tím, jak detailně se potřebujete na vyčištění pleti zaměřit.
- Mějte na paměti, že působením vakua může pokožka zarudnout. Čím větší sílu vakuové terapie použijete, tím může být zarudnutí pleti více intenzivní.

## **TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY**


Jak naše tělo stárne, mění se vlastnosti a celkový vzhled pleti. Epidermis se v průběhu času ztenčuje. Pigmentové skvrny jsou viditelnější. Produkce kolagenu zpomaluje. Dochází ke snížení pružnosti pleti. Kontury obličeje ochabují. Vrásky se prohlubují a stávají se viditelnější. Technologie plasmového toku s ozonem představuje skutečně funkční řešení, jak průběh těchto procesů zvrátit.

Plasmový tok s ozonem přistupuje k aplikaci na pleť z opačného konce. Většina technologií pro kosmetická aplikace řeší až následek. Tvorba černých teček jako následek zanedbání čištění pleti. Eliminace vrásek jako následek působení stárnutí. Ucpané kožní póry jako následek zvýšeného výskytu mastnoty pleti. Aplikace plasmou s ozonem funguje jako prevence vzniku nežádoucích kožních defektů.

Keramická plocha aplikátoru generuje stejnosměrný proud s vysokofrekvenčním napětím. Plasmový výboj vzniká mezi keramickým aplikátorem hlavice a pleť. Při výboji jsou využity atomy kyslíku obsažené ve vzduchu. Přiblížením aplikátoru k pleť dochází k plasmovému výboji, který sterilizuje pleť a nekompromisně zlikviduje veškeré bakterie na jejím povrchu. Optimální vzdálenost mezi aplikátorem přístroje a pleť jsou 4 milimetry. Součástí balení jsou dvě vyměnitelné hlavice pro aplikaci větších a menších partií.

# PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU

Výkon plasmového toku je přesně optimalizován, aby působil přes povrch pleti až k vrstvě dermis.

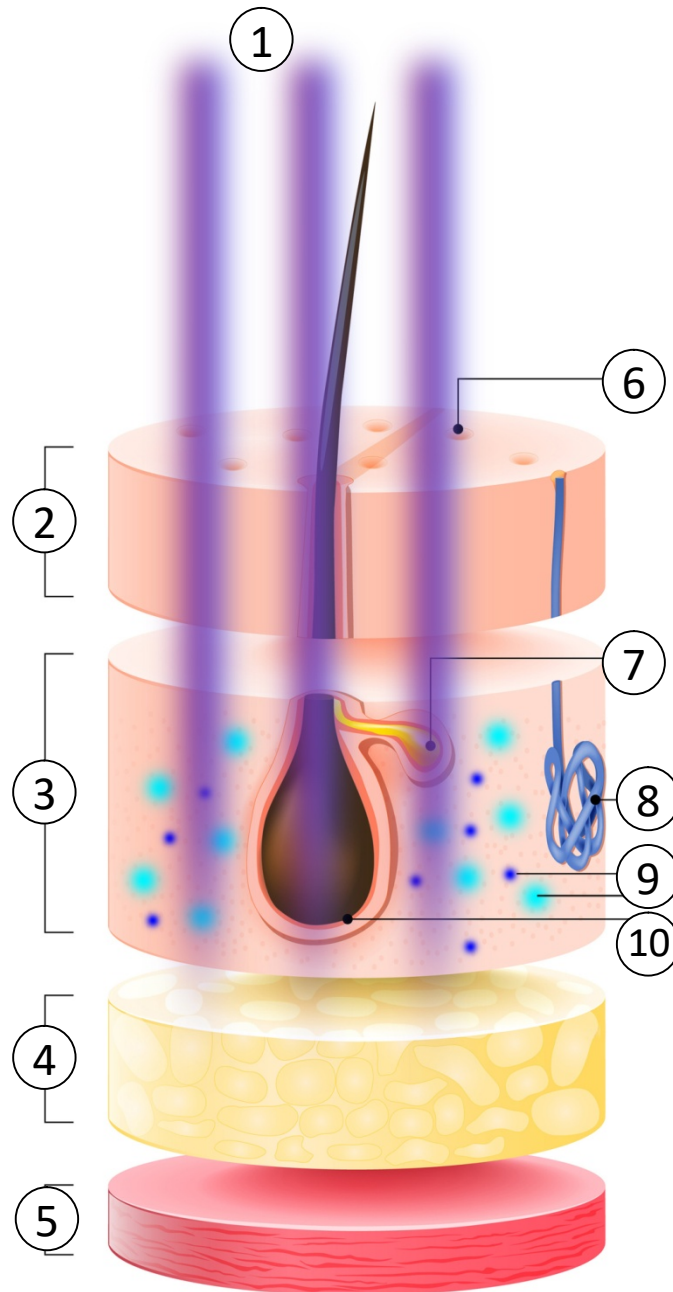

1. Působení plasmového toku

2. Epidermis

3. **Dermis**

4. Tuková tkáň

5. Svalová tkáň

6. Kožní pór

7. Mazová žláza vlasu

8. Potní žláza

9. **Kolagenní a elastická vlákna**

10. Vlasová cibulka



## IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt akné na pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění




Zvýšená mastnota pleti



# TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY

## POPIS DISPLEJE

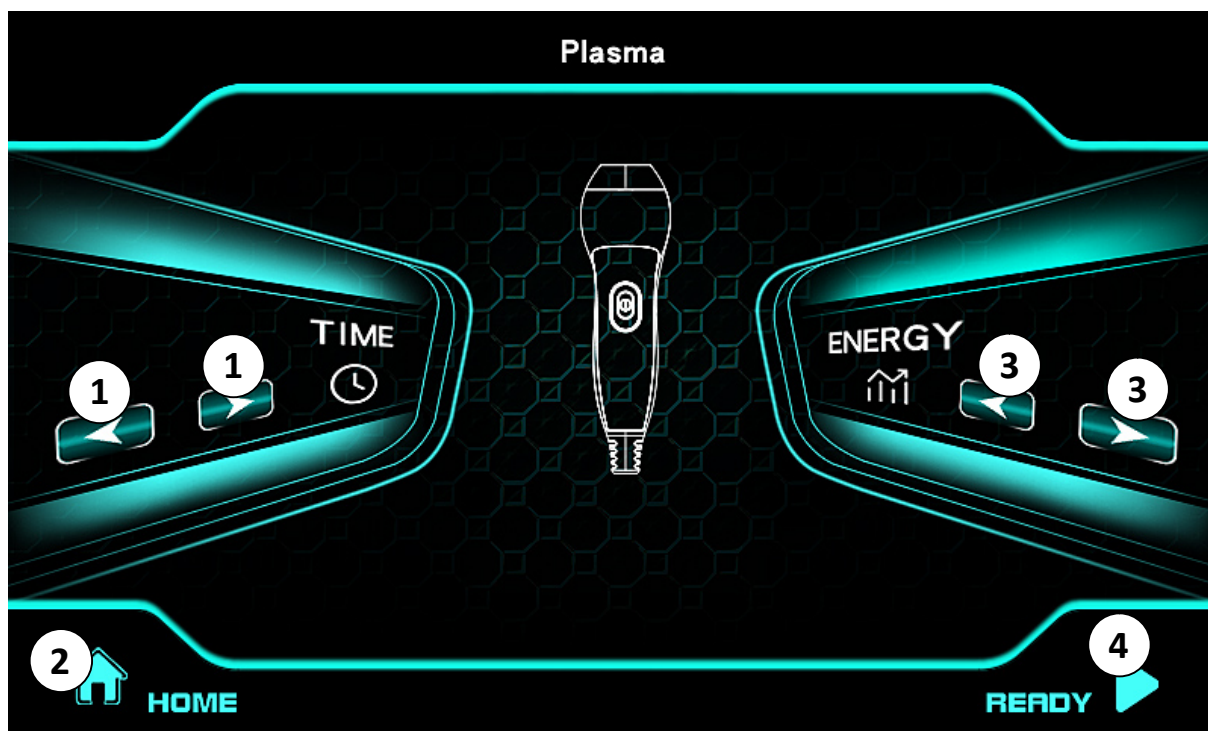


1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *ZMĚNA NASTAVENÍ INTENZITY (SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ)*
4. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*



## PLAZMOVÉ TOKY - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

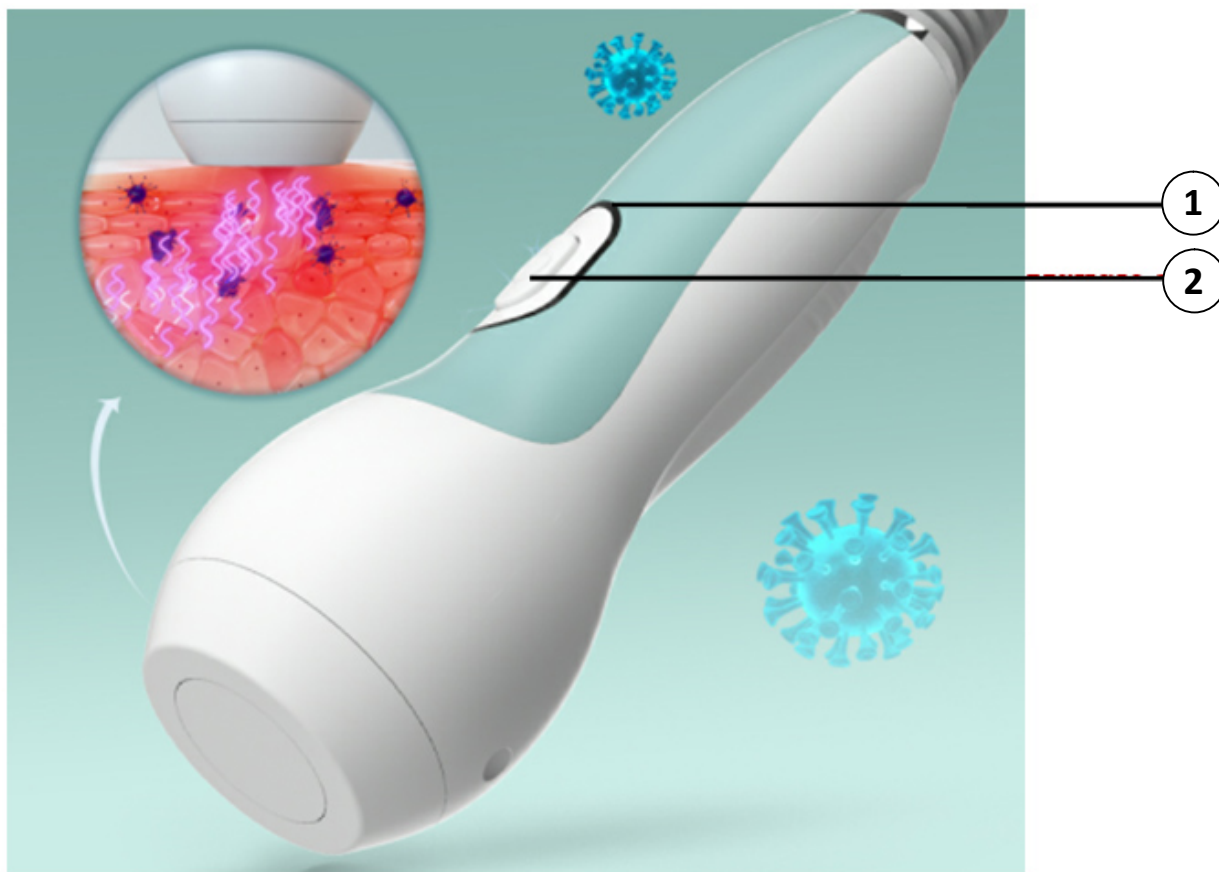

## NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotné aplikaci na pleť přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleť se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití přístroje nebude pokožka negativně reagovat.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE

- Příklad nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy nebo jiným velmi závažným kožním onemocněním.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po aplikaci je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém.
- Po aplikaci obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní a poté můžete aplikovat make-up podle potřeby.

## OPTIMÁLNÍ POSTUP APLIKACE PLASMOU

- Proveďte odličení pleti běžným způsobem. Využít můžete hlavici s vodní dermabrazí. Na pleť by neměly ulpět žádné zbytky makeupu. Jakékoliv nečistoty, které ulpí na pleť, snižují výsledný efekt plazmových toků.
- **Před aplikací na pleť plazmovými toky by měla být pleť dokonale suchá.**
- Sundejte veškeré šperky jako např. náušnice, náhrdelníky, náramky, apod.
- Pleť aplikujte pomocí aplikační hlavice s plazmovými toky.
- Pomalu se pohybujte aplikační hlavici po pleť. Plazmový výboj vznikne v případě, je-li aplikační hlavice v optimální vzdálenosti od pleti. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti od pleti v rozsahu od 1mm do 4mm. Během použití se snažte, aby se keramický aplikátor nacházel co nejméně v přímém kontaktu s pleť.
- Aplikace na pleť je naprosto bezbolestná. Během používání můžete cítit mírné aroma, které doprovází průběh působení plazmového toku.
- Pokožka může v oblasti aplikace mírně zarudnout. Jedná se o přirozený jev. Pleť se v řádu několika minut dostane do normálu.
- Aplikační hlavice se nesmí v průběhu aplikace dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
- V průběhu použití neaplikujte žádný druh kosmetického přípravku.
- Zaměřte se na vybrané části obličeje nebo dekoltu, kde potřebujete účinek přístroje nejvíce.
- Po aplikaci pleti přístrojem použijte jakýkoliv kosmetický přípravek, krém nebo sérum.


## PLAZMOVÉ TOKY - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce plazmových toků zvolte v hlavní nabídce příslušný obrázek aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu plazmových toků.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u šipek změny intenzity.
- Zvolte si takovou intenzitu působení plazmových toků, které vám budou na pleti stále příjemné a nebudou přesahovat hranici bolesti.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikace postupně celou plochu obličeje, krku nebo dekoltu. Na velmi citlivých oblastech obličeje, kde je velmi vysoká citlivost upravte úroveň výkonu tak, aby vám použití bylo maximálně příjemné.
- Aplikace plazmovými toky trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

## **RADIOFREKVENCE**

Radiofrekvence patří v oblasti estetiky mezi nejúčinnější metodu neinvazivního liftingu pleti. Aplikační hlavice přenáší do pleti radiofrekvenční vlny ve specifické frekvenci. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Přispívá k přirozené tvorbě vlastního kolagenu. V průběhu aplikace je možné na pleti cítit příjemné teplo. Maximální možné zacílení radiofrekvenční energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Účinné zejména pro aplikaci zralé pleti s výskytem viditelných hlubokých vrásek. Možnost plynulého dávkování výkonu pro aplikaci pleti s různou citlivostí.


## RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE

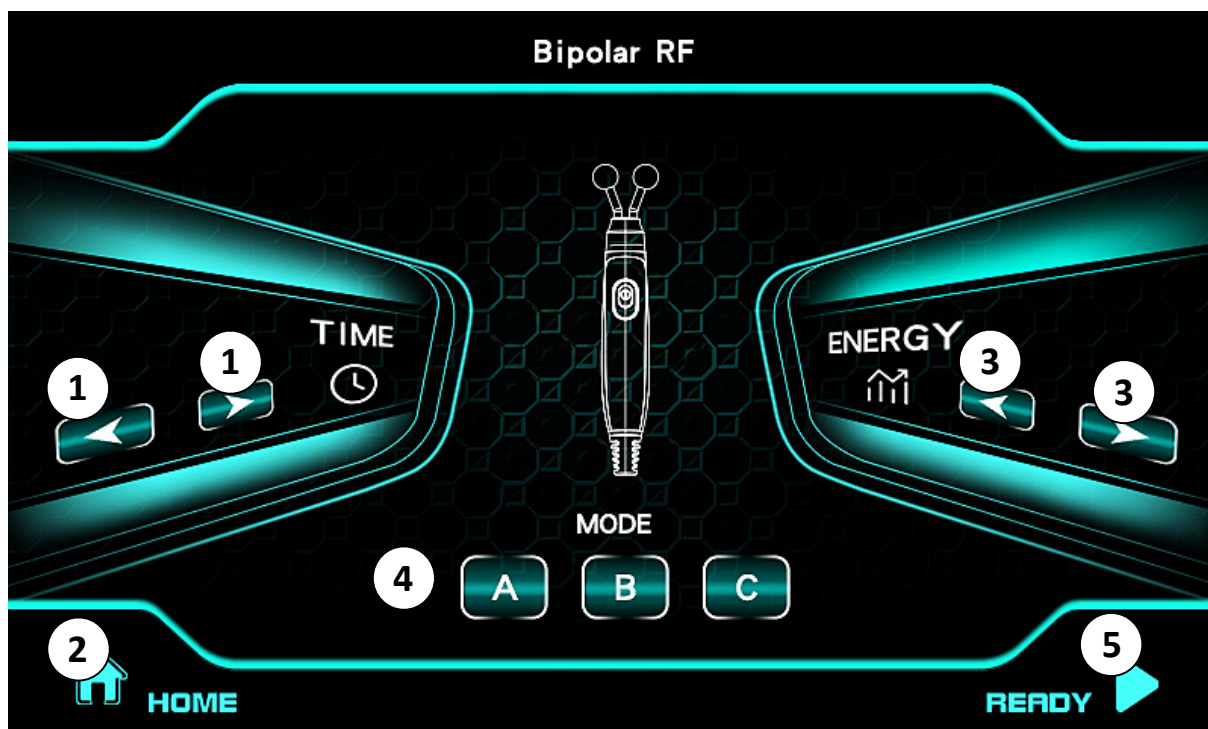

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU RADIOFREKVENCE (A,B,C)*
5. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

## RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

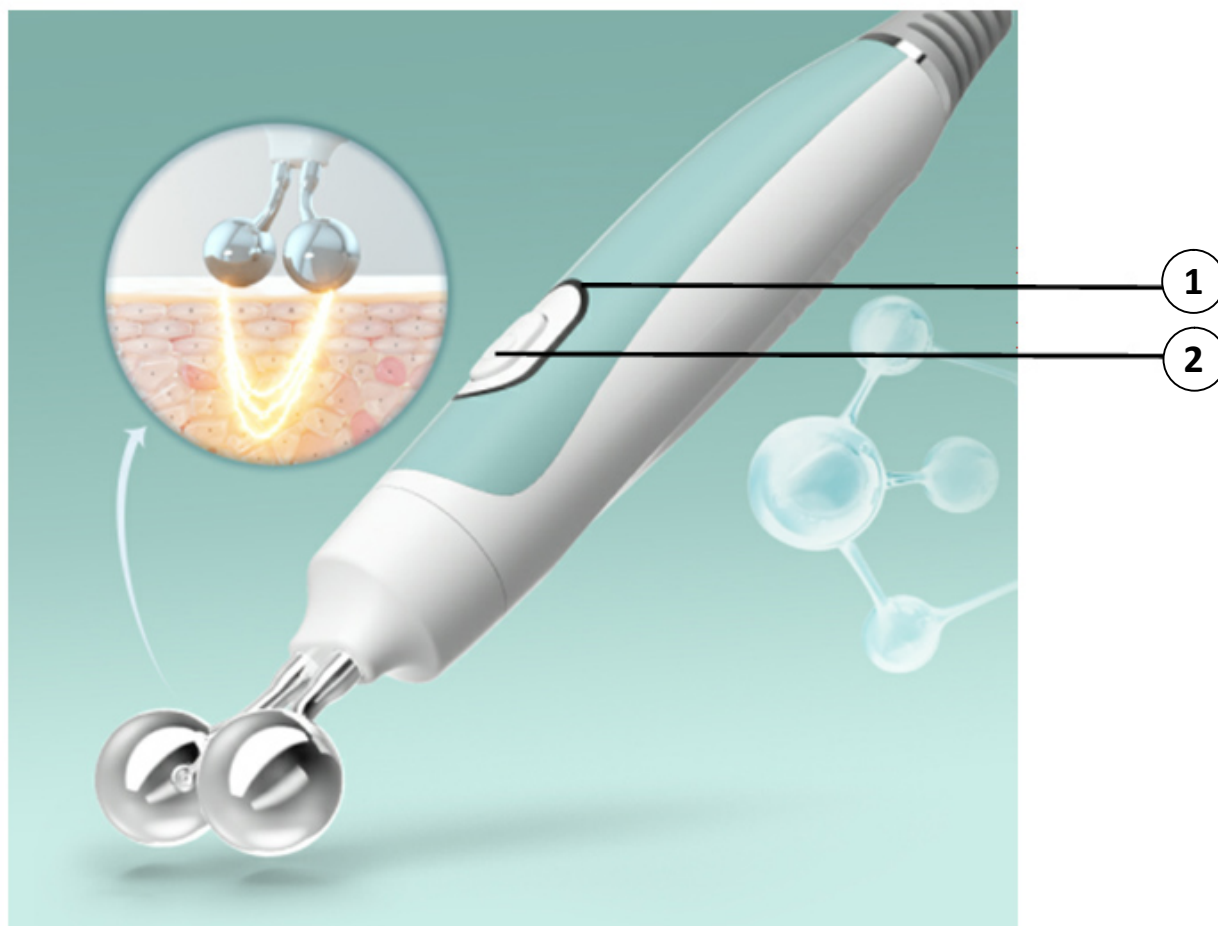

## RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce radiofrekvence zvolte v hlavní nabídce obrázek příslušné aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u tlačítek změny intenzity.
- Pomocí tlačítek **A B C** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 3 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C**. Každý mód má specifický režim fungování radiofrekvence. Na výběr je stále působení radiofrekvenčních vln nebo přerušované.
- Zvolte si takovou intenzitu působení radiofrekvence, která vám bude na pleti stále příjemná.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Délka aplikace by se měla pohybovat v rozsahu od 10 do 12 minut v závislosti na velikosti plochy pleti při použití hlavice.

## POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE

1. Pokud se rozhodnete pro aplikaci přístrojem větší části obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
2. V průběhu použití se snažte, aby byly obě kuličky v kontaktu s pletí.
3. Pokud je vám působení radiofrekvence na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkráťte čas kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
4. **Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již aplikace nepříjemná, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo aplikaci ukončete.
5. **Tip:** Partie použití by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
6. **Doporučení:** Po aplikaci na pleti nevystavujte v délce několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po aplikaci stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

# DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

## 1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

## 2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

## 3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

## 4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

## 5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

## 6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám


- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.



## ULTRAZVUK

Aplikátor z ušlechtilé oceli po přiložení na oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Intenzivní zapracování kosmetických přípravků do pleti. Mini aplikátor je optimální pro použití na oční okolí. Maxi aplikátor je vhodný pro použití obličeje, krku a dekoltu.


## ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS DISPLEJE

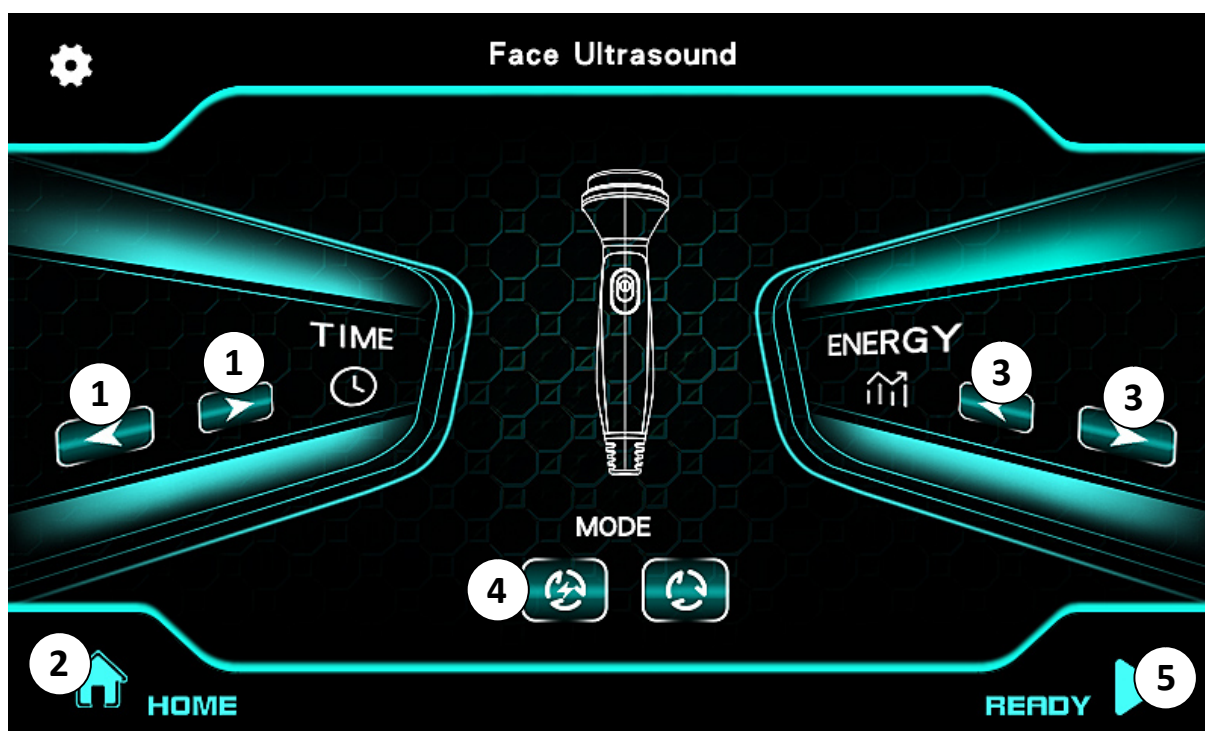

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU ULTRAZVUKU*
5. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

## ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

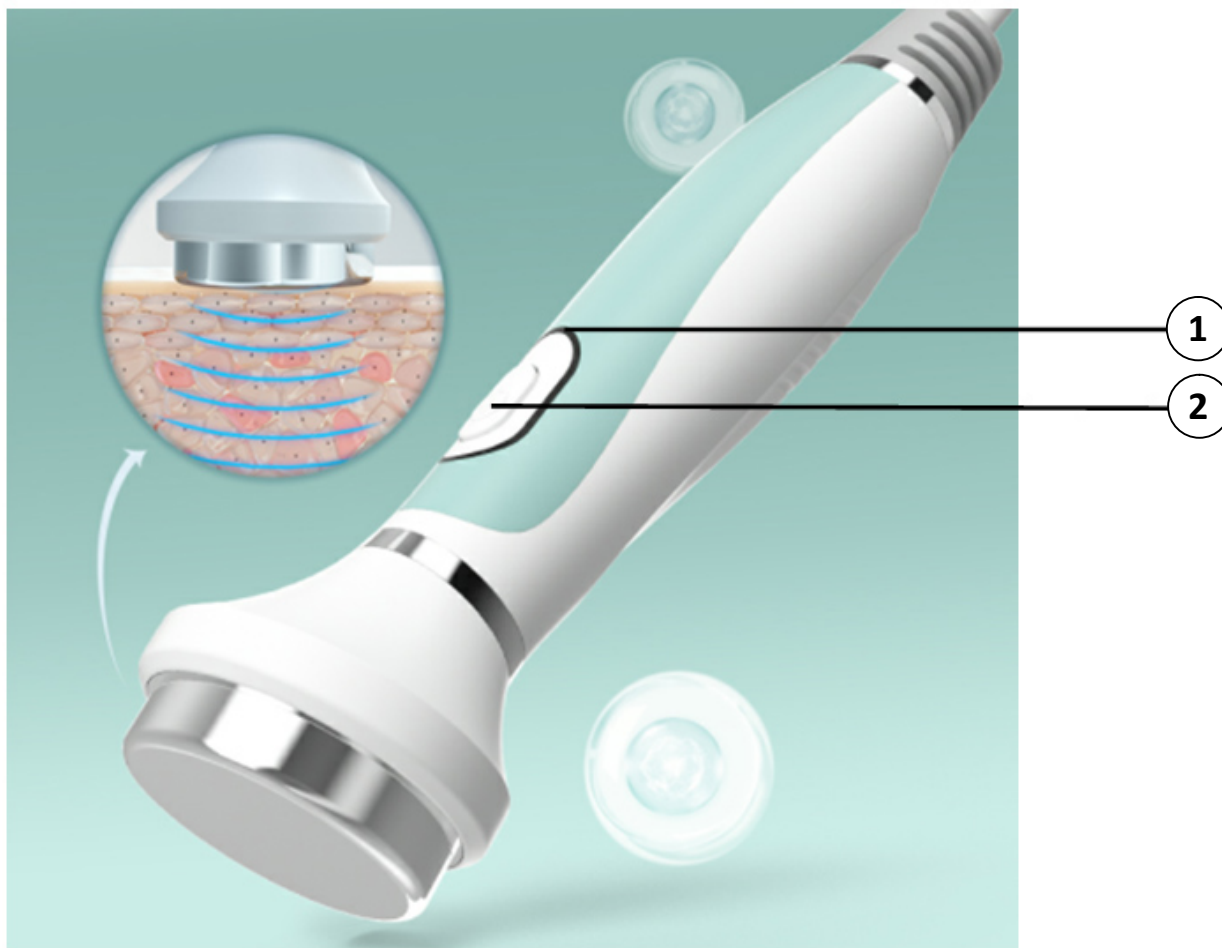


## ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci ultrazvuku snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. Hodnota úrovně intenzity je zobrazena u tlačítek změny intenzity. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení ultrazvuku, ale na druhou stranu je vám použití stále příjemné. Průvodní jev působení ultrazvukových vln je pocit mravenčení.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítka **MODE** si můžete nastavit režim působení ultrazvuku. Kontinuální a přerušovaný. Pro efektivní použití doporučujeme používat kontinuální režim.
- Při použití se vždy snažte, aby byl povrch aplikační hlavice v plném kontaktu s pletí.
- Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pleť důkladně navázat.
- Můžete také samozřejmě použít vámi oblíbený kosmetický krém, gel nebo sérum. Ultrazvukové vlny významným způsobem napomáhají k zapracování účinných látek.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikace ultrazvukem trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

## EMS MIKROPULZY

Technologie EMS, což znamená Elektrická Svalová Stimulace, je metoda využívající elektrické impulzy k stimulaci svalů. Tato technologie může být použita pro různé účely, včetně fyzioterapie, cvičení, rehabilitace a kosmetických aplikací. Princip spočívá v tom, že elektrické signály jsou posílány do obličejových svalů prostřednictvím 4 kontaktních bodů aplikační halvice. Elektrické impulzy napodobují přirozené signály posílané nervovým systémem k aktivaci svalů. Tímto způsobem může být dosaženo kontrakcí svalů, což může být užitečné pro posilování ochablých svalů. V oblasti obličeje technologie EMS napomáhá ke zvýraznění kontur.

## EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE

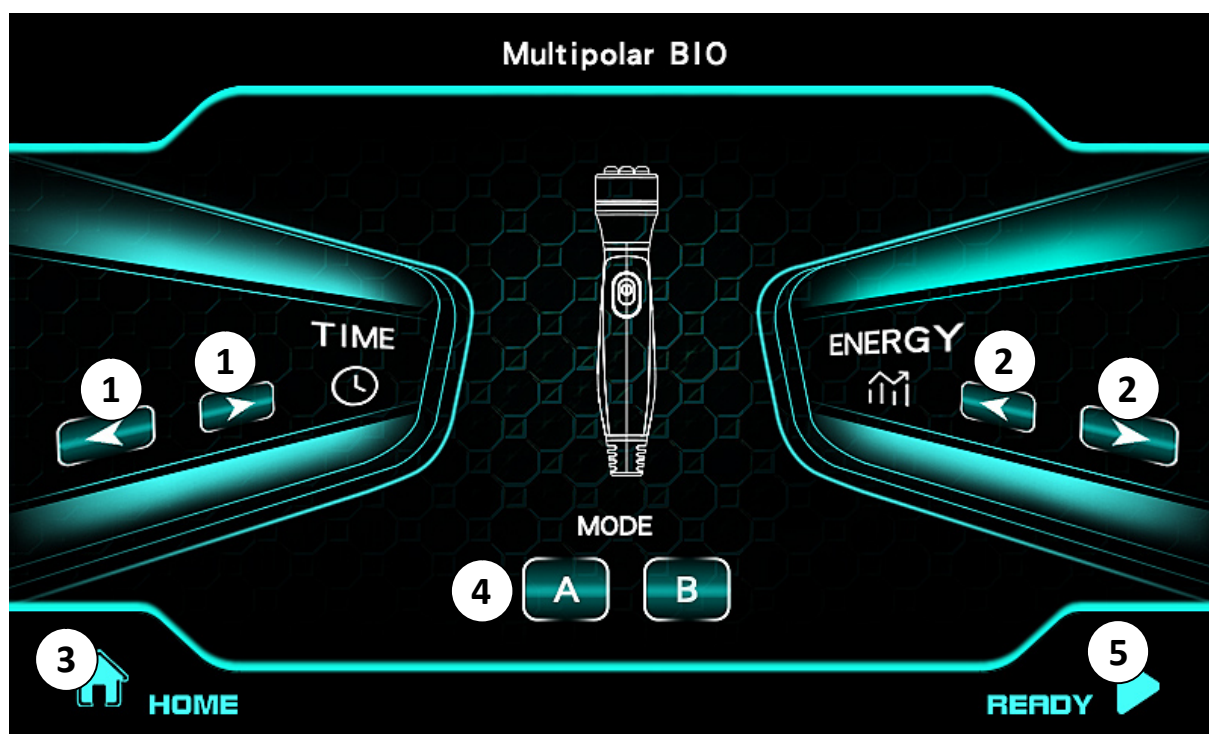

1. NASTAVENÍ ČASU
2. NASTAVENÍ INTENZITY
3. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
4. VOLBA MASÁŽNÍHO PROGRAMU (**MODE**) A,B,C
5. READY - TLAČÍTKO START/STOP

## EMS MIKROPULZY - POSTUP POUŽITÍ


- Funkci EMS pulzů snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Při použití hlavice doporučujeme aplikaci sonogelu nebo jiného kosmetického přípravku, který lubrikuje povrch pokožky. EMS pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit působení intenzity EMS pulzů. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleť příjemná. Aktuálně nastavená intenzita je zobrazena na displeji u tlačítek změny intenzity.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek MODE si můžete nastavit režim působení EMS pulzů. K dispozici jsou 2 programy: **A B**. Každý program má individuální přednastavenou frekvenci působení EMS pulzů. Zvolte si takový program, který vám nejvíce vyhovuje.
- Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, vždy začínejte na nejnižší intenzitě č. 1. Přidávejte postupně. Tak, aby pro vás byla aplikace maximálně komfortní.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Aplikace EMS pulzy trvá v rozsahu od 5 do 10 minut. Při použití hlavice se vždy snažte, aby byly všechny 4 kontaktní kolíčky aplikační hlavice v kontaktu s pleť.

## **NANO HYDRATACE**

Vysoce účinná metoda pro okamžitou hydrataci pleti. Násobně zvyšuje účinnost klasických hydratačních přípravků na vodní bázi. Během několika sekund poskytnete vaší pleti dostatečnou vlhkost. Použití je vhodné pro všechny typy pleti. Kosmetický přístroj pracuje s atomizérem nové generace. Tekutina putuje ze zásobníku přímo do atomizéru, který štěpí molekuly roztoku na velikost nanočástic. Atomizér promění hydratační přípravek na ionizovanou nano mlhu. Nově vzniklé částičky kapaliny mají menší velikost než samotný kožní pór. Hydratační přípravek tak snadno pronikne přes horní vrstvu pleti. Dochází k okamžité hydrataci pleti s maximálním účinkem!

- Atomizér nové generace vytvoří nano mlhu.
- Molekuly roztoku pronikají přes kožní póry přímo do pokožky.
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund.


## NANO HYDRATACE - POPIS DISPLEJE

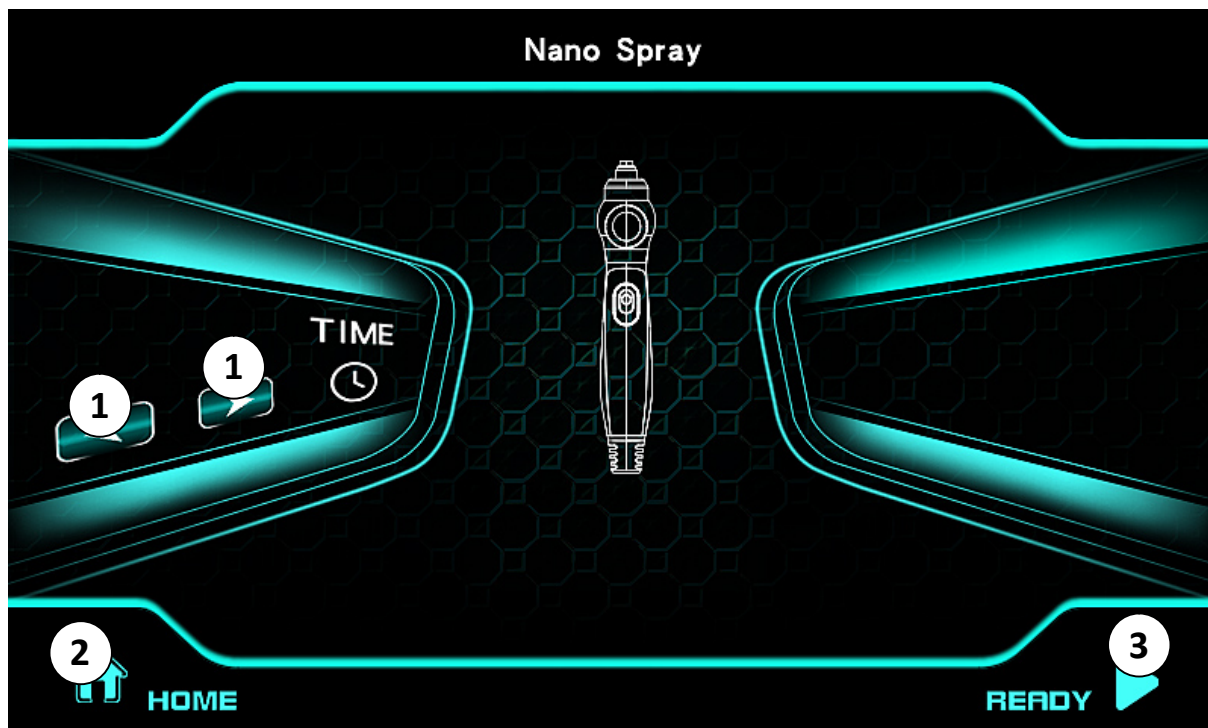

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

## NANO HYDRATACE - POPIS APLIKÁTORU

1. AMPULKA NA TEKUTINU
2. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
3. START/STOP FUNKCE

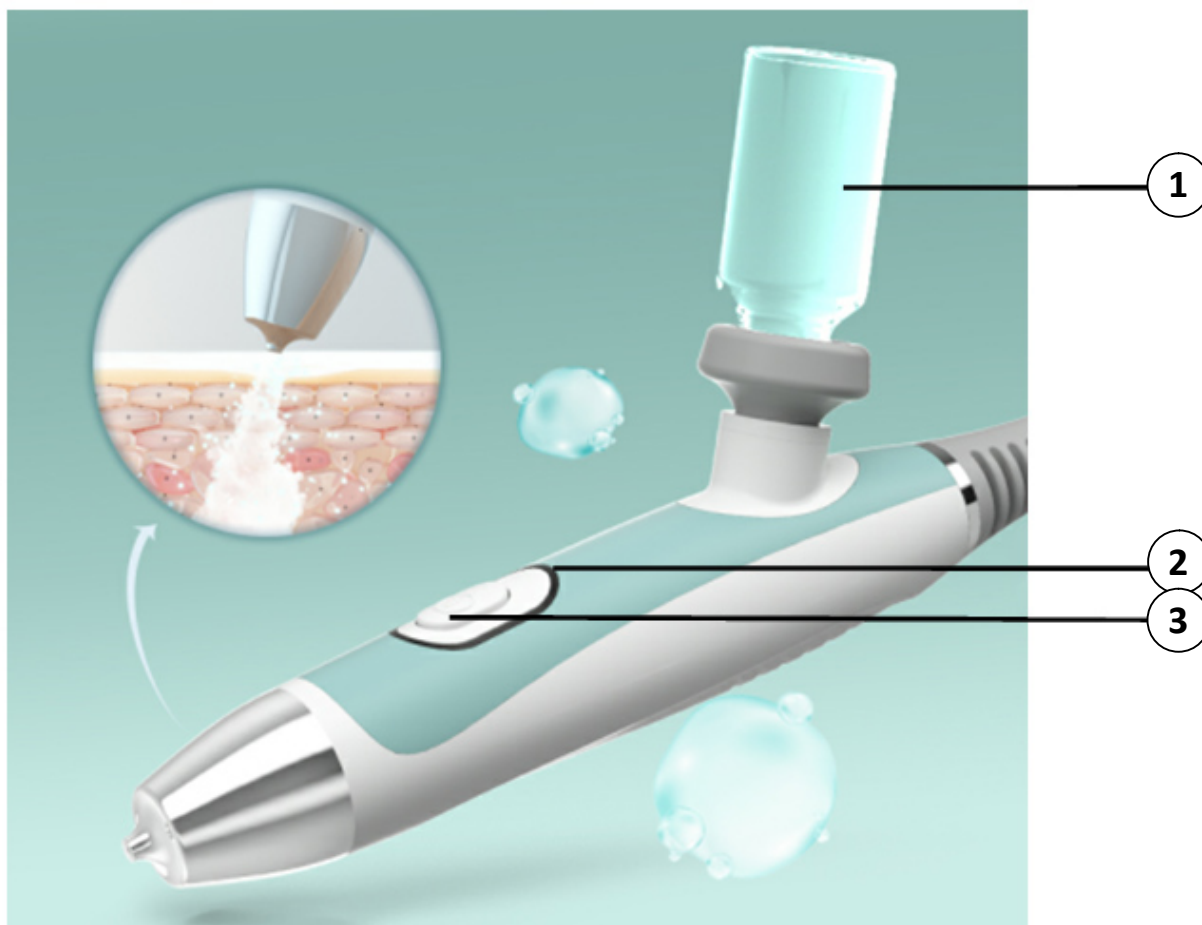



## NANO HYDRATACE - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci nano hydrataci snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Využijte skleněnou ampulku, která je součástí balení. Naplňte ji tekutinou dle vaše výběru. Ideální je destilovaná nebo kojenecká voda. Pokud se rozhodnete tekutinu naředit, nikdy by se neměla změnit celková hustota tekutiny. Mohlo by dojít k ucpání atomizéru. Pokud použijete jiný přípravek, musí mít stejné složení, jako voda. V opačném případě dojde k ucpání hlavice.
- Ampulku instalujte do aplikační hlavice. Vždy držte ampulku hrdlem nahoru. Při instalaci otočte aplikační hlavici vzhůru nohama, aby mohlo dojít k pevnému spojení hlavice s ampulkou. Gumová část aplikační hlavice by měla být v plném kontaktu s ampulkou. Vznikne tak maximální těsnost.
- Při použití držte vždy aplikační hlavici tak, aby dno ampulky mířilo směrem nahoru.
- Aplikátor hlavice by neměl být příliš blízko, ale ani daleko od pleti.
- Při delším použití hlavič s nano hydratací může sražená tekutina na pleti stékat. Otřete případně pomocí hadříku nebo ručníku.
- Pokud na konci použití zbývá v ampulce tekutina, ampulku vyjměte z aplikátoru tak, že dno ampulky směřuje dolů.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikační hlavici použijte tak dlouho, dokud není ampulka prázdná.

## METODA POUŽITÍ NA OBLIČEJI A KRK



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

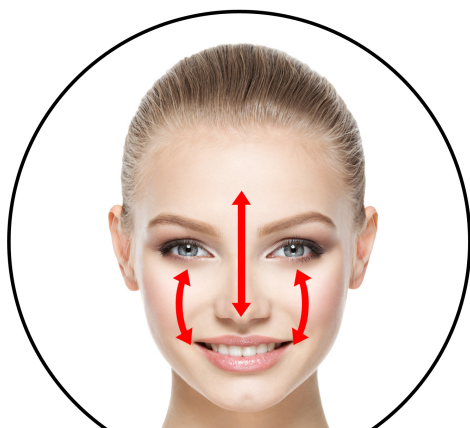

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech




**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## PŮSOBENÍ CHLADU

Působení chladu pro okamžité zklidnění pleti. Ideální jako závěrečná fáze pleťového ošetření. Pleť se během několika minut dostane do normální teploty. Zklidňující účinek a stažení kožních pórů. Velká plochá hlavice s ergonomickým tvarem. Dobře se drží a ochladí všechny záhyby obličeje.

## PŮSOBENÍ CHLADU - POPIS DISPLEJE

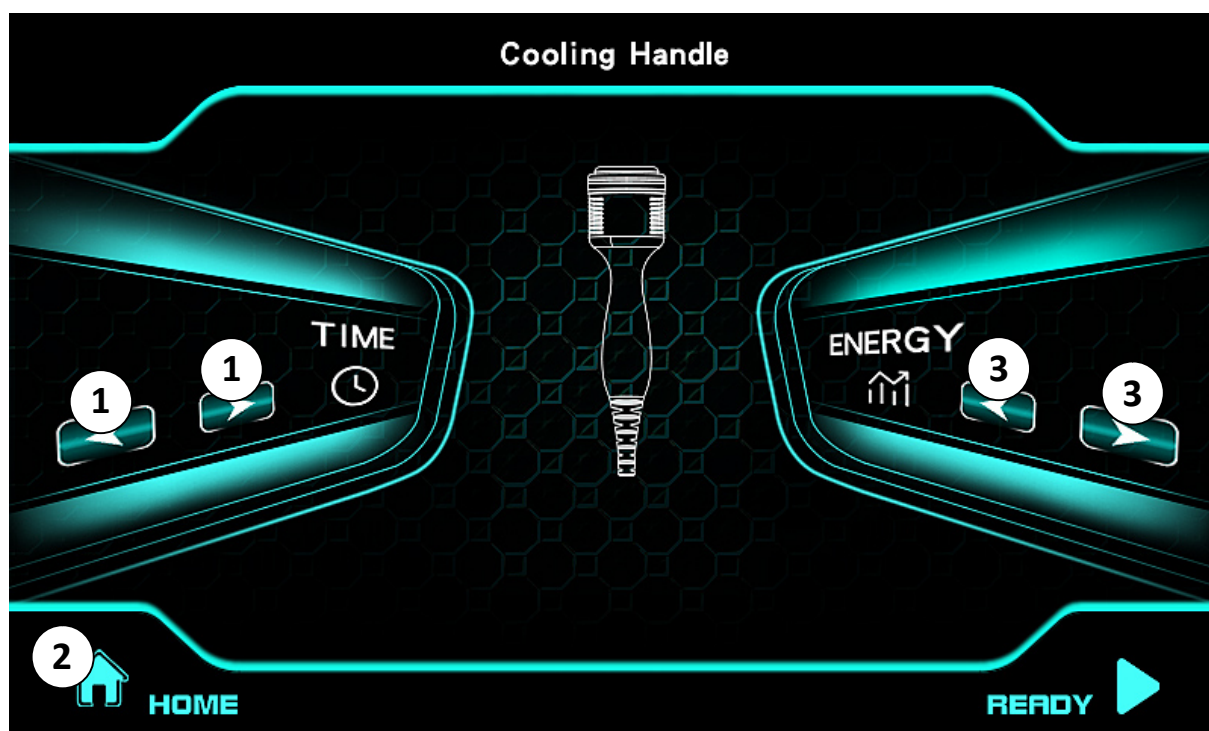

1. NASTAVENÍ ČASU
2. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
3. NASTAVENÍ INTENZITY (VYŠŠÍ HODNOTA = VĚTŠÍ CHLAD)
4. READY - TLAČÍTKO START/STOP

## PŮSOBENÍ CHLADU - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci nano hydrataci snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení chladu. Čím je hodnota větší, tím je povrch aplikační hlavice chladnější.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u tlačítek nastavení intenzity.
- Při pohybu po pleti se snažte, aby byla celá plocha aplikační hlavice v kontaktu s pletí. Na pokožku nemusíte nanášet žádný speciální přípravek. Pohybuje se po pleti v délce 2 až 3 minut podle individuální potřeby uživatele.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.

## SVĚTELNÁ TERAPIE

Červené světlo: 630nm, Modré světlo: 470nm, Žluté světlo: 590nm, Zelené světlo: 520nm

### **ČERVENÉ SVĚTLO**

Stimuluje podporu tvorby kolagenu. Kolagen je základní bílkovina, která slouží k obnově poškozených a starých tkání. Zlepšení kvality pleti a zmenšení pórů.

### **MODRÉ SVĚTLO**

Bakterie v akné obsahují porfyriny. Díky vysoké afinitě s vlnovou délkou je modré světlo schopno porfyriny ničit. Kromě toho má modré světlo zklidňující účinek, který je velmi účinný při precitlivělosti pleti.

### **FIALOVÉ SVĚTLO**

Kombinuje červené a modré světlo, které má dvě účinné fototerapie. Zejména má dobrý účinek na potlačení příznaků akné.

### **ŽLUTÉ SVĚTLO**

Má speciální vlnovou délku 590nm. Podporuje absorbování kosmetických přípravků. Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu. Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti. Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu. Napomáhá zpomalovat stárnutí kůže.

### **ZELENÉ SVĚTLO**

Zelené světlo napomáhá vyrovnat barevný pigment a redukovat jemné vrásky. Urychluje proces hojení ran. Zesvětluje pleť.

### **AZUROVÉ SVĚTLO**

Zvyšuje buněčnou energii a má příznivé účinky pro celkový metabolismus kožní tkáně.

### **LASEROVÉ SVĚTLO**


Dokáže proniknout hluboko do pokožky. Urychluje metabolismus tkání. Rozkládá barevné skvrny. Zlepšuje vzhled jemných vrásek a stárnutí pleti.

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Se zásobníky na vodu pracujte vždy, když je přístroj vypnutý. Používejte destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat žádné mechanické částice. Vodní kámen by způsobil zanesení systému cirkulace vody a poškození přístroje. Vizuálně zkontrolujte, zda není odpadní nádoba příliš plná. S vodou vždy manipulujte mimo dosah přístroje, aby se v případě nehody nedošlo k zasažení přístroje vodou.
- 2.** Do ampulky v aplikační hlavici s nano hydratací používejte vždy destilovanou nebo kojeneckou vodu.
- 3.** Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na horní straně hlavní jednotky. Displej přístroje se rozsvítí. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Můžete začít s přístrojem pracovat.
- 4.** Nyní můžete všechny funkce přístroje ovládat pomocí dotykového barevného displeje. Každou aplikační hlavici můžete zapnout nebo vypnout pomocí příslušného symbolu na displeji. Vždy můžete používat pouze jednu funkci. Není možné mít současně spuštěných více technologií. Výkon nastavujte postupně.
- 5.** U každé aplikační hlavice si můžete nastavit čas použití.
- 6.** Při nastavení parametrů pro aplikační hlavici s vodní dermabrazí je třeba dostat do rovnováhy množství vody, které se načerpává do aplikační hlavice a výkon působení vakua. Vody by nemělo být příliš málo, ale zároveň ne příliš mnoho, aby nestékala po pleti.
- 7.** Před dalším klientem kontaktní části aplikační hlavice očistěte. Použijte v ideálním případě roztok s obsahem alkoholu. Zabráníte tak přenosu bakterií.
- 8.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na horní straně.
- 9.** **V rámci udržení co nejdélejší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnuté chlazení přístroje má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.**

## ČAS APLIKACE

Délku aplikace pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka aplikace pleti pomocí technologií přístroje výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití měla aplikace trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně sledovat, jakým způsobem pleť reaguje na působení dané technologie a podle toho upravit úroveň nastavení výkonu tak, aby bylo pro uživatele aplikace komfortní. Délka aplikace by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlásečnicových vrásek kolem očí.

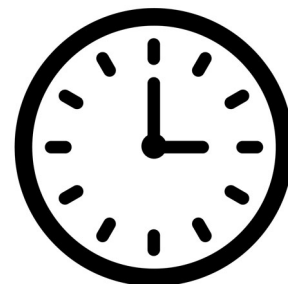

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud je přístroj používán pro komerční účely, je třeba po každém použití dezinfikovat povrch aplikační hlavice, který je v kontaktu s pletí uživatele. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do vnitřního prostoru aplikátoru. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost. Pravidelně kontrolujte stav tekutiny v odpadní nádobce. Obsah průběžně vyprazdňujte. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, všechny zásobníky na vodu vyprázdněte.



## NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

### **Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?**

Následné projevy na pleti po aplikaci radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po aplikaci je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvasivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba plet průběžně takto stimulovat (v průměru 3x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelné aplikace pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi aplikací stejné partie doporučujeme minimálně týden.



### **Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?**

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu.

### **Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních a estetických přístrojů. Přístroj neléčí jakékoliv kožní onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, která významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

### **Představuje aplikace pomocí estetického přístroje nějaké následné omezení klienta?**

Po dokončení aplikace pleti může pokožka mírně zarudnout. Tento efekt je způsoben stimulací krevního oběhu a lymfatického systému obličeje. Zbarvení v rádech minut (až hodin v případě intenzity pleťové aplikace) opadne a pokožka se dostane do normálu. Aplikace na pleti vodní dermabrazí se někdy označuje jako procedura na obědovou pauzu. Společensky vás nebude následně výrazně limitovat.

### **Mohu při aplikaci pleti přístrojem cítit na pleti nepříjemné pocity?**

Každá z technologií působí na pleť jiným způsobem. Každou aplikační hlavici můžeme vnímat jinak. Při použití radiofrekvence je jako průvodní jev teplo. Při vodní dermabrazí můžete na pleti vnímat působení podtlaku a cirkulaci vody. Plasmové toky můžete na pleti cítit jako mírné štípání. Při aplikaci pleti EMS pulzy mírné brnění. U většiny těchto technologií je možné nastavit výkon. Hlavním smyslem nastavení výkonu je pocit vjemu na pleti. Daná technologie musí být na pleti cítit, ale zároveň nesmí její působení překročit míru snesitelnosti.

**Použití obdobného přístroje je pro mě něco absolutně nového. Jak mám ze začátku přistupovat k použití přístroje?**

Podrobně si prostudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Nikam nespěchejte. Začněte s aplikací na pleti pomalu. Působení jednotlivých aplikátorů si postupně vyzkoušejte. Pohybujte se na různých místech obličeje. Vnímejte, jak se na konkrétních místech projevují jednotlivé technologie. Vyzkoušejte pohyb hlavy. „Vytvářejte“ na pleti čárky, kolečka. Osvojíte si tak, jaká technika pohybu je pro vaši pleť optimální. Měňte postupně tempo pohybu a rychlost. Vyzkoušejte si se zvýšenou opatrností další stupně výkonu.

**Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?**

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu (aplikační hlavice s radiofrekvencí). Aplikační hlavici dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

**Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

**Je přístroj vodotěsný?**

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody. Neplatí pro vyměnitelné aplikátory vodní dermabraze a ampulku se zásobníkem na tekutinu pro hydratační pistoli. Neplatí také pro zásobník tekutiny a odpadní nádobku. Pokud je chcete propláchnout pod proudem tekoucí vody, vždy je nezbytně nutné je z přístroje vyjmout.

## **DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ**

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.




## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE

 Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)



beautyrelax 

   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**  
**(420) 737 196 160**

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

**Kosmetický přístroj**

**BeautyRelax ANTIAGE OXYGEN STUDIO PERFORMANCE**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3090**

EAN **8594166123908**

**je ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015**

**EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019**

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.3.2024

**SANTADRIA s.r.o.**  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

.....  
Martin Hrbek, jednatel