

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj pro ošetření pleti

BeautyRelax BR-3040

ANTIAGE OXYGEN

STUDIO PERFORMANCE



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KONTRAINDIKACE	6
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	7
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	8
METODY REDUKCE VRÁSEK	8
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	9
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC [TECHNOLOGIÍ]	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	14
VODNÍ DERMABRAZE	15
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE	16
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE	17
VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ	18
TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY	19
PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU	20
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	21
TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY POPIS DISPLEJE	22
PLAZMOVÉ TOKY - POPIS HLAVICE	23
NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT	24
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE	24
OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLASMOU	24
PLAZMOVÉ TOKY - POSTUP POUŽITÍ	25
RADIOFREKVENCE	26
RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE	27
RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE	28

OBSAH:

RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ	29
POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE	29
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	30
ULTRAZVUK - MAXI & MINI HLAVICE	31
ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS DISPLEJE	32
ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS DISPLEJE	33
ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS HLAVICE	34
ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS HLAVICE	35
ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ	36
MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU	37
MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU POPIS DISPLEJE	38
ELEKTROFORÉZA - POPIS HLAVICE	39
ELEKTROFORÉZA - POSTUP POUŽITÍ	40
EMS MIKROPULZY	41
EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE	42
ELEKTROFORÉZA - POPIS APLIKÁTORŮ	43
ELEKTROFORÉZA - POSTUP POUŽITÍ	44
NANO HYDRATACE	45
NANO HYDRATACE - POPIS DISPLEJE	46
NANO HYDRATACE - POPIS APLIKÁTORU	47
NANO HYDRATACE - POSTUP POUŽITÍ	48
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	49
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	50
ČAS OŠETŘENÍ	51
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	51
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	52
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	54
CERTIFIKACE	54
EU DISTRIBUTOR	54
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	55

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat. Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro ošetření pleti **BeautyRelax** pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné dosáhnout vysoké efektivity ošetření pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny tak, aby bylo použití přístroje maximálně uživatelsky přívětivé.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických masážních přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají výrazně zlepšit kondici pleti pomocí různých metod ošetření. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby vydržela náročný provoz při komerčním použití s vysokou frekvencí používání.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro zajištění šetrnosti pro vaši pleť. Z hlediska erudice obsluhy přístroje vždy záleží na aktuální platné legislativě v dané zemi použití přístroje. Každý stát může mít stanoven pro konkrétní technologie ošetření pleti jiná pravidla. Vždy je třeba se tímto nařízením řídit a dle toho provoz studia přizpůsobit.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí pro ošetření pleti, umožňuje nastavení intenzity. Pokud používáte přístroj pro komerční účely, vždy nejprve vyzkoušejte účinky každé hlavice sami na sobě, abyste si udělali lepší představu o tom, jak daná technologie působí na pleť při každé úrovni nastavení výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic není vždy třeba nastavit nejvyšší stupeň výkonu. Výkon je třeba vždy přizpůsobit tak, aby bylo pleťové ošetření cítit, ale zároveň nepřesáhlo práh bolesti.
- Rozhodně neplatí, čím častěji používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po ošetření dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.
Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte, zejména mřížku ventilátoru.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavici pro radiofrekvenci.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo ošetření pleti)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Obličej
- Krk
- Dekolt

HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Podpora tvorby kolagenu.
- Remodelace elastických vláken.
- Zvýšení pružnosti pleti.
- Zvýraznění kontur obličeje.
- Vyhlazení výrazných hlubokých vrásek.
- Maximální výživa pleti.
- Okamžitá hydratace pleti.
- Prokrvení a okysličení podkožní tkáně.
- Jemná lymfatická masáž pro redukci otoků obličeje.
- Odstranění velice drobných částíček makeupu, které ulpí v kožních pórech.
- Hlubkový peeling pleti s odstraněním černých teček.
- Uvolnění kožních pórů.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Podpora krevního oběhu.
- Vyrovnání barevného tonusu pleti.
- Mechanická masáž pokožky.
- Potlačení pigmentových skvrn.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: vodní dermabraze, diamantová mikrodermabraze, ultrazvuková špachtle, terapie plasmovými toky, radiofrekvence Twin Ball, ultrazvuk mini hlavice, ultrazvuk maxi hlavice, mezoterapie elektroforézou, EMS mikropulzy, nano hydratace, fotonová terapie
- Červené světlo: vlnová délka 640nm
- Modré světlo: vlnová délka 415nm
- Fialové světlo: vlnová délka 690nm
- Žluté světlo: vlnová délka 590nm
- Zelené světlo: vlnová délka 530nm
- Azurové světlo: vlnová délka 490nm
- Velký dotykový barevný displej 7"
- Radiofrekvence: 1MHz
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry hlavní jednotky: 40x30x30cm
- Výkon: 200W
- Hmotnost: 12kg

OBSAH BALENÍ

- Aplikační hlavice s vodní dermabrazí 1x
- Aplikační hlavice s diamantovou mikrodermabrazí 3x
- Vyměnitelné abrazivní korunky 9x
- Aplikační hlavice s ultrazvukovou špachtlí 1x
- Aplikační hlavice s plasma terapií 1x
- Aplikační hlavice s radiofrekvencí Twin Ball 1x
- Aplikační hlavice s ultrazvukem mini 1x
- Aplikační hlavice s ultrazvukem maxi 1x
- Aplikační hlavice s elektroforézou 1x
- Sada kontaktních elektrod pro funkci EMS 1x
- Aplikační hlavice s nano hydratací 1x
- Světelný PDT panel 1x
- Ochranné textilní brýle 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x
- Prodlužovací napájecí kabel 220V 1x

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škáry (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojové ošetření pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

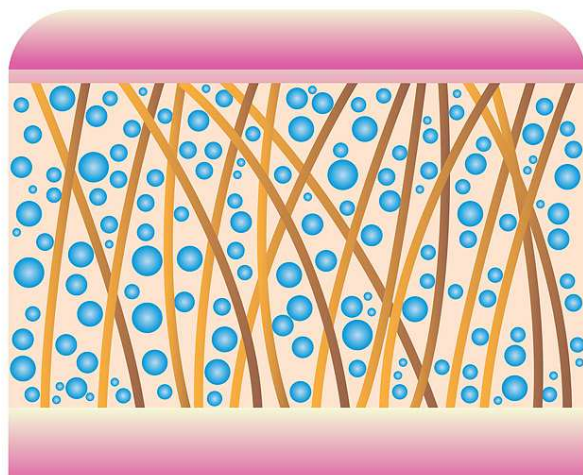

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

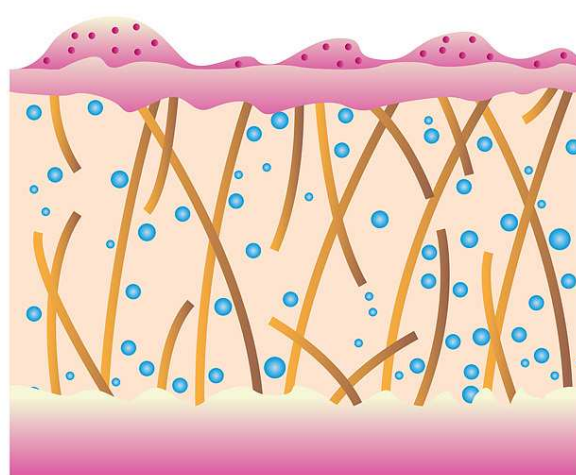

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance je multifunkční přístroj, díky kterému poskytnete svým klientům maximální pleťovou péči na profesionální úrovni se špičkovými okamžitými výsledky. Přístroj je určen do komerčního provozu kosmetického studia nebo estetické kliniky pro ošetření obličeje, krku a dekoltu. Disponuje celou řadou moderních a vysoce účinných technologií z oblasti neinvazivní estetické medicíny. Nahrazuje až 11 různých kosmetických přístrojů. BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance zajistí dokonalé vyčištění pleti, zvýšení pružnosti pleti, lifting pleti, hydrataci pleti, zapracování kosmetických přípravků nebo zklidnění pleti. K dispozici vám bude celá řada technologií: vodní dermabraze, diamantová mikrodermabraze, ultrazvuková špachtle, terapie plasmovými toky, radiofrekvence Twin Ball, ultrazvuk mini hlavice, ultrazvuk maxi hlavice, mezoterapie elektroforézou, EMS mikropulzy, nano hydratace, fotonová terapie. Moderní velký dotykový displej. Moderní design. Moderní technologie. To je přístroj BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio Performance!



Poznámka: vybrané technologie jsou řešeny doplňkem sady.

Fotonová terapie: model [BR-2924]

Čištění pleti ultrazvukem: model [BR-1530]

Diamantová mikrodermabraze: model [BR-2210]

POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC [TECHNOLOGIÍ]

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE
3. ULTRAZVUKOVÁ ŠPACTLE
4. TERAPIE PLASMOVÝMI TOKY
5. RADIOFREKVENCE TWIN BALL
6. ULTRAZVUK MINI HLAVICE
7. ULTRAZVUK MAXI HLAVICE
8. MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU
9. EMS MIKROPULZY
10. NANO HYDRATACE
11. FOTONOVÁ TERAPIE



VODNÍ
DERMABRAZE



DIAMANTOVÁ
MIKRODERMABRAZE



ULTRAZVUKOVÁ
ŠPACTLE



TERAPIE
PLASMOVÝMI TOKY



RADIOFREKVENCE
TWIN BALL



ULTRAZVUK
MINI HLAVICE



ULTRAZVUK
MAXI HLAVICE



MEZOTERAPIE
ELEKTROFORÉZOU



EMS
MIKROPULZY



NANO
HYDRATACE



FOTONOVÁ TERAPIE
SVĚTLNÝ PANEĽ



POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
2. Aplikační hlavice s ultrazvukem maxi hlavice
3. Aplikační hlavice s mezoterapií elektroforézou
4. Aplikační hlavice s nano hydratací
5. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
6. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
7. Aplikační hlavice s ultrazvukem mini hlavice
8. Tlačítko **ON/OFF**
9. Barevný dotykový displej
10. Tlačítko nastavení intenzity podtlaku
11. Tlačítko nastavení množství dávkování vody



POPIS PŘÍSTROJE

1. Zásobník na vodu
2. Zásobník na vodu
3. Zásobník na vodu



POPIS PŘÍSTROJE

1. Držák na aplikační hlavice
2. Zásobník na odpadní vodu
3. Zdířky pro zapojení aplikačních hlavíc
4. Zdířka pro připojení nabíjecího kabelu




INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta/uživatele. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na horní straně přístroje. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Neplatí pro hlavice s vodní dermabrazí a nano hydratací. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utážení
prstence
zašroubováním**

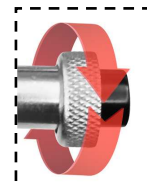

VODNÍ DERMABRAZE

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby plynule dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádrčky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pleť nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny. K dispozici je 6 vyměnitelných aplikátorů různých průměrů pro ošetření velkých i malých ploch.



Systém vakuového nasávání

Estetický přístroj BeautyRelax pleť důkladně vyčistí. V případě vzniku černých teček a pupínek napomáhá k jejich odstranění. Aplikační hlavice nasaje pokožku a hrana aplikátoru odstraní z povrchu nečistoty, černé tečky a nevzhledné bílé čepičky. Nepříjemnému ručnímu vymačkávání, které způsobí výrazně zarudnutí a podráždění pleti je definitivní konec! Povrchové pigmentové skvrnky a póry se zjemňují. Estetický přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, ale zároveň šetrný k pleti!

Systém vodní cirkulace

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby pravidelně dávkovala tekutinu. Přečerpávání tekutiny z jedné nádrčky do druhé. Tekutina okamžitě hydratuje pleť a zbytek na sebe naváže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina z pleti putuje do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pleť nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny.


VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *TEPLOTA VODY*
4. *NASTAVENÍ ÚROVNĚ TEPLoty VODY*
5. *PŘEPNUTÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU*
6. *START/STOP*

VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE

1. VYMĚNITELNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE
2. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
3. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

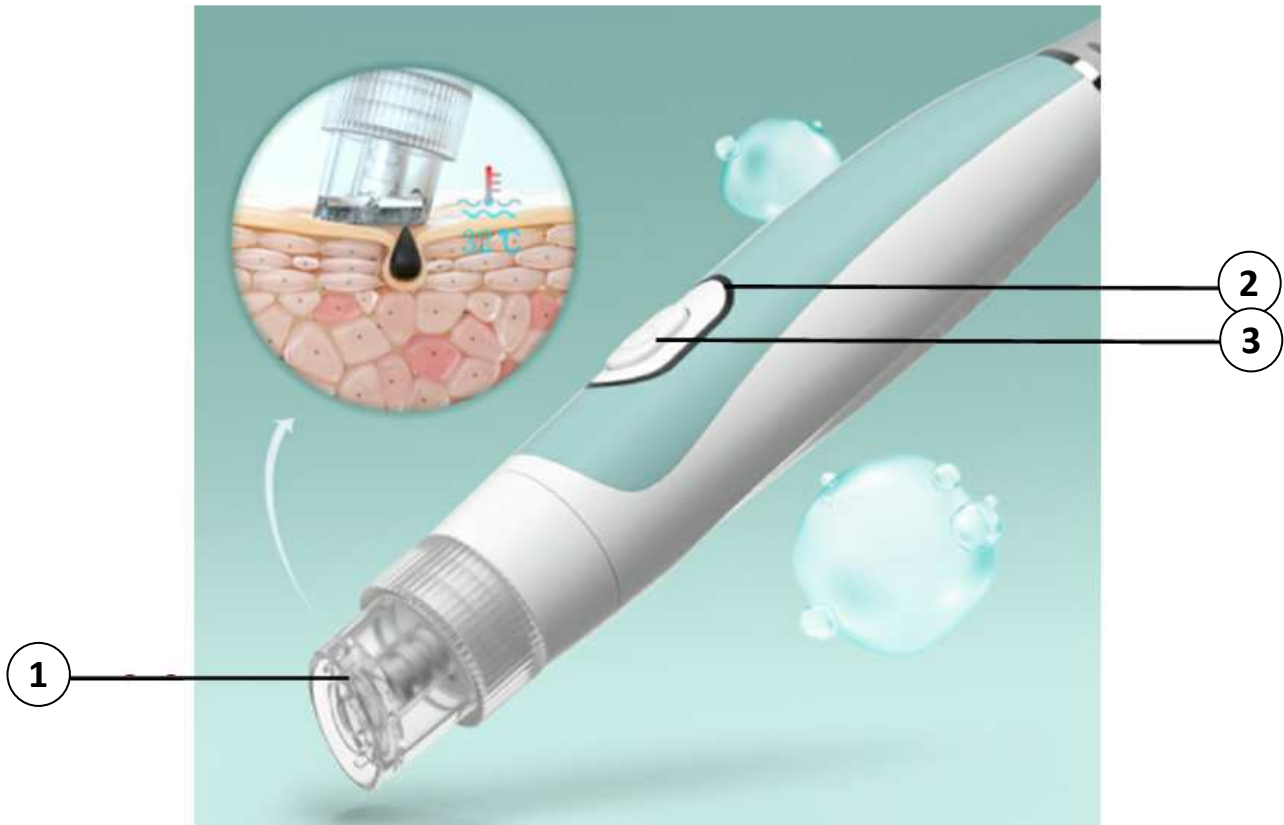

VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte příslušné tlačítko v menu přístroje.
- Zásobníky na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje ošetřované části pleti a reliéfu povrchu pokožky.
- V menu funkce vodní dermabraze si můžete nastavit čas ošetření **(1)** pomocí šipek. Nastavený čas a zbývající čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **START (6)**. Stejným tlačítkem můžete činnost přístroje přerušit. Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Pomocí levého otočného tlačítka si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání.
- Pomocí pravého otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.



- Hlavicí se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat zásobníky na vodu. Na pravé straně přístroje jsou integrované 3 zásobníky. Pomocí tlačítka na displeji (5) si můžete přepínat mezi jednotlivými zásobníky. Zásobníky na tekutinu musí být pro správné fungování systému dostatečně naplněné. Odpadní nádobku na zadní straně přístroje pravidelně vyprazdňujte.
- **Množství vody (pomocí otočného tlačítka na pravé straně)**, které je do aplikační hlavice přečerpáváno. Nastavte si takovou hodnotu, která bude poskytovat dostatečné množství tekutiny. Na druhé straně bude mít hlavice dostatečný výkon pro plynulé odsávání tekutiny. V průběhu práce s aplikační hlavicí by neměla tekutina příliš stékat po povrchu pleti.
- **Síla podtlaku (nastavení tlačítka na displeji na levé straně)**, která se generuje v aplikační hlavici. Pohyb aplikační hlavice po pleti by měl být intenzivní. Na druhé straně by neměl být příliš silný, což by bránilo plynulému pohybu aplikátoru po pleti. Sílu podtlaku by měla vždy korespondovat s množstvím přečerpávané tekutiny.
- Pomocí aplikační hlavice se vždy snažte pokrýt celou plochu obličeje. Na částech pleti se zvýšenou citlivostí upravte výkon působení vakua. Po celou dobu použití by vám mělo být ošetření příjemné. Není přesně stanoven čas použití. Čas je v přímé úměře s tím, jak detailně se potřebujete na vyčištění pleti zaměřit.
- Mějte na paměti, že působením vakua může pokožka zarudnout. Čím větší sílu vakuové terapie použijete, tím

TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY

Jak naše tělo stárne, mění se vlastnosti a celkový vzhled pleti. Epidermis se v průběhu času ztenčuje. Pigmentové skvrny jsou viditelnější. Produkce kolagenu zpomaluje. Dochází ke snížení pružnosti pleti. Kontury obličeje ochabují. Vrásky se prohlubují a stávají se viditelnější. Technologie plasmového toku s ozonem představuje skutečně funkční řešení, jak průběh těchto procesů zvrátit.


Plasmový tok s ozonem přistupuje k ošetření pleti z opačného konce. Většina technologií pro kosmetické ošetření řeší až následek. Tvorba černých teček jako následek zanedbání čištění pleti. Eliminace vrásek jako následek působení stárnutí. Ucpané kožní póry jako následek zvýšeného výskytu mastnoty pleti. Ošetření plasmou s ozonem funguje jako prevence vzniku nežádoucích kožních defektů.

Keramická plocha aplikátoru generuje stejnosměrný proud s vysokofrekvenčním napětím. Plasmový výboj vzniká mezi keramickým aplikátorem hlavice a pletí. Při výboji jsou využity atomy kyslíku obsažené ve vzduchu. Přiblížením aplikátoru k pleti dochází k plasmovému výboji, který sterilizuje pleť a nekompromisně zlikviduje veškeré bakterie na jejím povrchu. Optimální vzdálenost mezi aplikátorem přístroje a pletí jsou 4 milimetry. Součástí balení jsou dvě vyměnitelné hlavice pro ošetření větších a menších partií.



PRŮNIK PLASMOVÉHO TOKU

Výkon plasmového toku je přesně optimalizován, aby působil přes povrch pleti až k vrstvě dermis.

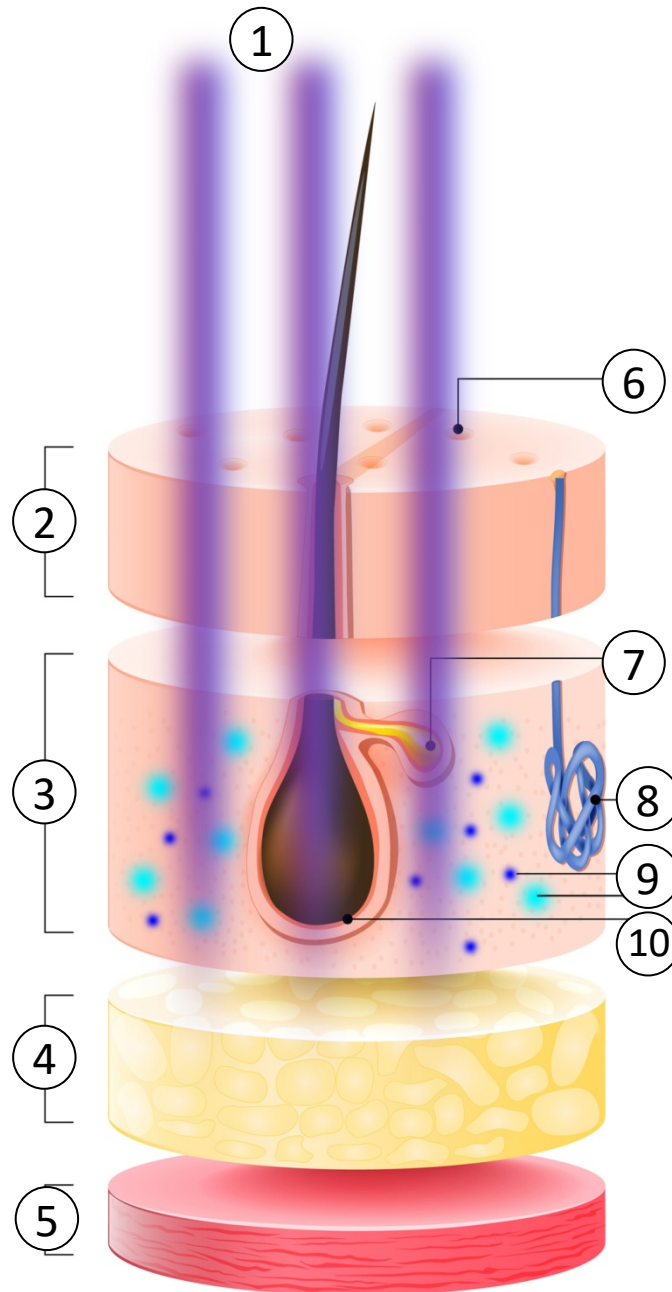

1. Působení plasmového toku

2. Epidermis

3. **Dermis**

4. Tuková tkáň

5. Svalová tkáň

6. Kožní pór

7. Mazová žláza vlasu

8. Potní žláza

9. **Kolagenní a elastická vlákna**

10. Vlasová cibulka

IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt akné na pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY


POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *START/STOP*

PLAZMOVÉ TOKY - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

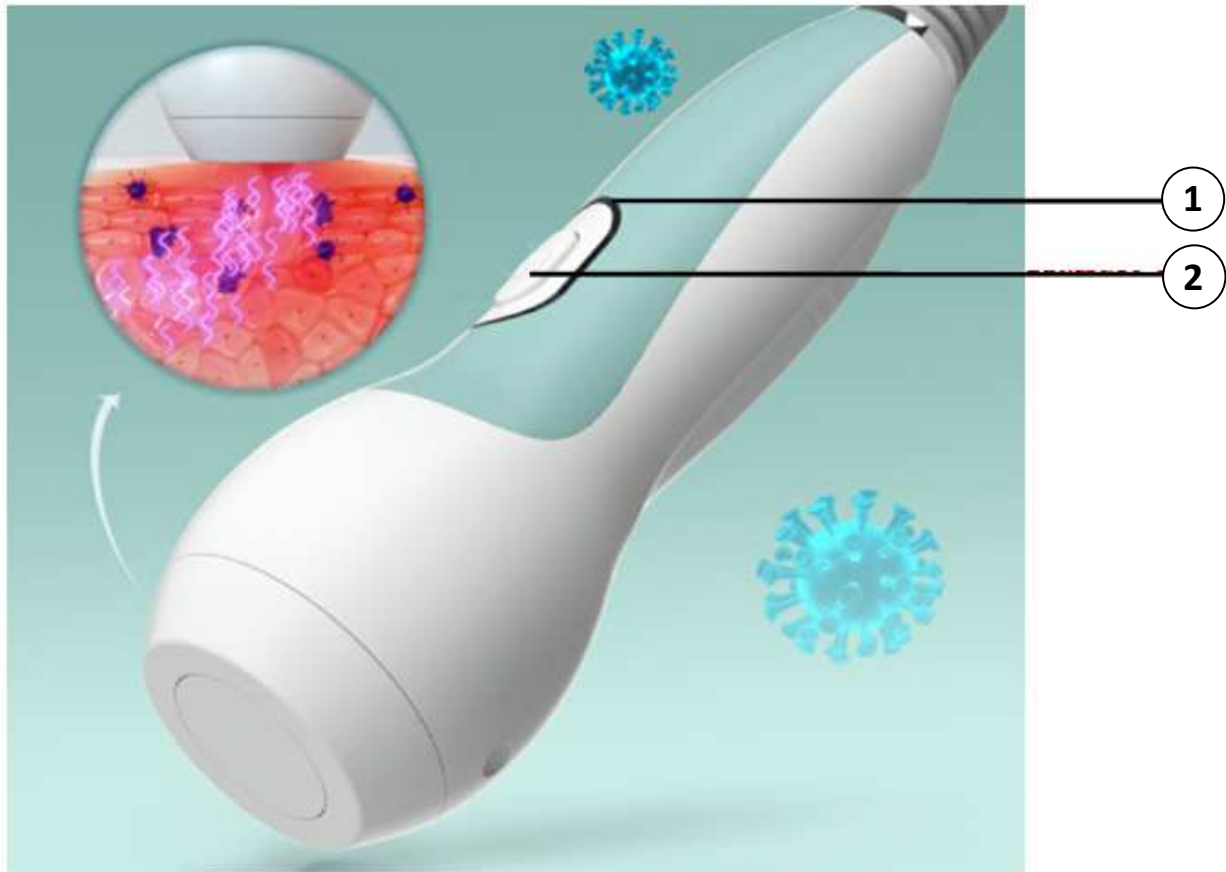

NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT

Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti přístrojem, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleti se před použitím nesmí vyskytovat stopy vlhkosti. Před prvním použitím přístroje si vyzkoušejte jeho aplikaci např. na předloktí. Vyčkejte přibližně 1 hodinu, zda při použití přístroje nebude pokožka negativně reagovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy nebo jiným velmi závažným kožním onemocněním.
- Netlačte aplikační hlavici příliš velkou silou na pleť.
- Po ošetření je doporučeno používat vyživující masku, krém nebo noční krém.
- Po ošetření obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní a poté můžete aplikovat make-up podle potřeby.

OPTIMÁLNÍ POSTUP OŠETŘENÍ PLASMOU

- Proveďte odličení pleti běžným způsobem. Využít můžete hlavici s vodní dermabrazí. Na pleti by neměly ulpět žádné zbytky makeupu. Jakékoliv nečistoty, které ulpí na pleti, snižují výsledný efekt plazmových toků.
- **Před ošetřením pleti plazmovými toky by měla být pleť dokonale suchá.**
- Sundejte veškeré šperky jako např. náušnice, náhrdelníky, náramky, apod.
- Pleť ošetřete pomocí aplikační hlavice s plazmovými toky.
- Pomalu se pohybujte aplikační hlavici po pleti. Plazmový výboj vznikne v případě, je-li aplikační hlavice v optimální vzdálenosti od pleti. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti od pleti v rozsahu od 1mm do 4mm. Během použití se snažte, aby se keramický aplikátor nacházel co nejméně v přímém kontaktu s pleť.
- Ošetření pleti je naprosto bezbolestné. Během používání můžete cítit mírné aroma, které doprovází průběh působení plazmového toku.
- Pokožka může v oblasti ošetření mírně zarudnout. Jedná se o přirozený jev. Pleť se v řádu několika minut dostane do normálu.
- Aplikační hlavice se nesmí v průběhu ošetření pleti dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
- V průběhu ošetření neaplikujte žádný druh kosmetického přípravku.
- Zaměřte se na vybrané části obličeje nebo dekoltu, kde potřebujete účinek přístroje nejvíce.
- Po ošetření pleti přístrojem použijte jakýkoliv kosmetický přípravek, krém nebo sérum.

PLAZMOVÉ TOKY - POSTUP POUŽITÍ


- Pro použití funkce plazmových toků zvolte v hlavní nabídce příslušný obrázek aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek **(1)** si můžete nastavit čas ošetření. Nastavený čas a zbývající čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **(3)** si můžete nastavit intenzitu plazmových toků.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji na nápisem **ENERGY**.
- Zvolte si takovou intenzitu působení plazmových toků, které vám budou na pleti stále příjemné a nebudou přesahovat hranici bolesti.
- Pomocí tlačítka **(4)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Ošetřete postupně celou plochu obličeje, krku nebo dekoltu. Na velmi citlivých oblastech obličeje, kde je velmi vysoká citlivost upravte úroveň výkonu tak, aby vám použití bylo maximálně příjemné.
- Ošetření plazmovými toky trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

RADIOFREKVENCE

Radiofrekvence patří v oblasti estetiky mezi nejučinnější metodu neinvazivního liftingu pleti. Aplikační hlavice přenáší do pleti radiofrekvenční vlny ve specifické frekvenci. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Přispívá k přirozené tvorbě vlastního kolagenu. V průběhu ošetření je možné na pleti cítit příjemné teplo. Maximální možné zacílení radiofrekvenční energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Účinné zejména pro ošetření zralé pleti s výskytem viditelných hlubokých vrásek. Možnost plynulého dávkování výkonu pro ošetření pleti s různou citlivostí.




RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE

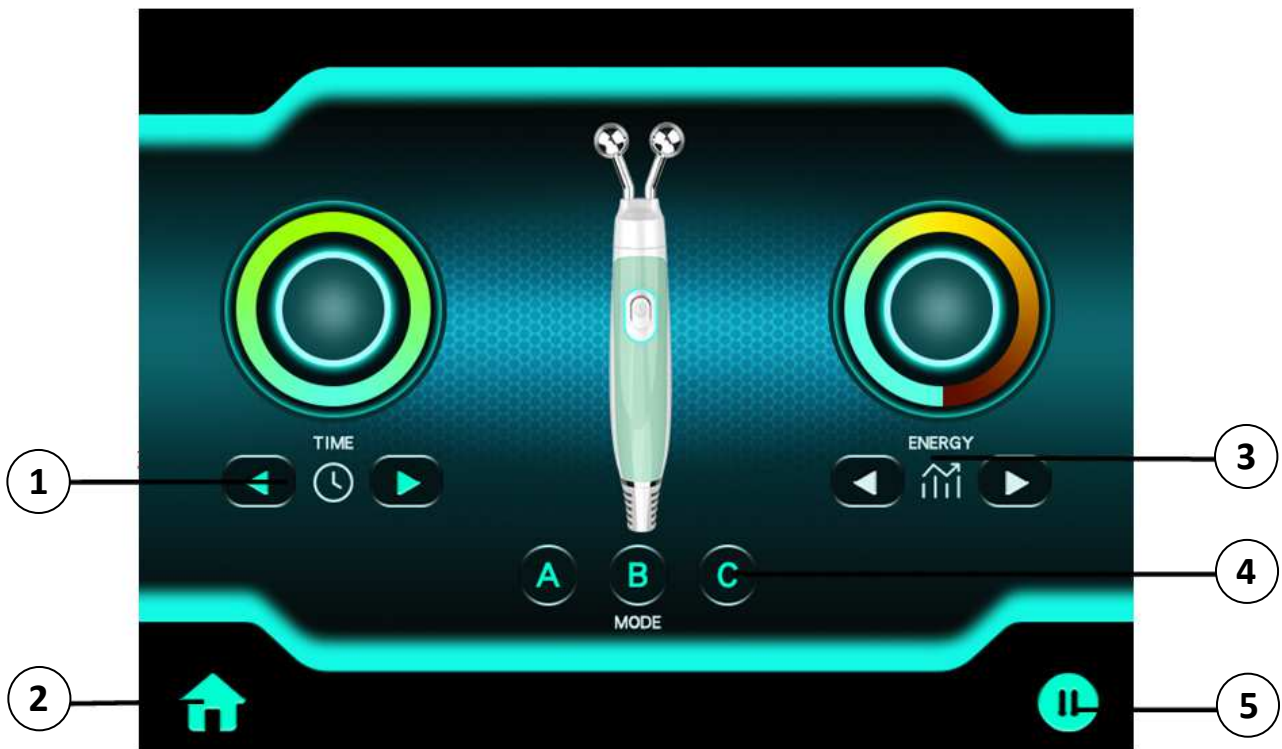

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU RADIOFREKVENCE (A,B,C)*
5. *START/STOP*

RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE

- 1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR**
- 2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE**

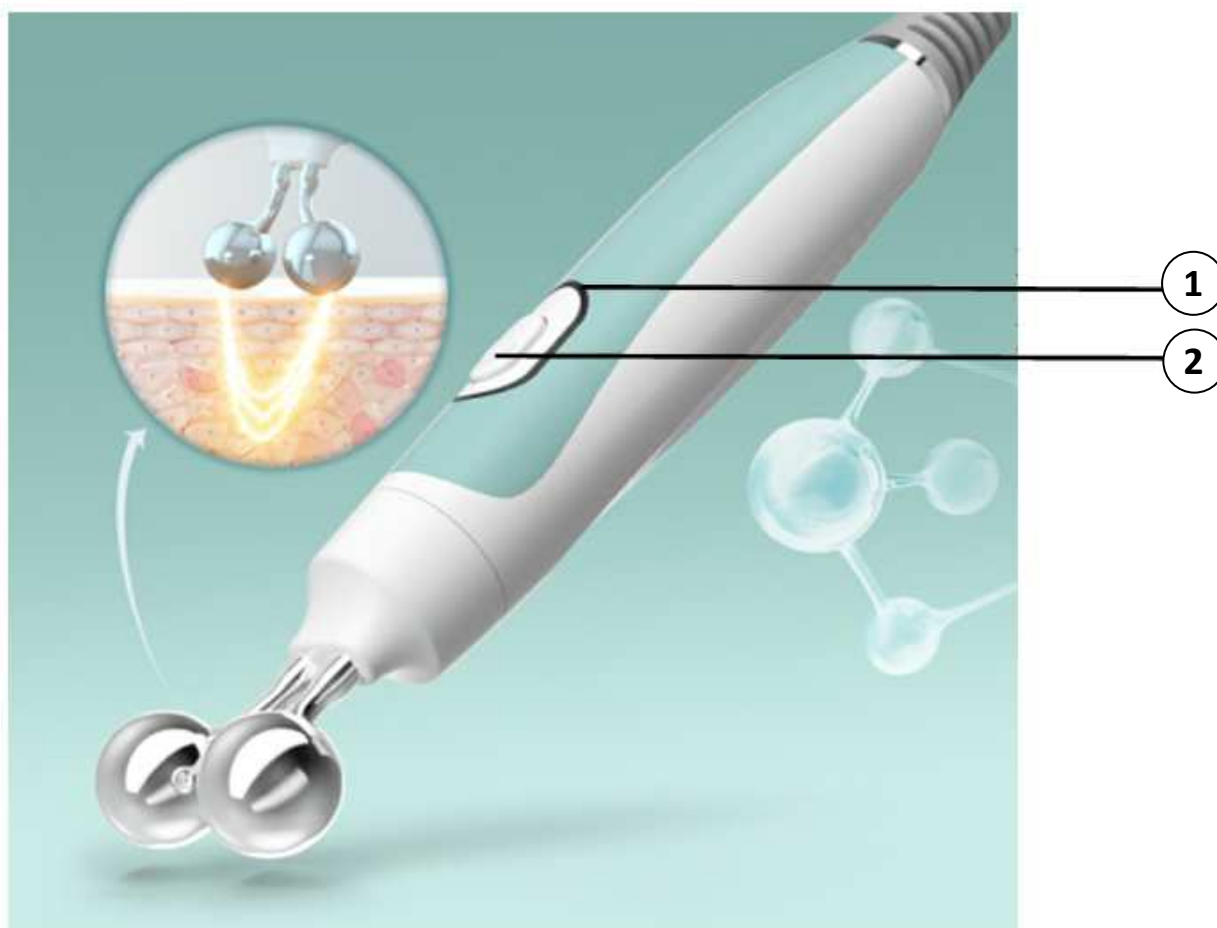

RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce radiofrekvence zvolte v hlavní nabídce obrázek příslušné aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek **(1)** si můžete nastavit čas ošetření. Nastavený čas a zbývající čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **(3)** si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji na nápisem **ENERGY**.
- Pomocí tlačítek **A B C** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 3 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C**. Každý mód má specifický režim fungování radiofrekvence. Na výběr je stále působení radiofrekvenčních vln nebo přerušované.
- Zvolte si takovou intenzitu působení radiofrekvence, která vám bude na pleti stále příjemná a nebude přesahovat hranici bolesti.
- Pomocí tlačítka **(5)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Délka ošetření by se měla pohybovat v rozsahu od 5 do 7 minut.

POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE

- 1.** Pokud se rozhodnete pro ošetření přístrojem větší části obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
- 2.** V průběhu použití se snažte, aby byly obě kuličky v kontaktu s pletí.
- 3.** Pokud je vám působení radiofrekvence na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkráťte čas kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
- 4. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo ošetření ukončete.
- 5. Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
- 6. Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte v délce několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- **Estetický přístroj BEAUTYRELAX** je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí nebo kosmetickém studiu.
- **Estetický přístroj BEAUTYRELAX** je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Ošetření pomocí radiofrekvence by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem nebo jiným kosmetickým přípravkem na gelové bázi. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken. Pokud je to jen možné, vyhněte se vodivému gelu s přidanými aromaty nebo barvivy. Pleť citlivějších uživatelů by nemusela zareagovat pozitivně.
- **Pokud budete aplikační hlavičku držet na pleti příliš dlouho v řádech několika sekund a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření (radiofrekvence), přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků.**
- Pokud je to jenom možné, snažte se aplikační hlavičku vyhnout oblastem s velmi tenkou a citlivou pokožkou. Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně. Je možné, že i s nejnižší úrovní intenzity mohou mít jedinci s velmi citlivou pletí problém a ošetření pro ně bude nepříjemné.
Aplikační hlavičku se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krátké bodové ošetření – tzv. razítkování. Pokud budete držet hlavičku příliš dlouho v kontaktu s pletí (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Před dalším přiložením na pleť proto nechejte časovou prodlevu v řádu sekund. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu. Začínajte s krátkým „tukaním“ na pleť a pocitově postupně délku prodlužujte.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavičku. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavičky.



ULTRAZVUK - MAXI & MINI HLAVICE

Aplikátor z ušlechtilé oceli po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se specifickým výkonem a frekvencí. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Intenzivní zapracování kosmetických přípravků do pleti. Mini aplikátor je optimální pro použití na oční okolí. Maxi aplikátor je vhodný pro použití obličeje, krku a dekoltu.

ANTIAGE
OXYGENSTUDIO
PERFORMANCE
POWERED BY
beautyrelax

ULTRAZVUK mini aplikátor
OŠETŘENÍ OČNÍHO OKOLÍ - POTLAČENÍ TMAVÝCH KRUHŮ POD OČIMA

6

ANTIAGE
OXYGENSTUDIO
PERFORMANCE
POWERED BY
beautyrelax

ULTRAZVUK maxi aplikátor
INTENZIVNÍ ZAPRACOVÁNÍ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO PLETI

7

ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU ULTRAZVUKU*
5. *START/STOP*


ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU ULTRAZVUKU*
5. *START/STOP*


ULTRAZVUK MINI HLAVICE - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

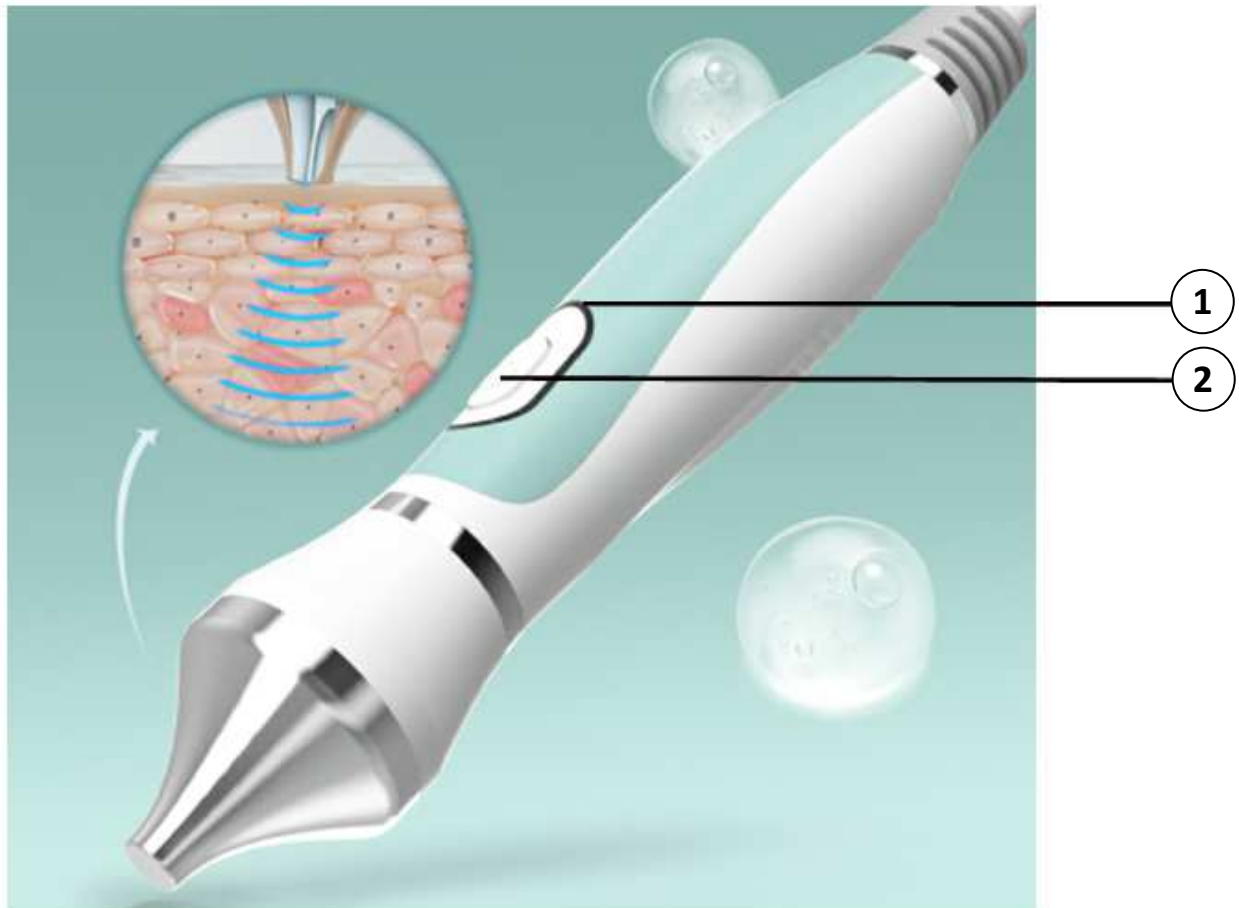

ULTRAZVUK MAXI HLAVICE - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

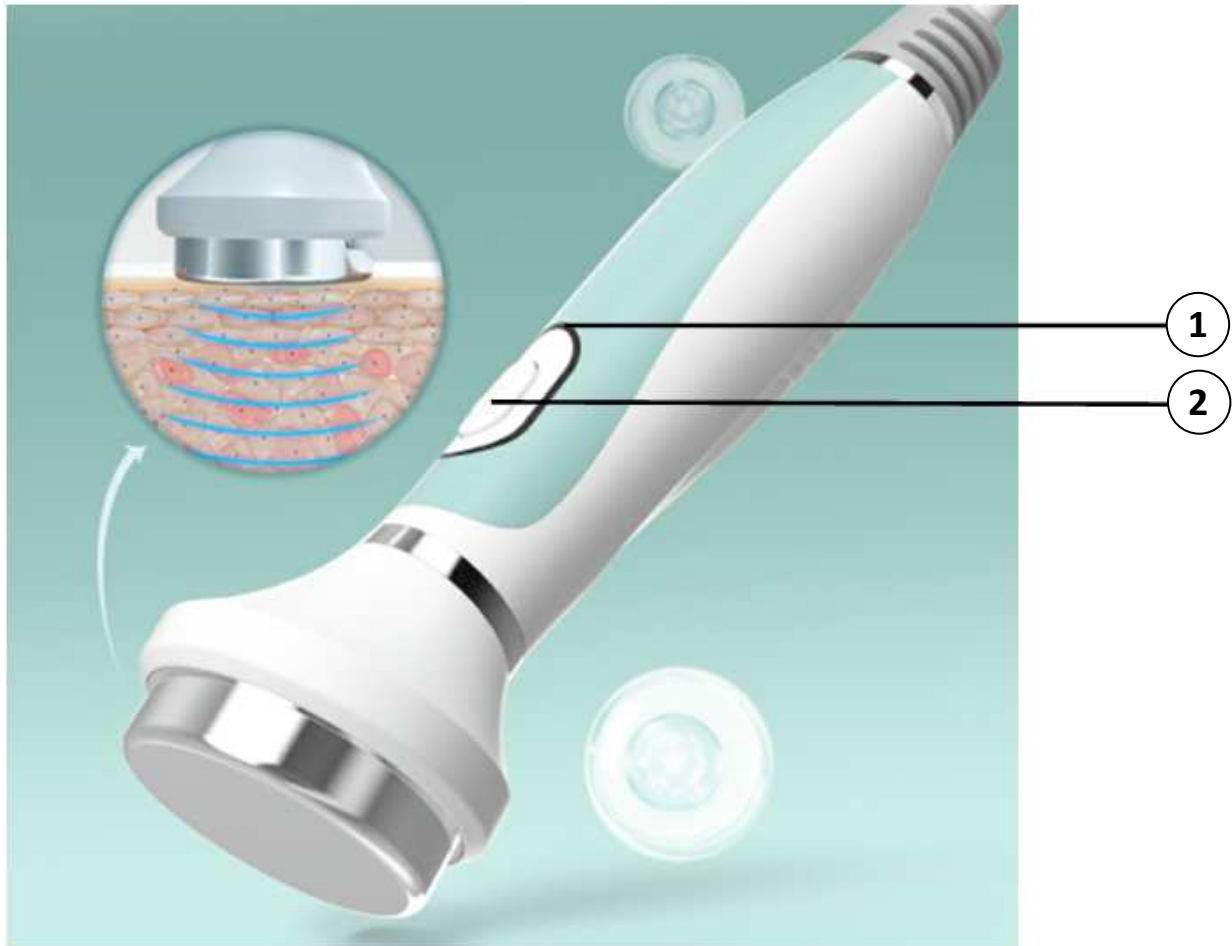

ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci ultrazvuku snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek **(3)** si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. Hodnota úrovně intenzity je zobrazena na nápisem **ENERGY**. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení ultrazvuku, ale na druhou stranu je vám použití stále příjemné. Průvodní jev působení ultrazvukových vln je pocit mravenčení.
- Pomocí tlačítek **(1)** si můžete nastavit čas ošetření. Nastavený čas a zbývajících čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítka **MODE (4)** si můžete nastavit režim působení ultrazvuku. Kontinuální a přerušovaný. Pro efektivní použití doporučujeme používat kontinuální režim.
- Při použití se vždy snažte, aby byl povrch aplikační hlavice v plném kontaktu s pletí.
- Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pleť důkladně navázat.
- Můžete také samozřejmě použít vámi oblíbený kosmetický krém, gel nebo sérum. Ultrazvukové vlny významným způsobem napomáhají k zapracování účinných látek.
- Podle účelu použití použijte aplikační hlavici. Pro menší oblasti – například kolem očí, použijte MINI aplikátor. Pro větší plochy – čelo, tváře, bradu, atd. použijte maxi aplikátor.
- Pomocí tlačítka **(5)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Ošetření ultrazvukem trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličej, krku nebo dekoltu.

MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU

Aplikační hlavice pracuje na principu elektroforézy. Kosmetické přípravky jsou penetrovány pomocí působení mikroproudu v přesně optimalizované frekvenci. Žádná část aplikační hlavice nepronikne skrz povrch pleti. Nepředstavuje žádnou zátěž pro váš organismus. Skvělé dosažitelné výsledky. Aplikační hlavice s neinvazivní mezoterapií penetruje kosmetické roztoky přes povrch pleti hluboko do kožních vrstev. Penetrace přírodních extraktů a vitamínů. Aplikační hlavice má v sobě integrovaný zásobník pro opakované naplnění přípravkem na tekuté bázi. Snadné dávkování výkonu. Žádná krev. Žádné modřiny. Žádná bolest. Řekněte stop jehličkám, které způsobují nepříjemné pocity. Metoda mikrojehličkování je minulost. Neinvazivní mezoterapie pomocí elektroforézy budoucnost, kterou můžete využívat již nyní!



MEZOTERAPIE ELEKTROFORÉZOU


POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÍ VODY Z AMPULKY*
2. *NASTAVENÍ ČASU*
3. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
4. *NASTAVENÍ INTENZITY*
5. *NASTAVENÍ MÓDU MEZOTERAPIE*
6. *START/STOP*

ELEKTROFORÉZA - POPIS HLAVICE

1. VÝSTUP TEKUTINY Z AMPULKY
2. AMPULKA NA TEKUTINU
3. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
4. START/STOP FUNKCE

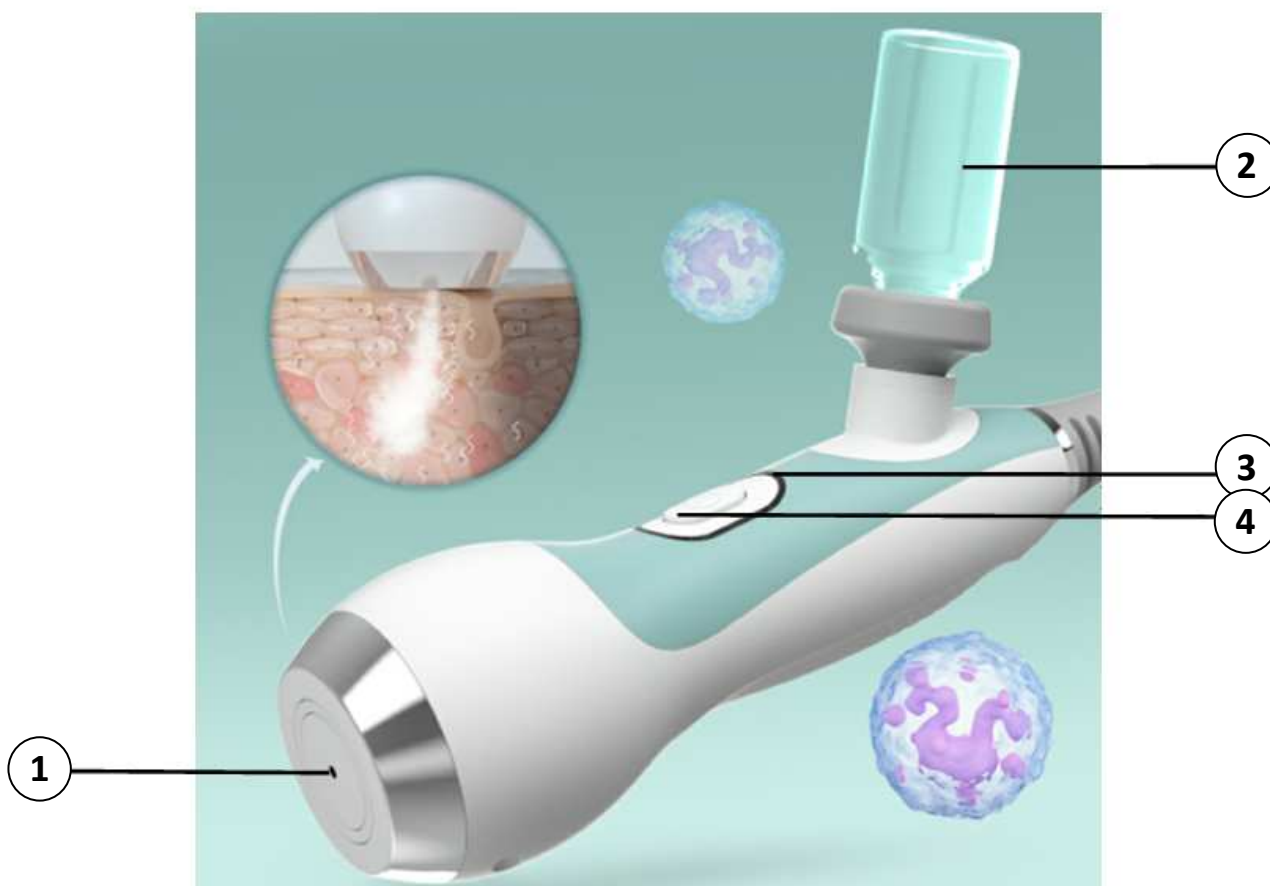

ELEKTROFORÉZA - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci elektroforézy snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Aplikační hlavici je vhodné použít pro zpracování tuhých kosmetických přípravků (krémů, gelů, past).
- Pro tekuté přípravky použijte ampulku. Přípravky na tuhé bázi naneste přímo na pleť.
- Působení elektroforézy můžete vnímat jako pocit mírného brnění na pleti.
- Pomocí tlačítek **ENERGY (4)** si můžete nastavit působení intenzity elektroforézy. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná.
- Pomocí tlačítek **(2)** si můžete nastavit čas ošetření. Nastavený čas a zbývající čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **WATER (1)** si můžete nastavit množství tekutiny, které je na pleť čerpána z ampulky. Ampulku je možné vždy naplnit pouze přípravky na tekuté bázi. Pokud použijete přípravky na tuhé, gelové nebo olejové bázi, dojde k poškození čerpadla a ztratě záruky.
- Pomocí tlačítek **A B C (5)** si můžete nastavit program působení elektroforézy. Nastavte si program, který je vám na pleti nejvíce příjemné. Hlavním smyslem programů je změna působení režimu působení elektroforézy.
- Pomocí tlačítka **(6)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Ošetření ultrazvukem trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

EMS MIKROPULZY

Technologie EMS, což znamená Elektrická Svalová Stimulace, je metoda využívající elektrické impulzy k stimulaci svalů. Tato technologie může být použita pro různé účely, včetně fyzioterapie, cvičení, rehabilitace a kosmetických aplikací. Princip spočívá v tom, že elektrické signály jsou posílány do obličejových svalů prostřednictvím obličejové masky. Elektrické impulzy jsou přenášeny do pleti prostřednictvím obličejové masky připojené k sadě 4 konektorů. Elektrické impulzy napodobují přirozené signály posílané nervovým systémem k aktivaci svalů. Tímto způsobem může být dosaženo kontrakcí svalů, což může být užitečné pro posilování ochablých svalů. V oblasti obličeje technologie EMS napomáhá ke zvýraznění kontur.



EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE



1. VOLBA MASÁŽNÍHO PROGRAMU (**MODE**) A,B,C
2. NASTAVENÍ ČASU
3. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
4. NASTAVENÍ INTENZITY
5. START/STOP

ELEKTROFORÉZA - POPIS APLIKÁTORŮ

1. SVORKA S KLADNOU POLARITOU (ČERVENÁ)
2. SVORKA SE ZÁPORNOU POLARITOU (ČERNÁ)



ELEKTROFORÉZA - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci EMS pulzů snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Použití této funkce je spojeno s obličejovou vyživující maskou, která je běžně k zakoupení v drogerii (nejoblíbenější klienty jsou např. od značky Garnier).
- Obličejová maska je určena k jednorázovému použití.
- K masce připojte na jejím konci sadu svorek. Použijte všechny.
- Pomocí tlačítek **ENERGY (4)** si můžete nastavit působení intenzity EMS pulzů. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná. Aktuálně nastavená intenzita je zobrazena nad symbolem **ENERGY**.
- Pomocí tlačítek **(2)** si můžete nastavit čas ošetření. Nastavený čas a zbývající čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek **MODE** si můžete nastavit režim působení EMS pulzů. K dispozici jsou 3 programy: **A B C**. Každý program má individuální přednastavenou frekvenci působení EMS pulzů. Zvolte si takový program, který vám nejvíce vyhovuje.
- Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, vždy začínejte na nejnižší intenzitě č. 1. Přidávejte postupně. Tak, aby pro vás bylo ošetření maximálně komfortní.
- Pomocí tlačítka **(5)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Ošetření EMS pulzy trvá v rozsahu od 5 do 10 minut. Snažte se vždy masku položit na obličej tak, aby maximálně přiléhala na povrch pleti.

NANO HYDRATACE

Vysoce účinná metoda pro okamžitou hydrataci pleti. Násobně zvyšuje účinnost klasických hydratačních přípravků na vodní bázi. Během několika sekund poskytnete vaší pleti dostatečnou vlhkost. Použití je vhodné pro všechny typy pleti. Kosmetický přístroj pracuje s atomizérem nové generace. Tekutina putuje ze zásobníku přímo do atomizéru, který štěpí molekuly roztoku na velikost nanočástic. Atomizér promění hydratační přípravek na ionizovanou nano mlhu. Nově vzniklé částičky kapaliny mají menší velikost než samotný kožní pór. Hydratační přípravek tak snadno pronikne přes horní vrstvu pleti. Dochází k okamžité hydrataci pleti s maximálním účinkem!

- Atomizér nové generace vytvoří nano mlhu.
- Molekuly roztoku pronikají přes kožní póry přímo do pokožky.
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund.

ANTIAGE
OXYGEN STUDIO
PERFORMANCE
POWERED BY
beautyrelax

BR-3040

10

NANO HYDRATACE
MOLEKULY TEKUTINY PRONIKAJÍ HLUBOKO DO PLETI

NANO


NANO HYDRATACE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *START/STOP FUNKCE*

NANO HYDRATACE - POPIS APLIKÁTORU

1. AMPULKA NA TEKUTINU
2. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
3. START/STOP FUNKCE

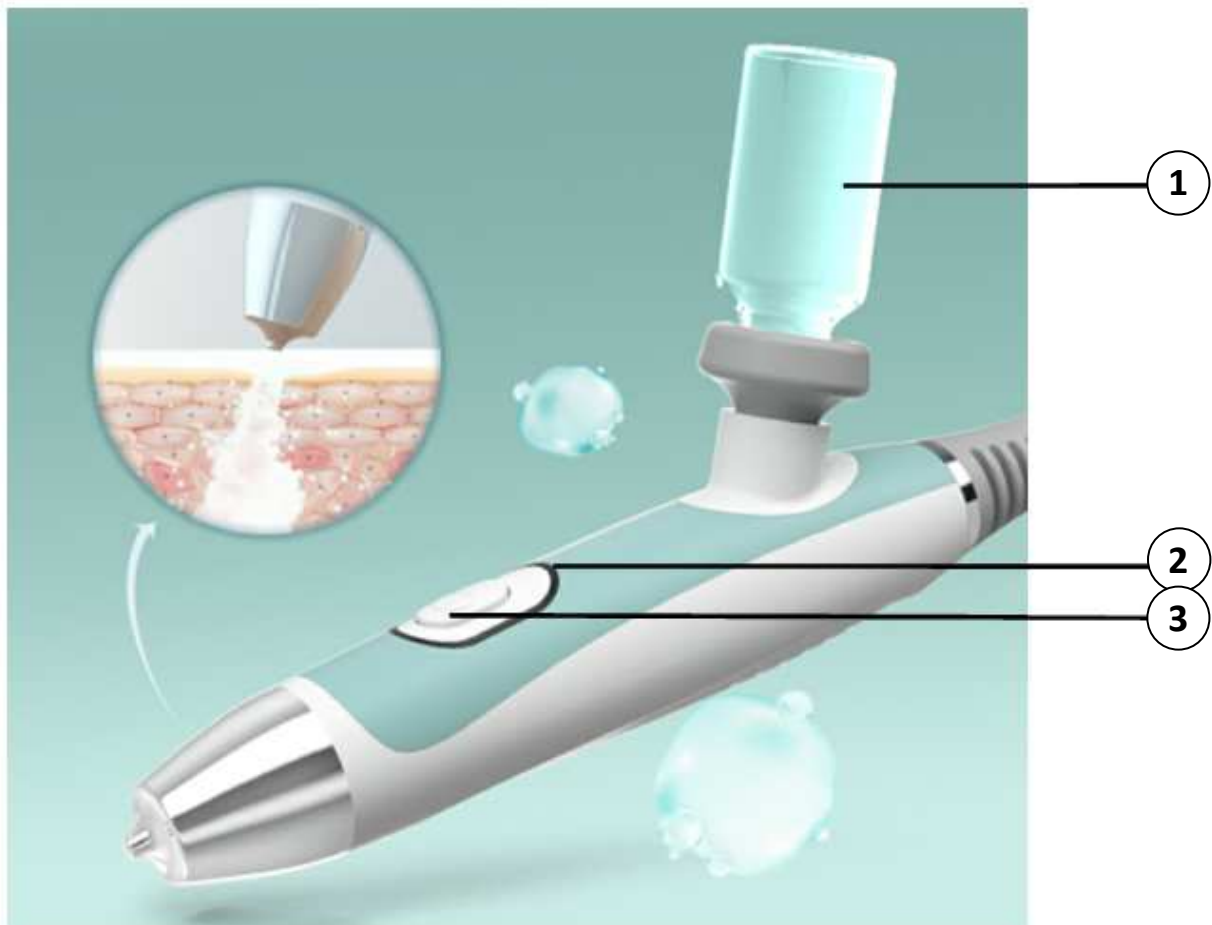

NANO HYDRATACE - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci nano hydrataci snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek **(2)** si můžete nastavit čas ošetření. Nastavený čas a zbývajícím čas ošetření je zobrazen na displeji.
- Využijte skleněnou ampulku, která je součástí balení. Naplňte ji tekutinou dle vaše výběru. Ideální je destilovaná nebo kojenecká voda. Pokud se rozhodnete tekutinu naředit, nikdy by se neměla změnit celková hustota tekutiny. Mohlo by dojít k ucpání atomizéru.
- Ampulku instalujte do aplikační hlavice. Vždy držte ampulku hrdlem nahoru. Při instalaci otočte aplikační hlavici vzhůru nohama, aby mohlo dojít k pevnému spojení hlavice s ampulkou. Gumová část aplikační hlavice by měla být v plném kontaktu s ampulkou. Vznikne tak maximální těsnost.
- Při použití držte vždy aplikační hlavici tak, aby dno ampulky mířilo směrem nahoru.
- Aplikátor hlavice by neměl být příliš blízko, ale ani daleko od pleti.
- Při delším použití hlavičky s nano hydratací může sražená tekutina na pleti stékat. Otřete případně pomocí hadříku nebo ručníku.
- Pokud na konci použití zbývá v ampulce tekutina, ampulku vyjměte z aplikátoru tak, že dno ampulky směřuje dolů.
- Pomocí tlačítka **(3)** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavičce.
- Aplikační hlavičku použijte tak dlouho, dokud není ampulka prázdná.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

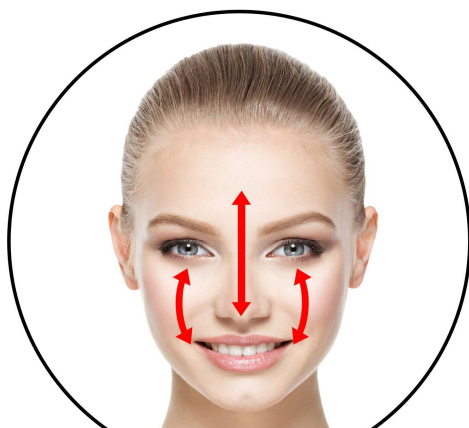

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech




Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Se zásobníky na vodu pracujte vždy, když je přístroj vypnutý. Používejte destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat žádné mechanické částice. Vodní kámen by způsobil zanesení systému cirkulace vody a poškození přístroje. Vizuálně zkontrolujte, zda není odpadní nádoba příliš plná. S vodou vždy manipulujte mimo dosah přístroje, aby se v případě nehody nedošlo k zasažení přístroje vodou.
2. Do ampulky v aplikační hlavici s funkcí elektroforézy můžete k vodě přimíchat případný koncentrát, který obsahuje vitamíny pro výživu pleti libovolné značky (sérum, kyselina hyaluronová, vitamíny v tekutém stavu). Použijte pouze malé množství. Přidaný přípravek nesmí nikdy změnit hustotu vody.
3. Do ampulky v aplikační hlavici s nano hydratací používejte vždy destilovanou nebo kojeneckou vodu.
4. Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na horní straně hlavní jednotky. Displej přístroje se rozsvítí. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Můžete začít s přístrojem pracovat.
5. Nyní můžete všechny funkce přístroje ovládat pomocí dotykového barevného displeje. Každou aplikační hlavici můžete zapnout nebo vypnout pomocí příslušného symbolu na displeji. Vždy můžete používat pouze jednu funkci. Není možné mít současně spuštěných více technologií. Výkon nastavujte postupně.
6. U každé aplikační hlavice si můžete nastavit čas použití.
7. Při nastavení parametrů pro aplikační hlavici s vodní dermabrazí je třeba dostat do rovnováhy množství vody, které se načerpává do aplikační hlavice a výkon působení vakua. Vody by nemělo být příliš málo, ale zároveň ne příliš mnoho, aby nestékala po pleti.
8. Před dalším klientem kontaktní části aplikační hlavice očistěte. Použijte v ideálním případě roztok s obsahem alkoholu. Zabráníte tak přenosu bakterií.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na horní straně.
10. **V rámci udržení co nejdélejší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnuté chlazení přístroje má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.**

ČAS OŠETŘENÍ

Délku ošetření pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka ošetření pleti pomocí technologií přístroje výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití mělo ošetření trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně sledovat, jakým způsobem pleť reaguje na působení dané technologie a podle toho upravit úroveň nastavení výkonu tak, aby bylo pro uživatele ošetření komfortní. Délka ošetření by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlásečnicových vrásek kolem očí.

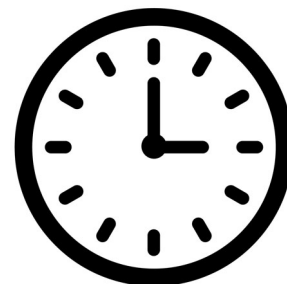

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud je přístroj používán pro komerční účely, je třeba po každém použití dezinfikovat povrch aplikační hlavice, který je v kontaktu s pletí uživatele. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do vnitřního prostoru aplikátoru. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost. Pravidelně kontrolujte stav tekutiny v odpadní nádobce. Obsah průběžně vyprazdňujte. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, všechny zásobníky na vodu vyprázdněte.



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?

Následné projevy na pleti po ošetření radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po ošetření je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba plet průběžně takto stimulovat (v průměru 3x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelného ošetření pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi ošetřeními stejné partie doporučujeme minimálně týden.



Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu.

Může aplikační hlavice s radiofrekvencí povrch pleti poranit?

Rozhodně ano. Rozsah výkonu přístroje je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Jedna z hlavních výhod přístroje je flexibilita použití se zaměřením a vybrané partie těla. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon naopak pro větší plochy, kde je míra citlivosti menší. Pokud by přístroj nenabízel dostatečný rozsah výkonu, nebylo by možné ho považovat v oblasti estetických přístrojů za efektivní univerzální nástroj pro lifting pleti. Proto je třeba při nastavení výkonu postupovat s maximální opatrností.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních a estetických přístrojů. Přístroj neléčí jakékoliv kožní onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, která významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Představuje ošetření pomocí estetického přístroje nějaké následné omezení klienta?

Po dokončení ošetření pleti může pokožka mírně zarudnout. Tento efekt je způsoben stimulací krevního oběhu a lymfatického systému obličeje. Zbarvení v rádech minut (až hodin v případě intenzity pleťového ošetření) opadne a pokožka se dostane do normálu. Ošetření pleti vodní dermabrazí se někdy označuje jako procedura na obědovou pauzu. Společensky vás nebude následně výrazně limitovat.

Mohu při ošetření pleti přístrojem cítit na pleti nepříjemné pocity až bolest?

Každá z technologií působí na pleť jiným způsobem. Každou aplikační hlavici můžeme vnímat jinak. Při použití radiofrekvence je jako průvodní jev teplo. Při vodní dermabrazii můžete na pleti vnímat působení podtlaku a cirkulaci vody. Plasmové toky můžete na pleti cítit jako mírné štípání. Při

ošetření pleti elektroforézou mírné brnění. U většiny těchto technologií je možné nastavit výkon. Hlavním smyslem nastavení výkonu je pocit vjemu na pleti. Daná technologie musí být na pleti cítit, ale zároveň nesmí její působení překročit míru snesitelnosti.

Je možné do ampulky hlavice elektroforézy přimíchat nějaké další látky a vonné esence?

Ano, ale pouze tak, aby se nezměnila hustota tekutiny. Pokud bude tekutina příliš hustá nebo se v ní budou nacházet mechanické částice, mohlo by dojít k ucpání vodního systému hlavice.

Použití obdobného přístroje je pro mě něco absolutně nového. Jak mám ze začátku přistupovat k použití přístroje?

Podrobně si prostudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Nikam nespěchejte. Začněte s ošetřením pleti pomalu. Působení jednotlivých aplikátorů si postupně vyzkoušejte. Pohybujte se na různých místech obličeje. Vnímejte, jak se na konkrétních místech projevují jednotlivé technologie. Vyzkoušejte pohyb hlavice. „Vytvářejte“ na pleti čárky, kolečka. Osvojíte si tak, jaká technika pohybu je pro vaši pleť optimální. Měňte postupně tempo pohybu a rychlost. Vyzkoušejte si se zvýšenou opatrností další stupně výkonu.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu (aplikační hlavice s radiofrekvencí). Aplikační hlavici dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody. Neplatí pro vyměnitelné aplikátory vodní dermabraze a ampulku se zásobníkem na tekutinu pro hydratační pistoli. Neplatí také pro zásobník tekutiny a odpadní nádobku. Pokud je chcete propláchnout pod proudem tekoucí vody, vždy je nezbytně nutné je z přístroje vyjmout.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Estetický přístroj pro ošetření pleti

BeautyRelax ANTIAGE OXYGEN STUDIO PERFORMANCE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3040**

EAN **8594166123328**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.1.2023

.....
Martin Hrbek, jednatel