


NÁVOD K OBSLUZE

Brýle s fotonovou terapií
Beautyrelax BR-2590

LIGHTMASK COMPACT

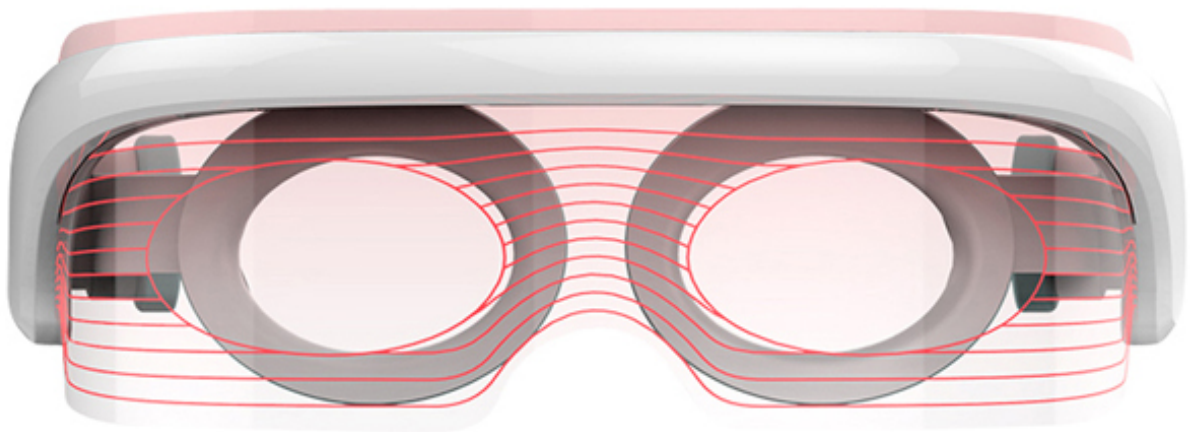

OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT	5
OBSAH BALENÍ	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ BENEFITY	6
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	6
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	6
VIBRACE	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS OVLADAČE	10
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	11
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



OBSAH BALENÍ

- Brýle se světelnou terapií BR-2590
- Kabel s ovládacím panelem
- Powerbanka
- Síťový adaptér 220V
- Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Během použití můžete snadno sledovat např. televizi
- Nízká hmotnost masky nepředstavuje velkou zátěž pro hlavu
- Praktické ovládání pomocí ovladače
- Napájení pomocí vestavěné nabíjecí Li-ion baterie
- Červené světlo: vlnová délka 670 až 690nm
- Modré světlo: vlnová délka 445 až 465nm
- Žluté světlo: vlnová délka 570 až 590nm
- Působení tepla: 40°C
- Výkon: 5W
- Časovač: 20 minut
- Rozměry: 17x10x7cm
- Hmotnost: 325g

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického ošetření velmi populární. Ošetření fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Brýle s fotonovou terapií BeautyRelax Lightmask Compact poskytují fotonovou terapii s pokrytím oblasti kolem očí. Během používání je maximálně chráněn váš zrak. Brýle slibují vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně oblasti kolem očí. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové.

HLAVNÍ BENEFITY

- Rovnoměrné pokrytí obličeje fotonovými světly
- Během použití můžete snadno sledovat např. televizi
- Nízká hmotnost masky nepředstavuje velkou zátěž pro hlavu
- Praktické ovládání pomocí ovladače
- Snadné bezdrátové použití

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

Obličejová maska BeautyRelax Lightmask nabízí 7 barev světla:

1. Červené světlo

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- příznivý vliv na elastická vlákna
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

2. Modré světlo

- aktivuje porphyryny
- chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

3. Žluté světlo


- podporuje absorbování kosmetických přípravků
- přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- napomáhá zpomalovat stárnutí kůže

VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale i pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.



POPIS PŘÍSTROJE

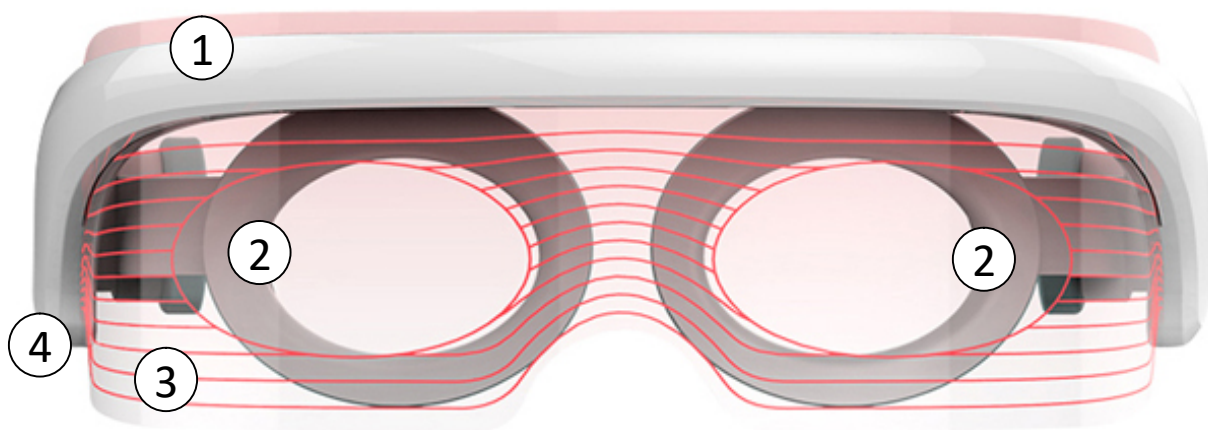

- 1. Tělo přístroje*
- 2. Pryžová ochrana očí*
- 3. Vlákna s fotonovým světlem*
- 4. Zdířka pro konektor kabelu s ovladačem*


POPIS PŘÍSTROJE



5. *Pryžžová ochrana očí*

6. *Stahovací pásek na hlavu*

POPIS OVLADAČE

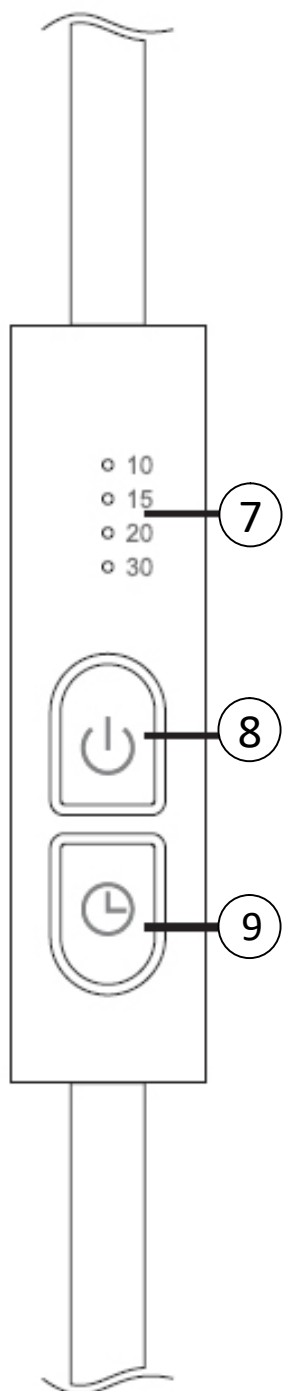

7. Nastavení časovače (v minutách)

8. Tlačítko ON/OFF

9. Tlačítko pro nastavení času

POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost ošetření fotonové terapie umožňuje ošetření všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před použitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte.
2. V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
3. Pásek na brýlích si upravte tak, aby vám bylo jejich použití pohodlné. Necítili jste příliš velký tlak, ale zároveň vám seděly na obličeji.
4. Jako zdroj energie využijte síťový adaptér, který je součástí balení. Pokud nemáte v místě použití zásuvku elektrické sítě, pokud máte k dispozici, využijte prodlužovací kabel (tzv. "prodlužku"). Případně použijte jako zdroj napájení powerbanku, která je součástí balení.
5. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF** v délce 1 sekundy.
6. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** můžete zapnout nebo vypnout funkci vibrací.
7. Dlouhým stiskem tlačítka pro nastavení času zvolíte barvu fotonové terapie. K dispozici jsou červená, modrá a žlutá barva.
8. Krátkým stiskem tlačítka pro nastavení času zvolíte délku časovače: 10, 15, 20 nebo 30 minut.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
10. Doporučená délka jednoho ošetření je 10 až 20 minut.
11. Doporučená frekvence použití je 3x až 4x do týdne.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Obličejová maska LIGHTMASK

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2130**

EAN: **8594166119468**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2023