

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj
BeautyRelax BR-2310

BODYFACE SKINLIFT



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	6
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	7
HLAVNÍ VÝHODY	8
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	8
2 RŮZNÉ APLIKAČNÍ HLAVICE	8
OBSAH BALENÍ	8
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	9
METODY REDUKCE VRÁSEK	9
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	10
RADIOFREKVENCE	11
FOTONOVÉ SVĚTLO	12
ČERVENÉ SVĚTLO	12
RADIOFREKVENCE 3+6	13
APLIKÁTOR SE 3 KOLÍČKY	13
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	16
MAPA CITLIVOSTI PLETI	19
APLIKÁTOR SE 6 KOLÍČKY	20
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE TĚLA	21
DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC	22
POPIS PŘÍSTROJE	24
INSTALACE PŘÍSTROJE	26
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	27
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	28
ČAS APLIKACE	29
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	32
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	34
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	35
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	37
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	38
CERTIFIKACE	38
EU DISTRIBUTOR	38
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	39

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – estetické přístroje pro domácí péči i profesionální provozy

BeautyRelax je česká značka zaměřená na vývoj a distribuci estetických přístrojů určených pro široké spektrum uživatelů. Od roku 2010 přinášíme řešení, která nacházejí uplatnění jak v domácí péči, tak v kosmetických salonech, wellness centrech a dalších profesionálních provozech. Díky širokému sortimentu si u nás může vybrat každý – od běžných uživatelů hledajících komfortní péči v domácím prostředí až po profesionály, kteří potřebují spolehlivé přístroje pro každodenní práci.

Jeden sortiment, mnoho možností využití

Přístroje BeautyRelax jsou navrženy s ohledem na různé úrovně zkušeností i rozdílné nároky na provoz. Nabídka zahrnuje jednodušší modely vhodné pro domácí použití i technicky pokročilejší zařízení určená pro profesionální prostředí.

Použité technologie vycházejí z běžně využívaných postupů v oblasti estetické péče, například:

- Radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud

Každý produkt je určen k používání v souladu s návodem výrobce a platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Pro domácí uživatele

Pro jednotlivce, kteří preferují péči v pohodlí domova, nabízí BeautyRelax přístroje:

- s jednoduchým ovládáním
- určené pro pravidelné osobní použití
- umožňující přizpůsobit péči individuálním potřebám

Domácí přístroje jsou navrženy tak, aby se mohly stát součástí běžné rutiny péče o pleť, tělo nebo vlasy.

Pro salony a profesionální provozy

Pro kosmetická studia, salony a wellness zařízení je v nabídce řada přístrojů:

- vhodných pro častější provoz
- s širšími možnostmi nastavení
- určených pro profesionální použití

Profesionální uživatelé mohou vybírat zařízení podle zaměření provozu, typu poskytovaných služeb a individuálních preferencí.

Přehled kategorií přístrojů

- **Kosmetické přístroje** – určené k péči o vzhled a komfort pleti
- **Přístroje pro péči o tělo** – zaměřené na estetickou péči o postavu
- **Masážní přístroje** – vhodné pro relaxaci a regeneraci
- **IPL přístroje** – určené k dlouhodobému omezení růstu chloupků při pravidelném používání

Výběr konkrétního přístroje vždy závisí na individuálních potřebách, zkušenostech uživatele a způsobu použití.

Každý si vybere to své

Ať už hledáte přístroj pro osobní péči doma, nebo zařízení pro profesionální salon, BeautyRelax nabízí široké spektrum možností. Díky rozmanité nabídce modelů, rozdílným technickým parametrům a různým úrovním obsluhy si u nás najde řešení každý uživatel. Rádi vám pomůžeme s výběrem přístroje, který bude odpovídat vašim požadavkům i plánovanému využití.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte, zejména mřížku ventilátoru.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Použití přístroje **BeautyRelax** není vhodné nebo je **zakázáno** v následujících případech:

Zdravotní omezení

- Těhotenství a období kojení
- Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické přístroje
- Kovové implantáty v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu (šrouby, destičky, výplně, zubní implantáty v blízkosti aplikované oblasti)
- Epilepsie
- Onkologické onemocnění (aktivní nebo v léčbě)
- Závažná onemocnění srdce a cév
- Poruchy krevní srážlivosti
- Autoimunitní onemocnění v aktivní fázi
- Horečnaté a infekční stavy
- Neurologická onemocnění spojená se sníženou citlivostí pokožky

Kožní omezení

- Otevřené rány, čerstvé jizvy, popáleniny
- Akutní záněty kůže, ekzém, lupénka v aktivní fázi
- Silné akné, hnisavé nebo zanícené projevy
- Infekční kožní onemocnění (bakteriální, virové, plísňové)
- Aktivní opar (herpes)
- Silné podráždění, alergická reakce nebo spálená pokožka
- Po čerstvých estetických zákrocích
(botox, výplně, chemický peeling, laser, mezoterapie – minimálně 2–4 týdny dle typu zákroku)

Další omezení použití

- Nepoužívat na očích, na očních víčkách, štítné žlázy a genitálií
- Nepoužívat při snížené schopnosti vnímat teplo nebo bolest
- Nepoužívat na poraněnou pokožku
- Nepoužívat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Důležité upozornění

V případě jakýchkoliv pochybností, chronického onemocnění nebo dlouhodobé léčby doporučujeme konzultaci s lékařem před použitím přístroje. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické použití a nenahrazuje lékařskou péči.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt
- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Boční strana trupu
- Stehna
- Hýždě
- Lýtka



HLAVNÍ VÝHODY

- Podpora vzhledu pleti s jemnými mimickými vráskami
- Podpora přirozené pružnosti kontur obličeje
- Přispívá k pevnějšímu a vypnutějšímu vzhledu pleti
- Podpora přirozených procesů pokožky souvisejících s kolagenem
- Přispívá ke zlepšení vzhledu pokožky v oblastech se sklonem k celulitidě
- Pomáhá sjednotit vzhled pokožky se striemi a drobnými jizvičkami
- Neinvazivní charakter aplikace
- Šetrné a komfortní používání
- Aplikace bez nepříjemných pocitů

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Stolní provedení přístroje
- Kvalitní zpracování jednotlivých komponentů
- Praktické a uživatelsky přívětivé provedení
- Konstrukce navržená s důrazem na dlouhodobé používání
- Možnost plynulé regulace energie radiofrekvenčních vln
- Vhodné pro domácí i profesionální využití
- Frekvence radiofrekvence: 2 MHz
- Nastavení energie: 5 úrovní v rozsahu přibližně 1–15 J/cm²

2 RŮZNÉ APLIKAČNÍ HLAVICE

- 1. Aplikační hlavice se třemi kolíčky - **2Mhz**
- 2. Aplikační hlavice se šesti kolíčky - **2Mhz**

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2310
- Aplikační hlavice se třemi kolíčky
- Aplikační hlavice se šesti kolíčky
- Napájecí kabel 220V
- Návod k obsluze


PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK

Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o Vznik vrásek je přirozenou součástí procesu stárnutí pokožky. S přibývajícím věkem dochází k postupné ztrátě elasticity pleti a ke zpomalení buněčné obnovy. Tyto změny vedou ke snížení přirozené produkce kolagenu, který je klíčový pro pevnost a pružnost pokožky. V důsledku těchto procesů se na povrchu pleti objevují rýhy, které se postupně prohlubují a mohou zasahovat až do vrstvy dermis, tedy podpůrné vrstvy kůže. Výsledkem je pleť s viditelnějšími a hlubšími vráskami. Vrásky lze rozdělit do dvou základních skupin. Dynamické vrásky vznikají opakovaným stahováním obličejových svalů a obvykle se začínají objevovat přibližně kolem 35. roku života. Statické vrásky jsou důsledkem povolení hlubších vrstev kůže a snížené tvorby kolagenu a zpravidla se objevují kolem 40. roku života.




METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti péče o vrásky lze rozdělit na invazivní a neinvazivní. Invazivní metody zahrnují chirurgické zákroky nebo injekční aplikace, při nichž dochází k narušení povrchu pokožky. Tyto postupy jsou spojeny s vyšší zátěží pro organismus a delší dobou rekonvalescence. Neinvazivní metody zahrnují používání kosmetických přípravků, jako jsou krémy, gely, oleje nebo séra, a také přístrojové aplikace využívající technologie určené k povrchové stimulaci pokožky. Tyto technologie se zaměřují na podporu přirozených procesů v pleti, zejména stimulaci kolagenních a elastických vláken. Mezi často využívané neinvazivní technologie patří radiofrekvence, která je oblíbená pro svůj příznivý poměr mezi šetrností a estetickým efektem při pravidelném používání.

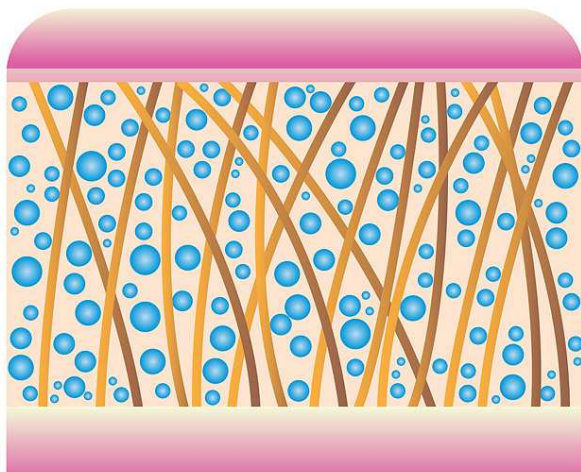

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

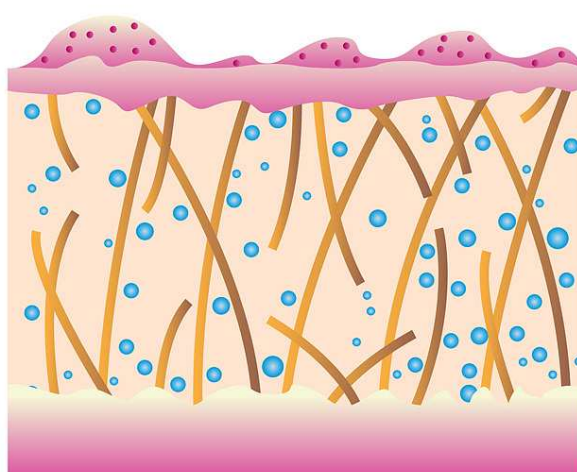

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BEAUTYRELAX BODYFACE SKINLIFT je přístroj určený pro estetické aplikace v oblasti obličeje, krku, dekoltu a vybraných partií těla. Využívá technologii multipolární radiofrekvence. Aplikace je neinvazivní a je zaměřena na podporu pevnějšího a vypnutějšího vzhledu pokožky a celkové zlepšení jejího vzhledu. Přístroj je vyroben s důrazem na kvalitní zpracování jednotlivých komponentů a praktické použití. Konstrukce je navržena pro dlouhodobé používání. Umožňuje plynulou regulaci energie radiofrekvenčních vln a je dostupný ve stolním provedení. Pro použití se doporučuje aplikace vodivého gelu (např. sonogelu); jiný spotřební materiál není při běžném používání vyžadován. Provoz přístroje je navržen s ohledem na efektivní a úsporné využití elektrické energie.






NO PAIN
NO SCARS
NO SCALPEL!!!



 **FACE LIFTING**
NON - INVASIVELY

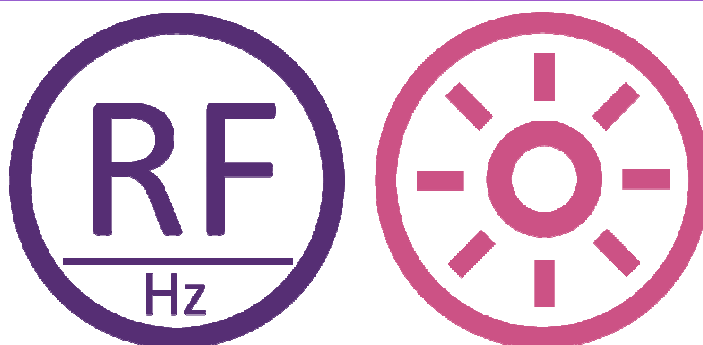

RADIOFREKVENCE

Stručný princip fungování technologie

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln s definovaným výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční technologie vytváří v pokožce tepelný efekt, který působí zejména ve vrstvě dermis. Dodaná energie podporuje přirozené procesy pokožky související s kolagenem a elastinem a přispívá ke zlepšení celkového vzhledu pleti. Technologie je navržena tak, aby umožnila cílenou aplikaci energie i v oblastech s vyšší vrstvou podkožní tkáně. Výsledkem může být viditelně hladší a pevnější vzhled pokožky a optické zlepšení kontur aplikovaných partií.




FOTONOVÉ SVĚTLO

Stručný princip fungování technologie

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření s různou frekvencí. Dosahuje různých vlnových délek přibližně v intervalu 390 až 760 nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo přibližně v rozsahu 400 až 800 nm. Při světelných kosmetických aplikacích proniká světlo do pokožky ve formě energie tvořené fotony. Různé vlnové délky světla mohou působit odlišně na jednotlivé vrstvy pokožky, a proto se využívají v různých typech kosmetické péče o pleť. Světelná technologie je v kosmetické praxi používána jako neinvazivní metoda podporující celkový vzhled pokožky a její přirozené procesy. Světlo může působit na buněčné struktury prostřednictvím světlocitlivých receptorů a přispívat k lepší kondici pleti. Díky svému šetrnému a komfortnímu charakteru se světelná technologie využívá v oblasti kosmetické péče o pleť a je oblíbenou součástí moderních kosmetických přístrojů.

ČERVENÉ SVĚTLO

- Podpora přirozených procesů pokožky souvisejících s kolagenem
- Přispívá k lepšímu vzhledu elasticity pleti
- Může napomáhat lepší absorpci přípravků aplikovaných na pokožku
- Podpora mikrocirkulace v povrchových vrstvách pokožky
- Přispívá k celkovému sjednocení vzhledu pleti
- Vlnová délka: 625 nm

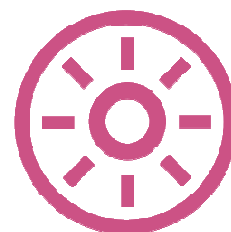

RADIOFREKVENCE 3+6

Aplikátor s multipolární radiofrekvencí (3 a 6 kolíčků)

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln s definovaným výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční technologie vytváří v pokožce tepelný efekt, který působí zejména ve vrstvě dermis. Dodaná energie podporuje přirozené procesy pokožky související s kolagenem a elastinem a přispívá ke zlepšení celkového vzhledu pleti. Technologie umožňuje cílenou aplikaci energie i v oblastech s vyšší vrstvou podkožní tkáně a může přispívat k hladšímu a pevnějšímu vzhledu pokožky a kontur aplikovaných partií. Estetický přístroj BEAUTYRELAX BODYFACE SKINLIFT umožňuje aplikaci radiofrekvenčních vln prostřednictvím dvou aplikačních hlavic:

- Aplikátor se 3 kolíčky (vhodný pro menší plochy)
- Aplikátor se 6 kolíčky (vhodný pro větší plochy)

APLIKÁTOR SE 3 KOLÍČKY

Aplikační hlavice je vhodná zejména pro použití v oblasti obličeje a dekoltu, lze ji však použít i na jiné části těla. Díky menším rozměrům umožňuje přesnější aplikaci na menších nebo hůře dostupných plochách. Při používání věnujte pozornost nastavení intenzity energie radiofrekvenčních vln a délce kontaktu aplikátoru s pokožkou. Doporučuje se postupná aplikace krátkým přikládáním hlavice na jednotlivé části pokožky. Pokud je aplikace prováděna druhé osobě, je vhodné průběžně komunikovat a sledovat subjektivní vnímání tepla na pokožce. Podle těchto pocitů lze upravit intenzitu nastavení přístroje.



Malé rozměry aplikačních kolíčků jsou přímo předurčeny pro aplikaci menších částí těla s horší dostupností pro velké aplikační hlavice. Ideální je použití pro oblast kolem očí. Dbejte maximálně zvýšenou pozornost nastavení intenzity a délky kontaktu aplikační hlavice s pletí. Zejména v oblasti kolem očí je pleť velmi tenká a vysoce citlivá.



Při použití přístroje pravidelně hydratujte pleť pomocí sonogelu. Přítomnost sonogelu je velice důležitá, aby se radiofrekvenční vlny mohly co nejlépe navázat na povrch pleti. Sonogel také zároveň napomáhá **chránit pokožku proti spálení**. Přesto vždy regulujte energii radiofrekvenčních vln se zvýšenou opatrností. Výkon dávkujte postupně od nejnižší úrovně.





Snažte se při použití v oblasti pod bradou, krku a dekoltu vyhnout intenzivní stimulaci míst, kde se nachází štítná žláza. Letmý kontakt nevadí. Dlouhá, intenzivní stimulace je zakázána.



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

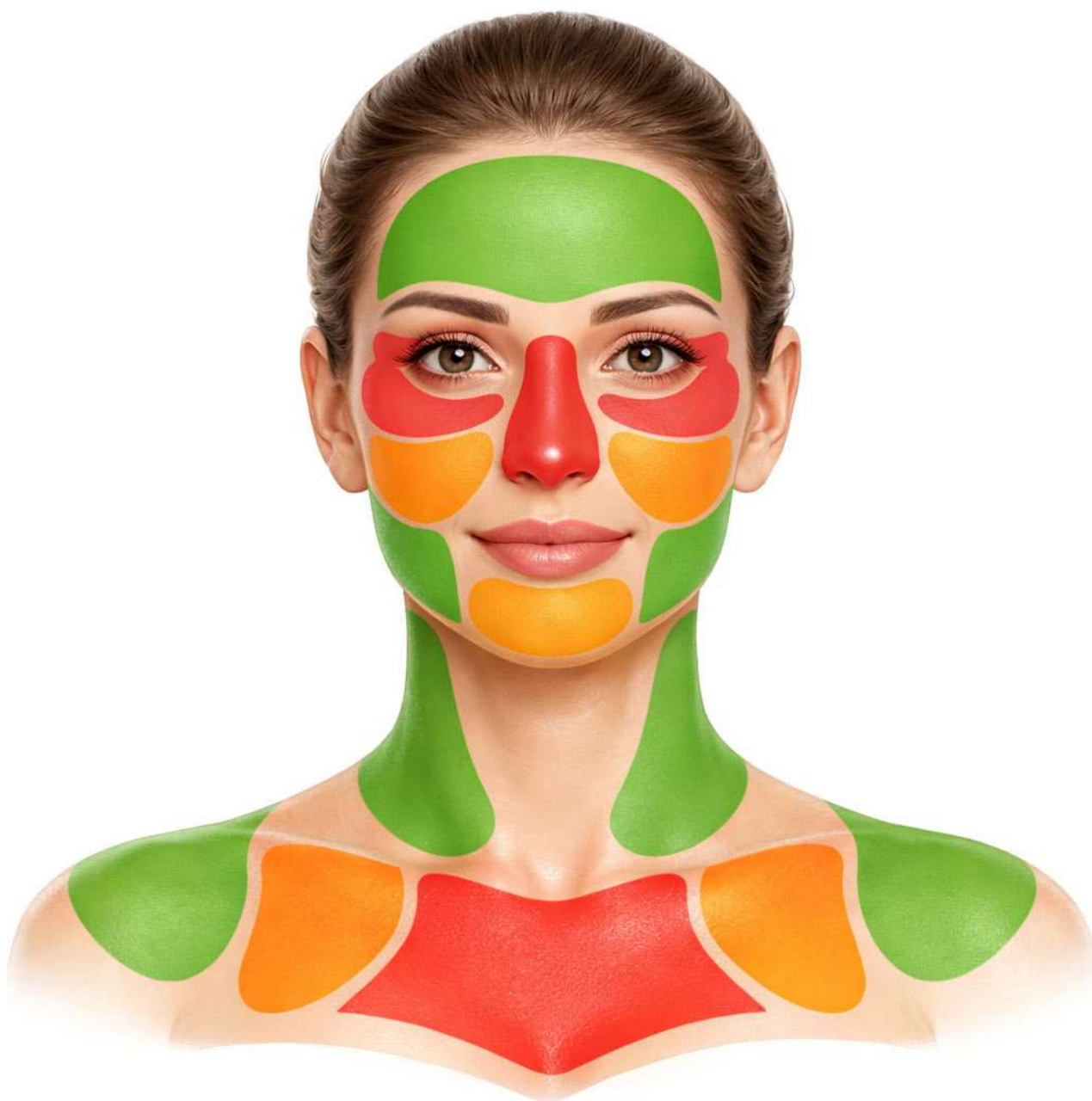

- NÍZKÁ CITLIVOST
- STŘEDNÍ CITLIVOST
- VYSOKÁ CITLIVOST

APLIKÁTOR SE 6 KOLÍČKY

Aplikační hlavice je určena především pro použití na větších tělesných partiích, lze ji však použít i na dalších vybraných oblastech těla. Při používání aplikátoru se 6 kolíčky věnujte zvýšenou pozornost nastavení intenzity energie radiofrekvenčních vln a délce kontaktu hlavice s pokožkou. Doporučuje se postupná aplikace krátkým přikládáním hlavice na jednotlivé části pokožky (tzv. metoda postupného přikládání). Tímto způsobem lze rovnoměrně projít vybranou oblast pokožky. Aplikátor je vhodný zejména pro větší plochy pokožky a pro oblasti, kde je žádoucí podpora pevnějšího a sjednocenějšího vzhledu pleti.



POVOLENÉ PARTIE APLIKACE TĚLA



DOPORUČENÁ METODA POUŽITÍ HLAVIC


Při použití aplikační hlavice na vybrané části těla je třeba vždy vycházet z optimálního načasování délky kontaktu aplikačních kolíčků s pletí a vhodného dávkování intenzity radiofrekvenčních vln. V tomto směru si můžete pohyby přizpůsobit podle sebe. V případě aplikace druhé osoby aktivní komunikací sledujte míru, jakou vnímá projev tepla působením radiofrekvence. Zde jsou doporučené dvě možnosti práce s aplikační hlavici:

plynulý pohyb

Aplikační hlavici se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavici „na sucho“.** Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem. **Při konstantním nastavením úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem.**

razítkování

Při aplikaci vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu 1 až 2 sekundy (tzv. razítkováním). Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu. Aplikace pleti by nikdy neměla být nesnesitelně bolestivá. Akceptovatelné je pouze pocit vnímání tepla na snesitelné úrovni. Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň aplikace, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k aplikaci s maximální pečlivostí a šetrností.

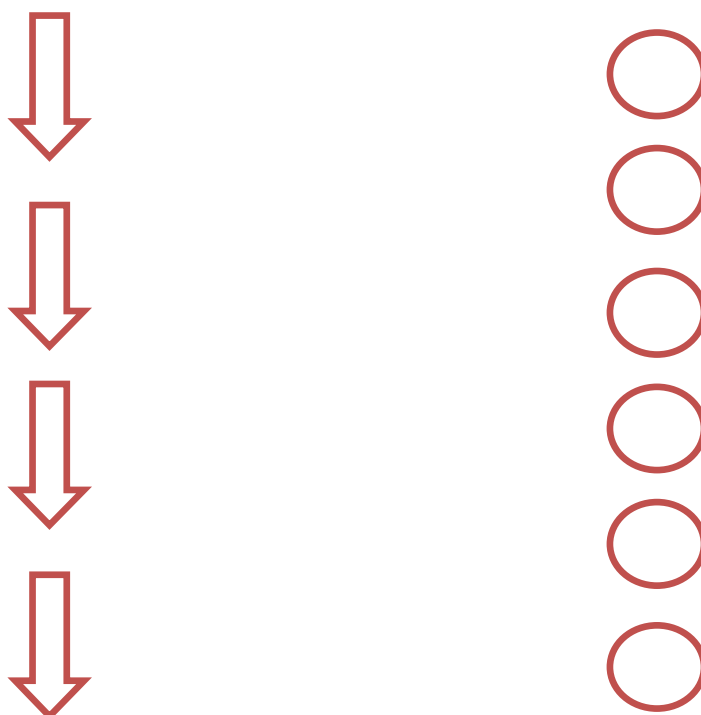



plynulý pohyb



razítkování

POPIS PŘÍSTROJE



1. Tělo přístroje
2. Stojánek pro ukotvení aplikační hlavice s třemi kolíčky
3. Světelná indikace nastavení intenzity (1 až 5)
4. Tlačítka nastavení intenzity (snížení, zvýšení)
5. Tlačítko **ON/OFF**
6. Aplikační hlavice s třemi kolíčky
7. Aplikační hlavice se šesti kolíčky

POPIS PŘÍSTROJE



8. Mřížka ventilátoru

NESMÍ BÝT NIKDY ZAKRYTA BĚHEM PROVOZU PŘÍSTROJE

9. Hlavní tlačítko **ON/OFF**

10. Vstup pro napájecí kabel

11. Vstup pro zapojení aplikační hlavice (vždy pouze jedna)

INSTALACE PŘÍSTROJE

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Vždy dbejte na to, aby nebyla zakryta mřížka ventilátoru **(8)**. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
3. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje **(10)**. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
4. K hlavní jednotce připojte jednu z aplikačních hlavic dle vašeho výběru. Využijte vstup na zadní straně přístroje **(11)**. Uvnitř vstupu jsou umístěny dva drobné jehlovité kolíčky. Při zapojení aplikační hlavice se nerozlišuje polarita. Můžete tedy připojit oběma možnými způsoby.
5. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
6. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **(9)** do polohy 1. Zapnutí přístroje doprovází modrá světelná signalizace po obvodu přístroje.
7. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **(9)** do polohy 0.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utažení
prstence
zašroubováním**




OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapnete stisknutím kulatého tlačítka na zadní straně přístroje do polohy 1.
2. Zapnutí přístroje doprovází modrá světelná signalizace po obvodu přístroje. Po zapnutí tlačítka se přístroj nachází v pohotovostním režimu.
3. Výchozí úroveň intenzity je nastavena na hodnotě 1.
4. Pomocí tlačítek se šipkami **doprava/doleva** si můžete změnit nastavení intenzity tlačítko **doprava** (zvýšení)/tlačítko **doleva** (snížení) intenzity.
5. Stiskem tlačítka **ON/OFF** spustíte činnost aplikační hlavice.
6. Průběh činnosti aplikační hlavice doprovází blikající červená signalizace.
7. Intenzitu můžete v průběhu používání aplikační hlavice kdykoliv změnit pomocí tlačítek se šipkami **doprava** (zvýšení)/**doleva** (snížení).
8. Stiskem tlačítka **ON/OFF** se činnost aplikační hlavice přeruší a přístroj se přepne do pohotovostního režimu. Pro pokračování činnosti aplikační hlavice stiskněte znovu tlačítko **ON/OFF**.
9. V pohotovostním režimu po přerušení činnosti aplikační hlavice si přístroj pamatuje poslední nastavenou intenzitu radiofrekvenčních vln.
10. Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu po uplynutí 30 minut používání aplikační hlavice. Poté můžete pokračovat v používání přístroje nebo přístroj vypněte.
11. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na zadní straně do polohy 0.
12. V rámci udržení co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnutý ventilátor má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.

DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST

*PŘI APLIKACI PLETI VŽDY ZAČÍNEJTE NA **HODNOTĚ INTENZITY 1**. ZVYŠUJTE POMALU SE **ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ**. NE VŽDY VYUŽIJETE PLNÝ ROZSAH VÝKONU!*

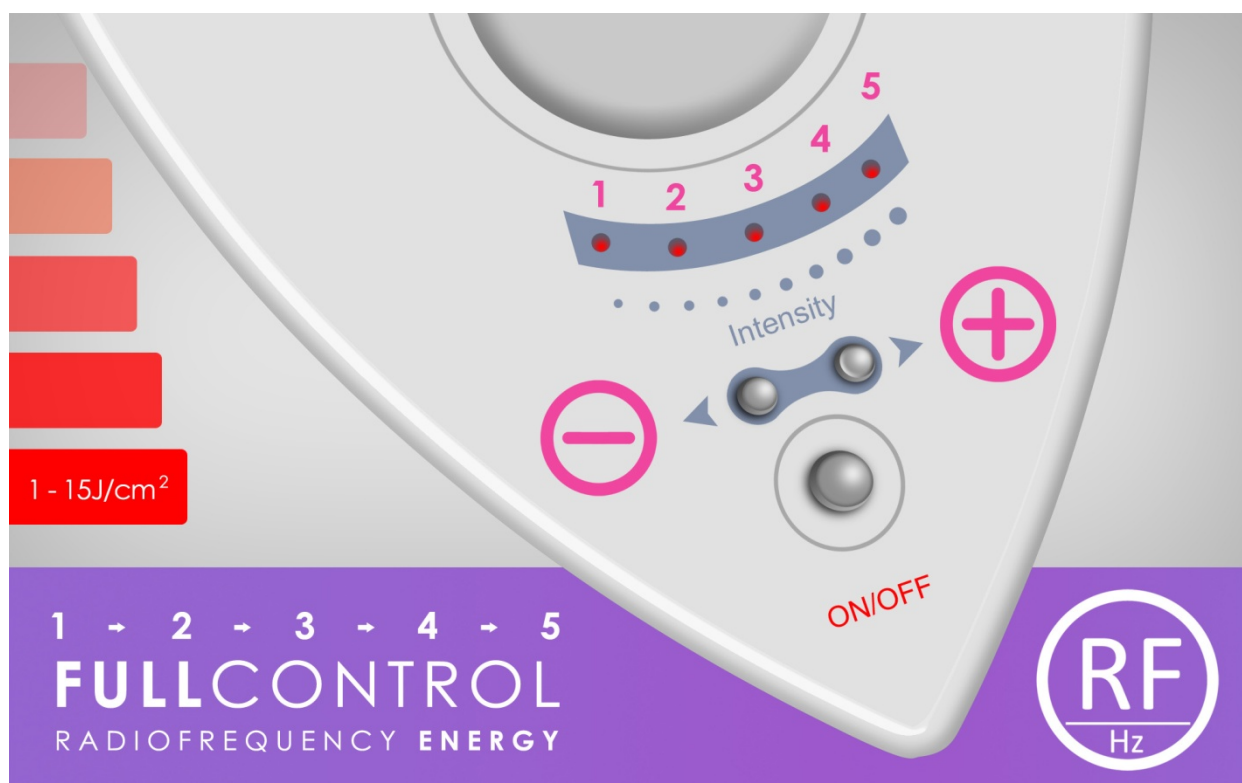

ČAS APLIKACE

Tvář/vybraná část na těle (6 kolíčková hlavice)

Používat hlavici se 3 kolíčky

Čas na jednotlivé oblasti

Oblast	Doporučený čas
Čelo	2–3 min
Mezi obočím	1 min
Oční okolí (po kostním okraji)	1–2 min
Tváře	3–4 min
Nad horním rtem + okolí úst	1–2 min
Brada a kontura čelisti	2–3 min

Celkový čas tváře:

10 až 15 minut, maximálně 20 minut

Doporučená intenzita

- začít **stupeň 1–2 (dle pocitu uživatele)**
- po 2–3 procedurách lze **stupeň 2–3 (dle pocitu uživatele)**

Krk

Používat **hlavici se 3 kolíčky**

Vyhnout se oblasti **štítné žlázy (střed krku)**

Čas

Oblast	Doporučený čas
Boční části krku	2–3 min
Pod bradou	1–2 min

Celkový čas krku:
3–5 minut

Intenzita

- **stupeň 1–2 (dle pocitu uživatele)**

Krk má tenkou kůži → nepřehřívat.

Dekolt

Používat:

- **3 kolíčky (jemná práce)**
nebo
- **6 kolíčků (rychlejší práce)**

Čas

Oblast	Doporučený čas
Střed dekoltu	3–4 min
Směrem k ramenům	3–4 min

Celkový čas dekoltu:
6–8 minut

Intenzita

- stupeň 2–3 (dle pocitu uživatele)

Celkový čas jedné procedury

Partie	Čas
Tvář	10–15 min
Krk	3–5 min
Dekolt	6–8 min

Celkem: 20–25 minut

(maximum doporučené pro komfort a bezpečnost)

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teple 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.
- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).
- Povrch aplikační hlavice vždy dokonale osušte. Zabráníte tak oxidaci povrchu a ztrátě výkonu.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V jakém stavu by měla být pokožka před použitím přístroje?

Pokožka by měla být čistá a zbavená make-upu i běžných povrchových nečistot. Před použitím přístroje doporučujeme pleť jemně vyčistit běžnými kosmetickými přípravky určenými pro každodenní péči o pleť. Pokud je to možné, lze využít také šetrné přístrojové čištění, například pomocí rotačního kartáčku nebo ultrazvukové špachtle. Doporučujeme vyhnout se bezprostředně před aplikací metodám intenzivního mechanického čištění, například diamantové mikrodermabrazii, která může pokožku více zatížit.

Jaké přípravky je vhodné použít po aplikaci radiofrekvence?

Po přístrojové aplikaci je vhodné pokožku dostatečně hydratovat. Doporučuje se použití běžného hydratačního krému nebo jiného kosmetického přípravku určeného pro péči o pleť. V den použití přístroje je vhodné vyhnout se dalším náročnějším kosmetickým procedurám, například intenzivnímu mechanickému čištění pleti. Pokožka může být krátkodobě citlivější a může se objevit mírné zarudnutí, které obvykle postupně odezní. V den aplikace se také doporučuje vyhnout například návštěvě sauny nebo jinému výraznému tepelnému zatížení pokožky.

Jaké výsledky lze při používání očekávat?

Projevy na pokožce po použití přístroje jsou individuální a mohou se lišit v závislosti na typu pleti, věku uživatele a celkovém způsobu péče o pokožku. Bezprostředně po aplikaci může být pokožka mírně zarudlá a může působit svěžím vzhledem, částečně také díky použití vodivého gelu. Během aplikace dochází k lokálnímu zahřátí pokožky. Radiofrekvenční technologie je v kosmetické praxi využívána jako součást pravidelné péče o pleť. Pro zachování efektu je možné aplikaci opakovat v pravidelných intervalech. Doporučený minimální odstup mezi aplikací stejné oblasti je přibližně jeden týden.

Jak lze působení radiofrekvence při aplikaci vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pokožkou může uživatel vnímat postupně se zvyšující pocit tepla. Tento pocit je běžným průvodním jevem působení radiofrekvenční energie na povrchu pokožky. Intenzita vnímaného tepla se může lišit podle nastavení přístroje, aplikované oblasti a individuální citlivosti pokožky.

Může nesprávné použití způsobit podráždění pokožky?

Při nesprávném používání, například při příliš dlouhém kontaktu aplikátoru s jedním místem nebo při nastavení vysoké intenzity, může dojít k nepříjemnému pocitu tepla nebo podráždění pokožky. Proto doporučujeme postupovat při používání opatrně, začínat s nižší intenzitou a sledovat reakci pokožky.

Proč je důležité čistit aplikační hlavici po každém použití?

Po každém použití doporučujeme odstranit zbytky vodivého gelu z kontaktní plochy aplikátoru. Pro hygienické použití lze použít například dezinfekční přípravek na bázi alkoholu. Po vyčištění je vhodné aplikační hlavici důkladně osušit měkkým hadříkem.

Je přístroj zdravotnickým prostředkem?

Přístroj není zdravotnickým prostředkem. Je určen pro kosmetické použití a péči o vzhled pokožky.

Má přístroj certifikaci?

Přístroj splňuje požadavky platné pro zařízení tohoto typu na evropském trhu.

Je přístroj vodotěsný?

Přístroj není vodotěsný. Žádná jeho část není určena pro mytí pod tekoucí vodou. Při čištění postupujte podle doporučení uvedených v návodu.



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen ke **masážním a relaxačním** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Estetický přístroj BODYFACE SKINLIFT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2310**

EAN 8594166119130

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60601-1-2:2007 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008 EN 60601-1:2006

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohrátí pleti teplem.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

15.1.2022

The image shows a handwritten signature in blue ink over a light blue background. Below the signature is the company logo for SANTADRIA s.r.o., which includes the company name and address: Mojmirovo nám. 75/2, 612 00 Brno, and contact information: DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160.

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

.....
Martin Hrbek, jednatel