

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj pro lifting pleti
BeautyRelax BR-2822 THERMAGE
FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	3
UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
DOPORUČENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	5
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	6
OBSAH BALENÍ	6
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	7
METODY REDUKCE VRÁSEK	7
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	8
RADIOFREKVENCE	8
POPIS PŘÍSTROJE	9
POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU + POPIS APLIKÁTORU	10
POPIS DISPLEJE	11
POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ	12
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	14
INSTALACE PŘÍSTROJE	15
INSTALACE APLIKAČNÍ HLAVICE	15
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	16
DOPORUČENÁ METODA POHYBU PO PLETI	17
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	18
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	19
DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA	21
ČAS OŠETŘENÍ	22
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	22
ŽIVOTNOST APLIKAČNÍ HLAVICE	22
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	23
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	24
PÁR VĚT ZÁVĚREM	26
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	27
CERTIFIKACE	27
DOVOZCE	27
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	28

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření pleti pracuje s technologií, která je bezbolestná a bezpečná. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat vrstvu dermis, kde se nachází kolagenní a elastická vlákna zodpovědná za kondici pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví (doktor, dermatolog).

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologii, která při použití za specifických podmínek napomáhá zvýšení pružnosti pleti.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel). Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlépejší. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Multipolární radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost navázat na pleť.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po ošetření dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není vodotěsný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Cukrovka v nejzávažnějším stádiu
- Vysoký krevní tlak
- Kožní onemocnění
- Kardiostimulátor
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo ošetření pleti). Nevztahuje se na zubní implantáty. Vztahuje se na případné kovové předměty ihned pod povrchem pleti.
- Těhotenství
- V případech, kdy je pleť silně postižena akné (velké boláky s červenou a bílou hlavičkou)
- Pokud není pokožka po operativním zákroku důkladně zhojena

DOPORUČENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Obličej
- Krk
- Dekolt



ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast spánků
- Rty



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavičce. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky.



HLAVNÍ VÝHODY

- Redukce jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Zpevnění a vypnutí pleti
- Remodelace kolagenních vláken
- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken
- Určeno pro všechny typy pleti bez omezení
- Neinvazivní ošetření (žádná část aplikátoru nepronikne mechanicky skrz pokožku)
- Samotné ošetření zabere pouhých několik minut
- Skutečně účinné řešení pro zralou a unavenou pleť
- Ošetření pleti bez zátěže organismu s maximální bezpečností použití
- Určeno pro obličej, krk a dekolt
- Praktické stolní provedení se síťovým napájením
- Ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů (na pleti je cítit pouze příjemné teplo)
- Vysoká užitná hodnota přístroje s dlouhou životností aplikátorů
- Optimalizovaný výkon pro maximální účinek při zachování šetrnosti k pleti
- Vysoká účinnost ošetření i velmi zralé pleti s výraznými hlubokými vrásky
- Podpora tvorby vlastního kolagenu a okamžitá remodelace elastických vláken
- Zjemnění jizviček a nerovností pleti např. po akné
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje
- Pleť působí nesrovnatelně svěžím a mladistvým vzhledem
- Přístrojový lifting se skutečně dosažitelnými výsledky pro pleť velmi šetrnou metodou
- Neinvazivní ošetření (žádná část aplikátoru neproniká mechanicky přes povrch pleti)
- Stálá kontrola kvality kontaktu povrchu aplikační hlavičky s pletí (ideální v případě, kdy jedna osoba ošetřuje pleť druhé osoby)
- Certifikovaný přístroj
- Frekvence radiofrekvence: **1Mhz**
- Rozsah dávkování energie: **20 úrovní**

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2822
- 1x Aplikační hlavičky s vyměnitelnou hlavičkou
- 1x Hlavička 1: 4 kontaktní piny
- 1x Hlavička 2: 36 kontaktních pinů
- 1x Hlavička 3: 64 kontaktních pinů
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Sonogel
- 1x Návod k obsluze

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojové ošetření pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

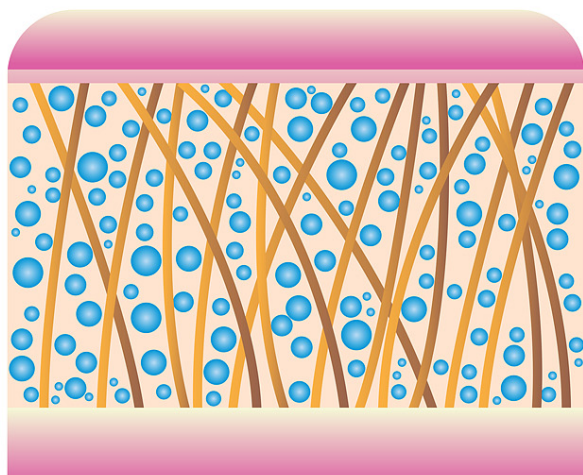

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

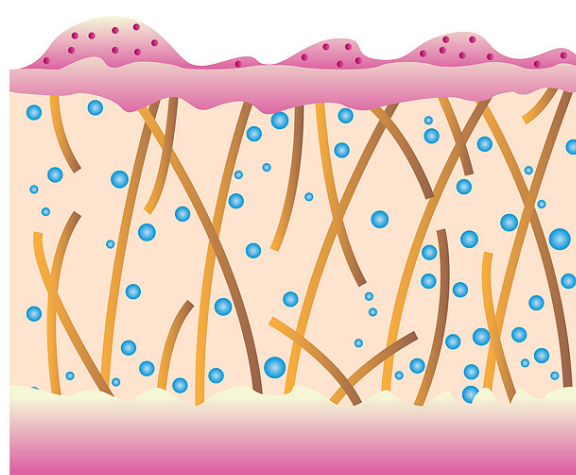

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Fraxlift Thermage Tripple Attack je profesionální estetický přístroj pro neinvazivní lifting pleti. Pokročilá technologie dávkované energie multipolární radiofrekvence je přenášena do pleti prostřednictvím třech vyměnitelných aplikátorů. Různé rozměry aplikačních hlavice umožňují velmi precizní ošetření všech záhybů obličeje, krku a dekoltu. Efektivně vyhladí i výrazné hluboké vrásky. Nekompromisní liftingový efekt. Možnost plynulého dávkování výkonu. Přizpůsobí se každému uživateli s různou tloušťkou podkožní tukové tkáně. Stálá kontrola kvality kontaktu povrchu aplikační hlavice s pleť. Stolní provedení.



RADIOFREKVENCE

Stručný princip fungování technologie

Aplikační hlavice generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur. Technologie multipolární radiofrekvence je také někdy označeno zkráceně jako **THERMAGE**.



POPIS PŘÍSTROJE

1. Hlavní jednotka přístroje
2. Displej
3. Hlavice 64 kontaktních pinů
4. Hlavice 4 kontaktní piny
5. Hlavice 36 kontaktních pinů
6. Aplikační hlavice
7. Konektor pro aplikační hlavici
8. Konektor pro napájecí kabel



POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko snížení intenzity působení radiofrekvence
2. Tlačítko zvýšení působení radiofrekvence
3. Tlačítko **START/STOP**
4. Tlačítko délky působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)
5. Tlačítko délky působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)
6. Tlačítko **MODE**




POPIS APLIKÁTORU

1. Tlačítko **SPOUŠŤ** (aktivace působení radiofrekvence)
2. Tlačítko pro uvolnění hlavice
3. Vyměnitelná hlavice



POPIS DISPLEJE

1. Intenzita působení radiofrekvence - rozsah od 1 do 20
2. Délka působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)
3. Program CTN - kontinuální působení radiofrekvenčních vln
4. Program PULS - pulzní působení radiofrekvenčních vln
5. Čas ošetření
6. Kontrola optimálního kontaktu hlavice s pletí
7. Číslo připojené hlavice
8. Signalizace působení radiofrekvenčních vln
9. Signalizace stisknutí tlačítka spouště na aplikační hlavici
10. Ukazatel působení radiofrekvenčních vln v časovém úseku (program PULS)
11. Ukazatel START/STOP

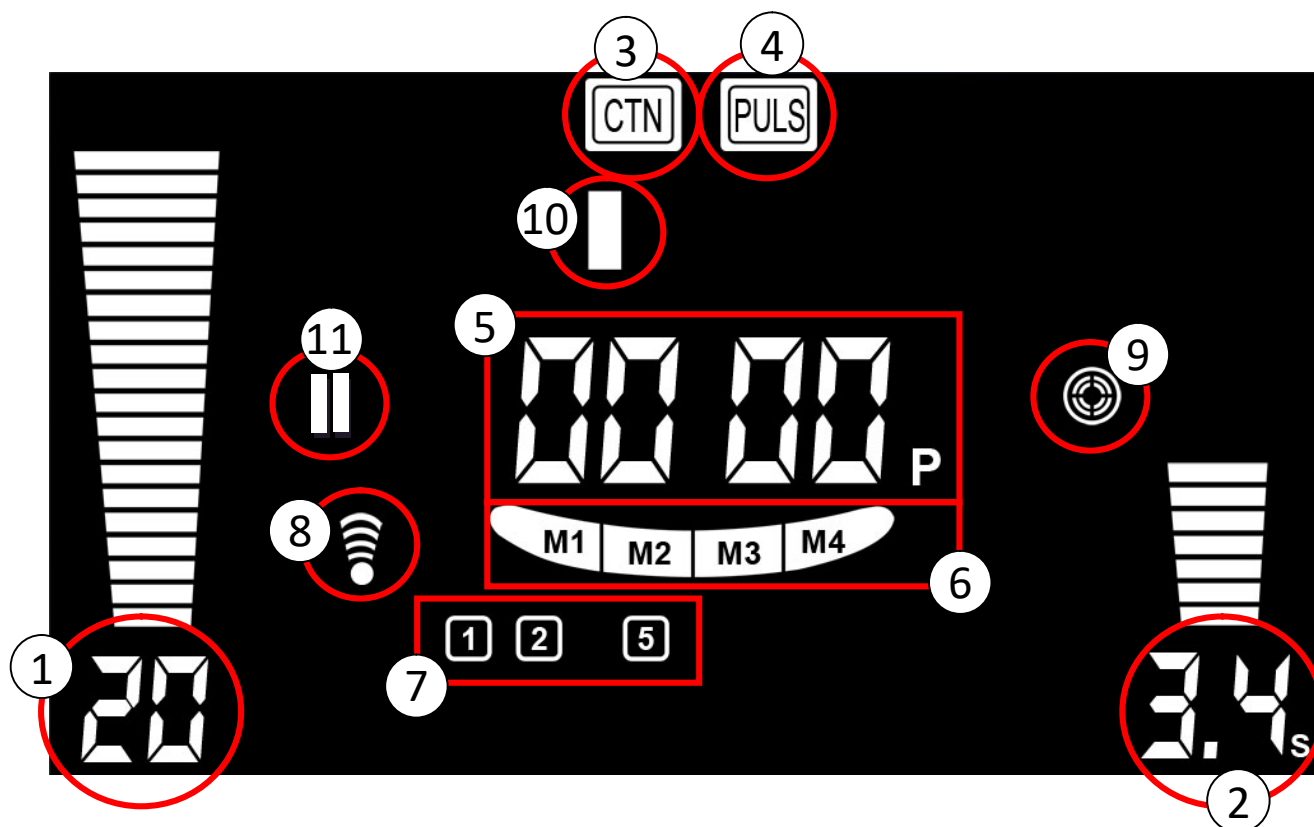

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Pomocí tlačítek na ovládacím panelu si můžete nastavit celou řadu funkcí. Základní technologie působení multipolární radiofrekvence je stále stejná. Přesto si můžete nastavit celou řadu parametrů, abyste byli schopni ošetřit pleť s maximální efektivitou. Všechny nastavené funkce jsou zobrazeny na displeji. Zde vám podrobně popíšeme, jaký je význam jednotlivých symbolů na displeji.

1. Intenzita působení radiofrekvence - rozsah od 1 do 20

Možnost nastavení výkonu radiofrekvence v rozsahu od 1 (nejnižší) do 20 (nejvyšší). Výkon si tak můžete snadno dávkovat pro ošetření pleti vybrané partie obličeje, krku nebo dekoltu. Výkon radiofrekvence můžete v průběhu použití přístroje kdykoliv změnit.

2. Délka působení radiofrekvenčních vln v sekundách (program PULS)

Program **PULS** umožňuje automatické působení radiofrekvence v přednastavený čas. Čas je uveden v sekundách. Při podržení tlačítka spouště na aplikační hlavici působí radiofrekvence v přesně nastaveném časovém intervalu. Dalším stiskem spouště můžete působení radiofrekvence v nastaveném časovém úseku opakovat.

3. Program CTN - kontinuální působení radiofrekvenčních vln

Program **CTN** je určen pro kontinuální působení radiofrekvence. Můžete si tak sami regulovat, jak dlouho bude působení radiofrekvence probíhat. Radiofrekvenci si dávkujete ručně pomocí spouště na aplikační hlavici. Přístroj pracuje ve dvou základních programech – **CTN** a **PULS**. Mezi programy si můžete přepínat pomocí tlačítka **MODE**.

4. Program PULS - pulzní působení radiofrekvenčních vln

Symbol potvrzuje, že přístroj nyní pracuje v programu **PULS**.

5. Čas ošetření

Čas, po který radiofrekvence působí na pleť. Máte tak stálý přehled, jak dlouho s přístrojem na pleti pracujete. Hodnoty jsou uvedeny ve formátu **MINUTY:SEKUNDY**. Ukazatel času má obrovskou výhodu. Započítává pouze čas, kdy pleť stimulujete radiofrekvencí. Není započten čas, kdy je přístroj v pohotovostním režimu. Máte tak k dispozici velmi přesný údaj, jak dlouho již na pleti s aplikátorem pracujete. Vždy je dobré udržet čas ošetření v rozumných hodnotách.

6. Kontrola optimálního kontaktu hlavice s pletí

Přístroj je schopen rozpoznat, jak kvalitní je kontakt jednotlivých pinů hlavic s pletí. To je praktické zejména v případech, kdy přístrojem ošetřujete druhou osobu. Pokud svítí všechny symboly - 1, 2, 3, 4 - hlavice je v plném kontaktu s pletí a ošetření je tak maximálně efektivní.

7. Číslo připojené hlavice

Přístroj je schopen rozpoznat, jaký typ hlavice je k přístroji připojen. Každá hlavice má své číslo. Po připojení hlavice s aplikační hlavicí se zobrazí na displeji číslo hlavice.

8. Signalizace působení radiofrekvenčních vln

Symbol zobrazuje rozsah působení radiofrekvenčních vln. Vždy, když jsou čárky u tohoto symbolu aktivní, máte jistotu, že probíhá přenos radiofrekvence do pleti. To je praktické zejména v případech, kdy přístrojem ošetřujete druhou osobu.

9. Signalizace stisknutí tlačítka spouště na aplikační hlavici

Symbol zobrazuje, zda je tlačítko spouště na aplikační hlavici dostatečně stisknuté. Je to vizuální kontrola pro vás, že je tlačítko spouště funkční a správně reaguje na stisk prstu.

10. Ukazatel působení radiofrekvenčních vln v časovém úseku (program PULS)

V programu **PULS** si můžete nastavit časový rozsah působení radiofrekvence. Radiofrekvence působí vždy, když držíte prstem tlačítko spouště na aplikační hlavici. Abyste měli vizuální kontrolu, kdy radiofrekvence reálně působí na pleť, na displeji je pohyblivý ukazatel. Symbol se pohybuje zleva doprava.

11. Ukazatel START/STOP

Symbol zastavení činnosti přístroje. Všechny funkce můžete snadno nastavit v pohotovostním režimu. Pohotovostní režim a režim činnosti přístroje aktivujete pomocí tlačítka START/STOP. Pohotovostní režim potvrzuje zobrazení symbolu dvou čárek.

POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

Estetický přístroj pro lifting pleti BeautyRelax BR-2822 je svými schopnostmi předurčen pro komerční provoz. Velký rozsah nastavení funkcí umožňuje přizpůsobit se individuálním potřebám velkého počtu uživatelů. Důležitý je nejen rozsah nastavení funkcí, ale také variabilita aplikačních hlavic. Součástí balení jsou 3 hlavice, které můžete libovolně měnit. Mají různý rozměr a počet kontaktních pinů. Oblasti ošetření obličeje, krku a dekoltu mají velmi členitý reliéf pleti. Rozdíl v hlavicích je tedy pouze ve velikosti plochy, kterou jsou schopny povrch pleti pokrýt. Není přesně stanoveno, v jakých případech použít konkrétní typ hlavice. Pravidelným používáním přístroje budete schopni velmi dobře rozpoznat, která hlavice bude v daném případě optimální.



Hlavice
64 kontaktních pinů



Hlavice
4 kontaktní piny



Hlavice
36 kontaktních pinů

INSTALACE PŘÍSTROJE

- 1.** Hlavní jednotku přístroje se vždy snažte umístit na rovnou pevnou plochu. Na spodní straně je umístěna mřížka ventilátoru.
- 2.** Vždy dbejte na to, aby spodní část přístroje nebyla zakryta jakoukoliv bariérou. Především mřížka ventilátoru. Ve spodní straně jednotky je třeba ponechat určitý volný prostor, aby mohl vzduch přirozeně cirkulovat. Pokud byste vytvořili mechanickou bariéru, přístroj by neměl dostatečnou možnost chlazení a došlo by k jeho přehřátí a nenávratnému poškození.
- 3.** Při plánování umístění přístroje berte v potaz dva základní aspekty. Umístění by mělo vycházet z délky nabíjecího kabelu. Napájecí kabel by neměl být příliš napnutý. Přístroj by měl být umístěn tak, aby kabel spojující ruční část přístroje a základnu nebyl při ošetření obličeje příliš napnutý. Berte v potaz rozsah pohybu ruční části přístroje. Snažte se vyvarovat převrácení základny přístroje případnému spadnutí na zem.
- 4.** Výměnu aplikační hlavice provádějte vždy, jakmile je přístroj vypnutý.
- 5.** K napájení přístroje používejte výhradně kabel, který je součástí balení.
- 6.** Napájecí kabel přístroje používejte přes prodlužovací kabel s tlačítkem **ON/OFF**. Tlačítko slouží jako hlavní tlačítko pro kompletní vypnutí přístroje.

INSTALACE APLIKAČNÍ HLAVICE

- Pro uvolnění hlavice stiskněte červené tlačítko. Hlavice se uvolní **(1)**.
- Zatáhněte za hlavici směrem od aplikátoru **(2)**.
- Tvar hlavice je specificky vykrojena. Hlavici je tedy možné připojit vždy jedním možným způsobem.
- Aplikační hlavice se nešroubuje. Tahem hlavici oddělte. Tlakem připojte k ruční části přístroje. Hlavice by měla být zatlačena nadoraz přesně podle toho, jak je její tvar vykrojen.
- Při výměně aplikační hlavice přistupujte se zvýšenou opatrností. Pozornost zaměřte především na kontaktní tyčinky, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.
- Výměnu aplikační hlavice provádějte vždy, je-li přístroj vypnutý.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Na ruční část přístroje instalujte hlavici dle vašeho výběru.
2. Přístroj připojte k napájecímu kabelu přes prodlužovací kabel. Na prodlužovacím kabelu stiskněte tlačítko **ON/OFF**, které se rozsvítí. Tlačítko **ON/OFF** na přístroji se rozsvítí červeně. Zapne se ventilátor.
3. Přístroj zapněte krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Aktivuje se displej. Rozsvítí se panel s dotykovými tlačítky. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
4. Pomocí tlačítka **MODE** si můžete zvolit program ošetření pleti. K dispozici jsou na výběr programy **CTN** a **PULS**.
5. Pomocí tlačítek **RF ZVÝŠENÍ** a **RF SNÍŽENÍ** si můžete nastavit intenzitu ošetření. K dispozici je celkem 20 úrovní. Aktuálně nastavená intenzita ošetření je na displeji označena v levé části displeje.
6. Pomocí tlačítek **PULSE ZVÝŠENÍ** a **PULSE SNÍŽENÍ** si můžete nastavit délku působení radiofrekvence v sekundách v programu **PULS**.
7. Pro zahájení používání přístroje stiskněte tlačítko **START/STOP**. Nyní můžete pracovat s aplikační hlavici na pleti. Pro aktivaci radiofrekvence použijte tlačítko spouště na aplikační hlavici.
8. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí stisku tlačítka **ON/OFF** na hlavní jednotce přístroje.
9. **V rámci udržení co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po skončení používání aplikační hlavice ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň v délce 5 minut. Zapnutý ventilátor má tak dostatečný časový prostor přístroj plynule ochladit.**
10. Pro kompletní vypnutí přístroje použijte hlavní tlačítko na prodlužovacím kabelu.

DOPORUČENÁ METODA POHYBU PO PLETI

Při použití aplikační hlavice na vybrané části pleti je třeba vždy vycházet z optimálního načasování délky kontaktu aplikační hlavice s pletí a vhodného dávkování výkonu radiofrekvenčních vln. V tomto směru si můžete pohyby přizpůsobit podle sebe. V případě ošetření druhé osoby aktivní komunikací sledujte míru, jakou vnímá projev tepla působením radiofrekvence. Zde jsou doporučené dvě možnosti práce s aplikační hlavicí:

plynulý pohyb

Aplikační hlavici se pohybujte po pleti delšími i kratšími úseky. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavicí „na sucho“**. Při stimulaci pleti plynulým pohybem je celkově zkrácen čas kontaktu aplikačních kolíčků s konkrétním místem. **Při konstantním nastavením úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem.**

razítkování

Při ošetření vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu několika sekund (tzv. razítkováním). Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Akceptovatelné je pouze pocit vnímání tepla na snesitelné úrovni. Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností.



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

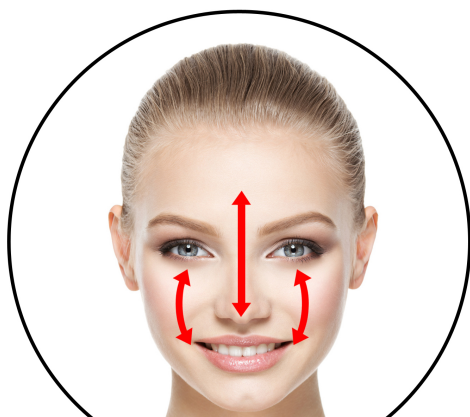

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před použitím přístroje doporučujeme pleť vyčistit. Provedte standardní proces odlíčení. Nečistoty by vytvářely nežádoucí bariéru mezi pletí a aplikační hlavicí přístroje. Pro vyčištění pleti můžete použít například přístroj kategorie ultrazvukové špachtle. Vyhněte se použití diamantové mikrodermabraze. Diamantová abraze pleti by pokožku před použitím radiofrekvence příliš podráždila.
- 2.** Sonogel doporučujeme aplikovat po částech. Ne hned na celý obličej. Část sonogelu se v průběhu času vstřebá do pleti a část vyschne. V případě potřeby sonogel postupně doplňujte na pleť.
- 3.** Pokud je vám působení radiofrekvence na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkraťte čas kontaktu aplikační hlavy s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
- 4.** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavy po pokožce. Radiofrekvence bude mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.
- 5. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo ošetření ukončete.
- 6.** Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.
- 7.** V případě použití na druhé osobě je důležitá průběžná komunikace. Použití radiofrekvence na pleti musí být příjemné. Nesmí přesáhnout hladinu snesitelnosti.
- 8.** Přístroj můžete používat celoročně. Pouze je třeba brát v potaz, že se pleť při použití zahřeje. Při přechodu do mrazu doporučujeme několik minut po ošetření pleti vyčkat, než se sníží její teplota.
- 9.** Při použití se snažte vyhnout aplikační hlavicí velkým mateřským znaménkům, kožním výrůstkům nebo jiným velkým kožním útvarům.
- 10.** Pokud používáte přístroj pro komerční účely, doporučujeme nejprve se seznámit s přístrojem při použití sami na sobě. Získáte tak lepší představu, jak přístroj působí na druhé osobě.

- 11.** Než se s přístrojem teprve seznamujete, používejte program **CTN**. Až si použití přístroje osvojíte, používejte také program **PULS**. Pravidelným používáním se seznámíte s účinností přístroje v jednotlivých úrovních nastavení výkonu.
- 12.** Těsně po použití přístroje nedoporučujeme na pleť aplikovat agresivní kosmetické přípravky (s výrazným barvivem nebo dráždivými látkami). Zejména citlivá pleť by mohla být nepříjemně podrážděna. Případně by mohla nastat nepříjemná alergická reakce.
- 13.** Muž by neměl podstoupit ošetření těsně před oholením. Minimální časový odstup by měl být v řádu několika hodin.
- 14.** Ošetřenou pleť nevystavujte v průběhu následujících několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit.
- 15.** V praxi skutečně nezáleží na tom, jakým způsobem se budete aplikátorem po pleti pohybovat. Zda budete pleť „razítkovat“ nebo vytvářet táhlé pohyby různých tvarů. Vždy je primární, aby byla vybraná partie dokonale ošetřena. Vždy věnujte zvýšenou pozornost práci s výkonem radiofrekvence. Neměla by být nastavena příliš málo, ale ani příliš moc. Při metodě pohybu aplikační hlavice bude na displeji kolísat ukazatel kvality aplikační hlavice s pletí. Vždy se ustálí až při zastavení pohybu na jednom místě. Z praktického hlediska si možná nejvíce časem osvojíte metodu „razítkování“. Vybranou partii ošetříte část po části a snadno si budete pamatovat, kde jste se již s aplikátorem pohybovali.
- 16.** Stejně místo můžete ošetřit vícekrát. Přesto je třeba vždy brát ohled na nastavený výkon, aby nedošlo k nežádoucímu přehřátí pokožky.
- 17.** Těsně po použití přístroje doporučujeme nějakým způsobem pleť zhladit. Můžete použít například ručník vytažený z lednice nebo jiný kosmetický přístroj, který má schopnost generovat působení hlady. Není to nezbytně nutné. Pouze je to tip, kterým se pleť dostane poměrně rychle na normální teplotu.
- 18.** Po ošetření by měl klient věnovat zvýšenou pozornost hydrataci pleti. Pleť potřebuje více než kdy jindy dostatečnou vláhu, aby mohla kvalitně zregenerovat. Ideální je použít například noční krém v průběhu následujících několik dní po ošetření přístrojem.

DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA



*PŘI OŠETŘENÍ PLETI VŽDY ZAČÍNEJTE POSTUPNE OD NEJNIŽŠÍ HODNOTY INTENZITY. ZVYŠUJTE POMALU SE **ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ**. PŘI VYŠŠÍCH HODNOTÁCH INTENZITY DOSAHUJE PŘÍSTROJ **VELMI SILNÉHO VÝKONU** RADIOFREKVENČNÍCH VLN. POKUD BUDETE V PŘÍLIŠ DLOUHÉM KONTAKTU APLIKÁTORU S PLETÍ, MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU PORANĚNÍ POPÁLENÍM.*


ČAS OŠETŘENÍ

Délku ošetření pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití mělo ošetření trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně analyzovat, jakým způsobem pleť reaguje na technologii radiofrekvenčních vln nebo za jak dlouhou dobu přestane být po ošetření citlivá na dotyk. Tím lze stanovit časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka ošetření by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlásečnicových vrásek kolem očí.




ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.

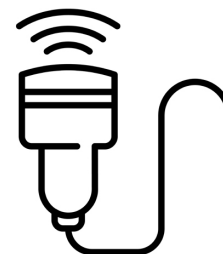

ŽIVOTNOST APLIKAČNÍ HLAVICE

Vyměnitelné aplikační hlavice nemají nekonečnou životnost. Povrch kontaktní plochy elektrody je vysoce sofistikované elektronické zařízení. Ošetření pleti je spojeno s vodivým gelem. V obecné rovině si elektronika s vlhkostí příliš nerozumí. Přestože budete o aplikační hlavici pečovat s maximální pečlivostí se zaměřením na důkladné osušení po každém použití, povrch kontaktní plochy aplikační hlavice postupně degraduje formou oxidace. Ukončení životnosti aplikační hlavice se projeví sníženou účinností ošetření pleti. Pokud životnost aplikační hlavice skončí, je třeba ji vyměnit za novou. Kontaktujte prodejce s možností zakoupení nové sady aplikátorů. Jedna z velkých výhod přístroje. Životnost celého přístroje nekončí s životností aplikační hlavice. Stačí provést pouze jejich výměnu za novou.

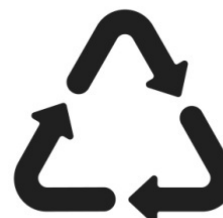

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- BR-2822 je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky neprotrhne kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí. Používání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BR-2822 je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Ošetření by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem nebo jiným kosmetickým přípravkem na gelové bázi. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken. Pokud je to jen možné, vyhněte se vodivému gelu s přidanými aromaty nebo barvivy. Pleť citlivějších uživatelů by nemusela zareagovat pozitivně.

- **Pokud budete aplikační hlavičkou držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření (radiofrekvence), přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků.**



- Pokud je to jenom možné, snažte se aplikační hlavičkou vyhnout oblastem s velmi tenkou a citlivou pokožkou. Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně. Je možné, že i s nejnižší úrovní intenzity mohou mít jedinci s velmi citlivou pleť problém a ošetření pro ně bude nepříjemné.

Aplikační hlavičkou se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo krátké bodové ošetření – tzv. razítkování. Pokud budete držet hlavičku příliš dlouho v kontaktu s pleť (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Před dalším přiložením na pleť proto nechejte časovou prodlevu v řádu sekund. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu. Začnějte s krátkým „tukaním“ na pleť a pocitově postupně délku prodlužujte.



- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavičku. Ideální je použití čírého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavičky.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V jakém stavu by se měla pleť nacházet těsně před použitím přístroje?

Pokožka by měla být zbavena makeupu. Měla by být čistá. Zbavena všech povrchových nečistot. Pokud je to po technické stránce možné, doporučujeme pleť vyčistit přístrojově pomocí rotačního kartáčku nebo ultrazvukovou špachtlí. Určitě bychom doporučili vyhnout se čištění pleti pomocí metody diamantové mikrodermabraze. Mohlo by dojít k nežádoucímu podráždění pleti před ošetření radiofrekvencí.



Jaké přípravky je vhodné aplikovat bezprostředně po ošetření pleti radiofrekvencí?

Pleť je třeba po přístrojovém ošetření dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém, aby měla pleť dostatečnou vláhu pro její regeneraci. Určitě bychom se minimálně v den přístrojového ošetření vyhnuly dalším případným kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí. Po ošetření radiofrekvencí je pleť mírně podrážděna s možnými příznaky zarudnutí. Je třeba dát pleti určitý čas pro její regeneraci. V den ošetření přístrojem bychom nedoporučovali návštěvu sauny.

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?

Následné projevy na pleti po ošetření radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po ošetření je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba pleť průběžně takto stimulovat (v průměru 2x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelného ošetření pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi ošetřeními stejné partie doporučujeme minimálně týden.

Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu.

Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?

Rozhodně ano. Rozsah výkonu přístroje je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon naopak pro větší plochy, kde je míra citlivosti menší. Pokud by přístroj nenabízel dostatečný rozsah výkonu, nebylo by možné ho považovat v oblasti estetických přístrojů za efektivní univerzální nástroj pro lifting pleti. Proto je třeba při nastavení výkonu postupovat s maximální opatrností.

U přístroje uvádíte možnost komerčního nebo domácího použití. Nevylučují se tyto dva aspekty použití navzájem?

Pro kterýkoliv přístroj neinvazivního charakteru ošetření těla představuje základní hledisko jeho kvality konkrétní technologie a zejména možný rozsah nastavení výkonu. Profesionalitu/užitnou hodnotu přístroje je vhodné posuzovat zejména podle toho, jakým způsobem a s jakou efektivitou lze docílit požadovaných výsledků. Druhým aspektem je životnost přístroje. Při komerčním používání je frekvence použití násobně vyšší ve srovnání s používáním pouze jednou osobou. Nároky na životnost a konstrukci přístroje jsou v tomto ohledu mnohem přísnější. Z tohoto pohledu vyhovuje model BEAUTYRELAX FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK oběma vlastnostem – velmi účinná technologie a kvalitní komponenty zajišťující dlouhou životnost při vysoké frekvenci provozu. Z tohoto pohledu lze přístroj považovat za univerzální nástroj pro domácí i komerční využití.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu. Aplikační hlavici dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, který významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Pokud hledáte vysoce účinný nástroj pro lifting pleti. Pokud je vaše hlavní priorita ošetření obličeje, krku a dekoltu. Potřebujete přístroj, který nabízí vysoký rozsah nastavení výkonu. Přístroj, který vydrží velmi vysokou zátěž při komerčním provozu. Pokud jste opravdu velmi nároční na dosažitelné výsledky. Přístroj, který nejen slibuje, ale skutečně bude fungovat, model **FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK** je určený přesně pro vás. Někdy i samotný výběr vhodné technologie není vše. Hlavním klíčem ke kvalitnímu a efektivnímu ošetření pleti je široká škála nastavení funkcí přístroje pro individuální potřeby uživatele. Model **FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK** vás příjemně překvapí výběrem z 3 vyměnitelných hlavic. Nezáleží na tom, že si oblíbíte pouze jeden typ, který budete stále používat. Přesto budete mít stále dobrý pocit, že v případě potřeby můžete hlavici vyměnit. Jako jeden z prvních modelů má elektronickou kontrolu kvality dotyku hlavice s pletí. Průběh ošetření pleti tak máte stále pod kontrolou. Jak bylo již výše uvedeno. Opravdu věnujte zvýšenou pozornost práci s výkonem. K dispozici je vám až 20 úrovní. V praxi ty nejvyšší pravděpodobně ani nevyužijete. Přesto je dobré, že máte stále „po ruce“ dostatečně velký výkonnostní potenciál, což oceníte hlavně v případech, kdy poskytujete službu svým zákazníkům. Pevně věřím, že přístroj splní vaše očekávání. Po několika opakovaných použití s ním budete díky snadnému ovládní pracovat jako skutečný profesionál!



Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Estetický přístroj FRAXLIFT TRIPPLE ATTACK

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2822**

EAN **8594166120396**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 61000-3-2:2006

EN 60601-1-2:2007

EN 60601-1:2006

EN 61000-3-3-1995+A1:2001+A2:2005

EN 55011:2007

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

30.1.2022

The image shows a blue ink signature over the company logo. The logo consists of a stylized blue flower-like shape to the left of the text 'SANTADRIA s.r.o.'. Below the logo, the company's address and contact information are printed in blue: 'Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno' and 'DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160'.

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel