

NÁVOD K OBSLUZE

Estetický přístroj pro lifting pleti

BeautyRelax BR-2670

RFLIFT EXCLUSIVE



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	3
UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
DOPORUČENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	5
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
OBSAH BALENÍ	6
VLASTNOSTI PŘÍSTROJE	7
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	8
METODY REDUKCE VRÁSEK	8
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	9
RADIOFREKVENCE	10
MIKROPROUD	10
VIBRACE	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
POPIS DISPLEJE HLAVNÍ JEDNOTKY	12
POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU	13
POPIS APLIKÁTORU	14
ZÁSOBNÍK NA KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK	15
KULIČKOVÝ APLIKÁTOR	16
INSTALACE PŘÍSTROJE	17
INSTALACE APLIKAČNÍ HLAVICE	18
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	19
DOPORUČENÁ METODA POHYBU PO PLETI	20
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	21
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	22
DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA	24
ČAS OŠETŘENÍ	25
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	25
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	26
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
PÁR VĚT ZÁVĚREM	30
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	31
CERTIFIKACE	31
DOVOZCE	31
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	32

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Estetický přístroj pro neinvazivní ošetření pleti pracuje s technologií, která je bezbolestná a bezpečná. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost splňuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených bezpečnostních norem. Aby bylo možné efektivně stimulovat vrstvu dermis, kde se nachází kolagenní a elastická vlákna zodpovědná za kondici pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Pokud nebudete postupovat dle uvedených pokynů, nebudete ctít upozornění a výčet kontraindikací, můžete si váš zdravotní stav v krajním případě negativně ovlivnit. Na druhou stranu nemějte z používání přístroje obavu. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny používání v domácích podmínkách bez dohledu erudované osoby z oblasti zdravotnictví (doktor, dermatolog).

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologii, která při použití za specifických podmínek napomáhá zvýšení pružnosti pleti.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní ošetření. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Ošetření je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (sonogel) nebo jiným kosmetickým přípravkem na vodní bázi.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po ošetření dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Instalaci přístroje provádějte podle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici roztokem na bázi alkoholu.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není vodotěsný. Žádná z jeho součástí nesmí být ponořena do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Cukrovka v nejzávažnějším stádiu
- Vysoký krevní tlak
- Kožní onemocnění
- Kardiostimulátor
- Kovové implantáty v těle (platí pro konkrétní místo ošetření pleti). Nevztahuje se na zubní implantáty. Vztahuje se na případné kovové předměty ihned pod povrchem pleti.
- Těhotenství
- V případech, kdy je pleť silně postižena akné (velké boláky s červenou a bílou hlavičkou)
- Pokud není pokožka po operativním zákroku důkladně zhojena

DOPORUČENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Obličej
- Krk
- Dekolt



ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Oblast spánků
- Rty



POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno minimálně s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi kuličkovým aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavičce. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Radiofrekvenční vlny a mikroproud BIO se tak mohou na pleť lépe navázat.



HLAVNÍ VÝHODY

- Redukce jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Zpevnění a vypnutí pleti
- Remodelace kolagenních vláken
- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Zapracování kosmetických přípravků do pleti
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů



OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-2670
- 1x Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Premium černá
- 1x Sonogel
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Návod k obsluze

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

- Unikátní konstrukce aplikační hlavice s kuličkovým aplikátorem
- Radiofrekvence, BIO mikroproud, vibrace
- Možnost nastavení 7 úrovní intenzity
- Integrovaný zásobník na kosmetický přípravek v aplikátoru
- Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken
- Neinvazivní lifting na stejné úrovni jako v estetickém studiu
- Zjemnění hlubokých i jemných mimických vrásek
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje
- Omlazený a prozářený vzhled, Zvýšení pružnosti pleti
- Dosažitelné účinky neinvazivní rejuvenace pleti
- Potlačení tmavých kruhů pod očima
- Určeno pro všechny typy pleti bez omezení
- Neinvazivní ošetření (žádná část aplikátoru nepronikne skrz pokožku)
- Tlačítko spouště je integrované na aplikátoru
- Samotné ošetření zabere pouhých několik minut
- Skutečně účinné řešení určeno pro zralou a unavenou pleť
- Naprosto bezpečné používání při dodržení bezpečnostních doporučení
- Určeno pro používání doma nebo v salonu
- Aplikace nezatěžuje žádným způsobem organismus
- Určeno pro obličej, krk a dekolt
- Snadné použití aplikátoru, který je propojen s hlavní jednotkou pomocí kabelu
- Neinvazivní ošetření (přístroj neproniká přímo skrz pokožku)
- Ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Vysoká užitná hodnota přístroje
- Vysoká míra šetrnosti k pleti
- Dosažitelný liftingový efekt
- Rozměry: 35x25x24cm
- Hmotnost: 2,9kg



PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejčků s či sér. Další možností je přístrojové ošetření pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

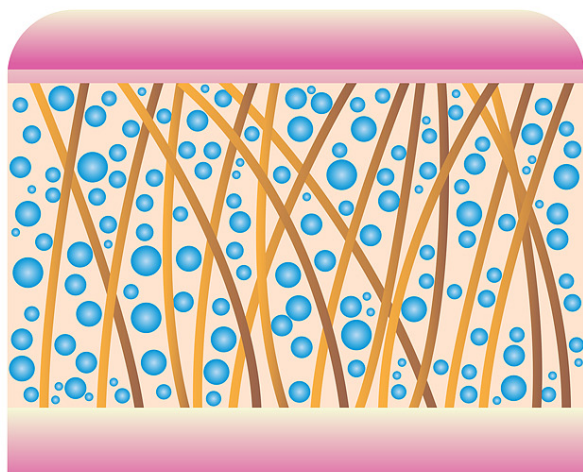

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

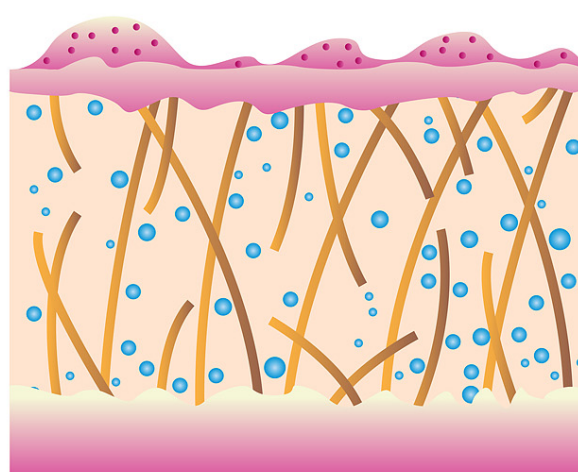

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Rlift Exclusive je moderní estetický přístroj, který nabízí špičkové ošetření pleti se zaměřením na lifting pleti. Disponuje unikátní konstrukcí aplikační hlavice. Hlavní princip je přenos účinné technologie přes kuličkový aplikátor. Aplikátor se v každém okamžiku nachází v plném kontaktu s pletí včetně velice špatně dostupných míst. Zpracování kosmetických přípravků díky integrovanému zásobníku. Neinvazivní mezoterapie mikroproudem. Dokonalý liftingový efekt díky působení radiofrekvence, BIO mikroproudu a vysokofrekvenční vibrační masáže. BeautyRelax Rlift Exclusive je určen pro vysoce náročné uživatele očekávající nejlepší výsledky a vysokou užitnou hodnotu přístroje.



RFLIFT
EXCLUSIVE
POWERED BY
beautyrelax



1 
RADIOFREKVENCE

2 
BIO MIKROPROUD

3 
VIBRACE

**MULTIFUNKČNÍ
HLAVICE**



RADIOFREKVENCE

Stručný princip fungování technologie

Kuličkový aplikátor generuje energii prostřednictvím radiofrekvenčních vln se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.




MIKROPROUD

Informace o použití elektrického proudu ve vás může vyvolat strach případně smíšené pocity. **Nemějte rozhodně žádnou obavu!** V případě elektrického proudu, který používají kosmetické přístroje, jde o vysoce bezpečnou metodu ošetření pleti. Výkon je omezen tak, abyste si žádným způsobem nemohli ublížit. Technologie mikroproudu vychází ze stejného základu, jako EMS pulzy. Jedná se o pulzy elektrického proudu, které mají velice specifickou frekvenci a výkon. Mikroproud působí do vrstvy dermis pro podporu elastických vláken. Oproti tomu EMS pulzy mají výkon a frekvenci zvolenou tak, aby pronikly hlouběji až k obličejovým svalům. Mikroproud napomáhá efektivně zapracovat účinné látky z kosmetických přípravků. **Technologie působení mikroproudu pracuje v programu BIO.**




VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti. BeautyRelax RFLIFT EXCLUSIVE nabízí hned čtyři úrovně intenzity působení vibrací.

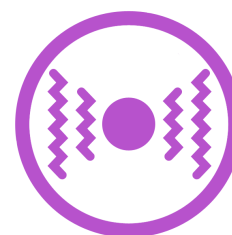

POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice
2. Spoušť
3. Displej aplikační hlavice
4. Kuličkový aplikátor
5. Displej hlavní jednotky
6. Tlačítko **VIBRACE**
7. Tlačítko **ON/OFF/BIO**
8. Tlačítko **RF**

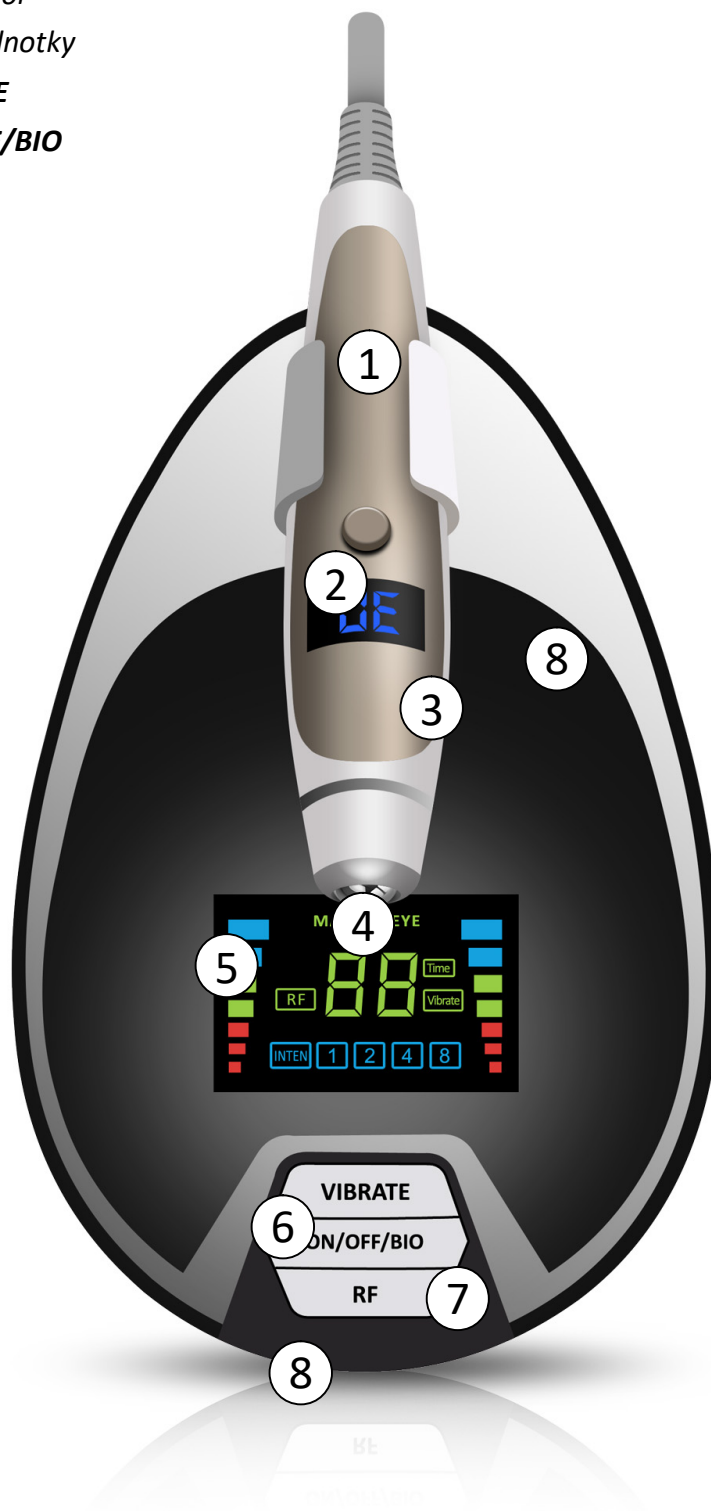

POPIS DISPLEJE HLAVNÍ JEDNOTKY

1. Nastavení intenzity / průběhu působení radiofrekvence

Nastavení intenzity působení radiofrekvence. K dispozici je celkem 7 úrovní intenzity. Jakmile barevný sloupec bliká, technologie radiofrekvence je aktivní.

2. Nastavení intenzity / průběhu působení mikroproudu BIO


Nastavení intenzity působení mikroproudu BIO. K dispozici je celkem 7 úrovní intenzity. Jakmile barevný sloupec bliká, technologie mikroproudu je aktivní.

3. Intenzita působení vibrací

Nastavení intenzity působení vibrací. K dispozici jsou celkem 4 úrovně výkonu. Na displeji se zobrazuje jako 1 – 2 – 4 – 8.

4. Čas použití přístroje

Odečet použití přístroje v minutách. Výchozí nastavená hodnota je 30 minut. V průběhu použití přístroje tak budete mít snadný přehled, jak dlouho přístroj používáte.

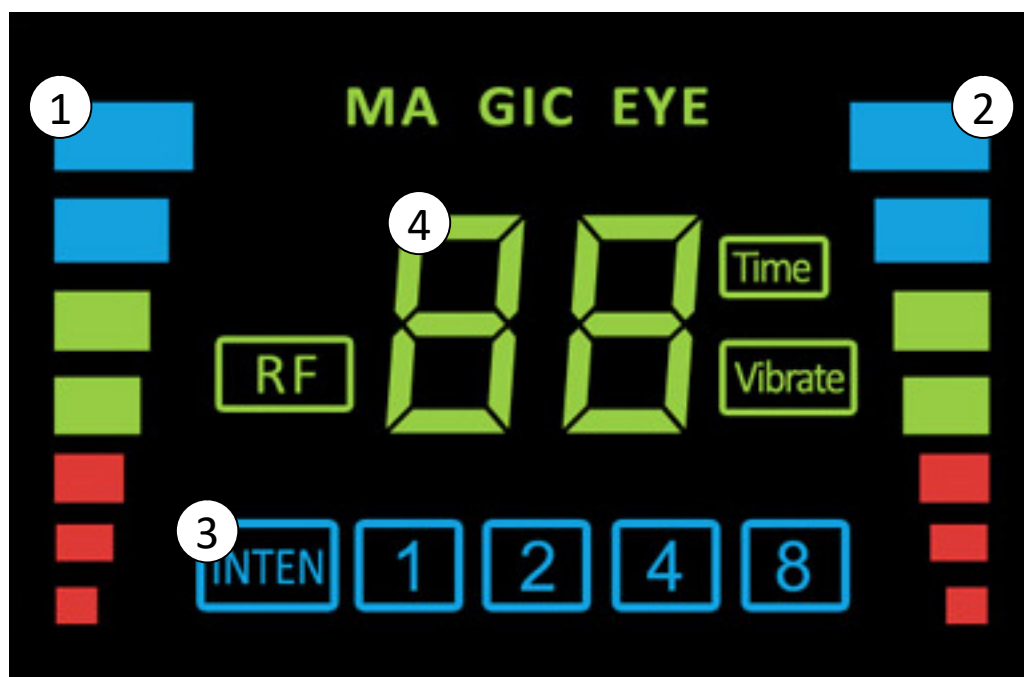

POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **VIBRATE**

Tlačítko pro nastavení funkce vibrací. Opakovaným stiskem můžete měnit **intenzitu** vibrací. Vibrace můžete přepínat v tomto pořadí:

vypnuto – úroveň 1 – úroveň 2 – úroveň 4 – úroveň 8.

Dalším stiskem se cyklus nastavení opakuje.


2. Tlačítko **ON/OFF/BIO**

Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF/BIO** můžete přístroj **zapnout** nebo **vypnout**.

Krátkým stiskem tlačítka si můžete snadno nastavit úroveň působení **intenzity** mikroproudu. K dispozici je rozsah **výkonu od 1 do 7**.

3. Tlačítko **RF**

Stiskem tlačítka **RF** si můžete snadno nastavit úroveň působení intenzity radiofrekvence. K dispozici je rozsah **výkonu od 1 do 7**.

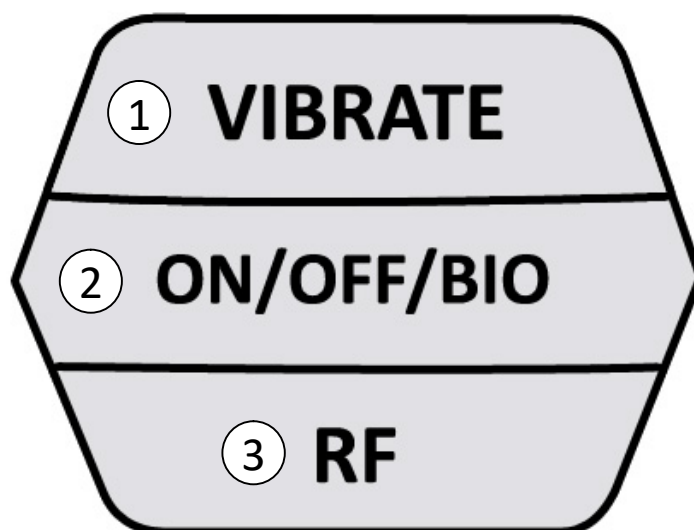

POPIS APLIKÁTORU

1. Kabel aplikační hlavice

Kabel je napevno připojen k hlavní jednotce. Není možné ho odpojit.

2. Tlačítko SPOUŠŤ


Pomocí tlačítka SPOUŠŤ si můžete při použití přístroje snadnou zapnout nebo vypnout působení funkcí. To je v praxi skvělá výhoda. Pro přerušení použití nemusíte použít tlačítka na hlavní jednotce, ale spuštění/zastavení činnosti si sami regulujete pomocí tlačítka na aplikátoru.

3. Displej

Displej zobrazuje aktuálně nastavenou úroveň intenzity radiofrekvence a mikroproudu. Průběh působení technologií doprovází blikání dvou teček.

4. Kuličkový aplikátor

Kuličkový aplikátor je v kontaktu s pletí. Přenáší technologie přístroje na povrch pleti. Kuličkové provedení je ve srovnání s přístroji obdobného typu velmi unikátní. Kulička je ve stálém kontaktu s pletí za všech okolností s ohledem na členitý reliéf povrchu pleti.

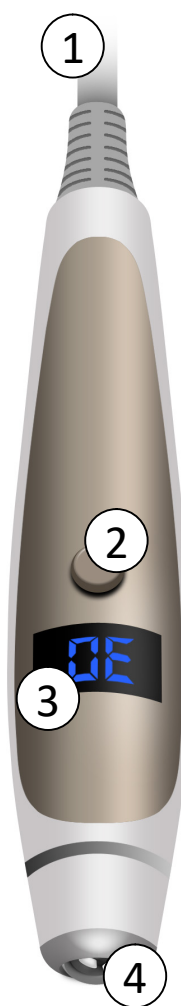

RFLIFT
EXCLUSIVE

POWERED BY
beautyrelax



**SPECIALISTA NA UNAVENOU PLEŤ
A TMAVÉ KRUHY POD OČIMA**






**EYESERUM
BOOSTER**

ZÁSOBNÍK NA KOSMETICKÝ PŘÍPRAVEK

Zásobník můžete naplnit vaším oblíbeným kosmetickým přípravkem na tekuté bázi. Přípravek by neměl mít hustou konzistenci. Pokud ano, je třeba naředit přípravek pomocí destilované nebo kojenecké vody. Nemějte obavu. Ke znehodnocení přípravku rozhodně nedojde. Technologie elektroforézy je určena pro penetraci účinných látek z přípravku přes povrch pleti.

1. Vnitřní vložka
2. Vnější prstenec
3. Zásobník na kosmetický přípravek
4. Displej
5. Spoušť

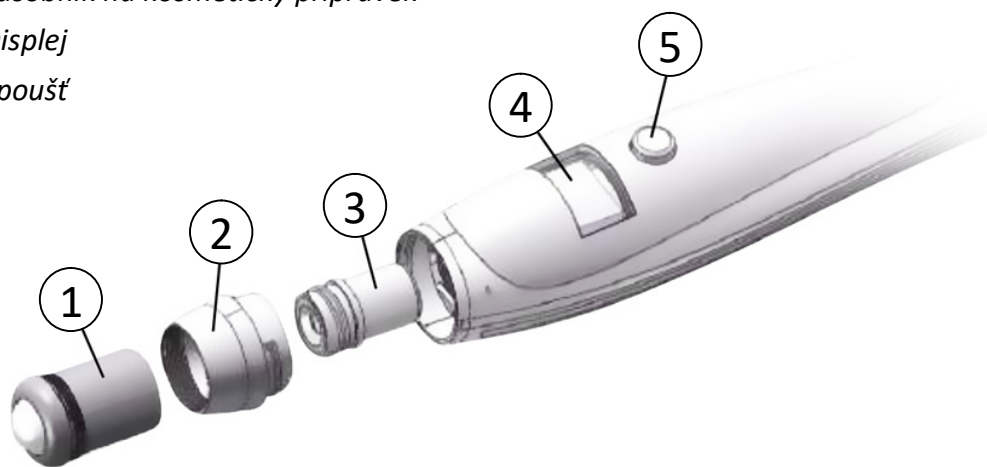

KULIČKOVÝ APLIKÁTOR

Přestože je provedení a princip fungování aplikační hlavice velmi jednoduchý, jedná se o velký posun směrem dopředu z hlediska efektivity ošetření pleti. Kuličkový aplikátor se dostane do každého záhybu. Je schopen pokrýt větší či menší plochy v oblastech obličeje, krku a dekoltu. Je schopen generovat radiofrekvenci, BIO mikroproud a vibrace po celé své ploše a to v každém okamžiku. V jeden okamžik tak můžete využít hned dvou výhod najednou – kuličkový aplikátor je ve stálém kontaktu s pletí za všech okolností a zároveň probíhá kontinuální přenos technologií do pleti. Velikost kuličky je optimalizovaná tak, aby bylo možné zaměřit se na velmi malé plochy obličeje, jako je například oblast nad horním rtem nebo velmi jemná pokožka kolem očí. Jednou ze silných stránek modelu RFLIFT EXCLUSIVE je specializace na tmavé kruhy pod očima. V obecné rovině je třeba tyto partie prohřát pomocí radiofrekvence - podpořit tvorbu kolagenu a v druhé fázi zapracovat kosmetický přípravek do pleti.

Pokud naplníte zásobník, při pohybu aplikátoru po pleti se přípravek průběžně uvolňuje a právě za pomoci kuličkového aplikátoru jej můžete efektivně zapracovat. A aplikátorem se můžete po pleti pohybovat. Vždy je dobré se na určitém místě chvíli zastavit a poté se posunout kousek vedle a opět se zastavit. Jakmile s kuličkovým aplikátorem zůstanete stát na jednom místě, můžete vnímat postupnou gradaci působení radiofrekvence a BIO mikroproudu.




INSTALACE PŘÍSTROJE

- 1.** Hlavní jednotku přístroje se vždy snažte umístit na rovnou pevnou plochu. Na spodní straně je umístěna mřížka ventilátoru.
- 2.** Vždy dbejte na to, aby spodní část přístroje nebyla zakryta jakoukoliv bariérou. Především mřížka ventilátoru. Ve spodní straně jednotky je třeba ponechat určitý volný prostor, aby mohl vzduch přirozeně cirkulovat. Pokud byste vytvořili mechanickou bariéru, přístroj by neměl dostatečnou možnost chlazení a došlo by k jeho přehřátí a nenávratnému poškození.
- 3.** Při plánování umístění přístroje berte v potaz dva základní aspekty. Umístění by mělo vycházet z délky nabíjecího kabelu. Napájecí kabel by neměl být příliš napnutý. Přístroj by měl být umístěn tak, aby kabel spojující aplikační hlavici s hlavní jednotkou nebyl při ošetření obličeje příliš napnutý. Berte v potaz rozsah pohybu ruční části přístroje. Snažte se vyvarovat převrácení základny přístroje případnému pádu na zem.
- 4.** Doplnění zásobníku pro kosmetický přípravek provádějte vždy, jakmile je přístroj vypnutý.
- 5.** K napájení přístroje používejte výhradně kabel, který je součástí balení.



INSTALACE APLIKAČNÍ HLAVICE

- Pro naplnění zásobníku je třeba nejprve odšroubovat vnější prstenec (2). Pro uvolnění otáčejte proti směru hodinových ručiček.
- Uvolněné komponenty si dejte na stůl na jednu místo pohromadě.
- Zásobník naplňte maximálně do 3/4 objemu kosmetickým přípravkem. Zásobník naplňte vaším oblíbeným kosmetickým přípravkem na tekuté bázi. Přípravek by neměl mít hustou konzistenci. Pokud ano, je třeba naředit přípravek pomocí destilované nebo kojenecké vody. Nemějte obavu. Ke znehodnocení přípravku rozhodně nedojde. Technologie elektroforézy je určena pro penetraci účinných látek z přípravku přes povrch pleti.
- Zašroubujte k sobě dohromady část se zásobníkem a část s kuličkovým aplikátorem. Zašroubujte po směru hodinových ručiček. Vždy dbejte na to, aby bylo dotažení úplné.
- Celý komplet zásobníku s částí kuličkového aplikátoru vložte do aplikační hlavice. Dotáhněte pomocí vnějšího prstence.
- Věnujte prosím zvýšenou pozornost při dotažení závitů. Závit utáhněte dostatečně pevně. Přesto nepoužívejte extrémní sílu, aby nedošlo ke stržení závitů.
- Doplnění zásobníku provádějte vždy, jakmile je přístroj vypnutý.

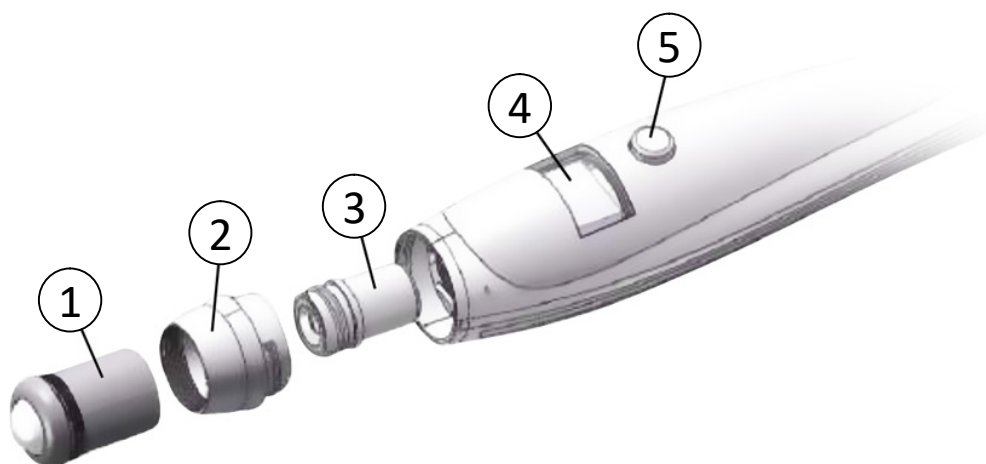

- 1.** Vnitřní vložka
- 2.** Vnější prstenec
- 3.** Zásobník na kosmetický přípravek
- 4.** Displej
- 5.** Spoušť

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přístroj k napájecímu adaptéru.
2. V případě potřeby naplňte zásobník vašim oblíbeným kosmetickým přípravkem.
3. Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF/BIO**. Zazní zvukový signál. Aktivuje se displej na hlavní jednotce a aplikační hlavici. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Přístroj je nyní připraven k použití. Radiofrekvence a BIO mikroproud jsou nastaveny na úroveň výkonu 1. Úroveň působení vibrací je na hodnotě 2.
4. Působení technologií aktivujete krátkým stiskem tlačítka spouště na aplikační hlavici. Průběh činnosti působení technologií doprovází blikající dvě malé tečky na displeji aplikační hlavice.
5. Pro změnu výkonu radiofrekvence použijte tlačítko **RF**. Opakovaným stiskem měníte úroveň výkonu v rozsahu od 1 do 7. Aktuálně nastavenou hodnotu zobrazuje barevný panel v levé části displeje. Hodnota nastaveného výkonu je rovněž zobrazena na displeji aplikační hlavice.
6. Pro změnu výkonu mikroproudu BIO použijte tlačítko **ON/OFF/BIO**. Opakovaným stiskem měníte úroveň výkonu v rozsahu od 1 do 7. Aktuálně nastavenou hodnotu zobrazuje barevný panel v pravé části displeje. Hodnota nastaveného výkonu je rovněž zobrazena na displeji aplikační hlavice.
7. Pro změnu režimu působení vibrací použijte tlačítko **VIBRATE**. Opakovaným stiskem můžete měnit intenzitu vibrací. Vibrace můžete přepínat v tomto pořadí:
vypnuto – úroveň 1 – úroveň 2 – úroveň 4 – úroveň 8. Dalším stiskem se cyklus nastavení opakuje.
8. Časovač je vždy primárně nastaven na hodnotu 30 minut. Čas se odpočítává vždy, jakmile uvedete spouští na aplikační hlavici technologie přístroje do provozu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF/BIO**.

DOPORUČENÁ METODA POHYBU PO PLETI

Kuličkový aplikátor velmi usnadňuje pohyb po pleti. V konečném důsledku není třeba věnovat zvýšenou pozornost, jaké útvary budete pomocí aplikátoru na pleti vykreslovat. Vždy je třeba vycházet z celkové doby kontaktu s pletí. Abyste čas určený k ošetření pleti využili maximálně pro vybrané partie, na které se chcete s přístrojem zaměřit.

přímočarý pohyb

Aplikační hlavičce se pohybujte po pleti delšími i kratšími úseky. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí sonogelu nebo kosmetického přípravku ze zásobníku. **Nikdy nepoužívejte stimulaci pleti aplikační hlavičce „na sucho“.** Při konstantním nastavení úrovně intenzity radiofrekvence můžete při rychlejším pohybu vnímat menší míru působení radiofrekvence ve srovnání s pomalejším pohybem. Vždy se snažte pohyb přerušit a několik okamžiků působit s aplikátorem na jednom místě.

kroužení

Kuličkovým aplikátorem můžete průběžně kroužit po pleti. Vždy se snažte pohyb přerušit a několik okamžiků působit s aplikátorem na jednom místě. Ošetření pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Akceptovatelné je pouze pocit vnímání tepla na snesitelné úrovni. Pokud budete aplikační hlavičce držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Krouživý pohyb je ideální zejména v oblasti kolem očí.



METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

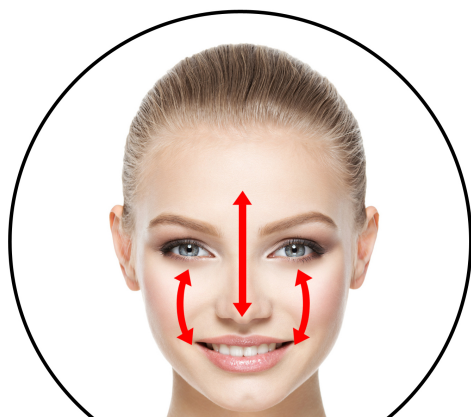

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Před použitím přístroje doporučujeme pleť vyčistit. Provedte standardní proces odlíčení. Nečistoty by vytvářely nežádoucí bariéru mezi pletí a aplikační hlavicí přístroje. Pro vyčištění pleti můžete použít například přístroj kategorie ultrazvukové špachtle (součást balení). Vyhněte se použití diamantové mikrodermabraze. Diamantová abraze pleti by pokožku před použitím radiofrekvence příliš podráždila.
- 2.** Přístroj můžete používat v kombinaci se sonogelem nebo vaším oblíbeným kosmetickým přípravkem. Pokud má přípravek hustější konzistenci, provedte aplikaci přímo na pleť. Pokud má přípravek tekutou konzistenci, naplňte zásobník zabudovaný uvnitř aplikační hlavice.
- 3.** Sonogel doporučujeme aplikovat po částech. Ne hned na celý obličej. Část sonogelu se v průběhu času vstřebává do pleti a část vyschne. V případě potřeby sonogel postupně doplňujte na pleť.
- 4.** Při použití aplikátoru se nebojte na pleť mírně přitlačit. Kuličkový aplikátor se tak dostane do plného kontaktu s pletí.
- 5.** Pokud je vám působení radiofrekvence nebo mikroproudu BIO na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkráťte čas kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
- 6.** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence a mikroproud BIO bude mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.
- 7. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo ošetření ukončete.
- 8.** Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout. Po použití je zcela běžné, že je povrch pleti zahřátý. Je to sekundární efekt působení radiofrekvence.
- 9.** V případě použití na druhé osobně je důležitá průběžná komunikace. Použití radiofrekvence a mikroproudu BIO na pleti musí být příjemné. Nesmí přesáhnout hladinu snesitelnosti.

- 10.** Přístroj můžete používat celoročně. Pouze je třeba brát v potaz, že se pleť při použití zahřeje. Při přechodu do mrazu doporučujeme několik minut po ošetření pleti vyčkat, než se sníží její teplota.
- 11.** Při použití se snažte vyhnout aplikační hlavicí velkým mateřským znaménkům, kožním výrůstkům nebo jiným velkým kožním útvarům.
- 12.** Pokud používáte přístroj pro komerční účely, doporučujeme nejprve se seznámit s přístrojem při použití sami na sobě. Získáte tak lepší představu, jak přístroj působí na druhé osobě.
- 13.** Těsně po použití přístroje nedoporučujeme na pleť aplikovat agresivní kosmetické přípravky (s výrazným barvivem nebo dráždivými látkami). Zejména citlivá pleť by mohla být nepříjemně podrážděna. Případně by mohla nastat nepříjemná alergická reakce.
- 14.** Muž by neměl podstoupit ošetření těsně před oholením. Minimální časový odstup by měl být v řádu několika hodin.
- 15.** Ošetřenou pleť nevystavujte v průběhu následujících několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit.
- 16.** V praxi skutečně nezáleží na tom, jakým způsobem se budete aplikátorem po pleti pohybovat. Zda budete na pleti „kreslit“ kolečka nebo vytvářet táhlé pohyby různých tvarů. Vždy je primární, aby byla vybraná partie dokonale ošetřena. Vždy věnujte zvýšenou pozornost práci s výkonem radiofrekvence a mikroproudu BIO. Neměla by být nastavena příliš málo, ale ani příliš moc.
- 17.** Stejně místo můžete ošetřit vícekrát. Přesto je třeba vždy brát ohled na nastavený výkon, aby nedošlo k nežádoucímu přehřátí pokožky.
- 18.** Těsně po použití přístroje doporučujeme nějakým způsobem pleť zchládit. Můžete použít například ručník vytažený z lednice nebo jiný kosmetický přístroj, který má schopnost generovat působení hlady. Není to nezbytně nutné. Pouze je to tip, kterým se pleť dostane poměrně rychle na normální teplotu.
- 19.** Po ošetření by měl klient věnovat zvýšenou pozornost hydrataci pleti. Pleť potřebuje více než kdy jindy dostatečnou vláhu, aby mohla kvalitně zregenerovat. Ideální je použít například noční krém v průběhu následujících několik dní po ošetření přístrojem.

DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA



*PŘI OŠETŘENÍ PLETI VŽDY ZAČÍNEJTE POSTUPNE OD NEJNIŽŠÍ HODNOTY INTENZITY. ZVYŠUJTE POMALU SE **ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ**. PŘI VYŠŠÍCH HODNOTÁCH INTENZITY DOSAHUJE PŘÍSTROJ **VELMI SILNÉHO VÝKONU** RADIOFREKVENČNÍCH VLN. POKUD BUDETE V PŘÍLIŠ DLOUHÉM KONTAKTU APLIKÁTORU S PLETÍ, MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU PORANĚNÍ POPÁLENÍM.*


ČAS OŠETŘENÍ

Délku ošetření pleti nelze stanovit s přesností na vteřiny podle předem definovaných tabulek. Délka stimulace pleti pomocí radiofrekvenčních vln výrazně závisí na více faktorech - stavu pleti, věku uživatele, typu pleti, citlivosti pleti nebo způsobu, jakým se uživatel dlouhodobě o pleť stará. V obecné rovně platí, že by při naprosto prvním použití mělo ošetření trvat řádově v jednotkách minut. Při úvodním použití lze postupně analyzovat, jakým způsobem pleť reaguje na technologii radiofrekvenčních vln nebo za jak dlouhou dobu přestane být po ošetření citlivá na dotyk. Tím lze stanovit časový rozestup mezi jednotlivými procedurami. Délka ošetření by měla také zohlednit rozsah plochy vybrané partie. Celé plocha obličeje zabere delší čas, než například pouze koutky úst nebo stimulace vlásečnicových vrásek kolem očí.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací sonogelu nebo jiným kosmetickým přípravkem. Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl kuličkový aplikátor očištěn. Je lepší aplikační hlavici rozdělat a vyčistit všechny komponenty uvnitř. Pakliže se údržba v tomto prostoru zanedbá, může dojít k tvorbě prostředí ideální pro množení bakterií. Pokud přístroj používá více osob, je třeba provést dezinfekci povrchu aplikační hlavice. Ideálně alkoholovým roztokem ve spreji. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Po čištění aplikační hlavici důkladně vysušte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.

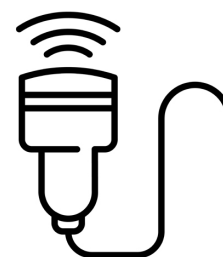

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- BR-2670 je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní provoz je základní předpoklad pro používání přístroje uživatelem v domácím prostředí. Používání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BR-2670 je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Ošetření by mělo být vždy spojeno s čirým vodivým gelem nebo jiným kosmetickým přípravkem. Kosmetický přípravek z větší hustotou konzistence aplikujte přímo na pleť. Přípravek na tekuté bázi aplikujte přímo do zásobníku integrovaného v aplikační hlavici.
- **Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho (v řádu několika vteřin) a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň ošetření (radiofrekvence), přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. Proto prosím přistupujte k ošetření s maximální pečlivostí a šetrností. Pokud by nebyl přístroj dostatečně výkonný, nebylo by možné dosáhnout požadovaných výsledků.**
- Pokud je menší vrstva podkožního tuku, pracujte s nižšími hodnotami výkonu nebo se této části pleti vyhněte úplně. Je možné, že i s nejnižší úrovní intenzity mohou mít jedinci s velmi citlivou pleť problém a ošetření pro ně bude nepříjemné.
Aplikační hlavici se po pleti můžete pohybovat různými způsoby. Krátkými táhlými pohyby nebo kroužením. Pokud budete držet hlavici příliš dlouho v kontaktu s pleť (radiofrekvence), nakumuluje se takové množství energie, které zvýší teplotu aplikátoru. Před dalším přiložením na pleť proto nechte časovou prodlevu v řádu sekund. Zvýšení teploty aplikátoru není závadou přístroje, ale průvodní jev působení radiofrekvenčních vln po delší dobu.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte kuličkový aplikátor. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

V jakém stavu by se měla pleť nacházet těsně před použitím přístroje?

Pokožka by měla být zbavena makeupu. Měla by být čistá. Zbavena všech povrchových nečistot. Pokud je to po technické stránce možné, doporučujeme pleť vyčistit přístrojově pomocí rotačního kartáčku nebo ultrazvukovou špachtlí. Určitě bychom doporučili vyhnout se čistění pleti pomocí metody diamantové mikrodermabraze. Mohlo by dojít k nežádoucímu podráždění pleti před ošetření radiofrekvencí.



Jaké přípravky je vhodné aplikovat bezprostředně po ošetření pleti radiofrekvencí?

Pleť je třeba po přístrojovém ošetření dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém, aby měla pleť dostatečnou vláhu pro její regeneraci. Určitě bychom se minimálně v den přístrojového ošetření vyhnuly dalším případným kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí. Po ošetření radiofrekvencí je pleť mírně podrážděna s možnými příznaky zarudnutí. Je třeba dát pleti určitý čas pro její regeneraci. V den ošetření přístrojem bychom nedoporučovali návštěvu sauny.

Jaké výsledky mohou očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?

Následné projevy na pleti po ošetření radiofrekvencí jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po ošetření je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Po použití přístroje můžete cítit, jakoby vaše pleť pulzovala. Jde o průvodní jev, který je naprosto v normě. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba plet průběžně takto stimulovat (v průměru 2x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelného ošetření pleti se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi ošetřeními stejné partie doporučujeme minimálně týden.

Jakým způsobem je možné působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pletí proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu dermis o specifické frekvenci a výkonu.

Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?

Rozhodně ano. Rozsah výkonu přístroje je záměrně upraven tak, aby byl schopen ošetřit celé spektrum uživatelů s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Úprava dávkování výkonu umožňuje ošetření i velmi citlivých partií. Vyšší výkon naopak pro větší plochy, kde je míra citlivosti menší. Pokud by přístroj nenabízel dostatečný rozsah výkonu, nebylo by možné ho považovat v oblasti estetických přístrojů za efektivní univerzální nástroj pro lifting pleti. Proto je třeba při nastavení výkonu postupovat s maximální opatrností.

U přístroje uvádíte možnost komerčního nebo domácího použití. Nevylučují se tyto dva aspekty použití navzájem?

Pro kterýkoliv přístroj neinvazivního charakteru ošetření těla představuje základní hledisko jeho kvality konkrétní technologie a zejména možný rozsah nastavení výkonu. Profesionalitu/užitnou hodnotu přístroje je vhodné posuzovat zejména podle toho, jakým způsobem a s jakou efektivitou lze docílit požadovaných výsledků. Druhým aspektem je životnost přístroje. Při komerčním používání je frekvence použití násobně vyšší ve srovnání s používáním pouze jednou osobou. Nároky na životnost a konstrukci přístroje jsou v tomto ohledu mnohem přísnější. Z tohoto pohledu vyhovuje model BEAUTYRELAX RFLIFT EXCLUSIVE oběma vlastnostem – velmi účinná technologie a kvalitní komponenty zajišťující dlouhou životnost při vysoké frekvenci provozu. Z tohoto pohledu lze přístroj považovat za univerzální nástroj pro domácí i komerční využití.

Čím je doporučeno zásobník naplnit?

V tomto ohledu zákaznicky nesvazujeme. Při výběru sledujte množství účinných látek. Čím je větší, tím více vám jich přístroj pomůže zapracovat do pleti. Může se jednat o jakýkoliv kosmetický přípravek na tekuté bázi. Pokud je hustota větší, můžete přípravek naředit destilovanou nebo kojeneckou vodou (kohoutková voda může obsahovat nežádoucí množství vodního kamene). Konzistence by měla být taková, aby se byl přípravek schopen uvolňovat průběžně přes kuličkový aplikátor.

Mravenčení je na pleti velmi intenzivní. Jak poznám, jaká je správná hodnota intenzity?

V průběhu nastavení intenzity vždy vycházejte z vlastního pocitu, který vnímáte. Na pleti byste měli vnímat pocit, který připomíná mravenčení. Působení by pro vás však mělo být stále na snesitelné úrovni komfortu. Intenzitu v průběhu použití upravujte pomocí tlačítka **ON/OFF/BIO**. V závislosti na tom, jak je citlivé místo na pleti, na kterém se s aplikátorem pohybujete.

Použití obdobného přístroje je pro mě něco absolutně nového. Jak mám ze začátku přistupovat k použití přístroje?

Podrobně si prostudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze. Nikam nespěchejte. Začněte s ošetřením pleti pomalu. Můžete si působení aplikátoru vyzkoušet nejprve bez naplněného zásobníku. Na pleť naneste pouze sonogel. Pohybujte se na různých místech obličeje. Vnímejte, jak se na konkrétních místech projevuje technologie radiofrekvence a mikroproudu BIO. Vyzkoušejte pohyb hlavice. „Vytvářejte“ na pleti čárky, kolečka. Osvojíte si tak, jaká technika pohybu je pro vaši pleť optimální. Měňte postupně tempo pohybu a rychlost. Vyzkoušejte si se zvýšenou opatrností další stupně výkonu.

Dávkování tekutiny za aplikátoru je příliš malé až téměř žádné. Co mám v tomto případě dělat?

Pokud přípravek neteče vůbec, jeho konzistence je příliš hustá. Je třeba přípravek naředit, aby se snížila jeho hustota. Tekutina se vždy automaticky uvolní, jakmile se pohybujete aplikátorem po pleti. Mechaniku postupného uvolnění tekutiny si vyzkoušejte například na ruce. Při pohybu na ruce uvidíte, jak má vliv pohyb aplikátoru na dávkování přípravku. Pokud chcete na pleť jednorázově uvolnit větší množství přípravku, pleť kuličkovým aplikátorem mírně poťukejte.

Na pleti mám vrstvičku sonogelu a pohybují se po pleti aplikátorem, který uvolňuje kosmetický přípravek. Nevadí to?

Rozhodně ne. Sonogel žádným způsobem neznehodnotí účinné látky v tekutém kosmetickém přípravku. Kuličkový aplikátor tyto látky penetruje pod horní vrstvu pleti. Pouze je třeba dbát na to, aby se otvor kolem kuličky pro uvolnění přípravku sonogelem neucpal. Z tohoto pohledu je lepší používat aplikační hlavici buď se sonogelem na pleti, nebo kosmetickým tekutým přípravkem

v zásobníku. Nebo můžete samozřejmě bez problémů nanést tuhý kosmetický přípravek přímo na pleť a hlavicí tento přípravek následně zpracovat.

Jaký je důvod péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní hlavici je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu nebo jiného kosmetického přípravku. Aplikační hlavici dezinfikovat po každém jednotlivém použití. Ideálně pomocí spreje na bázi alkoholu. Zabráníte tak možnosti šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Aplikační hlavici nezapomeňte důkladně vysušit pomocí hadříku.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí obezitu nebo jakékoliv jiné onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, který významným způsobem přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: mh@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Jak již bylo uvedeno výše v tomto návodu k obsluze. Znovu bych rád na tuto pasáž navázal. Týká se konstrukčního řešení aplikační hlavice. Vlastní zážitek z použití kuličkového aplikátoru je naprosto jedinečný ve srovnání s ostatními přístroji, které používají aplikační hlavici s rovnou plochou. Jakoby se členitý reliéf vaší tváře srovnal do jedné roviny. Nemusíte přemýšlet, jak v případě plochého aplikátoru konkrétní místo ošetřit. S kuličkovým aplikátorem jednoduše kloužete po povrchu pleti. Mě osobně je toto řešení aplikační hlavice velmi sympatické, ale hlavně v praxi vysoce praktické. Některé kosmetické přípravky určené pro tmavé kruhy pod očima již kuličkový aplikátor používají, i když je vyroben z plastu a jeho význam je pouze pro mechanické vmasírování přípravku do pleti. Moc se mi líbí integrovaný zásobník, což je skvělý benefit a velmi usnadňuje dávkování kosmetických přípravků na tekuté bázi. Estetický přístroj pro lifting pleti BeautyRelax Rlift Exclusive bych doporučil každému, kdo chce k pleťovému ošetření přistoupit skutečně zodpovědně s maximální efektivitou použití. Uživatelé ocení praktické tlačítko spouště přímo na aplikační hlavici, snadné ovládání pomocí tlačítek na hlavní jednotce, kompaktní rozměry a vysokou účinnost jednotlivých technologií. Přístroj nabízí dostatečný výkonnostní rozsah, aby se maximálně přizpůsobil potřebám každého uživatele. Pokud navíc používáte oblíbené kosmetické přípravky, s přístrojem je můžete snadno a efektivně zpracovat. Přístroj je jako chameleon. Na jeho služby se může spolehnout majitel kosmetického studia pro komerční provoz, ale současně velmi náročný uživatel, který chce o svoji pleť pečovat doma ve špičkové kvalitě. Efektivita, účinnost, kvalita. To je BeautyRelax Rlift Exclusive!



Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Estetický přístroj RFLIFT EXCLUSIVE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2670**

EAN **8594166119550**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Datum vydání: 30.4.2022

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel