

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-2932

ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL
MAX PERFORMANCE



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
ÚVODEM	5
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	6
UPOZORNĚNÍ	7
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	8
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	9
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	9
POUŽITÍ SONOGELU	9
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
OBSAH BALENÍ	10
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	11
METODY REDUKCE VRÁSEK	11
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	12
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	13
POPIS PŘÍSTROJE	14
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	16
VODNÍ DERMABRAZE	17
PLASMA TERAPIE	21
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	22
NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT	23
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE	23
OPTIMÁLNÍ POSTUP APLIKACE PLASMOU	23
PLASMA TERAPIE	24
RADIOFREKVENCE	26
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	29
PÉČE O PLEŤ PO POUŽITÍ RADIOFREKVENCE	30
ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ	31
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY	34
PŮSOBNÍ CHLADU	

OBSAH:

NANO HYDRATACE	35
NANO HYDRATACE - UPOZORNĚNÍ	38
FOTONOVÁ TERAPIE	42
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	43
FOTONOVÁ TERAPIE - POZNÁMKY POUŽITÍ	48
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	49
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	50
MAPA CITLIVOSTI PLETI	53
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	54
ČAS APLIKACE	55
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	56
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	57
PÁR VĚT ZÁVĚREM	59
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	60
CERTIFIKACE	60
EU DISTRIBUTOR	60
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	61
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	62

*Tento přístroj je určen výhradně pro **kosmetické** použití. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** ve smyslu platné legislativy EU a ČR a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.*

*Při komerčním provozu je nutné postupovat v souladu s vyhláškou o **hygienických požadavcích** na provoz **kosmetických služeb**, a mít zpracovaný provozní řád schválený místně příslušnou KHS.*

Veškeré popisy účinků uvedené v tomto návodu se vztahují výhradně ke kosmetickému působení na povrch pokožky a její vzhled. Tyto informace nepředstavují zdravotnická tvrzení, nejsou určeny k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění a nenahrazují odbornou lékařskou péči.

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Špičková péče moderními technologiemi

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát účinná aplikace bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro většinu typů pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
mh@santadria.cz
shop.beautyrelax.cz
www.beautyrelax.cz
facebook.com/BeautyRelaxEquipment

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně vašeho zdraví. V tomto návodu k obsluze se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Estetický přístroj pro aplikaci pleti **BeautyRelax** pracuje s technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhým vývojem a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj tohoto typu kladeny. Aby bylo možné dosáhnout vysoké efektivity aplikace pleti, pracuje přístroj s určitým výkonem. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou přizpůsobeny tak, aby působily na pleť s maximální šetrností.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Estetický přístroj BeautyRelax spadá do kategorie estetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za specifických podmínek napomáhají výrazně zlepšit kondici pleti pomocí různých metod aplikace. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby vydržela náročný provoz při komerčním použití s vysokou frekvencí používání.
- Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní aplikaci. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nepronikne pod kůži.
- Estetický přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí pro aplikaci pleti, umožňuje nastavení intenzity. Pokud používáte přístroj pro komerční účely, vždy nejprve vyzkoušejte účinky každé hlavičky sami na sobě, abyste si udělali lepší představu o tom, jak daná technologie působí na pleť při každé úrovni nastavení výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic není vždy třeba nastavit nejvyšší stupeň výkonu. Výkon je třeba vždy přizpůsobit tak, aby bylo pleťová aplikace cítit, ale zároveň nepřesáhlo práh bolesti.
- Rozhodně neplatí, čím častější používání přístroje, tím dosáhnete rychlejších výsledků. Dejte vašemu tělu dostatečný čas, aby mohlo zpracovat energii, která je použitím přístroje uvolněna. Výrazně tak přispějete k ochraně vašeho zdraví. Pleť po aplikaci dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky. Výrazně tak přispějete k lepšímu průběhu její regenerace.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš produktový manažer Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje očekávání, které jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE je přístroj, který je určen pro kosmetickou aplikaci pleti na velmi kvalitní a profesionální úrovni. Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikačních hlavic žádnou technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby poskytoval základní kosmetické použití: vyčištění pleti, hydratace pleti, zapracování kosmetických přípravků, podpora zlepšení kondice pleti, zklidnění pleti. Přístroj působení na pleť celou řadou technologií: vodní cirkulace, plazmový tok s ozonem, radiofrekvence, elektroforéza, působení chladu, nano hydratace a světelná terapie.

Rozsah licence pro využívání jednotlivých technologií za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro jednotlivé technologie, které přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce **SANTADRIA s.r.o.** nenese odpovědnost za používání přístroje v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je přístroj provozován. Provozovatel je oprávněn využívat přístroj pro komerční účely pouze v rozsahu funkcí a technologií, ke kterým má odpovídající oprávnění, odbornou způsobilost nebo licenci podle aktuálně platných právních předpisů. Distributor/prodejce **SANTADRIA s.r.o.** nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s podmínkami a pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, a to v rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi vyobrazeními a dokumentaci si uschovejte pro případné pozdější použití. Instalaci a uvedení přístroje do provozu provádějte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pokud je vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti, zda je váš zdravotní stav slučitelný s používáním přístroje, doporučujeme vhodnost použití konzultovat se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.
- Používá-li přístroj více osob, je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržování hygienických zásad. Po každém použití důkladně dezinfikujte kontaktní části aplikační hlavice dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu.
- Pokud je přístroj poškozen, nefunguje správně nebo došlo k jeho pádu do vody, **nikdy jej neuvádějte do provozu.**
- V případě mechanického poškození se nedotýkejte vnitřních částí přístroje, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho vnitřnímu poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na servisní oddělení nebo autorizovaného prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchy, bazény apod.
- Přístroj **není omyvatelný**. Žádná jeho část nesmí být ponořena do vody ani čištěna pod proudem tekoucí vody.
- Nikdy nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, vyčkejte před jeho zapnutím alespoň **3 hodiny**, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje.
- Přístroj není určen pro používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují jeho bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, otevřený oheň apod.
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. Veškeré servisní zásahy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí. Chraňte jej před prachem a nečistotami.
- Během provozu přístroj nijak nezakrývejte, zejména nezakrývejte ventilační otvory a mřížku ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze ani za následky způsobené nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu používání přístroje nenese distributor odpovědnost.
- **Při komerčním použití přístroje je provozovatel povinen dodržovat veškeré hygienické předpisy platné v místě provozovny, zejména pokyny krajské hygienické stanice (KHS). Dezinfekce aplikačních hlavice mezi jednotlivými klienty je povinná. Tento návod nenahrazuje hygienický řád provozovny.**



KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Použití přístroje **BeautyRelax** není vhodné nebo je **zakázáno** v následujících případech:

Zdravotní omezení

- Těhotenství a období kojení
- Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické přístroje
- Kovové implantáty v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu (šrouby, destičky, výplně, zubní implantáty v blízkosti aplikované oblasti)
- Epilepsie
- Onkologické onemocnění (aktivní nebo v léčbě)
- Závažná onemocnění srdce a cév
- Poruchy krevní srážlivosti
- Autoimunitní onemocnění v aktivní fázi
- Horečnaté a infekční stavy
- Neurologická onemocnění spojená se sníženou citlivostí pokožky

Kožní omezení

- Otevřené rány, čerstvé jizvy, popáleniny
- Akutní záněty kůže, ekzém, lupénka v aktivní fázi
- Silné akné, hnisavé nebo zanícené projevy
- Infekční kožní onemocnění (bakteriální, virové, plísňové)
- Aktivní opar (herpes)
- Silné podráždění, alergická reakce nebo spálená pokožka
- Po čerstvých estetických zákrocích
(botox, výplně, chemický peeling, laser, mezoterapie – minimálně 2–4 týdny dle typu zákroku)

Další omezení použití

- Nepoužívat na očích, na očních víčkách, štítné žlázy a genitálií
- Nepoužívat při snížené schopnosti vnímat teplo nebo bolest
- Nepoužívat na poraněnou pokožku
- Nepoužívat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Důležité upozornění

V případě jakýchkoliv pochybností, chronického onemocnění nebo dlouhodobé léčby doporučujeme konzultaci s lékařem před použitím přístroje. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické použití a nenahrazuje lékařskou péči.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt

HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Podpora přirozených procesů spojených s tvorbou kolagenu.
- Podpora přirozené obnovy a pružnosti elastických vláken.
- Přispění ke zlepšení pružnosti a pevnosti pleti.
- Podpora optického zvýraznění kontur obličeje.
- Přispění k vizuálnímu vyhlazení výraznějších vrásek.
- Podpora výživy a celkové kondice pleti.
- Přispění k okamžitému pocitu hydratace pleti.
- Podpora prokrvení povrchových vrstev pokožky.
- Jemná mechanická stimulace pleti, která může přispívat ke zmírnění pocitu otoků obličeje.
- Napomáhá k odstranění velmi drobných zbytků make-upu a nečistot z povrchu pleti a pórů.
- Podpora jemného povrchového čištění pleti a jejího celkově hladšího vzhledu.
- Přispění k pocitu uvolnění kožních pórů.
- Vhodné jako doplňková péče pro pleť se sklonem k nedokonalostem.
- Podpora přirozeného krevního oběhu v oblasti aplikace.
- Přispění ke sjednocenějšímu barevnému vzhledu pleti.
- Jemná mechanická masáž povrchu pokožky.
- Přispění ke zlepšení vzhledu pleti s nerovnoměrným tónem.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavici pro radiofrekvenci.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: vodní dermabrazie, plasma terapie, elektroforéza, působení chladu, nano hydratace a fotonové světlo
- Výkon: 65W
- Červené světlo: vlnová délka 630nm
- Modré světlo: vlnová délka 470nm
- Žluté světlo: vlnová délka 590nm
- Zelené světlo: vlnová délka 520nm
- Velký dotykový barevný displej 7"
- Radiofrekvence: 1MHz
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry hlavní jednotky: 37x36x30cm
- Hmotnost: 5kg

OBSAH BALENÍ

- Hlavní jednotka 1x
- Aplikační hlavice s vodní dermabrazí 1x
- Vyměnitelné aplikátory pro vodní dermabrazí 3x
- Aplikační hlavice s plasma terapií 1x
- Aplikační hlavice s radiofrekvencí 1x
- Aplikační hlavice s elektroforézou (neinvazivní kosmetická iontoforéza) 1x
- Aplikační hlavice s tepelnou terapií – působení chladu 1x
- Aplikační hlavice s nano hydratací 1x
- Sada ampulek 1x
- Obličejová maska s funkcí fotonové terapie 1x
- Ochranné textilní brýle 1x
- Sonogel 1x
- Návod k obsluze 1x
- Napájecí kabel 220V 1x
- Prodlužovací napájecí kabel 220V 1x

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

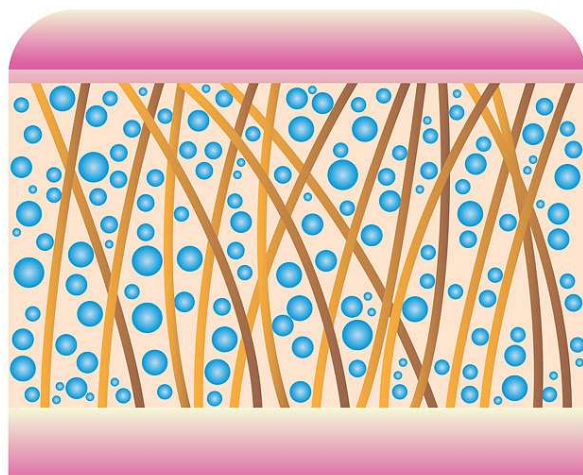

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

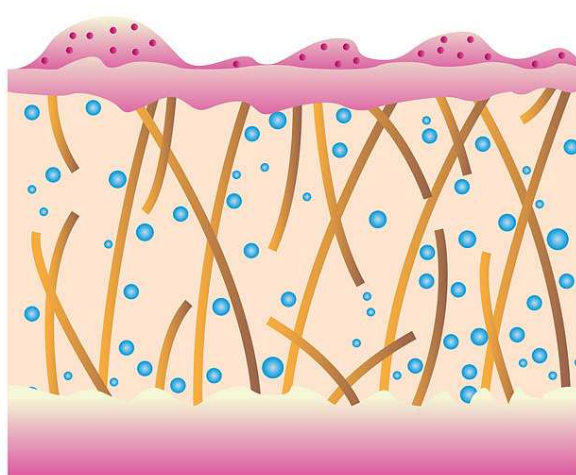

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax AntiAge Oxygen Professional Max Performance je multifunkční estetický přístroj určený pro komplexní pleťová ošetření na nejvyšší profesionální úrovni. Nabízí všechny klíčové technologie nezbytné pro udržení zdravé, krásné a vitální pleti – od hlubkového čištění, zapracování kosmetických přípravků a intenzivní hydratace až po lifting, zklidnění a regeneraci pleti. Jediný přístroj tak plnohodnotně nahrazuje až **sedm samostatných zařízení**. Aplikační hlavice jsou navrženy tak, aby bylo jejich použití maximálně účinné, bezpečné a zároveň velmi příjemné, bez nepříjemných či bolestivých pocitů.


Přístroj se vyznačuje precizním zpracováním všech komponentů a mimořádně dlouhou životností aplikačních hlavic. Je koncipován pro **komerční provoz s vysokou frekvencí použití**, nabízí vysokou užitnou hodnotu a rychlou návratnost počáteční investice. Je vhodný pro všechny typy pleti. **BeautyRelax AntiAge Oxygen Professional Max Performance** představuje komplexní řešení péče o pleť – omlazení, vyhlazení, výživu, ochlazení i hydrataci na jednom místě.



POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. TECHNOLOGIE PLASMY
3. RADIOFREKVENCE
4. ELEKTROFORÉZA PRO MEZOTERAPII
5. PŮSOBENÍ CHLADU
6. NANO HYDRATACE
7. FOTONOVÁ TERAPIE

7 APLIKAČNÍCH HLAVIC

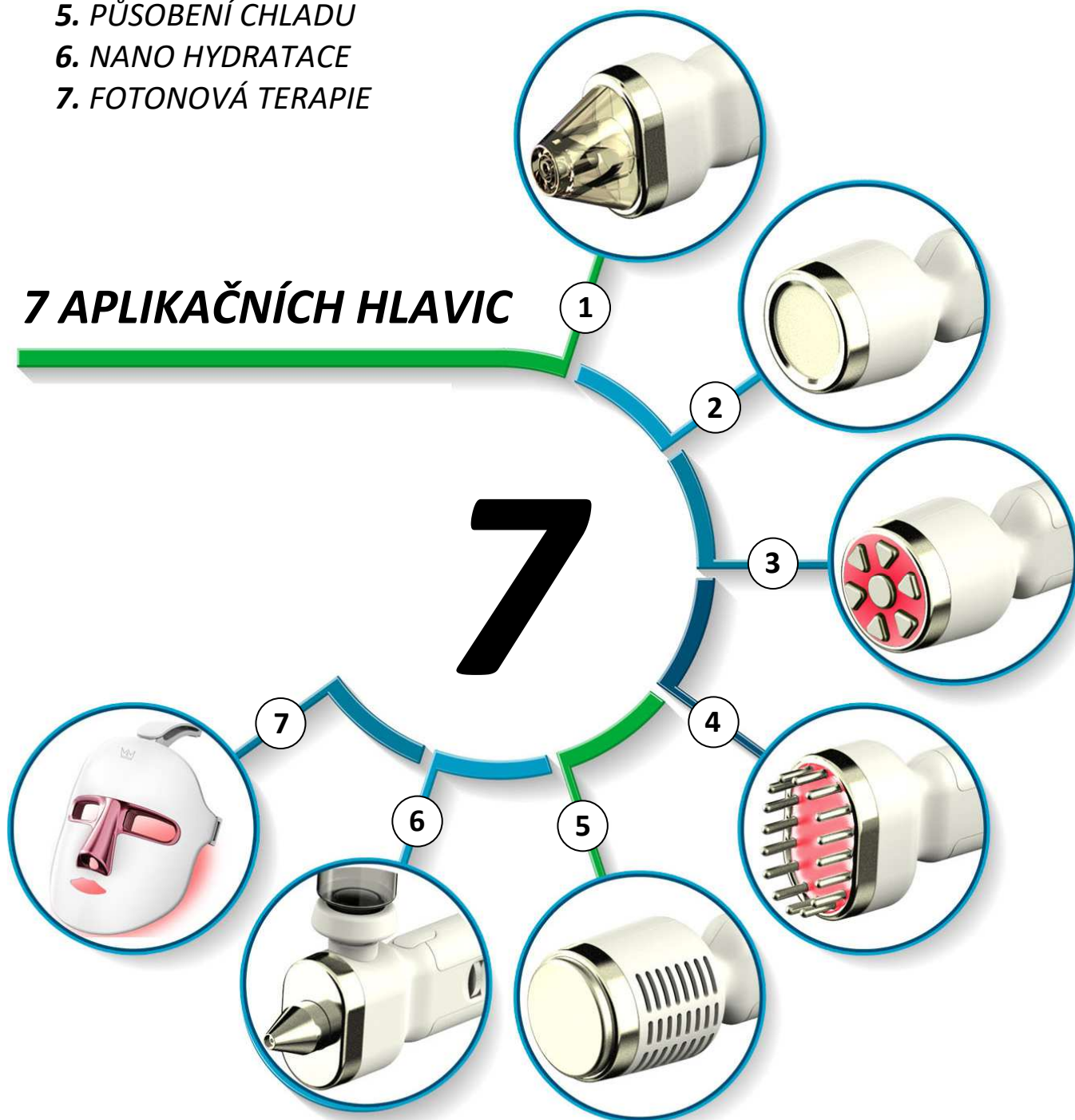

POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice s elektroforézou pro mezoterapii
2. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
3. Aplikační hlavice s působením chladu
4. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
5. Aplikační hlavice s nano hydratací
6. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
7. Zásobník na tekutinu
8. Odpadní nádobka
9. Barevný dotykový displej
10. Tlačítko intenzity plazmových toků
11. Tlačítko nastavení množství cirkulace tekutiny



POPIS PŘÍSTROJE

1. Držák na aplikační hlavice
2. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s radiofrekvencí
3. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s působením chladu
4. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s plazmovými toky
5. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s elektroforézou
6. Zdířka pro zapojení masky s fotonovou terapií
7. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s nano hydratací
8. Zdířka pro zapojení aplikační hlavice s vodní dermabrazí
9. Výstup chlazení přístroje (NIKDY NEZAKRÝVEJTE)
10. Tlačítko ON/OFF
11. Zdířka pro zapojení napájecího kabelu s pojistkou




INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice. Šroubky utahujte s citem, aby nedošlo ke stržení závitu a případnému prasknutí držáku.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na zadní straně hlavní jednotky do polohy 1. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF** na zadní straně hlavní jednotky do polohy 0.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Platí pro hlavici s radiofrekvencí, působením chladu, plazmovými toky a elektroforézou. **Zašroubování prstence proveďte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utažení
prstence
zašroubováním**

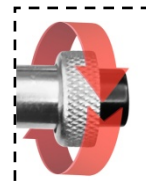

VODNÍ DERMABRAZE



Aplikační hlavice

Aplikační hlavice je speciálně navržena pro rovnoměrné a kontrolované dávkování tekutiny během ošetření. Dochází k plynulému přečerpávání tekutiny mezi nádržkami, přičemž kapalina okamžitě hydratuje pleť a současně na sebe váže nečistoty, bakterie a kožní rezidua.

Nasátá tekutina je následně odváděna do odpadní nádoby. Díky plnému kontaktu aplikátoru s pleť nedochází k nežádoucímu stékání tekutiny. K dispozici je šest vyměnitelných aplikátorů různých průměrů, které umožňují efektivní ošetření jak velkých, tak i menších a citlivějších oblastí obličeje.

Systém vakuového nasávání

Estetický přístroj BeautyRelax zajišťuje důkladné a hloubkové čištění pleti. Účinně napomáhá k odstranění černých teček, pupínků a dalších nečistot. Aplikační hlavice jemně nasaje pokožku a hrana aplikátoru mechanicky odstraní nečistoty, černé tečky i nevzhledné bílé čepičky z povrchu pleti.

Tento systém představuje šetrnou a účinnou alternativu k ručnímu vymačkávání, které často vede k výraznému zarudnutí a podráždění pokožky. Povrchové pigmentové skvrny i rozšířené póry se postupně zjemňují. Přístroj BeautyRelax je vysoce účinný, a přesto maximálně šetrný k pleti.

Systém vodní cirkulace

Systém vodní cirkulace je založen na precizně navržené aplikační hlavici, která zajišťuje rovnoměrné dávkování tekutiny po celou dobu ošetření. Tekutina je kontinuálně přečerpávána mezi nádržkami, okamžitě hydratuje pleť a současně na sebe váže nečistoty, bakterie a kožní rezidua. Nasátá tekutina je následně odváděna do odpadní nádoby. Díky dokonalému kontaktu aplikátoru s pletí je zajištěn čistý a komfortní průběh ošetření bez nežádoucího stékání tekutiny.


Důležité upozornění k používání aplikační hlavice vodní dermabraze

Aplikační hlavice vodní dermabraze **není určena k vysávání velkých mechanických nečistot**, zbytků make-upu, peelingových částic nebo jiných viditelných nečistot z povrchu pleti. Slouží výhradně k **odsávání kožního mazu, mikronečistot a uvolněných nečistot z kožních pórů**.


V případě, že je přístroj používán na nedostatečně očištěnou pleť nebo k „vysávání“ větších nečistot, **může dojít k ucpání systému vodní cirkulace**, hadiček nebo vnitřních částí přístroje. To může vést ke snížení účinnosti aplikace, poruše funkce nebo trvalému poškození zařízení.

Důkladné předčištění pleti je proto nezbytným krokem, který nelze vynechat.

VODNÍ DERMABRAZE

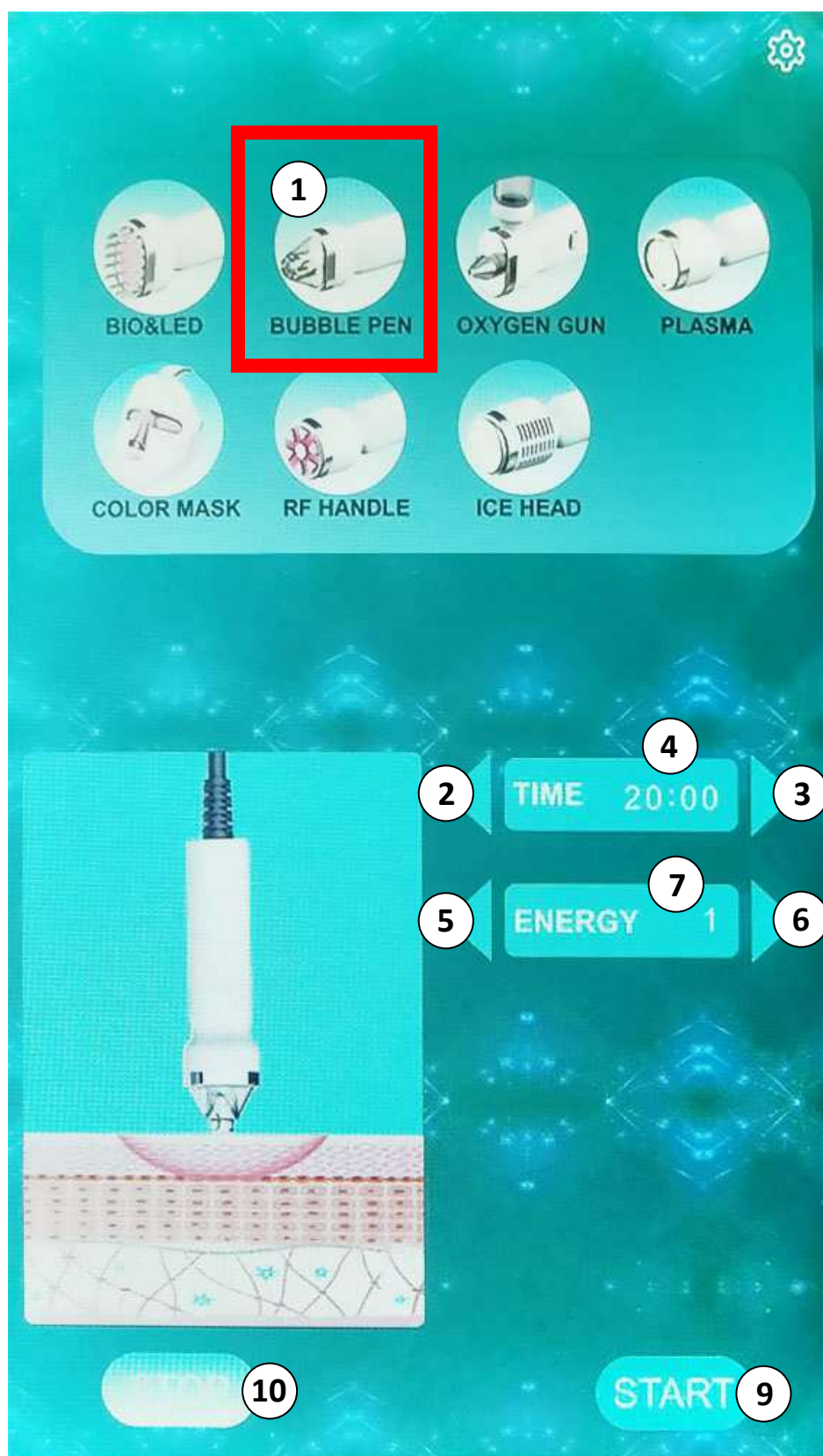

- Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte tlačítko na displeji **(1)**.
- Zásobník na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje aplikované části pleti a reliéfu povrchu pokožky.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajíc čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **START (9)**. Činnost můžete zastavit pomocí tlačítka **STOP (10)**.
- Pomocí tlačítka **(6)** si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání. Pomocí tlačítka **(5)** si můžete nastavit snížení vakuového nasávání. Hodnota vakuového nasávání je zobrazena na displeji **(7)**. K dispozici jsou celkem 3 úrovně intenzity vakuového sání.
- Pomocí otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.

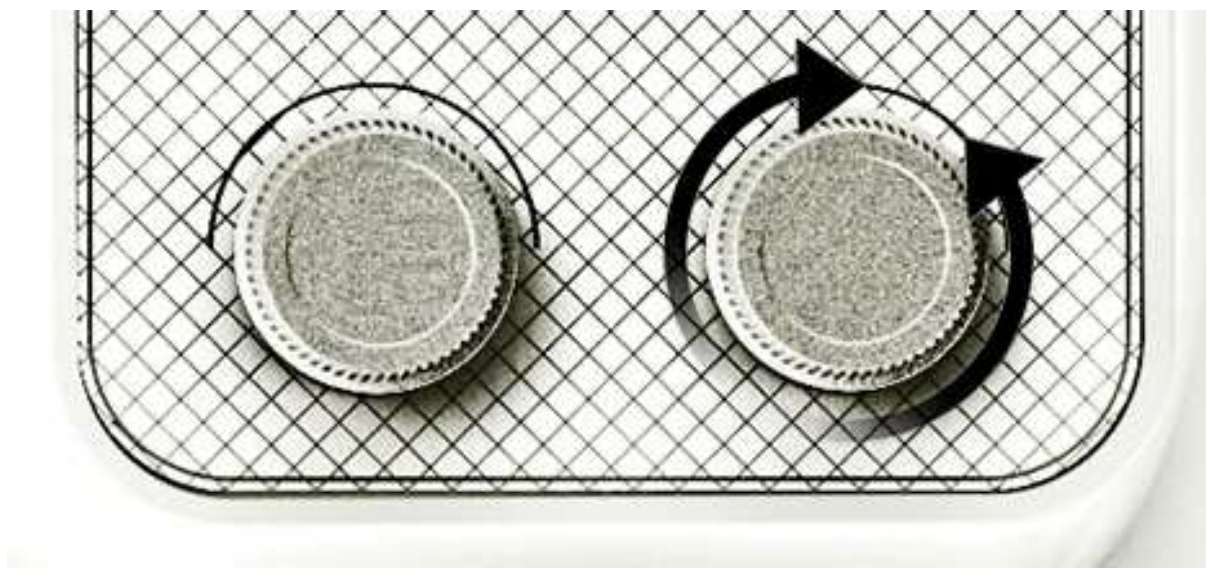

- Hlavicí se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat oba zásobníky na vodu. Pravý zásobník je určen jako zdroj tekutiny. Levý zásobník jako odpadní nádobka. Zásobník na tekutinu musí být pro správné fungování systému dostatečně naplněný. Levou odpadní nádobku pravidelně vyprazdňujte. Oba zásobníky se do přístroje instalují pomocí závitů.
- **Množství vody (pomocí otočného tlačítka)**, které je do aplikační hlavice přečerpáváno. Nastavte si takovou hodnotu, která bude poskytovat dostatečné množství tekutiny. Na druhé straně bude mít hlavice dostatečný výkon pro plynulé odsávání tekutiny. V průběhu práce s aplikační hlavicí by neměla tekutina příliš stékat po povrchu pleti.
- **Síla podtlaku (nastavení tlačítka na displeji)**, která se generuje v aplikační hlavici. Pohyb aplikační hlavice po pleti by měl být intenzivní. Na starě druhé by neměl být příliš silný, což by bránilo plynulému pohybu aplikátoru po pleti. Sílu podtlaku by měla vždy korespondovat s množstvím přečerpávané tekutiny.

PLASMA TERAPIE



S přibývajícím věkem se mění struktura i celkový vzhled pleti. Epidermis se postupně ztenčuje, pigmentové skvrny jsou výraznější a produkce kolagenu se zpomaluje. Pleť ztrácí svou pružnost, kontury obličeje ochabují a vrásky se prohlubují a stávají se viditelnějšími. Technologie plasmového toku s ozonem může **přispět ke zlepšení celkového vzhledu pleti** a podpořit její **čistší a svěžejší vzhled**.

Plasmový tok s ozonem přistupuje k péči o pleť z opačného směru než většina běžných kosmetických technologií. Ty se zpravidla zaměřují na řešení následků – například tvorby černých teček způsobené nedostatečným čištěním pleti, vzniku vrásek jako projevu stárnutí nebo ucpaných pórů v důsledku zvýšené mastnoty. Aplikace plasmy s ozonem funguje především jako prevence vzniku nežádoucích kožních defektů.

Keramická plocha aplikátoru generuje stejnosměrný proud s vysokofrekvenčním napětím. Mezi keramickou hlavicí aplikátoru a pletí vzniká plasmový výboj. Plasmový výboj **působí povrchově hygienickým způsobem** a může **napomáhat k redukci nežádoucích mikroorganismů na povrchu pokožky**. Přiblížením aplikátoru k pokožce dochází ke kontrolovanému plasmovému výboji, působí **povrchově hygienickým účinkem** a může **přispívat ke snížení množství mikroorganismů na povrchu pokožky**. Optimální vzdálenost mezi aplikátorem přístroje a pletí je přibližně 4 milimetry.

IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt aknézní pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



NEŽ ZAČNETE PLASMA TERAPII POUŽÍVAT

Před samotnou aplikací pleti pomocí přístroje pokožku důkladně zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, dokud pleť zcela neuschne – na pokožce se před použitím nesmí nacházet žádné stopy vlhkosti.

Před prvním použitím přístroje doporučujeme provést zkušební aplikaci, například na předloktí. Po aplikaci vyčkejte přibližně 1 hodinu a sledujte, zda pokožka nereaguje negativně.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLASMA TERAPIE

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy nebo jiným závažným kožním onemocněním.
- Na pleť netlačte aplikační hlavici nadměrnou silou.
- Po aplikaci doporučujeme použít vyživující masku, krém nebo noční krém.
- Po ošetření obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní, a poté můžete dle potřeby nanést make-up.

OPTIMÁLNÍ POSTUP APLIKACE PLASMOU


- Pleť nejprve důkladně odličte běžným způsobem. Využít můžete také hlavici s vodní dermabrazí. Na pleti nesmí zůstat žádné zbytky make-upu ani nečistot, které by snižovaly účinnost plazmových toků.
- Před aplikací musí být pleť dokonale suchá.
- Sundejte veškeré šperky, jako jsou náušnice, náhrdelníky, náramky apod.
- Aplikaci provádějte pomocí aplikační hlavice s plazmovými toky.
- Aplikační hlavicí se po pleti pohybujte pomalu. Plazmový výboj vzniká při optimální vzdálenosti hlavice od pokožky. Keramický aplikátor by se měl nacházet ve vzdálenosti přibližně 1–4 mm od pleti. Během používání se snažte o minimální přímý kontakt aplikátoru s pokožkou.
- Aplikace je zcela bezbolestná. Během používání můžete zaznamenat jemné aroma, které je přirozenou součástí působení plazmového toku.
- V místě aplikace může dojít k mírnému zarudnutí pokožky. Jedná se o přirozenou reakci, která obvykle během několika minut odezní.
- Aplikační hlavice se během použití nesmí dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
- Během aplikace nepoužívejte žádné kosmetické přípravky.
- Zaměřte se na vybrané oblasti obličeje nebo dekoltu, kde je účinek přístroje nejvíce žádoucí.
- Po ukončení aplikace použijte vhodný kosmetický přípravek, krém nebo sérum.

PLASMA TERAPIE

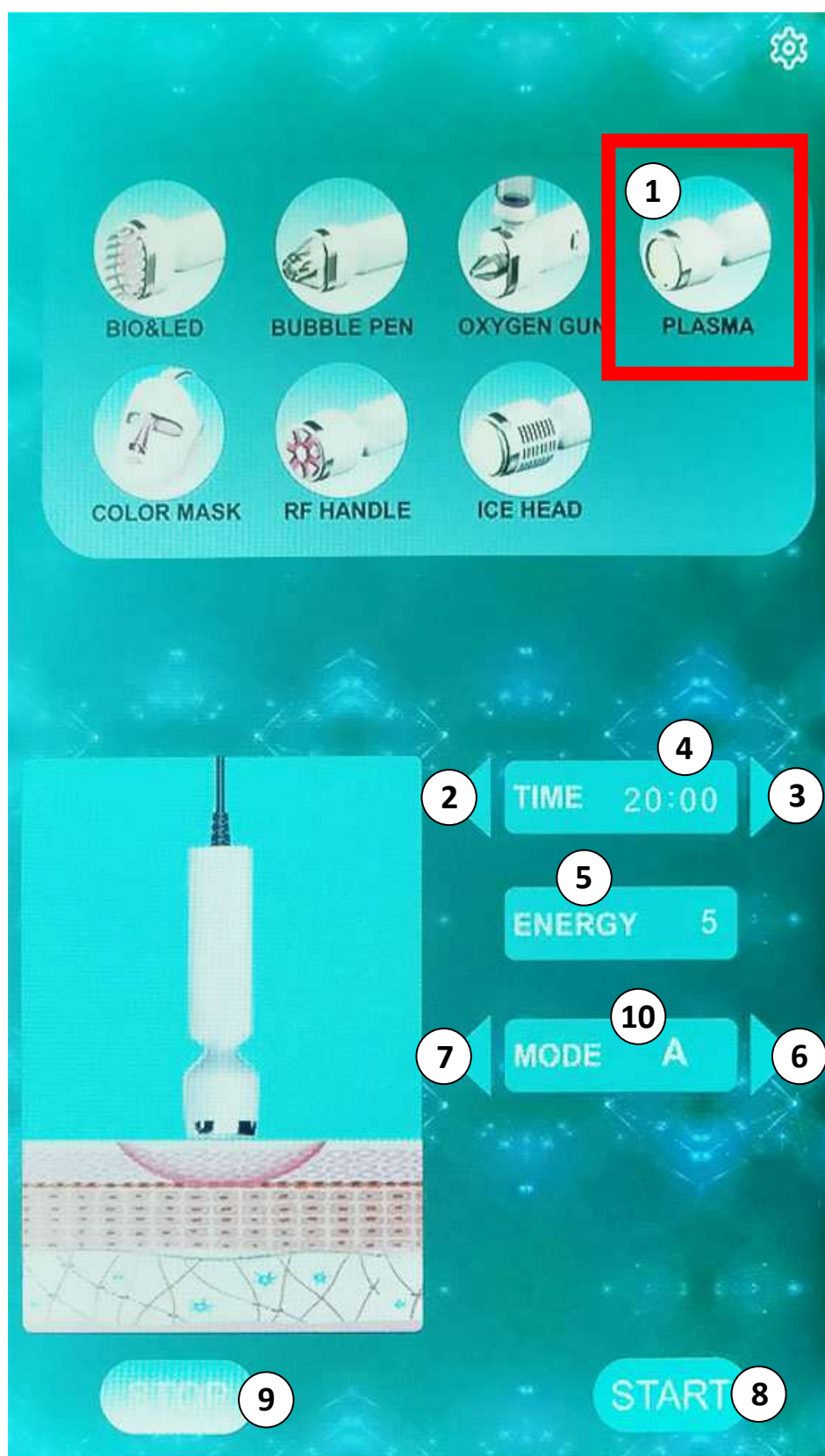

PLASMA TERAPIE

- Pro použití funkce plasmových toků stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajíc čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí otočného tlačítka si můžete nastavit intenzitu plasmových toků. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.

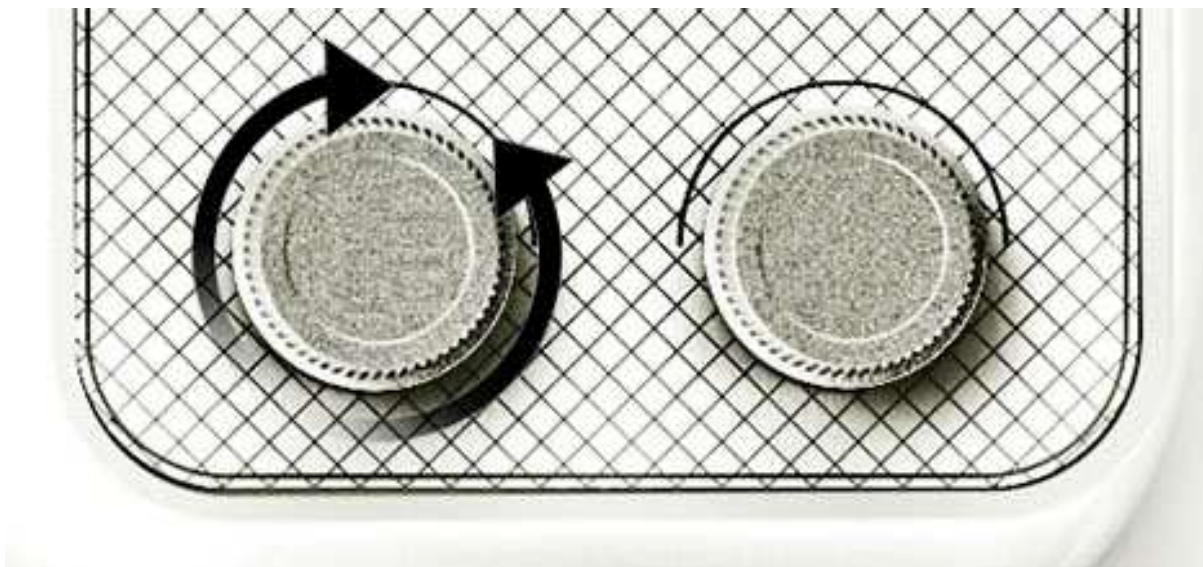

- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(5)**.
- Pomocí tlačítek **(7)** a **(6)** si můžete volit mód plasmových toků. K dispozici jsou 4 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C, D**. Každý mód má specifický režim fungování plasmových toků. (stálé působení, přerušování na 2 vteřiny, přerušování na 1 vteřinu, přerušování na 0,5 vteřiny).
- Zvolte si takovou intenzitu působení plasmových toků, které vám budou na pleti stále příjemné a nebudou přesahovat hranici bolesti. Nejčastěji se pracuje v režimu kontinuálních plasmových toků, kdy plasmové toky působí stále na pleť bez přerušování. Nastavený mód je zobrazen na displeji **(10)**.
- Pomocí tlačítka **START (8)** činnost plasmových toků aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (9)** zastavíte.

RADIOFREKVENCE



Radiofrekvence patří v estetické péči mezi metody s vysokou účinností při správném použití. Speciální aplikační hlavice přenáší do pokožky radiofrekvenční vlny o přesně nastavené frekvenci, které vytvářejí kontrolovaný tepelný gradient ve vrstvě dermis. Tento proces výrazně ovlivňuje regenerační mechanismy pleti. Dodaná energie může **kosmeticky podporovat procesy spojené s pevnějším a vypnutějším vzhledem pleti**. Během ošetření je na pleti cítit příjemné, hluboké teplo.

Díky maximálně přesnému zacílení radiofrekvenční energie, a to i v oblastech s výraznější tukovou vrstvou, dochází k aktivaci metabolických procesů, které vedou k efektivnímu vyhlazení povislých kontur a zlepšení pevnosti pleti. Ošetření je obzvláště vhodné pro zralou pleť s výskytem viditelných a hlubokých vrásek. Výkon lze plynule regulovat, což umožňuje bezpečnou a komfortní aplikaci i u pleti s vyšší citlivostí.

*Tato technologie **nenahrazuje dermatologickou ani lékařskou péči** a není určena k léčbě kožních onemocnění.*

RADIOFREKVENCE



RADIOFREKVENCE

- Pro použití funkce radiofrekvence stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítek **(8)** a **(9)** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C, D**. Každý mód má specifický režim fungování radiofrekvence. Na výběr je stálé působení radiofrekvenčních vln nebo přerušované. Aktuálně nastavený mód je zobrazen na displeji **(10)**.
- Zvolte si takovou intenzitu působení radiofrekvence, která vám bude na pleti stále příjemná a nebude přesahovat hranici bolesti. Nejčastěji se pracuje v režimu kontinuálního působení radiofrekvence, kdy radiofrekvenční vlny působí stále na pleť bez přerušení.
- Pomocí tlačítka **START (11)** činnost radiofrekvence aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (12)** zastavíte.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

- 1.** Při ošetření větších ploch (obličej, krk nebo dekolt) doporučujeme nanášet sonogel postupně po menších částech. Přestože má gel výborné hydratační vlastnosti, při delší aplikaci může postupně vysychat.
- 2.** Během používání dbejte na to, aby byly obě kuličky aplikační hlavice neustále v kontaktu s pletí.
- 3.** Pokud je vám působení radiofrekvence nepříjemné na určitém místě i při nejnižší intenzitě, zkuste snížit množství sonogelu, zkrátit dobu kontaktu hlavice s pletí, nebo se této oblasti zcela vyhnout.
- 4.** Upozornění: Při prvním kontaktu s pletí vždy začínějte na nejnižší úrovni intenzity. Aplikátor přiložte nejprve na oblast obličeje s větším množstvím podkožního tuku. Intenzitu můžete postupně zvyšovat podle vlastního pocitu. Jakmile začne být aplikace nepříjemná, snižte intenzitu zpět na minimum nebo ošetření ukončete.
- 5.** Tip: Ošetřovaná oblast by ideálně neměla být pokryta výraznými a silnými chloupky. Usnadní to pohyb aplikační hlavice po pokožce a radiofrekvence se bude lépe přenášet na povrch pleti.
- 6.** Doporučení: Po aplikaci nevystavujte pleť po dobu několika hodin horké vodě a vyhněte se návštěvě sauny. Pokožka je po ošetření stále citlivější a vyšší teploty by ji mohly zbytečně podráždit. Během používání přístroje dochází k zahřívání pleti – pokud pocítíte nadměrné teplo, udělejte si pauzu a nechte pokožku vychladnout.

PÉČE O PLEŤ PO POUŽITÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence může **kosmeticky podporovat procesy spojené s pevnějším a vypnutějším vzhledem pleti**. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera, panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy, AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele, sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ



Aplikační hlavice pracuje na principu elektroforézy. Kosmetické přípravky jsou do pleti transportovány pomocí mikroproudu v přesně optimalizované frekvenci, a to zcela neinvazivně – žádná část hlavice neproniká skrz povrch pokožky. Ošetření nepředstavuje žádnou zátěž pro organismus a přináší viditelné, skvěle dosažitelné výsledky.

Neinvazivní mezoterapie umožňuje účinnou penetraci kosmetických roztoků hluboko do kožních vrstev, kde dochází k cílenému vstřebávání přírodních extraktů a vitamínů. Aplikační hlavice je vybavena integrovaným zásobníkem pro opakované plnění tekutými přípravky a umožňuje snadné a přesné nastavení výkonu. Bez krve. Bez modřin. Bez bolesti. Řekněte stop jehličkám a nepříjemným pocitům. Mikro Jehličkování patří minulosti. Neinvazivní mezoterapie pomocí elektroforézy je budoucnost – a tu můžete využívat už dnes.

ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ



ELEKTROFORÉZA S FOTONOVOU TERAPIÍ

- Pro použití funkce elektroforézy stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajíc čas aplikace je zobrazena na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení elektroforézy. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítek **(8)** a **(9)** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C, D**. Každý mód má specifický režim fungování elektroforézy. Na výběr je stálé působení elektroforézy nebo přerušované. Aktuálně nastavený mód je zobrazen na displeji **(10)**.
- Zvolte si takovou intenzitu působení elektroforézy, která vám bude na pleti stále příjemná nebude přesahovat hranici bolesti. Nejčastěji se pracuje v režimu kontinuálního působení elektroforézy, kdy elektroforéza působí stále na pleť bez přerušení.
- Pomocí tlačítek **(11)** a **(12)** si můžete nastavit působení fotonového světla. Číslo zvolené barvy je zobrazeno na displeji **(13)**.
- Pomocí tlačítka **START (14)** činnost elektroforézy aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (15)** zastavíte.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTROFORÉZY

1. Před každým použitím aplikační hlavice s elektroforézou je nutné pokožku důkladně očistit a osušit. Ideální je předchozí použití hlavice s vodní dermabrazí.
2. Přístroj lze používat i bez kosmetického přípravku. Samotná technologie elektroforézy má stimulační účinek na pleť. V tomto případě naneste na pokožku dostatečnou vrstvu sonogelu, aby bylo zajištěno správné propojení technologie s povrchem pleti. Sonogel během aplikace průběžně doplňujte – část se vstřebá do pokožky, část může zaschnout. Nikdy nepoužívejte aplikační hlavici na suchou pokožku.
3. Speciální tvar hlavice umožňuje použití nejen na obličej, krk a dekolt, ale také v oblasti vlasové pokožky. Při aplikaci vlasového séra lze díky konstrukci hlavice přípravek velmi efektivně zapracovat do pokožky.
4. Během používání dbejte na to, aby byla hlavice v neustálém a plném kontaktu s pletí.
5. V oblasti pod bradou, na krku a dekoltu se vyhněte intenzivní stimulaci míst, kde se nacházejí lymfatické uzliny a štítná žláza. Krátký, letmý kontakt je povolen, dlouhodobá a intenzivní stimulace je zakázána.
6. Intenzitu vždy nastavujte podle vlastního pocitu. Na pokožce byste měli vnímat jemné mravenčení, které by však mělo zůstat v komfortní a snesitelné úrovni. Intenzitu v průběhu aplikace upravujte podle citlivosti konkrétní oblasti pleti.
7. Při použití fotonového světla není nutné používat ochranu zraku. Přesto doporučujeme mít během aplikace zavřené oči nebo se vyhnout dlouhodobému přímému pohledu do světelného zdroje, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání zraku.

PŮSOBENÍ CHLADU



Chladivé ošetření pro okamžité zklidnění pleti.

Ideální jako závěrečná fáze pleťové péče. Pleť se během několika minut vrací na přirozenou teplotu, dochází k jejímu zklidnění a viditelnému stažení pórů. Velká plochá hlavice s ergonomickým tvarem se pohodlně drží v ruce a umožňuje rovnoměrné ochlazení i v obtížně dostupných záhybech obličeje.

PŮSOBNÍ CHLADU



PŮSOBENÍ CHLADU

- Pro použití funkce působení chladu stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení chladu. K dispozici je 5 úrovní nastavení výkonu: **1, 2, 3, 4, 5**. Každá hodnota symbolizuje °C povrchu aplikační hlavy **1°C, 2°C, 3°C, 4°C, 5°C**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítka **START (8)** aktivujete působení chladu. Pomocí tlačítka **STOP (9)** působení zastavíte.

NANO HYDRATACE



Vysoce účinná metoda pro okamžitou a intenzivní hydrataci pleti.

Tato technologie podporuje účinnost běžných hydratačních přípravků na vodní bázi a přispívá k rychlému a rovnoměrnému zvlhčení povrchu pleti. Již během krátké doby po aplikaci může pleť působit svěžejším, hydratovanějším a komfortnějším dojmem. Použití je vhodné pro většinu typů pleti.

Kosmetický přístroj je vybaven atomizérem nové generace, který přeměňuje tekutý přípravek ze zásobníku na jemnou, rovnoměrně rozptýlenou mlhu. Hydratační roztok je díky této formě aplikace snadno a šetrně rozprostřen po povrchu pleti, což umožňuje jeho efektivní využití v rámci kosmetické péče.

Hlavní výhody:

- Lze použít hydratační roztoky na vodní bázi bez obsahu olejů
- Atomizér nové generace vytváří jemnou a rovnoměrnou mlhu
- Podpora rovnoměrného zvlhčení povrchu pleti bez mechanického zatížení
- Rychlý a příjemný pocit hydratace již během aplikace

NANO HYDRATAČE - UPOZORNĚNÍ

Velikost vzniklých částic je **menší než samotný kožní pór**, což umožňuje snadné pronikání hydratačního přípravku přes horní vrstvu pleti. Výsledkem je **okamžitá a vysoká úroveň hydratační péče** s viditelným efektem.

Hlavní výhody hydratační nano hlavice

- Atomizér nové generace vytváří **jemnou nano mlhu**
- Molekuly roztoku usnadňují **rovnoměrné rozprostření hydratační složky na povrchu pleti**
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund

Nevhodné přípravky (riziko ucpání atomizéru!)

Oleje a olejové textury

- Rostlinné oleje, silikonové přípravky, mastná séra
- **Proč?** Oleje se špatně rozprašují a vytvářejí v atomizéru lepkavý film

Husté krémy a gely s pevnými částicemi

- Krémy s fyzikálními UV filtry (oxid zinečnatý, oxid titaničitý)
- Gely s peelingovými nebo abrazivními částicemi

Alkoholové a silně astringentní přípravky

- Přípravky s vysokým obsahem alkoholu
- **Proč?** Alkohol může pleť nadměrně vysušovat a poškodit vnitřní mechanismy nano pistole


Vysoce viskózní látky

- Med, sirupy, neředěné kolagenové gely
- **Proč?** Mohou způsobit tvorbu neprůchodných usazenin a ucpání atomizéru

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ SPRÁVNÉ VODY

Přístroj je možné plnit pouze **destilovanou** nebo **kojeneckou** vodou. Použití jakékoli jiné vody (např. vodovodní, minerální, perlivé) nebo nevhodných tekutin způsobí nevratné ucpání atomizéru a bude vyžadovat nákladnou výměnu celé hydratační hlavice. Zodpovědnost za takové poškození vzniklé nesprávným použitím nese uživatel.

NANO HYDRATACE

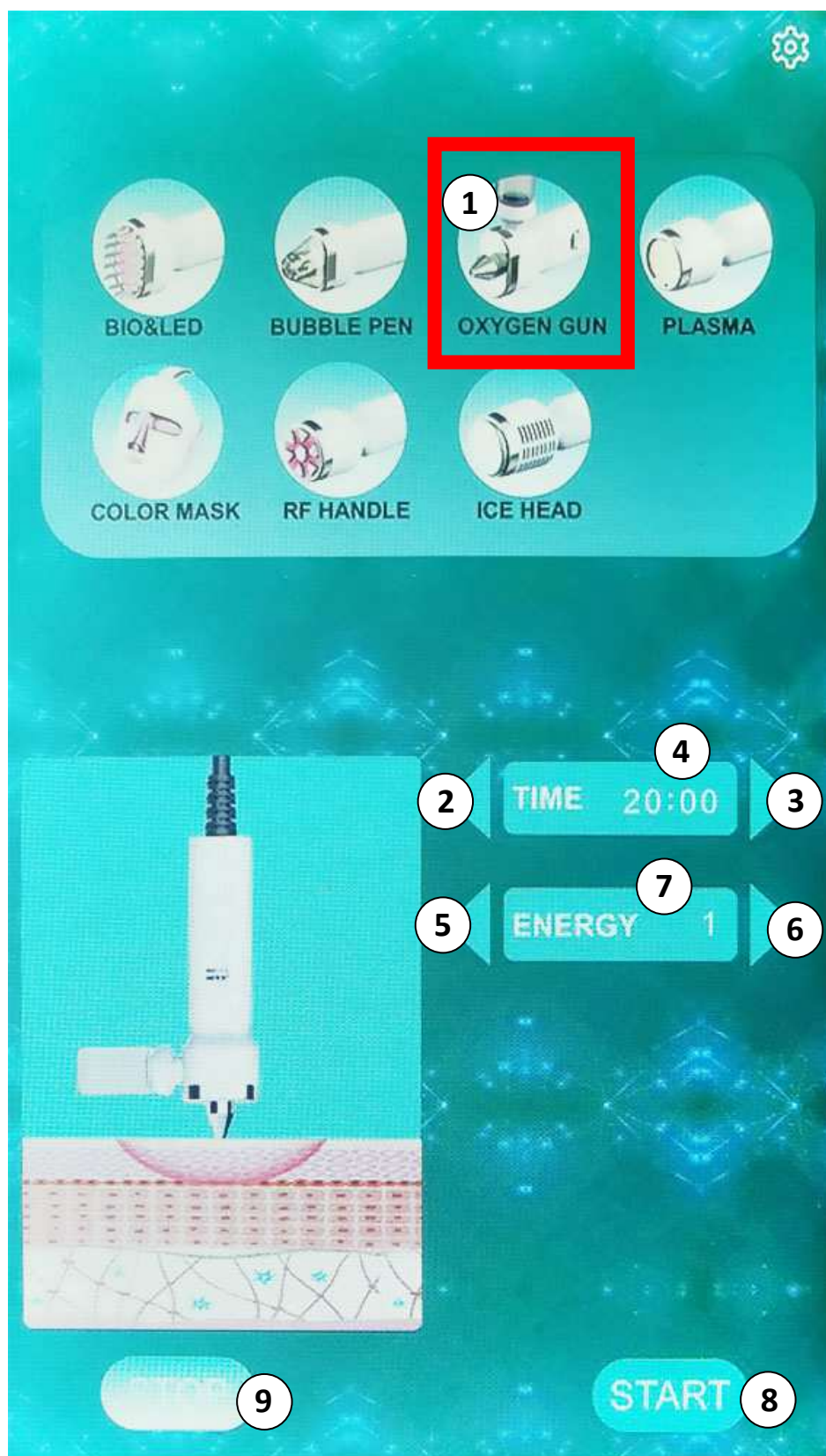

NANO HYDRATACE

- Pro použití funkce nano hydratace stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení nano hydratace. K dispozici jsou 3 úrovně nastavení výkonu: **1, 2, 3**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítka **START (8)** aktivujete působení nano mlhy. Pomocí tlačítka **STOP (9)** působení zastavíte.
- Pomocí otočného tlačítka na boční straně aplikační hlavičky si nastavíte šířku kuželovitého tvaru nano mlhy, kterou generuje atomizér.
- Využijte skleněnou ampulku, která je součástí balení. Naplňte ji tekutinou dle vaší volby. Ideální je destilovaná nebo kojenecká voda. Pokud se rozhodnete tekutinu naředit, nikdy by se neměla změnit celková hustota tekutiny. Mohlo by dojít k ucpání atomizéru.
- Ampulku instalujte do aplikační hlavičky. Vždy držte ampulku hrdlem nahoru. Při instalaci otočte aplikační hlavičku vzhůru nohama, aby mohlo dojít k pevnému spojení hlavičky s ampulkou. Gumová část aplikační hlavičky by měla být v plném kontaktu s ampulkou. Vznikne tak maximální těsnost.
- Při použití držte vždy aplikační hlavičku tak, aby dno ampulky mířilo směrem nahoru.
- Aplikátor hlavičky by neměl být příliš blízko, ale ani daleko od pleti.
- Při delším použití hlavičky s nano hydratací může sražená tekutina na pleti stékat. Otřete případně pomocí hadříku nebo ručníku.
- Pokud na konci použití zbývá v ampulce tekutina, ampulku vyjměte z aplikátoru tak, že dno ampulky směřuje dolů.




FOTONOVÁ TERAPIE



Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického aplikace velmi populární. Aplikace fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Estetický přístroj BeautyRelax poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje. Během používání je maximálně chráněn váš zrak. Obličejová maska slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové.

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo lze zjednodušeně popsat jako viditelnou část elektromagnetického záření o různých frekvencích. Pohybuje se ve spektru přibližně od 390 do 760 nm (nanometrů), přičemž lidské oko je schopno vnímat světlo přibližně v rozsahu 400 až 800 nm.

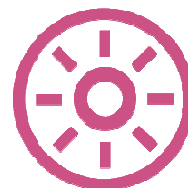

Při světelné (fotonové) terapii je světlo aplikováno na povrch těla ve formě fotonů, tedy nositelů energie. Odborné studie a dostupné poznatky naznačují, že různé vlnové délky světla mohou mít rozdílné biologické účinky, které se uplatňují zejména v oblasti péče o pleť a regenerace tkání. Tyto účinky jsou zkoumány především na buněčné úrovni.

Možné biologické účinky světelné terapie

- Světlo může pronikat do povrchových vrstev tkání neinvazivním a bezbolestným způsobem.
- V buňkách může docházet k aktivaci přirozených světlocitlivých mechanismů (fotoreceptorů).
- Světelná stimulace může podporovat přirozené regenerační procesy buněk.
- Při správném použití je světelná terapie obecně považována za šetrnou metodu.
- Může být využívána jako **doplňek** péče při stavech spojených se zátěží organismu, jako je stres nebo lokální podráždění tkání.

Blahodárné účinky v oblasti péče o pleť

Světelná terapie může přispívat k podpoře přirozených regeneračních mechanismů pokožky. Díky svému neinvazivnímu charakteru a příznivému vnímání uživateli si našla uplatnění zejména v oblasti dermatologické péče a kosmetických aplikací, kde je využívána jako doplňková metoda ke zlepšení celkového vzhledu a vitality pleti. Účinky fotonové terapie se mohou u jednotlivých osob lišit a **nelze je považovat za léčebné účinky**.

FOTONOVÁ TERAPIE

Různé vnější i vnitřní vlivy, jako je zátěž, stres nebo mechanické namáhání pokožky, mohou ovlivnit celkový vzhled a komfort pleti. Fotonová terapie představuje **neinvazivní kosmetickou metodu**, při které je na povrch pokožky aplikováno světlo o zvolené vlnové délce. Světelné záření působí **povrchově a bezbolestně** a může **podporovat přirozené regenerační procesy pokožky a její celkový vzhled**. Při použití v souladu s tímto návodem je fotonová terapie **obecně dobře snášena**, přičemž reakce pleti jsou individuální. Díky svému šetrnému charakteru a komfortnímu průběhu si tato metoda našla široké uplatnění **zejména v oblasti kosmetické a estetické péče o pleť**, kde je využívána jako doplňkový prostředek ke zlepšení jejího vzhledu a vitality.

ČERVENÉ SVĚTLO

Červené světlo patří mezi nejčastěji používané v kosmetické péči.

- Podporuje procesy v pokožce, které souvisí s její pevností a celkovým vzhledem.
- Přispívá ke zlepšení textury pleti a její pružnosti.
- Podporuje rovnoměrnější vzhled pokožky a může přispět ke zmenšení viditelnosti pórů.
- Je vhodné pro klientky, které chtějí podpořit regeneraci po kosmetických procedurách nebo dodat pleti zdravější vzhled.

Typické použití: zralá pleť, unavená pleť, mdlý tón pleti.

MODRÉ SVĚTLO

Modré světlo se používá zejména u pleti se sklonem k nedokonalostem.

- Reaguje s porfyriny, které se nacházejí v kožním mazu u problematické pleti.
- Působí zklidňujícím dojmem, díky čemuž je přínosné u podrážděné nebo citlivé pokožky.
- Pomáhá regulovat nadměrné maštění pleti.

Typické použití: pleť se sklonem k akné, mastná a smíšená pleť.

FIALOVÉ SVĚTLO

- Pomáhá současně řešit projevy problematické pleti i podpořit její celkový vzhled.
- Kombinace obou spekter umožňuje péči o pleť, která je nejen problematická, ale také citlivá či podrážděná.
- Napomáhá zklidnění a rovnováze.

Typické použití: citlivá aknézní pleť, kombinovaná aplikace.

ŽLUTÉ SVĚTLO

Žluté světlo je známé svým zklidňujícím a revitalizačním účinkem.

- Přispívá ke stimulaci povrchového metabolismu kožních buněk.
- Podporuje vstřebávání kosmetických přípravků aplikovaných během procedury.
- Podílí se na podpoře lymfatické mikrocirkulace, což je vhodné při pocitech únavy nebo otoku pleti.
- Osvědčuje se po intenzivních kosmetických zásazích, např. po mechanickém peelingu.
- Může přispět ke zpomalení viditelných projevů stárnutí pokožky.

Typické použití: citlivá pleť, šedá nebo unavená pokožka, pleť po peelingu.

ZELENÉ SVĚTLO

Zelené světlo je tradičně spojeno se zklidňujícími a harmonizujícími účinky.

- Podporuje rovnoměrné zbarvení pokožky.
- Může pomoci redukovat viditelnost jemných linií a drobných nerovností.
- Podporuje proces přirozené regenerace povrchu pleti.
- Je vhodné pro pleť, která potřebuje sjednotit tón a získat svěží vzhled.

Typické použití: pleť s pigmentovými nerovnostmi, zčervenáním nebo mdlým tónem.

AZUROVÉ SVĚTLO

Azorové světlo se využívá především v péči o problematickou a smíšenou pleť.

- Působí harmonizačně na vzhled pokožky a podporuje její celkovou rovnováhu.
- Napomáhá sjednocení tónu pleti a přispívá k její svěžejší podobě.
- Je oblíbené při péči o pleť se sklonem k nedokonalostem a nerovnoměrnému vzhledu.
- Může být vhodným doplňkem kosmetických aplikací zaměřených na čistotu a jas pleti.

Typické použití: problematická pleť, smíšená pleť, pleť se sklonem k nerovnostem a nečistotám.


BÍLÉ SVĚTLO

Bílé světlo se v kosmetické péči používá pro celkové zklidnění a vyvážení pleti.

- Působí jemně a harmonizačně, podporuje přirozenou rovnováhu pokožky.
- Pomáhá sjednocovat vzhled pleti a přispívá k jejímu svěžejšímu a jasnějšímu dojmu.
- Podporuje celkový komfort pokožky a její zdravě působící tón.
- Je vhodné pro klientky, které chtějí nenásilně podpořit celkový vzhled pleti bez cílení na konkrétní problém.

Typické použití: citlivá pleť, normální pleť, pleť bez výrazných nedokonalostí, pleť po kosmetickém použití.

FOTONOVÁ TERAPIE

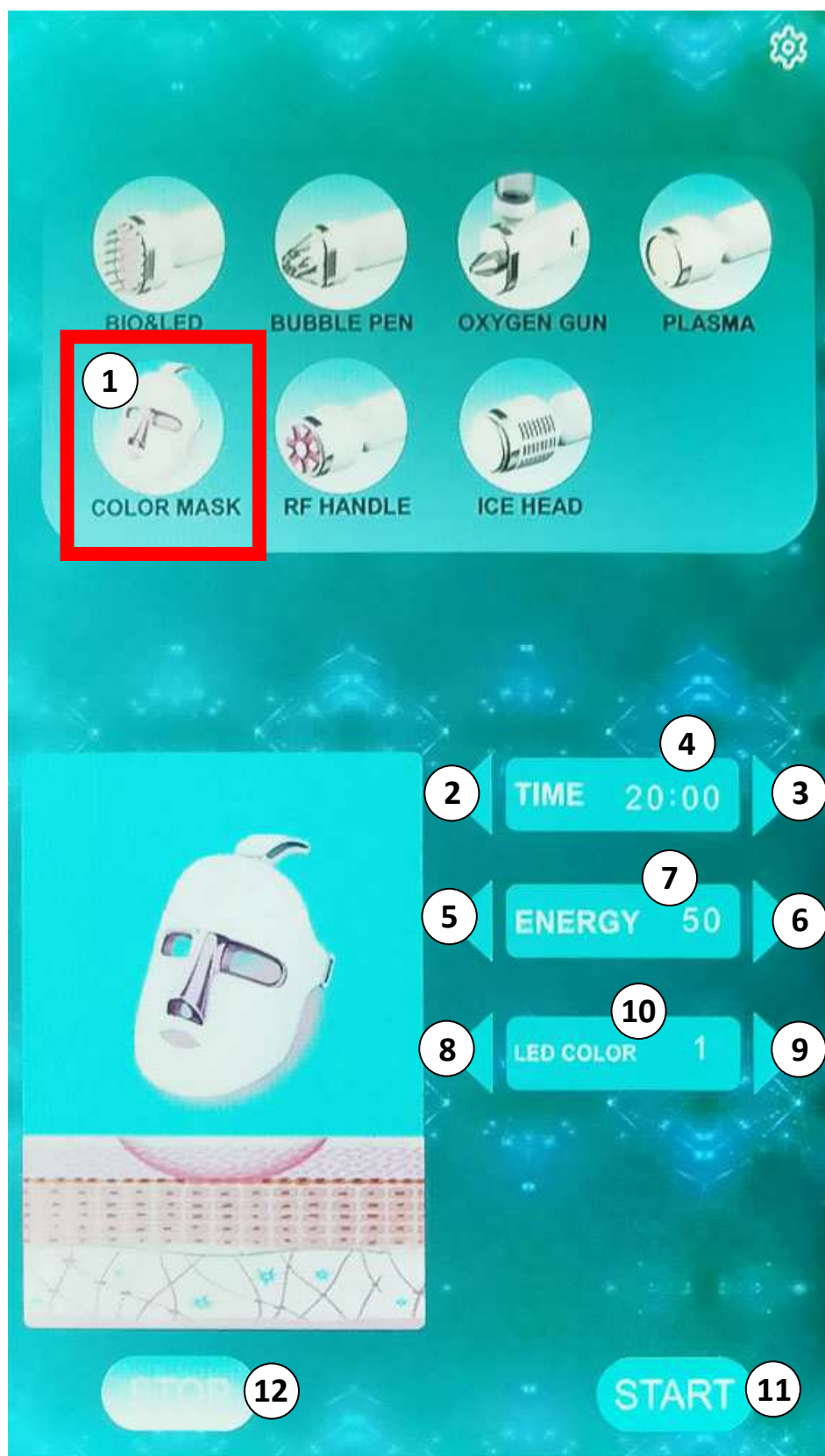

FOTONOVÁ TERAPIE

- Pro použití funkce masky s fotonovým světlem stiskněte na displeji tlačítko **(1)**.
- Pomocí tlačítek **(2)** a **(3)** si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji **(4)**.
- Pomocí tlačítek **(5)** a **(6)** si můžete nastavit intenzitu působení fotonového světla. K dispozici je několik úrovní nastavení výkonu: **5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100**.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji **(7)**.
- Pomocí tlačítek **(8)** a **(9)** si můžete nastavit barvu fotonového světla. K dispozici jsou tyto barvy: červené světlo, modré světlo, fialové světlo, žluté světlo, zelené světlo, azurové světlo, bílé světlo. Aktuální číslo nastavené barvy fotonového světla je zobrazeno na displeji **(10)**.
- Pomocí tlačítka **START (11)** činnost masky s fotonovým světlem aktivujete. Pomocí tlačítka **STOP (12)** zastavíte.
- Vždy masku nejprve nasadíte na obličej a poté aktivujete světlo fotonové terapie.

FOTONOVÁ TERAPIE - POZNÁMKY POUŽITÍ

- Před použitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte. Ideální je použití hlavice s vodní dermabrazí.
- V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
- Přístroj si nasadíte na hlavu tak, aby vám to bylo pohodlné.
- Pokud to situace vyžaduje, můžete oblast očí překrýt kosmetickými tampónky nebo ubrousky, aby vaše oči nevnímaly okolní světlo a měli jste naprostý komfort použití.
- Abyste měli při zavřených očích úplnou tmou, využijte textilních brýlí, které jsou součástí balení.
- Průměrná délka použití masky se pohybuje od 15 do 30 minut.

POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost aplikace na pleti pomocí všech technologií umožňuje aplikaci většiny typů pleti



normální



suchá



smíšená



mastná




citlivá



aknézní

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

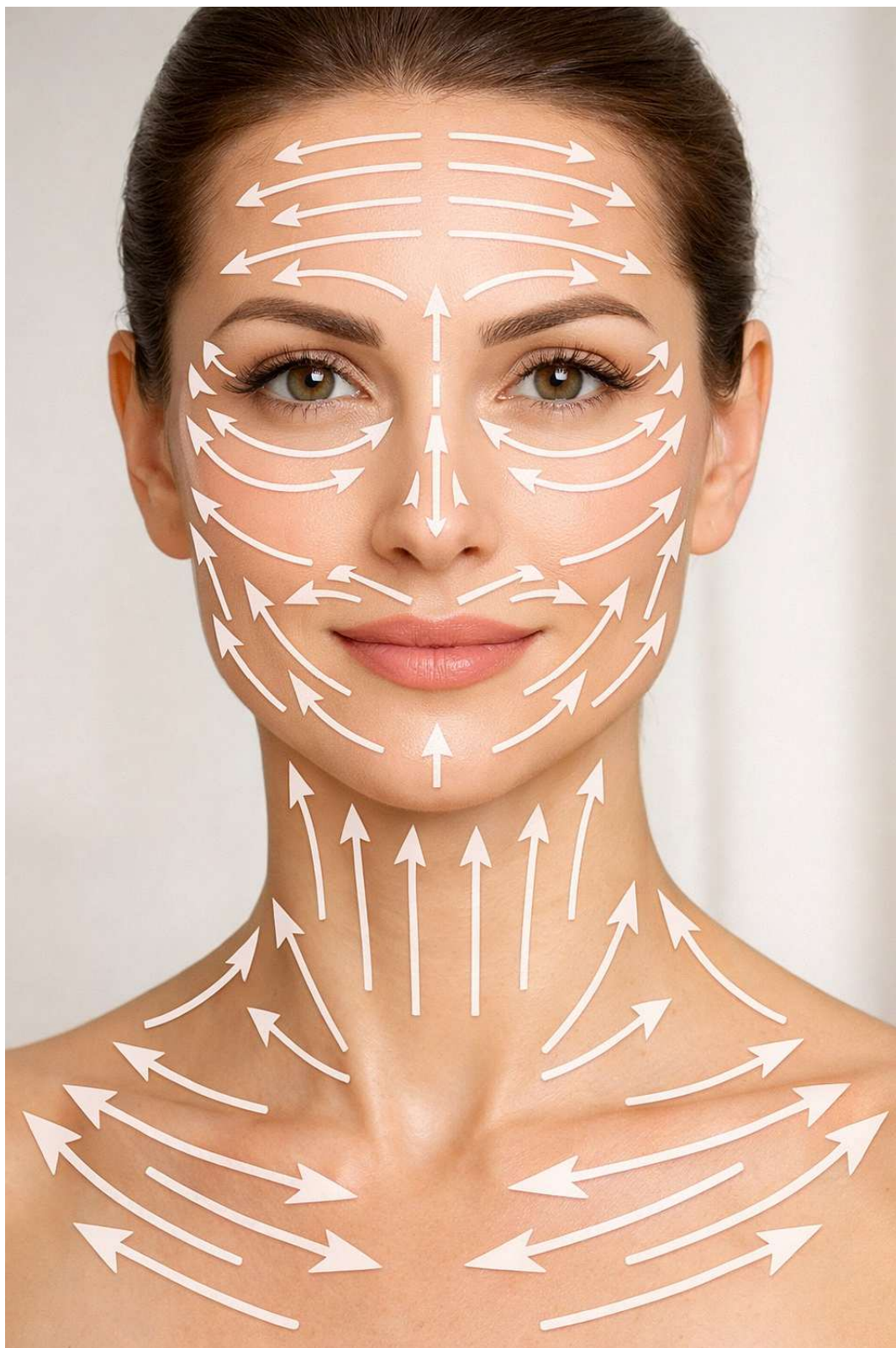

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavicí **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavicí **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavicí **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavicí **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt


- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti

Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

MAPA CITLIVOSTI PLETI

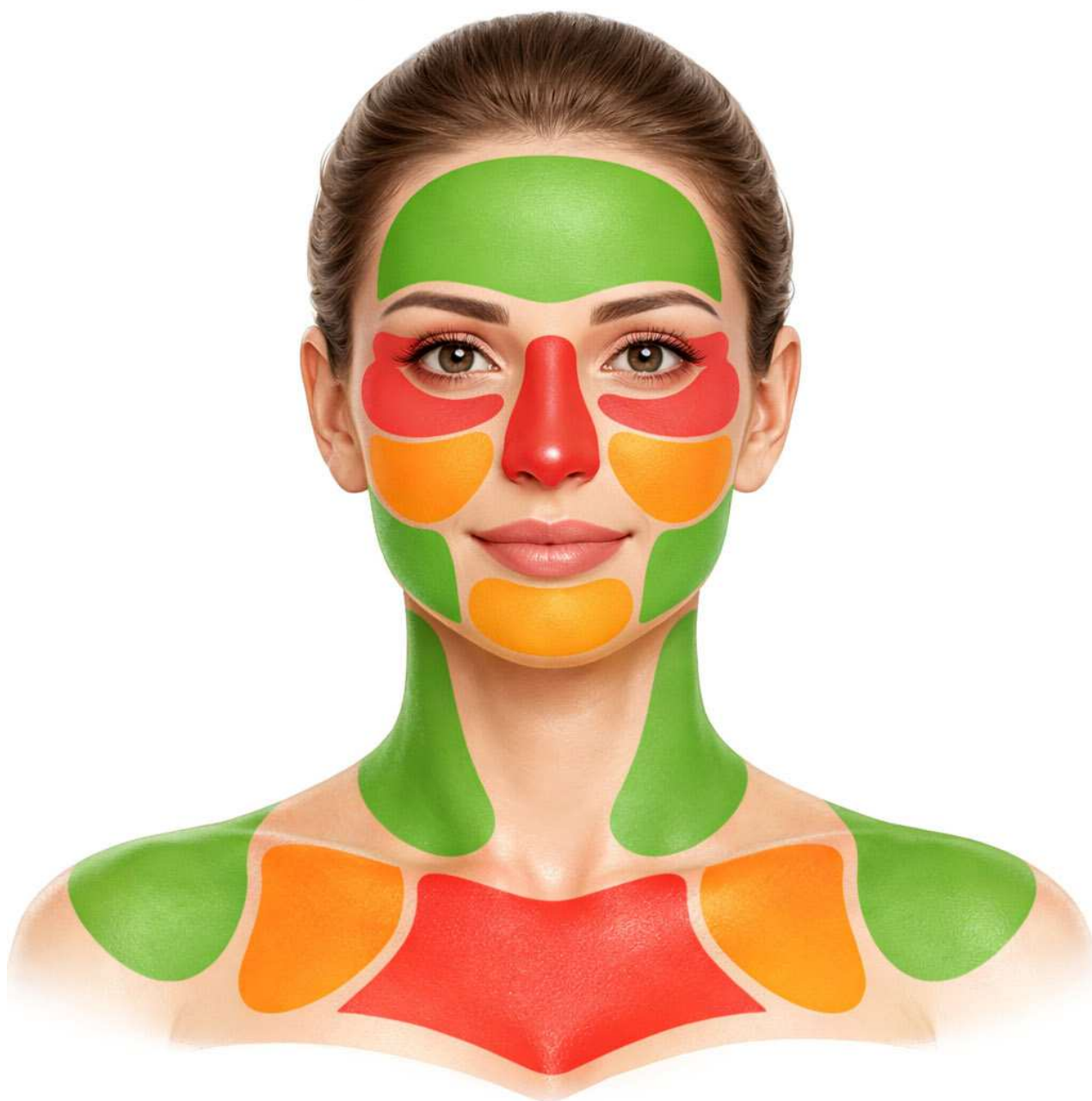

● NÍZKÁ CITLIVOST

● STŘEDNÍ CITLIVOST


● VYSOKÁ CITLIVOST

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Se zásobníky na vodu manipulujte vždy pouze při vypnutém přístroji. Používejte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu bez mechanických nečistot. Vodní kámen může způsobit zanesení cirkulačního systému a následné poškození přístroje. Před spuštěním vždy vizuálně zkontrolujte, zda není odpadní nádoba přeplněná. Zásobníky se upevňují pomocí závitu – dotahujte je s citem, aby nedošlo k jeho poškození. S vodou manipulujte vždy mimo dosah přístroje, aby v případě nehody nemohlo dojít k jeho zasažení vodou.
- 2.** Do ampulky v aplikační hlavici s funkcí nano hydratace lze k vodě přidat malé množství vhodného koncentrátu (např. sérum, kyselinu hyaluronovou nebo tekuté vitamíny libovolné značky). Přidaný přípravek nesmí změnit hustotu vody.
- 3.** Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka na zadní straně hlavní jednotky do polohy „1“. Displej se rozsvítí a přístroj přejde do pohotovostního režimu, ve kterém je připraven k použití.
- 4.** Veškeré funkce přístroje se ovládají prostřednictvím dotykového barevného displeje. Jednotlivé aplikační hlavice lze zapínat a vypínat pomocí příslušných symbolů. Vždy je možné používat pouze jednu funkci – současný provoz více technologií není možný. Výkon nastavujte postupně.
- 5.** U aplikačních hlavic se světelnou maskou je možné nastavit časovač.
- 6.** Při nastavení parametrů aplikační hlavice s vodní dermabrazí je nutné vyvážit množství přiváděné vody a sílu vakua. Vody by nemělo být příliš málo, ale ani nadbytek – nesmí stékat po pleti.
- 7.** Před použitím na dalším klientovi vždy očistěte kontaktní části aplikační hlavice, ideálně dezinfekčním roztokem s obsahem alkoholu. Tím zabráníte přenosu bakterií.
- 8.** Přístroj lze kdykoliv vypnout pomocí tlačítka na zadní straně přepnutím do polohy „0“.
- 9.** Dbejte na to, aby větrací otvory na zadní straně přístroje nebyly nikdy zakryty.
- 10.** Pro zachování co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po ukončení práce ponechat přístroj alespoň 5 minut v pohotovostním režimu. Aktivní chlazení má dostatek času přístroj plynule ochladit.

ČAS APLIKACE

Délku aplikace na pleť nelze přesně stanovit na vteřiny podle předem daných tabulek. Doba aplikace pomocí technologií přístroje je výrazně individuální a závisí na celé řadě faktorů, jako je stav pleti, věk uživatele, typ a citlivost pleti či způsob dlouhodobé péče o pleť. Obecně platí, že při úplně prvním použití by měla aplikace trvat spíše kratší dobu, zpravidla v řádu několika minut. Během úvodních aplikací je vhodné postupně sledovat reakce pleti na působení zvolené technologie a podle nich upravovat úroveň nastavení výkonu tak, aby byla aplikace pro uživatele komfortní. Délku aplikace je rovněž nutné přizpůsobit rozsahu ošetřované oblasti. Ošetření celé plochy obličeje zabere více času než cílená aplikace na menší partie, například koutky úst nebo oblast jemných mimických vrásek kolem očí.

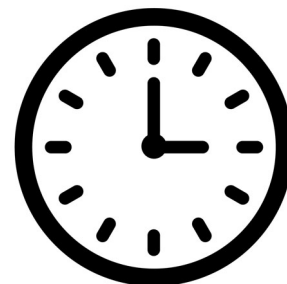

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI



Jaké výsledky mohu očekávat? Jak se působení radiofrekvence projeví na pleti?

Reakce pleti po aplikaci radiofrekvence je velmi individuální a výsledný efekt závisí na několika faktorech, zejména na stavu pleti a pravidelnosti ošetření. Obecně lze říci, že bezprostředně po aplikaci může být pleť mírně zarudlá. Díky penetraci vlhkosti ze sonogelu působí pleť často svěžejším a hydratovanějším dojmem.

V místech, kde dochází ke stimulaci pomocí aplikační hlavičky, nastává okamžité lokální zvýšení teploty. Pleť však potřebuje určitý časový prostor (v řádu hodin), během něhož dochází k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za pevnost a pružnost pokožky.

Neinvasivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není jednorázový proces. Pro dosažení a udržení výsledků je nutná pravidelná stimulace – v průměru 3–4× měsíčně. Při ukončení pravidelné aplikace se pleť postupně vrací do původního stavu. Minimální doporučený interval mezi aplikacemi stejné partie je jeden týden.

Jakým způsobem lze působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavičky s pleťí proudí radiofrekvenční vlny přes povrch pokožky do vrstvy dermis. Tento proces je vnímán jako postupně se zvyšující pocit tepla. Nejedná se o klasické „nahřívání“ pleti, ale o průvodní jev působení radiofrekvenční energie.

Hlavním smyslem této technologie je cílené působení na vrstvu dermis pomocí specifické frekvence a výkonu, což vede ke stimulaci regeneračních procesů v pleti.

Je přístroj zdravotnickým prostředkem?

Ne, přístroj není zdravotnickým prostředkem. Spadá do kategorie masážních a estetických přístrojů. Neslouží k léčbě kožních onemocnění. Nabízí však ověřenou technologii radiofrekvence, která významně přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě působící pleti.

Představuje aplikace pomocí estetického přístroje nějaké omezení po ošetření?

Po aplikaci může dojít k mírnému zarudnutí pokožky, které je způsobeno stimulací krevního oběhu a lymfatického systému. Tento efekt obvykle odezní během několika minut, v případě intenzivnější aplikace maximálně během několika hodin. Pleť se poté vrací do normálního stavu.

Ošetření, například vodní dermabrazí, je často označováno jako „procedura na obědovou pauzu“ a nijak výrazně neomezuje běžné společenské aktivity.

Mohu během aplikace pociťovat nepříjemné pocity nebo bolest?

Každá technologie působí na pleť odlišným způsobem a vjemy se mohou lišit podle použité aplikační hlavičky.

- Radiofrekvence se projevuje pocitem tepla.
- Vodní dermabraze může být vnímána jako podtlak a proudění vody.
- Plazmové toky mohou vyvolat mírné štípání.
- Elektroforéza se projevuje jemným brněním.

U většiny technologií lze nastavit intenzitu výkonu. Cílem je, aby byla technologie na pleti znatelná, avšak nikdy by neměla překročit hranici snesitelnosti.

Lze do zásobníku hydratační pistole přidávat další látky nebo vonné esence?

Ano, je to možné, avšak pouze za předpokladu, že nedojde ke změně hustoty tekutiny. Příliš husté kapaliny nebo tekutiny obsahující mechanické částice mohou způsobit ucpání atomizéru hydratační pistole.

Použití přístroje je pro mě nové. Jak mám postupovat při prvním použití?

Doporučujeme pečlivě prostudovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Nikam nespěchejte a začněte s aplikací pomalu. Postupně si vyzkoušejte působení jednotlivých aplikátorů na různých částech obličeje.

Vnímejte reakce pleti, zkoušejte různé pohyby hlavičky – přímé tahy, krouživé pohyby či změny tempa. Tím si osvojíte techniku, která je pro vaši pleť nejvhodnější. S vyššími stupni výkonu pracujte vždy se zvýšenou opatrností.

Proč je důležité pečovat o aplikační hlavičku po každém použití?

Kontaktní aplikační hlavičku je nutné po každém použití důkladně očistit od zbytků gelu (u radiofrekvenčních hlavic) a následně dezinfikovat, ideálně sprejem na bázi alkoholu. Tím se minimalizuje riziko šíření bakterií a zajišťuje maximální hygiena. Po dezinfekci je nutné hlavičku důkladně osušit měkkým hadříkem.

Má přístroj certifikaci?

Ano, přístroj splňuje standardní evropskou certifikaci a veškeré normy platné pro zařízení tohoto typu.

Je přístroj vodotěsný?

Ne, přístroj není vodotěsný. Žádná jeho část není určena k mytí pod tekoucí vodou. Výjimku tvoří vyměnitelné aplikátory vodní dermabrazy, ampulka se zásobníkem tekutiny pro hydratační pistoli, zásobník tekutiny a odpadní nádobka. Tyto části je možné oplachovat pod tekoucí vodou pouze po jejich vyjmutí z přístroje.

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Aby bylo možné si v oblasti estetiky udržet klienty, je třeba, aby jim byly nabízeny služby, které odráží poslední trendy. Přístrojová technika tak musí být na špičkové profesionální úrovni s moderními technologiemi. ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE je multifunkční zařízení, které nabízí až 7 různých technologií přístrojové aplikaci pleti. Všechny funkce se snadno ovládají pomocí velkého barevného dotykového displeje. Aplikační hlavice jsou extrémně lehké. Pro vaše ruce budou představovat při každodenním použití minimální zátěž. Všechny technologie garantují vysokou efektivitu použití s maximální šetrností k pleti. O kvalitní a hloubkové vyčištění pleti se postará vodní dermabrazie a technologie plasmových toků. Kosmetické přípravky zapracujete přes povrch pleti metodou mezoterapie technologií elektroforézy. Pro výživu použijete nano hydratační pistoli a obličejovou masku s fotonovou terapií, která pokryje celou plochu obličeje. V závěru aplikace pleti dokonale zklidní tepelná terapie chladem. Estetický přístroj ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE vám prostřednictvím aplikačních hlavic zajistí nejen kvalitní pleťovou péči, ale díky pořizovací ceně rychlou návratnost vaší investice. Technika, na kterou se můžete vždy spolehnout. To je přístroj ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE!

Martin Hrbek
www.beautyrelax.cz



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

 **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma **SANTADRIA s.r.o.**, IČO: 29195454, DIČ: CZ29195454, tímto informuje zákazníka, že výrobek je určen k **kosmetickému a estetickému použití** v souladu s návodem k obsluze a **není zdravotnickým prostředkem** ani neslouží k diagnostice, prevenci nebo léčbě jakéhokoli onemocnění.

Prodávající odpovídá za vlastnosti výrobku v rozsahu stanoveném **platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky**, zejména za shodu výrobku s technickými a bezpečnostními požadavky v okamžiku jeho uvedení na trh.

Prodávající **nenese odpovědnost za škody nebo újmy**, které vzniknou v důsledku:

- používání výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bezpečnostními pokyny nebo určeným účelem použití,
- neodborného, nevhodného nebo nadměrného používání výrobku,
- používání výrobku osobami, u nichž je jeho použití podle návodu kontraindikováno,
- zásahů do výrobku, jeho úprav, oprav nebo manipulace provedených neoprávněnou osobou,
- používání výrobku v rozporu s platnými právními předpisy v zemi, kde je výrobek používán.

V případě **komerčního používání výrobku** bere zákazník na vědomí, že **odpovědnost za splnění veškerých požadavků vyplývajících z platné legislativy**, zejména v oblasti odborné způsobilosti obsluhy, licencí, povolení nebo jiných zákonných podmínek, **nese výhradně provozovatel** zařízení. Prodávající nenese odpovědnost za právní důsledky vyplývající z komerčního používání výrobku v rozporu s právními předpisy platnými v konkrétní jurisdikci.

Tato doložka **neomezuje ani nevylučuje práva zákazníka**, která mu náleží podle závazných právních předpisů o ochraně spotřebitele, ani odpovědnost prodávajícího za vady výrobku či škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu, v jakém ji nelze podle práva vyloučit.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Multifunkční kosmetický přístroj

BeautyRelax ANTIAGE OXYGEN PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2932**

EAN 8594166122079

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti.

Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.1.2023

Martin Hrbek, jednatel