

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-3091

ANTIAGE OXYGEN STUDIO



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
UPOZORNĚNÍ	6
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	7
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	8
HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
TECHNICKÉ PARAMETRY	9
OBSAH BALENÍ	9
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	10
METODY REDUKCE VRÁSEK	10
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	11
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	12
POPIS PŘÍSTROJE	13
INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA	14
VODNÍ DERMABRAZE	15
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE	17
VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE	18
VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ	19
TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY	20
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	21
PŮSOBENÍ PLASMOVÉHO TOKU	22
TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY POPIS DISPLEJE	23
PLAZMOVÉ TOKY - POPIS HLAVICE	24
PLAZMOVÉ TOKY - POSTUP POUŽITÍ	26
RADIOFREKVENCE	27
RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE	28
RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE	29
RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ	30
POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE	30
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE	31
ULTRAZVUK	33
ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS DISPLEJE	34

OBSAH:

ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS HLAVICE	35
ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ	36
EMS MIKROPULZY	37
EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE	38
EMS MIKROPULZY - POSTUP POUŽITÍ	39
NANO HYDRATACE	40
NANO HYDRATACE - POPIS DISPLEJE	42
NANO HYDRATACE - POPIS APLIKÁTORU	43
NANO HYDRATACE - POSTUP POUŽITÍ	44
METODA APLIKACE OBLIČEJE KRKU DEKOLTU	45
PŮSOBENÍ CHLADU	48
PŮSOBENÍ CHLADU - POPIS DISPLEJE	49
PŮSOBENÍ CHLADU - POSTUP POUŽITÍ	50
SVĚTELNÁ TERAPIE	51
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	51
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	52
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	57
MAPA CITLIVOSTI PLETI	58
ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU	59
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	60
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	62
ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC	62
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	63
CERTIFIKACE	63
EU DISTRIBUTOR	63
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	64

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Špičková péče moderními technologiemi

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát účinná aplikace bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za projevenou důvěru při zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte všechny informace uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte výstrahám a bezpečnostním upozorněním a používejte přístroj výhradně v souladu s uvedenými pokyny. Dodržování těchto zásad přispěje k maximálnímu využití všech funkcí přístroje, k jeho dlouhé životnosti a především k ochraně vašeho zdraví. V tomto návodu se vám pokusíme co nejpřehledněji přiblížit použité technologie a doporučený způsob používání přístroje. Veškeré instrukce berte prosím s plnou vážností. Estetický přístroj **BeautyRelax** pracuje s moderními technologiemi, které jsou bezbolestné a bezpečné. Přístroj prošel dlouhodobým vývojem a splňuje veškeré zákonem stanovené bezpečnostní normy. Pro dosažení vysoké efektivity aplikace pracuje s určitým výkonem, přičemž jeho konstrukce, vlastnosti i použité technologie jsou navrženy tak, aby bylo používání přístroje maximálně bezpečné, efektivní a uživatelsky přívětivé.

Úvodní důležité informace k přístroji a jeho používání

- Estetický přístroj **BeautyRelax** spadá do kategorie estetických a masážních přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek** a neslouží k léčbě žádných kožních onemocnění. Nabízí technologie, které při použití za stanovených podmínek napomáhají ke zlepšení kondice a vzhledu pleti prostřednictvím různých metod aplikace. Konstrukce přístroje je navržena tak, aby odolala i náročnému provozu při častém, včetně komerčního, používání.
- Přístroj umožňuje **neinvazivní aplikaci**, což znamená, že žádná část aplikační hlavičky fyzicky neproniká pod povrch kůže.
- Neinvazivní charakter použití je základním předpokladem šetrnosti k pleti. Z hlediska odborné způsobilosti obsluhy je však vždy nutné respektovat aktuálně platnou legislativu v zemi, kde je přístroj používán. Jednotlivé státy mohou mít pro konkrétní technologie odlišná pravidla. Provoz studia je vždy nutné těmto nařízením přizpůsobit.
- Estetický přístroj **BeautyRelax** je certifikován a splňuje všechny normy požadované pro přístroje tohoto typu. Bezpečnost všech elektronických součástí je zajištěna.
- Každá technologie, kterou přístroj nabízí, umožňuje individuální nastavení intenzity. Pokud je přístroj používán pro komerční účely, doporučujeme, aby si obsluha nejprve vyzkoušela účinky jednotlivých aplikačních hlavic sama na sobě. Získá tak lepší představu o působení technologií při různých úrovních výkonu.
- Při použití aplikačních hlavic **není nutné vždy volit nejvyšší stupeň výkonu**. Intenzitu je třeba nastavit tak, aby bylo působení technologie na pleti zřetelně vnímatelné, avšak nikdy nepřekračovalo hranici komfortu nebo bolesti.
- Neplatí zásada, že častější používání přístroje vede k rychlejším výsledkům. Dopřejte svému tělu dostatek času na zpracování energie uvolněné během aplikace. Tím významně přispějete k ochraně svého zdraví. Po aplikaci pleť vždy dostatečně hydratujte běžně dostupnými kosmetickými přípravky, čímž podpoříte její regeneraci.
- V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností nebo pochybností ohledně používání přístroje se na nás neváhejte obrátit.
- Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese **mh@santadria.cz**, kde je vám k dispozici náš produktový manažer **Martin Hrbek**, který vám rád poskytne odbornou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, seznamte se se všemi vyobrazeními a dokumentaci si uschovejte pro případné pozdější použití. Instalaci a uvedení přístroje do provozu provádějte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pokud je vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti, zda je váš zdravotní stav slučitelný s používáním přístroje, doporučujeme vhodnost použití konzultovat se svým praktickým lékařem nebo dermatologem.
- Používá-li přístroj více osob, je nutné dbát zvýšené pozornosti na dodržování hygienických zásad. Po každém použití důkladně dezinfikujte kontaktní části aplikační hlavičky dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu.
- Pokud je přístroj poškozen, nefunguje správně nebo došlo k jeho pádu do vody, **nikdy jej neuvádějte do provozu.**
- V případě mechanického poškození se nedotýkejte vnitřních částí přístroje, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho vnitřnímu poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na servisní oddělení nebo autorizovaného prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchy, bazény apod.
- Přístroj **není omyvatelný**. Žádná jeho část nesmí být ponořena do vody ani čištěna pod proudem tekoucí vody.
- Nikdy nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru. Po každém použití jej vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného do teplého prostředí, vyčkejte před jeho zapnutím alespoň **3 hodiny**, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje.
- Přístroj není určen pro používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují jeho bezpečné používání bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, otevřený oheň apod.
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. Veškeré servisní zásahy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí. Chraňte jej před prachem a nečistotami.
- Během provozu přístroj nijak nezakrývejte, zejména nezakrývejte ventilační otvory a mřížku ventilátoru, aby bylo zajištěno dostatečné chlazení.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze ani za následky způsobené nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za škody na zdraví nebo majetku vzniklé v důsledku jiného než určeného způsobu používání přístroje nenese distributor odpovědnost.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



Použití přístroje **BeautyRelax** není vhodné nebo je **zakázáno** v následujících případech:

Zdravotní omezení

- Těhotenství a období kojení
- Kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické přístroje
- Kovové implantáty v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu (šrouby, destičky, výplně, zubní implantáty v blízkosti aplikované oblasti)
- Epilepsie
- Onkologické onemocnění (aktivní nebo v léčbě)
- Závažná onemocnění srdce a cév
- Poruchy krevní srážlivosti
- Autoimunitní onemocnění v aktivní fázi
- Horečnaté a infekční stavy
- Neurologická onemocnění spojená se sníženou citlivostí pokožky

Kožní omezení

- Otevřené rány, čerstvé jizvy, popáleniny
- Akutní záněty kůže, ekzém, lupénka v aktivní fázi
- Silné akné, hnisavé nebo zanícené projevy
- Infekční kožní onemocnění (bakteriální, virové, plísňové)
- Aktivní opar (herpes)
- Silné podráždění, alergická reakce nebo spálená pokožka
- Po čerstvých estetických zákrocích
(botox, výplně, chemický peeling, laser, mezoterapie – minimálně 2–4 týdny dle typu zákroku)

Další omezení použití

- Nepoužívat na očích, na očních víčkách, štítné žlázy a genitálií
- Nepoužívat při snížené schopnosti vnímat teplo nebo bolest
- Nepoužívat na poraněnou pokožku
- Nepoužívat pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

Důležité upozornění

V případě jakýchkoliv pochybností, chronického onemocnění nebo dlouhodobé léčby doporučujeme konzultaci s lékařem před použitím přístroje. Přístroj je určen výhradně pro kosmetické použití a nenahrazuje lékařskou péči.

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- Obličej
- Krk
- Dekolt

HLAVNÍ VÝHODY PŘÍSTROJE

- Podpora přirozené tvorby kolagenu
- Remodelace a posílení elastických vláken
- Zvýšení pevnosti, pružnosti a elasticity pleti
- Zvýraznění kontur obličeje a optické zpevnění pleti
- Vyhlazení výrazných i hlubších vrásek
- Intenzivní výživa pleti
- Okamžitá a dlouhodobá hydratace pokožky
- Zlepšení prokrvení a okysličení podkožní tkáň
- Jemná lymfatická masáž přispívající k redukci otoků obličeje
- Důkladné odstranění velmi jemných zbytků make-upu a nečistot usazených v kožních pórech
- Hlubkový peeling pleti včetně odstranění černých teček (komedonů)
- Uvolnění a vyčištění kožních pórů
- Prevence vzniku akné a nedokonalostí pleti
- Podpora krevního oběhu v aplikované oblasti
- Sjednocení barevného tónu pleti a projasnění vzhledu
- Mechanická masáž pokožky podporující regeneraci
- Zmírnění a potlačení viditelnosti pigmentových skvrn

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Sonogel kombinujte s aplikační hlavicí pro radiofrekvenci a EMS.



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: vodní dermabraze, terapie plasmovými toky, radiofrekvence Twin Ball, ultrazvuk, působení chladu, EMS mikropulzy, nano hydratace
- Velký dotykový barevný displej 7"
- Radiofrekvence: 1MHz
- Teplota: 42°C
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry hlavní jednotky: 40x30x30cm
- Výkon: 200W
- Hmotnost: 12kg

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka přístroje
- 1x Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
- 1x Aplikační hlavice s plasma terapií
- 1x Aplikační hlavice s radiofrekvencí Twin Ball
- 1x Aplikační hlavice s ultrazvukem
- 1x Aplikační hlavice s působením chladu
- 1x Aplikační hlavice s EMS pulzy
- 1x Aplikační hlavice s nano hydratací
- 1x Sonogel
- 1x Návod k obsluze
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Prodlužovací napájecí kabel 220V

PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti odstranění vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojová aplikace pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti estetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

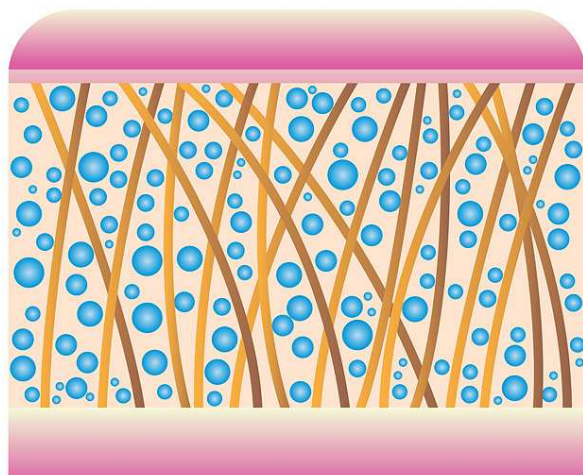

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

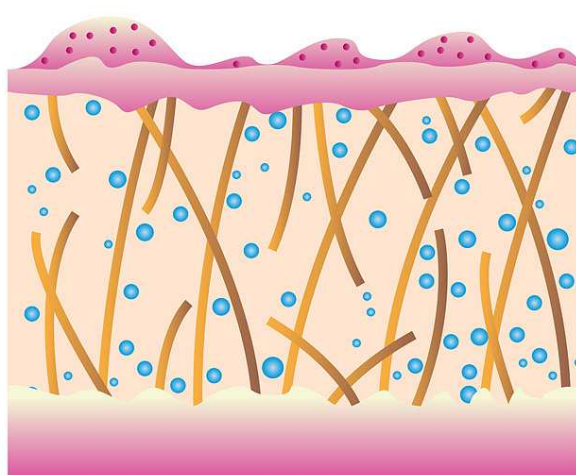

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio je multifunkční estetický přístroj, který umožňuje poskytovat klientům **komplexní pleťovou péči na profesionální úrovni** s viditelnými a často okamžitými výsledky. Je navržen pro **komerční provoz kosmetických studií a estetických klinik** a je určen k aplikaci **obličeje, krku i dekoltu**. Přístroj kombinuje široké spektrum moderních a vysoce účinných technologií z oblasti **neinvazivní estetické medicíny** a v jednom zařízení nahrazuje až **8 samostatných kosmetických přístrojů**. Díky tomu umožňuje nabídnout klientům individuálně přizpůsobená aplikace zaměřená na hloubkové čištění pleti, zvýšení její pružnosti, liftingový efekt, intenzivní hydrataci, efektivní zpracování kosmetických přípravků i celkové zklidnění a regeneraci pokožky.

K dispozici je široká škála technologií, mezi které patří:



- vodní dermabráze
- terapie plazmovými toky
- radiofrekvence Twin Ball
- ultrazvuková hlavice
- chladová terapie
- EMS mikropulzy
- nano hydratace
- fotonová (LED) terapie

Samozřejmostí je **velký moderní dotykový displej**, intuitivní ovládání, elegantní design a technologicky vyspělé řešení, které splňuje nároky profesionálního provozu. **Moderní design. Pokročilé technologie. Profesionální výsledky.** To je **BeautyRelax AntiAge Oxygen Studio**.



POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

1. VODNÍ DERMABRAZE
2. ULTRAZVUK
3. RADIOFREKVENCE TWIN BALL
4. EMS MIKROPULZY
5. NANO HYDRATACE
6. PŮSOBNÍ CHLADU
7. TERAPIE PLASMOVÝMI TOKY
8. SVĚTELNÁ MASKA

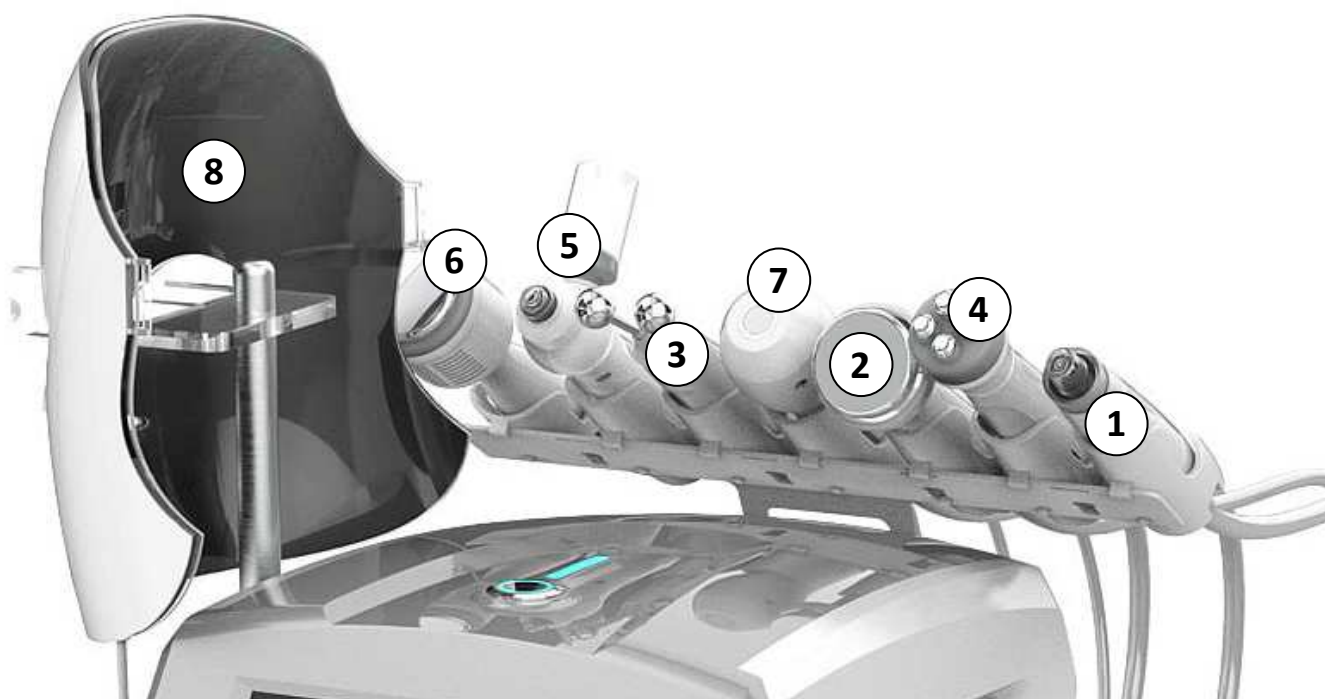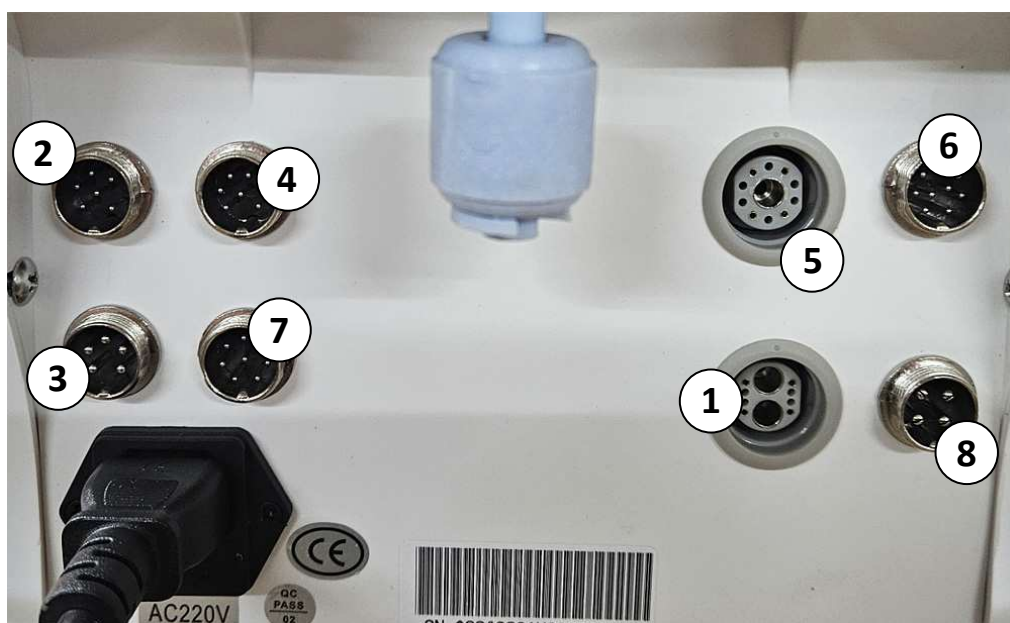

POPIS PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice s působením chladu
2. Aplikační hlavice s nano hydratací
3. Aplikační hlavice s radiofrekvencí
4. Aplikační hlavice s plazmovou terapií
5. Aplikační hlavice s ultrazvukem
6. Aplikační hlavice s EMS pulzy
7. Aplikační hlavice s vodní dermabrazí
8. Dotykový displej
9. Tlačítko nastavení množství dávkování vody
10. Tlačítko nastavení intenzity podtlaku
11. Zásobníky na vodu na boční straně přístroje




INSTALACE PŘÍSTROJE - HLAVNÍ JEDNOTKA

1. Všechny části přístroje zbavte obalového materiálu.
2. Upevněte na zadní stranu hlavní jednotky držák na aplikační hlavice.
3. Hlavní jednotku umístěte na rovnou, suchou a plochu. Doporučujeme vybrat takové místo, které je blízko elektrické zásuvky.
4. Hlavní jednotku přístroje připojte k napájecímu adaptéru. Jeden konec připojte do zdířky na zadní straně přístroje. Druhý konec adaptéru zapojte do elektrické sítě 220V.
5. Připojte všechny aplikační hlavice.
6. Pokud se rozhodnete vyměnit aplikační hlavici, přístroj musí být vždy vypnutý.
7. Při umístění hlavní jednotky berte ohled na vzdálenost k hlavě klienta/uživatele. V průběhu použití by neměly být kabely aplikačních hlavic příliš napnuté.
8. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF** na horní straně přístroje. Zapnutí přístroje doprovází zapnutí displeje. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

*Konektory aplikačních hlavic mají speciální kovový prstenec. Po připojení do zdířky na zadní straně přístroje je třeba prstenec zašroubovat do závitu po směru hodinových ručiček. Neplatí pro hlavice s vodní dermabrazí a nano hydratací. **Zašroubování prstence provedte vždy důkladně. Jde o důležitou ochranu proti vytržení kabelu ze zdířky.***

**Utažení
prstence
zašroubováním**

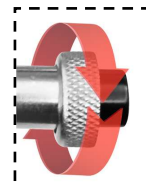

VODNÍ DERMABRAZE



Aplikační hlavice a systém vodní cirkulace

Aplikační hlavice je speciálně navržena tak, aby zajišťovala **plynulé a rovnoměrné dávkování tekutiny** během celé aplikace. Tekutina je kontinuálně přečerpávána z nádržky s čistou vodou do aplikační hlavice a následně odváděna do odpadní nádoby. Během aplikace tekutina **okamžitě hydratuje pleť** a zároveň na sebe váže nečistoty, bakterie, kožní maz i další kožní rezidua. Nasátá tekutina společně s uvolněnými nečistotami je následně bezpečně odváděna do odpadní nádoby. Při plném kontaktu aplikátoru s pleť nedochází k nežádoucímu ztékání tekutiny po pokožce, což zajišťuje komfortní a čistý průběh aplikace. K dispozici jsou **vyměnitelné aplikační nástavce různých průměrů**, které umožňují efektivní aplikace jak větších ploch (tváře, čelo), tak i menších a citlivých oblastí (nos, okolí úst nebo očí).

Systém vakuového nasávání

Systém vakuového nasávání umožňuje **hloubkové a zároveň šetrné čištění pleti**. Estetický přístroj BeautyRelax efektivně napomáhá k odstranění černých teček, drobných pupínků a dalších nedokonalostí pleti. Během aplikace dochází k jemnému nasátí pokožky do aplikační hlavice, přičemž speciálně tvarovaná hrana aplikátoru mechanicky odstraňuje povrchové nečistoty, černé tečky i nevzhledné bílé čepičky. Díky této technologii se stává **ruční vymačkávání**, které často způsobuje výrazné zarudnutí, podráždění a riziko vzniku jizviček, zbytečným. Současně dochází ke **zjemnění povrchových pigmentových skvrn**, vyčištění a uvolnění kožních pórů a celkovému zlepšení struktury pleti. Přístroj je vysoce účinný, ale zároveň maximálně šetrný i k citlivější pokožce.

Hlavní pokyny pro práci s technologií vodní dermabraze

1. Příprava pleti je zásadní

- Pleť musí být **důkladně odlíčena a „nahrubo“ očištěna** od make-upu, krémů a viditelných nečistot. Na pleti nesmí zůstat větší mechanické částice, které by mohly být nasáty do systému a způsobit **ucpání hadiček nebo vnitřních částí přístroje**.
- Před zahájením aplikace by měla být pleť **čistá a bez silné vrstvy mastnoty**.

2. Správná práce s hlavicí

- Po přiložení hlavice k pleti **vyčkejte několik sekund**, než dojde k opětovnému načerpání vody ze zásobníku.
- Provádějte **dlouhé, pomalé a plynulé tahy** bez častého přerušování kontaktu s pletí.
- Udržujte hlavici **v plném kontaktu s pokožkou**, aby nedocházelo k nežádoucímu ztékání vody. Vyvarujte se rychlých, trhavých pohybů.

3. Nastavení vakua a průtoku vody

- Výkon vakua i množství vody nastavujte **postupně**.
- Vody nesmí být příliš málo (snižuje účinnost), ani příliš mnoho (může stékat po pleti).
- Intenzitu vždy přizpůsobte **citlivosti pleti a aplikované oblasti**.

4. Volba správného nástavce

- Používejte **vhodný průměr aplikační hlavice** podle velikosti aplikované plochy.
- Menší nástavce jsou vhodné pro nos, okolí úst a detailní práci, větší pro tvář, čelo, krk a dekolt.

5. Délka a četnost aplikace

- Jedna oblast by neměla být aplikována **opakovaně nebo příliš dlouho**, aby nedošlo k podráždění pleti.
- Doporučuje se postupovat systematicky a jednotlivé partie **nepřetěžovat**.
- Mezi aplikacemi stejné oblasti dodržujte dostatečný časový odstup.

6. Hygiena a údržba

- Po každém použití důkladně **vyčistěte a dezinfikujte aplikační hlavici**.
- Pravidelně kontrolujte **stav zásobníku s čistou vodou a odpadní nádobku**.

7. Opatrnost

- Nepoužívejte na **otevřené rány, aktivní záněty, silné akné nebo velmi citlivou pokožku**.
- Vždy sledujte reakce pleti – nadměrné zarudnutí nebo diskomfort jsou signálem ke snížení výkonu nebo ukončení aplikace.

8. Závěrečná péče

- Po aplikaci doporučte **hydratační, zklidňující nebo regenerační přípravky**.
- Ideální je zakončit aplikaci **chladovou terapií** pro stažení pórů a zklidnění pleti.

Důležité upozornění před použitím vodní dermabraze

Před zahájením aplikace je **nezbytné, aby byla pleť důkladně odlíčena a „nahrubo“ očištěna** od make-upu, krémů, mastnoty a viditelných nečistot. V případě, že není pleť předem dostatečně očištěna, může při vakuovém nasávání dojít k nasátí **větších mechanických částic**, zbytků make-upu nebo nečistot. Tyto částice mohou způsobit **ucpání systému vodní cirkulace**, a to jak v hadičkách (kabelech), tak i ve vnitřních částech hlavní jednotky přístroje. Nedostatečná příprava pleti tak může vést ke snížení účinnosti aplikace, poruše funkce přístroje nebo jeho trvalému poškození. Z tohoto důvodu je **předčištění pleti vždy nezbytným krokem**, který nelze vynechat.

Doporučený postup při vodní dermabrazi

Při použití vodní dermabraze je nutné **po přiložení aplikační hlavice k pleti vždy vyčkat několik sekund**, než dojde k opětovnému načerpání vody ze zásobníku. Tento proces je přirozenou součástí funkce systému vodní cirkulace. Z tohoto důvodu je ideální provádět **dlouhé, plynulé a pomalé tahy**, při nichž zůstává aplikační hlavice **co nejdéle v nepřerušovém kontaktu s pletí**. Takový způsob pohybu zajišťuje rovnoměrné dávkování tekutiny, maximální účinnost čištění a zároveň zvyšuje komfort během aplikace. Rychlé nebo přerušované pohyby mohou snížit efektivitu aplikace a narušit plynulý průběh vodní dermabraze.


VODNÍ DERMABRAZE - POPIS DISPLEJE



1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *PŘEPNUTÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU (A-1, B-2, C-3)*
4. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

VODNÍ DERMABRAZE - POPIS HLAVICE

- 1. VYMĚNITELNÁ APLIKAČNÍ HLAVICE**
- 2. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR**
- 3. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE**

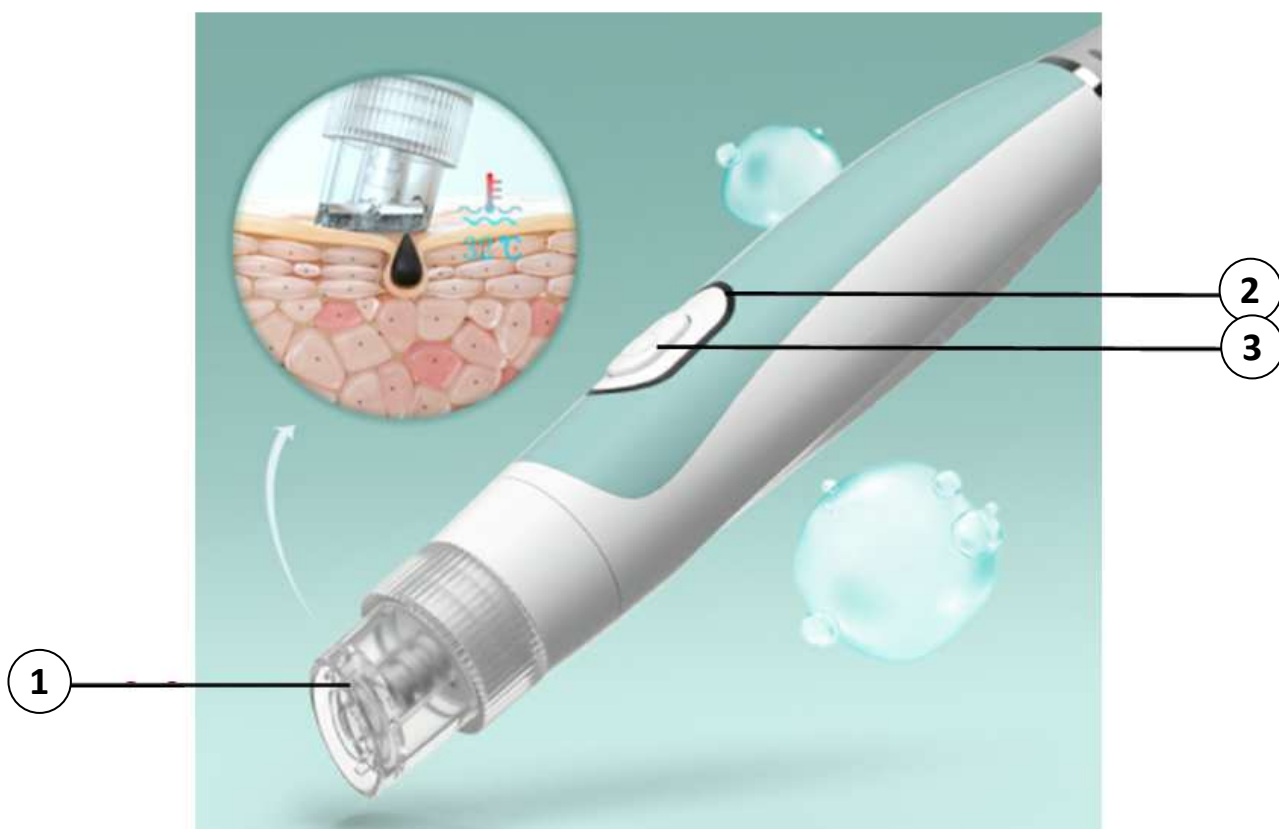

VODNÍ DERMABRAZE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce vodní dermabraze stiskněte příslušné tlačítko v menu přístroje.
- Zásobníky na tekutinu naplňte. Použijte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu. Voda nesmí obsahovat vodní kámen, který by mechanicky poškodil přístroj. Stejně tak do zásobníku na tekutinu nepřimíchejte další látky. Mohlo by dojít k poškození přístroje a ztrátě záruky.
- Vyberte některý z vyměnitelných aplikátorů. Mají různý průměr velikosti. Zvolte takový, který nejvíce vyhovuje aplikace části pleti a reliéfu povrchu pokožky.
- V menu funkce vodní dermabraze si můžete nastavit čas aplikace pomocí šipek. Nastavený čas a zbývajíc čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Funkci vodní dermabraze můžete aktivovat stisknutím tlačítka **READY**. Stejným tlačítkem můžete činnost přístroje přerušit. Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Pomocí pravého otočného tlačítka si můžete nastavit zvýšení vakuového nasávání.
- Pomocí levého otočného tlačítka si můžete nastavit množství vody, které má v aplikační hlavici cirkulovat.



- Hlavici se po pleti pohybujte krátkými táhlými pohyby. Druhou rukou si můžete pleť udržovat napnutou.
- Pro funkci vodní dermabraze je vždy třeba kontrolovat zásobníky na vodu. Na pravé straně přístroje jsou integrované 3 zásobníky. Pomocí tlačítka na displeji si můžete přepínat mezi jednotlivými zásobníky (A-1, B-2, C-3). Zásobníky na tekutinu musí být pro správné fungování systému dostatečně naplněny. Odpadní nádobku na zadní straně přístroje pravidelně vyprazdňujte.
- **Množství vody (pomocí otočného tlačítka na levé straně)**, které je do aplikační hlavice přečerpáváno. Nastavte si takovou hodnotu, která bude poskytovat dostatečné množství tekutiny. Na druhé straně bude mít hlavice dostatečný výkon pro plynulé odsávání tekutiny. V průběhu práce s aplikační hlavici by neměla tekutina příliš stékat po povrchu pleti.
- **Síla podtlaku (nastavení tlačítka na displeji na pravé straně)**, která se generuje v aplikační hlavici. Pohyb aplikační hlavice po pleti by měl být intenzivní. Na straně druhé by neměl být příliš silný, což by bránilo plynulému pohybu aplikátoru po pleti. Sílu podtlaku by měla vždy korespondovat s množstvím přečerpávané tekutiny.
- Pomocí aplikační hlavice se vždy snažte pokrýt celou plochu obličeje. Na částech pleti se zvýšenou citlivostí upravte výkon působení vakua. Po celou dobu použití by vám měla být aplikace příjemná. Není přesně stanoven čas použití. Čas je v přímé úměře s tím, jak detailně se potřebujete na vyčištění pleti zaměřit.
- Mějte na paměti, že působením vakua může pokožka zarudnout. Čím větší sílu vakuové terapie použijete, tím může být zarudnutí pleti více intenzivní.

TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY



Plazmový tok s ozonem – cílená prevence stárnutí pleti

S přibývajícím věkem dochází k postupným změnám vlastností a celkového vzhledu pleti. Epidermis se postupně ztenčuje, produkce kolagenu se zpomaluje a pleť ztrácí svou přirozenou pružnost a pevnost. Pigmentové skvrny se stávají viditelnějšími, kontury obličeje ochabují a vrásky se prohlubují. Tyto procesy jsou přirozenou součástí stárnutí, jejich průběh je však možné výrazně ovlivnit. Technologie **plazmového toku s ozonem** představuje skutečně funkční a moderní řešení, které nepůsobí pouze na viditelné projevy stárnutí, ale zasahuje již v jejich samotném základu.

Prevence místo řešení následků

Většina kosmetických technologií se zaměřuje především na **odstraňování následků** – například eliminaci vrásek vzniklých vlivem stárnutí, odstranění černých teček jako důsledku zanedbaného čištění pleti nebo uvolnění ucpaných pórů způsobených zvýšenou tvorbou kožního mazu.

Plazmová aplikace s ozonem k péči o pleť přistupuje z opačného konce. Funguje jako **účinná prevence vzniku nežádoucích kožních defektů**, podporuje zdravé prostředí pleti a pomáhá udržovat její rovnováhu ještě před tím, než se problémy plně projeví.

Princip fungování technologie

Keramická plocha aplikační hlavice generuje **stejnoseměrný proud s vysokofrekvenčním napětím**, který vytváří plazmový výboj mezi aplikátorem a povrchem pleti. Tento výboj vzniká využitím atomů kyslíku přirozeně obsažených ve vzduchu. Při přiblížení aplikátoru k pleti dochází ke vzniku plazmy s obsahem ozonu, která má **výrazné sterilizační účinky**. Aplikace účinně likviduje bakterie na povrchu pleti, čímž napomáhá prevenci akné, zánětů a dalších kožních nedokonalostí. Optimální vzdálenost mezi aplikátorem a pletí je přibližně **4 mm** (případně v letmém dotyku pleti), což zajišťuje maximální účinnost a zároveň bezpečnost aplikace. Součástí balení jsou **dvě vyměnitelné aplikační hlavice**, určené pro aplikaci větších ploch i menších, hůře dostupných partií obličeje.

Důležité upozornění před aplikací plazmového toku s ozonem

Před zahájením aplikace je **nezbytné, aby byla pleť důkladně vyčištěna a zcela vysušena**. Odstranění veškerých nečistot, zbytků make-upu, kožního mazu i vlhkosti z povrchu pleti výrazně přispívá k **maximální efektivitě technologie** a zároveň ke zvýšení **komfortu klienta během aplikace**. Aplikace plazmového toku na vlhkou nebo nedostatečně vyčištěnou pleť může snížit účinnost plazmového výboje, ovlivnit jeho stabilitu a zhoršit celkový pocit z aplikace. Správná příprava pleti je proto klíčovým krokem, který nelze vynechat.

IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPÁDECH

Opakovaný výskyt aknézní pleti



Zvětšené póry




Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



PŮSOBENÍ PLASMOVÉHO TOKU

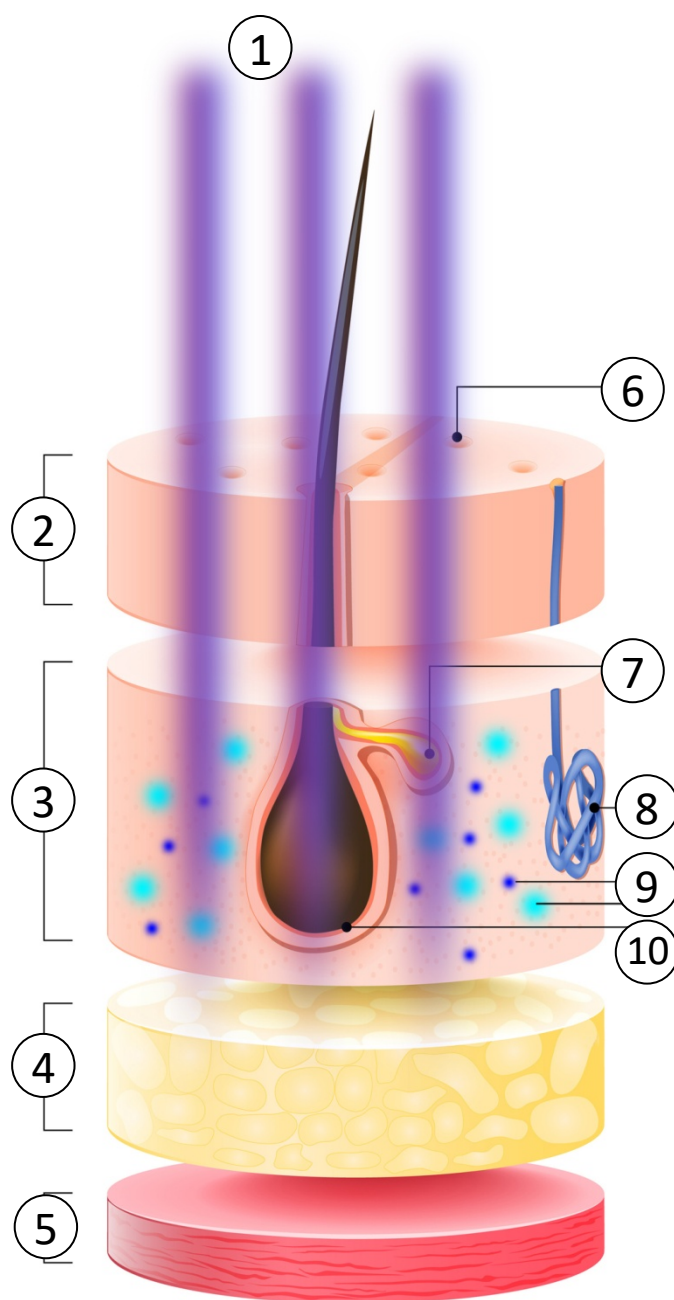

1. Působení plasmového toku

2. Epidermis

3. **Dermis**

4. Tuková tkáň

5. Svalová tkáň

6. Kožní pór


7. Mazová žláza vlasu

8. Potní žláza

9. **Kolagenní a elastická vlákna**

10. Vlasová cibulka


TERAPIE PLAZMOVÝMI TOKY POPIS DISPLEJE

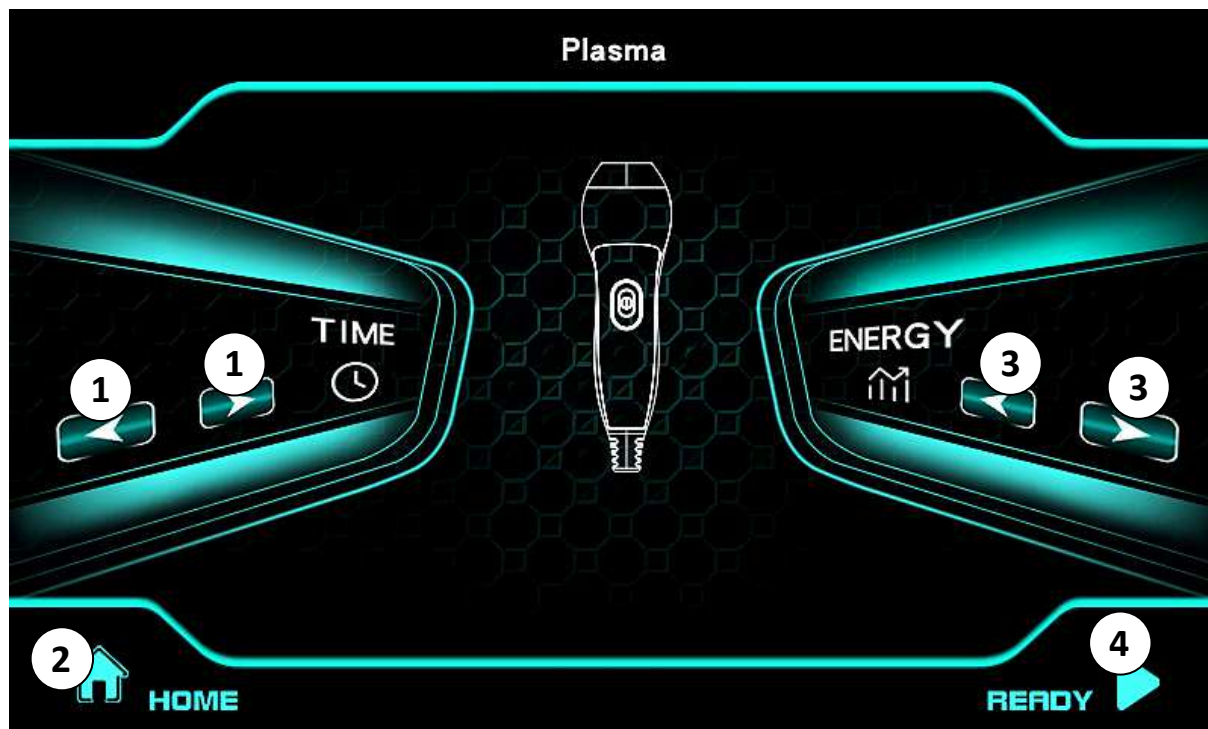

1. NASTAVENÍ ČASU
2. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
3. ZMĚNA NASTAVENÍ INTENZITY (SNÍŽENÍ/ZVÝŠENÍ)
4. READY - TLAČÍTKO START/STOP

PLAZMOVÉ TOKY - POPIS HLAVICE

1. SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
2. TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

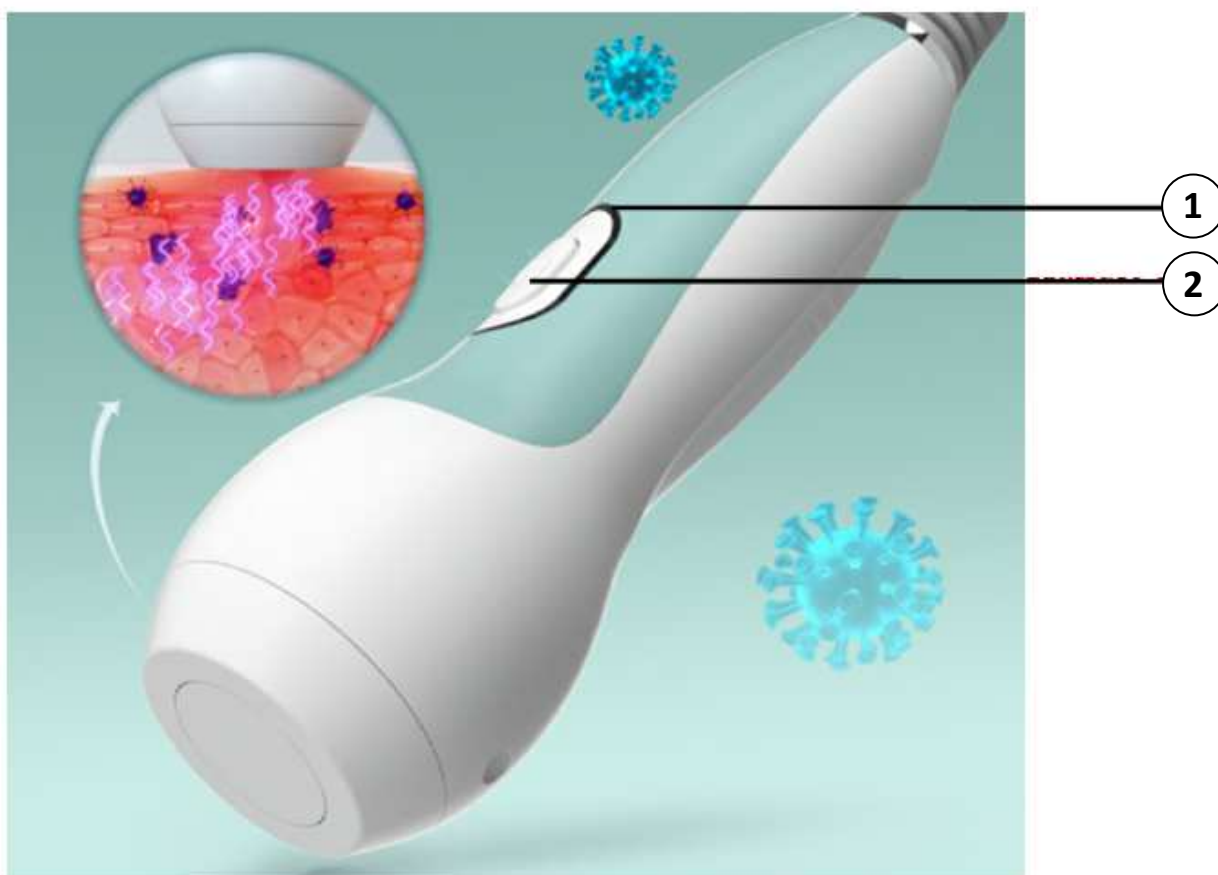

Než začnete používat plazmovou terapii

Před samotnou aplikací přístroje je nutné **pleť důkladně zbavit mastnoty, make-upu a veškerých nečistot**. Po odlíčení vyčkejte, dokud pleť **zcela neuschne** – na pokožce se před použitím plazmové terapie nesmí nacházet žádné stopy vlhkosti.

Před prvním použitím doporučujeme provést **test snášenlivosti**, například na předloktí. Po aplikaci vyčkejte přibližně **1 hodinu** a sledujte, zda pokožka nevykazuje nežádoucí reakce (zarudnutí, pálení, podráždění).

Důležitá upozornění před prvním použitím

- Přístroj nepoužívejte, pokud trpíte silnými ekzémy, otevřenými ranami nebo jiným závažným kožním onemocněním.
- Aplikační hlavici nikdy netlačte na pleť nadměrnou silou.
- Po aplikaci doporučujeme použít vyživující masku, sérum, krém nebo noční krém.
- Po aplikaci obličeje vyčkejte, až se pleť mírně zklidní, a teprve poté aplikujte make-up dle potřeby.

Optimální postup aplikace plazmovou terapií

- Proveďte důkladné odlíčení pleti běžným způsobem. V případě potřeby můžete využít hlavici s vodní dermabrazí. Na pleti nesmí zůstat žádné zbytky make-upu ani jiné nečistoty, které by snižovaly účinnost plazmových toků.
- Před aplikací musí být pleť **zcela suchá**.
- Sundejte veškeré kovové doplňky, jako jsou náušnice, náhrdelníky, prsteny či náramky.
- Použijte aplikační hlavici určenou pro plazmové toky.
- Pohybujte se aplikační hlavici **pomalou a plynule** po pleti. Plazmový výboj vzniká při optimální vzdálenosti aplikátoru od pokožky. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti přibližně **1–4 mm** od pleti. Snažte se, aby byl přímý kontakt aplikátoru s pletí co nejkratší nebo žádný.
- Aplikace je **bezbolestná**. Během aplikace můžete zaznamenat jemné aroma, které je přirozeným doprovodným jevem působení plazmového toku.
- V aplikované oblasti může dojít k mírnému zarudnutí pleti. Jedná se o běžnou a přechodnou reakci, která obvykle odezní během několika minut.
- Aplikační hlavice se nesmí během použití dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
- V průběhu aplikace **nepoužívejte žádné kosmetické přípravky**.
- Zaměřte se především na vybrané partie obličeje, krku nebo dekoltu, kde požadujete nejvýraznější účinek.
- Po dokončení aplikace naneste na pleť vhodný kosmetický přípravek – krém, sérum nebo masku – pro podporu regenerace a hydratace.

PLAZMOVÉ TOKY - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce plazmových toků zvolte v hlavní nabídce příslušný obrázek aplikační hlavičky.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu plazmových toků.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u šipek změny intenzity.
- Zvolte si takovou intenzitu působení plazmových toků, které vám budou na pleti stále příjemné a nebudou přesahovat hranici bolesti.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavičce.
- Aplikace postupně celou plochu obličeje, krku nebo dekoltu. Na velmi citlivých oblastech obličeje, kde je velmi vysoká citlivost upravte úroveň výkonu tak, aby vám použití bylo maximálně příjemné.
- Aplikace plazmovými toky trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

RADIOFREKVENCE



Radiofrekvence – neinvazivní lifting pleti

Radiofrekvence patří v oblasti estetické péče mezi **nejúčinnější metody neinvazivního liftingu pleti**. Aplikační hlavice přenáší do pokožky radiofrekvenční vlny o přesně definované frekvenci, které jsou optimalizovány tak, aby v hlubších vrstvách pleti vytvářely **řízený tepelný gradient**.


Tento proces cíleně ovlivňuje struktury ve vrstvě dermis, kde dochází k **aktivaci remodelace kolagenových a elastických vláken**. Dodaná energie stimuluje přirozenou tvorbu vlastního kolagenu a elastinu, čímž přispívá ke zlepšení pevnosti, pružnosti a celkové kvality pleti.

Během aplikace je na pleti vnímán **příjemný pocit tepla**, který je přirozeným průvodním jevem působení radiofrekvenční energie. Díky schopnosti přesného zacílení proniká radiofrekvence efektivně i do oblastí s výraznější tukovou vrstvou, kde dochází k excitaci metabolických procesů a viditelnému zpevnění pleti.

Výsledkem je **efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur obličeje**, zlepšení tonusu pleti a redukce hlubších vrásek. Technologie je obzvláště vhodná pro aplikaci **zralé pleti s viditelnými známkami stárnutí**.

Intenzitu výkonu lze **plynule regulovat**, což umožňuje bezpečné a komfortní použití i u pleti s rozdílnou mírou citlivosti.


RADIOFREKVENCE - POPIS DISPLEJE

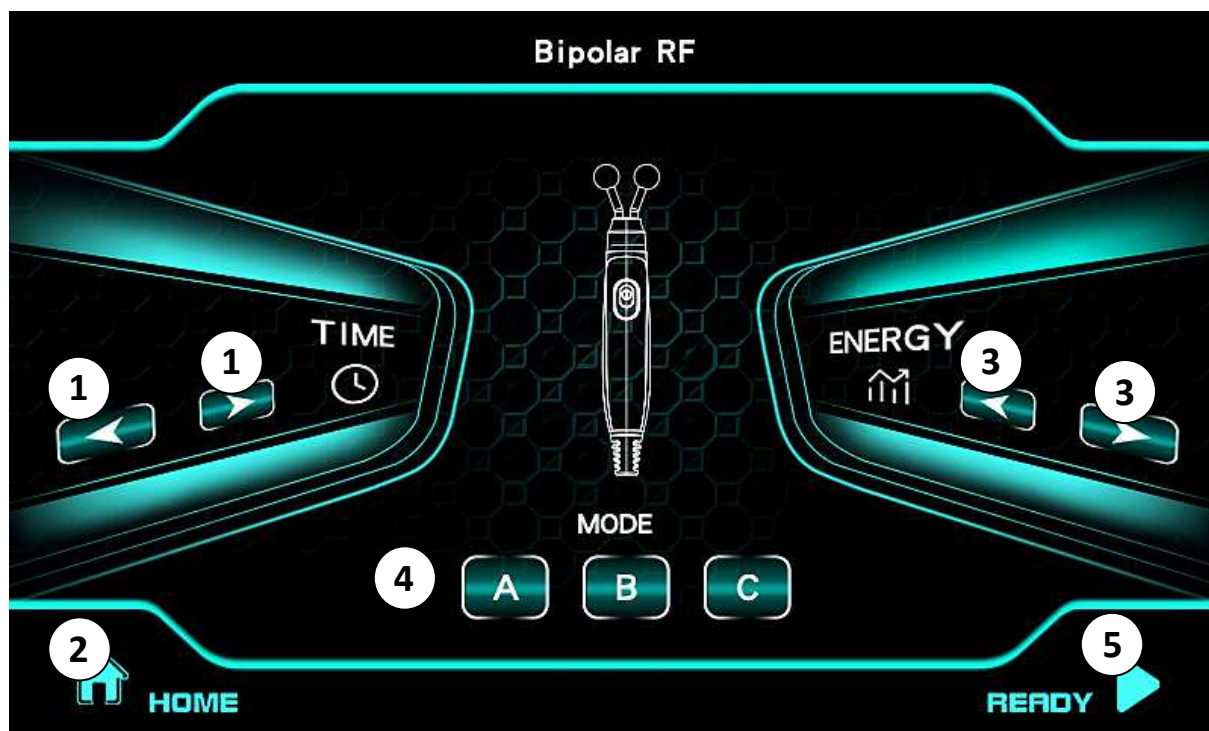

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY*
4. *NASTAVENÍ MÓDU RADIOFREKVENCE (A,B,C)*
5. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

RADIOFREKVENCE - POPIS HLAVICE

1. *SVĚTELNÝ INDIKÁTOR*
2. *TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE*

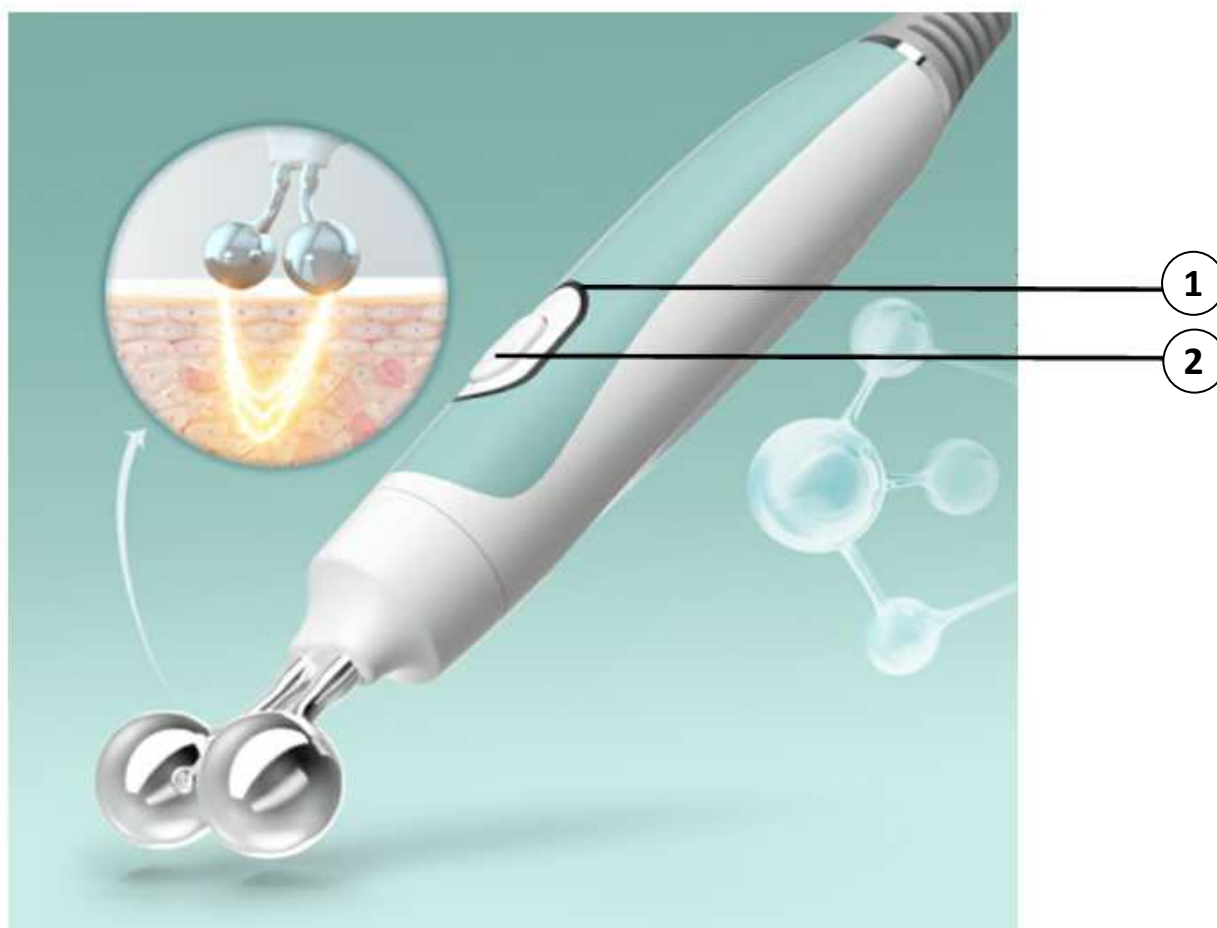

RADIOFREKVENCE - POSTUP POUŽITÍ

- Pro použití funkce radiofrekvence zvolte v hlavní nabídce obrázek příslušné aplikační hlavice.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení radiofrekvenčních vln.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u tlačítek změny intenzity.
- Pomocí tlačítek **A B C** si můžete volit mód působení radiofrekvence. K dispozici jsou 3 módy. Na displeji jsou zobrazeny jako písmena **A, B, C**. Každý mód má specifický režim fungování radiofrekvence. Na výběr je stále působení radiofrekvenčních vln nebo přerušované.
- Zvolte si takovou intenzitu působení radiofrekvence, která vám bude na pleti stále příjemná.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Délka aplikace by se měla pohybovat v rozsahu od 10 do 12 minut v závislosti na velikosti plochy pleti při použití hlavice.

POZNÁMKY K POUŽITÍ RADIOFREKVENCE

1. Pokud se rozhodnete pro aplikaci přístrojem větší části obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
2. V průběhu použití se snažte, aby byly obě kuličky v kontaktu s pletí.
3. Pokud je vám působení radiofrekvence na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkrátte čas kontaktu aplikační hlavice s pletí nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
4. **Upozornění:** Při prvním kontaktu s pletí mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již aplikace nepříjemná, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo aplikaci ukončete.
5. **Tip:** Partie použití by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
6. **Doporučení:** Po aplikaci na pleti nevystavujte v délce několika hodin příliš horké vodě. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po aplikaci stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ RADIOFREKVENCE

Péče o pleť po použití radiofrekvence je klíčová pro maximalizaci výsledků a minimalizaci možných nežádoucích účinků. Radiofrekvence stimuluje kolagen a elastin v hlubších vrstvách pokožky, čímž přispívá k jejímu omlazení a zpevnění. Zde jsou doporučení pro následnou péči o pleť:

1. Hydratace a výživa pleti

- **Hydratace** je klíčová, protože radiofrekvence může pokožku lehce vysušit. Používejte hydratační krémy nebo séra obsahující **kyselinu hyaluronovou**, která zadrží vlhkost v pokožce.
- Pro podporu obnovy pleti můžete přidat krémy nebo séra s **antioxidanty**, jako jsou **vitamíny C a E**.

2. Vyhýbání se slunečnímu záření

- Po aplikaci je pokožka citlivější na sluneční záření, proto je nutné se vyhnout přímému slunci alespoň **48 hodin** po proceduře.
- Vždy používejte **krémy s vysokým ochranným faktorem (SPF 30 nebo vyšší)**, abyste zabránili vzniku pigmentových skvrn.

3. Zklidnění pokožky

- Může se objevit mírné zarudnutí nebo pocit tepla, což je běžné. K uklidnění použijte produkty obsahující **aloe vera**, **panthenol** nebo **výtažek z heřmánku**, které mají protizánětlivé vlastnosti.
- **Chladivé masky** mohou také pomoci snížit zarudnutí a zklidnit podrážděnou pokožku.

4. Vyhněte se agresivní kosmetice

- Alespoň 3–5 dní po aplikaci se vyhněte produktům obsahujícím **retinoidy**, **AHA/BHA kyseliny** nebo jiné aktivní složky, které mohou být pro pokožku dráždivé.
- Je lepší používat jemné, neparfémované přípravky, aby se pleť mohla přirozeně regenerovat.

5. Dostatek hydratace organismu

- Pití dostatečného množství vody (alespoň 2–3 litry denně) podpoří celkovou regeneraci pokožky a pomůže udržet její zdravý vzhled.

6. Vyhněte se horkým koupelím a saunám

- Alespoň 48 hodin po aplikaci je dobré vyhnout se nadměrnému teplu, jako jsou **horké koupele**, **sauny** nebo **intenzivní cvičení**, protože teplo může zvýšit zarudnutí a podráždění pleti.

Radiofrekvence zahřívá hlubší vrstvy kůže, čímž stimuluje tvorbu kolagenu, ale krátkodobě může způsobit vazodilataci (rozšíření cév) a pocit tepla.

CO JE NORMÁLNÍ PO APLIKACI

- zarudnutí (obvykle ustoupí do 1–24 hodin),
- pocit tepla nebo „horké pleti“,
- mírný otok,
- jemná citlivost.

JAK POKOŽKU CO NEJLÉPE ZKLIDNIT

1) Chladit, ale ne ledem přímo

- Použijte **chladivý gelový sáček** nebo **studený obklad** zabalený v látce
- Chladte přibližně 5 až 10 minut v intervalech
- Nepřikládejte led přímo na kůži – může to způsobit podráždění či poškození

2) Nanést zklidňující přípravky

Vhodné jsou:

- **aloe vera gel** (čistý, bez parfemace),
- **panthenol** (např. ve formě pěny nebo krému),
- **termální voda ve spreji**,
- produkty s **niacinamidem** (snižuje zarudnutí),
- lehké **hydratační krémy bez alkoholu a parfemace**.

Vyhněte se:

- aktivním látkám jako **retinol, AHA/BHA kyseliny, vitamín C**,
- parfémovaným nebo mastným krémům.

3) Vyhnout se teplu 24–48 hodin

To znamená:

- sauna
- solárium
- horké sprchy
- intenzivní sportování (zvýšení teploty a pocení prodlouží zarudnutí)
- přímé slunce

4) Neškrábat a nedráždit pokožku

- Nemačkejte, nedrhňte, nepoužívejte peelingy.
- Pleť ponechejte v klidu.

5) Použít SPF

- Pokud jdete ven, naneste **SPF 30–50**, i když je zataženo.
- Pleť je po radiofrekvenci citlivější na UV záření.

JAK DLOUHO MŮŽE POCIT TEPLA TRVAT?

- Běžné reakce odezní během **několika hodin až jednoho dne**.
- Citlivé pleti to může být **až 48 hodin**.

ULTRAZVUK



Aplikátor vyrobený z ušlechtilé oceli po přiložení k aplikované oblasti **cíleně uvolňuje energii o specifickém výkonu a frekvenci**. Dodaná energie proniká do hlubších vrstev pleti, kde **aktivuje remodelaci kolagenových a elastických vláken** a podporuje přirozené regenerační procesy pokožky.

Díky možnosti **precizního zacílení energie** je aplikace účinná i v oblastech s výraznější tukovou vrstvou. Dochází zde k excitaci metabolických procesů, což má výrazný vliv na **zpevnění pleti a vyhlazení povislých či deformovaných kontur**.

Současně technologie umožňuje **intenzivní zapracování kosmetických přípravků** do hlubších vrstev pleti, čímž se zvyšuje jejich účinnost a celkový efekt aplikace.

K dispozici jsou dvě velikosti aplikačních hlavic:

- **Mini aplikátor** – ideální pro citlivé oblasti, zejména oční okolí
- **Maxi aplikátor** – určený pro aplikaci obličeje, krku a dekoltu


ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS DISPLEJE



1. NASTAVENÍ ČASU
2. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
3. NASTAVENÍ INTENZITY
4. NASTAVENÍ MÓDU ULTRAZVUKU
5. READY - TLAČÍTKO START/STOP

ULTRAZVUK HLAVICE - POPIS HLAVICE

- 1.** SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
- 2.** TLAČÍTKO START/STOP FUNKCE

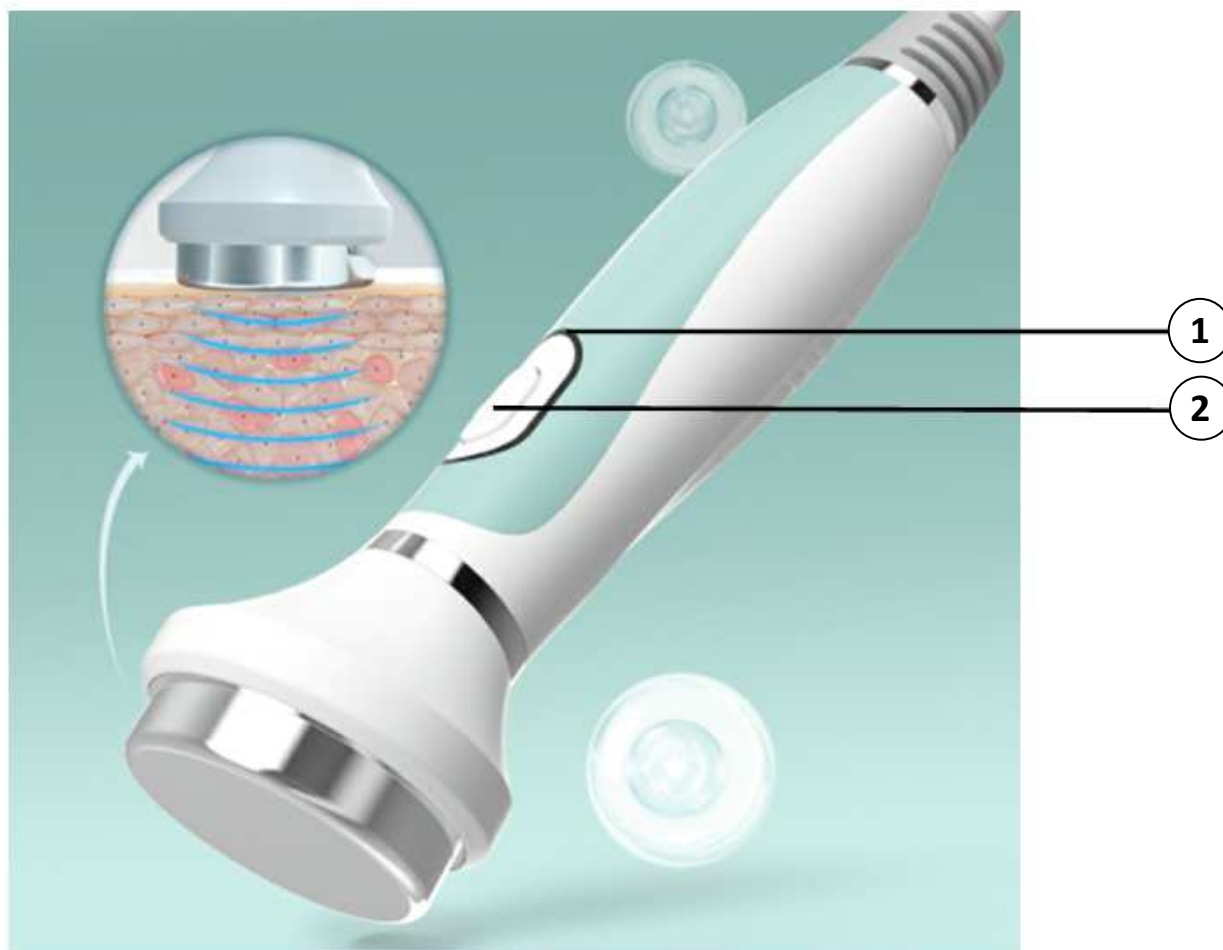

ULTRAZVUK - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci ultrazvuku snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení ultrazvuku. Hodnota úrovně intenzity je zobrazena u tlačítek změny intenzity. Zvolte si intenzitu, kdy můžete na pleti vnímat působení ultrazvuku, ale na druhou stranu je vám použití stále příjemné. Průvodní jev působení ultrazvukových vln je pocit mravenčení.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítka **MODE** si můžete nastavit režim působení ultrazvuku. Kontinuální a přerušovaný. Pro efektivní použití doporučujeme používat kontinuální režim.
- Při použití se vždy snažte, aby byl povrch aplikační hlavice v plném kontaktu s pletí.
- Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny se tak mohou na pleť důkladně navázat.
- Můžete také samozřejmě použít vámi oblíbený kosmetický krém, gel nebo sérum. Ultrazvukové vlny významným způsobem napomáhají k zapracování účinných látek.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikace ultrazvukem trvá v rozsahu od 2 do 5 minut. Snažte se vždy plynule pokrýt celou plochu pleti obličeje, krku nebo dekoltu.

EMS MIKROPULZY




Technologie EMS – elektrická svalová stimulace

Technologie **EMS (Electrical Muscle Stimulation)** představuje metodu využívající **elektrické impulzy ke stimulaci svalů**. Tato technologie nachází uplatnění v celé řadě oblastí, jako je fyzioterapie, rehabilitace, sportovní trénink i estetická péče.

Princip EMS spočívá v přenosu **nízkoenergetických elektrických impulzů** do svalových struktur prostřednictvím **čtyř kontaktních bodů aplikační hlavice**. Tyto impulzy napodobují přirozené nervové signály, které mozek běžně vysílá k aktivaci svalů. Výsledkem jsou **kontrolované svalové kontrakce**, které podporují posílení oslabených a ochablých svalů.

V oblasti obličeje přispívá EMS technologie ke **zvýšení svalového tonusu**, zlepšení pevnosti pleti a **výraznějšímu vykreslení kontur obličeje**. Pravidelná aplikace může podpořit celkové omlazení vzhledu pleti a zpevnění rysů bez invazivních zákroků.

EMS MIKROPULZY - POPIS DISPLEJE

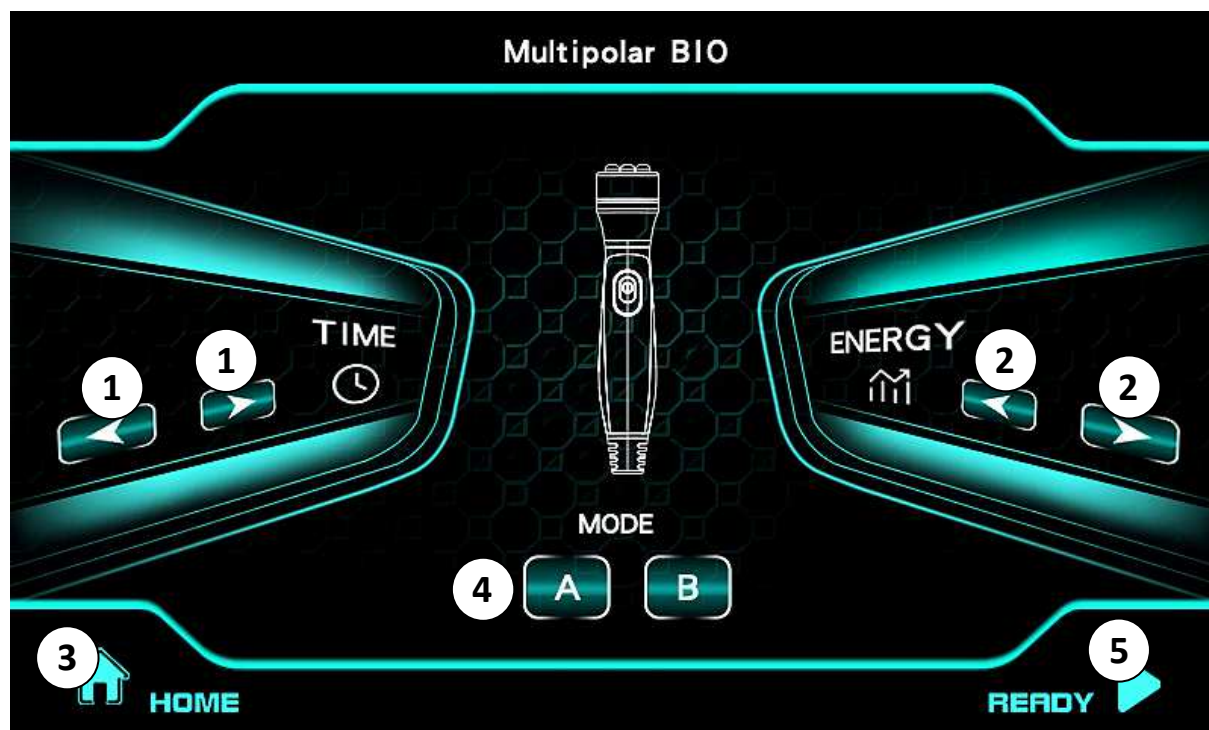

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NASTAVENÍ INTENZITY*
3. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
4. *VOLBA MASÁŽNÍHO PROGRAMU (**MODE**) A,B,C*
5. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

EMS MIKROPULZY - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci EMS pulzů snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Při použití hlavice doporučujeme aplikaci sonogelu nebo jiného kosmetického přípravku, který lubrikuje povrch pokožky. EMS pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit působení intenzity EMS pulzů. Zvolte si intenzitu, která vám bude na pleti příjemná. Aktuálně nastavená intenzita je zobrazena na displeji u tlačítek změny intenzity.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývajících čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Pomocí tlačítek MODE si můžete nastavit režim působení EMS pulzů. K dispozici jsou 2 programy: **A B**. Každý program má individuální přednastavenou frekvenci působení EMS pulzů. Zvolte si takový program, který vám nejvíce vyhovuje.
- Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, vždy začínejte na nejnižší intenzitě č. 1. Přidávejte postupně. Tak, aby pro vás byla aplikace maximálně komfortní.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Aplikace EMS pulzy trvá v rozsahu 5 minut. Při použití hlavice se vždy snažte, aby byly všechny 4 kontaktní kolíčky aplikační hlavice v kontaktu s pletí.

Důležité upozornění k použití EMS technologie

Při aplikaci EMS technologie je **nezbytně nutné používat dostatečné množství kontaktního gelu**. Kontaktní gel zajišťuje správný přenos elektrických impulzů, zvyšuje komfort během aplikace a zároveň chrání povrch aplikační hlavice i pokožku před nadměrným zatížením.

Maximální doporučená délka jedné aplikace EMS je 5 minut. Překročení této doby může vést k **výrazné degradaci aplikační hlavice**, snížení její funkčnosti a zkrácení její životnosti.

Dodržování doporučeného množství gelu i maximální délky aplikace je zásadní nejen pro dosažení optimálních výsledků, ale také pro bezpečný provoz přístroje a ochranu jeho komponent.

NANO HYDRATAČE



Krásná a zdravá pleť se bez dostatečné hydratace neobejde

Dostatečný příjem tekutin je zásadní pro správné fungování celého organismu, avšak **pleť patří mezi oblasti, na které se často zapomíná**. Krásná a zdravě vyhlížející pleť obsahuje až **80 % vody**. Bez vody se lidské tělo neobejde a její nedostatek se velmi rychle projeví právě na stavu pokožky.

Zejména v letních měsících dochází k intenzivnějšímu vysušování pleti vlivem vyšších teplot, slunečního záření a klimatizace. Pleť s nedostatkem vláh působí suše, unaveně a opotřebovaně, rychle ztrácí pružnost, je náchylnější ke vzniku vrásek a celkově **rychleji stárne**.

Snížený obsah vody v těle způsobuje dehydrataci všech vrstev pokožky. Ani zvýšený pitný režim však nemusí vždy zajistit dostatečnou hydrataci pleti z vnějšího pohledu. Proto je **cílená vnější hydratace** nezbytnou součástí každodenní péče o pleť.

Princip fungování hydratační nano hlavice

Hydratační nano hlavice představuje **vysoce účinný kosmetický nástroj pro okamžitou hydrataci pleti**. Výrazně zvyšuje účinnost klasických hydratačních přípravků na vodní bázi a během několika sekund dodává pleti potřebnou vlhkost. Je vhodná pro **všechny typy pleti**, včetně citlivé.

Přístroj využívá **atomizér nové generace**, který dopravuje tekutinu ze zásobníku přímo do rozprašovacího mechanismu. Zde dochází k rozštěpení molekul roztoku na **nanočástice**, které jsou následně přeměněny na jemnou mlhovinu.

Velikost vzniklých částic je **menší než samotný kožní pór**, což umožňuje snadné pronikání hydratačního přípravku přes horní vrstvu pleti. Výsledkem je **okamžitá a maximálně účinná hydratace** s viditelným efektem.

Hlavní výhody hydratační nano hlavice

- Atomizér nové generace vytváří **jemnou nano mlhu**
- Molekuly roztoku pronikají přímo do pokožky přes kožní póry
- Okamžitá hydratace pleti během několika sekund

Nevhodné přípravky (riziko ucpání atomizéru!)

Oleje a olejové textury

- Rostlinné oleje, silikonové přípravky, mastná séra
- **Proč?** Oleje se špatně rozprašují a vytvářejí v atomizéru lepkavý film

Husté krémy a gely s pevnými částicemi

- Krémy s fyzikálními UV filtry (oxid zinečnatý, oxid titaničitý)
- Gely s peelingovými nebo abrazivními částicemi

Alkoholové a silně astringentní přípravky

- Přípravky s vysokým obsahem alkoholu
- **Proč?** Alkohol může pleť nadměrně vysušovat a poškodit vnitřní mechanismy nano pistole


Vysoce viskózní látky

- Med, sirupy, neředěné kolagenové gely
- **Proč?** Mohou způsobit tvorbu neprůchodných usazenin a ucpání atomizéru

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ SPRÁVNÉ VODY

Přístroj je možné plnit pouze **destilovanou** nebo **kojeneckou** vodou. Použití jakékoli jiné vody (např. vodovodní, minerální, perlivé) nebo nevhodných tekutin způsobí nevratné ucpání atomizéru a bude vyžadovat nákladnou výměnu celé hydratační hlavice. Zodpovědnost za takové poškození vzniklé nesprávným použitím nese uživatel.


NANO HYDRATACE - POPIS DISPLEJE

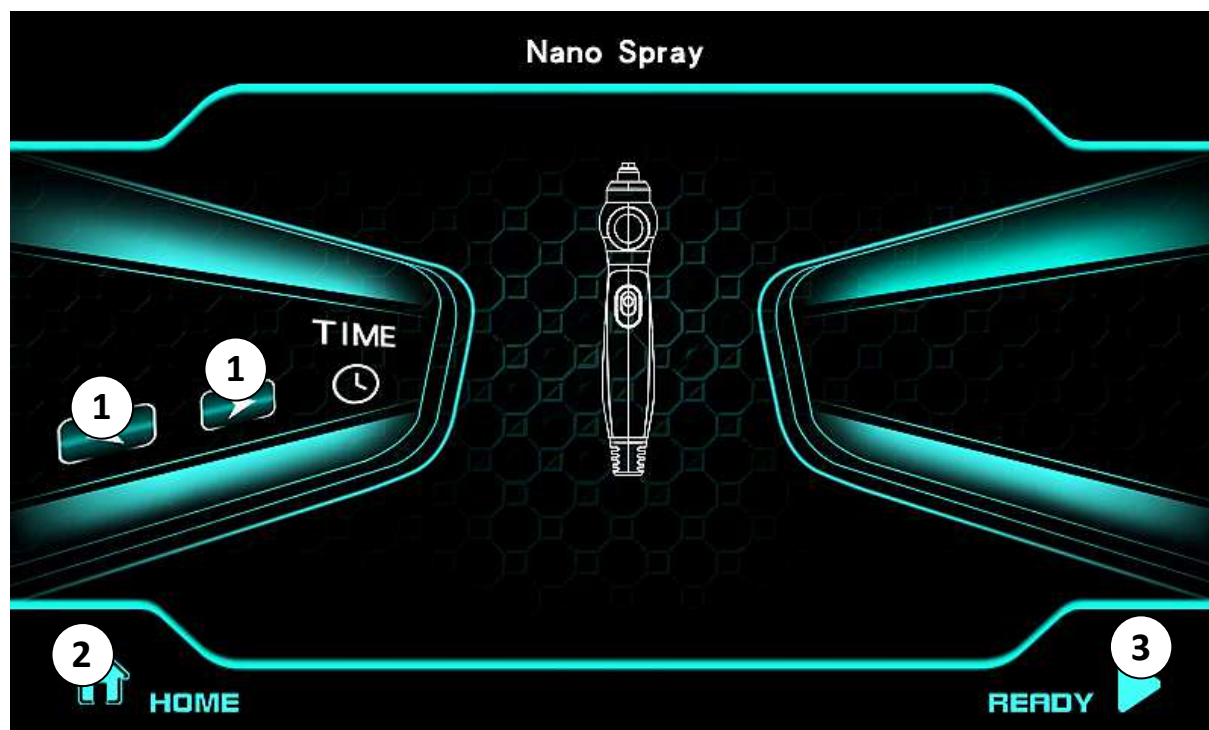

1. NASTAVENÍ ČASU
2. NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY
3. READY - TLAČÍTKO START/STOP

NANO HYDRATACE - POPIS APLIKÁTORU

- 1.** AMPULKA NA TEKUTINU
- 2.** SVĚTELNÝ INDIKÁTOR
- 3.** START/STOP FUNKCE

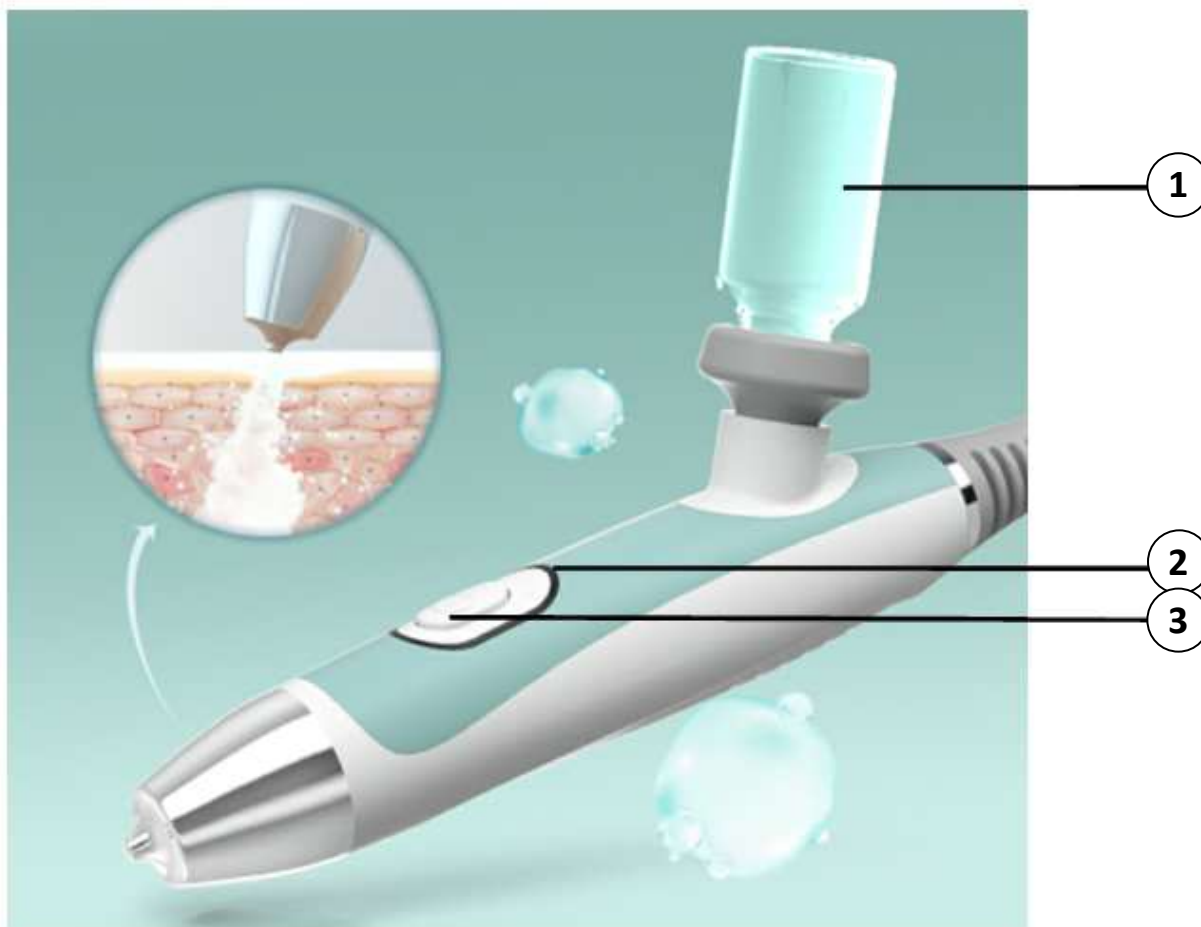

NANO HYDRATACE - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci nano hydrataci snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace. Nastavený čas a zbývající čas aplikace je zobrazen na displeji.
- Využijte skleněnou ampulku, která je součástí balení. Naplňte ji tekutinou dle vaše výběru. Ideální je destilovaná nebo kojenecká voda. Pokud se rozhodnete tekutinu naředit, nikdy by se neměla změnit celková hustota tekutiny. Mohlo by dojít k ucpání atomizéru. Pokud použijete jiný přípravek, musí mít stejné složení, jako voda. V opačném případě dojde k ucpání hlavice.
- Ampulku instalujte do aplikační hlavice. Vždy držte ampulku hrdlem nahoru. Při instalaci otočte aplikační hlavici vzhůru nohama, aby mohlo dojít k pevnému spojení hlavice s ampulkou. Gumová část aplikační hlavice by měla být v plném kontaktu s ampulkou. Vznikne tak maximální těsnost.
- Při použití držte vždy aplikační hlavici tak, aby dno ampulky mířilo směrem nahoru.
- Aplikátor hlavice by neměl být příliš blízko, ale ani daleko od pleti.
- Při delším použití hlavič s nano hydratací může sražená tekutina na pleti stékat. Otřete případně pomocí hadříku nebo ručníku.
- Pokud na konci použití zbývá v ampulce tekutina, ampulku vyjměte z aplikátoru tak, že dno ampulky směřuje dolů.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.
- Funkci si můžete také zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka, které je integrované přímo v aplikační hlavici.
- Aplikační hlavici použijte tak dlouho, dokud není ampulka prázdná.

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU



METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

1. Čelo

- Pohybuj hlavici **od středu čela směrem do stran k vlasové linii**
- Pohyby jsou **vodorovné, plynulé a lehce tažené ven**
- Postupuj po čele **odspodu nahoru**, aby byla pokryta celá plocha

2. Oblast mezi obočím (kořen nosu)

- Ved' hlavici **od kořene nosu směrem vzhůru ke středu čela**
- Pohyb je **rovný, jemný a tažený nahoru**

3. Nos

- Začni u kořene nosu
- Pohybuj se **směrem dolů po hřbetu nosu**
- Po stranách nosu ved' pohyby **lehce šikmo ven směrem k tvářím**

4. Oční okolí (mimo oční víčka)

- Pohyby ved' **po kostním okraji očnice**, nikdy ne přímo na víčko
- Začni u vnitřního koutku oka
- Pokračuj **obloukovým pohybem směrem ven a lehce nahoru k spánkům**
- Pohyb je **velmi jemný, pomalý a plynulý**

5. Tváře

- Začni u nosu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k uším a lehce nahoru**
- Pohyby mohou být:
 - obloukové
 - nebo krátké tahy směrem vzhůru
- Cílem je **podpora liftingového efektu**

6. Oblast nad horním rtem

- Neaplikuj přímo na rty
- Pohybuj hlavici **od středu nad horním rtem směrem šikmo nahoru k nosním křídlům**
- Pohyb je **jemný a krátký**

METODA APLIKACE OBLIČEJE | KRKU | DEKOLTU

7. Okolí úst

- Začni u koutků úst
- Veď pohyb **směrem ven a lehce nahoru**
- Vyhni se přímému kontaktu se rty
- Pohyby jsou **obloukové, zjemňující mimické linie**

8. Brada a oblast pod bradou

- Na bradě veď pohyby **od středu brady do stran**
- Pod bradou pohybuj hlavici **směrem vzhůru k čelisti**
- Pohyby jsou **tažené nahoru**, podporující zpevnění kontur

9. Krk

- Pohyby veď **od spodní části krku směrem vzhůru k bradě**
- Na stranách krku můžeš vést pohyb **šikmo nahoru**
- Vyhni se silnému tlaku v oblasti štítné žlázy

10. Dekolt

- Začni u středu dekoltu
- Pohybuj hlavici **směrem ven k ramenům**
- Pohyby jsou **široké, plynulé a jemně tažené**

Obecná doporučení

- Pohyby jsou vždy **plynulé, pomalé a kontrolované**
- Netlač, nech hlavici klouzat po pleti


Vždy se snaž pohybovat **směrem nahoru nebo ven**, nikoli dolů

PŮSOBNÍ CHLADU



Působení chladu slouží k okamžitému zklidnění pleti a je ideální jako závěrečná fáze pleťového aplikace. Během několika minut dochází k návratu pleti na její přirozenou teplotu, čímž se minimalizuje podráždění a podpoří celkový komfort klienta. Chladová terapie má výrazný zklidňující účinek, napomáhá ke stažení kožních pórů, redukci zarudnutí a uzamčení aktivních látek aplikovaných v předchozích krocích aplikace. Skvělé také při potlačení kruhů pod očima vlivem únavy. Pleť působí svěže, vyhlazeně a odpočatě. Velká plochá aplikační hlavice s ergonomickým tvarem se velmi dobře drží, umožňuje plynulý pohyb po pleti a efektivně ochladí i obtížně dostupné partie a záhyby obličeje. Díky své konstrukci je aplikace rychlá, rovnoměrná a příjemná. Pod hlavici není třeba aplikovat žádný speciální přípravek.

PŮSOBENÍ CHLADU - POPIS DISPLEJE

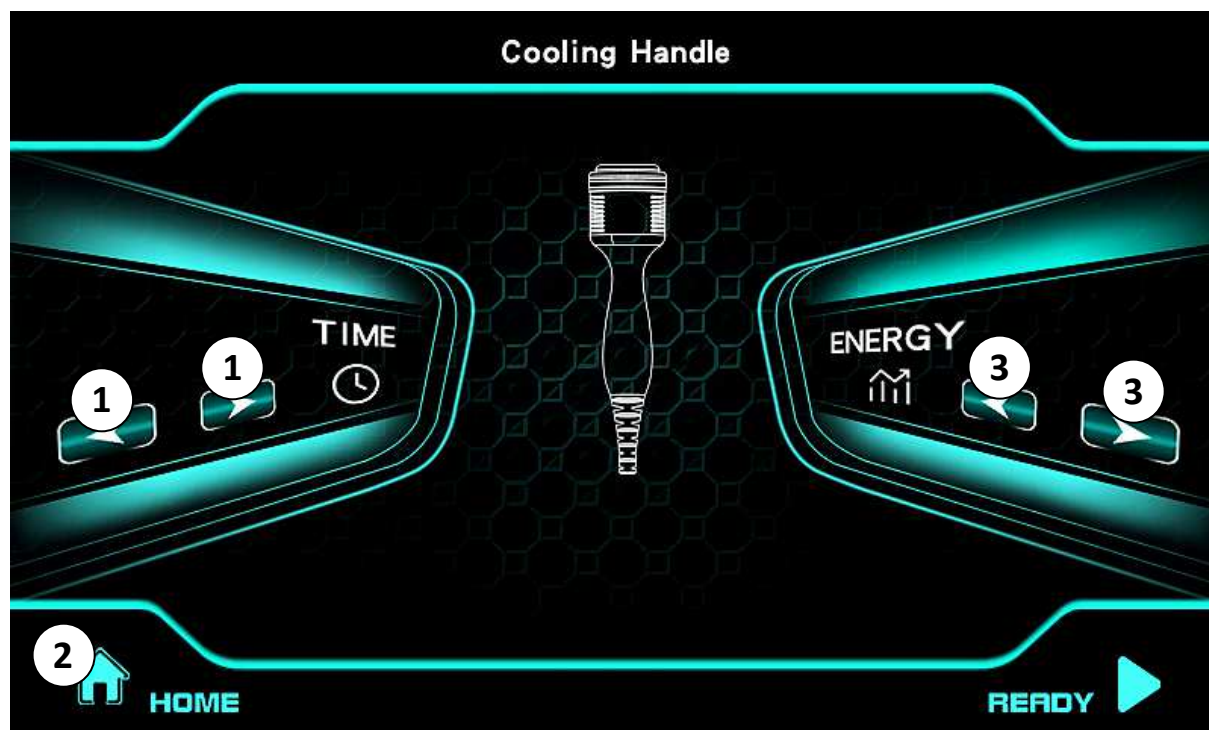

1. *NASTAVENÍ ČASU*
2. *NÁVRAT DO HLAVNÍ NABÍDKY*
3. *NASTAVENÍ INTENZITY (VYŠŠÍ HODNOTA = VĚTŠÍ CHLAD)*
4. *READY - TLAČÍTKO START/STOP*

PŮSOBENÍ CHLADU - POSTUP POUŽITÍ

- Funkci nano hydrataci snadno aktivujete stisknutím příslušného tlačítka na displeji v hlavní nabídce.
- Pomocí tlačítek na levé straně displeje si můžete nastavit čas aplikace.
- Pomocí tlačítek na pravé straně displeje si můžete nastavit intenzitu působení chladu. Čím je hodnota větší, tím je povrch aplikační hlavice chladnější.
- Aktuálně nastavená hodnota výkonu je zobrazena na displeji u tlačítek nastavení intenzity.
- Při pohybu po pleti se snažte, aby byla celá plocha aplikační hlavice v kontaktu s pletí. Na pokožku nemusíte nanášet žádný speciální přípravek. Pohybujte se po pleti v délce 2 až 3 minut podle individuální potřeby uživatele.
- Pomocí tlačítka **READY** si můžete funkci zapnout nebo vypnout.


SVĚTELNÁ TERAPIE



Červené světlo: 630nm, Modré světlo: 470nm, Žluté světlo: 590nm, Zelené světlo: 520nm

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

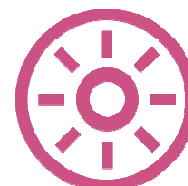

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetické aplikace pleti.

ČERVENÉ SVĚTLO

Červené světlo patří mezi nejčastěji používané v kosmetické péči.

- Podporuje procesy v pokožce, které souvisí s její pevností a celkovým vzhledem.
- Přispívá ke zlepšení textury pleti a její pružnosti.
- Podporuje rovnoměrnější vzhled pokožky a může přispět ke zmenšení viditelnosti pórů.
- Je vhodné pro klientky, které chtějí podpořit regeneraci po kosmetických procedurách nebo dodat pleti zdravější vzhled.

Typické použití: zralá pleť, unavená pleť, mdlý tón pleti.

MODRÉ SVĚTLO

Modré světlo se používá zejména u pleti se sklonem k nedokonalostem.

- Reaguje s porfyriny, které se nacházejí v kožním mazu u problematické pleti.
- Působí zklidňujícím dojmem, díky čemuž je přínosné u podrážděné nebo citlivé pokožky.
- Pomáhá regulovat nadměrné maštění pleti.

Typické použití: pleť se sklonem k akné, mastná a smíšená pleť.

FIALOVÉ SVĚTLO

- Pomáhá současně řešit projevy problematické pleti i podpořit její celkový vzhled.
- Kombinace obou spekter umožňuje péči o pleť, která je nejen problematická, ale také citlivá či podrážděná.
- Napomáhá zklidnění a rovnováze.

Typické použití: citlivá aknézní pleť, kombinovaná aplikace.

ŽLUTÉ SVĚTLO

Žluté světlo je známé svým zklidňujícím a revitalizačním účinkem.

- Přispívá ke stimulaci povrchového metabolismu kožních buněk.
- Podporuje vstřebávání kosmetických přípravků aplikovaných během procedury.
- Podílí se na podpoře lymfatické mikrocirkulace, což je vhodné při pocitech únavy nebo otoku pleti.
- Osvědčuje se po intenzivních kosmetických zásazích, např. po mechanickém peelingu.
- Může přispět ke zpomalení viditelných projevů stárnutí pokožky.

Typické použití: citlivá pleť, šedá nebo unavená pokožka, pleť po peelingu.

ZELENÉ SVĚTLO

Zelené světlo je tradičně spojeno se zklidňujícími a harmonizujícími účinky.

- Podporuje rovnoměrné zbarvení pokožky.
- Může pomoci redukovat viditelnost jemných linií a drobných nerovností.
- Podporuje proces přirozené regenerace povrchu pleti.
- Je vhodné pro pleť, která potřebuje sjednotit tón a získat svěží vzhled.

Typické použití: pleť s pigmentovými nerovnostmi, zčervenáním nebo mdlým tónem.

AZUROVÉ SVĚTLO

Azorové světlo se využívá především v péči o problematickou a smíšenou pleť.

- Působí harmonizačně na vzhled pokožky a podporuje její celkovou rovnováhu.
- Napomáhá sjednocení tónu pleti a přispívá k její svěžejší podobě.
- Je oblíbené při péči o pleť se sklonem k nedokonalostem a nerovnoměrnému vzhledu.
- Může být vhodným doplňkem kosmetických aplikací zaměřených na čistotu a jas pleti.

Typické použití: problematická pleť, smíšená pleť, pleť se sklonem k nerovnostem a nečistotám.

BÍLÉ SVĚTLO („LASEROVÉ“)

Bílé světlo se v kosmetické péči používá pro celkové zklidnění a vyvážení pleti.

- Působí jemně a harmonizačně, podporuje přirozenou rovnováhu pokožky.
- Pomáhá sjednocovat vzhled pleti a přispívá k jejímu svěžejšímu a jasnějšímu dojmu.
- Podporuje celkový komfort pokožky a její zdravě působící tón.
- Je vhodné pro klientky, které chtějí nenásilně podpořit celkový vzhled pleti bez cílení na konkrétní problém.

Typické použití: citlivá pleť, normální pleť, pleť bez výrazných nedokonalostí, pleť po kosmetickém použití.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY & ODPOVĚDI – SVĚTELNÁ TERAPIE

K čemu slouží LED světelná maska?

LED maska je určena k pravidelné kosmetické péči o pleť. Pomocí různých barev LED světla podporuje regeneraci pokožky, zlepšení jejího vzhledu, sjednocení tónu a celkový komfort pleti.

Je používání masky bezpečné?

Ano, maska je navržena pro bezpečné použití. LED světlo neobsahuje UV záření a je šetrné k pokožce při dodržení návodu k použití.

Pro jaké typy pleti je maska vhodná?

Maska je vhodná pro všechny typy pleti, včetně citlivé, suché, mastné, smíšené i zralé pleti.

Jak dlouho trvá jedna aplikace?

Jedna aplikace trvá podle nastavení časovače, obvykle 15 až 20 minut.

Musím si před použitím vyčistit pleť?

Ano, před použitím masky doporučujeme pleť důkladně odlíčit a vyčistit, aby světlo mohlo působit co nejefektivněji.

Mohu během terapie používat kosmetické přípravky?

Ano, můžete použít lehké sérum nebo gel. Některé barvy světla (např. žluté nebo infračervené) mohou podpořit jejich vstřebávání.

K čemu slouží červené světlo?

Červené světlo (637 nm) podporuje přirozené regenerační procesy pleti, její pevnost a pružnost. Je vhodné zejména pro zralou a unavenou pleť.

Kdy zvolit modré světlo?

Modré světlo (465 nm) je určeno především pro problematickou pleť se sklonem k nedokonalostem a nadměrnému maštění.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY & ODPOVĚDI – SVĚTELNÁ TERAPIE

Jaký je rozdíl mezi žlutým a azurovým světlem?

Žluté i azurové mají zklidňující účinky. Jantarové světlo je jemnější a zaměřené na rozjasnění a harmonizaci citlivé pleti.

Mohu během používání masky otevřít oči?

Doporučujeme mít oči zavřené.

Je maska vhodná i pro citlivou pleť?

Ano, zejména bílé, žluté, azurové a zelené světlo je vhodné pro citlivou nebo podrážděnou pleť.

Mohu masku používat po kosmetickém použití?

Ano, maska je vhodná i po některých kosmetických procedurách (např. peeling), zejména s červeným nebo modrým světlem.

Je maska vhodná pro muže?

Ano, maska je vhodná pro ženy i muže bez rozdílu.


Jak masku čistit?

Masku otírejte jemně suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem s přípravkem na bázi alkoholu. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani ji neponořujte do vody.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1. Se zásobníky na vodu manipulujte vždy pouze při vypnutém přístroji.** Používejte výhradně **destilovanou nebo kojeneckou vodu**. Voda nesmí obsahovat žádné mechanické nečistoty. Použití vody s obsahem minerálů může vést ke vzniku vodního kamene, který způsobí zanesení systému cirkulace vody a může přístroj trvale poškodit. Před každým použitím vizuálně zkontrolujte, zda není odpadní nádoba přeplněná. S vodou manipulujte vždy **mimo dosah přístroje**, aby v případě nehody nedošlo k jeho zasažení vodou.
- 2. Do ampulky aplikační hlavice s nano hydratací používejte výhradně destilovanou nebo kojeneckou vodu.**
- 3. Přístroj zapnete stisknutím hlavního tlačítka** umístěného na horní straně hlavní jednotky. Po rozsvícení displeje se přístroj nachází v pohotovostním režimu a je připraven k použití.
- 4. Veškeré funkce přístroje se ovládají prostřednictvím dotykového barevného displeje.** Jednotlivé aplikační hlavice zapínáte a vypínáte pomocí příslušných ikon. V daný okamžik lze používat **pouze jednu technologii** – není možné mít aktivních více funkcí současně. Výkon vždy nastavujte postupně a s ohledem na komfort uživatele.
- 5. U každé aplikační hlavice je možné individuálně nastavit dobu aplikace.**
- 6.** Při nastavování parametrů **vodní dermabraze** je důležité vyvážit množství přiváděné vody a intenzitu podtlaku. Vody by nemělo být příliš málo, aby byla aplikace plynulá, ani příliš mnoho, aby nestékala po pleti a nesnižovala komfort aplikace.
- 7. Před aplikací dalšího klienta vždy důkladně očistěte kontaktní části aplikační hlavice.**
- 8.** Doporučujeme použít dezinfekční prostředek na bázi alkoholu, čímž zabráníte přenosu bakterií a zajistíte maximální hygienu.
- 9. Přístroj lze kdykoliv vypnout** stisknutím hlavního tlačítka na horní straně jednotky.
- 10.** Pro zachování co nejdelší životnosti přístroje doporučujeme po ukončení aplikace **ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň 5 minut**. Aktivní chlazení tak má dostatek času na postupné a šetrné ochlazení vnitřních komponent.

MAPA CITLIVOSTI PLETI

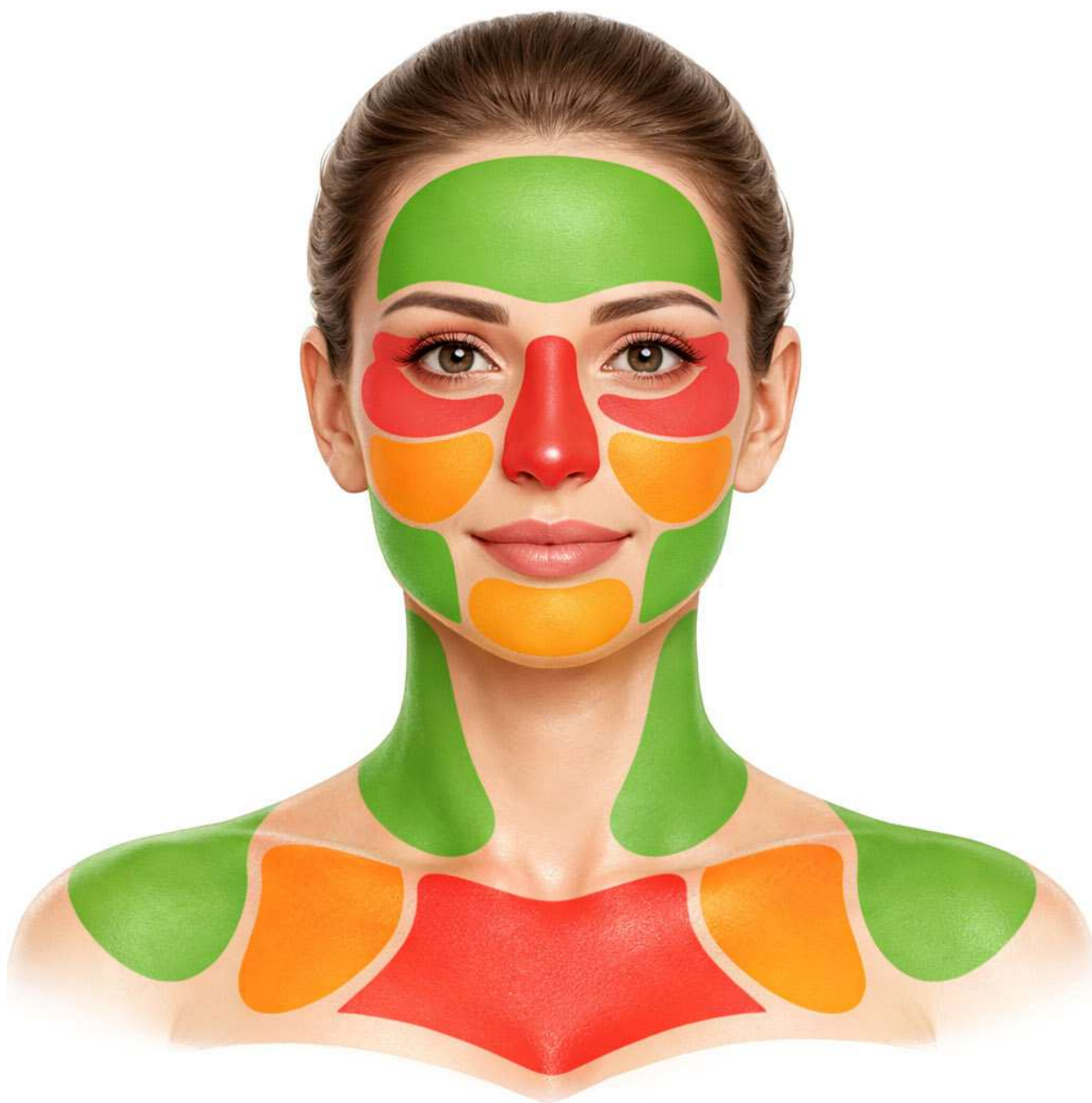

- NÍZKÁ CITLIVOST
- STŘEDNÍ CITLIVOST
- VYSOKÁ CITLIVOST

ÚDRŽBA A HYGIENA PROVOZU

1. ČIŠTĚNÍ PO KAŽDÉM POUŽITÍ

- Odstranění sonogelu/nanášeného přípravku.
- Hlavici otřete měkkým, suchým ubrouskem (např. mikrovlákno) nebo vatičkou.
- Pokud je gel zaschlý, můžete použít vlhčený ubrousek bez alkoholu (určený pro elektroniku).

2. DEZINFEKCE (POKUD PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ VÍCE OSOB)

Postup dezinfekce:

- Nastříkejte isopropylalkohol (70–80%) ve spreji na hadřík (NE přímo na hlavici!).
- Jemnými pohyby otřete povrch hlavice.
- Nechte zcela vyschnout (alkohol se rychle odpaří).

Pozor! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (aceton, čpavek, chlor).

3. OCHRANA PŘED VLHKOSTÍ

- Hlavici NENAMÁČEJTE – voda by mohla poškodit elektroniku.
- Po čištění vždy důkladně osušte suchým hadříkem.

4. DLOUHODOBÁ ÚDRŽBA

- Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, aplikujte na kovové části hlavice tenkou vrstvu antiseptického přípravku (např. lékařský alkohol), aby nedošlo k oxidaci.
- Skladujte v suchu a při pokojové teplotě.

5. UPOZORNĚNÍ

- Neponořujte hlavici do vody ani čisticích roztoků!
- Nepoužívejte abrazivní materiály (kartáče, drátěnky)!
- Nepoužívejte horkou vodu nebo páru!

DOPORUČENÍ PRO PRODLUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

- Čistěte hlavici ihned po použití – zabráníte zasychání gelu.
- Při dezinfekci používejte pouze isopropylalkohol – nepoškozuje materiály.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k poškození (praskliny, koroze).

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké výsledky mohu očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť projeví?

Reakce pleti na aplikaci radiofrekvence je vždy individuální a výsledný efekt závisí na několika faktorech, jako je typ pleti, její aktuální stav, věk či pravidelnost aplikace.

Bezprostředně po aplikaci může být pleť mírně zarudlá. Díky použití sonogelu a hydrataci působí pleť často svěže, projasněně a vypnutě. V místech, kde byla použita aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty v hlubších vrstvách pokožky. Pro plný efekt je však důležité dopřát pleti čas – v řádu hodin až dnů – kdy probíhá proces remodelace kolagenních a elastických vláken, která jsou klíčová pro pevnost a pružnost pleti.

Neinvasivní lifting pomocí radiofrekvence není jednorázový ani trvalý proces. Pro dosažení a udržení viditelných výsledků je nutná pravidelná stimulace pleti, obvykle **3–4× měsíčně**. Po ukončení pravidelné péče se pleť postupně vrací do původního stavu. Minimální doporučený rozestup mezi aplikacemi na stejnou oblast je **alespoň 7 dní**.

Jak lze působení radiofrekvence vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavice s pleť prochází radiofrekvenční energie přes povrch pokožky do vrstvy dermis. Tento proces je vnímán jako postupně se zvyšující pocit tepla. Nejedná se o klasické „nahřívání“ pleti zvenčí, ale o průvodní efekt působení radiofrekvenční energie v hlubších strukturách kůže. Hlavním cílem této technologie je cílené ovlivnění dermis pomocí specifické frekvence a výkonu, což podporuje přirozené regenerační procesy pleti.

Je přístroj zdravotnickým prostředkem?

Přístroj **není zdravotnickým prostředkem**. Spadá do kategorie estetických a masážních přístrojů. Neslouží k léčbě kožních onemocnění. Využívá však ověřenou technologii radiofrekvence, která významně přispívá ke zlepšení celkové kondice, vzhledu a vitality unavené či nezdravě působící pleti.

Představuje aplikace estetického přístroje nějaká omezení po aplikaci?

Po dokončení aplikace může být pokožka mírně zarudlá. Tento stav je způsoben stimulací krevního oběhu a lymfatického systému v oblasti obličeje.

Zarudnutí obvykle odezní během několika minut, v případě intenzivnější aplikace maximálně během několika hodin. Pleť se poté vrací do normálního stavu. I proto je aplikace často označována jako procedura vhodná „na obědovou pauzu“ – bez výrazného společenského omezení.

Mohu při aplikaci cítit nepříjemné pocity?

Každá technologie působí na pleť odlišným způsobem a vjemy se mohou lišit podle použité aplikační hlavice:

- **Radiofrekvence** – pocit tepla
- **Vodní dermabrazé** – podtlak a cirkulace vody
- **Plazmové toky** – mírné štípání
- **EMS pulzy** – jemné brnění

U většiny technologií lze nastavit intenzitu výkonu. Cílem je, aby byla aplikace na pleti zřetelně cítit, ale nikdy nepřekračovala hranici komfortu a snesitelnosti.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

S používáním přístroje nemám zkušenosti. Jak mám začít?

Doporučujeme nejprve důkladně prostudovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Nikam nespěchejte a začínejte s aplikací pomalu.

Postupně si vyzkoušejte jednotlivé aplikační hlavice na různých částech obličeje. Vnímejte rozdíly v reakcích pleti. Experimentujte s pohybem hlavice – vytvářejte jemné tahy, kroužky nebo linie. Tím si osvojíte techniku, která je pro vaši pleť nejvhodnější. Postupně můžete měnit tempo, rychlost pohybu i – s maximální opatrností – úroveň výkonu.

Proč je důležitá péče o aplikační hlavici po každém použití?

Kontaktní aplikační hlavice, zejména u radiofrekvence, je nutné po každém použití důkladně očistit od zbytků kontaktního gelu a následně dezinfikovat.

Ideální je použít dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Tím zabráníte šíření bakterií a zajistíte maximální hygienu provozu. Po dezinfekci hlavici pečlivě osušte čistým hadříkem.

Má přístroj certifikaci?

Ano, přístroj splňuje standardní evropské certifikační požadavky a odpovídá normám platným pro zařízení tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na e-mailové adrese **mh@santadria.cz**. Prohlášení o shodě vám rádi zašleme v elektronické podobě.

Je přístroj vodotěsný?

Přístroj **není vodotěsný**. Žádná jeho část není určena k mytí pod proudem tekoucí vody.

Výjimku tvoří vyměnitelné aplikátory vodní dermabraze, ampulka se zásobníkem tekutiny pro hydratační pistoli, samotný zásobník tekutiny a odpadní nádoba. Tyto části je možné oplachovat vodou **pouze po jejich vyjmutí z přístroje**.

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.

ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ APLIKAČNÍCH HLAVIC

Všechny aplikační hlavice přístroje jsou považovány za spotřební materiál. Při běžném používání dochází v průběhu času k jejich přirozenému opotřebení a postupné degradaci, která je dána mechanickým namáháním, působením energie jednotlivých technologií, kontaktem s pletí, kosmetickými přípravky i pravidelnou dezinfekcí.

Životnost aplikačních hlavice je proto výrazně kratší než životnost hlavní provozní jednotky přístroje a jejich funkčnost může skončit ještě před uplynutím záruční lhůty vztahující se na hlavní set.

Je důležité si uvědomit, že nesprávné používání může proces degradace výrazně urychlit. Mezi nejčastější faktory, které negativně ovlivňují životnost hlavice, patří zejména:

- používání nadměrného výkonu nebo překračování doporučené délky aplikace,
- nedostatečně předčištěné pleti u vodní dermabraze,
- nedostatečné množství kontaktního gelu (u technologií, kde je vyžadován),
- aplikace na nevhodně připravenou pleť (znečištěnou, vlhkou nebo s přítomností kosmetických přípravků),
- používání nevhodných nebo agresivních dezinfekčních prostředků,
- mechanické namáhání, pády nebo nesprávné skladování hlavice.

V důsledku výše uvedených faktorů může dojít ke zhoršení funkčnosti aplikační hlavice, snížení účinnosti aplikace, nepříjemným pocitům při aplikaci nebo k jejímu úplnému selhání.

Z tohoto důvodu je nezbytné dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze, používat aplikační hlavice v souladu s jejich určením a pravidelně kontrolovat jejich stav. Včasná výměna opotřebené hlavice je klíčová nejen pro zachování kvality aplikace, ale také pro bezpečný a spolehlivý provoz přístroje. V případě potřeby kontaktujte prodejce, který má k dispozici kompletní příslušenství.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Kosmetický přístroj

BeautyRelax ANTIAGE OXYGEN STUDIO

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-3091**

EAN 8594166123915

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

Produkt je svým provedením, výkonem a užitnými vlastnostmi vhodný pro komerční účely do masážního nebo kosmetického studia. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Teplota působení radiofrekvence 40°C.**

Přístroj nenarušuje integritu pleti. Nabízí neinvazivní aplikaci na pleti. Je určen pro příjemné prohřátí pleti teplem.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.3.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Hrbek', is written over a horizontal dotted line.

Martin Hrbek