

# NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-2857**

## EMSROLLER COMPACT





## OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
DOSAŽITELNÉ ÚČINKY	6
HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE	6
SPECIFIKACE	6
OBSAH BALENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
EMS PULZNÍ TERAPIE	8
VIBRACE	8
OCHABLÉ SVALY V OBLASTI OBLIČEJE	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	13
MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE	14
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	15
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	16
NABÍJENÍ BATERIE	17
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	17
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	18
CERTIFIKACE	18
DOVOZCE	18
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	19

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání neneset distributor odpovědnost.



## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Při vážném kožním onemocnění v místě použití přístroje
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle (platí v místě použití přístroje)
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



## POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem (není součástí balení). Aplikací gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikací hlavici. Určitě s ním během používání přístroje nešetřete. Užití aplikací gelu je nezbytné. EMS pulzy se tak mohou na pleť lépe navázat. Nepoužívejte žádné jiné kosmetické přípravky v kombinaci s přístrojem.



## **DOSAŽITELNÉ ÚČINKY**

- Povadlá a nezdravě vyhlížející pleť
- Zvýšení pružnosti kontur obličeje
- Výrazné nerovnosti pleti způsobené věkem

## **HLAVNÍ PŘEDNOSTI PŘÍSTROJE**

- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Možnost nastavení výkonu pro individuální použití
- Technické provedení válečků do tvaru V umožní snadné ošetření všech záhybů pleti
- Ošetření pleti je časově nenáročné

## **SPECIFIKACE**

- Funkce: EMS pulzní terapie, vibrace.
- Intenzita: 3 úrovně nastavení.
- Určeno pro ošetření obličeje a dekoltu.
- Masážní válečky jsou vhodné pro všechny typy pleti.
- Kompaktní rozměry přístroje.
- Bezdrátový (snadno se používá).
- Masážní válečky se dostanou do všech hůře dostupných záhybů obličeje.
- Ovládání pomocí jednoho tlačítka.
- Napájení: vestavená nabíjecí baterie.
- Rozměry: 11x8x6cm.
- Hmotnost: 170g.

## **OBSAH BALENÍ**

- Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-2857 EMSROLLER COMPACT
- Nabíjecí USB kabel
- Síťový adaptér 220V
- Praktický stojánek
- Návod k obsluze

## **PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE**

Kosmetický přístroj BeautyRelax je účinný nástroj pro posílení obličejových svalů. Kombinuje inovativní funkci EMS elektrických mikropulzů a vibrací. Vaši pleť budou hýčkat masážní válečky. Zvyšte pružnost vaší pleti pomocí 3D face liftingu ještě dnes!




## EMS PULZNÍ TERAPIE

Masážní válečky při kontaktu s pletí přenášejí elektrické pulzy. Výkon a frekvence elektrických pulzů jsou speciálně upraveny tak, aby umožnily ošetření obličeje. Elektrické pulzy pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. Kolagenní a elastická vlákna jsou mechanicky stimulována. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled.



## VIBRACE


Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti. Pomocí vibrační masáže můžete navíc velmi snadno zapracovávat účinné látky z kosmetických přípravků, krémů a sér s vysokou účinností.

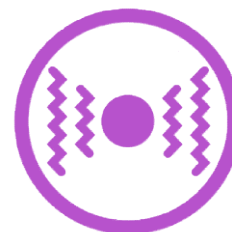



## OCHABLÉ SVALY V OBLASTI OBLIČEJE

Tím, jak naše pleť postupně stárne, nedochází pouze ke snížené produkci kolagenu a snížení pružnosti elastických vláken. Obličej je protkaný velmi hustě jemnou strukturou svalů, které působením času ochabují. Dochází tak postupně po vizuální stránce k celkovému ochabnutí částí obličeje, ztráty kontr a celkového tonusu. Pokud se rozhodnete pečovat o pleť pomocí přístroje na kvalitní úrovni, na obličejové svaly se nesmí zapomenout. Tak, jako chodí kulturisté do posilovny za účelem posílení svalů na jednotlivých částech těla, je třeba posílit i svaly v oblasti obličeje. Proto byl vyvinutý model BeautyRelax Emsroller Compact, který je na posílení svalů specialista. Pouze technologie EMS pulzů je schopna zacílit na svaly, které jsou uloženy ve specifické hloubce.

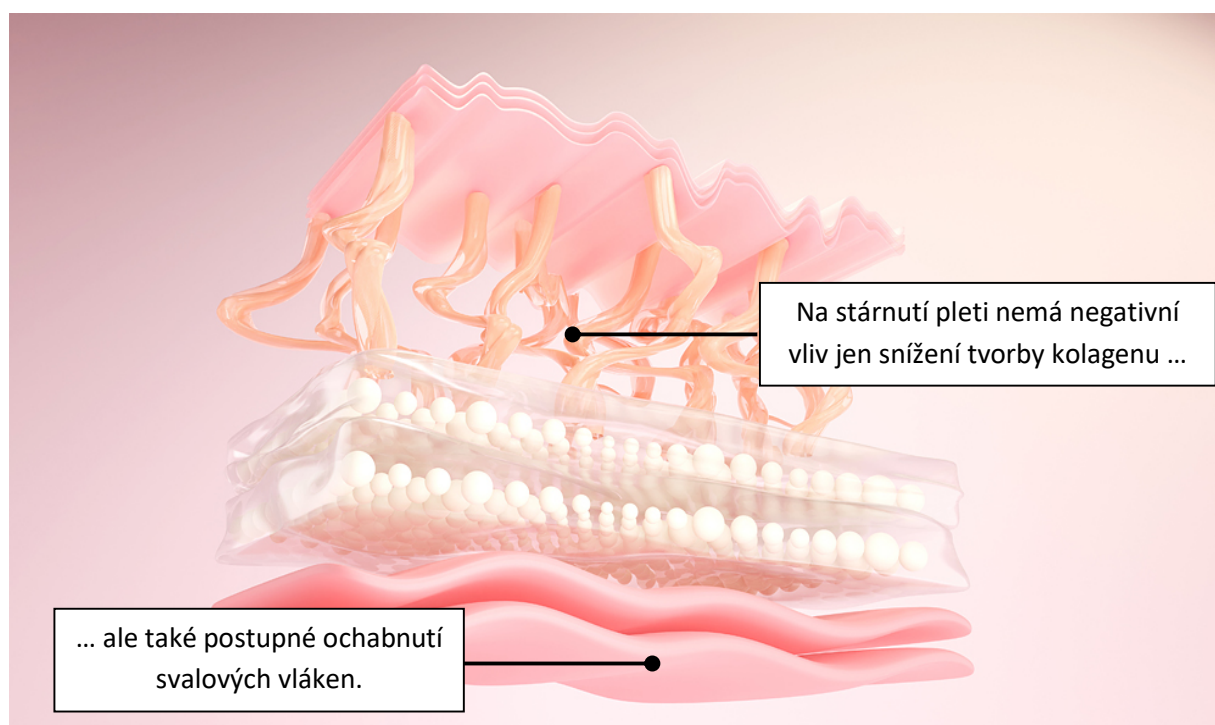

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Masážní válečky
2. Světelný indikátor
3. Tlačítko **ON/OFF**
4. Vstup pro zapojení nabíjecího kabelu
5. Praktický stojánek



## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Než přistoupíte k samotnému ošetření, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Použijte sonogel pro dostatečnou hydrataci pleti. Použijte sonogel libovolné značky.
- 2.** Přístroj zapnete **dlouhým stiskem** tlačítka **ON/OFF**.
- 3.** Přístroj aktivuje funkci vibrací.
- 4.** Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete působení funkce EMS pulzů ve velmi nízké intenzitě působení (na pleti není téměř cítit).
- 5.** Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** generují aplikační hlavice funkci vibrací a velmi nízkou intenzitu působení EMS pulzů (na pleti není téměř cítit).
- 6.** Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** generují aplikační hlavice nízkou úroveň působení intenzity EMS pulzů.
- 7.** Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** generují aplikační hlavice střední úroveň působení intenzity EMS pulzů.
- 8.** Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** generují aplikační hlavice vysokou úroveň působení intenzity EMS pulzů.
- 9.** Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** se celý cyklus nastavení funkcí přístroje přepne do **BODU 3** - působení vibrací.
- 10.** **Dlouhým stiskem** tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

**Tip 1:** Po pleti se pohybujte vždy pomalu.

**Tip 2:** Při ošetření dbejte na to, aby byly v kontaktu s pletí vždy oba válečky. V opačném případě nebude funkce EMS pulzů pracovat správně.

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

Přístroj nabízí možnost nastavení intenzity působení EMS pulzů. Je to z toho důvodu, aby se funkce maximálně přizpůsobila každému uživateli. Každý máme jinou citlivost pleti. Každá pleť reaguje na působení technologie různým způsobem. U technologie EMS pulzů jde o vyvolání pravidelné kontrakce svalových vláken, kterými je protkaný celý náš obličej. Můžete například vnímat, jak EMS pulzy působí jinak např. na čele a jinak na tváři nebo bradě. Věnujte zvýšenou pozornost oblastem na obličej, kde je pokožka velmi jemná. Jde především o oblast kolem očí. Pokud je vám působení EMS pulzů v oblasti kolem očí velmi nepříjemné i při nejnižší hodnotě nastavení výkonu, této partii se vyhněte. Hlavním smysl použití přístroje spočívá v účinné stimulaci pleti pomocí vybraných technologií. Použití přístroje musí být na pleti cítit, ale zároveň vám nesmí činit extrémně nepříjemné pocity bolesti. Proto disponuje přístroj možností nastavení výkonu, kdy si intenzitu jednotlivých technologií můžete plynule dávkovat.

## POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Při použití přístroje mějte vždy obě masážní hlavice v kontaktu s pleť. Pouze tak mohou EMS pulzy efektivně navázat na pleť.
- 2.** Během jednoho ošetření pleti můžete jednotlivé programy - módy postupně střídat. Snažte se zaměřit nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.). Pokud aktivujete samotnou funkci vibrací, můžete velmi efektivně zapracovat vámi oblíbený kosmetický přípravek.
- 3. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pleť mějte vždy zapnutou nízkou úroveň intenzity působení EMS pulzů. Válečkové aplikátory použijte nejprve na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle intenzity můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již ošetření nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň intenzity EMS pulzů nebo ošetření ukončete.
- 4. Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Technologie EMS pulzů tak bude mít lepší možnost navázat se na povrch pleti.
- 5.** Pomocí přístroje můžete snadno zapracovat vaše oblíbené kosmetické přípravky, ať jsou již v jakékoliv konzistenci (vodová, gelová, krémová). Použijte funkci vibrační masáže. Kosmetický přípravek tak velmi účinně zapracujete do pleti. Pokud však chcete maximálně využít funkci EMS pulzů, doporučujeme používat čistý sonogel bez přísad. EMS pulzy se tak na pleť snadno navážou.

## MOŽNOSTI OŠETŘENÍ OBLIČEJE



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

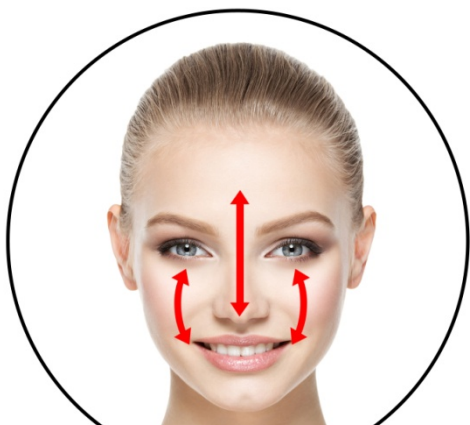

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

## ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nejde zapnout.	Tlačítko <b>ON/OFF</b> není stisknuto dostatečně dlouho.	Tlačítko <b>ON/OFF</b> podržte v délce pár sekund.
	Přístroj je zapojen k nabíjecímu USB kabelu.	Před použitím přístroje odpojte přístroj od napájecího kabelu.
	Baterie je vybitá.	Baterii přístroje před použitím dostatečně nabijte.
Problém s nabíjením.	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.
	Nabíjecí kabel není dostatečně připojen k přístroji.	Připojte znovu koncovku nabíjecího kabelu od přístroje.
	Nabíjecí kabel je poškozen.	Vyměňte nabíjecí kabel za nový.
Působení elektrických mikropulzů je příliš silné.	Úroveň intenzity je příliš silná.	Snižte úroveň intenzity na nejnižší úroveň.
	Sonogel je na pleti v příliš malém množství nebo vůbec.	Aplikujte na pleť větší množství gelu pro zvýšení vodivosti pleti.

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Jak poznám, že EMS pulzy jsou skutečně zapnuté a pracují správně?**

Působení EMS pulzů ucítíte jako mravenčení. Přesně v ten moment jsou stimulovány všechny struktury jemných mimických vrásek. Pulzy stimulují kolagenní a elastická vlákna pokožky. Intenzita vnímání mravenčení závisí na úrovni intenzity, kterou máte nastavenou. Vždy začínejte od nejnižší hodnoty 1 a přidávejte postupně.

### **S přístrojem se pohybuji po pleti a necítím žádné pulzy. Je to v pořádku?**

Působení elektrických mikropulzů je velmi subjektivní a individuální. Závisí na více faktorech. Vnímání elektrických pulzů je slabší, pokud máte na ošetřované partii silnější tukovou vrstvu. Příčina může spočívat v malém množství vodivého sonogelu na pleti. Během používání můžete také změnit úhel úchopu přístroje.

### **Jak zvolit správnou intenzitu funkce EMS?**

Funkce EMS nabízí více úrovní intenzity. Každý uživatel může mít jiné množství podkožního tuku. Tuk funguje jako odpor. Pleť může být navíc na různých místech různě citlivá. Nastavte si takovou intenzitu výkonu, která je vám v průběhu používání přístroje příjemná.

### **Jaké množství kontaktního gelu musím použít?**

Použijte takové množství, aby se válečky přístroje po povrchu pleti snadno pohybovaly. Ze začátku používání přístroje dávkujte sonogel od menšího množství po větší. V praxi si vyzkoušíte, co vám při použití nejvíce vyhovuje.

### **Mohu přístroj používat, pokud mám na pleti make-up?**

Před každým použitím přístroje vždy odstraňte všechny zbytky make-upu. Vytvářel by překážku mezi masážními válečky a pletí. Elektrické mikropulzy by tak nemohly dostatečně proniknout do pleti.

### **Jak často a dlouho přístroj používat?**

V této oblasti není žádné výrazné omezení. Optimální délka ošetření by se měla pohybovat mezi 15 až 20 minutami. Lze každý den během odpočinku nebo sledování televize. Ráno před použitím make-upu nebo večer před spaním. Pokud je při vyšším výkonu pleť více podrážděna, před dalším použitím přístroje si udělejte den a dva pauzu. Délka použití přístroje se odvíjí také od vaší šikovnosti. Vždy je třeba vycházet z toho, abyste přístrojem plně pokryli vybranou plochu pleti.

### **Mohu použít přístroj kromě obličeje i na tělo?**

Díky velikosti válečků lze použít přístroj nejen na obličej, ale také na tělo.

### **Je přístroj náročný na údržbu?**

Po každém ošetření pleti věnujte pozornost zejména aplikačním válečkům. Vždy dbejte na to, aby se na nich nenacházely zbytky vlhkosti. Jednou za čas použijte líh k maximální dezinfekci.

### **Kdy mohu očekávat nějaké výsledky?**

Rychlost docílení příznivých účinků přístroje jsou velice individuální. Záleží na mnoha faktorech: míra podkožního tuku, věk, pohlaví. K dosažení výsledků je nezbytná kontinuita přístrojového ošetření. Díky kompaktní velikosti přístroje ho sebou můžete mít i na cestách. Snažte se, aby se přístroj stal běžnou součástí vašeho každodenního rituálu péče o pleť.

### **Je používání v některých případech zakázáno?**

Jsou situace, kdy používání přístroje není doporučeno. Následujte pasáž v tomto návodu k obsluze s názvem kontraindikace.



## **NABÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Vstup pro nabíjecí kabel je umístěn na spodní straně přístroje. Nabíjecí kabel je součástí balení. Druhý konec zapojíte do USB portu počítače nebo notebooku nebo adaptéru.

### ***Postup nabíjení:***

1. Nízký stav baterie indikuje světelná signalizace.
2. Pro nabíjení použijte napájecí kabel s adaptérem. Jsou součástí základního balení.
3. V průběhu nabíjení má světelná signalizace červenou barvu.
4. Jakmile je baterie nabita, působení světelné signalizace červené barvy ustane.
5. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a kondici baterii. Současně se délka nabíjení odvíjí od toho, zda baterii nabíjíte přes USB port počítače nebo síťový adaptér. Přes síťový adaptér bývá baterie rychleji nabita.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byly aplikátory dostatečně očištěny. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.

## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## **CERTIFIKACE**



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## **DOVOZCE**

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

**Kosmetický přístroj BeautyRelax Emsroller Compact**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2857**

EAN: **8594166121287**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

**je ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017**

**EN 55014-2:2015**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 10.1.2023