

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-1100

EYEPEN



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
KONTRAINDIKACE	6
SPECIFIKACE	6
ÚČINNÉ ZEJMÉNA NA	6
HLAVNÍ VÝHODY	6
POUŽITÉ TECHNOLOGIE	7
OBSAH BALENÍ	7
BIOWAVE EMS PROUD	8
IONIZACE	8
VIBRACE	9
FOTONOVÁ TERAPIE	9
ČERVENÉ SVĚTLO 630NM	10
MODRÉ SVĚTLO 480NM	10
TEPELNÁ TERAPIE	10
POUŽITÍ SONOGELU	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
OŠETŘENÍ OBLIČEJE A DEKOLTU	13
OŠETŘENÍ OBLASTI KOLEM OČÍ	14
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	15
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	17
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	18
NABÍJENÍ BATERIE	19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	19
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	20
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	21
CERTIFIKACE	21
DOVOZCE	21

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Kosmetický přístroj BeautyRelax BR-1100 nabízí hned několik technologií pro efektivní ošetření vaší pleti. Z hlediska technologického řešení se jedná o absolutní novinku v odstraňování mnoha typů estetických problémů v lokalitách kolem očí a dalších částí obličeje.

Kosmetický přístroj nabízí tyto inovativní technologie:

- Biowave EMS proud
- Ionizace (galvanický proud)
- Vibrace
- Červené světlo
- Modré světlo
- Tepelná terapie (vyhřívání)

V oblasti kolem očí je pokožka velmi křehká a jemná. To je jeden z hlavních důvodů výskytu tmavých kruhů pod očima, tvorby vějířkovitých vrásek u vnějších koutků očí, které jsou působením času hlubší a hlubší. Svaly v obličeji se neustále napínají. Pouze vhodným výběrem kosmetického přístroje je možné tyto problémy eliminovat!



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Těhotenství
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



SPECIFIKACE


- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli.
- Používání je naprosto bezpečné a bezbolestné.
- Šetrný k pokožce.
- Bezdrátový (napájen zabudovanou baterií).
- Vhodný pro všechny typy pleti.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Příkon: 0,5W.
- Rozměry: 16,5x3,1cm.
- Hmotnost: 88g.

ÚČINNÉ ZEJMÉNA NA

- Povadlou a nezdravě vyhlížející pleť.
- Zjemnění a vyhlazení jemných vrásek.
- Potlačení tmavých kruhů pod očima.

HLAVNÍ VÝHODY

- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bezpečně, bezbolestně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Časová nenáročnost.
- Minimum kontraindikací.

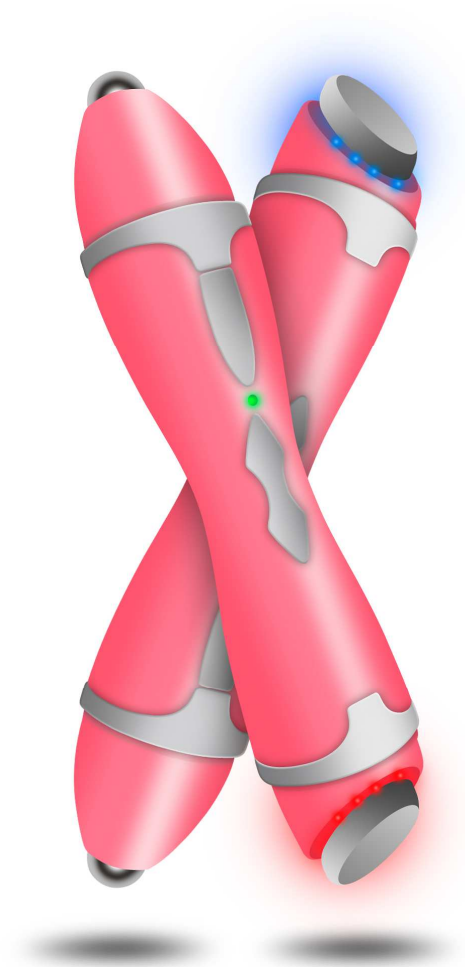

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

- Biowave EMS pulzní proud
- Ionizace (galvanický proud)
- Vibrace
- Červené světlo
- Modré světlo
- Tepelná terapie




OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax EyePen BR-1100.
- Napájecí USB kabel.
- Návod k obsluze.


BIOWAVE EMS PROUD

Aplikační hlavice po přiložení na ošetřovanou oblast pleti uvolňuje energii se specifickou frekvencí a výkonem. Hodnoty uvolněné energie jsou optimalizovány k tomu, aby způsobili tepelný gradient, který významným způsobem ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Takto dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. Vrásky jsou potlačeny. Aktuálně nepoužívanější technologie na neinvazivní ošetření vrásek na světě!

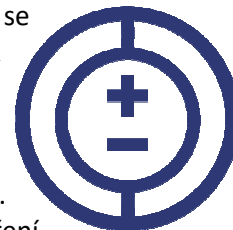


IONIZACE

Aplikační hlavice generuje velké množství záporných iontů, které jsou navázány na kladné ionty v kožních buňkách. Vytvoří se tak optimální cesta, aby se živiny z krémů dostaly co nejhlouběji do pokožky. Při běžné aplikaci krému většinu absorbuje svrchní vrstva pokožky (epidermis). Zbytek bez jakéhokoliv dalšího využití vyschne bez užitku.

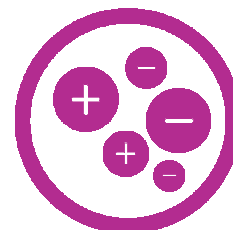


- Ionty pronikají přímo do hloubky a uvolňují póry.
- Násobně zlepšuje vstřebávání přípravků pro péči o pleť.
- Napomáhá v boji proti vzniku bakterií.
- Pleť je schopna lépe absorbovat vlhkost.
- Buňky získají lepší schopnost absorbovat výživové látky z krémů, masek a sér hlouběji do pokožky.

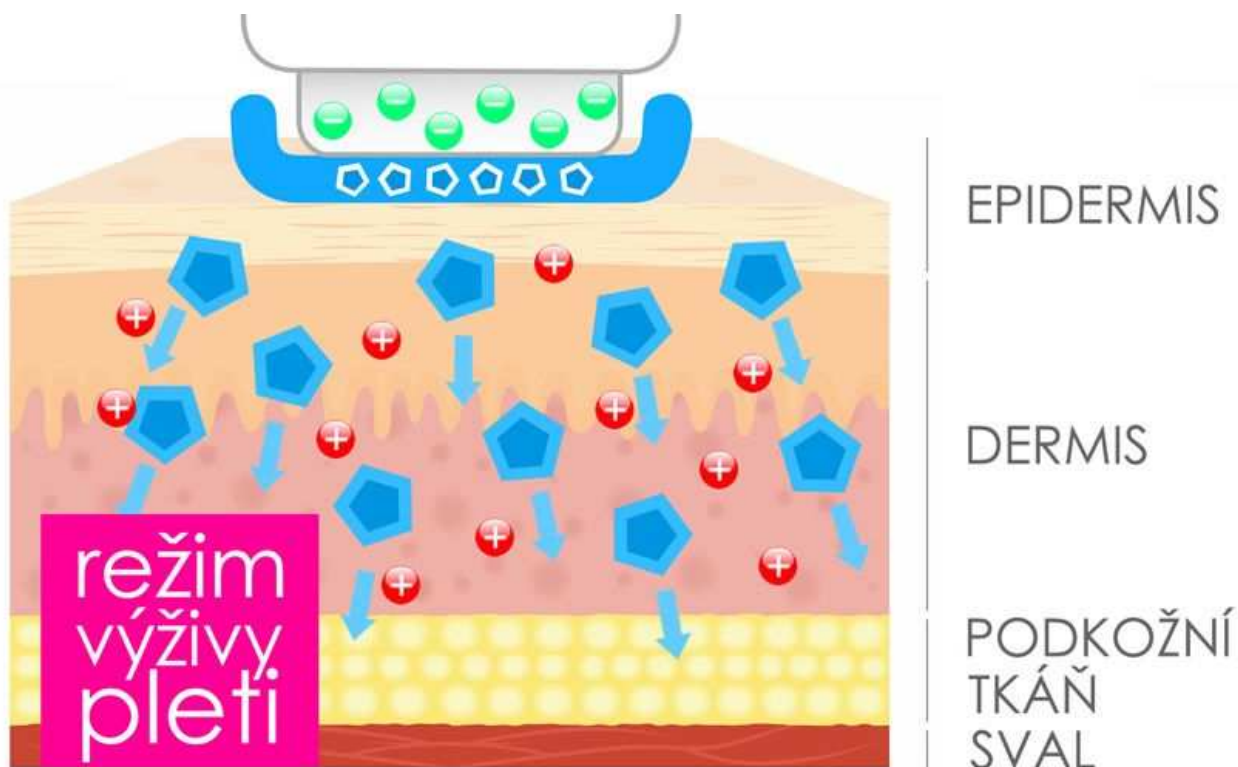

VIBRACE

Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň velmi účinnou techniku ošetření pleti.

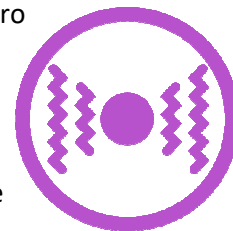

FOTONOVÁ TERAPIE

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

ČERVENÉ SVĚTLO 630NM


- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- příznivý vliv na elastická vlákna
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

MODRÉ SVĚTLO 480NM

- aktivuje porphyryny
- chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie
- antibakteriální a protizánětlivý účinek
- prevence proti tvorbě akné
- bezpečné a efektivní ošetření

TEPELNÁ TERAPIE

Hlavním účinkem působení tepla na pleť je otevření kožních pórů. V kosmetickém studiu se po odlíčení pleti používá právě tento krok. Ať již následuje jakákoliv další procedura. Roztažení kožních pórů je elementární základ pro hloubkové vyčištění pleti. Dále jsou póry schopny absorbovat účinné látky krémů hlouběji do pokožky. Kosmetičky používají nejčastěji napařený ručník. Vy jako skutečný profesionál kosmetický přístroj BeautyRelax EyePen!

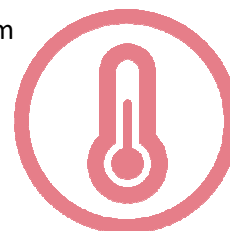


POUŽITÍ SONOGELU

Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). Aplikáční gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikáční hlavici. Užití aplikáčního gelu je nezbytné. Biowave EMS pulzní proud bude lépe pronikat lépe do pleti. Použít můžete jakýkoliv kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, ...).





POPIS PŘÍSTROJE

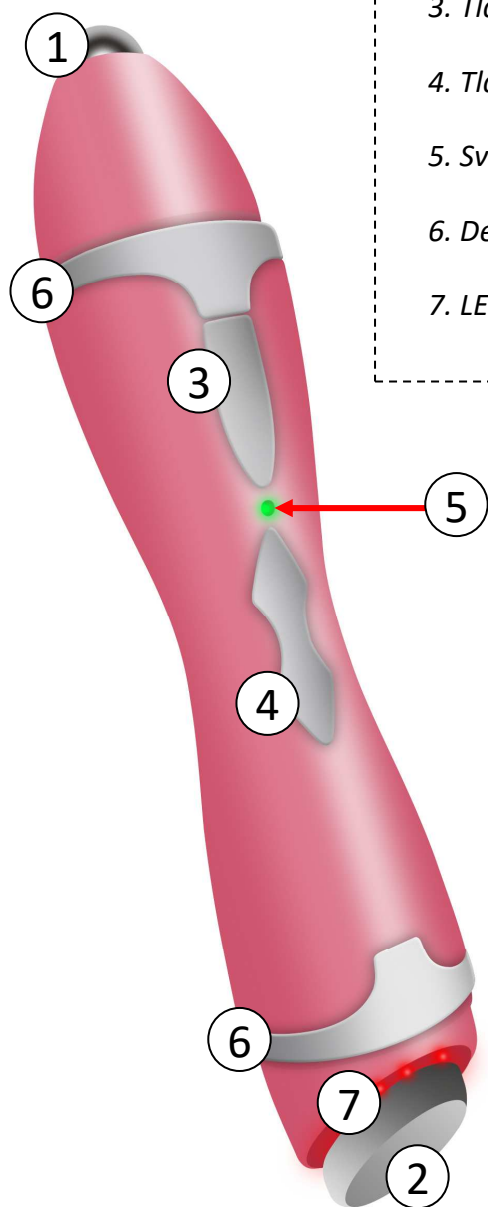

1. Kuličkový aplikátor
2. Plochý aplikátor
3. Tlačítko pro ovládání kuličkového aplikátoru
4. Tlačítko pro ovládání plochého aplikátoru
5. Světelný indikátor provozu/nabíjení
6. Dekorační pásek
7. LED diody fotonové terapie (červená, modrá)

POPIS PŘÍSTROJE

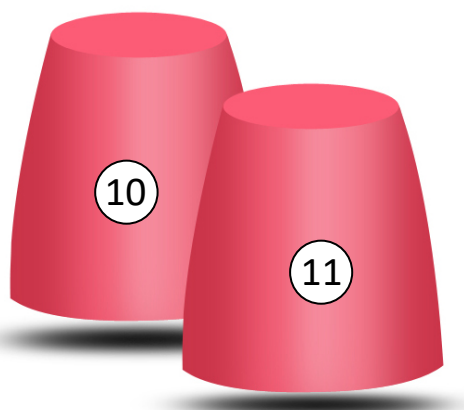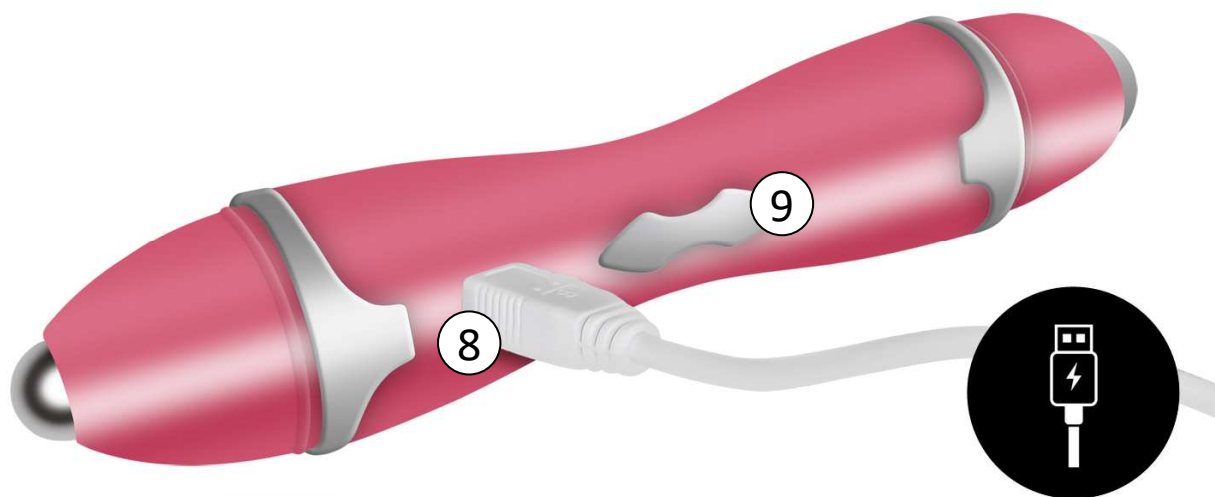

8. Vstup pro napájecí kabel

9. Vodící pásek

10. Ochranný kryt aplikátoru

11. Ochranný kryt aplikátoru

OŠETŘENÍ OBLIČEJE A DEKOLTU

1. Pro ošetření obličeje je určen plochý aplikátor **(2)**. Aplikátor generuje následující technologie: galvanický proud, EMS pulzy, vibrace, fotonové světlo (červené nebo modré) a vyhřívání.
2. Aplikujte na pleť tenkou vrstvu kosmetického krému, séra nebo sonogelu.
3. Stiskněte tlačítko **(4)** po dobu 2 sekund (tlačítko je kolíbkového typu - můžete ho stisknout na jednom nebo druhém konci). Jako první je společně s dalšími technologiemi aktivní modré světlo fotonové terapie.
4. Dalším stiskem tlačítka **(4)** přepnete modré světlo na červené. Zvýší se rychlost vibrační masáže. Činnost přístroje doprovází zelená světelná signalizace.
5. Dalším stiskem tlačítka **(4)** přístroj vypnete. Světelná signalizace zhasne. Pokud chcete znovu ošetřit pleť plochým aplikátorem, přístroj znovu zapněte – viz. zpět bod 3.
6. Jakmile je přístroj zapnutý, můžete zahájit ošetření pleti pomocí plochého aplikátoru **(2)**.
7. Pomocí plochého aplikátoru můžete ošetřit oblast obličeje dle obrázků uvedených v pasáži: **METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU**. Při používání se snažte mít některý z vašich prstů v kontaktu s vodícím páskem **(9)**.
8. Doporučený čas pro tvář nebo dekolt: 2 až 3 minuty.
9. Doporučený čas pro čelo: 4 až 6 minut.
10. Přístroj má automatický časovač v délce 10 minut. Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **(4)**.

Poznámka č1:


Výchozí barva fotonové terapie je modrá. Krátkým stiskem tlačítka **(4)** změňte barvu na červenou.

Poznámka č2:


Pro aktivaci funkce galvanického proudu a EMS pulzů je nezbytné, aby byl při úchopu přístroje jeden z vašich prstů v kontaktu s bočním vodícím páskem **(9)**. V opačném případě nebudou tyto dvě technologie fungovat.



aplikujte na pleť tenkou vrstvu
kosmetického krému, séra
nebo sonogelu

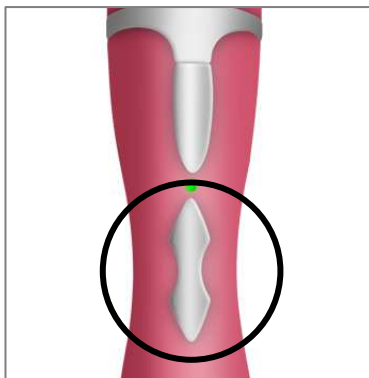

stiskněte po dobu 2 sekund
tlačítko **(4)** pro zahájení
ošetření obličeje

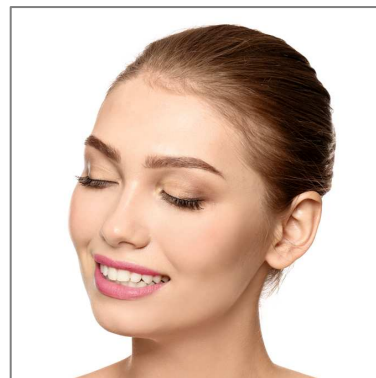

pro ošetření obličeje použijte
aplikační hlavici **(2)**
v rozsahu 2 až 6 minut

OŠETŘENÍ OBLASTI KOLEM OČÍ


1. Pro ošetření oblasti kolem očí je určen kuličkový aplikátor **(1)**. Aplikátor generuje následující technologie: galvanický proud, EMS pulzy, vibrace a vyhřívání.
2. Aplikujte na pleť tenkou vrstvu kosmetického krému, očního krému, séra nebo sonogelu.
3. Stiskněte tlačítko **(3)** po dobu 2 sekund. Přístroj se zapne.
4. Dalším stiskem tlačítka **(3)** zvýšíte rychlost vibrační masáže. Činnost přístroje doprovází zelená světelná signalizace.
5. Dalším stiskem tlačítka **(4)** přístroj vypnete. Světelná signalizace zhasne. Pokud chcete znovu ošetřit pleť kuličkovým aplikátorem, přístroj znovu zapněte – viz. zpět bod 3.
6. Jakmile je přístroj zapnutý, můžete zahájit ošetření pleti pomocí kuličkového aplikátoru **(1)**.
7. Pomocí kuličkového aplikátoru můžete ošetřit oblast kolem očí dle následujícího obrázku:




8. Při používání se snažte mít některý z vašich prstů v kontaktu s vodícím páskem.
9. Doporučený čas pro ošetření oblasti kolem očí je 2 až 3 minuty pro každou stranu.
10. Přístroj má automatický časovač v délce 10 minut. Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **(3)**.



aplikujte na pleť tenkou vrstvu
očního krému nebo séra

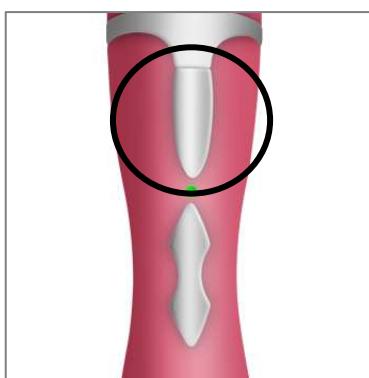

stiskněte po dobu 2 sekund
tlačítko **(4)** na místě dle šipky
pro zahájení ošetření obličeje

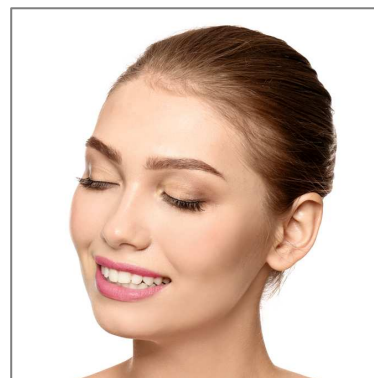


pro ošetření oblasti kolem očí
použijte aplikační hlavici **(1)**
po dobu 2 až 3 minut

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE


1. BeautyRelax BR-1100 EyePen je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
2. Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
3. BeautyRelax BR-1100 EyePen je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
4. Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici, kterou jste pro ošetření pleti použili. Pro desinfekci je ideální čirý líh. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
5. Věnujte zvýšenou pozornost dezinfekci aplikátoru zejména v případech, kdy přístroj používá více lidí. Významně tak předejdete vzájemnému přenosu bakterií.
6. V režimu ionizace a EMS pulzů můžete cítit na pleti jemné mravenčení a to i na prstu, který je v kontaktu s vodícím páskem. Jedná se o průvodní jev uzavření vodivého okruhu mezi vámi a přístrojem. Zvýšenou pozornost dbejte zejména při ošetření oblastí obličeje, kde je velmi tenká pokožka. Obecně platí, čím je silnější vrstva podkožního tuku, tím je mravenčení méně rozpoznatelné a naopak.
7. Funkce ionizace a EMS proud pracují pouze v případě, kdy při držení přístroje jsou vaše prsty v kontaktu s vodícím páskem na boční straně přístroje (viz. popis produktu) a zároveň je celá plocha aplikátoru (plochý nebo kuličkový) v kontaktu s pletí. Při kontaktu prstů s vodícím páskem se uzavře okruh mezi vámi a přístrojem. Přístroj kontakt rozpozná a následně spustí uvedené technologie. Tímto způsobem tak můžete ošetřit pouze sami sebe. Pokud se pokusíte ošetřit pleť druhé osoby, tyto technologie nebudou fungovat.



8. Při použití přístroje v oblasti kolem očí dbejte zvýšenou pozornost. Pod očima je pokožka velmi tenká a citlivá. Nejprve zvolte režim ošetření s vibracemi na nejnižší úrovni. Aplikaci hlavic se pohybujte pomalu. Na pleť příliš netlačte.
9. V průběhu ošetření můžete libovolně přepínat mezi červeným a modrým světlem.
10. Při použití LED světla se nedívejte přímým pohledem do zdroje světla. Použití přístroje nevyžaduje žádné ochranné brýle. Pouze se snažte vyhnout dlouhému přímému pohledu na světlo nebo svícení do očí. Z dlouhodobého hlediska tím chráníte svůj zrak. Pokud to zvládnete, mějte zavřené oči.
11. Při používání přístroje se vždy snažte, aby se aplikační hlavice (plochá nebo kuličková) nacházela v plném kontaktu s pleť. Ošetření pleti tak bude maximálně efektivní.
12. Během ošetření pleti se snažte nejvíce zaměřit na problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.)
13. **Upozornění:** Použití přístroje kombinujte vždy s kosmetickým krémem na vodní bázi. Použít můžete také sérum nebo sonogel. Přístroj pracuje s technologiemi, které při použití vyžadují vyšší míru hydratace pleti.
14. **Tip:** Ošetřená partie by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavičky po pokožce. EMS proud tak bude mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.
15. **Doporučení:** Ošetřenou pleť nevystavujte hned po ošetření příliš horké vodě. Pokožka prochází po ošetření stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout.

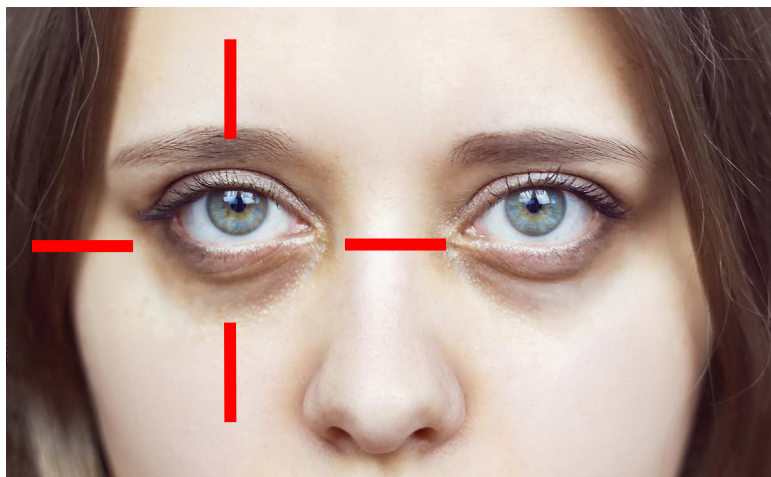

DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST

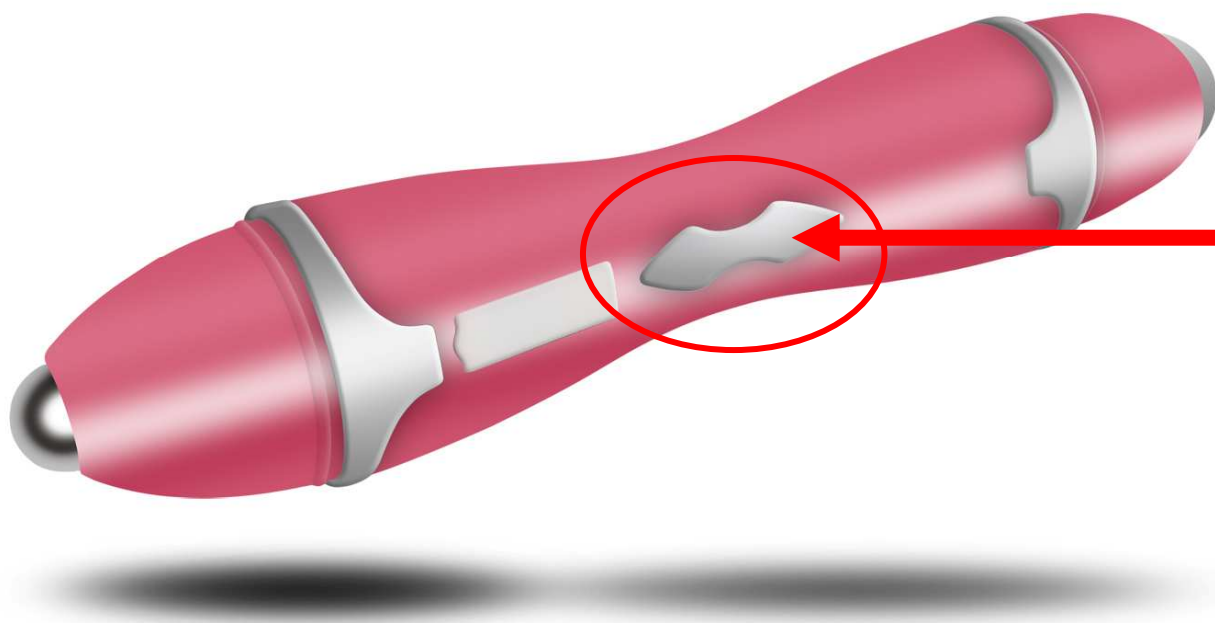

Pro aktivaci funkce galvanického proudu a EMS pulzů je nezbytné, aby byl při úchopu přístroje jeden z vašich prstů v kontaktu s bočním vodícím páskem. V opačném případě nebudou tyto dvě technologie fungovat. Mravenčení můžete také cítit přímo na prstu, který je v kontaktu s vodícím páskem. Jedná se o průvodní jev uzavřeného okruhu mezi vámi a přístrojem.

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

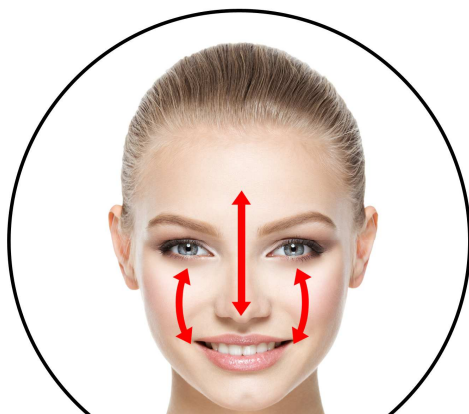


T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjí se pomocí kabelu, který je součástí balení. Vždy se ujistěte, že kabel není poškozený. K nabíjení používejte výhradně kabel, který je součástí balení. Přístroj můžete nabíjet pomocí USB portu počítače nebo notebooku.

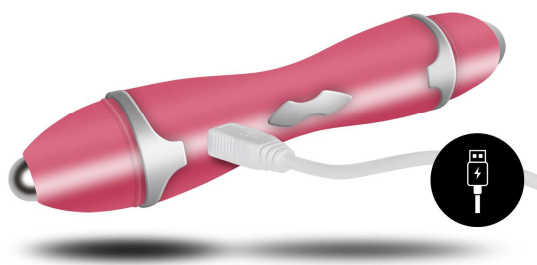

Proces nabíjení zahajte v případě, pokud je intenzita vysokofrekvenční vibrační masáže slabší a slabší. Nabíjení signalizuje červená kontrolka. Jakmile světelná kontrola zhasne, proces nabíjení je dokončen. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie. Přístroj má systém ochrany přebíjení baterie. V praxi to znamená, že se proces nabíjení automaticky zastaví v momentě, kdy je baterie plně nabitá.

Upozornění: Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Před čištěním je vhodné aplikační hlavici z přístroje vyjmout. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktní plochy hlavice.



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak poznám, že funkce EMS je zapnutá a pracuje správně?

Pokud se budete s aplikátorem pohybovat po pleti skutečně pomalu, přítomnost funkce EMS ucítíte jako jemné mravenčení. Přesně v ten moment jsou stimulovány všechny struktury jemných mimických vrásek. Elektrické mikropulzy působí kolagenní a elastická vlákna pokožky. Výrazně zlepšují z dlouhodobého hlediska pružnost pleti.



S přístrojem se pohybuji po pleti a necítím žádné pulzy. Je to v pořádku?

Působení elektrických mikropulzů je velmi subjektivní a individuální. Závisí na více faktorech. Vnímání elektrických pulzů je slabší, pokud máte na ošetřované partii silnější tukovou vrstvu. Příčina může spočívat v malém množství kosmetického krému na pleti. Během používání můžete také změnit úhel úchopu přístroje.

Jaký je skutečný rozdíl mezi funkcí VIBRACE a EMS?

Každá funkce má svůj vlastní účel. Vibrace mají zejména podpořit lymfatický systém obličeje. Funkce EMS stimulovat kolagenní vlákna.

Mohu přístroj používat, pokud mám na pleti make-up?

Před každým použitím přístroje vždy odstraňte všechny zbytky make-upu. Vytvářel by překážku mezi aplikátorem a pletí. Proudění EMS pulzů by tak nemohlo hladce proniknout do pleti.

Jak často a dlouho přístroj používat?

Doporučený čas pro ošetření oblasti kolem očí je 2 až 3 minuty pro každou stranu. Doporučený čas pro tvář nebo dekolt: 2 až 3 minuty. Doporučený čas pro čelo: 4 až 6 minut. Pokud je vaše pleť po ošetření více podrážděna, před dalším použitím přístroje si udělejte den a dva pauzu.

Je přístroj náročný na údržbu?

Po každém ošetření pleti věnujte pozornost zejména aplikační hlavici. Vždy dbejte na to, aby se na nich nenacházely zbytky vlhkosti. Jednou za čas použijte líh k maximální dezinfekci.

Kdy mohu očekávat nějaké výsledky?

Rychlost docílení příznivých účinků přístroje jsou velice individuální. Záleží na mnoha faktorech: míra podkožního tuku, věk, pohlaví. K dosažení výsledků je nezbytná kontinuita přístrojového ošetření. Díky kompaktní velikosti přístroje ho sebou můžete mít i na cestách. Snažte se, aby se přístroj stal běžnou součástí vašeho každodenního rituálu péče o pleť.

Je používání v některých případech zakázáno?

Jsou situace, kdy používání přístroje není doporučeno. Následujte pasáž v tomto návodu k obsluze s názvem kontraindikace.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz