

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj s fotonovou terapií
Beautyrelax BR-2924

LIGHTPANEL

PROFESSIONAL EXCLUSIVE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OCHRANA ZRAKU	5
KONTRAINDIKACE	6
OBSAH BALENÍ	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	7
HLAVNÍ BENEFITY	7
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	7
KRÁSNÁ A ZDRAVÁ PLEŤ SE BEZ DOSTATEČNÉ HYDRATACE NEOBEJDE	9
PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTEGROVANÉHO ATOMIZÉRU	9
PŮSOBENÍ TEPLA	10
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	11
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PANELU	12
POPIS PRODUKTU	14
INSTALACE PRODUKTU	16
VÝSLEDNÁ SESTAVA PRODUKTU	18
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	119
NAPLNĚNÍ A INSTALACE ZÁSOBNÍKU	20
POUŽITÍ FUNKCE EMS	21
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	22
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	23
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	23
CERTIFIKACE	23
DOVOZCE	23
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	24

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OCHRANA ZRAKU

Přístroj používá velmi výkonné LED diody, které generují intenzivní fotonové světlo. Výkon je nastaven tak, aby přinesl blahodárné účinky na pleť ve specifické vlnové délce. Při použití přístroje se vždy vyvarujte přímého pohledu zraku do zdroje světla. Před použitím přístroje si vždy nasadte ochranné brýle, které jsou součástí balení. Pokud si budete s přístrojem svítit do očí, může to trvale poškodit váš zrak.



DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA
DBEJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Psychické onemocnění
- Stavy úzkosti
- Deprese
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj s fotonovou terapií LIGHTPANEL PROFESSIONAL EXCLUSIVE
- 1x Nabíjecí adaptér
- 1x Ochranné brýle
- 2x Zásobník na tekutinu s podstavcem
- 1x Sada filtračních tampónků
- 1x Sonogel
- 1x Sada kabelů pro EMS funkci na obličeji
- 1x Sada kabelů pro EMS funkci na těle (včetně elektrod)
- 1x Návod k obsluze

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Výkon: 35W
- Rozměry: 55x35x27cm
- Hmotnost: 3kg

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Terapie fotonovým světlem je v oblasti kosmetického ošetření velmi populární. Ošetření fotonovým světlem nebolí a má velmi dobré výsledky. Kosmetický přístroj s fotonovou terapií BeautyRelax poskytuje fotonovou terapii s pokrytím celého obličeje a krku. Přístroj slibuje vysoce komfortní použití ve srovnání s ručními přístroji. Přístroj nemusíte držet v ruce a zároveň světlo pokrývá rovnoměrně celou plochu obličeje, krku a dekoltu. Stálost působení fotonovým světlem je pro úspěšné dosažení výsledků klíčové. 8 barev fotonové terapie. Přístroj má integrovaný atomizér pro hydrataci pleti. Funkce EMS pro posílení svalů.

HLAVNÍ BENEFITY

- Rovnoměrné pokrytí obličeje světelnými pásky
- Vysoká efektivita použití díky 222 intenzivních LED světel
- V průběhu použití si můžete vaši pleť nahřát a hydratovat

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

1. Červené světlo (640nm)

Stimuluje podporu tvorby kolagenu. Kolagen je základní bílkovina, která slouží k obnově poškozených a starých tkání. Zlepšení kvality pleti a zmenšení pórů.

2. Modré světlo (415nm)

Bakterie v akné obsahují porfyriny. Díky vysoké afinitě s vlnovou délkou je modré světlo schopno porfyriny ničit. Kromě toho má modré světlo zklidňující účinek, který je velmi účinný při přecitlivělosti pleti.

3. Fialové světlo (690nm)

Kombinuje červené a modré světlo, které má dvě účinné fototerapie. Zejména má dobrý účinek na potlačení příznaků akné.

4. Žluté světlo (590nm)

Má speciální vlnovou délku 590nm. Podporuje absorbování kosmetických přípravků. Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu. Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti. Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu. Napomáhá zpomalovat stárnutí kůže.

5. Zelené světlo (530nm)

Zelené světlo napomáhá vyrovnat barevný pigment a redukovat jemné vrásky. Urychluje proces hojení ran. Zesvětluje pleť.

6. Azurové světlo (490nm)

Zvyšuje buněčnou energii a má příznivé účinky pro celkový metabolismus kožní tkáně.

7. UV světlo

Dokáže proniknout hluboko do pokožky. Urychluje metabolismus tkání. Rozkládá barevné skvrny. Zlepšuje vzhled jemných vrásek a stárnutí pleti.

8. Oranžové světlo

Kombinace žlutého a červeného světla.

KRÁSNÁ A ZDRAVÁ PLEŤ SE BEZ DOSTATEČNÉ HYDRATACE NEOBEJDE

Množství tekutin má význam nejen pro celé tělo, ale zejména pro pleť, na kterou se často zapomíná. Krásná a zdravě vyhlížející pleť obsahuje až 80% vody. Bez vody se jednoduše náš organismus neobejde. Zejména v letních měsících dochází k rychlejšímu vysušení pleti. Nedostatkem vláhy je pleť suchá a působí opotřebeným dojmem. Pleť rychle ztrácí pružnost a je více náchylná ke vzniku vrásek. Celkově rychleji stárne. Snížený množství vody v těle způsobuje dehydrataci ve všech vrstvách pokožky. Přestože konzumujeme větší množství vody, nemusí to pro naši pleť znamenat dostatečnou hydrataci. Proto je důležité věnovat hydrataci pleti zvýšenou pozornost. Kosmetické krémy a séra však často vyschnou na povrchu pokožky bez dalšího užitku. Pouze pravidelná a hlubková hydratace pleti může zpomalit projevy stárnutí a zajistit zdravý vzhled!

PRINCIP FUNGOVÁNÍ INTEGROVANÉHO ATOMIZÉRU

Kosmetický přístroj BeautyRelax má integrovaný atomizér nové generace. Tekutina putuje ze zásobníku přímo do atomizéru, který štěpí molekuly roztoku na velikost nanočástic pomocí vysokofrekvenční oscilace. Atomizér promění hydratační přípravek na ionizovanou nano mlhu. Nově vzniklé částičky kapaliny mají menší velikost než samotný kožní pór. Hydratační přípravek tak snadno pronikne přes horní vrstvu pleti. Dochází k okamžité hydrataci pleti s maximálním účinkem! V průběhu působení fotonové terapie si tak můžete užít velmi účinnou hydratační kúru pleti.




PŮSOBENÍ TEPLA

Hlavním účinkem působení tepla na pleť je otevření kožních pórů. V kosmetickém studiu se po odlíčení pleti používá právě tento krok. Ať již následuje jakákoliv další procedura. Roztažení kožních pórů je elementární základ pro hloubkové vyčištění pleti. Dále jsou póry schopny absorbovat účinné látky krémů na akné hlouběji do pokožky. Pro zahřátí pleti se používá napařený ručník. To je však velké retro. Vy jako skutečný profesionál využijete efektivní tepelnou terapii s možností nastavení teplotního rozsahu!



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **AUTO**
3. Tlačítko **ČERVENÉ** světlo
4. Tlačítko **MODRÉ** světlo
5. Tlačítko **ŽLUTÉ** světlo
6. Tlačítko **ZELENÉ** světlo
7. Tlačítko **FIALOVÉ** světlo
8. Tlačítko **ORANŽOVÉ** světlo
9. Tlačítko funkce **TEPLA**
10. Tlačítko funkce **CHLADU (NANO MLHA)**
11. Tlačítko funkce **EMS**
12. Tlačítko **INTENZITY** světla
13. Tlačítko **ZMĚNA** hodnoty
14. Tlačítko **ZMĚNA** hodnoty
15. Tlačítko **UV** světlo
16. Displej

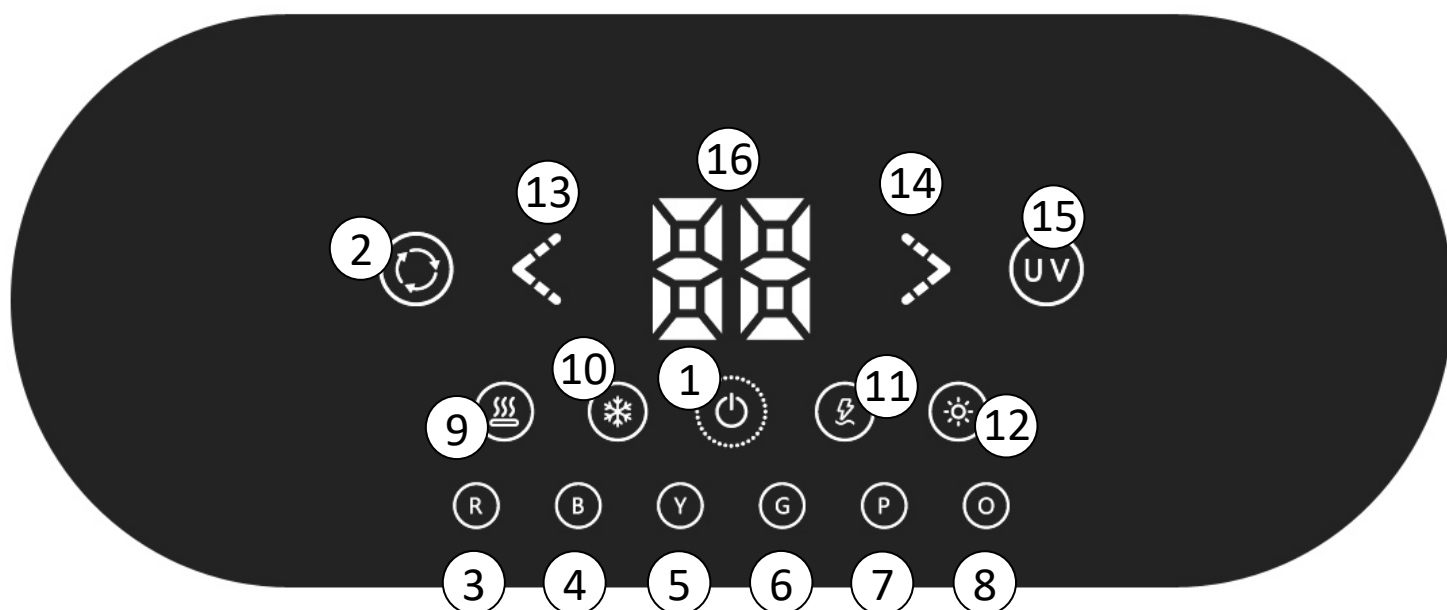

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ PANELU

1. Tlačítko **ON/OFF**

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.

2. Tlačítko **AUTO**

Tlačítko pro zapnutí automatického programu. V tomto programu se barvy světla mění automaticky. V režimu AUTO se střídají barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.

3. Tlačítko **ČERVENÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí červeného světla.

4. Tlačítko **MODRÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí modrého světla.

5. Tlačítko **ŽLUTÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí žlutého světla.

6. Tlačítko **ZELENÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí zeleného světla.

7. Tlačítko **FIALOVÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí fialového světla.

8. Tlačítko **ORANŽOVÉ** světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí oranžového světla.

9. Tlačítko funkce **TEPLA**

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí funkce tepla. Teplotu si můžete nastavit v rozsahu od 45°C do 75°C. Úroveň působení tepla si můžete nastavit opakovaným stiskem tlačítka. **Vždy doporučujeme mít aktivní funkci TEPLA nebo CHLADU. Ne současně.**

10. Tlačítko funkce **CHLADU (NANO MLHA)**

Působení atomizované mlhy. Před aktivací funkce je nezbytné naplnit průhledný zásobník. K dispozici je celkem 5 úrovní intenzity působení nano mlhy. Intenzitu si můžete měnit opakovaným stiskem tlačítka. Úroveň intenzity je zobrazeno na displeji. **Vždy doporučujeme mít aktivní funkci TEPLA nebo CHLADU. Ne současně.**

11. Tlačítko funkce **EMS**

Působení funkce EMS pro oblast obličeje. Pro využití této funkce je třeba mít připojený kabel. Ke kabelům obličejovou masku (není součástí základního balení). Opakovaným stiskem tlačítka si můžete upravit intenzitu působení. Aktuálně nastavená intenzita je vždy zobrazena na displeji.

12. Tlačítko INTENZITY světla

Tlačítko pro nastavení intenzity působení světla. K dispozici je celkem 5 úrovní. Aktuálně nastavená intenzita je vždy zobrazena na displeji.

13. Tlačítko ZMĚNA hodnoty

Tlačítko pro změnu času.

14. Tlačítko ZMĚNA hodnoty

Tlačítko pro změnu času.

15. Tlačítko UV světlo

Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí UV světla.

16. Displej

Zobrazení zbývajících času nebo nastavené intenzity dané funkce.


POPIS PRODUKTU

- 1.** Ovládací panel
- 2.** Tělo produktu
- 3.** Světla fotonové terapie
- 4.** Výstup působení atomizované mlhy




POPIS PRODUKTU

- 5.** LED světla fotonové terapie
- 6.** Výstup pro působení tepla
- 7.** Výstup pro atomizovanou mlhu
- 8.** Zdířka pro zapojení kabelu s funkcí EMS
- 9.** Zdířka pro zapojení napájecího kabelu

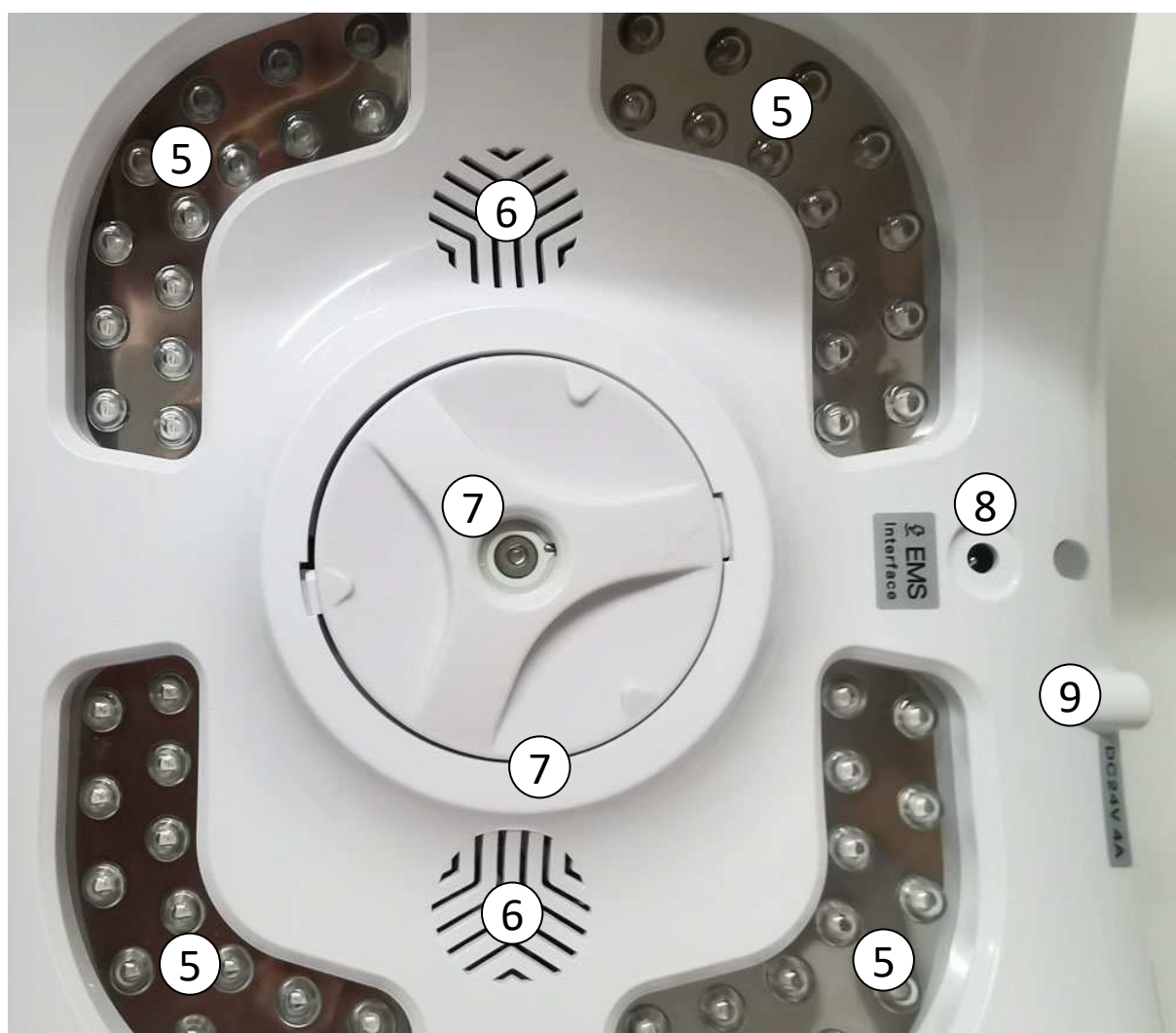

INSTALACE PRODUKTU

- Jednotlivé části přístroje propojte.
- K instalaci není třeba nic rozdělávat nebo šroubovat.
- Oba boky není možné připojit k hlavnímu středovému panelu nesprávně. Není přesně stanoveno, kterou boční stranu připojit jako první. Boční strany je možné vzájemně vyměnit.
- Vždy dbejte na to, aby byla boční část přístroje připojena nadoraz.

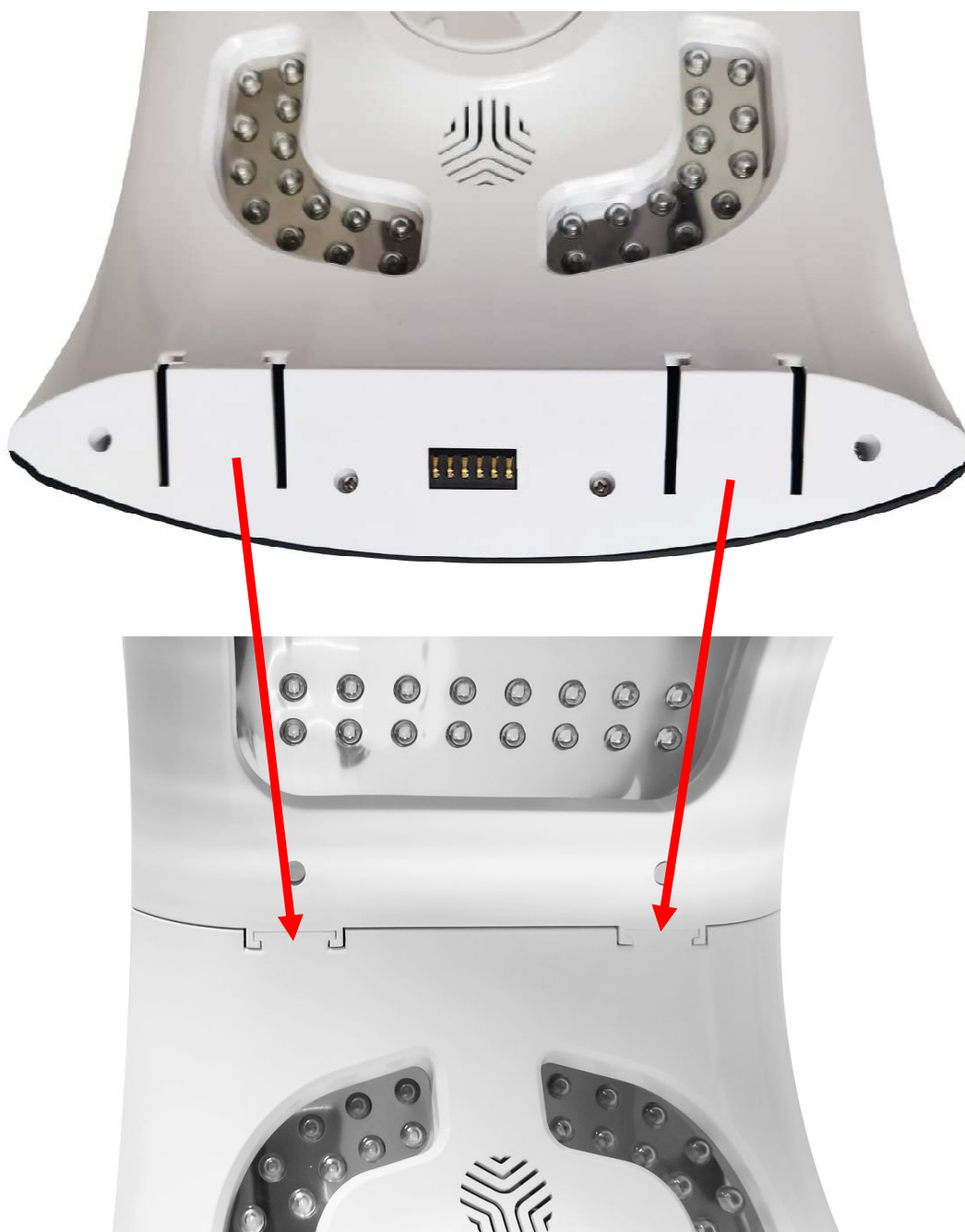

1



2



VÝSLEDNÁ SESTAVA PRODUKTU



POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost ošetření fotonové terapie umožňuje ošetření všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

NAPLNĚNÍ A INSTALACE ZÁSObNÍKU

- 1.** Pro naplnění zásobníku používejte výhradně tekutinu s nízkým bodem hustoty. V opačném případě nebude funkce atomizované mlhy fungovat správně. Pokud přidáním další látky do tekutiny výrazně zvýšíte hustotu nebo se v tekutině budou vyskytovat velké mechanické částice, přístroj nebude pracovat správně a může dojít k jeho poškození.





- 2.** Zásobník odšroubujte od bílého kruhového podstavce. Jakmile budete mít zásobník naplněný, vždy dbejte na to, aby byl v podstavci umístěn filtrační tampónek. V opačném případě by mohlo dojít k fatálnímu poškození přístroje. Filtrační tampónek je opakovatelně použitelný.



Pokud přístroj právě nepoužíváte nebo nepoužíváte funkci působení mlhy, můžete nechat filtr proschnout. Součástí balení jsou dva zásobníky. Můžete tak po celém dni používání – např. v komerčním provozu ponechat tampónek na vyschnutí a případně jej nahradit novým.


- 3.** Zásobník instalujte do přístroje. Postupujte podle šipek. Otočením ve směru červených šipek - utažení zásobníku do přístroje. Otočením ve směru zelených šipek - uvolnění zásobníku. Dva kontaktní piny na bílém podstavci musí směřovat na kontaktní plochu umístěnou na přístroji.

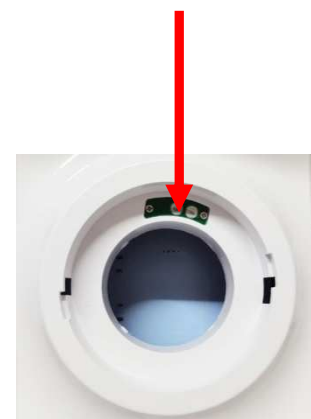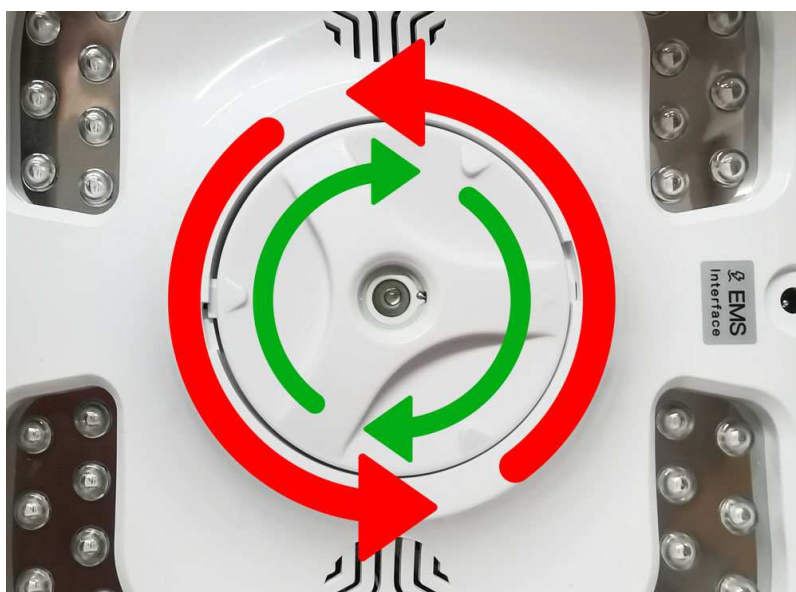

UTAŽENÍ - UVOLNĚNÍ

POUŽITÍ FUNKCE EMS

Součástí balení jsou dvě sady kabelů, které umožňují využít funkci EMS pulzů. Máte tedy dvě možnosti použití: EMS pulzy na obličeji nebo EMS pulzy na část těla v blízkosti panelu (např. krk, ramena, horní část zad). V případě použití EMS na obličeji stačí použít běžnou obličejovou masku, kterou koupíte v obchodě (není součástí základního balení přístroje). Masku zapojíte ke kabelům pomocí „krokodýlích zubů“. V případě použití EMS na vybranou část těla doporučujeme nanést na kontaktní elektrody vrstvu sonogelu. Zvýší se tak vodivost pleti a EMS pulzy se tak mohou na pokožku lépe navázat.

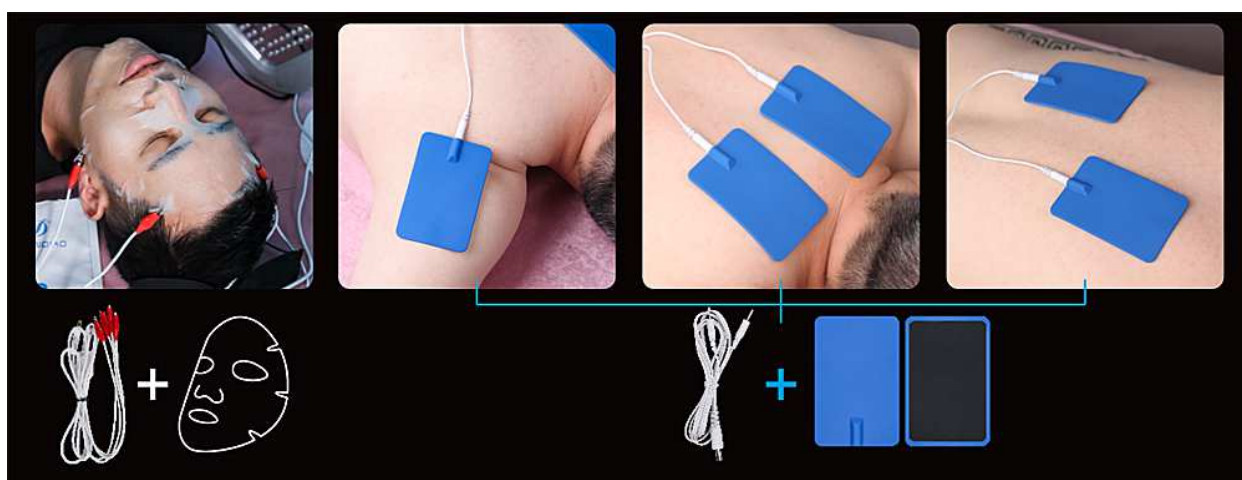

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před požitím doporučujeme pleť odlíčit od makeupu. Pleť důkladně omyjte a osušte. V případě potřeby můžete nanést váš oblíbený kosmetický krém nebo sérum.
- Přístroj používejte ideálně v blízkosti elektrické zásuvky. Pokud to situace vyžaduje, použijte klasický prodlužovací kabel (není součástí balení). Kabel napájecího adaptéru by neměl být příliš napnutý. Předejdete tak vytržení konektoru napájecího adaptéru.
- Přístroj nepoužívejte v dosahu zdroje tepla (např. topení). Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
- Přístroj umístěte na rovnou plochu. Pro větší komfort používání přístroje si dejte pod hlavu polštářek.
- Výměnu/naplnění zásobníku provádějte vždy, když je přístroj vypnutý a odpojený od napájecího kabelu. Do zásobníku s vodou nalijte vodu (kojeneckou nebo destilovanou). Z dlouhodobého hlediska tím přispějete k dlouhé životnosti přístroje. Kohoutková voda může obsahovat částice vodního kamene, což není po technické stránce pro přístroj přípustné. Do zásobníku nepřidávejte žádné další látky, barviva či aroma, která by změnila hustotu vody. Mohlo by dojít k vážnému a trvalému poškození přístroje. Zásobník do podstavce pečlivě dotáhněte. Vždy se ujistěte, že je instalován filtr.
- Pro spuštění přístroje stiskněte **ON/OFF**.
- Můžete si snadno přepínat mezi jednotlivými barvami fotonového světla. Použijte k tomu tlačítka 3,4,5,6,7,8. Pro automatické přepínání mezi jednotlivými barvami použijte tlačítka **AUTO**.
- Pomocí tlačítka **INTENZITA** si můžete nastavit intenzitu působení světla. K dispozici je rozsah od 1 do 5. Aktuálně nastavená hodnota intenzity je zobrazena na displeji.
- Pomocí tlačítka **CHLAD** si můžete aktivovat působení atomizované mlhy. Opakovaným stiskem můžete upravit intenzitu působení atomizované mlhy.
- Pomocí tlačítka **TEPLO** si můžete aktivovat působení tepla. Opakovaným stiskem můžete upravit intenzitu působení tepla.
- Pro funkci EMS pulzů připojte příslušný typ kabelu. Funkci působení EMS pulzů aktivujete stisknutím tlačítka EMS. Opakovaným stiskem můžete upravit intenzitu působení elektrických pulzů.
- Pro aktivaci působení atomizované mlhy použijte příslušné tlačítka. Pokud je třeba vodu do zásobníku doplnit, přístroj vždy vypněte a odpojte od napájecího adaptéru.
- Samotnou péči atomizované mlhy si můžete dopřávat každý den. V případě fotonového světla doporučujeme délku v rozsahu od 20 do 40 minut alespoň 3x týdně. Pokud řešíte určitý specifický problém - např. akné, doporučujeme působení modrého světla každý den v délce 20 minut. Nejprve začínejte s nízkou intenzitou světla. Poté postupně přidávejte na intenzitě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch přístroje udržujte čistý. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě žádné ostré předměty, které by mohly poškodit povrch přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj s fotonovou terapií LIGHTPANEL PROFESSIONAL EXCLUSIVE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2924**

EAN: **8594166121980**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55014-2:2021

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt není zdravotnický prostředek.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2023