

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj s fotonovou terapií

Beautyrelax BR-2925

PROFESSIONAL MAX PERFORMANCE FLEX



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OCHRANA ZRAKU	5
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	7
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	8
TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM	10
BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE	10
SPEKTRUM SVĚTLA SVĚTELNÉHO PANELU	11
POPIS PŘÍSTROJE	13
POUŽITÍ OVLADAČE	14
MOŽNOSTI POUŽITÍ	15
POUŽITÍ DLE TYPU PLETI	17
OCHRANA ZRAKU	18
PŘED POUŽITÍM	19
ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	19
DOPORUČENÉ POUŽITÍ DLE BARVY SVĚTLA	19
MOŽNOST KOMBINACE BAREV SVĚTEL	20
PO POUŽITÍ PŘÍSTROJE	20
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	21
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE	23
NABÍJENÍ BATERIE	23
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	24
CERTIFIKACE	24
EU DISTRIBUTOR	24
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	25

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OCHRANA ZRAKU

Přístroj používá velmi výkonné LED diody, které generují intenzivní fotonové světlo. Výkon je nastaven tak, aby přinesl blahodárné účinky na pleť ve specifické vlnové délce. Při použití přístroje se vždy vyvarujte přímého pohledu zrak do zdroje světla. Před použitím přístroje si vždy nasadte ochranné brýle, které jsou součástí balení. Pokud si budete s přístrojem svítit do očí, může to trvale poškodit váš zrak.



DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA
DBEJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Světelná terapie je obecně bezpečná a neinvazivní metoda, přesto existují situace, kdy se použití nedoporučuje nebo musí být konzultováno s lékařem.

Kožní onemocnění a podráždění

- Nepoužívejte při otevřených ranách, popáleninách, ekzému, infekci nebo aktivním zánětu kůže.
- Vyhněte se použití na místech s herpesem, vyrážkou nebo čerstvými jizvami.
- Nepoužívejte na poškozenou nebo podrážděnou pleť (např. po silném chemickém peelingu, laserovém ošetření nebo opalování).

Citlivost na světlo (fotosenzitivita)

- Pokud trpíte fotosenzitivní reakcí (např. lupus, porfyrie) nebo používáte léky zvyšující citlivost na světlo - například antibiotika (tetracykliny), retinoidy, kortikosteroidy, antidepresiva nebo diuretika.

Těhotenství a kojení

- Přestože LED světlo je považováno za bezpečné, v těhotenství se doporučuje používat pouze po konzultaci s lékařem.
- Nepoužívejte panel přímo v oblasti břicha nebo prsou během těhotenství a kojení.

Neurologická a systémová onemocnění

- Nepoužívejte v případě epilepsie nebo jiných poruch s fotosenzitivními záchvaty.
- Opatrnost je na místě také u osob s kardiostimulátorem nebo implantovanými elektronickými zařízeními, pokud přístroj využívá pulzní režim.

Po lékařských zákrocích

- Po injekčních ošetřeních (botulotoxin, výplně) počkejte alespoň 48–72 hodin, než začnete světelnou terapii.
- Po laserovém nebo chemickém peelingu počkejte, až je pleť zhojená a bez zarudnutí.

Děti a nezletilí

- Přístroj není určen pro děti do 12 let.
- U mladistvých by měl být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.

Oči a přímé světlo

- Nikdy se nedívejte přímo do LED světel.
- Při ošetření obličeje vždy používejte ochranné brýle.

Jiné situace

- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí (např. v koupelně).
- Nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo panel.

TECHNICKÉ PARAMETRY

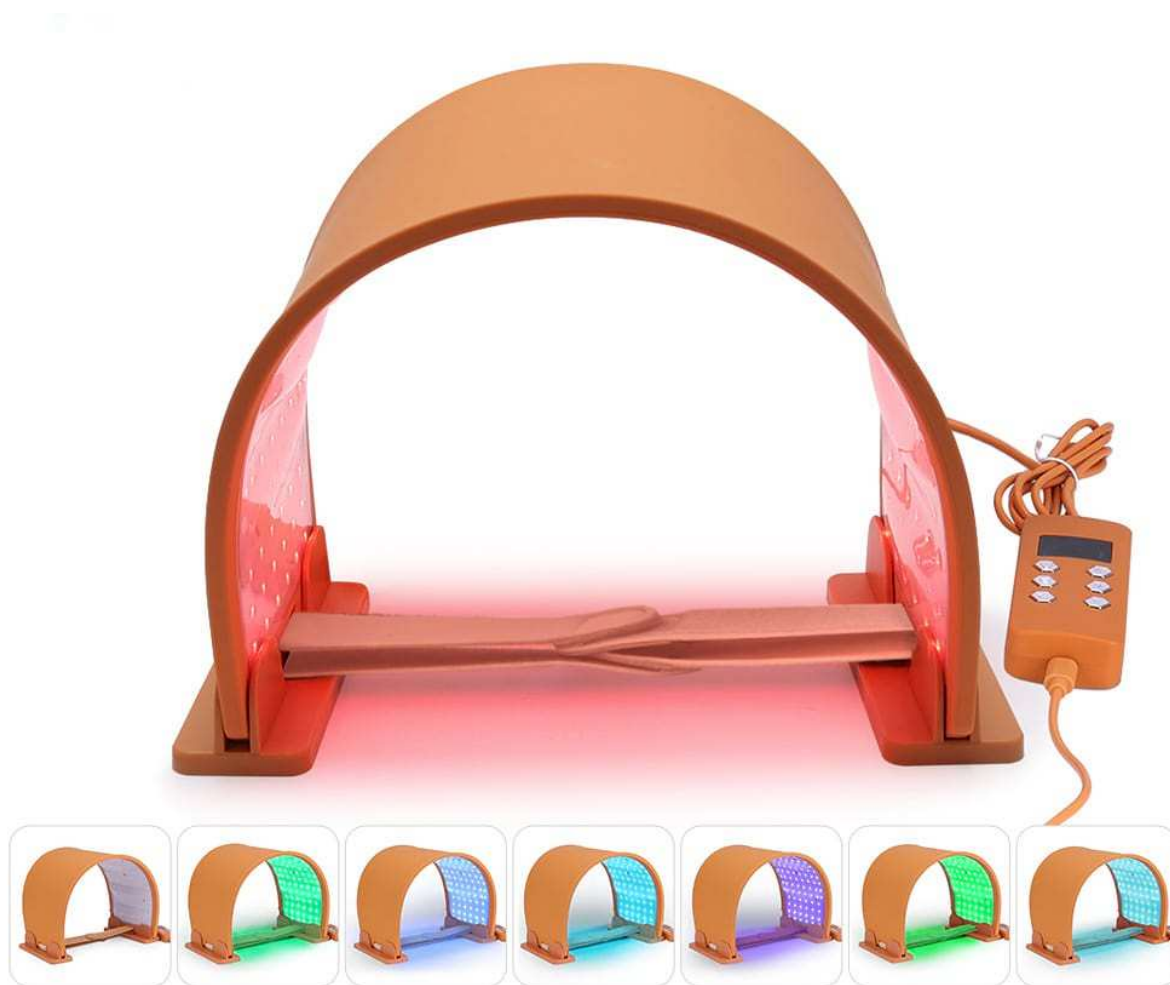
- Časovač: ano
- Počet světelných diod: 216
- Intenzita působení světla: 3 úrovně
- Ovladač s displejem
- Napájení: vestavěná li-ion baterie v ovladači
- Výkon: 8,5W
- Materiál: silikon
- Provozní napětí: 0,2A až 1A
- Rozměry: 55x24x3cm
- Hmotnost: 2,2kg

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj Beautyrelax Lightpanel Professional Max Performance Flex
- 1x Podstavec
- 1x Nabíjecí adaptér
- 1x Ochranné brýle
- 1x Návod k obsluze

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE



Tento ohebný světelný silikonový panel kombinuje sílu fototerapie v osmi různých barvách pro komplexní péči o pleť. Červené světlo stimuluje tvorbu kolagenu pro mladistvější vzhled, zatímco modré účinně ničí bakterie způsobující akné. Kombinované fialové světlo potlačuje příznaky akné a žluté zlepšuje metabolismus buněk. Zelené světlo vyrovnává pigmentaci a azurové zvyšuje buněčnou energii. S vestavěným časovačem a ovladačem si snadno nastavíte intenzitu a režim. Jeho ohebný silikonový design se pohodlně přizpůsobí konturám obličeje. Napájen je praktickou vestavěnou baterií, což z něj dělá váš dokonalý profesionální společník pro snadnou manipulaci.





TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

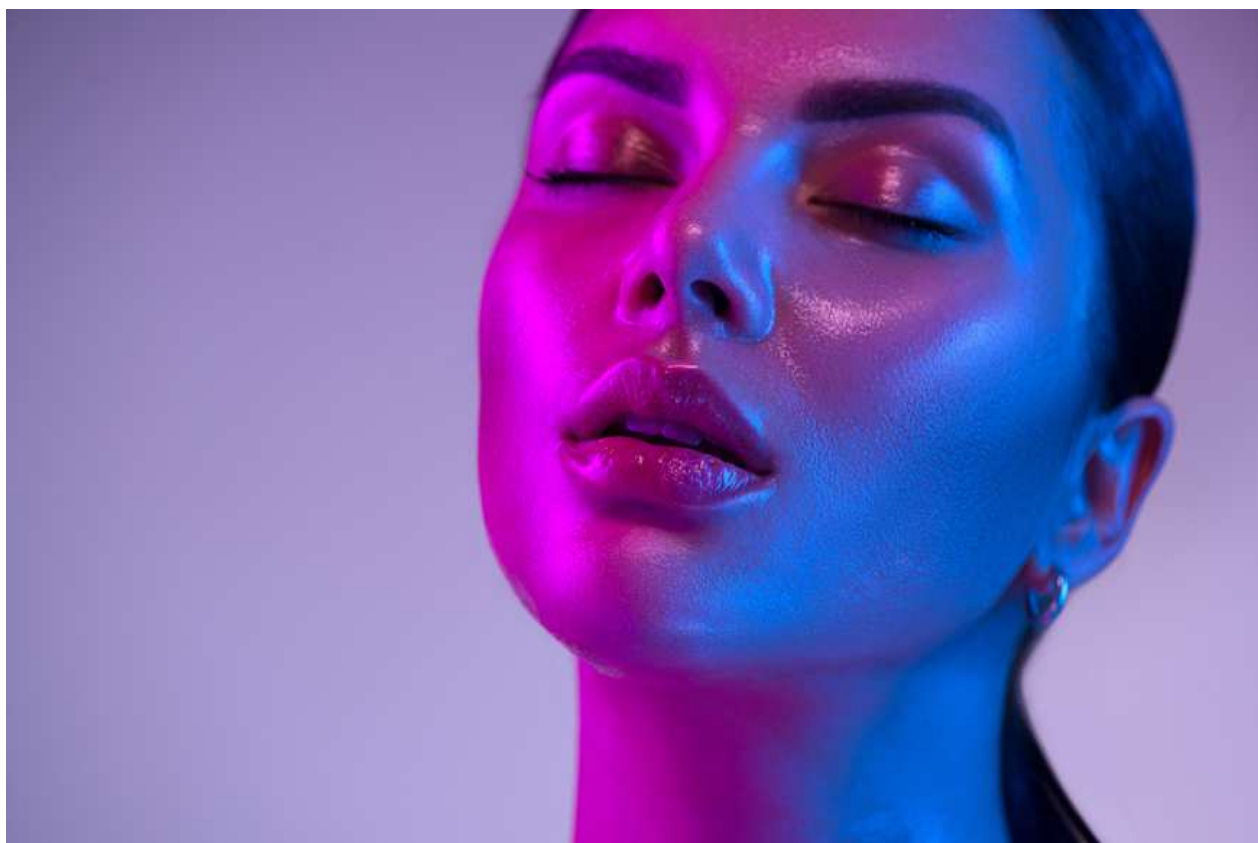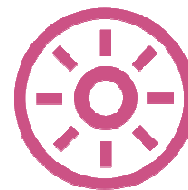Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY FOTONOVÉ TERAPIE

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

SPEKTRUM SVĚTLA SVĚTELNÉHO PANELU

Náš světelný panel využívá různé vlnové délky světla, z nichž každá působí cíleně na konkrétní problém pokožky. Pravidelným používáním dosáhnete viditelných, zdravých a dlouhodobých výsledků.

1. ČERVENÉ SVĚTLO (640–670 nm)

Hlavní účinek: Anti-aging & omlazení

Červené světlo proniká do hlubších vrstev pokožky, kde stimuluje tvorbu kolagenu – klíčové bílkoviny zodpovědné za pevnost a pružnost pleti. Pravidelné používání pomáhá vyhlazovat jemné vrásky, zpevňovat kontury obličeje, zmenšovat póry a zlepšovat celkovou texturu i kvalitu pleti. Je to váš spolehlivý spojenec v boji proti známkám stárnutí.

2. MODRÉ SVĚTLO (440–470 nm)

Hlavní účinek: Proti akné & dezinfekce

Modré světlo působí proti bakterii *Propionibacterium acnes*, která se podílí na vzniku akné. Tato bakterie obsahuje látky zvané porfyriny, které při působení modrého světla vytvářejí kyslík – a tím se samy likvidují. Modré světlo tak efektivně potlačuje zánětlivá ložiska, čistí a zklidňuje pleť, což ocení i citlivé typy pleti.

3. FIALOVÉ SVĚTLO (380–440 nm)

Hlavní účinek: Kombinovaná péče

Fialové světlo kombinuje červené a modré spektrum, a tím spojuje jejich benefity. Pomáhá bojovat proti akné (modrá složka) a zároveň podporuje hojení a regeneraci pokožky (červená složka). Je ideální pro problematickou pleť, která potřebuje současně vyčistit, zklidnit a obnovit.

4. ŽLUTÉ SVĚTLO (565–570 nm)

Hlavní účinek: Regenerace & detoxikace

Žluté světlo má výrazné protizánětlivé a hojivé účinky. Podporuje krevní a lymfatický oběh, čímž napomáhá detoxikaci pokožky a urychluje proces hojení. Zklidňuje podráždění i zarudnutí, je proto vhodné po mechanických ošetřeních (např. peelingu) nebo pro citlivou, začervenalou pleť. Zároveň zvyšuje schopnost pleti vstřebávat aktivní látky z kosmetiky.

5. ZELENÉ SVĚTLO (490–540 nm)

Hlavní účinek: Harmonizace & rozjasnění

Zelené světlo působí vyrovňavajícím způsobem na kožní buňky, pomáhá sjednotit tón pleti a redukovat pigmentové nerovnosti. Zmírňuje zarudnutí, podporuje hojení a dodává pleti svěží, rozjasněný vzhled. Je vhodné pro pleť s nerovnoměrnou pigmentací či unaveným vzhledem.

6. AZUROVÉ SVĚTLO (460–495 nm)

Hlavní účinek: Energie & výživa

Azurové světlo stimuluje buněčný metabolismus a zvyšuje energetickou aktivitu kožních buněk. Působí jako „vitamínová injekce“ pro unavenou pleť – dodává jí svěží, zdravý vzhled, podporuje prokrvení a zlepšuje celkovou vitalitu pokožky.

7. INFRAČERVENÉ (LASEROVÉ) SVĚTLO (810–850 nm)

Hlavní účinek: Hluboká regenerace & prohřátí

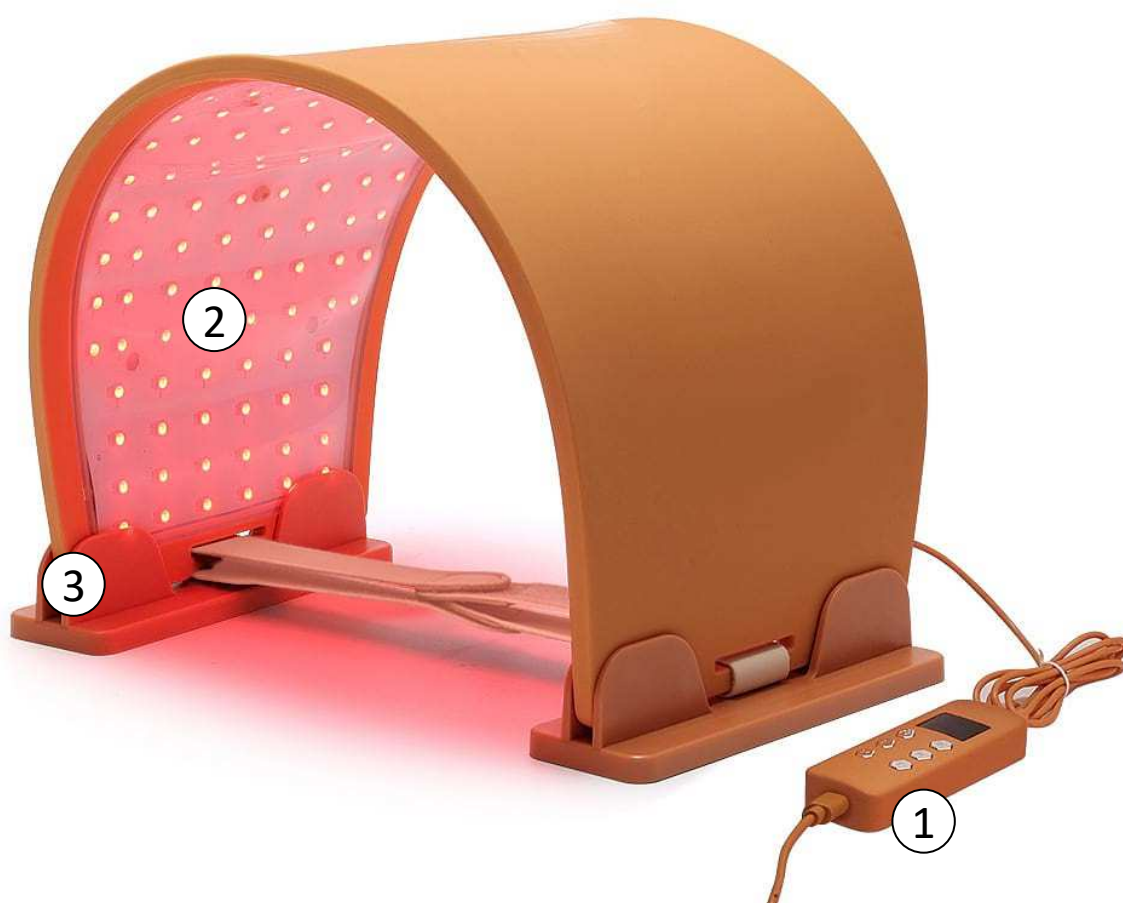
Infračervené světlo není viditelné, ale cítíme jeho příjemné teplo. Proniká nejhluběji ze všech vlnových délek, kde zlepšuje prokrvení, podporuje regeneraci tkání a uvolňuje napětí. Urychluje metabolické procesy, zmírňuje svalovou únavu a připravuje pleť na další ošetření.

Poznámka k „laserovému světlu“


V kontextu LED panelů je označení „laserové světlo“ většinou spíše marketingový výraz. LED diody neprodukují laserový paprsek; často jde o speciální režim určený ke zvýšení účinnosti.

POPIS PŘÍSTROJE







- 1. Ovladač**
- 2. Světla fotonové terapie**
- 3. Držák pro světelný panel**



POUŽITÍ OVLADAČE

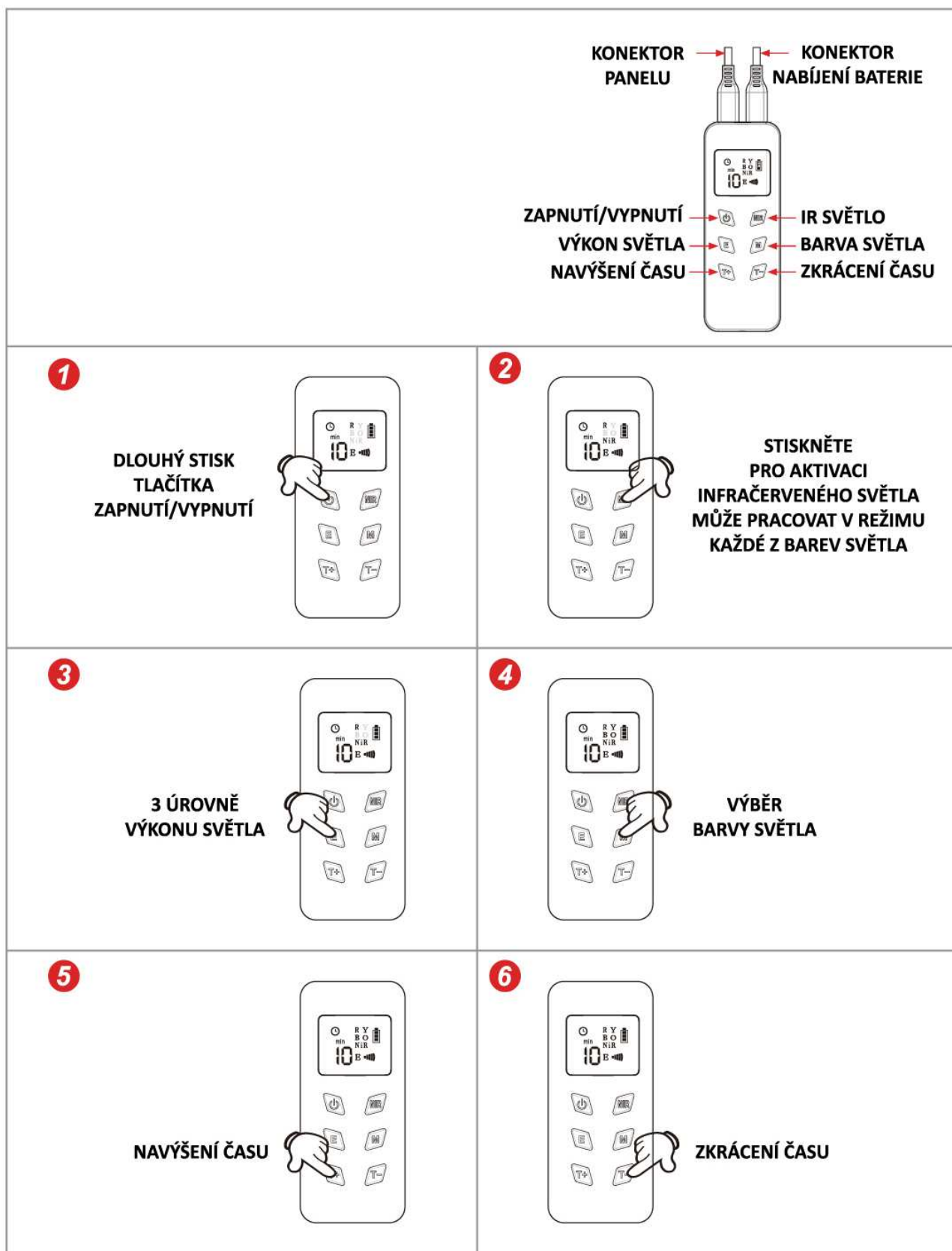

MOŽNOSTI POUŽITÍ

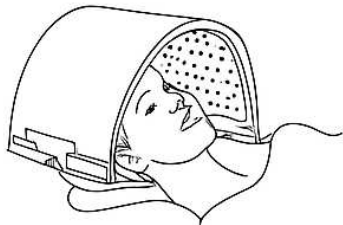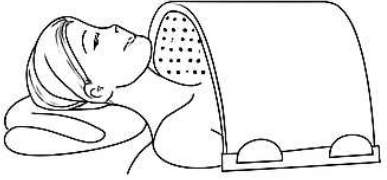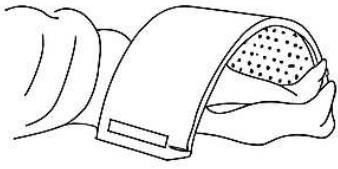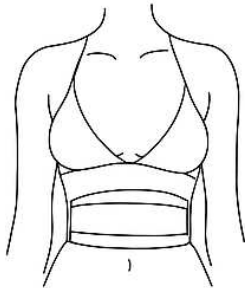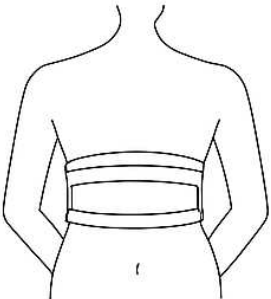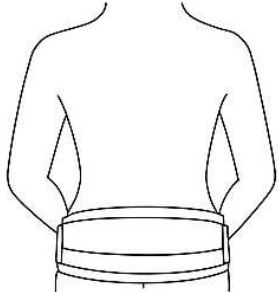 Obličej	 Krk/Hrudník	 Nohy
 Břicho	 Záda	 Hýždě

MOŽNOSTI POUŽITÍ



POUŽITÍ DLE TYPU PLETI

Šetrnost ošetření fotonové terapie umožňuje ošetření všech typů pleti.



normální



suchá



smíšená



mastná



citlivá



aknézní

OCHRANA ZRAKU

Během používání přístroje je nezbytné chránit si oči před působením LED světla. K dispozici máte několik možností:

1. Dodávané ochranné brýle

Nejpohodlnější a nejúčinnější variantou jsou neprůsvitné ochranné brýle, které jsou součástí balení přístroje. Dokonale blokují veškeré světlo a zajišťují maximální bezpečnost a komfort.

2. Kosmetické tampóny

Pohodlnou alternativu představují suché, kosmetické odličovací tampóny. Jednoduše je přiložte na zavřená víčka a lehce přidržte prsty po dobu trvání terapie.

3. Vlastní pomůcky

Stejně dobře poslouží i jiné neprůsvitné pomůcky, které máte po ruce, například silnější látková oční maska nebo speciální gelové chladivé polštářky.



Důležité: Ať zvolíte jakoukoli metodu, vždy mějte oči kompletně zavřené.

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že přístroj je umístěn na stabilním a suchém povrchu.
- Před prvním použitím si důkladně očistěte obličej od make-upu, krémů či nečistot.
- Pleť by měla být suchá a čistá – bez mastnoty či kyselin (např. AHA/BHA).
- Doporučuje se odstranit kovové šperky v blízkosti ošetřované oblasti.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Připojte přístroj k ovladači.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 1–2 sekund.
- Pomocí tlačítka si vyberte požadovanou barvu světla.
- Pomocí tlačítka zvolte požadovanou intenzitu světla (nízká / střední / vysoká).
- Tlačítka T+ / T– nastavte délku ošetření (10 / 15 / 20 / 25 / 30 minut).
- Stiskněte znovu ON/OFF pro spuštění terapie.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ DLE BARVY SVĚTLA

ČERVENÉ SVĚTLO (640–670 NM)

- Účinek: Anti-aging, stimulace kolagenu, omlazení pleti
- Doporučená délka ošetření: 15–20 minut
- Frekvence: 3–5× týdně

MODRÉ SVĚTLO (440–470 NM)

- Účinek: Proti akné, antibakteriální efekt
- Doporučená délka ošetření: 10–15 minut
- Frekvence: 3–4× týdně

FIALOVÉ SVĚTLO (380–440 NM)

- Účinek: Kombinace proti akné a regenerace
- Doporučená délka ošetření: 15–20 minut
- Frekvence: 3–4× týdně

ŽLUTÉ SVĚTLO (565–570 NM)

- Účinek: Zklidnění, detoxikace, podpora hojení
- Doporučená délka ošetření: 15–25 minut
- Frekvence: 2–3× týdně

ZELENÉ SVĚTLO (490–540 NM)

- Účinek: Rozjasnění, sjednocení tónu pleti
- Doporučená délka ošetření: 15–20 minut
- Frekvence: 3× týdně

AZUROVÉ SVĚTLO (460–495 NM)

- Účinek: Oživení, energie, revitalizace pokožky
- Doporučená délka ošetření: 10–15 minut
- Frekvence: 3–4× týdně

INFRAČERVENÉ SVĚTLO (810–850 NM)

- Účinek: Hluboká regenerace, prohřátí tkání, uvolnění
- Doporučená délka ošetření: 20–30 minut
- Frekvence: 2–4× týdně
- Kombinace světél

MOŽNOST KOMBINACE BAREV SVĚTEL

Různé barvy světla lze kombinovat při jednom "sezení", avšak doporučuje se: Nepoužívat více než 2–3 barvy v jedné kúře.

Kombinovat světla s doplňujícími účinky, např.:

- Červené + Infračervené → hluboká regenerace a omlazení
- Modré + Fialové → akné a hojení
- Zelené + Žluté → rozjasnění a zklidnění

Mezi jednotlivými barvami ponechte pauzu 1–2 minuty, aby si pokožka odpočinula.

PO POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Po skončení terapie přístroj automaticky zhasne nebo jej vypněte tlačítkem ON/OFF.
- Nechte pokožku odpočívat 5–10 minut.
- Poté můžete aplikovat hydratační nebo regenerační sérum či krém, které se díky aktivaci buněk lépe vstřebávají.
- Po ošetření nepoužívejte silné exfolianty ani kyseliny po dobu 12–24 hodin.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jak často mohu světelný panel používat?

Doporučuje se používat 3–5× týdně podle typu světla a potřeb pleti. Po dosažení výsledků můžete přejít na udržovací režim 1–2× týdně.

2. Jak dlouho by mělo jedno ošetření trvat?

Běžná délka je 10–20 minut.

3. Mohu kombinovat různé barvy světla během jednoho ošetření?

Ano, doporučuje se kombinace maximálně 2–3 barev v jedné kúře (např. červené + infračervené nebo modré + fialové).

4. Musím při používání nosit ochranné brýle?

Ano, doporučuje se chránit oči brýlemi.

5. Mohu případně cítit mírné teplo?

Ano, mírné teplo je přirozené. Znamená to, že světlo stimuluje buňky. Pokud je pocit nepříjemný, snižte intenzitu.

6. Kdy uvidím první výsledky?

První zlepšení pleti bývá viditelné už po 2–3 týdnech pravidelného používání. Pro dlouhodobý efekt je důležitá pravidelnost.

7. Mohu světelný panel používat každý den?

Ano, ale pouze při nižší intenzitě nebo kratší době (např. 10 minut denně). Pleti prospívá i odpočinek mezi terapiemi.

8. Je nutné čistit pleť před terapií?

Ano. Pokožka musí být čistá a suchá, bez make-upu, mastnoty nebo kyselin, aby světlo proniklo do hlubších vrstev.

9. Mohu po ošetření nanést kosmetiku?

Ano. Po terapii je vhodné použít hydratační nebo regenerační sérum – účinné látky se lépe vstřebávají.

10. Může světlo poškodit pokožku?

Ne. LED světlo neobsahuje UV záření, takže neopálí ani nepoškodí kůži. Je zcela bezpečné při správném použití.

11. Jaký je rozdíl mezi LED a medicínským laserovým světlem?

LED světlo je rozptýlené a šetrné, vhodné pro domácí použití. Laserové světlo je koncentrované a používá se spíše v medicíně.

12. Mohu používat panel při akné?

Ano. Modré světlo působí antibakteriálně a pomáhá redukovat zánětlivá ložiska akné.

13. Je vhodné používat světelný panel po kosmetickém ošetření?

Ano, především žluté nebo červené světlo pomáhá zklidnit pleť např. po peelingu.

14. Mohu používat panel v kombinaci s krémy nebo séry?

Ano, ale až po ošetření. Před terapií používejte pouze čistou pleť – některé složky by mohly absorbovat světlo a snížit účinnost.

15. Pomáhá světelná terapie i proti pigmentovým skvrnám?

Ano, především zelené světlo pomáhá sjednotit tón pleti a zesvětlit pigmentace.

16. Lze panel používat i na jiné části těla než obličej?

Ano. Můžete ošetřovat krk, dekolt, ruce nebo jiné oblasti s vráskami či akné.

17. Mohu používat panel během těhotenství?

Světelná terapie je obecně považována za bezpečnou, ale doporučuje se konzultace s lékařem před použitím.

18. Je vhodný i pro citlivou pleť?

Ano, ale začněte s nižší intenzitou a kratší dobou (10 minut). Sledujte reakci pokožky.

19. Co dělat, pokud se objeví zarudnutí nebo podráždění?

Dejte pleti pauzu 2–3 dny, snižte intenzitu nebo zkrátte dobu terapie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dermatologa.

20. Jak pečovat o přístroj po použití?

Po každé terapii očistěte panel jemným hadříkem navlhčeným vodou nebo dezinfekcí bez alkoholu. Nepoužívejte abrazivní prostředky.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Pravidelné čištění a správná údržba jsou zásadní pro zachování výkonu přístroje, prodloužení jeho životnosti a zajištění maximální hygieny při každém ošetření.

- Nechte přístroj několik minut vychladnout.
- Používejte neabrazivní čisticí prostředky – nikdy nepoužívejte hrubé houbičky nebo agresivní chemikálie.
- Dezinfekce při profesionálním provozu (např. salon, klinika)
- Ochranné brýle omyjte po každém klientovi teplou vodou a následně dezinfikujte.
- Zkontrolujte stav kabelů, konektorů a napájecího adaptéru – při jakémkoli poškození zařízení nepoužívejte.
- Překontrolujte, zda nejsou LED diody znečištěné prachem či kosmetikou – v případě potřeby je opatrně otřete suchým hadříkem z mikrovlákna.
- Panel skladujte na suchém, čistém a větraném místě mimo přímé sluneční záření.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám ani vlhkosti (např. v koupelně).
- Vyvarujte se pádu, nárazu nebo jakéhokoli tlaku na LED část panelu.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Baterie je integrovaná přímo v ovladači. Na displeji je v pravém horním rohu symbol baterie, který signalizuje stav nabití. Pokud to situace vyžaduje, baterii nabijte.



Postup nabíjení:

- Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí síťový adaptér, který je součástí balení.
- Před nabíjením odpojte světelnou masku od ovladače.
- Ovladač připojte k nabíjecímu kabelu.
- V průběhu nabíjení symbol baterie bliká.
- Jakmile je baterie nabita, blikání symbolu baterie ustane.
- Délka nabíjení závisí na stavu zbývajících energie baterie a její celkové kondici.
- Pokud je přístroj zapojen k nabíjecímu adaptéru, přístroj nepoužívejte.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

beautyrelax

 **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj s fotonovou terapií

Professional Max Performance Flex

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2925**

EAN: **8594166121997**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 55014-2:2021

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt není zdravotnický prostředek.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.




SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.5.2023