

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj
BeautyRelax BR-3106
PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
SLOVO ÚVODEM	5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	6
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	7
PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN	8
UPOZORNĚNÍ	8
DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	9
POUŽÍVÁNÍ GUMOVÝCH RUKAVIC PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
TECHNOLOGIE STUDENÉ PLAZMY V KOSMETICE	12
CO JE STUDENÁ PLAZMA?	12
JAK STUDENÁ PLAZMA STERILIZUJE PLEŤ?	13
HLAVNÍ VÝHODY PRO PLEŤ	13
KDO BY MĚL PLAZMOVOU TECHNOLOGII VYZKOUŠET?	13
HISTORIE TECHNOLOGIE	14
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	14
BENEFITY PRO PLEŤ	14
FREKVENCE POUŽITÍ	15
PLASMOVÝ TOK S OZONEM	15
JAK TECHNOLOGIE FUNGUJE?	15
PŘÍNOSY TECHNOLOGIE PLASMOVÉHO TOKU S OZONEM	16
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU APLIKACE	16
JAK ČAS ROZDĚLIT?	17
CO OVLIVŇUJE DÉLKU APLIKACE?	17
DOPORUČENÍ PRO OPTIMÁLNÍ ČASOVÁNÍ	17
ANTI-AGING EFEKT STUDENÉ PLAZMY: JAK DOCHÁZÍ K REDUKCI VRÁSEK?	18
SHRNUTÍ	20
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	21
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	23
IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH	24
TECHNICKÉ PARAMETRY	25
OBSAH BALENÍ	25
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	26
POPIS PŘÍSTROJE	27
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	28
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	29
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	30
METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU	31
ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU	32
INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA	32
OBRÁZKOVÁ GALERIE	33
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	46
CERTIFIKACE	46
EU DISTRIBUTOR	46
DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ	46
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	47

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Salonní péče v domácích podmínkách

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát stejně účinná aplikace jako v kosmetickém studiu – bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce.

Těšíme se, že s námi budete sdílet vašeš pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
mh@santadria.cz
shop.beautyrelax.cz
www.beautyrelax.cz
facebook.com/BeautyRelaxEquipment

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména výstrahám a bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje a ochraně všeho zdraví. Podrobně vám vysvětlíme všechny funkce a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Veškeré instrukce uvedené v tomto návodu k obsluze neberte prosím na lehkou váhu. Kosmetický přístroj pro neinvazivní aplikaci vybraných částí těla pracuje s technologií, která je bezbolestná a bezpečná. Přístroj prošel dlouhým vývojem a bezpečnost garantuje z hlediska splnění všech zákonem stanovených norem. Nemějte z používání přístroje žádný strach. Konstrukce, vlastnosti a technologie jsou navrženy tak, aby působily na pleť s maximální šetrností.

Úvodní důležité informace související s přístrojem a jeho používáním:

- Přístroj BeautyRelax spadá do kategorie kosmetických přístrojů. **Nejedná se o zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného onemocnění.** Nabízí technologii, která působí na pleť s vysoce antibakteriálním účinkem.
- Přístroj BeautyRelax poskytuje neinvazivní aplikaci. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky nikdy v průběhu používání nepronikne pod kůži.
- Přístroj BeautyRelax je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Používání gumových rukavic při aplikaci studené plazmy na pleť má několik důvodů, které souvisí s bezpečností, hygienou i efektivitou procedury.
- Existují určité stavy, kdy není doporučeno přístroj používat. Následujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, nebudete si jisti v jakékoliv fázi použití přístroje, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám náš odborný konzultant a školitel Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

Přejeme, ať vám přístroj dobře slouží a splňuje všechna očekávání, která jste měli před jeho nákupem.

Tým BeautyRelax.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ



- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti svým aktuálním zdravotním stavem, první použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Při komerčním provozu přístroje je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj ani žádná z jeho částí nesmí být ponořen do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.

KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO, který je určen pro kosmetické účely na velmi kvalitní a profesionální úrovni. **Přístroj není zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného onemocnění. Přístroj neposkytuje prostřednictvím žádné z 3 aplikačních hlavic technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby působil maximálním antibakteriálním účinkem.

Pokud je přístroj používán v komerčním provozu, je doporučeno, aby osoba, která obsluhuje přístroj, disponovala kosmetickým kurzem.

Rozsah licence pro využívání přístroje s plazma terapií za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro uvedenou technologii, který přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost za používání přístroje za podmínek, které jsou v rozporu s legislativou v dané zemi používání. Provozovatel může veřejně pro komerční použití pracovat s přístrojem pouze tehdy, pokud disponuje oprávněním dle aktuálně platného znění zákona/vyhlášky. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenesí žádnou odpovědnost za škody, které vznikly v rozporu s používáním podmínek stanovených v tomto návodu k obsluze.

PRO KOHO NENÍ PŘÍSTROJ URČEN

Přístroj **nesmí** používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:



Absolutní omezení použití (použití je zakázáno):

- **Kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení**
Plazma generuje elektromagnetické pole, které může narušit funkci přístrojů.
- **Aktivní onkologické onemocnění (zejména v oblasti aplikace)**
Plazma může stimulovat buněčný metabolismus, což není vhodné při nádorech.
- **Těhotenství a kojení**
Neexistují dostatečné studie prokazující bezpečnost pro plod nebo novorozence.
- **Čerstvé popáleniny nebo otevřené rány**
Plazma může zpomalit hojení nebo způsobit podráždění.
- **Epilepsie**
Světelné efekty nebo vysokofrekvenční pulzy mohou vyvolat záchvat.

Relativní omezení použití (použití pouze po konzultaci s lékařem):

- **Aktivní opar (herpes simplex)**
Plazma může šíření viru zhoršit.
- **Rosacea nebo těžká forma akné s cystami**
Zánětlivá pokožka může reagovat přecitlivěle.
- **Autoimunitní onemocnění (lupus, sklerodermie)**
Plazma může u některých pacientů vyvolat nežádoucí imunitní reakci.
- **Poruchy srážlivosti krve nebo užívání antikoagulancií**
Riziko podlitin při kombinaci s mechanickým působením přístroje.
- **Silně poškozená kožní bariéra (např. těžký ekzém)**
Plazma může vysušovat a dráždit již narušenou pokožku.

UPOZORNĚNÍ

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Proto jsme pro vás připravili podrobný přehled situací, kdy není vhodné náš přístroj používat. Tato omezení se týkají především závažných zdravotních stavů. Pokud jste zdraví a váš lékař vám výhradně nezamezil kosmetickou péčí o pleť, můžete přístroj bez obav používat. Doporučujeme však vždy naslouchat svému tělu - pokud během používání pocítíte jakékoliv nepohodlí, okamžitě přerušete proceduru. Náš přístroj byl navržen s důrazem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. Jeho konstrukce a funkce jsou optimalizovány tak, aby vám poskytly příjemnou relaxaci, krásnou a zdravě vyhlížející pleť.

DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Příprava před použitím

Nepoužívejte přístroj, pokud je váš stav uveden v seznamu, v jakých případech není možné přístroj používat. Při pochybnostech o zdravotním stavu se poraďte s lékařem nebo dermatologem.

- Očistěte pleť: Odstraňte make-up, mastnotu a nečistoty.
- Nepoužívejte kovové kosmetické přípravky (mohou reagovat s plazmou).
- Provedte test na malé ploše (např. předloktí) – počkejte několik minut, zda nedojde k podráždění.

2. Během aplikace

Vzdálenost od pokožky: Držte aplikátor 1 až 4 mm od kůže.

Pohyby: Hlavici přístroje pohybujte pomalu a plynule – nikdy nestůjte na jednom místě déle než 5–10 sekund.

Citlivé oblasti: Vyhněte se očím, rtům, sliznicím a znaménkům.

Nepříjemné pocity: Pokud cítíte pálení, bolest nebo silné mravenčení, okamžitě přerušete proceduru.

3. Po aplikaci

Hydratujte pleť: Naneste zklidňující krém nebo sérum s aloe vera, panthenolem nebo kyselinou hyaluronovou.

Vyhněte se slunci: Minimálně 24 hodin po aplikaci nepobývejte na přímém slunci a používejte SPF 50+.

Nekombinujte s agresivními procedurami: Počkejte 48 hodin před chemickým peelingem nebo laserem.

4. Frekvence používání

Pro začátečníky: 1x týdně (5 až 10 minut na oblast).

Pro pokročilé: 2x až 3x týdně (maximálně 15 minut na oblast).

Přestávky: Mezi jednotlivými aplikacemi nechte pokožce 48 hodin na regeneraci.

5. Údržba přístroje

Čištění: Po každém použití otřete aplikátor dezinfekčním ubrouskem nebo přípravkem s podílem alkoholu.

Skladování: Uchovávejte v suchu, mimo dosah dětí a přímého slunce.

Kontrola: Pravidelně kontrolujte, zda není kabel poškozen nebo aplikátor znečištěn.

6. Varovné signály – Kdy okamžitě přestat?

- Bělení nebo modrání kůže.
- Vznik puchýřů, silného zarudnutí nebo otoku.
- Závratě, brnění nebo necitlivost.

7. Pro koho je přístroj vhodný?

- Pro majitele akné, mastné, stárnoucí nebo jemně pigmentované pleti.
- Ne pro děti do 18 let a osoby s narušenou imunitou.

POUŽÍVÁNÍ GUMOVÝCH RUKAVIC PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



Používání gumových rukavic při aplikaci studené plazmy na pleť má několik důvodů, které souvisí s bezpečností, hygienou i efektivitou procedury. Zde je podrobné vysvětlení:

1. Ochrana před elektrickým proudem

Studená plazma se generuje pomocí vysokofrekvenčního elektrického výboje. I když je napětí nízké a pro uživatele bezpečné, rukavice:

- Zabraňují nežádoucímu uzavření elektrického obvodu (např. pokud byste se dotkli kovových částí přístroje mokřýma rukama).
- Chrání před statickou elektřinou, která by mohla ovlivnit stabilitu plazmatu.

2. Hygiena a prevence kontaminace

- Bariéra proti bakteriím: Rukavice zabraňují přenosu mikroorganismů z rukou na aplikovanou pleť (zvláště důležité u akné nebo poškozené pokožky).
- Ochrana obsluhy přístroje: Pokud přístroj používá profesionál (v salonu), rukavice chrání jeho pokožku před opakovaným vystavením plazmě.

3. Lepší kontrola aplikace

- Gumové rukavice zlepšují přilnavost – usnadňují manipulaci s přístrojem a přesné vedení aplikátoru.
- Zabraňují klouzání (např. když jsou ruce vlhké od krému nebo plazmového roztoku).

4. Ochrana citlivé pokožky rukou

Při častém používání může plazma:

- Vysušovat pokožku rukou (reaktivní částice mohou narušit lipidovou bariéru).
- Zvyšovat citlivost u lidí s ekzémy nebo alergiemi.

Jaké rukavice použít?

- Nitrile (nitrilové): Odolné, nealergenní, vhodné pro práci s plazmou.
- Latexové: Levnější, ale mohou způsobovat alergie.
- Vinylové: Vhodné pro jednorázové použití.

Gumové rukavice nejsou jen formální doporučení – jsou praktickou nutností pro bezpečnou, hygienickou a efektivní aplikaci studené plazmy.

TECHNOLOGIE STUDENÉ PLAZMY V KOSMETICE: **REVOLUCE V STERILIZACI A REGENERACI PLETI**



V posledních letech zažívá kosmetický průmysl boom inovativních technologií, které slibují nejen dokonalou krásu, ale také vědecky podložené výsledky. Mezi nejzajímavější objevy patří studená plazma – technologie, která mění pravidla hry v péči o pleť, zejména v oblasti hluboké sterilizace, léčby akné a anti-agingu. Pojďme se podívat, jak tento „čtvrtý stav hmoty“ funguje a proč byste ho měli zařadit do své skincare rutiny.

CO JE STUDENÁ PLAZMA?

Plazma je ionizovaný plyn, který obsahuje volné elektrony, ionty a neutrální částice. Tvoří 99 % viditelného vesmíru (hvězdy, blesky) a díky své schopnosti generovat reaktivní částice se využívá v medicíně, průmyslu i kosmetice.

JAK STUDENÁ PLAZMA STERILIZUJE PLEŤ?

Klíčovou vlastností studené plazmy je generování reaktivních kyslíkových a dusíkových částic (ROS a RNS), jako jsou ozon, oxid dusnatý nebo hydroxylové radikály.

Tyto molekuly působí jako přírodní „dezinfekce“:

- Ničí bakterie, viry a plísňe – Narušují buněčné membrány patogenů, včetně *Propionibacterium acnes* (původce akné).
- Odstraňují biofilm – Rozkládají ochrannou vrstvu bakterií, která odolává klasickým antiseptikům.
- Nepoškozuje zdravou pokožku – Na rozdíl od alkoholu nebo antibiotik nevede k rezistenci mikrobů ani nenarušuje kožní mikrobiom.

Studie potvrzují:

- Až 99,9% redukce bakterií za 30 sekund (výzkum Leibnizova institutu, 2020).
- Efektivita proti viru herpes simplex nebo HPV (Journal of Physics D: Applied Physics, 2021).

HLAVNÍ VÝHODY PRO PLEŤ

1. Léčba akné a růžovky – Eliminuje bakterie, snižuje zánět a reguluje tvorbu kožního mazu.
2. Hojení ran a jizev – Stimuluje tvorbu kolagenu a urychluje regeneraci tkání.
3. Anti-aging efekt – Redukuje vrásky, rozjasňuje pigmentové skvrny a zlepšuje elasticitu.
4. Příprava na zákroky – Dezinfikuje pleť před chemickým peelingem nebo laserem.

KDO BY MĚL PLAZMOVOU TECHNOLOGII VYZKOUŠET?

- Majitelé aknézní nebo problematické pleti.
- Lidé s citlivou pokožkou, kteří nesnášejí agresivní antiseptika.
- Zájemci o neinvazivní lifting bez jehel.
- Kosmetická studia pro zvýšení antibakteriálního účinku.

Bezpečnost a vedlejší účinky

- Mírné zarudnutí (do 30 minut).
- Pocit „štípání“ u velmi citlivé pleti.

Studená plazma není sci-fi, ale dostupná technologie, která spojuje vědu s krásou. Její schopnost sterilizovat, hojit a omlazovat bez rizika vedlejších účinků z ní dělá ideálního spojence pro každého, kdo touží po zdravé a zářivé pleti. Ať už investujete do profesionálního přístroje do salonu, nebo pro domácí použití, studená plazma vás nezlame.

HISTORIE TECHNOLOGIE

Studená plazma není novým objevem – její kořeny sahají až do 19. století, kdy vědci začali zkoumat ionizované plyny. Klíčové milníky:

- 1928: Americký chemik Irving Langmuir poprvé použil termín „plazma“.
- 90. léta: Plazma se začala využívat v medicíně pro sterilizaci nástrojů a hojení ran.
- 2010: První kosmetické přístroje se studenou plazmou vstupují na trh, zejména v Jižní Koreji a Německu.
- 2020: Schválení pro plazmové přístroje na potlačení projevů akné.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Studená plazma je ionizovaný plyn s unikátními vlastnostmi:

Vznik: Elektrický výboj rozbije molekuly plynu (obvykle vzduchu nebo helia) na ionty, elektrony a reaktivní částice.

Bezpečnost: Teplota plynu nepřesahuje 40 °C (odtud „studená“ plazma).

Účinné látky: Generuje ROS (reaktivní formy kyslíku) a RNS (reaktivní formy dusíku), které ničí patogeny a stimulují buňky.

BENEFITY PRO PLEŤ

- **Hluboká sterilizace** – Eliminuje 99,9 % bakterií (včetně Staphylococcus aureus).
- **Léčba akné** – Snižuje zánět, reguluje mazové žlázy.
- **Anti-aging** – Stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu.
- **Hojení ran** – Urychluje regeneraci po mikrodermabrazii nebo laseru.
- **Bezpečnost** – Nevysušuje pleť, vhodné i pro citlivou pokožku.

Po aplikaci:

- Naneste hydratační sérum s kyselinou hyaluronovou.
- Vyhněte se slunci 24 hodin.

FREKVENCE POUŽITÍ

- Pro akné: 2x až 3x týdně.
- Pro anti-aging: 1x týdně.

PLASMOVÝ TOK S OZONEM **REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE V PÉČI O PLEŤ**

Stárnutí pleti je přirozený proces, který přináší celou řadu viditelných změn. Pleť se ztenčuje, ztrácí pružnost, objevují se pigmentové skvrny, hlubší vrásky a kontury obličeje postupně ochabují. Technologie plasmového toku obohaceného o ozon však přináší účinné řešení, jak tyto projevy nejen zpomalit, ale i zvrátit.

Na rozdíl od běžných estetických metod, které se zaměřují až na následky stárnutí (například vyplňování vrásek nebo čištění ucpaných pórů), plasmový tok působí preventivně. Pracuje s pokožkou v hloubce a cíleně zamezuje vzniku mnoha kožních defektů ještě dříve, než nastanou.

JAK TECHNOLOGIE FUNGUJE?

Keramická plocha aplikátoru generuje stejnosměrný proud s vysokofrekvenčním napětím. V okamžiku, kdy se hlavice přiblíží k pokožce na vzdálenost cca 1mm až 4 mm, vzniká mezi pletí a aplikátorem plasmový výboj. Tento výboj využívá atomy kyslíku z okolního vzduchu, které přeměňuje na ozon. Silné oxidační činidlo s antibakteriálními, protiplísňovými a antivirovými účinky.

Pleť je během aplikace sterilizována a zbavena bakterií, které způsobují záněty, akné nebo podráždění. Tato forma aplikace tak působí jako hloubková dezinfekce pokožky, ale zcela bezbolestně a bez vedlejších účinků.

PŘÍNOSY TECHNOLOGIE PLASMOVÉHO TOKU S OZONEM

- Hlubková sterilizace pleti. Okamžité odstranění bakterií a mikrobů.
- Prevence vzniku akné, zánětů a kožních defektů.
- Podpora elasticity a pružnosti pokožky.
- Zpomalení stárnutí a redukce jemných vrásek.
- Rozjasnění tónu pleti a celkové zlepšení její textury.
- Okamžitý osvěžující efekt.
- Přírodní cesta bez použití chemie. Technologie pracuje pouze se vzdušným kyslíkem.
- Skvělá volba pro profesionální kosmetické salony

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DÉLKU APLIKACE

Typ pleti:

- Citlivá pleť
- Mastná nebo problematická pleť

Nastavená intenzita přístroje:

- Nižší výkon → delší expozice
- Vyšší výkon → kratší expozice

Cíl aplikace:

- Běžná desinfekce → kratší doba
- Hlubší antibakteriální účinek → mírně delší expozice

Časový odhad pro různé typy aplikace:

Základní antibakteriální aplikace (preventivní desinfekce pleti)

3 až 5 minut (rychlejší pohyb přístrojem, kratší expozice na jednotlivé zóny)

Intenzivnější aplikace (pro akné nebo problematickou pleť)

5 až 8 minut (déle se zaměřuje na problematické oblasti, např. T-zóna)

Aplikace s kombinací dalších funkcí (např. plazma + LED terapie)

8 až 12 minut (pokud přístroj kombinuje více technologií)

JAK ČAS ROZDĚLIT?


- Každá část obličeje (čelo, tvář, brada, nos) by měla být aplikována 30 až 60 sekund.
- Problémové oblasti (místa s akné, většími póry) lze aplikovat déle 1 až 2 minuty.
- Přístroj by se měl plynule pohybovat, aby nedošlo k přehřátí nebo podráždění.

CO OVLIVŇUJE DÉLKU APLIKACE?

- Velikost aplikované oblasti (pouze obličej vs. obličej + krk + dekolt)
- Nastavení přístroje (nízká/vyšší intenzita)
- Typ pleti (citlivá pleť = kratší doba)
- Cíl aplikace (pouze desinfekce vs. hloubková sterilizace)

DOPORUČENÍ PRO OPTIMÁLNÍ ČASOVÁNÍ

- První aplikace: Začněte s 3 až 4 minutami a sledujte reakci pleti.
- Pravidelná péče: Při opakovaném použití lze postupně prodloužit na 5 až 7 minut.
- Pokud používáte plazmu spolu s jinou kosmetikou (např. sérum), nechte ji nejprve vsáknout, aby nedošlo k reakci s plazmou.

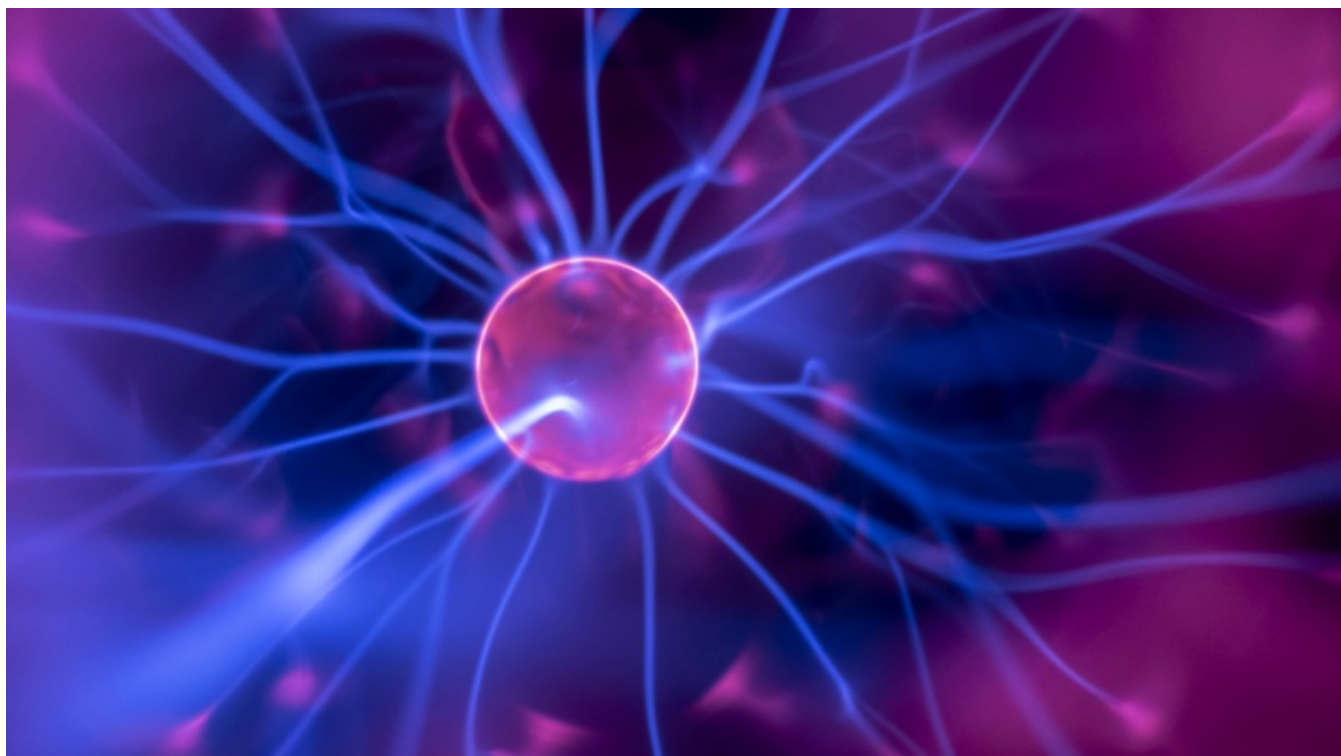

ANTI-AGING EFEKT STUDENÉ PLAZMY: **JAK DOCHÁZÍ K REDUKCI VRÁSEK?**

Studená plazma působí na pleť na buněčné a molekulární úrovni, což vysvětluje její schopnost redukovat vrásky a zlepšovat elasticitu kůže. Hlavní mechanismy, které vedou k „zjemnění vrásek“, jsou:

1. Stimulace tvorby kolagenu a elastinu

Proces: Reaktivní kyslíkové a dusíkové částice (ROS/RNS) generované plazmou aktivují kožní fibroblasty – buňky zodpovědné za produkci kolagenu a elastinu.

Důsledek:

Kolagen zpevňuje pokožku a vyplňuje hlubší vrásky.

Elastin obnovuje pružnost, čímž redukuje jemné linky (např. vrásky kolem očí).

Studie: Po 3 měsících pravidelného používání se tvorba kolagenu zvýší až o 25–30 % (Journal of Cosmetic Dermatology, 2022).

2. Antioxidantní účinek

Proces: Plazma neutralizuje volné radikály (např. z UV záření nebo znečištění), které poškozují DNA buněk a urychlují stárnutí.

Důsledek:

Zpomalení rozpadu kolagenu.

Prevence vzniku nových vrásek.

3. Zlepšení mikrocirkulace

Proces: Plazma rozšiřuje cévy a zvyšuje průtok krve v pokožce.

Důsledek:

- Kůže je lépe zásobena kyslíkem a živinami.
- Zrychlení regenerace buněk a odstranění toxinů.
- Pleť vypadá „projasněně“ a zdravěji.

4. Obnova povrchu kůže

Proces: Plazma jemně exfoliuje odumřelé buňky a podporuje tvorbu nové stratum corneum (svrchní vrstvy kůže).

Důsledek:

- Vyhlazení nerovností a drobných vrásek.
- Lepší penetrace aktivních látek z krémů (např. kyseliny hyaluronové).

5. Protizánětlivý účinek

Proces: Plazma potlačuje zánětlivé procesy v kůži, které mohou vést k předčasnému stárnutí.

Důsledek:

- Snížení otoků a zarudnutí.
- Prevence poškození kolagenu způsobeného chronickým zánětem.

6. Hydratace a zpevnění pleti

Proces: Plazma zvyšuje produkci kyseliny hyaluronové v kožních buňkách.

Důsledek:

Pleť je hydratovanější a „napnutější“, což opticky zmírňuje vrásky.

Proč jsou výsledky viditelné?

Krátkodobě (po 1 až 2 aplikacích):

- Pleť je hladší díky exfoliaci a hydrataci.
- Optické zjemnění vrásek způsobené lepším napětím kůže.

Dlouhodobě (po 6–8 týdnech):

- Strukturální posílení kolagenové sítě → trvalé zmenšení hloubky vrásek.

Které typy vrásek lze redukovat?

Jemné vrásky (např. mimické linky kolem úst).

Hlubší vrásky (nasolabiální rýhy, čelní vrásky) – v kombinaci s jinými metodami (radiofrekvence).

Povadlá pleť (liftingový efekt díky kolagenu).

Klíčová výhoda oproti jiným metodám

Studená plazma nepoškozuje pokožku (jako jehly nebo lasery), ale přirozeně aktivuje biologické procesy. Proto je vhodná i pro citlivou pleť a dlouhodobé používání.

„Působí jako jemný budíček pro vaše kožní buňky, který je nastartuje do jejich mladistvého režimu“ vysvětluje dermatoložka Dr. Martina Jánská.

Pokud hledáte neinvazivní anti-aging řešení, studená plazma je ideální volbou. Pro maximální efekt ji kombinujte s vitamínem C, retinolem a SPF krémem.

SHRNUTÍ

Studená plazma představuje budoucnost kosmetologie, která spojuje vědeckou preciznost s šetrným přístupem. Ať už bojujete s akné, hledáte anti-aging řešení, nebo chcete zlepšit hygienu své kosmetické praxe, tato technologie nabízí řešení na míru. Její potenciál teprve začínáme objevovat – podle odborníků se do 5 let stane standardem v domácí i profesionální péči.

„Plazma není žádná magie, ale přirozený posun v kosmetické vědě. Představte si ji jako neviditelného strážce, který tiše pracuje v hlubinách vaší pokožky“ dodává kosmetička Marta Uhlířová.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Co je studená plazma (Cold Plasma) a jak funguje?

Studená plazma je ionizovaný plyn s nízkou teplotou, který generuje aktivní částice (kyslíkové a dusíkové radikály). Tyto částice pomáhají sterilovat pokožku, urychlovat hojení, stimulovat regeneraci buněk a redukovat bakterie, aniž by poškodily okolní tkáň.



2. Na jaké problémy je přístroj vhodný?

Přístroj se studenou plazmou lze použít k několika účelům. Akné a problematickou pleť. Vrásky a ztrátu elasticity. Záněty a zarudnutí. Dezinfekci drobných ran a po aplikaci (např. po mikrodermabrazii).

3. Jak často lze přístroj používat?

Doporučená frekvence závisí na typu aplikace. Pro preventivní péči: 1x až 2x týdně. Pro akutní problémy (akné, záněty): 3x až 4x týdně (podle potřeby). Po zákrocích (laser, mikrodermabrazie): 1x denně po dobu 3 až 5 dnů.

4. Je použití studené plazmy bolestivé?

Ne, aplikace je neinvazivní a bezbolestná. Můžete cítit mírné brnění nebo chladivý efekt, ale nedochází k poškození pokožky.

5. Jak dlouho trvá jedna aplikace?

Doba aplikace závisí na aplikované oblasti. Obličej: 3 až 10 minut. Lokální aplikace (jizvy, akné): 1 až 3 minuty na dané místo.

6. Mohu přístroj kombinovat s jinou kosmetikou?

Ano, ale doporučuje se před aplikací plazmy odstranit make-up a nečistoty. Po aplikaci použít hydratační krém nebo sérum (studená plazma zvyšuje vstřebatelnost aktivních látek). Vyhnout se agresivním kyselinám (AHA/BHA) bezprostředně před/po aplikaci.

7. Jak čistit a udržovat přístroj?

Před a po použití otřete aplikátor alkoholovým ubrouskem (70% alkohol). Nedávejte přístroj pod vodu, není vodotěsný. Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

8. Kdy uvidím výsledky?

U akné a zánětů: do 24 až 48 hodin (redukce zarudnutí). U vrásek a regenerace: po 2 až 4 týdnech pravidelného používání.

9. Je nutné používat ochranné pomůcky?

Při aplikaci není nutná ochrana očí, ale můžete zavřít víčka. Pokud máte citlivou pokožku, doporučuje se po aplikaci nanést zklidňující krém.

VLASTNOSTI & SPECIFIKACE

Šetrné a efektivní řešení bez narušení pokožky

Přístroj pracuje zcela neinvazivně. Během aplikace nedochází k mechanickému průniku skrz kůži.

Komfortní používání bez bolesti či diskomfortu

Celý průběh procedury je zcela bezbolestný a uživatelsky příjemný, vhodný i pro citlivější typy pleti.

Vysoká úroveň bezpečnosti

Zařízení splňuje přísné bezpečnostní standardy a je certifikováno dle platných evropských norem.

Dlouhodobá investice s dlouhou životností

Přístroj je navržen pro dlouhodobé a opakované používání bez nutnosti výměny součástí.

Univerzální pro všechny typy pleti

Bez omezení. Vhodný pro suchou, mastnou, citlivou i zralou pleť.

Ideální režim péče

Doporučená délka jedné aplikace je přibližně 10 minut.

Aplikace zaměřená na obličej a dekol

Přístroj je určen pro domácí použití na nejexponovanější části pokožky, které vyžadují zvýšenou péči.

Bez dalších výdajů

Pro aplikaci není třeba dokupovat žádný spotřební materiál ani drahé kosmetické produkty. Účinné výsledky dosáhnete i bez nich.

Finančně nenáročná péče o pleť

Žádné skryté náklady. Pouze jednorázová investice do přístroje s dlouhodobým užitkem.

Doporučená doba aplikace tváře:

Celková doba pro obličej (čelo, tváře, brada, nos): 1 až 3 minuty

Doba na jednu konkrétní zónu (např. jedna tvář): 10 až 30 sekund

Vzdálenost od pokožky: 1mm až 4 mm (přístroj by se neměl přímo dotýkat kůže)

IDEÁLNÍ POUŽITÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH

Opakovaný výskyt aknézní pleti



Zvětšené póry



Výskyt svědění



Zvýšená mastnota pleti



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Technologie: plasma & ozon.
- Materiál aplikátoru: keramika.
- Aplikční hlavice: vyměnitelné 3 různé velikosti.
- Výkon: 27W.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V.
- Rozměry: 38x32x13cm.
- Hmotnost: 2,5kg.

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO.
- 1x Stojánek.
- 3x Aplikční hlavice s různým průměrem.
- 1x Napájecí kabel 220V.
- 1x Návod k obsluze.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Objevte revoluční přístup k aplikaci pleti, který spojuje sílu plasmového výboje a ozonu. Přístroj BeautyRelax PlasmaForce Professional Studio je navržen pro hloubkovou regeneraci, čištění a omlazení pokožky v komfortu domácího nebo salonního prostředí. Profesionální péče o pleť s technologií plasmového toku a ozonu. Špičková technologie s viditelnými výsledky. Plasmový tok obohacený o ozon vytváří jemný výboj, který působí přímo na povrch pleti bez mechanického kontaktu. Tato metoda je zcela bezbolestná, neinvazivní a mimořádně účinná. Generovaný ozon má silný antibakteriální, protiplísňový a antimikrobiální efekt, díky čemuž eliminuje bakterie, roztoče a další nežádoucí mikroorganismy, které stojí za vznikem akné a podráždění pokožky. BeautyRelax PlasmaForce Professional Studio. Vaše nové tajemství zdravé, čisté a mladistvé pleti. Dopřejte své pokožce skutečně hloubkovou péči, která dává výsledky!




POPIS PŘÍSTROJE

1. Velký aplikátor
2. Střední aplikátor
3. Malý aplikátor
4. Kosmetický přístroj
5. Vstup pro konektor napájecího adaptéru
6. Stojánek



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **START/STOP**
3. Indikace nastaveného výkonu
4. Indikace nastaveného výkonu
5. Čas aplikace (v minutách)
6. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** intenzity
7. Tlačítko **SNÍŽENÍ** intenzity

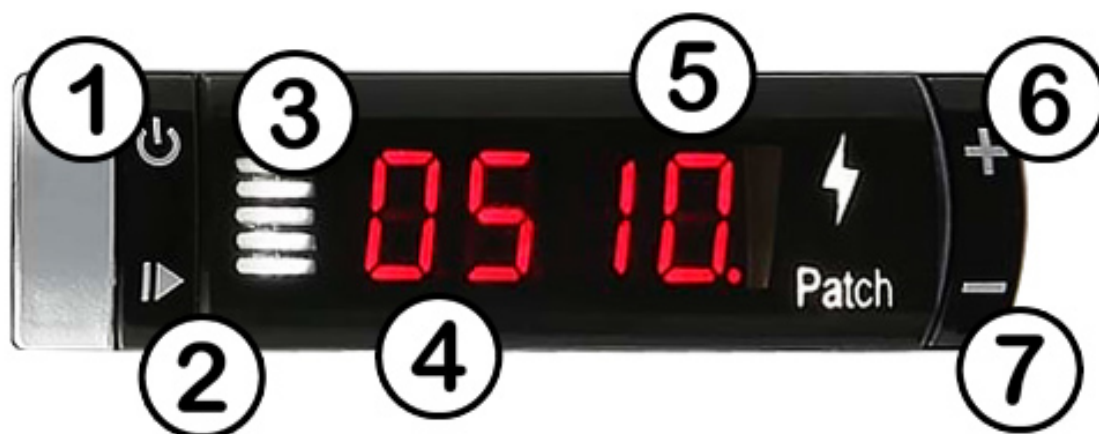

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Sundejte veškeré šperky jako např. náušnice, náhrdelníky, náramky, apod.
2. Odstraňte z pleti makeup. Dbejte důkladně na to, aby byla pokožka před použitím přístroje maximálně suchá. Výrazně tím zvýšíte komfort pro uživatele.
3. Zvolte aplikační hlavici dle velikosti, kterou potřebujete. K dispozici jsou 3 různé průměry. Výměnu aplikační hlavice provádějte vždy, když je přístroj vypnutý.
4. Nasaďte ochranné gumové rukavice.
5. Zapněte přístroj dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Aktivuje se displej.
6. Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete nastavit intenzitu. K dispozici je rozsah od 1 do 9. Intenzitu vždy nastavte tak, aby bylo uživateli působení plazmy příjemné.
7. Časovač je vždy primárně nastaven na hodnotu 10 minut.
8. Nyní je přístroj připraven k použití. Stiskem tlačítka **START/STOP** můžete zahájit použití na pleti. Připravenost přístroje k použití indikuje symbol blesku u nápisu **PATCH**.
9. Pomalu se pohybujte aplikační hlavicí po pleti. Plazmový výboj vznikne v případě, je-li aplikační hlavice v optimální vzdálenosti od pleti. Keramický aplikátor by se měl pohybovat ve vzdálenosti od pleti v rozsahu od 1mm do 4mm.
10. Hlavicí se pohybujete po pleti v doporučených směrech v pasáži tohoto návodu k obsluze: **METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU**.
11. Ošetření pleti je naprosto bezbolestné. Během používání můžete cítit mírné aroma, které doprovází průběh působení plazmového toku. Akusticky můžete slyšet zvuk „prskání“, který doprovází proudění plazmového výboje.
12. Zaměřte se na vybrané části obličeje nebo dekoltu, kde potřebujete účinek přístroje nejvíce.
13. Aplikační hlavice se nesmí v průběhu ošetření pleti dostat do kontaktu s žádným kovovým předmětem.
14. Aplikační hlavici nemějte na jenom místě déle než 10 sekund.
15. Činnost přístroje můžete kdykoliv pozastavit pomocí tlačítka **START/STOP**.
16. Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete kdykoliv změnit intenzitu.
17. Pokožka může v oblasti ošetření mírně zarudnout. Jedná se o přirozený jev. Pleť se v řádu několika minut dostane do normálu.
18. Prvních několik ošetření pleti by nemělo přesáhnout délku 10 minut za den.
19. V průběhu ošetření neaplikujte žádný druh kosmetického přípravku.
20. Po použití přístroje na pleti doporučujeme použít váš oblíbený kosmetický přípravek, krém nebo sérum.

DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- S aplikátorem nezůstávejte dlouho na jednom místě. Aplikátorem se po pleti pohybujte bez zastavení.
- V průběhu ošetření se snažte, aby se keramický aplikátor přímo nedotýkal pleti. Keramická plocha by se měla nacházet ve vzdálenosti od pleti v rozsahu mezi 1 až 4 milimetry.
- PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavičky fyzicky neprotrhne kůži.
- PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Před a při použití je striktně zakázáno používat jakékoliv kosmetické přípravky. Pokud použijete pro čištění pleti před použitím přístroje odličovací krém nebo micelární vodu, vyčkejte několik minut, aby měla pleť možnost uschnout.
- Při použití přístroje vždy dbejte na to, aby nebyl napájecí kabel příliš napnutý.
- Bezprostředně po použití přístroje nevytavujte pleť přímému slunečnímu záření.
- Pokud vaše pleť v průběhu nebo po ošetření přístrojem bude reagovat negativně, ihned použití přístroje zastavte a kontaktujte vašeho praktického nebo kožního lékaře pro konzultaci.



**ATTENTION
PLEASE!**

METODA APLIKACE OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

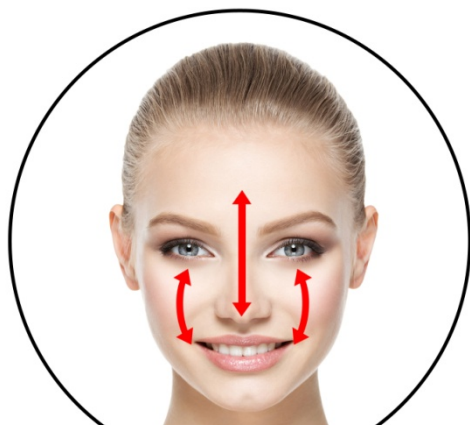

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU

Údržba přístroje je velmi důležitá zejména v případech, kdy je přístroj používán více osobami. Při údržbě přístroje věnujte pozornost v těchto bodech:

- Keramický povrch aplikační hlavice udržujte vždy čistý.
- Použijte nejlépe přípravek roztok s obsahem alkoholu.
- Přípravek nestříkejte přímo na hlavici. Naneste na hadřík a poté otřete povrch hlavice.
- Vždy povrch hlavici osušte druhým samostatným hadříkem do sucha.
- K čištění nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
- Žádná část aplikační hlavice není vodotěsná. Není určena k ponoření do vody.

INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA

V průběhu používání přístroje můžete narazit na situaci, kdy budete potřebovat poradit ohledně používání přístroje nebo technického problému. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám plně k dispozici.



beautyrelax

   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Facebook: facebook.com/BeautyRelaxEquipment/

OBRÁZKOVÁ GALERIE



























LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

DOLOŽKA KE ZPŮSOBU POUŽÍVÁNÍ

Prodávající firma SANTADRIA s.r.o. IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454 tímto výslovně prohlašuje, že nenese odpovědnost za jakékoliv jednání, způsob, použití či aplikaci produktu ze strany zákazníka. Zákazník je plně odpovědný za veškeré následky vyplývající z užívání produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za právní důsledky způsobené tím, že by produkt mohl být v rozporu s platnou legislativou, obzvláště s legislativou týkající se podmínek pro používání přístrojů obdobného typu s ohledem na komerční použití přístroje zákazníkem. Jakákoliv povinnost zjišťovat splnění právních předpisů je na straně zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že je jeho výhradním úkolem zajistit, aby použití produktu bylo v souladu se zákony, předpisy a normami aplikovatelnými v konkrétní jurisdikci. Tento text představuje úplnou a konečnou dohodu o vyloučení odpovědnosti prodávajícího za aplikační účely produktu a nahrazuje jakoukoliv předchozí ústní či písemnou komunikaci týkající se odpovědnosti za produkt.

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj

PLASMAFORCE PROFESSIONAL STUDIO

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3106**

EAN: **8594166124066**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2024

EN 55014-2:2021EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2020 EN 61000-4-4:2012

EN 61000-4-11:2020EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Přístroj slouží ke kosmetické péči o pleť. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Technologie přístroje slouží pro neinvazivní aplikaci na pleť. Žádná z částí aplikační hlavice není schopna narušit integritu pleti. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.

V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu. Určeno k profesionálnímu použití v kosmetickém salonu.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.2.2025