

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický pleťový přístroj
BeautyRelax BR-1120

ROLLER THERAPY



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
DOPORUČENÉ OBLASTI OŠETŘENÍ	5
ÚČINNÉ ZEJMÉNA NA...	5
SPECIFIKACE	5
OBSAH BALENÍ	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
3D MASÁŽ	7
IONIZACE	7
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
3D MASÁŽ & IONIZACE	10
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	11
SMĚR POHYBU APLIKAČNÍ HLAVICE	12
METODY OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	13
DOPORUČENÉ ČASY OŠETŘENÍ PLETI	14
DOSAŽITELNÉ VÝSLEDKY	14
NABÍJENÍ BATERIE	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	16
CERTIFIKACE	16
DOVOZCE	16

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesí distributor odpovědnost.



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách, oblasti spánků nebo v oblasti štítné žlázy



DOPORUČENÉ OBLASTI OŠETŘENÍ

- Vějířkovité vrásky kolem očí.
- Koutky úst.
- T zóna na obličeji.
- Krk.

ÚČINNÉ ZEJMÉNA NA...

- Povadlou a nezdravě vyhlížející pleť.
- Zjemnění a vyhlazení jemných vrásek.
- Potlačení tmavých kruhů pod očima.

SPECIFIKACE

- Zcela neinvazivní charakter ošetření.
- Bezpečně, bezbolestně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Časová nenáročnost.
- Minimum kontraindikací.
- Aplikační hlavice z ušlechtilé nerez oceli.
- Luxusní design.
- Automatické vypnutí po 5 minutách.
- Šetrný k pokožce.
- Bezdrátový (snadno se používá).
- Vhodný pro všechny typy pleti.

OBSAH BALENÍ

- Kosmetický pleťový přístroj ROLLER THERAPY.
- Napájecí USB kabel.
- Adaptér do sítě 220V.
- Návod k obsluze.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Ultrazvukové vlny: 3Mhz.
- Napájení: Lithiová baterie (kapacita 750mA).
- Délka nabíjení: přibližně 3 hodiny.
- USB kabelem z PC nebo sítě 220V.
- Napájení: 5V 1,000mA.
- Rozměry: 16x4,8x3,4cm.
- Hmotnost: 190g.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Kosmetický přístroj v luxusním červeném designu kombinuje hned tři účinné metody ošetření pleti: 3MHz ultrazvukové vlny, intenzivní 3D masáž a ionizaci. Pečujte o svoji pleť technologií, která vychází ze skutečných vědeckých poznatků!

Kosmetický přístroj BR-1120 vypadá na první pohled jako velká luxusní rtěnka. Opak je pravdou. Přístroj v sobě skrývá účinný nástroj pro ošetření pleti. Aplikační hlavice jsou umístěny z obou stran. Na jedné straně aplikátor ultrazvukových vln, na straně druhé kulička pro intenzivní 3D masáž a ionizaci. Kosmetický přístroj BeautyRelax se stane nepostradatelným pomocníkem v péči o vaši pleť. Je třeba zdůraznit, že ošetření je bezpečné, bezbolestné a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. Přesto však docílíte markantních výsledků.

Pleť ošetříte ve dvou krocích. Pomocí kuličky zlepšíte krevní oběh, podpoříte látkovou výměnu buněk. Ve druhé fázi stimulujete pleť ultrazvukem.


3D MASÁŽ

Na jednom konci přístroje se nachází kulička z ušlechtné nerezové oceli. Při kontaktu s pokožkou generuje příjemné teplo. Působení tepla napomáhá k důkladnému čištění pleti. Otevírá póry, zvyšuje lokální krevní oběh. Uvolňuje a stimuluje pleť. Rotační kulička poskytuje intenzivní 3D masáž. Zlepšuje se krevní oběh a lymfatický systém obličeje. Zlepšuje texturu pokožky.

IONIZACE

Ionizace je proces, během kterého pronikají ionty přímo do jednotlivých vrstev pokožky. Dochází k uvolnění kožních pórů. Působením iontů získávají buňky lepší schopnost absorbovat výživové látky z krémů, masek a sér hlouběji do pokožky. Ionizační terapie je doplněna o vibrační masáž, která zlepšuje krevní oběh prostřednictvím stimulace lymfatického systému obličeje. Ošetření je vhodné pro suchou, mastnou i citlivou pleť. Nespornou výhodou působení iontů je lepší přirozené absorbování vlhkosti.


Aplikační hlavice generuje velké množství záporných iontů, které jsou navázány na kladné ionty v kožních buňkách. Vytvoří se tak optimální cesta, aby se živiny z krémů dostaly co nejhluběji do pokožky. Při běžné aplikaci krému většinu absorbuje svrchní vrstva pokožky (epidermis). Zbytek bez jakéhokoliv dalšího využití vyschne bez užitku.

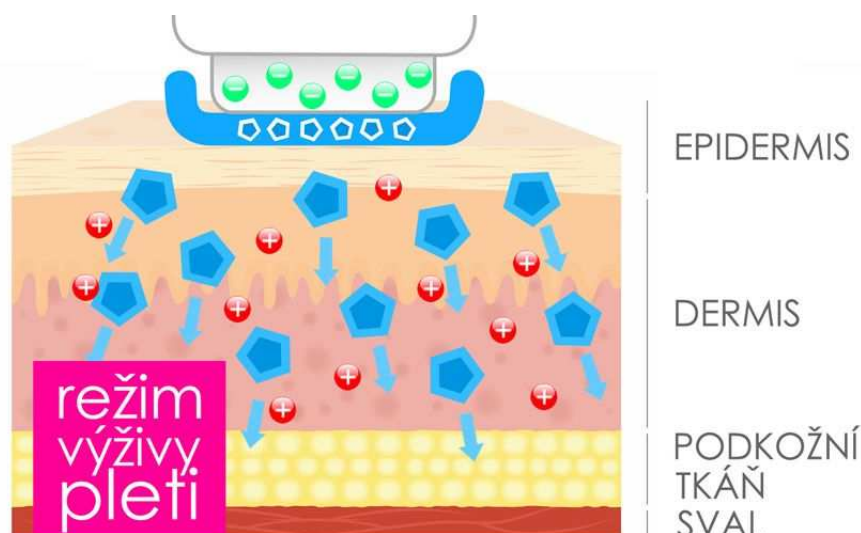

ULTRAZVUKOVÉ VLNY


Aplikátor při kontaktu s pokožkou uvolňuje energii se specifickou frekvencí 3MHz a výkonem. Hodnoty uvolněné energie jsou optimalizovány k tomu, aby způsobili tepelný gradient, který významným způsobem ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Takto dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Dojde ke zlepšení textury pokožky. Vrásky obličeje jsou potlačeny a kontury obličeje napnuty.

POPIS PŘÍSTROJE

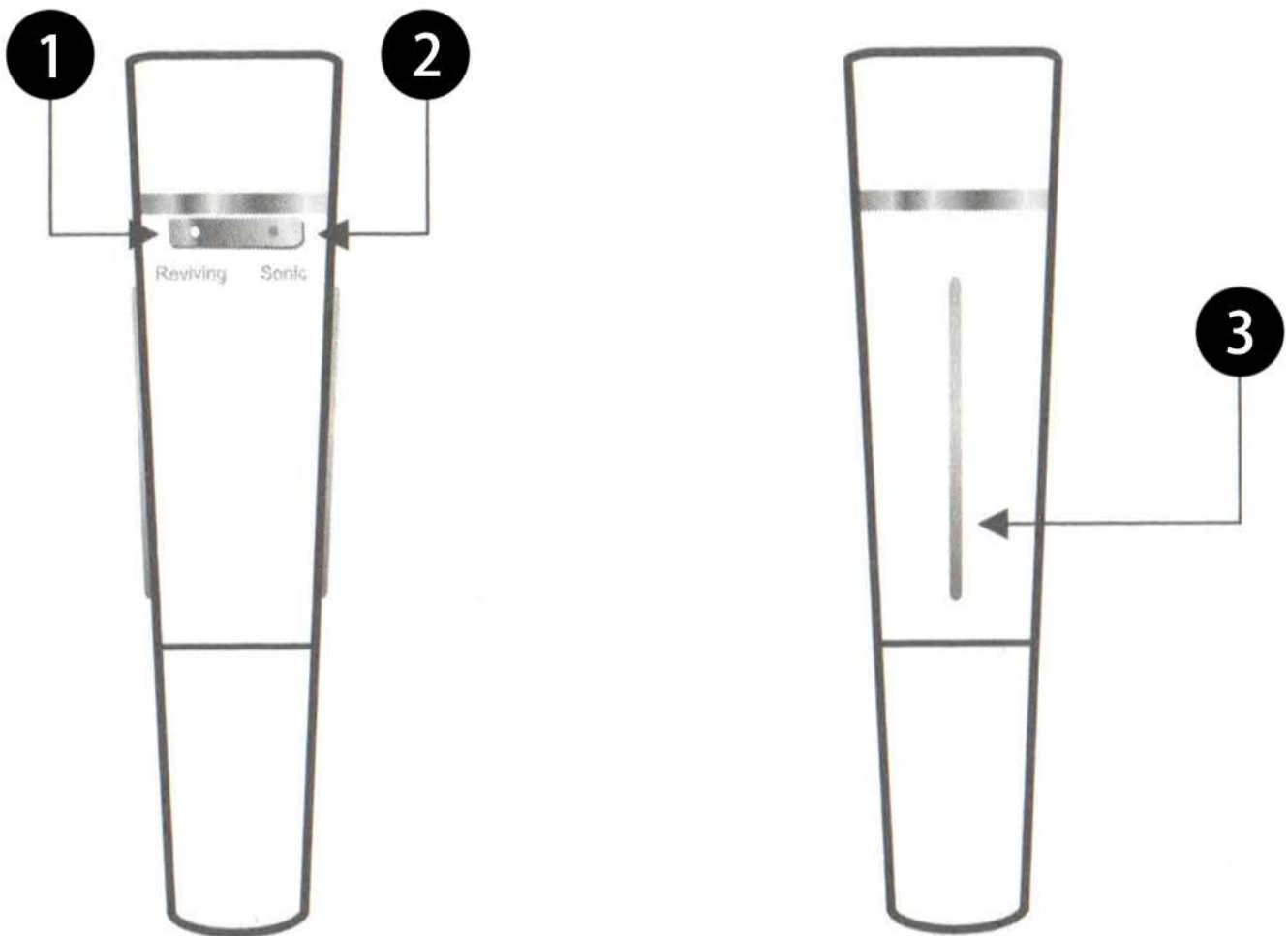

- 1. Tlačítko ionizace
- 2. Tlačítko ultrazvuk
- 3. Kontaktní elektrody pro funkci ionizace

POPIS PŘÍSTROJE

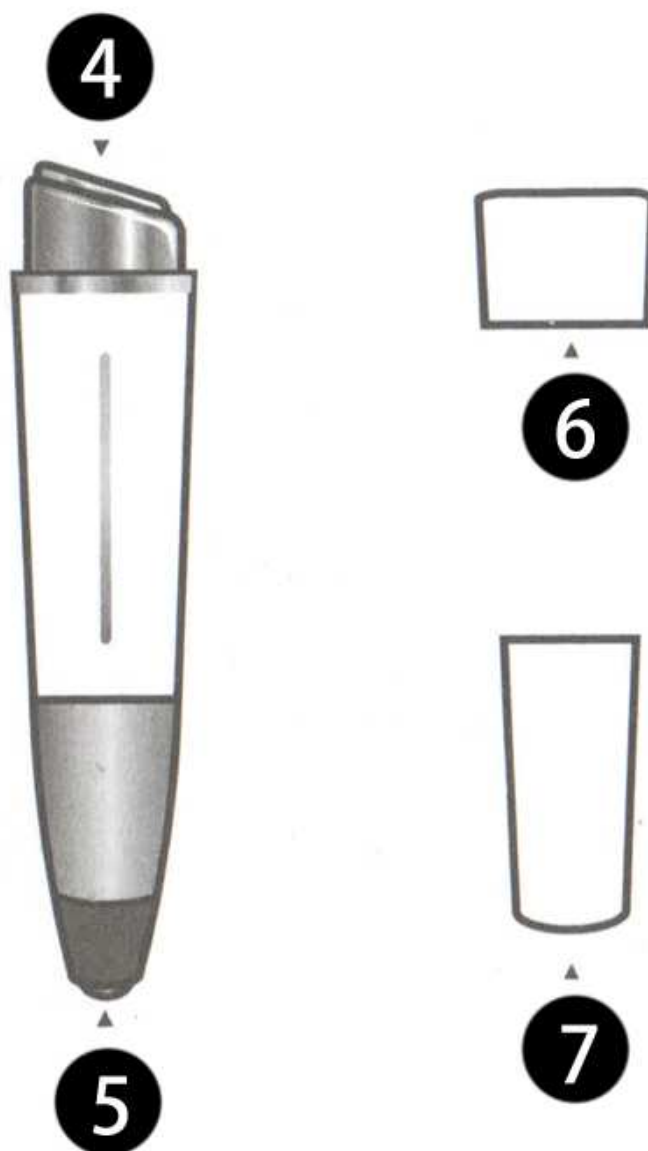

- 4. Aplikační hlavice – ultrazvukové vlny
- 5. Aplikační hlavice – 3D masáž/ionizace
- 6. Kryt hlavice
- 7. Kryt hlavice

3D MASÁŽ & IONIZACE


Než přistoupíte k samotnému ošetření pleti, pokožku zbavte mastnoty a make-upu. Vyčkejte, až pleť zcela uschne. Na pleti se před přístrojovým ošetřením nesmí vyskytovat stopy vlhkosti.



Stiskněte tlačítko REVIVING pro aktivaci ionizace.



Při používání funkce ionizace držte vždy prsty na kontaktních elektrodách. Předtím si pečlivě vysušte ruce, aby se na nich nenacházela vlhkost.

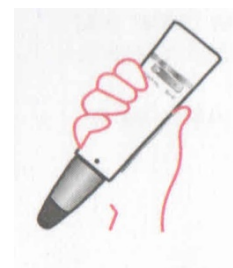

Nyní můžete zahájit ošetření pleti přístrojem.



Pohybujte aplikační hlavicí ve směru šipek na obrázku. Od středu obličeje na okraj.




ULTRAZVUKOVÉ VLNY


Odstraňte kryt aplikační hlavice pro ultrazvukové vlny.

Při používání funkce ultrazvukových vln vždy použijte čirý vodivý gel, který zakoupíte ve všech prodejnách zdravotnických potřeb. Před použitím naneste jemnou vrstvu na hlavici přístroje. Gel zlepšuje vodivost a celkový přenos vln z hlavice do pokožky. Po ukončení ošetření aplikační hlavici pečlivě očistěte suchým hadříkem. (nepoužívejte žádné agresivní čisticí přípravky či roztoky).

Funkci ultrazvukových vln zapnete pomocí tlačítka SONIC.

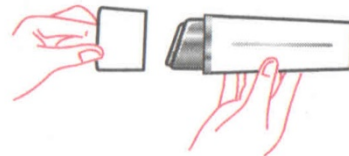

SMĚR POHYBU APLIKAČNÍ HLAVICE

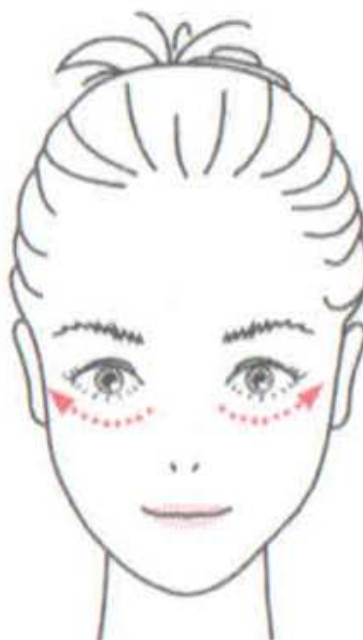

METODY OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

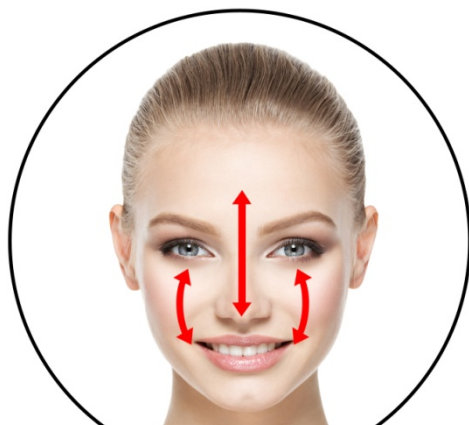

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

DOPORUČENÉ ČASY OŠETŘENÍ PLETI

3D masáž & ionizace 2x až 3x týdně v délce 3 až 5 minut.
Ultrazvukové vlny 2x až 3x týdně v délce 5 až 10 minut.

DOSAŽITELNÉ VÝSLEDKY

Po dokončení ošetření může pleť mírně zarudnout. Zarudnutí je způsobeno rozšířením krevních cév a zvýšením prokrvením. V některých případech se mohou objevit i mírné otoky, což způsobuje zejména výskyt více tekutiny na konkrétních místech, než na ostatních místech. Tyto příznaky však znamenají, že jste dosáhli požadovaného cíle. Všechny tyto na první pohled negativní příznaky zmizí pozvolna krátce po dokončení ošetření.

Výsledkem ošetření bude viditelné zlepšení pružnosti a textury pleti. Pleť bude hladší a zjemní se přechody v hrubších oblastech pokožky. Ošetřená oblast pleti bude mít výrazně jemnější mimické a vějířkovité vrásky. Výsledky závisí především na dodržování všech kroků ošetření pleti a typu vaší pleti.

Klinické studie prokázaly, že se u sledovaných uživatelů přístroje prokázalo snížení jemných linek o 30% a 16% výraznějších vrásek v období 4 týdnů. Celkově se kvalita pleti výrazně zlepšila jak vizuálně, tak i na dotek. Výsledky se lišily v závislosti na individuálních vlastnostech pleti.

Čeho docílíte pravidelným používáním přístroje

- Projasnění pleti v okolí očí a odstranění nezdravě vyhlížejícího stavu.
- Zpevnění a vypnutí pleti.
- Redukci jemných mimických vrásek.
- Posílení preventivní ochrany proti předčasnému stárnutí pokožky.
- Aktivuje remodelaci kolagenových vláken.
- Neinvasivní, bezpečnou a bezbolestnou aplikaci.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou lithiovou baterii (kapacita 750mA). Nabíjí se pomocí kabelu, který je součástí balení. Vždy se ujistěte, že kabel není poškozený. Existují dva způsoby nabíjení:


- 1) přes USB port počítače
- 2) přes adaptér do sítě 220V (součástí balení)

Baterie se nabije přibližně za 3 hodiny. Je-li baterie plně nabita, měla by vystačit přibližně na 2 hodiny provozu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně nerezovou aplikační hlavici. Dbejte na to, aby vlhkost nevnikla do přístroje.

Vyšroubujte korunku, která drží aplikační kuličku. Korunku i kuličku pečlivě vyčistěte.

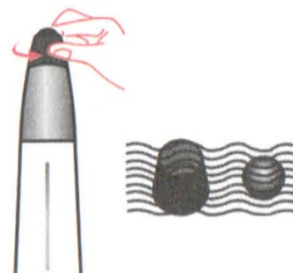

Z aplikační hlavice ultrazvukových vln pečlivě očištěte všechny zbytky vodivého gelu a pečlivě vysušte suchým hadříkem.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.