

NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj na vrásky

BeautyRelax BR-2530

RFLIFT PREMIUM SWITCH **PROFESSIONAL**



OBSAH:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
POUŽITÍ SONOGELU	5
ÚČEL POUŽITÍ	6
KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT	6
KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	7
HLAVNÍ VÝHODY	9
OBSAH BALENÍ	9
PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK	10
METODY REDUKCE VRÁSEK	10
RADIOFREKVENCE	12
EMS	12
MIKROPROUD	12
SVĚTELNÁ TERAPIE	13
GALVANICKÝ PROUD	14
PŮSOBENÍ CHLADU	14
POPIS PŘÍSTROJE	15
POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC	17
VÝMĚNA APLIKAČNÍCH HLAVIC	18
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE PRO JEDNOTLIVÉ APLIKAČNÍ HLAVICE	19
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	23
MOŽNÉ OBLASTI APLIKACE PŘÍSTROJE	25
METODA POUŽITÍ PŘÍSTROJE NA PLETI	26
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	27
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	31
INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA	31
PÁR VĚT ZÁVĚREM	32
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	33
CERTIFIKACE	33
EU DISTRIBUTOR	33
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	34

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL** je přístroj z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní použití na pleti. V praxi to znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod horní vrstvu pokožky. **Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění.**
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- BeautyRelax **RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL** je certifikován a splňuje všechny evropské normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny. Je zajištěna bezpečnost všech elektronických součástí.
- Použití je vždy spojeno s čirým vodivým sonogelem. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Radiofrekvenční vlny, mikroproud a EMS elektrické pulzy získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- Při použití vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti maximálně v časovém rozsahu několika sekund (tzv. razítkováním). Vždy začínějte použití na pleti s nejnižší úrovní intenzity. Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu. Použití na pleti by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pleť. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí. Hlavici přístroje neaplikujte na pleti při jednom použití více než třikrát na stejném místě.
- Pokud budete aplikační hlavici držet na pleti příliš dlouho a navíc budete mít nastavenou nejvyšší úroveň výkonu, přístroj je dostatečně výkonný na to, aby vaši pleť nepříjemně poranil. **Proto prosím přistupujte k použití přístroje s maximální pečlivostí a šetrností.**
- Počet opakovaných použití je velice individuální. Záleží na věku a stavu pokožky. Ideální je jednou, maximálně dvakrát do týdne. Pleť a zejména vrstva dermis potřebuje čas pro autonomní proces regenerace. Rozhodně neplatí pravidlo - čím častější používání, tím lepší dosažitelné výsledky. Stejně tak neplatí, čím větší výkon, tím rychlejší a lepší výsledek. Pleť každého z nás je orgán s individuálním stupněm citlivosti. Pro někoho může být střední hodnota výkonu již výrazně bolestivá, někdo nemá problém při delším použití snést nejvyšší výkon.
- Po každém použití přístroje vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čírého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktních aplikátorů a znehodnocení přístroje. Výrazně tím zvýšíte životnost přístroje.
- Pokud si nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte se na nás obrátit. Telefon: 737196160 nebo email: mh@santadria.cz K dispozici je vám konzultant pro značku BeautyRelax Martin Hrbek, který odpoví na všechny vaše případné dotazy či nejasnosti.
- Přejeme vám hodně úspěchů ve vašem úsilí ke zdravější a krásnější pleti.
Tým BeautyRelax.cz



UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. **Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.**
- Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. Po každém použití je třeba důkladně dezinfikovat aplikační hlavici zejména v případě používání přístroje více osobami.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbítý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj v průběhu používání žádným způsobem nezakrývejte. Mohlo by dojít k jeho přehřátí!
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- **Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.**
- **Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.**

POUŽITÍ SONOGELU

Použití je vždy spojeno s čirým vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Ideálně bez přidaných látek. Na značce nezáleží. Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Technologie přístroje se tak mohou na pleť lépe navázat.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Novinka v oblasti přístrojové péče! Kosmetický přístroj na vrásky BeautyRelax Rflift Premium ve verzi Switch Professional je profesionální zařízení, které je zaměřeno na zralou a unavenou pleť s výskytem vrásek v oblasti obličeje, krku a dekoltu. 7 moderních technologií – radiofrekvence, mikroproud, EMS pulzy, fotonové světlo (modrá, červená, zelená), galvanický proud, působení chladu. Technologie jsou integrované do 3 vyměnitelných hlavíc. Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken. Určeno pro všechny typy pleti bez omezení. BeautyRelax Rflift Premium Switch Professional je špičkový kosmetický přístroj, na který se můžete ve vaší cestě k zlepšení kondice vaší pleti spolehnout na 100%. Zažijte vrchol technologického vývoje v oblasti estetiky „na vlastní kůži“ již dnes!

KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Při stavu vysokých horeček.
- Akutní kožní infekce, ekzémy, popáleniny nebo vředy.
- Kovové implantáty v těle (omezení platí pouze na místech použití přístroje).
Neplatí pro zubní implantáty v dutině ústní.
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka.
- Přístrojem se nikdy nepohybujte na očních víčkách nebo v těsné blízkosti štítné žlázy.
- Při výskytu velmi výrazně rozšířených žilek.
- Osoby s kardiovaskulárními problémy, jako jsou srdeční arytmie, srdeční selhání nebo implantované kardiostimulátory.
- Osoby s neurologickými onemocněními, jako je například epilepsie.
- Erysipel neboli růže (akutní lokalizovaný zánět kůže).
- Těhotenství.



KOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL je přístroj, který je určen pro kosmetické ošetření pleti na velmi kvalitní a profesionální úrovni. **Přístroj není zdravotnický prostředek.** Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. Přístroj neposkytuje prostřednictvím aplikačních hlavic žádnou technologii, která by narušila integritu pleti. Nevyužívá žádné jehly. Žádná část z aplikačních hlavic nikdy nepronikne skrz povrch pleti. Přístroj byl vyvinut tak, aby poskytoval základní kosmetická ošetření: vyčištění pleti, hydratace pleti, zpracování kosmetických přípravků, podpora zlepšení kondice pleti, zklidnění pleti. Přístroj působení na pleť celou řadou technologií: radiofrekvence, mikroproud, galvanický proud, jemné EMS pulzy, světelná terapie.

Rozsah licence pro využívání jednotlivých technologií za účelem komerčního používání je dána zákonem v každé zemi Evropské unie. Ten stanoví, jaká je třeba úroveň erudice pro jednotlivé technologie, které přístroj nabízí. Respektive dosaženou úroveň vzdělání/licence pro přístroj obdobného typu.



Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za používání přístroje za podmínek, které jsou v rozporu s legislativou v dané zemi používání. Provozovatel může veřejně pro komerční použití pracovat pouze s funkcemi a technologiemi přístroje, na které má oprávnění dle aktuálně platného znění zákona/vyhlášky. Distributor/prodejce SANTADRIA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody, které vznikly v rozporu s používáním podmínek stanovených v tomto návodu k obsluze.



HLAVNÍ VÝHODY

- Určeno pro používání doma nebo v salonu
- Automatické programy - ano, pro každou hlavici
- Moderní technologie: radiofrekvence, mikroproud, EMS pulzy, fotonové světlo (modrá, červená, zelená), vibrace, galvanický proud, působení chladu
- Přímé zacílení na remodelaci kolagenových a elastických vláken
- Určeno pro všechny typy pleti bez omezení
- Neinvazivní použití (žádná část aplikátoru nepronikne skrz pokožku)
- Opakovatelné použití v pohodlí domova
- Samotné použití zabere pouhých několik minut
- Skutečně účinné řešení určeno pro zralou a unavenou pleť
- Neinvazivní lifting na stejné úrovni jako v estetickém studiu
- Certifikovaný přístroj
- Naprosto bezpečné používání při dodržení bezpečnostních doporučení
- Aplikace nezatěžuje žádným způsobem organismus
- Určeno pro obličej, krk a dekolt
- Použití bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Vysoká užitná hodnota přístroje
- Přístroj nabízí pro aplikaci na pleti pouze moderní účinné technologie
- Při pravidelném používání dosažitelné účinky neinvazivní rejuvenace pleti
- Optimalizovaný výkon pro maximální účinek při zachování šetrnosti k pleti
- Zjemnění hlubokých i jemných mimických vrásek
- Zvýšení pružnosti pleti
- Dosažitelný liftingový efekt
- Vyrovnání jizviček a nerovností pleti
- Zvýraznění charakteristických kontur obličeje
- Omlazený a prozářený vzhled
- Napájení: síťový adaptér 220V
- Rozměry: 18,5x4,5x5,5cm
- Hmotnost: 148g

OBSAH BALENÍ

- 1x Kosmetický přístroj BeautyRelax
- 3x Vyměnitelné aplikační hlavice
- 1x Napájecí adaptér 220V
- 1x Sada vatových hadříčků
- 1x Návod k obsluze



PROBLEMATIKA VÝSKYTU VRÁSEK


Proces tvorby vrásek je přirozený jev. Jedná se o důsledek stárnutí pokožky. Postupem času ztrácí svoji pružnost. Dochází ke zpomalení buněčné obnovy, což má za následek neschopnost vytvářet dostatečné množství kvalitního kolagenu. Vlivem **snížené produkce kolagenu** vznikají na pokožce rýhy, které organismus není schopen bez pomoci vyrovnat. Zvrásnění pleti postupně proniká až do vrstvy dermis - škály (podpůrná tkáň kůže). Výsledkem je pleť



s výskytem velkého množství hlubokých a výrazných vrásek. Vrásky je možné rozdělit do dvou základních skupin. **Dynamické vrásky**, které vznikají kontrakcí (stahováním svalů). Začínají se objevovat kolem 35. roku života. **Statické vrásky** jsou důsledkem povadnutí spodní vrstvy kůže a nízkou produkcí kolagenu. Statické vrásky se začínají objevovat kolem 40. roku života.


METODY REDUKCE VRÁSEK

Možnosti vyhlazení vrásek se rozdělují do základních dvou skupin: **invazivní** a **neinvazivní**. Invazivní metoda zahrnuje všechny druhy chirurgických zákroků, kde se pracuje se skalpelem nebo injekcemi. Nástroj doktora prochází fyzicky přes povrch pleti. Neinvazivní metody zahrnují celou řadu kosmetických přípravků, krémů, gelů, olejů či sér. Další možností je přístrojové ošetření pleti pomocí vybraných technologií, které mají za úkol aktivně stimulovat přirozenou tvorbu kolagenu a posílení elastických vlánek. Velký rozmach v oblasti kosmetiky zažívá technologie **radiofrekvence**. Dosahuje nejlepšího poměru **šetrnosti** a **efektivity**.

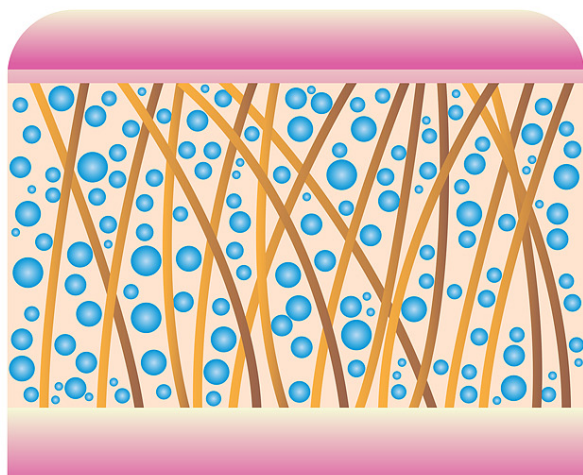

VYPNUTÁ PLEŤ BEZ VRÁSEK

DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
PRUŽNÁ ELASTICKÁ VLÁKNA

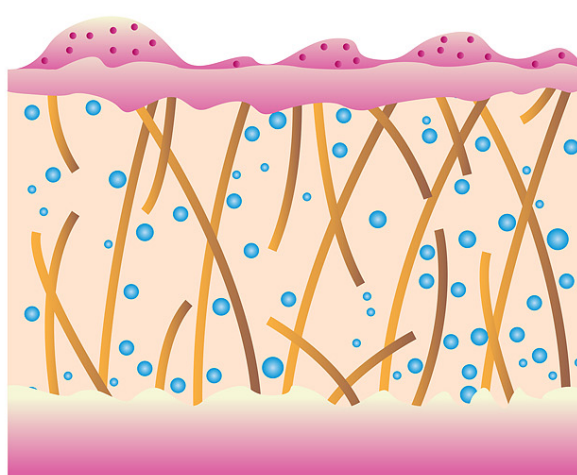

POVISLÁ PLEŤ S VRÁSKAMI

NÍZKÉ MNOŽSTVÍ KOLAGENU
SNÍŽENÁ PRUŽNOST ELASTICKÝCH VLÁKEN



RADIOFREKVENCE

BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL využívá pokročilou technologii působení radiofrekvenčních vln. Kontaktní plochy umístěné na aplikační hlavici dodají do podkožní vrstvy radiofrekvenční energii s optimálně zvoleným výkonem a frekvencí. Množství radiofrekvenční energie si sami můžete regulovat podle citlivosti pleti. Průměrná délka použití závisí na velikosti plochy pleti, kde chcete přístroj aplikovat. Samotné používání přístroje je naprosto snadné a intuitivní. Probíhá formou „razítkování“ obličeje nebo rychlejších krátkých pohybů. Kontaktní plochy na aplikační hlavici mají speciální tvarování. Díky tomu můžete přístroj použít kompletně celou oblast obličeje bez vynechání volných mezer.



EMS

Kontaktní plochy aplikační hlavice generují EMS pulzy. Elektrické pulzy cílí přímo na strukturu svalových vláken. Stejným způsobem fungují klasické elektrostimulátory, které prostřednictvím gelových nalepovacích elektrod stimulují svaly na vybraných částech těla. Elektrické pulzy kosmetického přístroje pronikají přes svrchní část pokožky přímo k obličejovým svalům. V oblasti obličeje docílíte zlepšení textury pokožky, jejího tónu a nárůstu elasticity. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. Zvýrazníte kontury obličeje.



MIKROPROUD

Informace o použití elektrického proudu ve vás může vyvolat strach případně smíšené pocity. **Nemějte rozhodně žádnou obavu!** V případě elektrického proudu, který používají kosmetické přístroje, jde o vysoce bezpečnou metodu aplikace napleti. Výkon je omezen tak, abyste si žádným způsobem nemohli ublížit. Technologie mikroproudu vychází ze stejného základu, jako EMS pulzy. Jedná se o pulzy elektrického proudu, které mají velice specifickou frekvenci a výkon. Mikroproud působí do vrstvy dermis pro podporu elastických vláken. Oproti tomu EMS pulzy mají výkon a frekvenci zvolenou tak, aby pronikly hlouběji až k obličejovým svalům.



SVĚTELNÁ TERAPIE

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.



Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetiky. **Technologie fotonového světla pracuje v programu LED.**

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

ČERVENÉ SVĚTLO (vlnová délka 625nm)

- Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu.
- Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků.
- Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni.
- Brání v tvorbě pigmentu.

MODRÉ SVĚTLO (vlnová délka 465nm)


- Aktivuje porphyryny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie).
- Antibakteriální a protizánětlivý účinek.
- Prevence proti tvorbě akné.
- Bezpečné a efektivní použití.

ZELENÉ SVĚTLO (vlnová délka 525nm)

- Přispívá k eliminaci pigmentových skvrn.
- Zpomaluje produkci melaninu o 40 až 60%.
- Vyrovnává barevný tonus pokožky.
- Protizánětlivý účinek.
- Vhodný pro všechny typy pleti.

GALVANICKÝ PROUD

Aplikační hlavice vytváří na svém povrchu proud s možností proměnlivého náboje. Řídící jednotka kosmetického přístroje umožňuje úpravu galvanického proudu takovým způsobem, aby docházelo ke kladnému či zápornému náboji. Kladná a záporná ionizace má odlišné účinky na pleť.

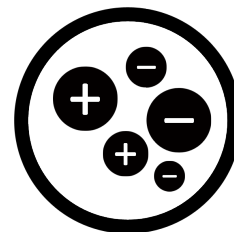

Kladná ionizace - důkladné vyčištění pleti


Kladná ionizace vytáhne záporně nabité nečistoty jako magnet. Zažijete skutečně čistou pleť jako nikdy předtím. Pouze čistá pleť je ta zdravá!

Záporná ionizace - hloubkové vyživení pleti

Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno vyschnutí na povrchu. Absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky!

PŮSOBENÍ CHLADU

Při použití kombinace technologií přístroje dochází k ohřevu plet. Proto je nezbytné na závěr přístrojové aplikace dostat pleť do normálu. Ochlazení pleti je obvykle přístrojová péče zakončena. Pleť se zklidní a dochází ke stažení kožních pórů.

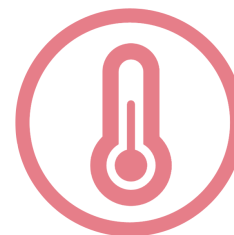

POPIS PŘÍSTROJE

1. Displej
2. Tlačítko **MODE**
3. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** intenzity
4. Tlačítko **SNÍŽENÍ** intenzity
5. Tlačítko **LED** (fotonové světlo)
6. Vstup pro napájecí síťový adaptér
7. Multifunkční vyměnitelná aplikační hlavice



POPIS PŘÍSTROJE



POPIS APLIKAČNÍCH HLAVIC

**4 KONTAKTNÍ PLOCHY
RF THERMAGE**



**TEPLOTNÍ
SENZOR**

**FOTONOVÉ SVĚTLO
ČERVENÁ - MODRÁ - ORANŽOVÁ**



**GALVANICKÝ
PROUD**

**FOTONOVÉ SVĚTLO
ČERVENÁ - MODRÁ - ZELENÁ**



**RF THERMAGE
MIKROPROUD
EMS**

VÝMĚNA APLIKAČNÍCH HLAVIC

Přístroj RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL umožňuje snadnou výměnu aplikačních hlavice. K dispozici jsou na výběr 3 druhy s různými technologiemi. Hlavice doporučujeme vyměnit vždy, když je přístroj odpojený od napájecího adaptéru. **Aplikační hlavice se nesmí šroubovat.** Stačí jednoduše hlavici tahem uvolnit a tlakem ukotvit.



Tři kontaktní body, které musí pasovat do otvorů na zadní straně aplikátoru.



Konektor pro uchycení aplikátoru.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

PRO JEDNOTLIVÉ APLIKAČNÍ HLAVICE

1. Nasaďte na horní část přístroje výše uvedenou aplikační hlavici. Ujistěte se, že je aplikátor zatlačen nadoraz.
2. Připojte přístroj k napájecímu síťovému adaptéru.
3. Aplikujte na část pleti, kde chcete přístroj použít, tenkou vrstvičku sonogelu. Pokud je plocha pleti pro aplikaci přístroje větší, sonogel nanášejte postupně po částech.
4. Tato aplikační hlavice disponuje pokročilou technologií multipolární radiofrekvence tzv. **THERMAGE**. Špičková a vysoce účinná metoda pro aktivní stimulaci vrstvy dermis za účelem podpory tvorby kolagenu a nastartování procesu remodelace elastických vláken.
5. Na displeji přístroje svítí nápis **LIFTING - TIGHTENING**.
6. Pro tuto aplikační hlavici si můžete pomocí šipek **ZVÝŠIT** nebo **SNÍŽIT** intenzitu působení radiofrekvence. K dispozici jsou 4 úrovně intenzity. Zvolte si intenzitu, která je vám na pleti nejvíce příjemná. Aktuálně nastavenou úroveň intenzity zobrazuje displej v jeho horní části pomocí jednotlivých dílků. Ostatní tlačítka na ovládacím panelu nejsou pro použití této aplikační hlavice aktivní.
7. Pokud se po pleti pohybujete táhlými pohyby, můžete nastavit vyšší úroveň intenzity. Pokud využijete aplikaci přístroje na pleti metodou „razítkování“, je třeba sladit délku kontaktu povrchu aplikační hlavice s pletí a nastavení úrovně výkonu. V průběhu použití přístroje byste měli na pleti cítit pouze příjemné teplo. Nastavená intenzita by neměla překročit hranice vaší komfortní zóny. Mějte na paměti, že různé části obličeje, krku nebo dekoltu mohou mít různou citlivost. Podle toho přistupujte k nastavení úrovně výkonu.
8. Délka použití přístroje by se měla pohybovat v rozsahu od 20 až 30 minut. Další použití přístroje naplánujte po uplynutí alespoň 5 dní. Po skončení odpojte napájecí adaptér.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

PRO JEDNOTLIVÉ APLIKAČNÍ HLAVICE

1. Nasadte na horní část přístroje výše uvedenou aplikační hlavici. Ujistěte se, že je aplikátor zatlačen nadoraz.
2. Připojte přístroj k napájecímu síťovému adaptéru.
3. Aplikujte na část pleti, kde chcete přístroj použít, tenkou vrstvičku sonogelu. Pokud je plocha pleti pro aplikaci přístroje větší, sonogel nanášejte postupně po částech. Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavici a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj bez pojivé látky mezi pletí a aplikátorem nedoporučujeme.
4. Tato aplikační hlavice disponuje kombinací hned několika technologií **MFEP** (mikroproud), **UP** (radiofrekvence) a **EMS** (EMS elektrické pulzy).
5. Pro každý režim použití na pleti **MFEP**, **UP** a **EMS** jsou k dispozici jsou 4 úrovně intenzity. Zvolte si intenzitu, která je vám na pleti nejvíce příjemná. Aktuálně nastavenou úroveň intenzity zobrazuje displej v jeho horní části pomocí jednotlivých dílků. Pro tuto aplikační hlavici si můžete pomocí šipek **ZVÝŠIT** nebo **SNÍŽIT** intenzitu působení konkrétní technologie.
9. Pomocí tlačítka **LED** si můžete v průběhu působení libovolného programu upravit režim působení světél fotonové terapie. Posloupnost působení LED světél je následující: všechny barvy kontinuální svícení, červené světlo, modré světlo, zelené světlo, všechny barvy pulzním svícením.
10. Přístroj aplikujte postupně v oblasti obličeje, krku nebo dekoltu. Při použití vždy postupujte tak, že aplikační hlavici přidržíte na pleti v řádu několika sekund (tzv. razítkováním). Můžete také zvolit krátké či dlouhé táhlé pohyby. Začínějte na nejnižší nastavené hodnotě 1. Intenzitu přidávejte vždy podle pocitu. Použití přístroje by nikdy nemělo být nesnesitelně bolestivé. Na druhou stranu musí být cítit, aby mohla technologie na pleti dostatečně pracovat. Podle toho se snažte přizpůsobit délku kontaktu aplikátoru s pletí. Akceptovatelné je pouze jemné mravenčení až lehké štípnutí. V normě je rovněž vnímání působení mírného tepla. Působení radiofrekvence by vás nemělo pálit.
11. Po skončení používání přístroje pleť otřete od sonogelu. Použijte popřípadě krém nebo sprej pro hydrataci pleti. Během spánku bude vaše pleť regenerovat. Hydratace významně přispěje k rychlejšímu průběhu rekonvalescence pleti.
12. Délka použití přístroje by se měla pohybovat v rozsahu od 20 až 30 minut. Další použití přístroje naplánujte po uplynutí alespoň 5 dní. Po skončení odpojte napájecí adaptér.



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

PRO JEDNOTLIVÉ APLIKAČNÍ HLAVICE

1. Nasadte na horní část přístroje výše uvedenou aplikační hlavici. Ujistěte se, že je aplikátor zatlačen nadoraz.
2. Připojte přístroj k napájecímu síťovému adaptéru.
3. Hlavice přístroje je určena pro efektivní rutinní aplikaci na pleti. Disponuje technologiemi, které jsou určeny pro několik fází přístrojové pleťové péče: čištění pleti, zapracování kosmetických přípravků, zvýšení pružnosti pleti v oblasti očního okolí, posílení obličejových svalů a závěrečné zklidnění pleti působením chladu.
4. Aplikační hlavice umožňuje přepínat následující programy: **CLEAN**, **MOISTURE**, **EYE CARE**, **EMS UP** a **COOL**.
5. Program **CLEAN**: běžným způsobem odstraňte z pleti dekorativní kosmetiku tak, jak jste zvyklá. Aplikujte libovolný čistící krém. Zapněte pomocí tlačítka **MODE** program **CLEAN**. Aplikační hlavice generuje galvanický proud s kladným nábojem. Pohybujte se po pleti krouživými nebo táhlými pohyby. Optimální délka v rozsahu 1 až 2 minut. Poté odstraňte kovový prstenec a aplikujte kus libovolného papírového kosmetického hadříku. Hadřík uchyťte na hlavici pomocí kroužku, který drží na hlavici magneticky. Nyní setřete zbytky čistícího krému. Program **CLEAN** neumožňuje aktivovat fotonové světlo. Pomocí šipek si můžete nastavit 4 úrovně intenzity.
6. Program **MOISTURE**: je určen pro efektivní zapracování účinných látek z kosmetických přípravků. Aplikační hlavice generuje galvanický proud se záporným nábojem. Účinné látky z kosmetických krémů, sér, gelů jsou efektivně zapracovány pod povrch pleti. Program **MOISTURE** je doprovázen červeným a žlutým světlem. Pomocí šipek si můžete nastavit 4 úrovně intenzity.
7. Program **EYE CARE**: je určen pro efektivní aplikaci v oblasti očního okolí. Můžete kombinovat se sonogelem nebo vámi oblíbeným kosmetickým přípravkem. Program slouží pro rozjasnění pleti, posílení pružnosti pleti se zacílením na oční okolí. Program **EYE CARE** neumožňuje aktivovat fotonové světlo. Pomocí šipek si můžete nastavit 4 úrovně intenzity. Nastavte si takovou intenzitu, která je vám nejvíce příjemná.
8. Program **EMS UP**: aktivuje působení EMS pulzů a červeného světla. Program je určen pro aktivní posílení obličejových svalů. Zvýraznění kontur a zvýšení elasticity pleti. Používejte v kombinaci se sonogelem. Pomocí šipek si můžete nastavit 4 úrovně intenzity. Nastavte si



takovou intenzitu, která je vám nejvíce příjemná. Barva světla nelze měnit. Primárně je nastaveno červené světlo.

- 9.** Program **COOL**: působení chladu a modrého světla. Povrch aplikační hlavice okamžitě sníží teplotu. Po předchozích procedurách je vhodné pleť postupně zklidnit, snížit její teplotu. Uvést pokožku opět do normálu. Aktivní je modré světlo pro dosažení antibakteriálního účinku.
- 10.** Délka použití přístroje se měla pohybovat v rozsahu od 20 až 30 minut. Po skončení odpojte napájecí adaptér.




POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Pokud se rozhodnete aplikovat přístroj na větší plochu obličeje, krku nebo dekoltu, doporučujeme nanášet sonogel po částech. Přestože má kontaktní gel skvělé hydratační schopnosti, může po nějakém čase postupně vysychat.
- 2.** Každá aplikační hlavice nabízí specifické technologie. Při jednom použití není třeba vždy za všech okolností vystřídat všechny aplikátory. Použijte pouze ty, které nabízí technologie s ohledem na charakter účinku působení na pleť.
- 3.** Pro maximální efektivitu použití se vždy snažte, aby byla nejlépe celá plocha aplikátoru v kontaktu s pleť.
- 4.** Při aktivní funkci fotonových světél není třeba používat žádné ochranné brýle. Žádný problém nepředstavuje ani aplikace v oblasti očního okolí. Přesto bychom vám doporučili, abyste se vyhnuli přímému a dlouhému pohledu do zdroje světla. Váš zrak nebude žádným způsobem trvale poškozen, ale sledování zdroje světla po delší dobu není pro vaše oči příjemné.
- 5.** Během jedné aplikace přístroje můžete jednotlivé programy postupně kombinovat. Používejte více ty programy, které odpovídají vašim cílům, které chcete prostřednictvím přístroje dosáhnout. Vycházejte z popisu významu jednotlivých technologií v úvodu návodu k obsluze. Doporučujeme zaměřit se na nejvíce problematické oblasti (jemné vrásky na čele, metličkové vrásky kolem očí, mimické vrásky, zvýraznění kontur, zjemnění linek na krku, atd.)
- 6.** Pokud je vám působení některé technologie na konkrétním místě na pleti nepříjemné i při nejnižší úrovni intenzity, snižte množství sonogelu, zkratíte čas kontaktu aplikační hlavice s pleť nebo se tomuto místu úplně vyhněte.
- 7. Upozornění:** Při prvním kontaktu s pleť mějte vždy zapnutou nejnižší úroveň intenzity. Aplikátor přiložte na tu část obličeje, kde je více podkožního tuku. Na síle můžete postupně přidávat. Vždy však záleží na vašem subjektivním pocitu. Pokud je již použití nepříjemné až mírně bolestivé, nastavte zpět nejnižší úroveň nebo použití ukončete.
- 8. Tip:** Partie pro aplikaci přístroje by měla být v ideálním případě bez výrazných silných chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Radiofrekvence, galvanický proud, mikroproud a EMS pulzy budou mít lepší možnost proniknout do podkožní tkáně.
- 9. Doporučení:** Pleť nevystavujte po použití přístroje v délce několika hodin příliš horké vodě. Platí především při použití radiofrekvence. Pokuste se vyhnout návštěvě sauny. Pokožka prochází po

použití přístroje stále rekonvalescencí a horká voda (nebo pobyt v sauně) může pokožku zbytečně podráždit. Při používání přístroje se pleť zahřívá. Pokud vám bude pocitově přílišné teplo, udělejte si pauzu a nechte pleť vychladnout. V ideálním případě můžete použít aplikační hlavici, která nabízí funkci působení chladu.



MOŽNÉ OBLASTI APLIKACE PŘÍSTROJE

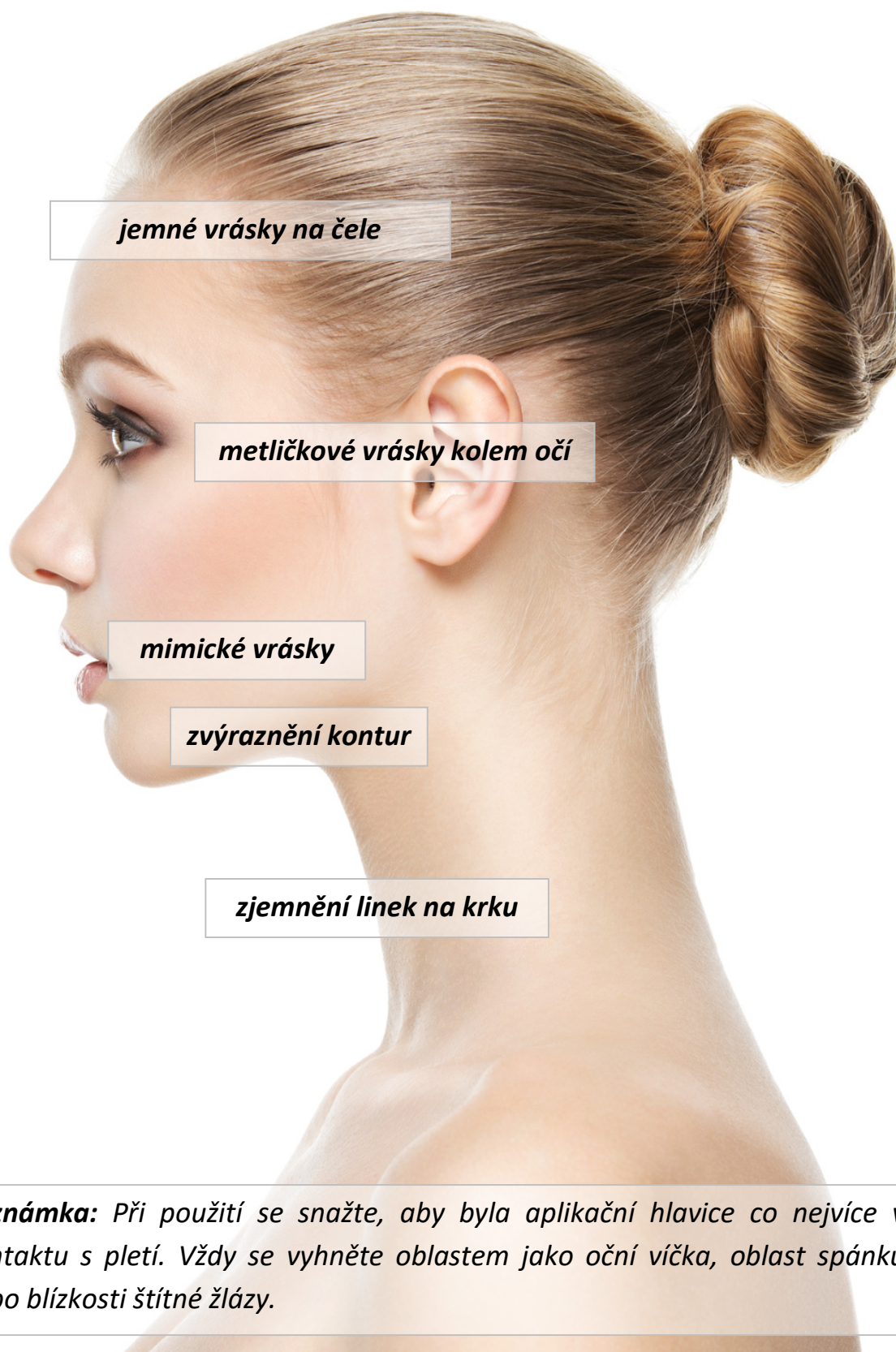

METODA POUŽITÍ PŘÍSTROJE NA PLETI



ČELO: pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




NOS: pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



BRADA: pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

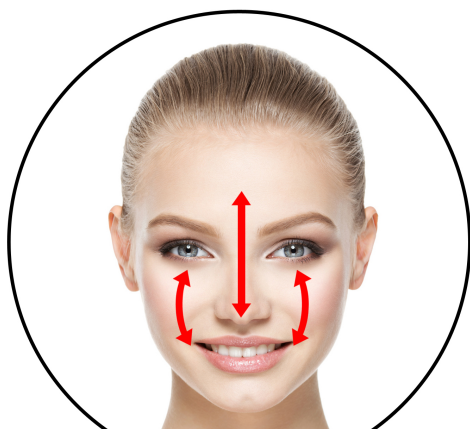

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Musím si k přístroji BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL koupit nějaké kosmetické přípravky nebo můžu přístroj používat na suchou pleť?

V této otázce panuje mezi veřejností celá řada mýtů a nepřesností. Pojdme si tedy uvést věci na pravou míru. V případě modelu BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL dochází velmi často k záměně s přístrojem obdobného typu familiárně nazýván jako „galvanická žehlička“.



Hlavní smysl používání přístroje s galvanickým proudem spočívá v efektivním zapracování účinných látek, které jsou obsaženy v kosmetických přípravcích. Míra efektivity použití tak závisí na kvalitě kosmetického přípravku, který si zakoupíte. Pro zapracování kosmetických přípravků do pleti používejte aplikátor s funkcí galvanického proudu. Přístroj BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL disponuje technologiemi, které samy o sobě přispívají ke zlepšení kondice pleti. Jde o technologie radiofrekvence, mikroproudu a EMS pulzů. Pleť je třeba pro použití přístroje BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL nějakým způsobem hydratovat. Proto se používá klasický sonogel, který je pro tyto účely naprosto ideální.

Je třeba dokoupit nějaký speciální gel?

Určitě nemusíte. Vystačí si s obyčejným levným gelem, který můžete koupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb. V případě použití aplikátoru s galvanickým proudem můžete použít vámi oblíbený kosmetický přípravek.

Musím pleť nějak speciálně připravit před použitím přístroje BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL?

Pleť by měla být odličená. Ideální je naplánovat použití přístroje po koupeli, kdy je pokožka čistá a uvolněná. Před použitím přístroje nepoužívejte žádné metody s vysokou intenzitou čištění - např. diamantová mikrodermabrazie. Stejně tak nejrůznější masky s vysoce abrazivními účinky na pleť. Pokožka by byla před použitím přístroje příliš podrážděná.

Přístroj BeautyRelax RFLIFT PREMIUM disponuje několika tlačítky. Jak při použití přístroje funkce vzájemně kombinovat?

Přístroj BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL je navržen pro aplikace na zralou pleť. K tomuto účelu je zcela zásadní technologie radiofrekvence.

Jak se s přístrojem BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL po pleti správně pohybovat?

V praxi určitě nezáleží na tom, jaké obrazce budete pomocí aplikační hlavičky na pleti „vytvářet“ (kolečka, kroužky, čáry). Nejdůležitější je maximální pokrytí aplikační hlavičky přístroje danou partií, na kterou se potřebujete zaměřit. Zároveň můžete vyzkoušet také metodu aplikace tzv. „razítkování“. Podržíte aplikační hlavičku na pleti v délce několika vteřin. Takto postupně aplikujete přístroj na celou vámi vybranou partií obličeje. Mějte na paměti. Čím déle aplikační hlavička na jednom místě působí, tím více graduje výkon působení dané technologie. Platí to především pro radiofrekvenci. Každou sekundu s hlavičkou na jednom místě působení radiofrekvence postupně graduje. Úroveň intenzity délku kontaktu hlavičky s pletí si vždy přizpůsobte tak, aby vám bylo použití přístroje příjemné.

Jak dlouho by mělo ideálně trvat použití přístroje BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL?

Zaleží na tom, na jak velkou část přístroj použijete. Zda se zaměříte na celý obličej nebo jen např. oblast kolem očí. Průměrná délka použití přístroje by se měla pohybovat od 20 do 30 minut. Když se s přístrojem teprve seznamujete, může vám to trvat déle. Po opakovaném se může čas postupně zkracovat.

Přístroj BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL má více úrovní intenzity. Jak poznám, s jakou intenzitou pracovat?

Vždy pracujte s takovou úrovní intenzity, která je vám na pleti příjemná. Technologie přístroje jsou na pleti cítit, to je průvodní jev, že fungují. Na druhou stranu pro vás použití přístroje nesmí být bolestivé. Navíc každá část obličeje má různou citlivost. Oblast kolem očí je vysoce citlivá. Brada nebo tváře mají nižší úroveň citlivosti.

Jak často přístroj BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL ideálně používat?

Mezi jednotlivým použitím je doporučeno ponechat volné dny. Přibližně 5 až 7 dní podle citlivosti vaší pleti. V těchto volných dnech má pokožka dostatečný prostor pro regeneraci. Proces tvorby kolagenu, který je přístrojem nastartován, postupně graduje. Rozhodně neplatí čím častěji budete přístroj používat tím lépe. Přesto je třeba nepřetržitého pravidelného opakování. Pokud přístroj přestanete používat, liftingový účinek se postupně vytratí.

Co tedy konkrétně mohu od přístroje BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL očekávat?

Při každém použití můžete vnímat, jak vaše pleť pulzuje. Je zahřátá. Jde o průvodní jev působení technologií na pokožce. Přístroj podporuje tvorbu kolagenních a elastických vláken ve vrstvě dermis, která je zodpovědná za kondici naší pleti. Obecně po 35 roku života se produkce kolagenu výrazně snižuje. Metoda aplikace pomocí přístroje BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL je neinvazivního charakteru. Žádná část aplikační hlavičky neproniká přes povrch pleti. Obrovská výhoda ve srovnání s invazivními metodami (injekce, skalpel). Přístrojová pleťová péče je však třeba stále opakovat. Pleť stále stimulovat. Nejde o trvalý efekt. Náš věk působí z estetického hlediska stěle v náš neprospěch. Pokud přístroj definitivně přestanete používat, liftingový efekt postupně vyprchá.

Funkce EMS je mi na pleti vysoce nepříjemná i při nastavení nejnižší úrovně intenzity. Jak si s tím poradit?

EMS pulzy jsou velmi specifická technologie. Jsou schopny zacílit přímo na strukturu obličejových svalů. Při kontaktu aplikační hlavičky na pleti můžete vnímat pocity mravenčení/štípání/cukání. Jde o technologii, která nemusí být všem uživatelům příjemná i při nastavení nejnižší intenzity. Pokud vám působení EMS pulzů není komfortní na žádné části obličeje, doporučujeme se použití funkce EMS vyhnout. Pro dosažení liftingového efektu jsou nejvíce významná technologie radiofrekvence.

Jak by mělo použití přístroje správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením použití si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

Jaké pocity je možné během použití přístroje vnímat?

Při kontaktu aplikační hlavičky s pleť proudí přes povrch pleti do vrstvy dermis proud radiofrekvenčních vln. Tento proces můžeme vnímat jako teplo, které postupně graduje. Pocit tepla není způsoben „nahříváním“ pleti, ale jedná se o průvodní jev působení energie radiofrekvenčních vln. Hlavním smyslem a podstatou používání právě radiofrekvenčních vln je přímé zacílení na vrstvu

dermis o specifické frekvenci a výkonu. Působení EMS pulzů je možné vnímat jako pocit mravenčení. Působení mikroproudu má pocitově srovnatelný zážitek, jako EMS pulzy. V případě působení mikroproudu cítíte na pleti jednotlivé elektrické pulzy, které postupně gradují. Mikroproud více pulzuje. EMS vyvolává spíše pocit mravenčení.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?

Po skončení použití přístroje mohou na aplikační hlavici ulpět mikroskopické částičky kůže. Očištěním zabráníte jednak jejich případnému vniknutí do přístroje a zajistíte především hygienu provozu. Zvýšená hygiena provozu platí především v případě, pokud přístroj používá více osob.

Jaké výsledky mohu očekávat? Jak se působení radiofrekvence na pleť promítne?

Následné projevy na pleti po použití radiofrekvence jsou velmi individuální a výsledek závisí na více faktorech. Obecně lze říci, že bezprostředně po použití přístroje je pleť mírně zarudlá. Penetrací vlhkosti sonogelu může působit vizuálně svěžím dojmem. Na pleti, kde došlo ke stimulaci pomocí aplikační hlavice, dochází k okamžitému lokálnímu zvýšení teploty. Přesto je však třeba dát pleti prostor v řádu hodin, kdy dojde k remodelaci kolagenních a elastických vláken, která jsou zodpovědná za míru pružnosti pleti. Neinvazivní lifting pleti pomocí radiofrekvence není konečný proces. Je třeba pleť průběžně takto stimulovat (v průměru 2x až 4x do měsíce). Při ukončení pravidelného používání přístroje se pleť opět postupně vrací do původního stavu. Minimální rozestup mezi aplikací přístroje na stejnou partii doporučujeme v rozsahu 5 až 7 dní.

Jaké přípravky je vhodné aplikovat bezprostředně po využití technologie radiofrekvence?

Pleť je třeba po přístrojové aplikaci dostatečně hydratovat. Doporučujeme použít běžný hydratační krém, aby měla pleť dostatečnou vláhu pro její regeneraci. Určitě je doporučeno v den použití přístroje vyhnout se dalším případným kosmetickým procedurám, jako např. hloubkové čištění pleti diamantovou mikrodermabrazí. Po aplikaci radiofrekvence je pleť mírně podrážděna s možnými příznaky zarudnutí. Je třeba dát pleti určitý čas pro její regeneraci. V den použití přístroje bychom nedoporučovali návštěvu sauny.

Může aplikační hlavice povrch pleti poranit?

Rozhodně ano. Rozsah výkonu přístroje je záměrně upraven tak, aby byl schopen přizpůsobit se uživatelům s různou citlivostí pleti a různou vrstvou tukové tkáně. Jedna z hlavních výhod přístroje je flexibilita použití se zaměřením na obličej, krk a dekolte. Úprava dávkování výkonu umožňuje použití i velmi citlivých partií. Vyšší výkon naopak pro větší plochy, kde je míra citlivosti menší. Pokud by přístroj nenabízel dostatečný rozsah výkonu, nebylo by možné ho považovat v oblasti estetických přístrojů za efektivní univerzální nástroj pro lifting pleti. Proto je třeba při nastavení výkonu postupovat s maximální opatrností.

Pro jaké části těla je kosmetický přístroj určen k použití?

Přístroj je určen pro použití na oblast obličeje, krku a popřípadě dekolte. Nelze použít na oční víčka nebo oblast štítné žlázy.

V průběhu použití přístroje se výrazně zvýší teplota aplikační hlavice. Jak mám v tomto případě postupovat?

Pokud se nadále rozhodnete v použití přístroje pokračovat, přístroj vypněte a ponechte ho alespoň 5 minut vychladnout. Poté opět pokračujte v používání přístroje.

Existují nějaké kontraindikace? (situace, kdy nelze přístroj používat)

Přístroj **BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL** je určen pro všechny typy pleti bez věkového omezení uživatele. Přístroj není vhodné používat, pokud trpí uživatel vážným kožním onemocněním. Viz. seznam kontraindikací v úvodu návodu.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Přístroj není zdravotnický prostředek. Patří do kategorie masážních přístrojů. Přístroj neléčí žádné kožní onemocnění. Přístroj nabízí ověřenou technologii radiofrekvence, mikroproudu, EMS pulzů, fotonového světla a vibrací. Tato kombinace efektivně přispívá ke zlepšení kondice unavené a nezdravě vyhlížející pleti.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu.

Je přístroj vodotěsný?

Není. Žádná část přístroje není určena pro mytí pod proudem tekoucí vody.

Může přístroj používat více osob?

Ano. Přístroj může používat více osob. Vždy je však třeba dodržovat zásady hygieny provozu. Po každém použití věnovat pozornost vyčištění povrchu aplikační hlavičky.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení použití přístroje byla aplikační hlavice a všechny kontaktní plochy očištěny. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu. Závěrem vždy zkontrolujte, že je aplikační hlavice kompletně suchá. V žádném případě nepoužívejte při údržbě hlavice žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození povrchu kontaktních ploch aplikační hlavice.

INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA

V průběhu používání přístroje můžete narazit na situaci, kdy budete potřebovat poradit ohledně používání přístroje nebo technického problému. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám plně k dispozici.



beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Facebook: facebook.com/BeautyRelaxEquipment/

PÁR VĚT ZÁVĚREM

Kosmetický přístroj BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL je v kategorii „zařízení do ruky“ to nejlepší, co můžete na trhu zakoupit. I když se může zdát napájení pomocí síťového adaptéru namísto nabíjecí baterie jako nevýhoda, opak je pravdou. Nebudete muset v příštích letech řešit jakékoliv komplikace s výměnou nabíjecí baterie. Napájení pomocí síťového adaptéru navíc zajišťuje dostatečný příkon elektrické energie, aby technologie všech aplikačních hlavice pracovaly s maximálním účinkem. Model BeautyRelax RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL disponuje unikátním systémem vyměnitelných aplikačních hlavice, které nemá ve své kategorii srovnání. Rozhodně neplatí čím více technologií/aplikačních hlavice, tím nižší účinek použití. Přístroj nabízí všechny dostupné technologie, které jsou určeny k dlouhodobému udržení pleti v co nejlepší kondici. Není vždy nezbytně nutné použít všechny aplikační hlavice se všemi technologiemi. Na začátku při seznamování s přístrojem to pro vás bude pravděpodobně hodně informací najednou. Nicméně. Opakovaným pravidelným používáním přístroje si jednotlivé funkce a možnosti přístroje osvojíte a sami si můžete vytvářet plán, který bude vaší pleti nejvíce vyhovovat.



Martin Hrbek

www.beautyrelax.cz

Pokud si nebudete v jakékoliv fázi použití přístroje vědět rady, objeví se nesrovnalost nebo nejasnost v návodu k obsluze, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme a poradíme. Jsme tu stále pro vás!



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Kosmetický přístroj na vrásky RFLIFT PREMIUM SWITCH PROFESSIONAL

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2530**

EAN: **8594166121355**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015

EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Přístroj slouží ke kosmetické péči o pleť. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Neslouží k léčbě žádného kožního onemocnění. V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.12.2023