

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní pás se světelnou terapií

BeautyRelax BR-3069

Lightbelt Portable Tripple Effect



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	13
VIBRAČNÍ MASÁŽ	14
ČERVENÉ SVĚTLO	14
VYHŘÍVÁNÍ	14
POPIS PŘÍSTOJE	15
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	16
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	17
NABÍJENÍ BATERIE	22
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	23
CERTIFIKACE	23
EU DISTRIBUTOR	23
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	24

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

Vibrace. Červené světlo. Vyhřívání. Unikátní kombinace technologií, kterými disponuje masážní pás BeautyRelax Lightbelt Portable Tripple Effect. Blahodárné účinky pro svalové uvolnění po fyzické aktivitě. Podpora krevního oběhu a okysličení. Stimuluje buňky pro lepší průběh regenerace. Napomáhá urychlit ozdravné procesy po úrazu. Podporuje přirozený proces obnovy těla. Určeno pro použití každý den. Praktické zapnutí za suchý zip. Praktické bezdrátové použití pomocí nabíjecí li-ion baterie. 4 úrovně nastavení tepla. 4 programy vibrační masáže. 50 světelných diod. Dva typy vlnových délek: 660nm a 850nm.



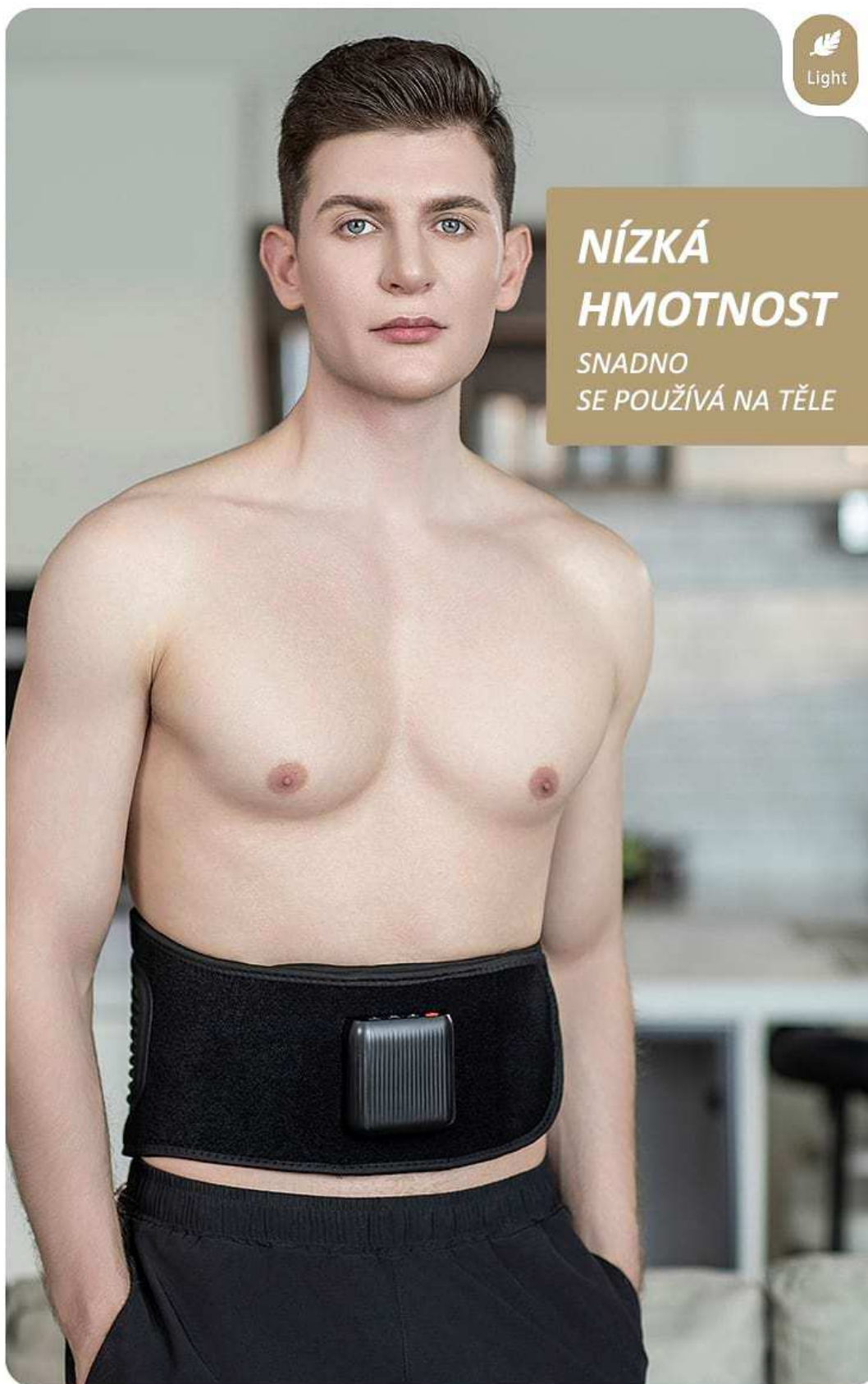

**NÍZKÁ
HMOTNOST**

SNADNO
SE POUŽÍVÁ NA TĚLE



**MŮŽETE POUŽÍVAT
PŘI PRÁCI**

BEZDRÁTOVÉ PŘÍKONÍ
NEJSTE OMEZENI ŽÁDNÝMI KABELY











**4 MASÁŽNÍ
PROGRAMY**




**MATERIÁL
PŘÍJEMNÝ NA DOTYK**



**50 LED DIOD
ČERVENÉHO SVĚTLA**



**50 LED DIOD
ČERVENÉHO SVĚTLA**

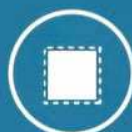

**VELKÁ PLOCHA
TEPELNÉ TERAPIE**



**DLOUHÁ
VÝDRŽ BATERIE**



HLAVNÍ VÝHODY

- Unikátní kombinace červeného světla, vyhřívání a vibrační masáže
- Intenzivní terapie červených světlem
- Vibrační masáž pro okamžité uvolnění zatuhlých svalů
- Blahodárné účinky pro svalové uvolnění po fyzické aktivitě
- Podpora krevního oběhu a okysličení
- Stimuluje buňky pro lepší průběh regenerace
- Napomáhá urychlit ozdravné procesy po úrazu
- Podporuje přirozený proces obnovy těla
- Určeno pro použití každý den
- Napomáhá zmírnit bolesti kolenou
- Dva typy vlnových délek: 660nm a 850nm
- Počet světelných diod: 50ks
- 4 úrovně nastavení tepla: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C
- 4 programy vibrační masáže
- Rychlá aktivace tepla již za 10 sekund
- Praktické zapnutí za suchý zip
- Určeno pro ramena, záda, krk, kolena, chodidla
- Výkon: 60W
- Napětí: 11,1V
- Napájení: nabíjecí li-ion baterie
- Kapacita baterie: 2400mAh
- Nabíjení: USB kabel + síťový adaptér
- Hmotnost: 490g
- Rozměry pásu: 110x22x3,5cm.
- Rozměry aktivní světelné plochy: 54cm x 13cm

VIBRAČNÍ MASÁŽ

Vibrační masáž je technika, která využívá vibrace nebo pulzace k uvolnění svalů a zlepšení cirkulace krve. Princip fungování vibrační masáže spočívá v tom, že vibrace jsou aplikovány na povrch těla prostřednictvím vibračních motorků integrovaných do pásu. Pulzující pohyby vibrací pronikají do hloubky svalů a tkání, což pomáhá uvolnit napětí a ztuhlost v svalové tkáni. Tím dochází ke zlepšení pružnosti svalů a jejich rozsah pohybu. Kromě toho vibrace také stimulují nervové zakončení v pokožce, což může vést k tlumení bolesti a uvolnění svalového napětí.



ČERVENÉ SVĚTLO

Červené světlo má několik pozitivních účinků na tělo, včetně relaxace svalů. Tento druh terapie, známý jako světelná terapie nebo fototerapie, využívá energii světla k proniknutí do tkání a stimulaci různých biologických procesů. Zde je několik způsobů, jak červené světlo může pomoci uvolnit svaly. Zlepšená cirkulace krve. Červené světlo může zlepšit krevní oběh v svalové tkáni, což může pomoci odstranit toxiny a zánětlivé látky, které způsobují svalové napětí a bolest. Zvýšená relaxace svalů. Červené světlo může pomoci snížit svalové napětí a zlepšit relaxaci svalů tím, že ovlivní nervový systém a sníží aktivitu sympatického nervového systému, který je spojen s reakcí "boj nebo útěk". Podpora hojení svalů. Červené světlo může podporovat hojení tkání tím, že zvýší produkci mitochondrií a ATP (adenosintrifosfátu), což jsou základní jednotky energie v buňkách. To může pomoci svalům regenerovat se rychleji po fyzickém výkonu nebo zranění. Snížení zánětu. Červené světlo může také pomoci snížit zánět v svalových tkáních tím, že ovlivní produkci zánětlivých mediátorů a podpoří procesy hojení.

VYHŘÍVÁNÍ


Působení tepla má hned několik pozitivních účinků na uvolnění svalů. Rozšíření cév a zlepšení průtoku krve. Při aplikaci tepla se cévy v oblasti rozšiřují (vasodilatace), což zvyšuje průtok krve do svalů a tkání. To může pomoci odstranit odpadní látky, zlepšit výživu buněk a uvolnit svalové napětí. Zvýšená pružnost svalů. Teplé prostředí může pomoci zvýšit pružnost svalových vláken tím, že změkčí tkáň a sníží svalovou tuhost. To může usnadnit roztažení svalů a zlepšit jejich flexibilitu. Snížení bolesti. Teplé prostředí může působit jako přírodní analgetikum, které tlumí bolest a nepříjemné pocity spojené se svalovým napětím nebo křečemi. Relaxace nervového systému. Působení tepla může také pomoci uvolnit napětí v nervovém systému, což může vést k celkové relaxaci těla a snížení stresu.

POPIS PŘÍSTOJE

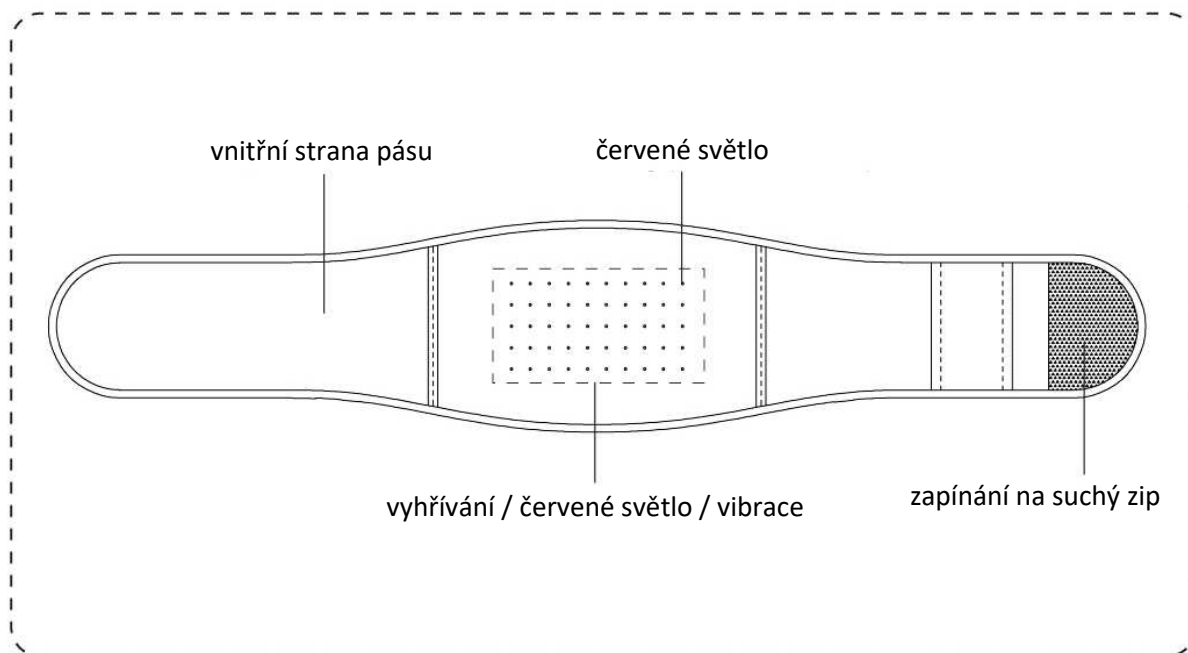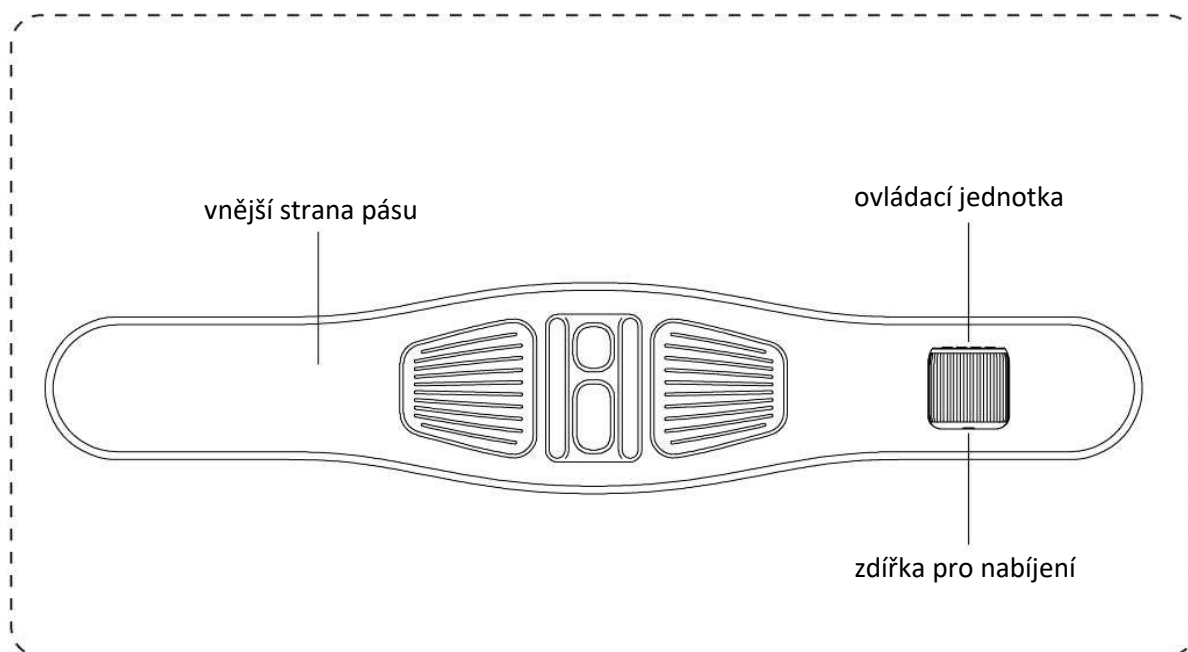

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU


1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
3. Tlačítko **VIBRACE**
4. Tlačítko **ČERVENÉ SVĚTLO**
5. Zobrazení teploty
6. Zobrazení intenzity vibrační masáže
7. Zobrazení intenzity červeného světla
8. Indikace baterie

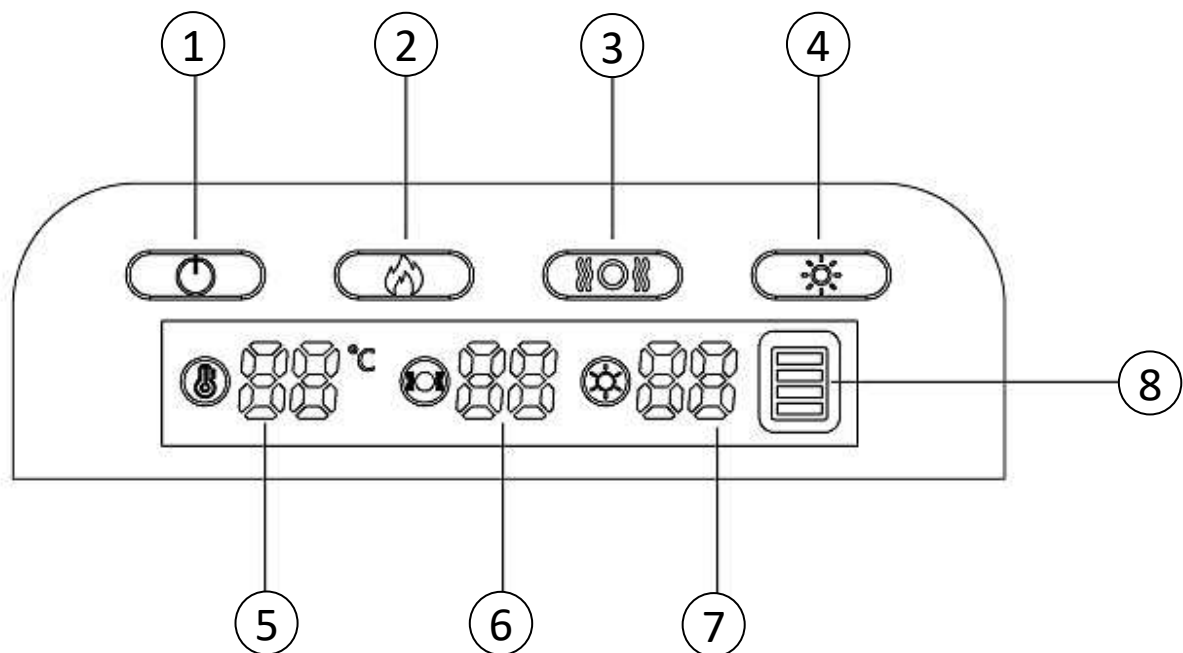

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Přístroj se spustí do pohotovostního režimu. Pokud s přístrojem nezačnete pracovat v průběhu následujících 2 minut, přístroj se automaticky vypne.
2. Pomocí tlačítek **VYHŘÍVÁNÍ**, **ČERVENÉ SVĚTLO**, **VIBRACE** si můžete aktivovat jednotlivé funkce masážního pásu. Časovač je nastaven na výchozí hodnotu **15 minut**. Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne. Pokud si přejete pokračovat v použití, přístroj znovu zapněte.
3. Funkce **VYHŘÍVÁNÍ** nabízí možnost nastavení 4 úrovní intenzity: **40°C**, **45°C**, **50°C** a **55°C**. Intenzitu působení tepla můžete měnit pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ**.
4. Funkce **VIBRACE** nabízí možnost nastavení 4 různé režimy fungování vibrační masáže. Zvolte si režim, který vám nejvíce vyhovuje. Režim vibrační masáže můžete měnit pomocí tlačítka **VIBRACE**.
5. Funkce **ČERVENÉ SVĚTLO** nabízí možnost nastavení 4 úrovní intenzity: **1**, **2**, **3** a **4**. Intenzita 1 = nejnižší, intenzita 4 = nejvyšší. Intenzitu červeného světla můžete měnit pomocí tlačítka **ČERVENÉ SVĚTLO**.
6. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.



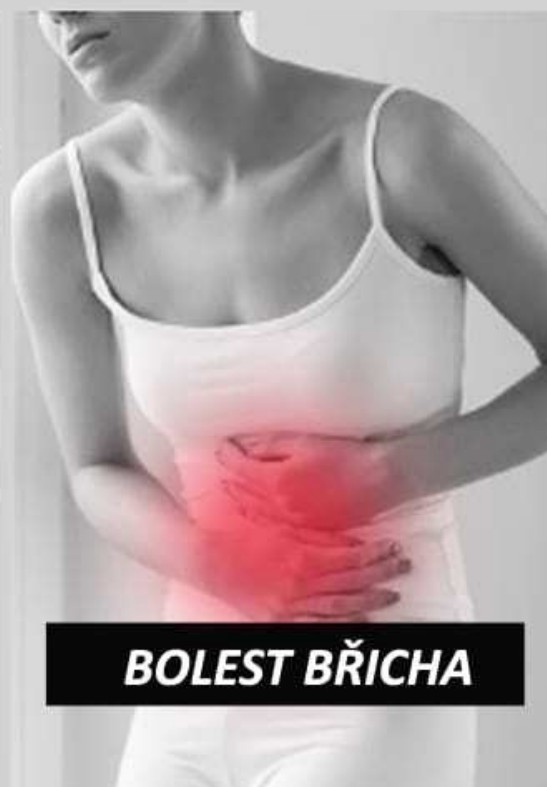








NABÍJENÍ BATERIE

1. K nabíjení baterie používejte výhradně USB kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
2. Jeden konec kabelu připojte k hlavní jednotce přístroje.
3. Druhý konec kabelu připojte k nabíjecímu adaptéru.
4. Jakmile je baterie plně nabitá, zobrazí se indikace na ovládacím panelu.
5. Přístroj v průběhu nabíjení nepoužívejte.
6. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie.

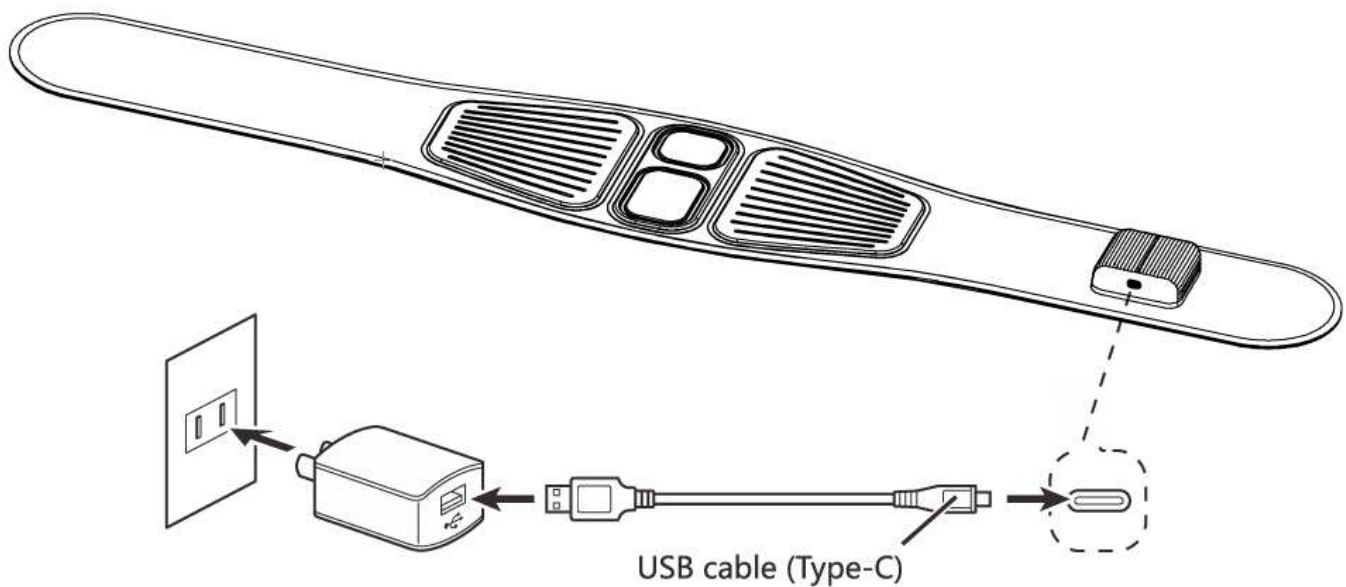

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

beautyrelax

 **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj

LIGHTBELT PORTABLE TRIPPLE EFFECT

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3069**

EAN: **8594166123687**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Přístroj není zdravotnický prostředek.

**Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů
na vybraných částech těla.**

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno
Dne: 1.2.2024



Martin Hrbek, jednatel