

NÁVOD K OBSLUZE

Oční masážní přístroj
BeautyRelax BR-1860

AIRGLASSES PREMIUM



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
SCHÉMA MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
EU DISTRIBUTOR	13
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

UPOZORNĚNÍ



- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, prostudujte veškerá vyobrazení a návod uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud trpíte závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami, záněty, otoky nebo jinými zdravotními obtížemi v oblasti obličeje či očí, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti, zda je váš zdravotní stav vhodný pro používání přístroje, konzultujte jeho použití se svým praktickým lékařem nebo odborníkem.
- Přístroj není určen pro osoby s vážnými očními onemocněními (např. glaukom, odchlípení sítnice), po nedávném chirurgickém zákroku v oblasti očí nebo hlavy ani pro osoby s kardiostimulátorem.
- Přístroj je určen především k osobnímu použití. Nedoporučuje se jeho sdílení s dalšími osobami. Pokud přístroj používá více uživatelů, je nutné dbát zvýšené hygieny a povrch přístroje po každém použití důkladně očistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Pokud je přístroj viditelně poškozen, nefunguje správně, vydává neobvyklé zvuky, zahřívá se nebo spadl do vody, nikdy jej dále nepoužívejte.
- Je-li přístroj rozbitý, nikdy se nedotýkejte jeho vnitřních částí, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem nebo utrpí mechanický náraz, může dojít k jeho vnitřnímu poškození. V takovém případě přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, vana, sprcha, bazén).
- Přístroj není vodotěsný ani omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody ani vystaven proudu tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru během provozu. Po každém použití jej vždy vypněte a odložte na bezpečné místo.
- Pokud byl přístroj přenesen z chladného prostředí do teplého, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti neumožňují bezpečné používání bez dozoru odpovědné osoby.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů (radiátor, kamna, sporák, otevřený oheň apod.).
- Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém a čistém prostředí. Chraňte jej před prachem, vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním přístroje v rozporu s tímto návodem k obsluze ani za následky vyplývající z nedodržení uvedených bezpečnostních pokynů.
- Za případné škody na zdraví nebo majetku vzniklé použitím přístroje jiným než určeným způsobem nenese distributor odpovědnost.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Oční masážní přístroj BeautyRelax Airglasses Premium je luxusní relaxační zařízení určené k masáži oblasti kolem očí a spánků. Nabízí velmi příjemnou kompresní vzduchovou masáž, která napomáhá okamžitému uvolnění svalového napětí, zmírnění pocitu únavy očí a snížení otoků v očním okolí. Součástí přístroje je také jemné infračervené vyhřívání, které podporuje prokrvení masírované oblasti a zvyšuje celkový relaxační účinek masáže. Pro maximální uvolnění je přístroj vybaven integrovanou relaxační hudbou, která pomáhá navodit pocit klidu a duševní pohody. Díky vestavěné baterii s vysokou kapacitou je přístroj vhodný pro pohodlné bezdrátové použití doma, v kanceláři i na cestách. Ergonomický tvar masážních brýlí zajišťuje komfortní nošení a snadné ovládání. Masážní brýle BeautyRelax Airglasses Premium pomáhají restartovat vaši mysl, uvolnit napětí a doplnit energii po náročném dni. Dopřejte si zasloužený odpočinek po dlouhé práci u počítače, intenzivním soustředění nebo dlouhé jízdě autem.



HLAVNÍ VÝHODY

- Příjemná a účinná relaxace oblasti kolem očí a spánků
- Uvolnění svalového napětí a zmírnění pocitu únavy očí
- Napomáhá snížení otoků v očním okolí
- Pomáhá potlačit tvorbu tmavých kruhů pod očima
- Pokročilá technologie kompresní vzduchové masáže
- Blahodárné účinky jemného infračerveného vyhřívání
- Integrovaná hudební terapie pro podporu relaxace a zlepšení duševní pohody
- Jednoduché a intuitivní ovládání pomocí jediného tlačítka
- Přizpůsobí se každému uživateli díky nastavitelnému pásku za hlavu
- Automatický časovač masáže: 15 minut
- Čtyři přednastavené automatické masážní programy
- Skládací konstrukce pro snadné přenášení a skladování



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Teplota vyhřívání: 42°C
- Indikace stavu baterie
- Pracovní napětí: 5V
- Pracovní proud: 1A
- Výkon: 5W
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 1200mAh
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 20x15x8cm
- Hmotnost: 490g


OBSAH BALENÍ

- Oční masážní přístroj BeautyRelax BR-1860 AIRGLASSES PREMIUM
- Nabíjecí kabel.
- Síťový adaptér 220V.
- Návod k obsluze.




POPIS PŘÍSTROJE

1. Ovládací tlačítka
2. Hmatový orientační výstupek
3. Vstup pro nabíjecí kabel
4. Pásek pro uchycení na hlavu
5. Masážní plocha přístroje

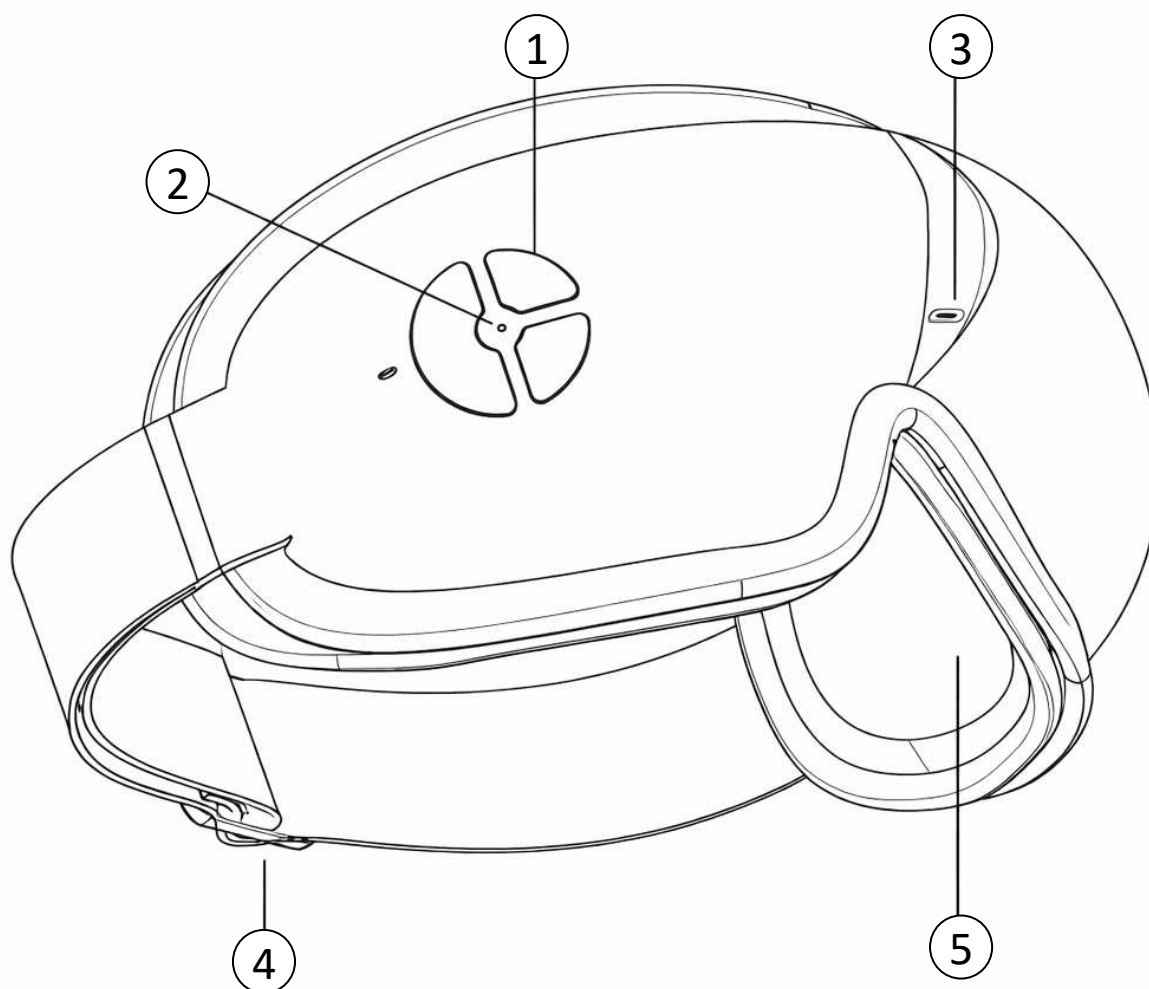

POPIS PŘÍSTROJE

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **HUDBA**
3. Tlačítko **INTENZITA**
4. Světelný indikátor

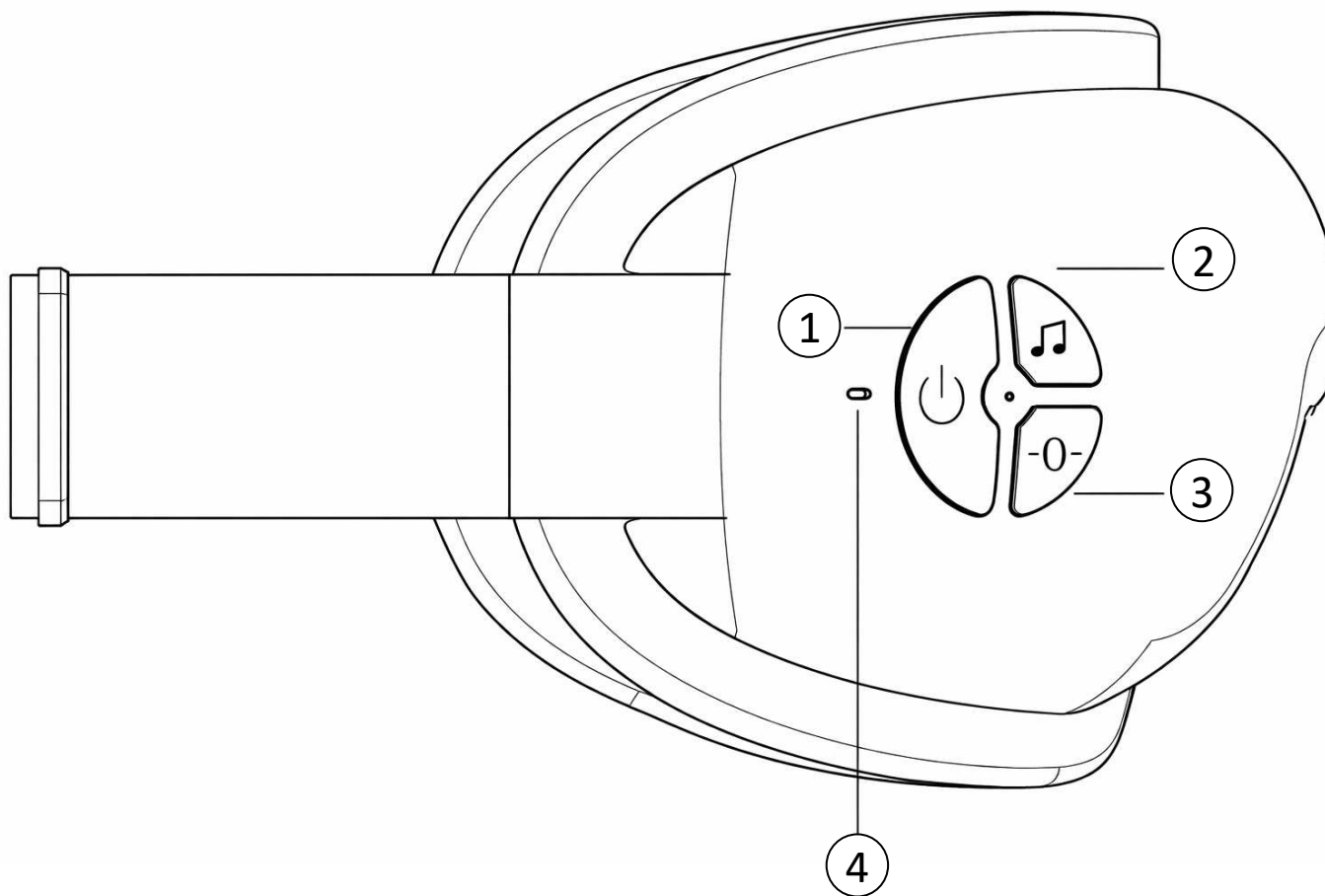

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou činnost přístroje nabijte baterii. Více v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**.
2. Udělejte si pohodlí. Ideálně si lehněte na postel nebo pohovku.
3. Přístroj si nasadte na hlavu. Pomocí pásky přizpůsobte tak, aby vám bylo nošení příjemné. Přístroj by neměl silně tlačit na oblast kolem očí, ale zároveň by měl na hlavě dobře držet. Přístroj nesmí být příliš přitažen k hlavě. Při kompresní vzduchové masáži se přístroj na hlavu více přitlačí.
4. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Spuštění přístroje je doprovázeno hlasovou signalizací.
5. Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** si můžete měnit mezi jednotlivými masážními programy: **AUTOMATIC, SLEEP, HOT COMPRESS, MUSIC**. Zvolte takový masážní program, který vám nejvíce vyhovuje.
6. Pomocí krátkého stisku tlačítka **HUDBA** můžete upravit hlasitost 0 / 1 / 2 / 3.
7. Krátké stisknutí tlačítka **INTENZITA** souží k regulaci tlaku vzduchové masáže (nízká, střední, vysoká).
8. V režimu působení tepla podržte současně tlačítka **HUDBA** a **INTENZITA** pro přepnutí vysoké (výchozí) a nízké teploty.
9. Světelná indikace: nízký stav baterie: červená bliká + hlášení „low battery“ každé 2 minuty. Nabíjení: červená pomalu bliká. Plně nabito: modrá svítí trvale.
10. Po uplynutí času přístroj vypnete nebo pokračujte výběrem masážního programu.
11. **Nedoporučujeme přístroj používat déle než 30 minut denně.**
12. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

SCHÉMA MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ

Masážní přístroj je vybaven několika automatickými masážními programy, ze kterých si uživatel může zvolit podle svých aktuálních potřeb. Jednotlivé programy kombinují různé funkce přístroje, jako je vzduchová masáž, vyhřívání a relaxační hudba. Každý masážní program nabízí odlišnou kombinaci funkcí a přednastavenou délku masáže, což umožňuje přizpůsobit použití přístroje míře únavy a požadovanému relaxačnímu účinku. Programy jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální komfort a bezpečné používání bez nutnosti manuálního nastavování.

Režim	Vzduchová masáž	Vyhřívání	Integrovaná hudba	Čas (min)
Automatický režim	✓	✓	✓	10
Režim spánku	✓			15
Režim horkého obkladu		✓		10
Hudební režim			✓	10

NABÍJENÍ BATERIE

Baterii nabíjíte v následujících případech:

- přístroj nelze zapnout
- světelná indikace bliká červeně
- vzduchová kompresní masáž má slabší výkon

Postup nabíjení:

1. Stav vybité baterie indikuje blikající světelná indikace v červené barvě.
2. Přístroj připojte k nabíjecímu kabelu, který je součástí balení. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku nebo síťového adaptéru, který je součástí balení (pro účely nabíjení baterie je zakázáno používat jiný typ adaptéru).
3. Průběh nabíjení signalizuje blikající indikace v červené barvě.
4. Jakmile je baterie nabitá, světelná indikace svítí v modré barvě.
5. Přístroj v průběhu nabíjení nezapínejte a nepoužívejte.
6. Čas nabíjení závisí na kondici baterie.
7. Výdrž přístroje na jedno nabití závisí na kondici baterie a na typu masážního programu.
8. Jakmile je baterie nabitá, přístroj odpojte od kabelu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Pokud přístroj používá více osob, dbejte zvýšenou pozornost čištění plochy, která je v kontaktu s pokožkou.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz

beautyrelax

   **PO - PÁ 11:00 - 18:00**
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Oční masážní přístroj AIRGLASSES PREMIUM

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-1860**

EAN 8594166118607

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2025

.....
Martin Hrbek, jednatel