

# NÁVOD K OBSLUZE

přístroj na formování prsních svalů  
model BR-1210

## BOOSTER





## OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
VÝSTRAHA	5
UPOZORNĚNÍ	5
VÁŽNÉ UPOZORNĚNÍ	6
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	6
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VELIKOST PRSOU	7
KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY SLIBUJÍCÍ ZÁZRAČNÉ ZVĚTŠENÍ PRSOU PODLE EXPERTŮ	7 8
HLAVNÍ VÝHODY	8
CO MŮŽETE OČEKÁVAT	8
POPIS PŘÍSTROJE	9
POPIS DISPLEJE	10
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	13
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Věnujte prosím čas následujícím instrukcím, aby bylo používání přístroje správné a bezpečné.

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou
- je zakázáno používat přístroj v koupelně
- dodržujte přesně délku a způsob ošetření
- přístroj nekombinujte používáním obdobného přístroje jiného výrobce
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie
- kabely elektrod neohýbejte; na přístroj nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty
- během používání přístroje se vyhýbejte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, obraťte se na prodejce
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- dbejte na to, aby přístroj a všechny jeho součásti byly vždy suché
- plochou aplikační hlavici po každém použití vyčistěte pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku a další hadříčkou vysušte kompletně do sucha

BeautyRelax Booster BR-1210 je zakázáno používat, pokud současně používáte tyto přístroje:

- Lékařské elektronické přístroje (např. kardiostimulátor).
- Lékařské elektronické přístroje, které podporují životní funkce (např. umělé srdce, plíce, játra, apod.).
- Jiné lékařské přístroje (např. elektrokardiograf).



## **KONTRAINDIKACE**

BeautyRelax Booster BR-1210 je zakázáno používat, pokud trpíte těmito zdravotními obtížemi:


- Akutní zdravotní potíže
- Srdeční problémy
- Vysoké horečky
- Těhotenství
- Zhoubné nádory
- Trvalý nízký nebo vysoký krevní tlak
- Infikovaná rána nebo podobné vážné zranění
- Alergické kožní problémy
- Podrobení se lékařské diagnostické terapii
- Nepříjemná souvislá bolest svalů v důsledku jejich nadměrného přetížení



## **VÝSTRAHA**

Dbejte následujících pokynů:


- Je zakázáno umísťovat aplikační elektrodu přímo na oblast srdce, krku, hlavy, do oblasti genitálií. Elektrody nepoužívejte na oblasti, které trpí kožními chorobami nebo odřeninami.
- Přístroj se nesmí používat v kombinaci s jinými lékařskými přístroji. Před používáním nepoužívejte krémy nebo spreje. Mohlo by dojít k poškození pokožky.
- Přístroj používejte podle přesně daných pokynů v tomto návodu. Přístroj se nesmí používat k jiným účelům než posilování prsních svalů.
- Elektrody, které jsou součástí balení, nepřipojujte do jiného zařízení nebo dokonce zdroje elektrického proudu 220V. Jsou určeny výhradně k připojení do přístroje BeautyRelax Booster BR-1210.
- Přístroj sami neopravujte, nerozebírejte, nedemontujte žádnou z jeho součástí. Záruka by tím ztratila platnost a za případně způsobené škody na zdraví či majetku bychom nepřijímali žádnou zodpovědnost.
- Bez předchozího pečlivého prostudování tohoto návodu k obsluze se nesmí přístroj používat.

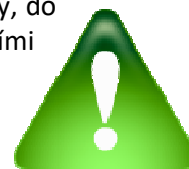

## **UPOZORNĚNÍ**

- Pokud se necítíte při používání přístroje dobře nebo se vyskytnou nečekané zdravotní komplikace, činnost přístroje okamžitě vypněte a další použití konzultujte se svým lékařem.
- Vzhledem k zajištění maximální účinnosti přístroje vypněte veškerá elektronická zařízení, která případně používáte (MP3 přehrávač, mobilní telefon při telefonování).
- Přístroj se nesmí používat ve spánku, kdy nejste schopni mít přístroj plně pod kontrolou. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
- Elektrodu nepoužívejte na jednom místě déle než 30 minut.
- Dbejte na to, aby se během používání elektroda nedostala do kontaktu s kovovými vodivými předměty (řetízky, náramky, prsteny, ... )

## VÁŽNÉ UPOZORNĚNÍ

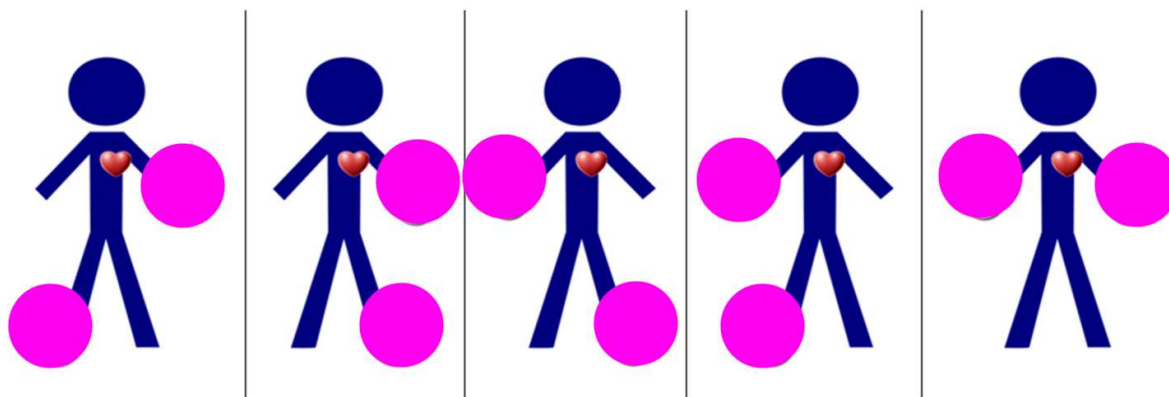

**Elektrody nikdy neaplikujte na tělo ve výše zobrazených kombinacích. Elektrické impulzy by proudily přímo přes srdce, což je striktně zakázáno!**

## PRINCIP FUNGOVÁNÍ

BeautyRelax Booster využívá technologie mikro elektrických pulzů, které se přes kabely přenáší do aplikačních elektrod. Působení mikro elektrických pulzů výrazně podporuje cirkulaci krve a následné zlepšení vitality buněk. Prostřednictvím mikro elektrických pulzů v nejrůznějších módech a úrovních nastavení stimulují hypothalamo-hypofysární systém k sekreci gonadotropního hormonu FSH z adenohipofýzy a také růstového hormonu. Jeho působením v krevním oběhu začnou buňky přirozeně uvolňovat estrogen. Poté jsou prostřednictvím zvýšené hladiny estrogenu stimulovány buněčné receptory, které se nacházejí v buňkách prsní tkáně, následkem čehož se prsní tkáň zvětšuje a roste. Transgender muži, kteří touží po žensnější postavě obvykle podstupují hormonální léčbu, která zahrnuje estrogen. Zvýšená hladina estrogenu způsobí i zvýšenou produkci růstového hormonu. Růstový hormon pak podporuje účinky estrogenu při rozvoji ženských pohlavních znaků.

BeautyRelaxBooster umožňuje nastavit sílu a intenzitu mikro elektrických pulzů pro stimulaci. Následkem je také účinné zvýšení houževnatosti svalové struktury a zlepšení pevnosti prsní tkáně. Dlouhodobé pravidelné používání napomáhá udržet citlivou reaktivitu těla na produkci hormonu a udržet tak stabilní výživu tkání a buněk.



BeautyRelax Booster nabízí šetrné, ale zároveň účinné řešení bez chirurgického zásahu skalpelem. Stimulace prsní tkáně. Bezpečné, bezbolestné. Bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

## FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VELIKOST PRSOU

Prsa jsou z velké části tvořeny tukem. Zvýšením tělesné váhy obvykle vede i ke zvětšení prsou. Při hubnutí však dojde ke ztrátě tuku i z prsou. Sníží se jejich pevnost a opticky jsou povislejší. Pevnost a tvar poprsí jsou závislé na ztrátě vody v prsní tkáni, **která souvisí s vitalitou a výživou buněk prsní tkáně.**

Růst a velikost prsou je zcela individuální a technicky vzato doprovází ženu po celý její život. Faktorů ovlivňujících jejich velikost je celá řada

- genetika
- hormonální antikoncepce
- nadváha
- zavodnění organismu
- těhotenství
- kouření
- ochablé prsní svaly
- metabolické procesy

## KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY SLIBUJÍCÍ ZÁZRAČNÉ ZVĚTŠENÍ PRSOU

V dnešní době existuje na trhu celá řada přípravků pro zvětšení prsou. Obvykle se jedná o nejrůznější krémy, pasty a jiné přípravky. Část z nich obsahuje syntetický nesteroidní estrogen (diethylstilbestrol). Do jisté míry může nastat mírné zvětšení prsou. Tento stav však obvykle trvá velice krátkodobě. Jakmile přestanete přípravek s podobným složením používat, prsa se vrátí opět do původní podoby. Látky s tímto složením mohou navíc způsobovat nežádoucí pigmentové zbarvení pokožky, černé pihy, nepravidelnou menstruaci, atp.

### *Potravinové doplňky s estrogenem*

Dospívající dívky s normálním menstruačním cyklem mají dostatečné množství estrogenu v těle, ale pokud je jim umělý estrogen podán orálně se záměrem podpoření růstu prsní tkáně, dojde přílišným zvýšením jeho hladiny v krvi k zastavení sekrece přirozeného estrogenu do těla, čímž se i růst prsní tkáně zastaví a dojde k opačnému účinku, než je požadován: růst prsou se zastaví. Přípravky určené k orálnímu podání mají také nevýhodu v tom, že slibují zvětšení prsou stimulací sekrece přirozeného estrogenu, ale v takovém případě je nárůst jeho hladiny v krvi příliš vysoký a spolu s prsy roste i tuková tkáň v těle. Potravinové doplňky také neprocházejí tak složitým testováním jako léky, a proto se v nich mohou objevit i zdraví ohrožující složky.

Užívání vysokých dávek těchto přípravků navíc způsobuje poškození ledvin a žaludku, přičemž jejich dlouhodobé užívání může mít závažné důsledky na vaše zdraví.

## **PODLE EXPERTŮ**

Ženy s menšími prsy jsou psychicky bohužel často samy se sebou nespokojené, což způsobuje další duševní problémy a jiná trápení.

Ze sexuologického hlediska velikost prsou úzce souvisí s hladinou estrogenu v těle, nedostatek tohoto hormonu ovšem neovlivňuje pouze velikost prsou, ale i ženský menstruační cyklus a plodnost. Malá prsa tak mohou indikovat jeho nedostatek.

Během laktace mohou méně vyvinuté prsní žlázy projevovat určitou dysfunkci sekrece mléka, což nejen narušuje laktaci jako takovou, ale může také způsobovat mnoho nepříjemností včetně zánětu.

## **HLAVNÍ VÝHODY**

- zcela neinvazivní charakter ošetření
- nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity
- bezbolestné a naprosto bezpečné používání
- časová nenáročnost: 1 procedura trvá 10 až 15 minut
- bez jakýchkoliv vedlejších účinků

## **CO MŮŽETE OČEKÁVAT**

- přímé posílení prsních svalů – zlepšení houževnatosti svalové struktury
- stimulaci pro nastartování přirozeného procesu uvolňování estrogenu
- výraznou podporu krevního oběhu pro zlepšení vitality buněk




## POPIS PŘÍSTROJE



1. vstup pro zapojení kabelu elektrod
2. displej
3. tlačítko OFF/snížení hodnoty
4. tlačítko ON/zvýšení hodnoty
5. tlačítko MODE
6. tlačítko (S/P) přepnutí nastavení mezi SPEED (rychlost) a POWER (intenzita)
7. kontaktní elektroda
8. kabel elektrod

## POPIS DISPLEJE

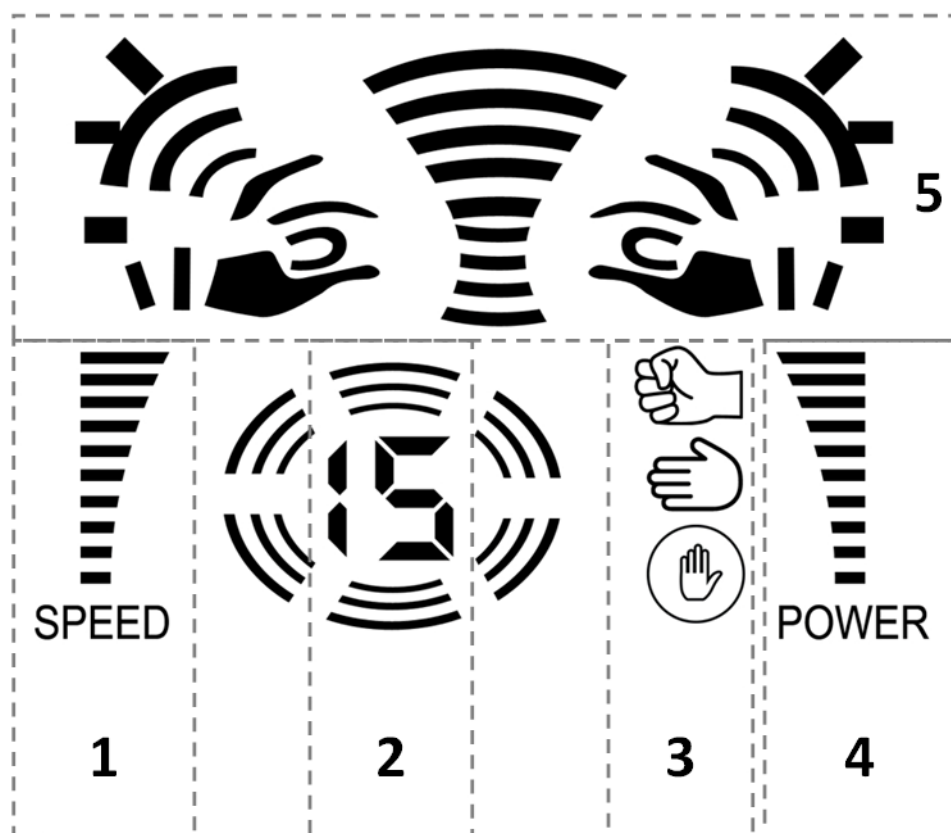

**1. SPEED** - ukazatel aktuálně nastavené rychlosti pulzní terapie

**2. ČASOVAČ** - počet minut zbývajících do automatického vypnutí (počáteční hodnota je vždy 15 [minut] a nelze ji zvýšit; pokud chcete činnost přístroje prodloužit, zahajte nový masážní proces

**3. DRUH MASÁŽE** - signalizace aktuálně nastaveného druhu masáže; celkem je dispozici na výběr 8 variant

**4. SÍLA** - ukazatel aktuálně nastavené síly pulzní terapie

**5. PRŮBĚH PULZNÍ TERAPIE** - pomocí soustavy obrazců je přetvářen průběh pulzní terapie do obrazové podoby

### Poznámka:

Sytost a tím i viditelnost zobrazených informací výrazně závisí na stavu baterií. Pakliže jsou údaje na displeji vybledlé a špatně čitelné, je třeba vyměnit baterie za nové

Velmi pečlivě dbejte o úroveň intenzity elektrických impulzů pro jednotlivé oblasti těla. Vždy začněte od nejnižší hodnoty, tj. od hodnoty 1. Intenzitu masáže zvyšujte pomalu a **POSTUPNĚ!** Pokud budete cítit, že vám aktuálně nastavená intenzita není příjemná, snižte ji nebo přístroj vypněte!

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/▲**
2. Pomocí tlačítka **MODE** si můžete vybírat z 8 masážních režimů. Odlišují se od sebe frekvencí změny pulzů.

***Poznámka:** u všech 8 režimů si můžete libovolně nastavit sílu a rychlost elektrických pulzů; svaly tak můžete aktivně posilovat (vyšší rychlost a síla pulzů) nebo jim poskytnout příjemné uvolnění (nižší rychlost a síla pulzů)*


3. Časovač je automaticky nastaven na 15 minut. Pro navrácení do výchozí hodnoty 15 minut stiskněte krátce tlačítka **OFF/▼**
4. Pomocí tlačítka **S/P** přepínáte mezi nastavením síly pulzů **POWER** nebo rychlosti pulzů **SPEED**. Konkrétní hodnotu upravte stiskem tlačítka **ON/▲**(zvýšení) nebo tlačítka **OFF/▼**(snížení)
5. Přístroj vypnete dlouhým stiskem tlačítka **OFF/▼**

## POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Používání přístroje Booster by se mělo stát příjemnou chvilkou a relaxací.
2. Načasujte si použití po koupeli, kdy je pokožka čistá a vláčná. Sundejte si hodinky, náušnice, řetízky, apod.
3. Pusťte si vaší oblíbenou muziku.
4. Sedněte si do pohodlného křesla nebo lehněte na pohovku.
5. Elektrody připojte k přístroji pomocí přiloženého kabelu.
6. Na ošetřovanou partii naneste jemnou vrstvu čirého aplikačního gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi elektrodou a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Použití přístroje bez pojivého gelu nedoporučujeme.

7. Elektrodu přiložte na prsa. Pomocí otvorů upravte elektrodu takovým způsobem, aby nebyla v kontaktu s prsním dvorcem. Tato oblast je extrémně citlivá a působení pulzů by vám nebylo příjemné.

8. Nyní jsou splněny všechny podmínky pro terapii. Zapněte přístroj a nastavte si takový režim a intenzitu masáže, která vám bude příjemná.

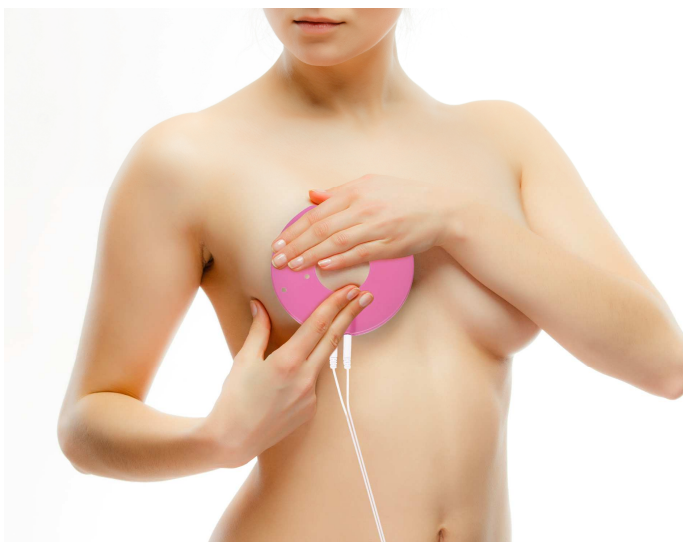

**Poznámka:** Každý jedinec vnímá působení pulzů odlišně. Záleží na citlivosti pleti a síle podkožního tuku. Podkožní tuk vytváří izolační vrstvu, která sílu pulzů výrazně eliminuje. Proto má přístroj možnost nastavení síly pulzní masáže. Díky tomu je velmi snadné nastavit si přesně takovou hodnotu, která vám nezpůsobuje výrazně nepříjemné pocity.

**Upozornění:** Sílu pulzní masáže nastavujte skutečně obezřetně. I když je přístroj malých rozměrů, může dosahovat poměrně velkého výkonu. Výchozí hodnota síly pulzní masáže je vždy ta nejnižší. Ručně ji lze postupně upravovat. Nelze paušálně stanovit, jaká hodnota je vhodná právě pro vás. Záleží jen a pouze na vašich rozlišovacích schopnostech, co snesete a co je již za hranou.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

### ***Hlavní jednotka***

Přístroj čistěte pouze suchou nebo jemně navlhčenou bavlněnou hadříčku v jemném mýdlovém roztoku. K čištění v žádném případě nepoužívejte agresivní ředidla, laky nebo roztoky s lihovouází. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

### ***Elektrody***

Po každém použití odstraňte z elektrod veškeré zbytky vodivého sono gelu. Vždy je pečlivě zbavte veškeré vlhkosti. Dbejte na to, aby nebyly kabely elektrod zamotané do sebe.

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Proč je doporučeno používat vodivý sono gel?**

Stimulace prsních svalů probíhá na bázi elektrických pulzů. Aby mohly pulzy co nejlépe proniknout až ke svalové tkáni, musí existovat vhodná pojivá vrstva mezi elektrodou a pokožkou. Je to stejné, jako např. při ultrazvukovém vyšetření břicha ženy v těhotenství. Ultrazvukové vlny stejně jako elektrické pulzy překonávají svrchní vrstvu pokožky díky vodivému gelu snadněji.

### **Jaká je doporučená délka používání?**

Ideální je rozsah od 10 do 15 minut. Posilovat prsní svaly můžete každý den. Záleží na vašich časových možnostech a chuti.

### **Proč by měl přístroj na zpevnění prsních svalů fungovat?**

Stimulace svalů elektrickými pulzy se používá po celém světě. Přístroje tohoto typu si získaly oblibu zejména mezi sportovci, kteří mohou při vyšším výkonu nastavení svaly posilovat. Naopak v módu menší intenzity svaly uvolní po náročné fyzické zátěži. Díky fantastickým účinkům na svalová vlákna vniknul EMS přístroj, který má speciálně upravené elektrody pro aplikaci na prsa.

### **Jsou přístroj nebo elektrody vodotěsné.**

Ani přístroj, ani elektrody nejsou nějak chráněny proti vodě. Přestože jsou elektrody vyrobené z pryže, mají vstup pro kabel, kam nesmí vniknout voda.

### **Je třeba elektrody měnit?**

Ano. Aplikční elektrody jsou spotřební materiál. Po určitém čase degradují a snižuje se jejich celková účinnost. Jsou k dispozici u prodejce nebo distributora.

### **Jak poznám, že jsou baterie vybité?**

Jeden z hlavních signálů je snížení kontrastu displeje. Výrazně také klesne výkon elektrických pulzů.

### **Má přístroj nějaké vedlejší účinky?**

Na místech aplikace elektrod může pokožka mírně zčervenat. Tento stav však velmi rychle vymizí.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz

## ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Zkontrolujte	Řešení
Z elektrod nejdou žádné impulzy, masáž neprobíhá	Zkontrolujte, zda nejsou v prostoru pro baterie cizí předměty.	Zkontrolujte prostor pro baterii a všechny cizí předměty odstraňte.
	Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité nebo nemají špatnou polaritu.	Baterie vyměňte za nové nebo kontakty k baterii připevňte správně.
	Zkontrolujte, zda není třeba baterie na kontakty správně docvaknout.	Pokud je problém s malým tlakem pružin na baterii, vezměte nějaký předmět, pomocí kterého pružinu opět narovnáte.
Stimulace impulzy je velmi slabá nebo žádná.	Zkontrolujte, zda jsou elektrody správně připojeny.	Konektor drátku pevně přimáčkněte k elektrodě.
	Zkontrolujte, zda jste z elektrody odstranili ochrannou fólii.	Fólii z elektrody odlepte.
	Zkontrolujte, zda jsou elektrody přilepeny pouze na pokožku.	Elektrodu odlepte, odstraňte cizí předměty a poté znovu nalepte.
	Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.	Baterii vyměňte za novou.
Pokožka v místě používání zčervená nebo nepříjemně svědí.	Příliš dlouhá doba používání.	Dobu používání zkraťte.
	Konzultujte se svým lékařem, zda se nemůže jednat o alergickou reakci.	Pokud je reakce pokožky mírná, stačí pouze změnit polohu elektrod. Pokud je silná, přístroj nepoužívejte a navštivte svého alergologa.
	Zkontrolujte, zda jsou elektrody v těsném kontaktu s pokožkou.	Elektrody přitiskněte pevně k pokožce.
	Zkontrolujte, zda nejsou na elektrodách nečistoty.	Elektrody vyčistěte nebo vyměňte za nové.
	Po čištění zkontrolujte, že jsou elektrody suché.	Elektrody pečlivě vysušte, nebo vyměňte za nové.
	Zkontrolujte, zda není gel elektrod poškozen.	Poškozenou elektrodu vyměňte.
Během používání přístroje se elektrické impulzy zeslabí nebo se úplně přeruší.	Zkontrolujte, zda nedošlo během používání k uvolnění elektrody od drátku.	Přístroj vypněte a elektrodu k drátku správně připevňte.
	Zkontrolujte, zda není poškozen vodící kabel.	Použijte kabel nový.
	Přístroj se automaticky vypnul, protože přednastavená doba masáže.	Přístroj znovu zapněte a nastavte si nový cyklus masáže.
Přestože intenzitu masáže zvýšíte, stimulace je velmi slabá nebo dokonce žádná.	Zkontrolujte, zda nejsou na pokožce nečistoty.	Pokožku důkladně očistěte a osušte.
	Zkontrolujte správnou polohu, ve které jsou elektrody k pokožce přiloženy.	Polohu elektrod upravte.
	Zkontrolujte správnost polohy přiložení elektrod.	Následujte umístění elektrod dle instrukcí v tomto návodu.
	Zkontrolujte, zda není baterie vybita.	Baterii vyměňte za novou.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**