

NÁVOD K OBSLUZE

estetický přístroj na formování postavy
BeautyRelax BR-1220(W)

CELLUFORM



OBSAH:

| | |
|--|----|
| UPOZORNĚNÍ | 4 |
| OBSAH BALENÍ | 5 |
| KONTRAINDIKACE | 5 |
| ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ | 5 |
| LYMFATICKÉ UZLINY | 6 |
| PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE | 7 |
| HLAVNÍ VÝHODY | 8 |
| CO MŮŽETE OČEKÁVAT | 8 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | 8 |
| POPIS PŘÍSTROJE | 9 |
| POPIS DISPLEJE | 10 |
| OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE | 11 |
| POPIS JEDNOTLIVÝCH MÓDŮ | 13 |
| UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE | 14 |
| POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ | 19 |
| ČAS OŠETŘENÍ | 21 |
| NABÍJENÍ BATERIE | 21 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 21 |
| NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI | 22 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 24 |
| CERTIFIKACE | 24 |
| DOVOZCE | 24 |
| PROHLÁŠENÍ O SHODĚ | 25 |

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



OBSAH BALENÍ

- Estetický přístroj Beautyrelax Celluform.
- Nabíjecí kabel.
- Nabíjecí adaptér 220V.
- Hadřík.
- Návod k obsluze.

KONTRAIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týkají některé z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Vysoký cholesterol
- Kožní onemocnění
- Únavový syndrom
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem




ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



LYMFATICKÉ UZLINY

Při ošetření přístrojem **Beautyrelax Celluform** se **vyhněte** těmto oblastem lymfatických uzlin. Pohyb přístroje v těchto oblastech je **přísně zakázáno**. Oblasti jsou zobrazeny velkými zelenými skvrnami na obrázku:

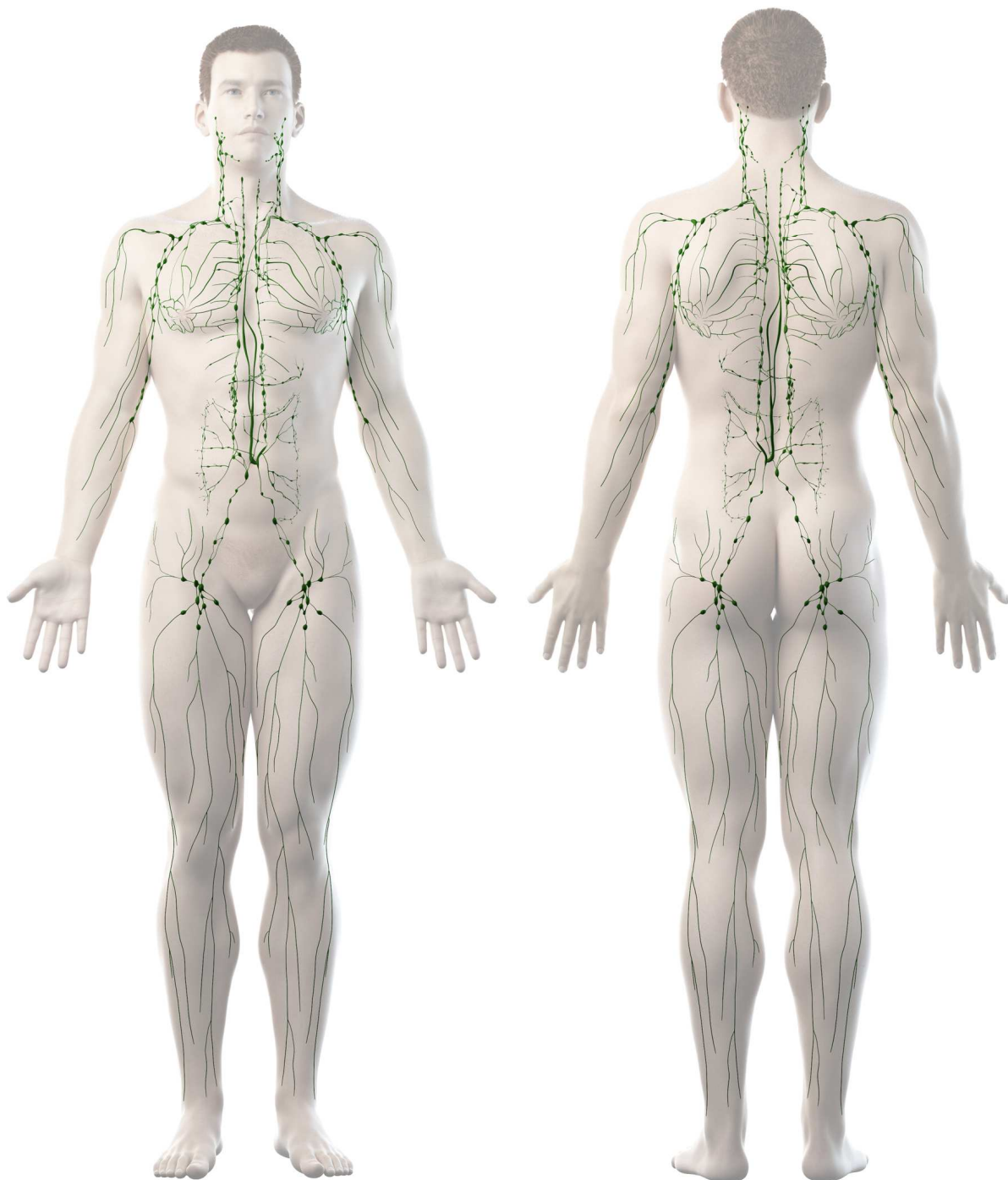

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Celluform je certifikovaný revoluční nástroj, kterým budete v pohodlí svého domova formovat postavu jako v beauty studiu! Díky kombinaci několika technologií získáte silný nástroj v boji proti přebytečnému tuku, celulitidě a povislé pokožce. Za ošetření v salonech zaplatíte desetitisíce. Nyní si za zlomek ceny pořídíte technologie používané profesionály!

1. Ultrazvuková kavitace

Přístroj na domácí kavitaci generuje prostřednictvím velké aplikační hlavice ultrazvukové vlny, které pronikají do podkoží. Tkáň následně absorbuje tuto ultrazvukovou energii. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáň nevrací. Ultrazvuková kavitace je bezbolestná, neinvazivní, šetrná, účinná a hlavně trvalá metoda pro odstranění tukové tkáň, redukci celulitidy a vyhlazení pokožky.




2. Radiofrekvence

Aplikátor po přiložení na ošetřovanou oblast uvolňuje energii se zcela specifickým výkonem a frekvencí. Radiofrekvenční vlny jsou optimalizovány k tomu, aby způsobily tepelný gradient, který významně ovlivňuje procesy ve vrstvě dermis. Dodaná energie aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Maximální možné zacílení energie i v lokalitách s výraznější tukovou vrstvou a následná excitace metabolických procesů má významný vliv na velmi efektivní vyhlazení povislých a deformovaných kontur.



3. Červené světlo 625nm

Terapie světlem patří mezi nejstarší metody, které napomáhají v boji proti rozličným kožním defektům. Fotonová terapie využívá přirozené světelné vlny, které generují LED diody. Vlny ve specifických délkách jsou předávány do kůže. Světlo proniká do těla jako proud energie (ve formě fotonů), která je vstřebávána jednotlivými složkami kůže. Různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.

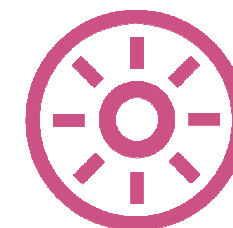


Hlavní účinky červeného světla o vlnové délce 625nm

- podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni
- brání v tvorbě pigmentu

4. Vibrační masáž

Aplikační hlavice má navíc funkci vibrační mechanické masáže. Dochází ke zlepšení krevního oběhu, vitality buněk a podpoře lymfatického systému. Vibrace mechanicky rozkmitají pevnou tukovou tkáň. Proces rozkladu tuku je tak násobně efektivnější. Pleť je na dotyk pružnější a hladší.

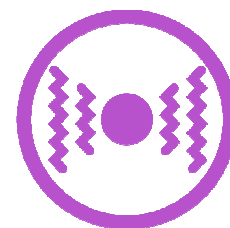

HLAVNÍ VÝHODY

- 4 inovativní technologie pracující ve 4 různých módech
- lepší dosažitelné výsledky ve srovnání s přístroji obdobného charakteru
- zcela neinvazivní charakter ošetření
- nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity
- bezbolestné a naprosto bezpečné používání
- časová nenáročnost: 1 procedura trvá 15 minut
- bez jakýchkoliv vedlejších účinků

CO MŮŽETE OČEKÁVAT


- dosažitelné a viditelné výsledky i v případech, kdy tuk prorůstá svalovou hmotou (zejména u mužů nebo sportovně založených žen)
- odstraňování tuku z problematických partií ženského i mužského těla
- formování význačných kontur na ruce, nohách i na těle
- zpevňování a vypínání pokožky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- frekvence ultrazvuku: 300 000 kmitů/sekundu
- červené světlo o vlnové délce 625nm
- podsvícený LCD displej
- časovač
- indikace stavu baterie (zvukem i na displeji)
- provozní napětí: 8.4V
- provozní proud: 0,14 až 1,4A
- nabíjecí napětí: 5V
- výkon: 12W
- napájení: pomocí USB kabelu (součástí balení)
- rozměry: 12x9x9cm
- hmotnost: 290g


POPIS PŘÍSTROJE

Boční strana

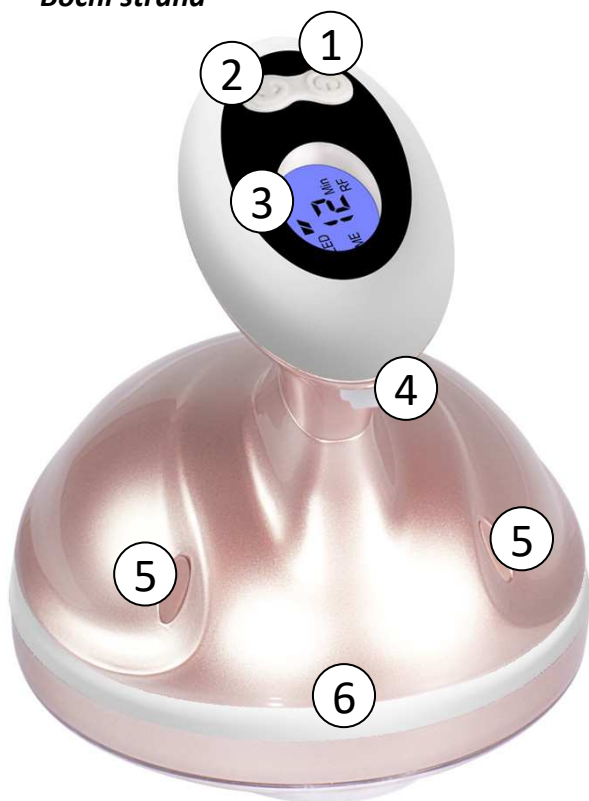


1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko změna funkce
3. Podsvícený displej
4. Nabíjecí USB vstup
5. Krytky šroubků
6. Dekorační pásek

Spodní strana

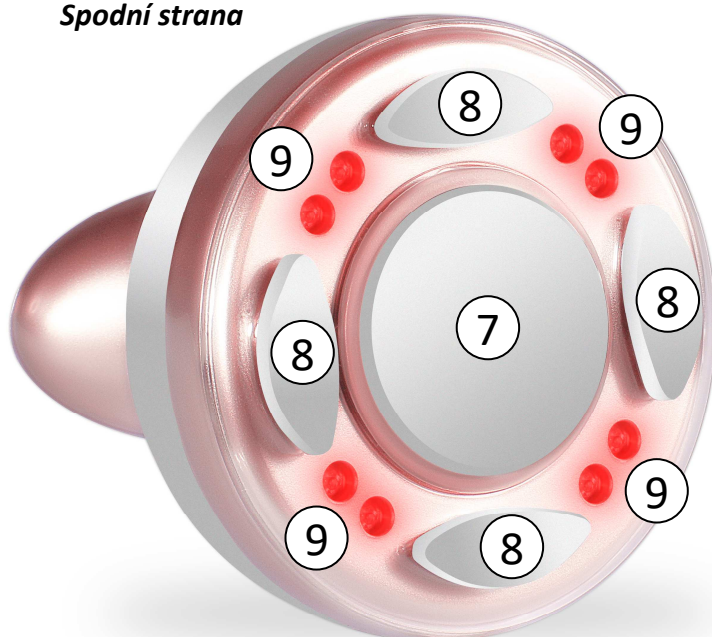



7. Aplikátor ultrazvukových vln
8. Aplikátory radiofrekvence
9. Diody červeného světla

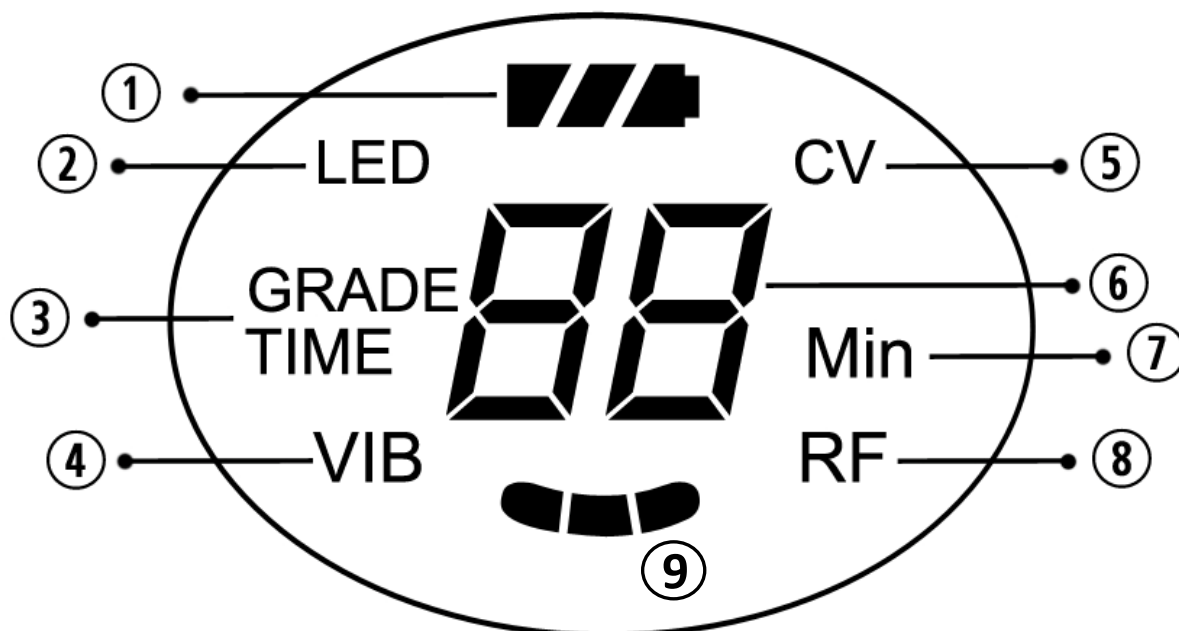POPIS DISPLEJE



1. Stav baterie
2. Červené led světlo
3. Stupeň a čas
4. Režim vibrace
5. Režim ultrazvukových vln
6. Čas
7. Minuty
8. Režim radiofrekvence
9. Signalizace činnosti přístroje

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat si ošetření po celkové koupeli těla.
2. Na ošetřovanou partii naneste jemnou vrstvu čirého aplikačního gelu (není součástí balení). Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoli prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavicí. Užití aplikačního gelu je nezbytné. Přístroj v režimu ultrazvukové kavitace není možno bez přítomnosti gelu na pokožce používat.
3. Tlačítko  ON/OFF slouží pro zapnutí přístroje a přepínání mezi jednotlivými módy.
4. Tlačítko  slouží k nastavení režimu vibrací a červeného světla.
5. Aplikační hlavicí pohybuje po vybrané partii krouživými pohyby. NIKDY s aplikační hlavicí nezůstávejte na jednom místě.
6. Vždy dbejte na to, aby kontaktní hlavice ve spodní části přístroje byly v plném kontaktu s pokožkou. Zajistíte tak maximální efektivitu ošetření.
7. Při každém módu se spustí automaticky časovač v délce 15 minut. Na displeji stále vidíte, kolik minut zbývá do konce.
8. Po skončení odpočítávání se ozve dvakrát akustický signál a přístroj se automaticky vypne.



Tip: Ošetřená partie těla by měla být v ideálním případě bez chloupků. Zlepší to pohyb aplikační hlavice po pokožce. Ultrazvukové vlny a radiofrekvence budou lépe pronikat do podkožní tkáně.

Každá technologie má individuální specifické vlastnosti. Při ošetření pleti je možná jejich vzájemná kombinace. Tím dosáhnete přesně těch účinků, které od používání přístroje Celluform očekáváte.

K dispozici jsou 4 módy se specifickými účinky:

| | |
|-------------------------|---|
| Rozjasnění pleti | červené světlo 625nm + radiofrekvence |
| Spalování tuku | červené světlo 625nm + ultrazvuková kavitace |
| Destrukce tuku | červené světlo 625nm + radiofrekvence + vibrace |
| Formování těla | vibrace + ultrazvuková kavitace |

Červené světlo 625nm + ultrazvuková kavitace

V tomto režimu aplikační hlavice generuje vysokofrekvenční ultrazvukové vlny, které pronikají do podkoží. Tuková tkáň následně absorbuje takto generovanou energii. Dochází k narušení integrity tukové buňky a uvolňuje se tuk. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací.

Červené světlo 625nm + radiofrekvence + vibrace

V tomto režimu působí na tukovou tkáň optimalizovaný výkon radiofrekvence. Tepelným působením dochází ke změnám struktury buněk tuku v podkoží. To má za následek vyhlazení a vypnutí kůže. Radiofrekvence působí přímo na spodní vrstvu kůže, odpovědnou za její uvolnění a stimuluje tvorbu nového kolagenu.

Obě technologie, jak ultrazvuk, tak i radiofrekvence působí na tukovou tkáň různými způsoby. Různými technologiemi. Jeho cíl je však stejný. Narušení tukové buňky a uvolnění tuku.



POPIS JEDNOTLIVÝCH MÓDŮ

1. Přístroj je vypnutý. Stiskněte krátce tlačítko ON/OFF. Přístroj se zapne do módu 1.
2. Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF aktivujete mód 2.
3. Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF aktivujete mód 3.
4. Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF aktivujete mód 4.
5. Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF přístroj vypnete.




Funkce tlačítka GRADE

Pokud je zapnuté červené světlo, můžete pomocí tohoto tlačítka nastavit jeden ze tří režimů: **pomalé blikání**, **rychlé blikání**, **kontinuální světlo**.

Pokud je zapnutá funkce vibrací, můžete pomocí tohoto tlačítka nastavit jeden ze tří režimů: **rychlá vibrace**, **pomalá vibrace**, **kontinuální vibrace**.


Číslo na displeji značí primárně hodnotu vibrací GRADE 1,2,3 nikoliv číslo režimu!

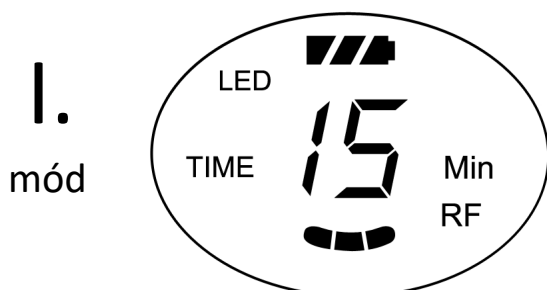

Rozjasnění pleti

LED červené světlo


RF radiofrekvence

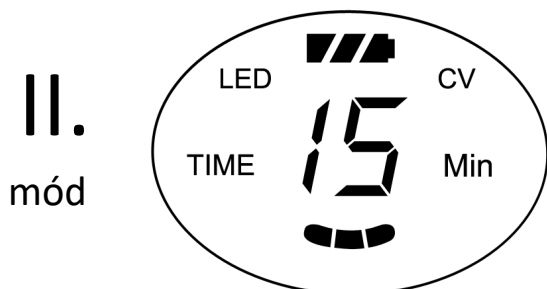

Spalování tuku

LED červené světlo

CV ultrazvuková kavitace

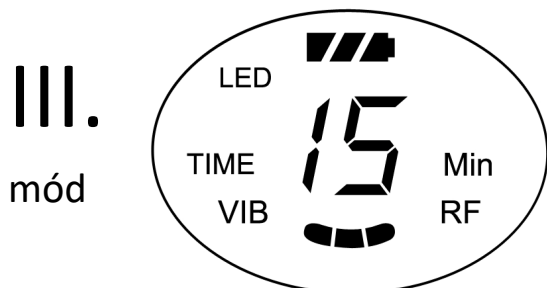


Destrukce tuku

LED červené světlo

RF radiofrekvence

VIB vibrace

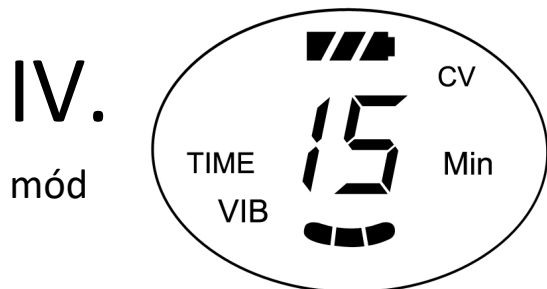

Formování těla

VIB vibrace

CV ultrazvuková kavitace

UNIVERZÁLNÍ TECHNIKA MASÁŽE



PAŽE



Udělejte si pohodlí a uvolněte svaly na ruce. Aplikační hlavici přístroje se pohybujte směrem k rameni. Postupně ošetřete vnější i vnitřní stranu paže. Pohybujete se pomocí krátkých rovných pohybů dle ilustrace na obrázku. Snažte se zaměřit na ty části paže, kde je nejvíce tukové tkáně.



Postupujte stejným způsobem jako v předchozím kroku. Nyní provádějte krouživé táhlé pohyby. Tímto způsobem ošetřete postupně celou paži. Zaměřte se na oblast se zvýšeným výskytem tukové tkáně.

PAS & BŘÍŠKO

Aplikační hlavicí se pohybujte v krouživém pohybu. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými pohyby s menšími kruhy. Takto ošetřete celou oblast břicha. Vždy se snažte vyhnout přímo místu s pupíkem. Pohyb můžete provádět po směru nebo proti směru hodinových ručiček.


Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby. Snažte se zaměřit na boční stranu pasu. Postupujte směrem shora dolů a tento postup opakujte.

HÝŽDĚ

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými oblými pohyby od středu hýždí směrem nahoru k pasu ve tvaru U.

Aplikační hlavicí se pohybujte táhlými krátkými pohyby se smyčkou uprostřed dráhy. Můžete takto ošetřit celou oblast hýždí.

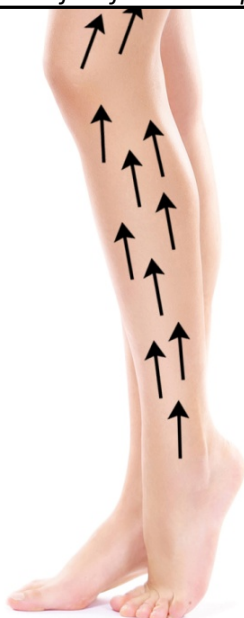

STEHNA & LÝTKA

Aplikační hlavicí se pohybujte krátkými rovnými pohyby. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte pomocí delších táhlých krouživých pohybů. Optimálně od spodní strany končetiny směrem nahoru.



Aplikační hlavicí se pohybujte obloukovým pohybem. Tímto způsobem můžete ošetřit přední i zadní část končetiny.

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Předloktí
- Paže
- Bříško
- Stehna
- Zadeček
- Lýtka



Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie





profesionální předloktí

ošetření paže

celého břicho

těla zadeček

špičkovým stehna

přístrojem lýtka

beautyrelax celluform

ČAS OŠETŘENÍ

Čas ošetření by neměl přesáhnout **15 minut**. V případě párové části těl rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno.

Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne. Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní.

Příklad rozvrhu ošetření těla

| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|---------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>paže + lýtka</i> | <i>volno</i> | <i>volno</i> | <i>stehna + lýtka</i> | <i>volno</i> | <i>volno</i> | <i>volno</i> |

Proč volné dny?

Po ošetření přístrojem Celluform je nezbytně nutné dát tělo nějaký čas, než proběhne cyklus nastartovaného procesu v těle. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii napětím **8,4V**. Jakmile je baterie vybita, přístroj se automaticky vypne. Stav baterie signalizuje ikona baterie na displeji.

Postup nabíjení:

1. Zapojte kabel do USB portu přístroje.
2. Druhý konec kabelu připojte do 220V adaptéru nebo USB portu počítače či notebooku.
3. Během nabíjení svítí na displeji signalizace „CH“.
4. Po ukončení nabíjení vraťte gumový kryt USB portu nazpět.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně obě aplikační hlavice. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro ošetření ultrazvukovou kavitací přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejzte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvýšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel. Všechny tyto faktory zatěžují vaše játra, která jsou již tak zatížena filtrováním uvolněných tuků z vašeho těla. Další jejich zatížení by mohlo vést k nevolnosti. Po ošetření doporučujeme zvýšit pohybovou aktivitu. Zvýší se krevní oběh a celková látková výměna, která podpoří vyplavení uvolněných tuků ven z těla.

Bolí ošetření přístrojem Celluform?

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné.

Jak poznám, že ultrazvuk i radiofrekvence opravdu funguje?

Během ošetření uslyšíte pouze vysoké slabé pískání, které vydává ultrazvuk. Citliví jedinci mohou cítit jemné mravenčení. Pro ověření funkčnosti ultrazvukových vln naneste drobné množství kapek vody na aplikační hlavici. Ultrazvukové vlny molekuly vody rozkmitají. Pro ověření funkčnosti radiofrekvence naneste malý plátek másla. Jeho povrch se výrazně rozpohybuje.

Jakých výsledků je možné dosáhnout?

Výsledek je výrazně ovlivněn několika faktory. Uvolněný tuk musí tělo zpracovat. To, jak rychle jej zpracuje, závisí především na rychlosti metabolismu, typu vašeho tuku, stavu lymfatického systému nebo životosprávy. Za optimálních podmínek se může jednat až o několikacentimetrový úbytek po opakovaném ošetření při dodržení výše uvedené životosprávy.

Je používání přístroje Celluform bezpečné?

Pokud se přístroj používá na správných partiích a uživatelé neodpovídají některým z uvedených kontraindikací, je ultrazvuková kavitace naprosto bezpečná. Uvolněný tuk je organizmus schopen postupně zpracovat. Výkon je speciálně nastaven tak, aby nedošlo k poškození ostatních buněk a cév.

Jaké zásady je nezbytné dodržovat, aby se požadovaný hubnoucí účinek dostavil?

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, je nezbytné upravit životosprávu a zvýšit příjem tekutin. Ošetření ultrazvukovou kavitací můžete bez obav podstoupit již po 7 až 10 dnech. Nedoporučujeme ošetření více než dvou partií najednou. Pokud ošetřujete partie, které jsou blíže u sebe, efekt kavitace se násobí. V opačném případě (vzdálenějších partií) se efekt rozdělí.

Proč je výrazný cenový rozdíl přístrojů v kosmetických salonech a přístrojích pro domácí použití?

Hlavním důvodem je rozdílná frekvence používání. Přístroje v kosmetických musí být schopné pracovat nepřetržitě od rána do večera. Tím je kladena zvýšená náročnost na použité materiály a celkovou technologickou koncepci (větší zdroje napájení, větší míra chlazení, atd.) Výkon

kosmetických přístrojů pro domácí použití je navržen tak, aby uživateli splnil avizované benefity. Vyšší frekvence použití = dražší výrobní náklady.

Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?

Kontaktní hlavice je třeba pečlivě očistit od kontaktního gelu. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?

Doporučená délka individuálního ošetření je v rozsahu od 10 do 20 minut.

Je přístroj zdravotnický prostředek?

Nikoliv.

Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: rma@santadria.cz Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

Má přístroj nějakou certifikaci?

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: rma@santadria.cz Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

Kde se přístroj vyrábí?

Přístroj si necháváme vyrábět v Číně dle našich požadavků a specifikací. Garantujeme standardní záruční i pozáruční servis.

Může přístroj používat více osob?

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce kontaktních hlavic, druhá osoba přístroj použít může.

Je přístroj vodotěsný?

Není.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Přístroj na ultrazvukovou kavitaci

uvedený na trh pod modelovým označením BeautyRelax Celluform

EAN 8594166106666; 8594166114913

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2:2011

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny v test reportu: **CTA-01-1708001**

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

31. 12. 2017

SANTADRIA s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel

