

NÁVOD K OBSLUZE

Ruční masážní přístroj

BeautyRelax BR-1790B

Kineticforce Portable



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
4 VYMĚNITELNÉ HLAVICE	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
POPIS PŘÍSTROJE	6
POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ	7
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
NABÍJENÍ BATERIE	9
VĚNUJTE POZORNOST	9
MOŽNOSTI POUŽITÍ	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 20 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

Ruční masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Portable je naprosto revoluční a inovativní řešení, které změní váš pohled na celkovou rehabilitaci a regeneraci těla. Přístroj byl navržen profesionálními terapeuty. Při vývoji byl kladen důraz na špičkovou kvalitu a maximální účinnost. Aktuálně neexistuje na trhu efektivnější přístroj srovnatelných kvalit. BeautyRelax Kineticforce Portable ihned uvolní zatuhlé svaly kdekoliv na těle. Dopřejte vašemu tělu blahodárné účinky moderní technologie! Díky kompaktním rozměrům může být přístroj s vámi kdekoliv na cestách.

HLAVNÍ VÝHODY

- Okamžité uvolnění ztuhlých svalů
- Odbourání stresu a duševního napětí
- Svěží pocit při dlouhodobé trvajícím únavě
- Lokálního zlepšení krevního oběhu
- Zmírnění otoků zejména v oblasti končetin
- Regenerace mysli po náročné intelektuální činnosti

4 VYMĚNITELNÉ HLAVICE

- Velký kulatý aplikátor - vhodný pro velké skupiny svalů
- Vidlička - oblast kolem páteře
- Plochá hlavice - vhodná pro všechny části těla
- Projektilová hlavice - oblast kolenou, kloubů a hůře dostupných míst

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Ergonomická rukojeť je potažena z protiskluzového materiálu
- Extrémně nízká hlučnost provozu
- 4 vyměnitelné aplikační hlavice
- 20 rychlostí masáže (1800 až 3200 kmitů za minutu)
- Displej zobrazuje stav baterie a rychlost masáže
- Provozní napětí: 24V
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 2400mAh
- Napájení: USB kabelem typ C (součástí balení)
- Rozměry: 22x22x7cm
- Hmotnost: 800g

OBSAH BALENÍ

- 1x Ruční masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Portable
- 4x Vyměnitelné aplikátory různých tvarů
- 1x Nabíjecí USB kabel typ C
- 1x Návod k obsluze

POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikační hlavice
2. Ovládací panel
3. Rukojeť
4. Sada vyměnitelných aplikačních hlavíc

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH APLIKÁTORŮ



- 5. Kulička** – vhodné pro velké skupiny svalů
- 6. Plochá hlavice** – vhodné pro všechny části těla
- 7. Vidlička** – vhodné pro oblast kolem páteře
- 8. Projektil** – vhodný pro oblast kolem kolenního kloubu a hůře dostupná místa

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- 1.** Vstup pro napájecí kabel
- 2.** % stav baterie
- 3.** Rychlost masáže
- 4.** Tlačítko **ON/OFF**
- 5.** Tlačítko (+) – zvýšení rychlosti masáže
- 6.** Tlačítko (-) – snížení rychlosti masáže

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Podle účelu použití si zvolte jeden ze 4 aplikátorů.
2. Přístroj zapněte stisknutím tlačítka **ON/OFF**.
3. Pomocí tlačítek **(+)** a **(-)** si můžete snadno upravit rychlost masáže. Tlačítko **(+)** pro zvýšení rychlosti a tlačítko **(-)** pro snížení rychlosti masáže. K dispozici je 20 úrovní masáže.
4. Na displeji můžete průběžně sledovat stav nabití baterie v % a rychlost masáže.
5. Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.


NABÍJENÍ BATERIE

1. Průběh nabíjení baterie doprovází blikající světelná signalizace. Průběh nabíjení je zobrazen na displeji.
2. Jakmile je baterie plně nabitá, blikání ustane.
3. Baterii není doporučeno nabíjet, pokud je totálně vybita na nejnižší úroveň.
4. Výdrž baterie na jedno nabití závisí na rychlosti masáže. Vyšší rychlost masáže vybíjí baterii násobně rychleji.
5. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.
6. Nabíjení baterie může trvat 3 až 6 hodin.

VĚNUJTE POZORNOST

1. Při výměně aplikační hlavice vždy dbejte na to, aby byla co nejpevněji zatlačena do otvoru, který je pro aplikátor určen.
2. Přístroj nepoužívejte v kuse déle než 1 hodinu. Mohlo by dojít k jeho výraznému zkrácení životnosti. Mezi jednotlivým použitím dopřejte pauzu minimálně 30 minut.
3. Jakmile je baterie nabitá a rozhodnete se přístroj začít používat, vždy odpojte napájecí kabel.
4. Sílu masáže si můžete volit sami tlakem, kterým budete na jednotlivou tělesnou partii působit. Mějte vždy na paměti, že celkovou intenzitu masáže vždy tvoří síla, kterou působíte na danou tělesnou partii a rychlost, kterou si nastavíte.
5. Zpočátku používání přístroje začínejte vždy na nižších hodnotách rychlosti masáže.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

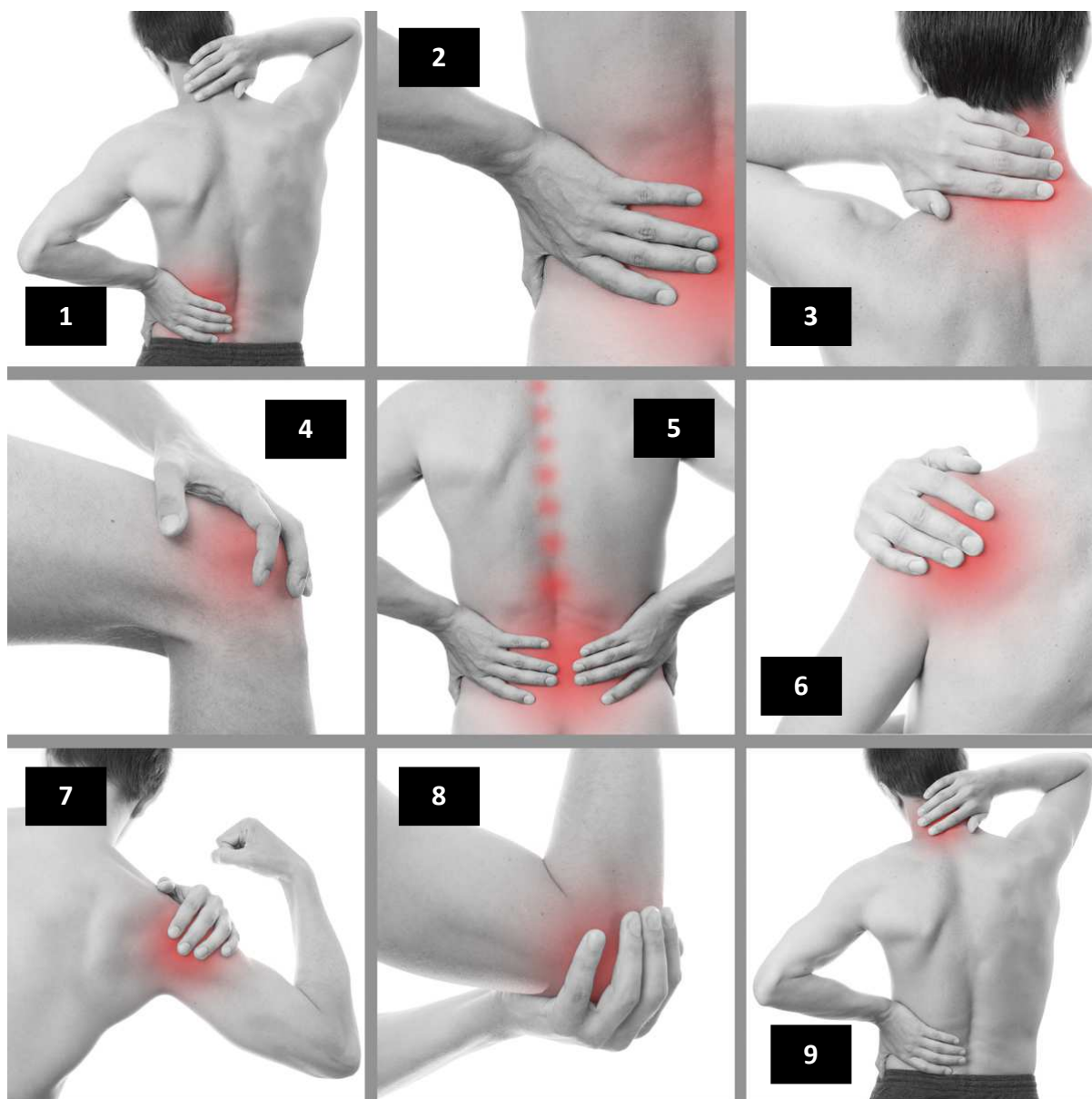

- 1.** Oblast beder
- 2.** Spodní část zad
- 3.** Krční páteř
- 4.** Kolena
- 5.** Oblast kolem páteře
- 6.** Ramena
- 7.** Ramena
- 8.** Loket
- 9.** Krční páteř + šíje

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj BeautyRelax Kineticforce Portable

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1790B;BR-1790P;BR-1790R**

EAN: **8594166118539;8594166118959;8594166118966**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2020