

NÁVOD K OBSLUZE

Ruční masážní přístroj
BeautyRelax BR-1600

OCTOPUS



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
KONTRAINDIKACE	6
SPECIFIKACE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	9
MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

UPOZORNĚNÍ

- Napájecí kabel nelamte ani jinak nepřírozně nedeformujte.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci některé z partií, pro které je přístroj určen.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s oblastmi, pro které je přístroj určen.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud máte výrazně citlivou pokožku (bývá často u starších osob).
- Je zakázáno přístroj používat, pokud trpíte některou z forem kožního onemocnění (ekzém, vředová onemocnění).
- Je zakázáno přístroj používat v oblastech, které prochází léčebnou procedurou (odřenin, řezné rány).
- Je zakázáno přístroj používat, pokud trpíte chronickým onemocněním křečových žil.
- Je zakázáno přístroj používat během těhotenství, máte-li zvýšenou teplotu nebo se jednoduše necítíte dobře vlivem například chřipkového onemocnění.
- Pokud cítíte, že je dotek masážní hlavičky nepříjemný až bolestivý, na přístroj tolik netlačte nebo snižte rychlost otáček hlavičky.
- Pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje nebo by mohla natéct voda do elektroniky přístroje.
- Obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou.
- U škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost. V těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku.



Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj BeautyRelax BR-1600 je určen pro okamžité svalové uvolnění. Má speciálně tvarované aplikační hlavice, které se pohybují současně ve směru kruhu. Každá aplikační hlavice je zakončena 7 výstupky. Ergonomický tvar přístroje umožňuje masírovat pohodlně sám sebe. Tlakem si můžete sami ovlivnit sílu masáže. Masážní přístroj nabízí dvě rychlosti. Masáž aplikačními hlavicemi je možné doplnit vibrační masáží. Konstrukce je vodotěsná s ochranným standardem IPX7. Masážní přístroj BeautyRelax BR-1600 bude vždy připraven poskytnout příjemnou uvolňující masáž!



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění.
- Při stavu vysokých horeček.
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka.
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem.



SPECIFIKACE

- Okamžité uvolnění ztuhlých svalů.
- Odbourání stresu a duševního napětí.
- Svěží pocit při dlouhodobé trvajcí únavě.
- Zmírnění otoků zejména v oblasti končetin.
- Snížení bolesti a tuhosti svalů.
- Zlepšení lokálního krevního oběhu.
- Násobné zvýšení rozsahu pohybu.
- Lze použít na krční páteř, ramena, bedra, hýždě, lýtka nebo chodidla.
- Bezdrátové nabíjení pomocí dokovací stanice.


TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vodotěsná ochrana: IPX7.
- Kapacita baterie: 1200mAh.
- Délka nabíjení: 2 hodiny.
- Výkon: 5W.
- Rozměry: 15x11x13cm.
- Hmotnost: 700g.

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax Octopus BR-1600.
- Napájecí USB kabel.
- Dokovací stanice.
- Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE

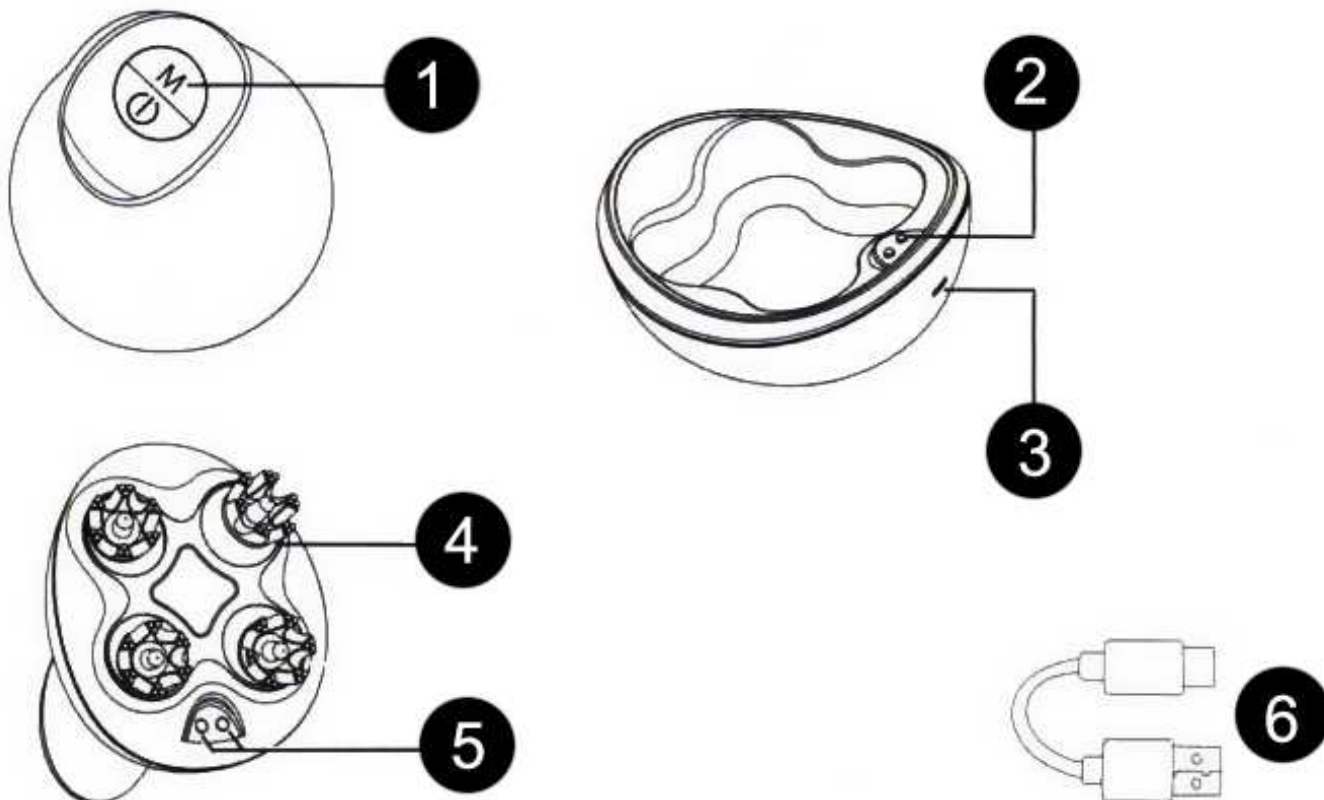

1. Ovládací panel

2. Kontakt pro nabíjení


3. Vstup pro nabíjecí kabel

4. Masážní hlavice

5. Kontaktní piny pro spojení s nabíjecím stojánkem

6. Nabíjecí USB kabel

POPIS PŘÍSTROJE

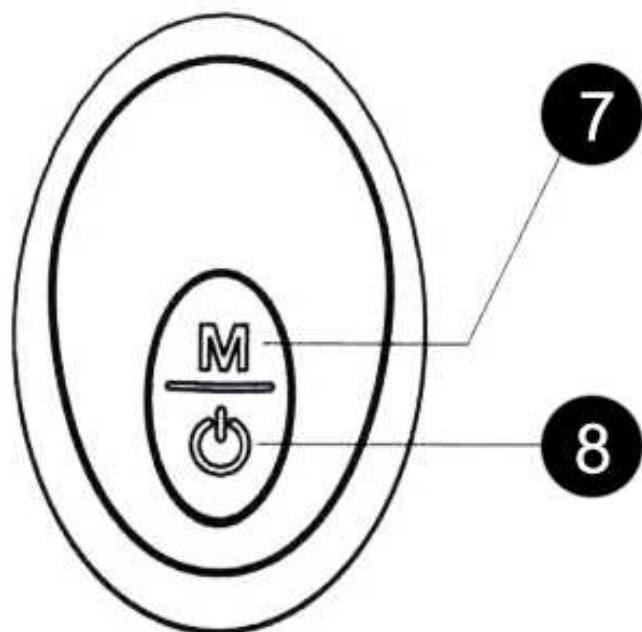

7. Tlačítko **MODE**

8. Tlačítko **ON/OFF**



OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Před použitím vždy dbejte na to, aby byla baterie dostatečně nabitá. Pokud je stav baterie nízký, výkon přístroje může během používání kolísat.
2. Zkontrolujte, že jsou všechny 4 masážní hlavice pevně připojeny ke spodní straně přístroje.
3. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF**. Masážní hlavice zahájí krouživý pohyb. Všechny masážní hlavice se pohybují zároveň.
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete měnit rychlost pohybu masážních hlavic. K dispozici jsou dvě rychlosti: výchozí – **nízká L** a **vysoká H**.
5. Stiskem tlačítka **M** si můžete zapnout nebo vypnout vibrace.
6. Přístroj má automatický časovač v délce 10 minut. Po uplynutí času se automaticky vypne.
7. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** přístroj vypnete.



MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Příklady tělesných partií, na které se můžete s přístrojem zaměřit.



POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Přístroj můžete libovolně kombinovat s masážními krémy či oleji.
2. Na pleť můžete také nanést krém, který napomáhá potlačit příznaky celulitidy.
3. V průběhu používání přístroje si sami působením tlaku určíte intenzitu masáže.
4. Nezůstávejte s přístrojem stát na jednom místě více než 10 minut. Při použití se snažte co nejlépe pokrýt plochu části těla, kterou chcete uvolnit.
5. Přístroj je vodotěsný dle ochranného standardu IPX7. Můžete ho tak libovolně použít například během sprchování. Zde se stává masáž ještě více účinnou při použití horké vody, která svaly příjemně prohřeje.
6. Použití přístroje je vysoce příjemné pro masáž hlavy. Ideální pro vmasírování sprchového šamponu. Lze na sucho nebo přímo ve sprše.

Masáž hlavy na sucho



Masáž hlavy na mokro



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjení probíhá pomocí dokovací stanice, která je součástí balení. Dokovací stanici připojte pomocí napájecího kabelu k USB portu počítače nebo notebooku.

1. Na ovládacím panelu se nachází indikace stavu baterie. Jakmile indikace baterie bliká, je třeba zahájit proces nabíjení.
2. Pokud se rozhodnete pro nabíjení použit adaptér do elektrické sítě 220V, takový adaptér musí mít parametry 5V 1A.
3. Před spojením přístroje s dokovací stanicí vždy dbejte na to, aby byly kontaktní piny suché a čisté.
4. Před spojením přístroje s dokovací stanicí vždy odpojte masážní hlavice od přístroje.
5. Plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny. Záleží na stavu vybití baterie.



Indikace stavu baterie

Nízký stav baterie	ikonka baterie bliká
Průběh nabíjení baterie	ikonka baterie bliká do ztracena zelenou barvou
Baterie plně nabita	ikonka baterie svítí

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byla aplikační hlavice očištěna. Zejména, pokud použijete masážní tělový krém. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Na čištění je ideální suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. Mohlo by dojít k poškození.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Ruční masážní přístroj BeautyRelax

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1600**

EAN: **8594166117020**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1: 2006+A1 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.8.2020