

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj BeautyRelax BR-1780

SHIATSU UNIVERSAL



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	8
INSTALACE MADEL PRO RUCI	9
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
JE DOBRÉ VĚDĚT	11
MOŽNOSTI POUŽITÍ	11
NABÍJENÍ BATERIE	14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14
CERTIFIKACE	14
DOVOZCE	14
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.


OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-1780 SHIATSU UNIVERSAL
- Nabíjecí adaptér 220V
- Návod k obsluze

KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem

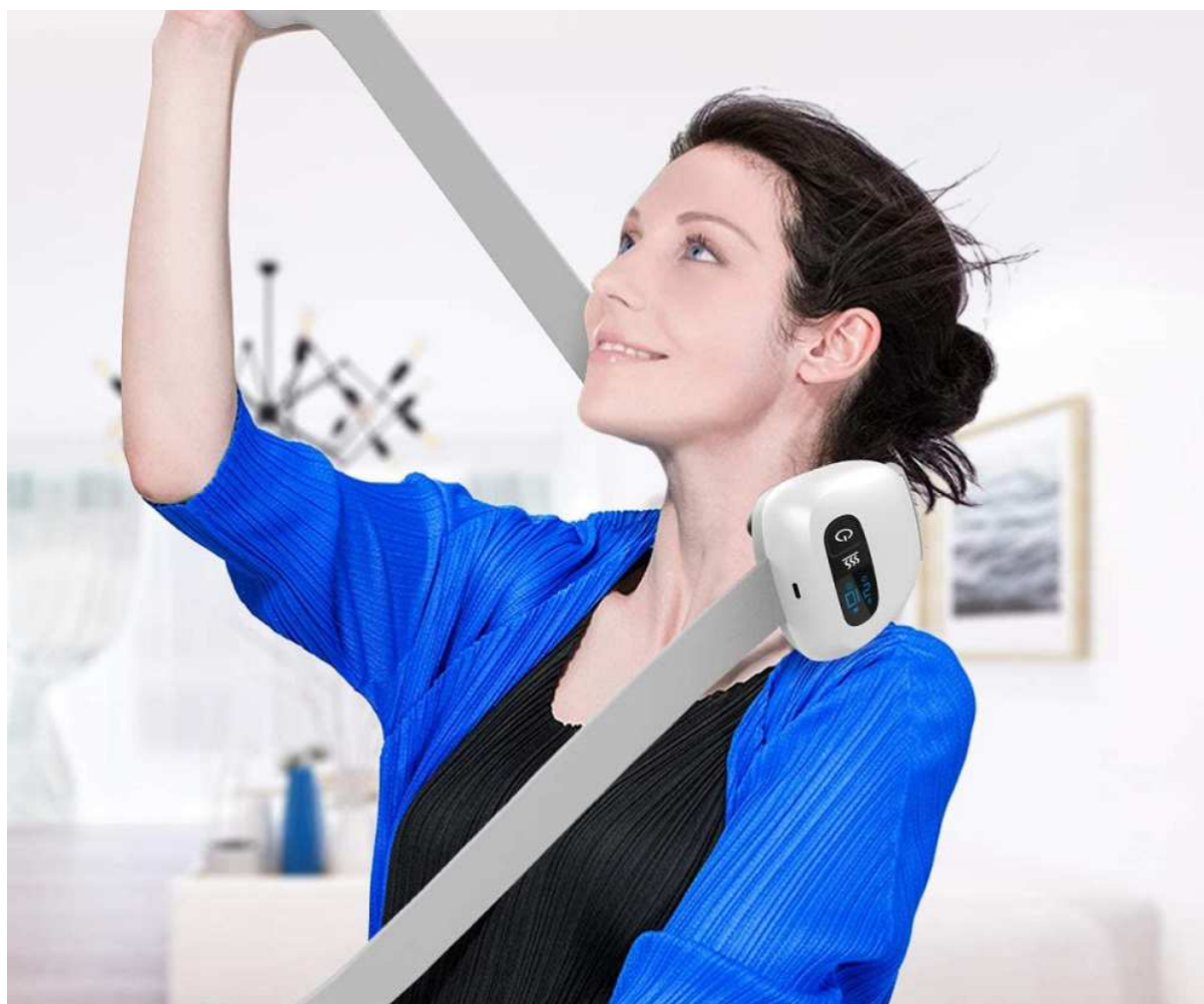

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Shiatsu Universal poskytuje blahodárnou relaxační masáž. Speciální masážní systém simuluje pohyb rukou skutečného maséra. Masážní hlavice pokožku velmi příjemně hnětou. Úleva od bolesti se dostaví okamžitě! Pomocí ručních madel si můžete intenzitu masáže sami dávkovat. Ideální pro masáž krku, ramen a bederní páteře. Infračervené vyhřívání je zásadní pro účinné svalové uvolnění. Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii. Na výběr jsou 4 režimy masáže.



HLAVNÍ VÝHODY


- Okamžité uvolnění pro zatuhlé svaly
- Ideální pro použití na oblast krku, ramen a bederní páteř
- Účinná Shiatsu masáž simuluje pohyby rukou maséra
- 8 masážních hlavice
- 4 režimy masáže
- Infračervené vyhřívání
- Časovač: automatické vypnutí po 15 minutách
- Indikace stavu baterie
- Regulace intenzity masáže pomocí madel na ruce
- Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii
- Velmi prodyšný materiál příjemný na dotyk

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion 2200mAh
- Napájení: síťovým adaptérem 220V
- Rozměry: 20x13x10cm
- Hmotnost: 500g




POPIS PŘÍSTROJE

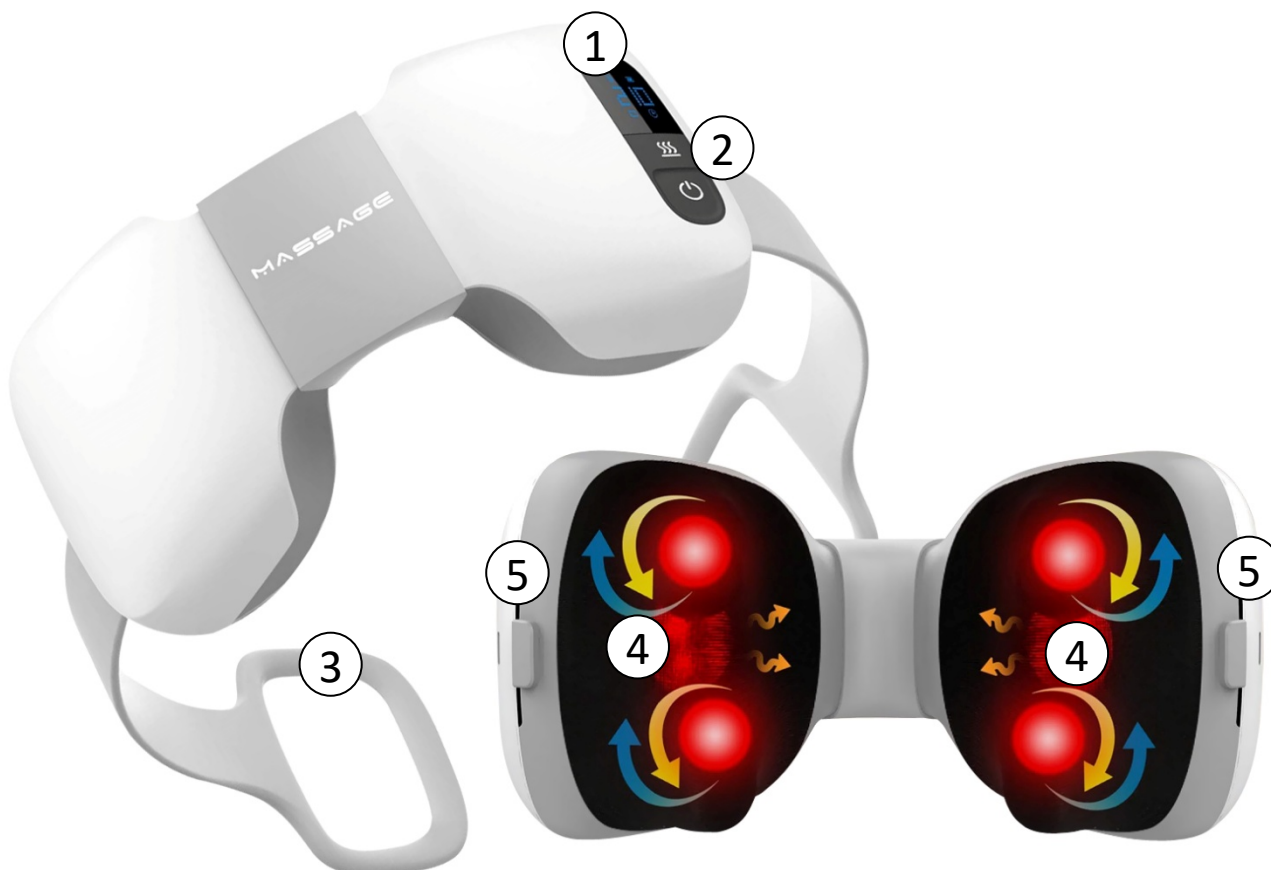

1. Displej
2. Ovládací panel
3. Madlo pro ruce
4. Masážní mechanismus
5. Vstup pro uchycení madel pro ruce

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

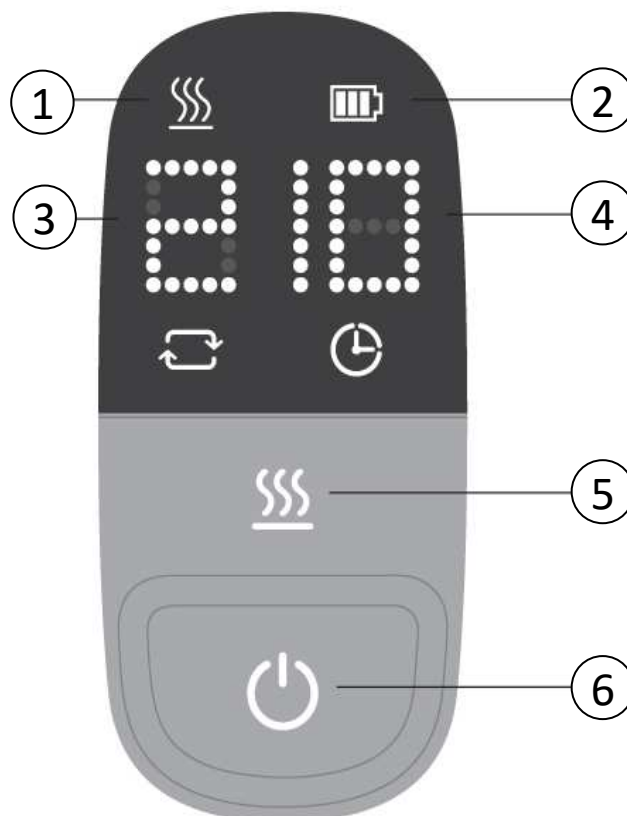


1. Indikátor vyhřívání
2. Indikátor stavu baterie
3. Masážní mód (1,2,3,4)
4. Časovač (min)
5. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**

6. Tlačítko **ON/OFF**
dlouhý stisk – vypnutí/zapnutí
krátký stisk – nastavení masážních programů

INSTALACE MADEL PRO RUCE

Madla na ruce jsou součástí balení **(1)**. Napomáhají při používání přístroje regulovat sílu masáže dle vaší potřeby. Madla zapojte zacvaknutím do vstupů na bočních stranách přístroje **(2)**. Pro uvolnění madel pro ruce stiskněte tlačítko **(3)** a madla vysuňte.

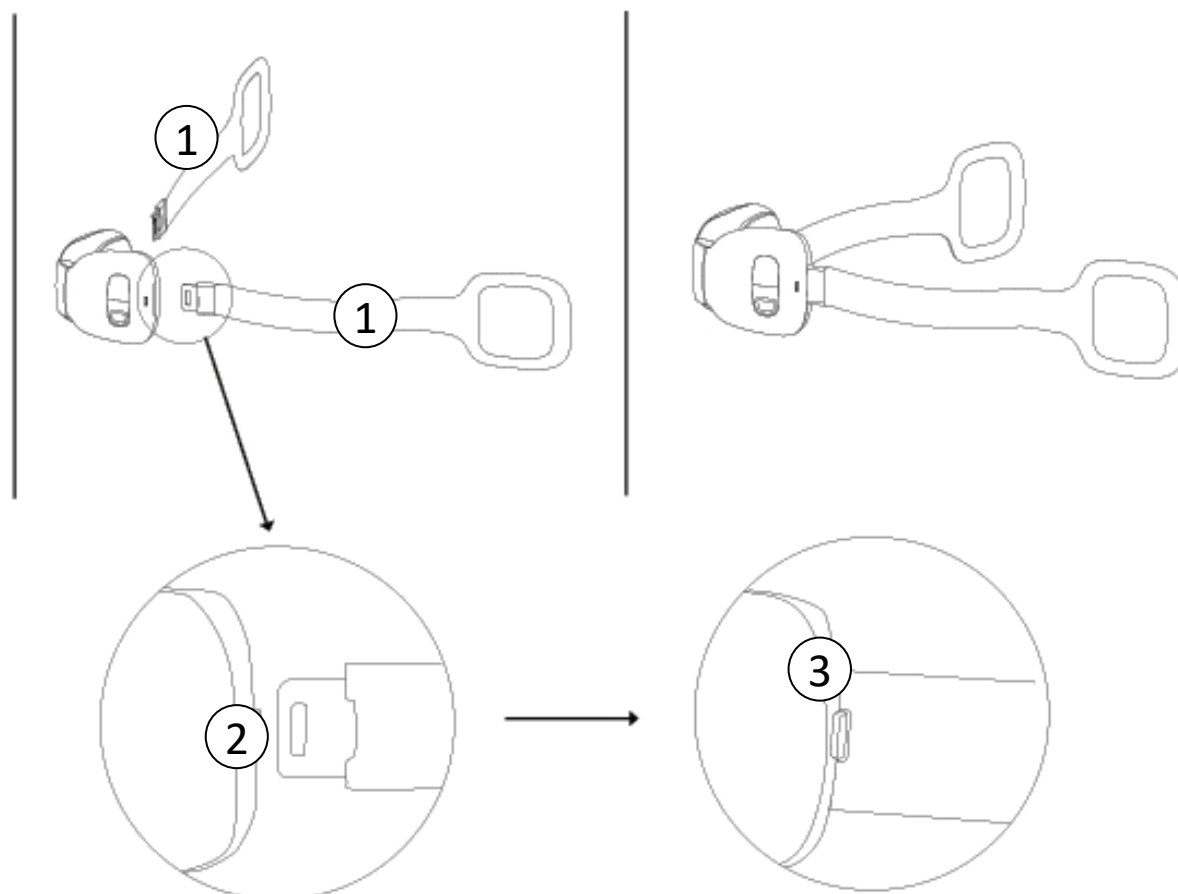

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Vždy dbejte na to, aby byla baterie dostatečně nabitá. K nabíjení používejte výhradně adaptér, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.
2. Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF (6)**.
3. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF (6)** si můžete nastavit masážní program. Na výběr jsou k dispozici 4 masážní programy.
4. Funkci vyhřívání můžete zapnout/vypnout pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ (5)**
5. Displej zobrazuje funkci vyhřívání **(1)**, aktuální stav baterie **(2)**, aktuální masážní program **(3)** a čas masáže **(4)**.
6. Časovač je nastaven na výchozí hodnotu 15 minut. Po uplynutí se přístroj automaticky vypne.
7. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF (6)**.



JE DOBRÉ VĚDĚT

Masážní přístroj můžete používat vsedě nebo vleže. Pokud budete na přístroji ležet v horizontální poloze, budete na něj působit tlakem váhy svého těla a masáž bude maximálně intenzivní! Sílu masáže zmírníte tím, že si sednete do židle nebo křesla. Intenzitu masáže si díky tomu regulujete sami tlakem, kterým na masážní přístroj působíte. Pokud je intenzita masáže přesto silná, vložte mezi záda a polštářek dečku, čímž tlak masážních hlavic zmírníte.


MOŽNOSTI POUŽITÍ

Masážní přístroj můžete používat na následující partie těla:



MOŽNOSTI POUŽITÍ


Díky kompaktním rozměrům masážního přístroje si můžete užívat příjemnou uvolňující masáž opravdu kdekoliv!

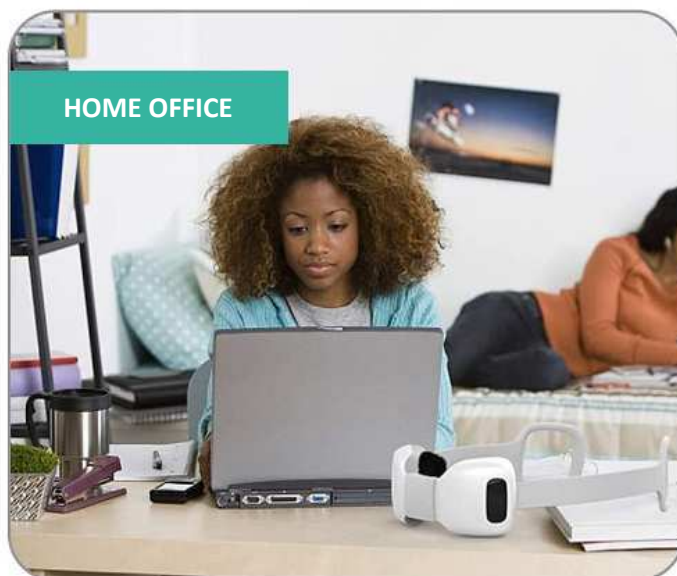

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Klíčovou vlastností masážního přístroje je univerzální použití. Určeno pro uživatele každého věku.

AKTIVNĚ
PRACUJÍCÍ

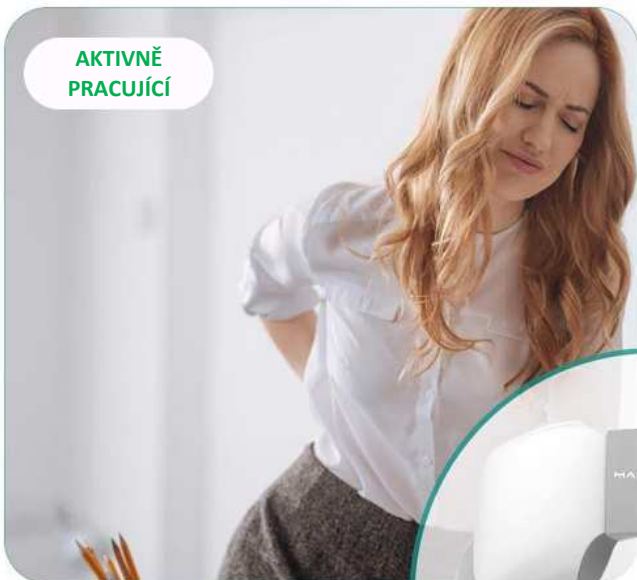

TANEČNICE



SENIORI



STUDENTI



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Kontinuální působení všech funkcí přístroje umožňuje dostatečně nabít baterie. Stav baterie indikuje znak baterie na displeji.

Postup nabíjení:

1. Jakmile je baterie vybita, symbol baterie na displeji začne blikat.
2. Nízký stav baterie rovněž doprovází zvukový signál každé 2 minuty.
3. Pro nabíjení používejte nabíjecí adaptér, který je součástí balení.
4. Druhý konec připojte do zdířky pro nabíjení na povrchu přístroje.
5. Jakmile je proces nabíjení dokončen, blikání symbolu baterie ustane.

Upozornění: K nabíjení používejte výhradně adaptér, který je součástí balení. V případě použití jiného typu adaptéru může dojít k fatálnímu poškození baterie a ztrátě záruky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj SHIATSU UNIVERSAL

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1780**

EAN: **8594166118522**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Dle registračního čísla certifikátu: TB-EMS173623

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.6.2020