

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní podtlakový přístroj

BeautyRelax BR-1910

VACUFORM PREMIUM



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	4
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	6
LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM	6
ÚROVNĚ INTENZITY NASÁVÁNÍ	7
HLAVNÍ VÝHODY	7
CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
OBSAH BALENÍ	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	10
DOBÍJENÍ BATERIE	11
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	11
JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	12
POVOLENÉ PARTIE APLIKACE	14
INTENZITA VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ	15
DÉLKA APLIKACE	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	16
ZBARVENÍ PLETI	16
FILTRAČNÍ TAMPÓNEK	17
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	18
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	22
CERTIFIKACE	22
DOVOZCE	22

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

Vakuová podtlaková masáž patří dlouhodobě mezi nejpoužívanější a nejoblíbenější způsob masáže profesionálních maséru a rehabilitačních center. Popularitu si získala příznivými účinky na lymfatický systém. Masážní přístroj Vacuform vám přináší metodu aplikace těla profesionály do pohodlí vašeho domova. Přístroj Vacuform je určený pro lokální masáž vybraných částí těla. Masáž probíhá na principu podtlaku. Sílu podtlaku si můžete sami regulovat. Aplikace je neinvazivní, bezpečné a bezbolestné. Dlouhodobé používání významným způsobem přispívá ke zlepšení funkce lymfatického systému. Přístroj Vacuform není zdravotnický prostředek. Spadá do kategorie neinvazivních masážních přístrojů.

UPOZORNĚNÍ

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou
- je zakázáno používat přístroj v koupelně
- dodržujte přesně délku a způsob aplikace
- přístroj nekombinujte používáním obdobného přístroje jiného výrobce
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nenechávejte ho připojený napájecímu USB kabelu
- napájecí USB kabel neohýbejte; na přístroj nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty
- během používání přístroje se vyhýbejte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, využijte kontaktní formulář na adrese www.beautyrelax.cz
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- pokud nastane některá z těchto situací, přístroj nikdy nepoužívejte:
 - napájecí kabel je poškozen
 - do přístroje vnikla voda
 - na přístroj spadl těžký předmět nebo spadl z velké výšky na zem
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- dbejte na to, aby přístroj a všechny jeho součásti byly vždy suché
- po každém použití očistěte přístroj pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku a další hadříčkou vysušte kompletně do sucha



KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přístroj při:

- onemocnění cév (např. křečové žíly, záněty žil, trombóza)
- poruchách srážlivosti krve nebo při užívání léků na ředění krve
- onkologických onemocněních
- závažných onemocněních srdce
- vysokém neléčeném krevním tlaku
- cukrovce s komplikacemi (zejména cévními)



Akutní stavy a infekce

Vyhnete se použití při:

- horečce nebo celkové infekci organismu
- nachlazení, chřipce nebo jiném akutním onemocnění
- zánětlivých procesech v těle

Kožní problémy

Nepoužívejte na místech, kde je:

- otevřená rána, oděrky nebo poranění
- kožní infekce, ekzém, dermatitida
- vyrážka, podráždění nebo spálená pokožka
- čerstvé jizvy nebo nehojící se tkáň

Specifické situace

Použití se nedoporučuje nebo pouze po konzultaci s lékařem:

- v těhotenství (zejména oblast břicha a beder)
- při menstruaci (citlivější reakce těla)

po operacích (do úplného zahojení)

Další omezení

- nepoužívejte na oblast krku, štítné žlázy a obličeje (pokud to výrobce výslovně nepovoluje)
- vyhněte se oblastem s mateřskými znaménky nebo vyrůstky
- nepoužívejte na místech se sníženou citlivostí pokožky

ZAKÁZANÉ PARTIE APLIKACE

- Hlava, Krk (přední i zadní strana), Oblast, kde je srdce, Podpaží, Loket, Zápěstí, Kolena, Kotník, Dlaně, Chodidla, Zákolenní oblast, Páteř

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Masážní přístroj BeautyRelax Vacuform Premium představuje moderní a skutečně funkční řešení v boji proti celulitidě. Špičkový přístroj pro intenzivní podtlakovou masáž těla. Možnost nastavení 6 úrovní intenzity nasávání. 6 úrovní tepla prohřeje důkladně povrch pokožky. Aplikujete problematické partie jako v masážním salonu. Konstrukce přístroje je stejná, jako profesionální masážní přístroje!



LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM

Lymfatická masáž patří mezi nejúčinnější způsoby pro redukci projevů celulitidy. Rytmické hnětení svalů zajišťuje správné proudění lymfy v těle. Přispívá k odvádění nečistot z krve. Prostřednictvím podtlakové terapie lze tělo zbavit nežádoucích otoků a nevzhledně vypadající pomerančové kůže.



ÚROVNĚ INTENZITY NASÁVÁNÍ

Masážní přístroj BeautyRelax Vacuform Premium nabízí 6 úrovní síly podtlaku. Každá tělesná partie vyžaduje jinou velikost aplikátoru a stejně tak jiné nastavení výkonu nasávání. Vyšší výkon pro skutečně hloubkovou intenzivní masáž. Jemnější nasávání oceníte na menších tělesných partiích se zvýšenou citlivostí na dotyk.



HLAVNÍ VÝHODY

- Zcela neinvazivní charakter aplikace
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Skutečně funkční podtlaková masáž

CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT

- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny aplikované partie
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- Při pravidelném používání a přiměřeném stravování zjemnění příznaků celulitidy
- Tvarování a zpevňování stehen, hýždí, břicha

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vyhřívání: 6 úrovní
- Vakuové sání: 6 úrovní
- Provozní napětí: 5V
- Výkon: 24W
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion
- Napájení: USB kabelem (součástí balení)
- Rozměry: 34x24x10cm
- Hmotnost: 900g

OBSAH BALENÍ

- 1x Masážní podtlakový přístroj BeautyRelax model BR-1910 VACUFORM PREMIUM
- 1x Nabíjecí USB kabel
- 1x Nabíjecí síťový adaptér 220V
- 1x Návod k obsluze



POPIS PŘÍSTROJE



1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko nastavení síly podtlaku
3. Tlačítko nastavení vyhřívání
4. Ukazatel síly podtlaku
5. Ukazatel úrovně tepla
6. Zdíčka pro napájecí kabel

POPIS PŘÍSTROJE



1. Masážní oblé výstupky
2. Zdroj působení tepla
3. Prostor vakuového nasávání

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **HEAT**
3. Tlačítko **SUCTION**
4. Ukazatel úrovně vakuového nasávání
5. Ukazatel úrovně působení tepla

DOBÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Druhý konec připojte do síťového adaptéru, který je součástí balení.
3. Délka nabíjení závisí na stavu vybití a aktuální kondici baterie.
4. Proces nabíjení baterie doprovází blikající světelná signalizace.
5. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace ustane.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Zapněte přístroj tlačítko **ON/OFF**.
2. Pomocí tlačítka **SUCTION /NEGATIVE PRESSURE** aktivujete podtlakové nasávání. Síla podtlaku začíná nejprve na úrovni 1 - nejnižší.
3. Dalším opakovaným stiskem tlačítka **SUCTION /NEGATIVE PRESSURE** se postupně zvyšuje síla podtlakového nasávání. K dispozici je rozsah od 1 (nejnižší) do 6 (nejvyšší). Pokud ukazatel úrovně síly podtlaku nesvítí, je tato funkce vypnuta.
4. Pomocí tlačítka **HEAT** aktivujete funkci vyhřívání. Teplo začne působit na úrovni 1 – nejnižší.
5. Dalším opakovaným stiskem tlačítka **HEAT** se postupně zvyšuje úroveň působení tepla. K dispozici je rozsah od 1 (nejnižší) do 6 (nejvyšší). Pokud ukazatel úrovně působení tepla nesvítí, je tato funkce vypnuta.
6. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

***Upozornění:** Při zahájení používání přístroje začínejte pro funkci **SUCTION/NEGATIVE PRESSURE** i **HEAT** na nejnižší úrovni 1. Zejména funkci **SUCTION/NEGATIVE PRESSURE** přidávejte se zvýšenou opatrností. Přístroj při vyšších hodnotách dosahuje opravdu vysokého výkonu.*

JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat použití po celkové koupeli těla.
- Naneste na partii, kterou chcete aplikovat, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh **esenciálního masážního oleje**. Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní hlavice po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně. **Bez podobného přípravku přístroj NEPOUŽÍVEJTE.**

Upozornění: Vždy dbejte na to, aby nedošlo k nasátí krému nebo oleje přístrojem. V opačném případě může dojít k okamžitému poškození přístroje. Použijte takové množství, které nemá šanci přístroj nasát. Postačí nanést na pleť jen velmi tenkou vrstvu.

pohybová masáž


Přístrojem se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí krému nebo oleje. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň**. Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, s přístrojem už nebude možné pohnout.

bodová masáž

Bodová masáž spočívá v aplikaci konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Zvolte úroveň vakuového sání na nejnižší úroveň a postupně přidávejte. Při bodové masáži může po aplikaci pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při aplikaci ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

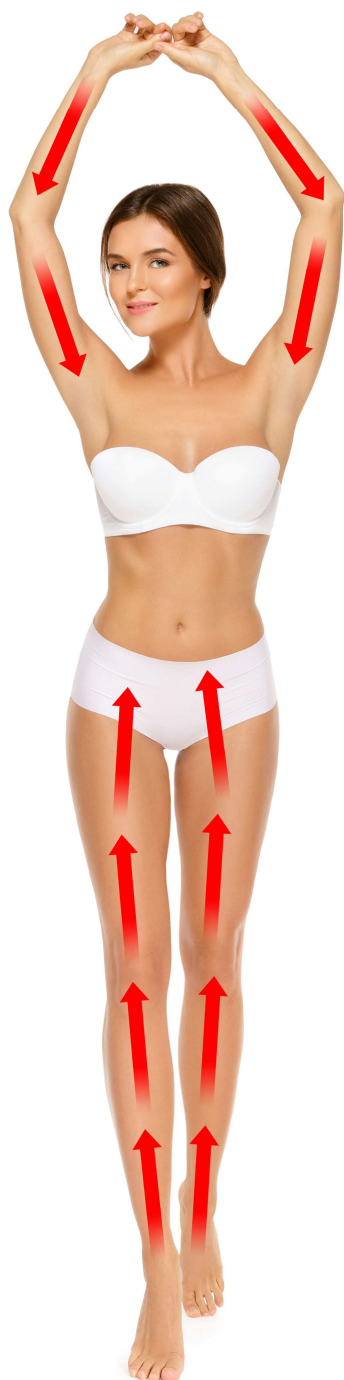

pohybová masáž




bodová masáž

POVOLENÉ PARTIE APLIKACE

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



INTENZITA VAKUOVÉHO NASÁVÁNÍ

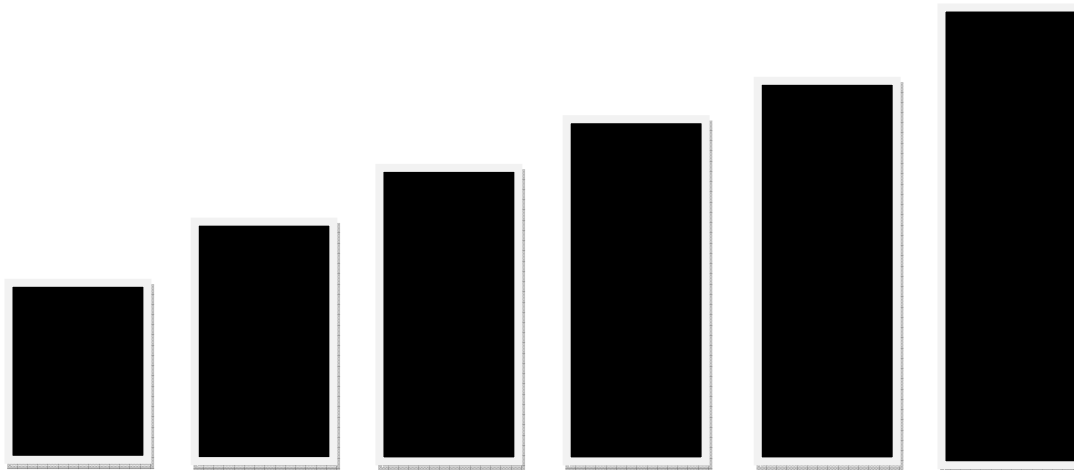

Masáž pomocí podtlaku je základní předpoklad k tomu, aby byla tuková tkáň stimulována s maximální efektivitou. Každý máme jinou citlivost pleti. Každý můžeme vnímat působení podtlaku jinak. Právě z toho důvodu umožňuje přístroj nastavení výkonu v 6 úrovních intenzity. Aplikace pomocí metody vakuové masáže bude vždy na pleti cítit. Můžete vnímat, jak aplikační hlavice postupně nasává pokožku. Takto správně má podtlaková masáž probíhat. Pokud nastane situace, kdy by pro vás byla vakuová masáž i při nejnižší úrovni intenzity 1 až příliš silná, máme pro vás pár tipů, jak používat přístroj s vyšší úrovní komfortu:

- 1.** Na pokožku, kde chcete přístroj použít, naneste větší množství masážního oleje. Pokud bude povrch pleti mastný, aplikační hlavice přístroje bude mít na pleti lepší skluz. S přístrojem se tak můžete po pleti snadněji pohybovat.
- 2.** I když máte nastavenou úroveň intenzity na nejnižším stupni číslo 1, po přiložení přístroje k pleti ho nenechávejte nasát až do momentu, kdy je celý vnitřní prostor hlavice kompletně nasátý vaší pokožkou. V průběhu startu nasávání postupně přístroj od pleti ručně odstraňte. Takto postupujte část po části, kousek po kousku.
- 3.** Když chcete přístroj odstranit z pleti, nevolte směr kolmo od pleti, ale snažte se naklonit jeden o z okrajů aplikační hlavice. Jakmile se přeruší vakuum a do hlavice se dostane opět vzduch, přístroj snadno od pleti oddělíte.

DÉLKA APLIKACE

Pro každou partii je doporučeno aplikovat v maximální délce 15 až 20 minut. Aplikovat partii můžete libovolně kombinovat. Je vhodné rozložit si masáž těla do celého týdne. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití vnitřek aplikátoru důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou uvnitř aplikátoru nečistoty. Mohly by být během používání nasáty přístrojem.

ZBARVENÍ PLETI

Působením podtlakové masáže mohou na pleti vznikat červené fleky až téměř podlitiny (v případě použití opravdu silného výkonu podtlakové masáže). Jedná se o zcela přirozený jev. V průběhu několika hodin (v závislosti na výkonu podtlakové masáže) zbarvení pleti postupně zmizí. V případě nejvyšších hodnot podtlakové masáže se mohou červené fleky proměnit až v modřiny. V tomto případě trvá návrat do přirozené barvy pleti déle.



FILTRAČNÍ TAMPÓNEK

Na spodní straně přístroje - uvnitř aplikátoru - je umístěn u zdroje tvorby podtlaku pěnový tampónek. Jde o důležitý prvek, který zabrání vzniku nečistot dovnitř přístroje. Stav pěnového tampónku pravidelně kontrolujte. Neměl by být zdeformovaný nebo poškozen zvýšenou vlhkostí.



Postup výměny filtračního tampónku:

- 1.** Odstraňte gumový kryt na spodní straně přístroje uvnitř aplikátoru.
- 2.** Vyjměte použitý filtrační tampónek.
- 3.** Vložte nový filtrační tampónek. Tvar tampónku je speciálně upraven. Není tedy možné jej vložit nesprávně.
- 4.** Vložte nazpět gumový kryt. Dbejte zvýšenou pozornost na úplné zatlačení gumového krytu.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

JAK BY MĚLO POUŽITÍ SPRÁVNĚ PROBÍHAT V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ?

Před prvním použitím si důkladně prostudujte celý návod k obsluze, zejména část věnovanou kontraindikacím. Pokud si nejste jisti vhodností použití, doporučujeme konzultaci s lékařem. Aplikaci provádějte v pohodlné poloze vsedě nebo vleže. Zvolte klidné prostředí, kde se můžete uvolnit. Doporučujeme lehké, pohodlné oblečení a dostatek času bez rušení.

JAKÁ OPATŘENÍ DODRŽOVAT PŘED A PO APLIKACI?

- **Před aplikací (min. 4 hodiny):** vyhněte se těžkým a mastným jídlům
- **Doporučeno:** lehká strava (např. salát, jogurt)
- **Pitný režim:**
 - den před, v den aplikace a několik dní po něm pijte 2–2,5 litru čisté vody
 - omezte slazené a perlivé nápoje

PO APLIKACI (CCA 1 TÝDEN):

- omezte alkohol, kofein a nikotin
- vyhýbejte se těžkým jídlům

BOLÍ APLIKACE?

Ne, aplikace je při správném použití **bezbolestné**.

Vždy začínejte na nejnižší intenzitě sání a postupně ji zvyšujte podle vlastního pocitu. Příliš vysoká intenzita může způsobit nepříjemné pocity.

JE NUTNÉ PŘED POUŽITÍM UPRAVIT POKOŽKU?

Ano, vždy.

Na pokožku je nutné nanést **krém nebo olej**, který:

- zajistí hladký pohyb hlavice
- zlepší komfort aplikace
- podpoří vstřebávání aktivních látek do pokožky

CO MOHU OD POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE OČEKÁVAT?

Při pravidelném používání můžete očekávat:

- pevnější a hladší pokožku
- zlepšení vzhledu celulitidy
- podporu lymfatického systému
- snížení otoků

Vakuová masáž pomáhá stimulovat proudění mízy a přispívá k odvodu odpadních látek z těla.

JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE BEZPEČNÉ?

Ano, při dodržení návodu je používání bezpečné.

Dbejte však na:

- správné nastavení intenzity
- nepoužívání na poškozenou pokožku

Možné reakce:

- lehké zarudnutí (běžné, rychle odezní)
- při vyšší intenzitě se mohou objevit modřiny nebo otoky

PROČ JE DŮLEŽITÉ ČISTIT APLIKAČNÍ HLAVICI?

Po každém použití je nutné hlavici:

- důkladně očistit
- případně dezinfikovat

Tím zajistíte:

- hygienu
- delší životnost přístroje
- správnou funkčnost

JAK DLOUHO MÁ TRVAT APLIKACE?

Doporučená délka:

- **10–15 minut na jednu partii**

Jedna partie = např.:

- jedno stehno, jedna paže, jedno lýtko

KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVAT?

Nepoužívejte přístroj:

- při kožních problémech (ránách, zánětech apod.)
- při zdravotních stavech uvedených v kontraindikacích

Po úplném doléčení lze používání opět obnovit.

JE PŘÍSTROJ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK?

Ne, jedná se o **masážní přístroj pro kosmetické použití**.

CO DĚLAT, KDYŽ BATERIE ČASEM ZTRATÍ KAPACITU?

V případě snížení výkonu baterie kontaktujte servis na:

mh@santadria.cz

Obdržíte informace o možnostech výměny.

MÁ PŘÍSTROJ CERTIFIKACI?

Ano, přístroj splňuje **evropské normy a certifikace** pro tento typ zařízení.

Na vyžádání vám může být zasláno prohlášení o shodě.

MŮŽE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT VÍCE OSOB?

Obecně se to nedoporučuje.

Pokud jej používají členové jedné domácnosti:

- je nutné po každém použití důkladné vyčištění a dezinfekce

JE PŘÍSTROJ VODOTĚSNÝ?

Ne, přístroj **není vodotěsný**. Chraňte jej před vodou a vlhkostí.

JAK ČASTO PŘÍSTROJ POUŽÍVAT?

Pro optimální výsledky doporučujeme:

- 2–4× týdně
- pravidelnost je klíčová pro viditelné výsledky

NA KTERÉ PARTIE JE PŘÍSTROJ VHODNÝ?

Přístroj je vhodný zejména na:

- stehna
- hýždě
- břicho
- paže

Vyhňte se citlivým oblastem (např. obličej, krk), pokud to není výslovně uvedeno v návodu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.