

NÁVOD K OBSLUZE

ruční masážní přístroj
model BR-1240

CELLUSHAPE



OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	4
FORMOVÁNÍ POSTAVY	5
PÉČE O OBLIČEJ	5
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	6
CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
VYMĚNITELNÉ APLIKÁTORY	8
POPIS OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA	9
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	9
JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	10
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	12
DÉLKA OŠETŘENÍ	13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Cellushape je kompaktní ruční masážní přístroj pro ošetření obličeje a těla. Dva vyměnitelné aplikátory mění přístroj na multifunkčního pomocníka pro každodenní používání. Masážní přístroj Cellushape zmírňuje příznaky celulitidy a napomáhá formovat postavu. 3D masážní mechanismus proniká hluboko do podkožních tukových buněk. Ideální pro vnitřní strany stehen, boky, zadeček, břicho a paže. Zatočte s pomerančovou kůží jednou pro vždy! Nástavec na obličej výrazně zlepší krevní oběh a vstřebávání kosmetických přípravků a sér.

UPOZORNĚNÍ

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou
- je zakázáno používat přístroj v koupelně
- dodržujte přesně délku a způsob ošetření
- přístroj nekombinujte používáním obdobného přístroje jiného výrobce
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- během používání přístroje se vyhněte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, využijte kontaktní formulář na adrese www.beautyrelax.cz
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- pokud nastane některá z těchto situací, přístroj nikdy nepoužívejte:
 - napájecí kabel je poškozen
 - do přístroje vnikla voda
 - na přístroj spadl těžký předmět nebo spadl z velké výšky na zem
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- dbejte na to, aby přístroj a všechny jeho součásti byly vždy suché
- po každém použití očistěte přístroj pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku a další hadříčkou vysušte kompletně do sucha



FORMOVÁNÍ POSTAVY

Celulitida se projevuje hrbolatým povrchem pokožky. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti stehen a hýždí. Celulitidu, tzv. pomerančovou kůži, způsobuje zvětšení objemu tukových buněk. Na pokožce se projevuje nevzhlednými droličky. BeautyRelax Cellushape rotačními hlavicemi intenzivně a hloubkově masíruje pokožku.

Tímto procesem se podporuje krevní oběh a průtok lymfy. Dochází tak k lepší látkové výměně, což má za následek zmírnění projevů celulitidy. Plet je hladší a pružnější.



PÉČE O OBLIČEJ

Správná funkce krevního oběhu výrazně ovlivňuje zdravou barvu pleti. BeautyRelax Cellushape nabízí speciální obličejový aplikátor. Je tvořen 3 nerez kuličkami. Otáčky hlavice o specifické rychlosti rozpohybují kuličky při kontaktu s pletí. Sami si můžete tlakem ovlivnit sílu masáže. Ideální je v kombinaci hydratačních krémů a vyživujících sér. Účinné látky se násobně lépe vstřebávají a působí rychleji.



VLASTNOSTI & SPECIFIKACE

- důkladně prokrvuje všechny vrstvy pokožky
- obličejový aplikátor se 3 masážními kuličkami
- 6 rotačních hlavic pro dosažení co nejlepších výsledků
- dvě rychlosti
- intenzivní hloubková masáž
- ergonomický tvar zaručuje snadné použití
- pokožka je hladší a pružnější
- napomáhá napnout pokleslou pokožku
- výrazně zlepšuje krevní oběh a vstřebávání kosmetických přípravků a sér


CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT

- okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- při pravidelném používání a přiměřeného stravovacího režimu zjemnění příznaků celulitidy
- tvarování a zpevnování paží, stehen, hýždí, břicha, apod.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- rozměry: 8,5x8,5x13,5cm
- hmotnost: 235g
- napájení: síťový adaptér 220V (součástí balení)

POPIS PŘÍSTROJE

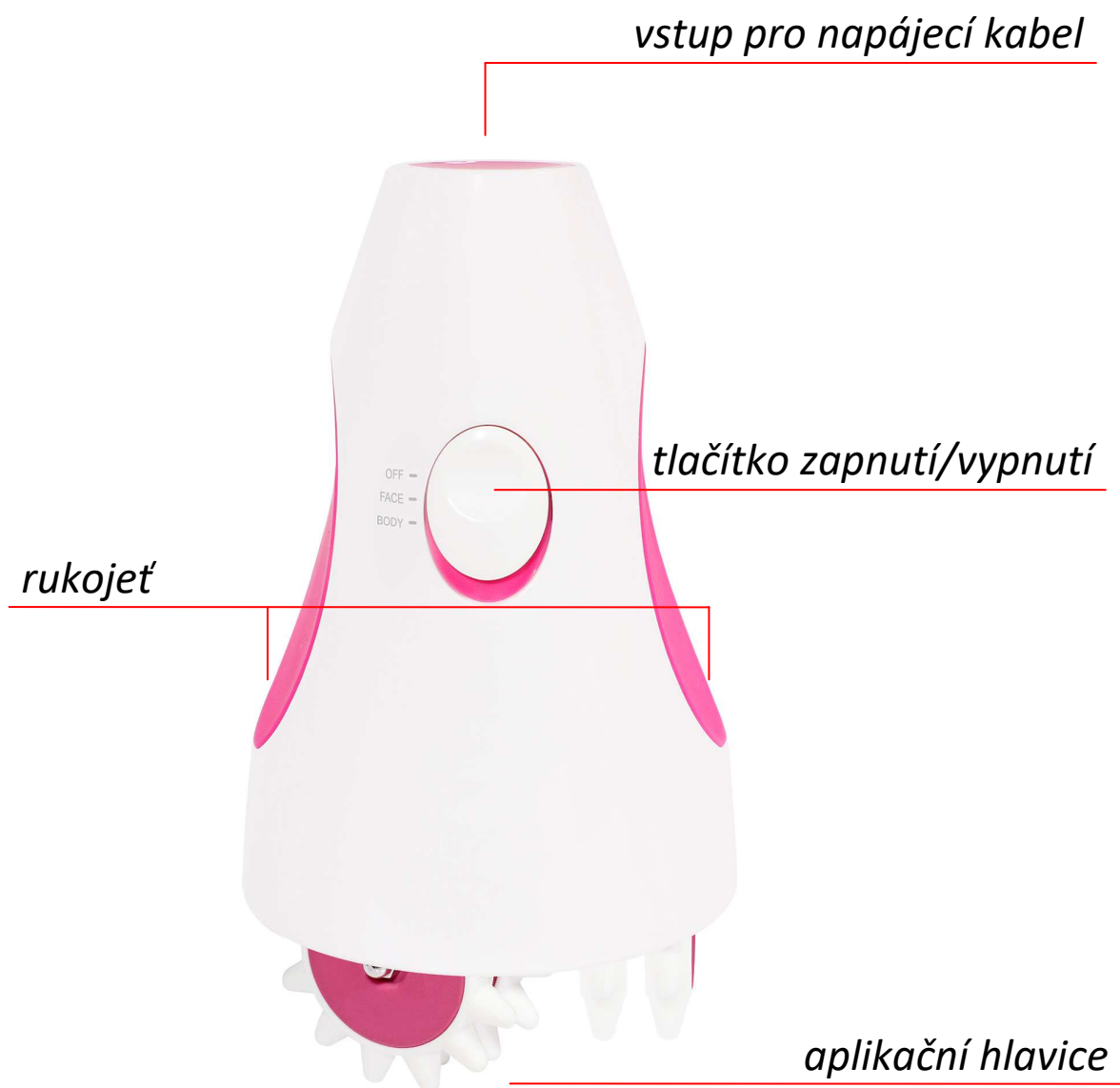

VYMĚNITELNÉ APLIKÁTORY


*aplikační hlavice
pro ošetření těla*



*aplikační hlavice
pro ošetření obličeje*



POPIS OVLÁDACÍHO TLAČÍTKA

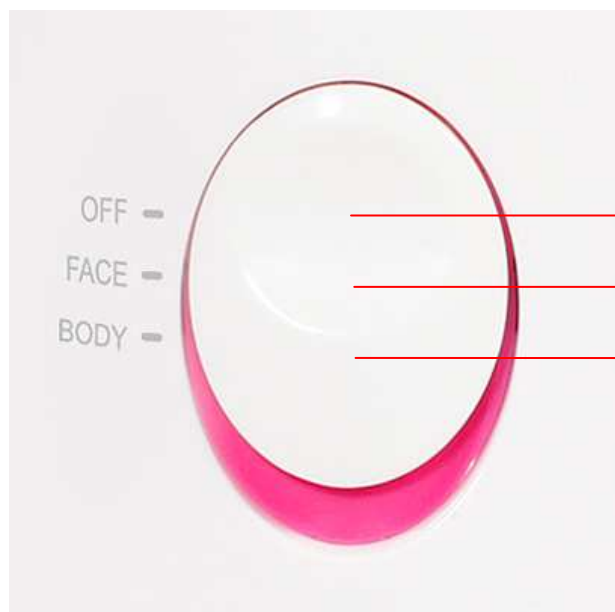

3 stupně nastavení:

vypnuto (1)

režim ošetření obličeje (2)

režim ošetření těla (3)

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přístroj k napájecímu kabelu.
2. Nasadte aplikační hlavici podle účelu použití (tělo/obličej)
3. Posunutím tlačítka do polohy FACE přístroj zapnete. Aplikační hlavice se pohybuje v pomalých otáčkách.
4. Posunutím tlačítka do polohy BODY zvýšíte rychlost pohybu aplikační hlavice.
5. Přístroj vypnete posunutím tlačítka do polohy OFF.



JAK PŘÍSTROJ POUŽÍVAT

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat ošetření po celkové koupeli těla.
- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh esenciálního masážního oleje. Hlavním důvodem je lepší pohyb aplikační hlavice po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně.
- Pohybujte se po pleti krouživými pohyby. Přístrojem tlačte na ošetřenou partii takovým způsobem, aby vám byla masáž příjemná.
- Čas ošetření partie by se měl pohybovat v rozsahu 5 až 10 minut.
- Po dokončení aplikační hlavici důkladně očistěte.



Přístrojem se pohybujte po těle krouživými pohyby. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí krému nebo oleje. **Použití masážního přístroje na suchu není doporučeno.**

- K přístrojovému ošetření obličeje přistupujte se zvýšenou péčí. Ideální na vmasírování krému a sér do pokožky.
- Pro ošetření obličeje používejte výhradně režim FACE (pomalé otáčky).
- Používejte aplikátor s kuličkami.



POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



DÉLKA OŠETŘENÍ

Pro každou partii je doporučeno ošetření v maximální délce 5 až 10 minut. Ošetření partií můžete libovolně kombinovat. Je vhodné rozložit si masáž těla do celého týdne. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití aplikační hlavici důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.