

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj metoda baňkování
BeautyRelax BR-2898

VACUFORM COMPACT TWIN



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	5
MASÁŽ BAŇKOVÁNÍM	6
HLAVNÍ ÚČINKY BAŇKOVÁNÍ	7
ELEKTRONICKÉ BAŇKY	7
VLASTNOSTI PRODUKTU	8
POPIS PŘÍSTROJE	9
TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ VAKUA	10
TLAČÍTKO VAKUOVÉ SÁNÍ	10
TLAČÍTKO ON/OFF	10
TLAČÍTKO VYHŘÍVÁNÍ	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
APLIKACE PŘÍSTROJE NA POKOŽKU	11
POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	12
SLABÉ BAŇKOVÁNÍ	12
STŘEDNÍ BAŇKOVÁNÍ	12
SILNÉ BAŇKOVÁNÍ	12
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	13
MOŽNOSTI POUŽITÍ	14
VATOVÉ FILTRY	15
DÉLKA OŠETŘENÍ	15
ZBARVENÍ PLETI	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
NABÍJENÍ BATERIE	16
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	17
CERTIFIKACE	17
DOVOZCE	17
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	18

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- je zakázáno používat přístroj v koupelně
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu přístroje; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku
- **produkt není zdravotnický prostředek**



OBSAH BALENÍ

- 2x Masážní přístroj metoda baňkování VACUFORM COMPACT TWIN
- 4x Náhradní kruhový filtr
- 2x Nabíjecí USB kabel
- 2x Nabíjecí adaptér 220V
- 2x Návod k obsluze

KONTRAIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Těhotenství
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je přísně zakázáno používat přístroj na oblast obličeje, genitálií, nebo velkých krevních cév na povrchu těla. Vždy se snažte vyhnout místům, kde je výrazný výskyt křečových žil.



MASÁŽ BAŇKOVÁNÍM

Masáž baňkováním má spoustu příznivých účinků na lidské tělo. Podporuje krevní oběh, přináší úlevu od bolesti svalů, urychluje detoxikaci organismu a příznivě ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. S vaší vlastní sadou na baňkování si můžete dopřát tuto unikátní masážní techniku kdykoliv u vás doma!



Baňkování je speciální masážní technika, která je populární zejména díky velké řadě pozitivních účinků na lidské tělo. Kořeny sahají několik tisíc let nazpět až do starověké Číny. Při baňkování se přikládají baňky na jednotlivé části těla (záda, podbřišek, klouby, kolena, kotníky nebo chodidla). V podkožní tkáni se významným způsobem zlepší krevní oběh. Pozvolným způsobem dochází k odplavení škodlivin ven z těla prostřednictvím lymfatického systému a potních žláz. Tento způsob masáže navíc zmírňuje bolest a nepříjemné svalové napětí. Samotné baňkování probíhá velice jednoduchým způsobem. Vakuové baňky se přiloží na tělo a pumpou se z nich vysaje vzduch. Následný podtlak, který v baňce vznikne, intenzivně a téměř ihned pokožku prokrví.

HLAVNÍ ÚČINKY BAŇKOVÁNÍ

- Zlepšuje prokrvení svalových tkání.
- Přináší úlevu při bolesti nohou a vzniklých otoků.
- Podporuje lymfatický systém a následné vylučování škodlivin ven z těla.
- Příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů (stimulací akupresurních bodů na těle).
- Tělo se celkově prokyslí, prokrví a uvolní.



ELEKTRONICKÉ BAŇKY

Masážní přístroj metoda baňkování BeautyRelax. Inovativní řešení populární metody masáže v oblasti fyzioterapie – dynamická masáž baňkováním. Přináší úlevu při bolesti nohou a vzniklých otoků. Podporuje lymfatický systém a následné vylučování škodlivin ven z těla. 12 různých úrovní intenzity. Bezdrátové použití díky vestavěné nabíjecí Li-ion baterii. Rozsah podtlakové terapie: 0 až 60kPa. Vlnová délka červeného světla: 630 až 670nm. Vyzkoušejte masáž baňkováním ve zcela novém moderním pojetí. Elektronický systém BeautyRelax posouvá tradiční masážní techniku na zcela jinou úroveň!




VLASTNOSTI PRODUKTU

- Masáž baňkováním má spoustu příznivých účinků na lidské tělo
- Automatický program masáže
- 12 úrovní intenzity
- Možnost nastavení více úrovní tepla: v rozsahu od 38°C do 50°C
- Dynamická masáž baňkováním
- Bezdrátové použití
- Podporuje krevní oběh, přináší úlevu od bolesti svalů
- Podporuje lymfatický systém a následné vylučování škodlivin ven z těla
- Příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů (stimulací akupresurních bodů na těle)
- Tělo se celkově prokysličí, prokrví a uvolní
- Urychluje detoxikaci organismu
- Automatický časovač: 20 minut
- Rozsah podtlakové terapie: 0 až 60kPa
- Vlnová délka červeného světla: 630 až 670nm
- Napájení: vestavená nabíjecí li-ion baterie
- Sada obsahuje 2ks



POPIS PŘÍSTROJE

- 01. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
- 02. Tlačítko **UVOLNĚNÍ VAKUA/PAUZA**
- 03. Tlačítko **INTENZITA VAKUA**
- 04. Tlačítko **ON/OFF**
- 05. Tlačítko **DIGITÁLNÍ DISPLEJ**
- 06. Nasávání vzduchu
- 07. Aplikační hlavice
- 08. Vstup pro napájecí kabel

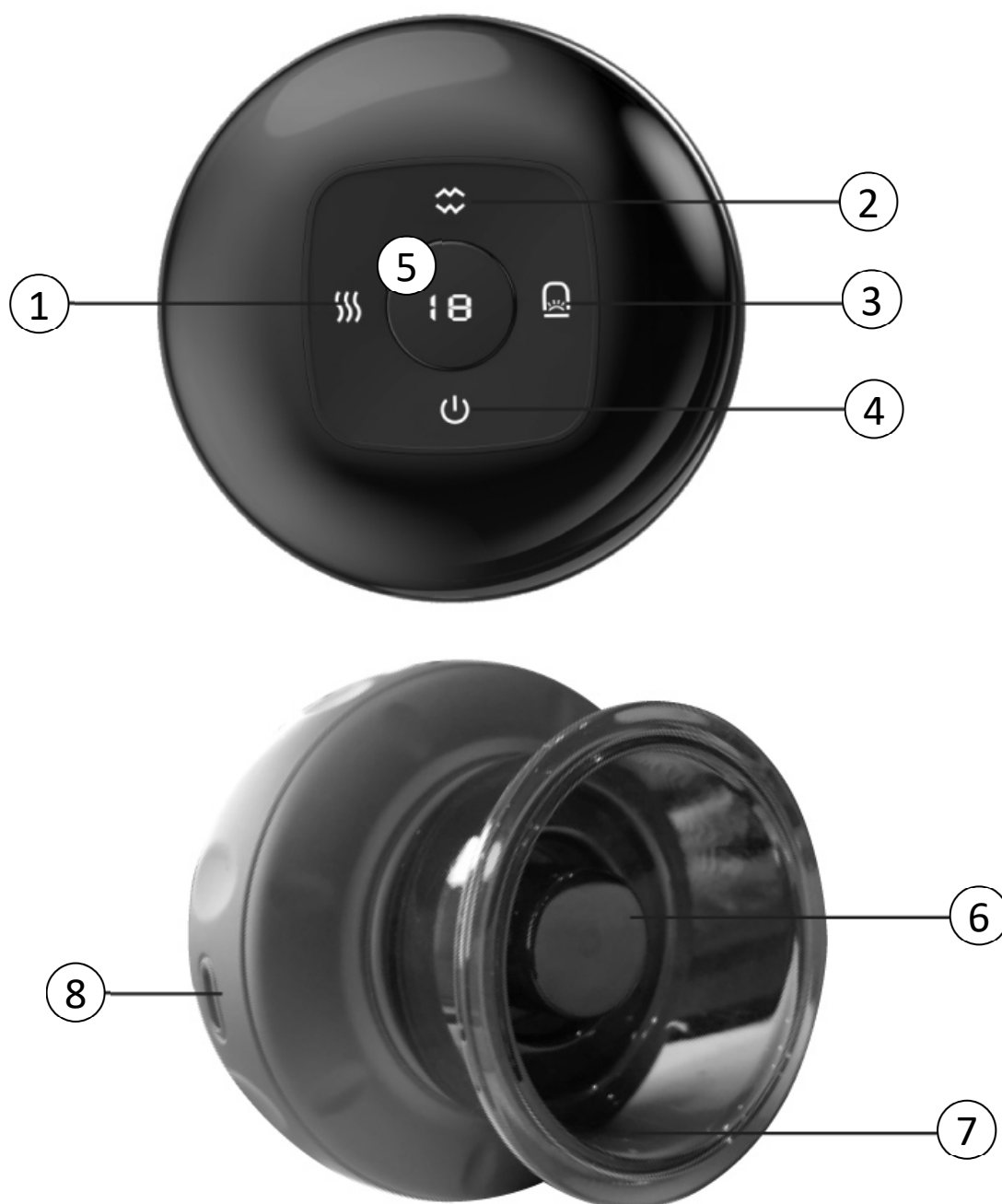

TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ VAKUA

Stiskem tlačítka se okamžitě uvolní vakuum z aplikační hlavice. Přístroj tak můžete snadno odstranit z pokožky.

TLAČÍTKO VAKUOVÉ SÁNÍ


Pomocí tlačítka **VAKUOVÉ SÁNÍ** můžete snadno regulovat intenzitu působení vakua. Krátkým stiskem můžete postupně měnit intenzitu v rozsahu od 1 do 12. Při stisku tlačítka se aktuálně zvolená úroveň intenzity zobrazuje na displeji. Pokud se s přístrojem teprve seznamujete, vždy začínejte na nejnižší úrovni.

TLAČÍTKO ON/OFF

Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí dlouhého stisku tlačítka **ON/OFF**.

TLAČÍTKO VYHŘÍVÁNÍ

Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete zapnout funkci působení tepla. Krátkým stiskem si můžete postupně upravit intenzitu vyhřívání. Krátkým stiskem můžete postupně měnit intenzitu v rozsahu od 1 do 12. Při stisku tlačítka se aktuálně zvolená úroveň intenzity zobrazuje na displeji. Pokud je funkce vyhřívání vypnuta, červené světlo nesvítí.

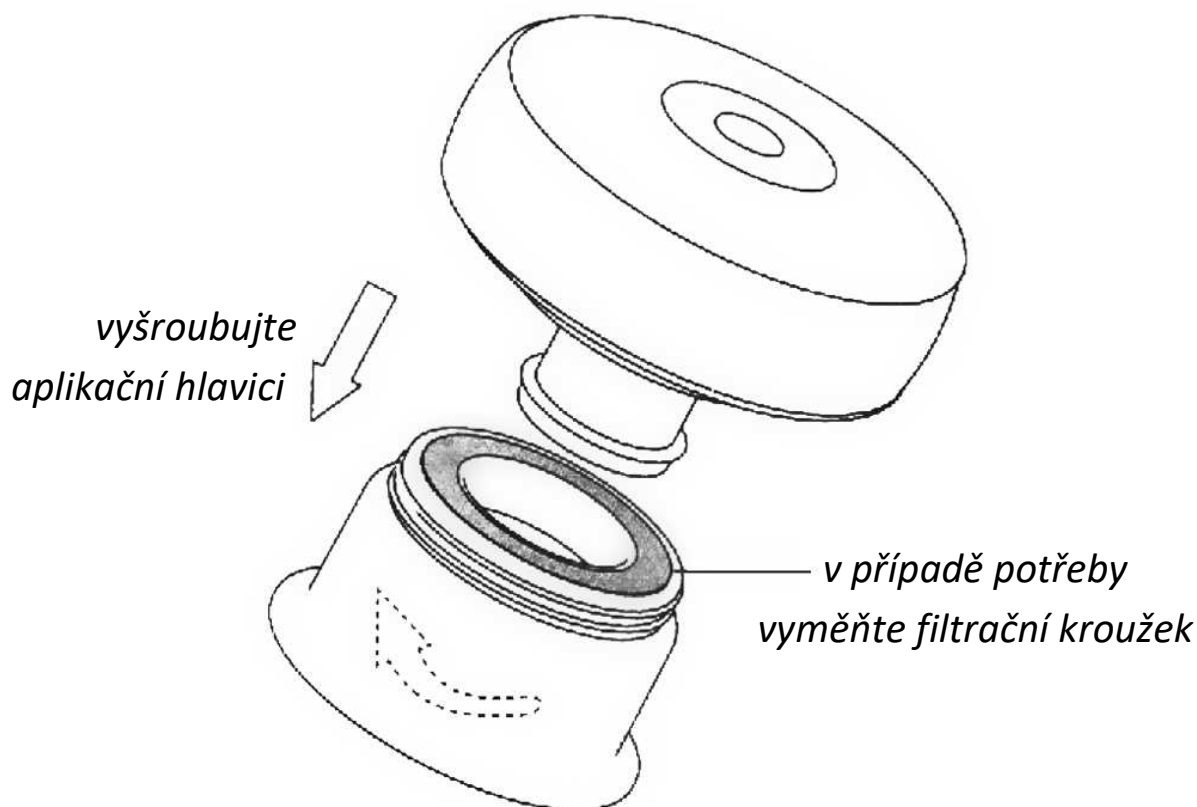

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Přístroj můžete snadno ovládat pomocí pěti tlačítek na horní straně přístroje: tlačítko **ON/OFF**, tlačítko **INTENZITA VAKUOVÉHO SÁNÍ**, tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ** a tlačítko **UVOLNĚNÍ VAKUA**. Po stisknutí tlačítka **UVOLNĚNÍ VAKUA** přístroj uvolní podtlak a přepne se do pohotovostního režimu. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.

APLIKACE PŘÍSTROJE NA POKOŽKU

- 1.** Před aplikací přístroje doporučujeme očistit pokožku. Ideální je použití přístroje po koupeli.
- 2.** Odšroubujte aplikační hlavici od řídicí jednotky přístroje. Ověřte prosím, že je vatový filtr umístěn po obvodu aplikační hlavy.
- 3.** Při zašroubování aplikační hlavy dbejte na to, aby byla dostatečně utažena. Zajistíte tak její maximální těsnost.
- 4.** Aby pracovaly správně všechny funkce přístroje, baterie musí být dostatečně nabita.
- 5.** Umístěte přístroj na vybranou část těla. Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**. Přístroj spustí vakuové sání, aby si mohl pokožku dostatečně nasát. Jakmile je pokožka dostatečně nasáta, tlakování se zastaví. Pokud se míra vakua v baňce sníží, přístroj si sám elektronicky vzduch z baňky vyčerpá.
- 6.** Přístroj má přednastavený časovač v délce 20 minut. Po uplynutí této doby se přístroj automaticky vypne.
- 7.** Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout.
- 8.** Na displeji přístroje se velkými číslicemi zobrazuje aktuálně nastavená úroveň působení tepla nebo intenzita vakuové masáže. Aktuální hodnota se zobrazí vždy, když danou hodnotu měníte pomocí tlačítka.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Příklad je schopen dosáhnout skutečně velkého výkonu vakuového sání. Velký výkonnostní rozsah je navržen z toho důvodu, aby vyhověl celé řadě uživatelů s individuálními požadavky.
2. Při použití přístroje si nastavte takovou úroveň intenzity vakua, která je vám pro danou tělesnou partii nejvíce příjemná.
3. Pokud se rozhodnete aplikovat před použitím přístroje jakýkoliv druh kosmetického přípravku, krému, séra nebo olejčku, vždy dbejte na to, aby se před použitím přístroje nenacházely na pleti žádné velké částice či rezidua. Mohlo by dojít k nasátí těchto částic.
4. Příklad není povoleno používat, pokud máte v těle jakýkoliv elektronický implantát (např. kardiostimulátor).
5. Pokud se v průběhu používání přístroje necítíte komfortně, použití přístroje ihned ukončete.
6. Při použití přístroje se snažte vyhnout místům na pleti, kde jsou silné a výrazné jizvy.
7. Vždy se snažte vyhnout použití v úzké blízkosti, kde se nachází srdce.
8. V průběhu používání a skladování přístroje se snažte, aby nebyla aplikační hlavice nějakým způsobem deformována. V opačném případě by mohl přístroj ztratit svoji funkčnost a užitnou hodnotu.
9. Příklad výrazným způsobem ovlivňuje lokální krevní oběh. Pokud si v krajním případě nejste jisti, zda je pro vás používání přístroje bezpečné, konzultujte možnost použití se svým lékařem.
10. Použití můžete oba přístroje současně. Pokud se s používáním přístroje teprve seznamujete, doporučujeme použít nejprve pouze jeden.

SLABÉ BAŇKOVÁNÍ

- napomáhá doplnit ztracenou energii
- ideální pro uživatele vyššího věku
- působí jen do svrchní vrstvy kůže

STŘEDNÍ BAŇKOVÁNÍ

- pokožka se může po aplikaci zbarvit do fialova
- lze použít i na břicho nebo obličej

SILNÉ BAŇKOVÁNÍ

- silná úroveň podtlaku je určena pro velmi náročné a zkušené uživatele
- vznikne velmi silný podtlak (pokožka významně zarudne)
- baňky se mohou přikládat v délce 10 až 20 minut (pro velmi intenzivní baňkování)

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- záda
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



MOŽNOSTI POUŽITÍ



VATOVÉ FILTRY

Součástí balení jsou vatové filtry. Vatové filtry slouží jako mechanická bariéra mezi vzduchovým čerpadlem přístroje a povrchem pokožky. Hlavní význam filtrů je zabránit poškození přístroje při vniknutí cizorodých částic ke vzduchovému čerpadlu. Nikdy nepoužívejte přístroj bez vatových filtrů. Vatový filtr není třeba měnit po každém použití. Provádějte pravidelnou kontrolu kondice filtru. Pokud je filtr silně znečištěn, proveďte výměnu.

DÉLKA OŠETŘENÍ

Určitě bychom vás neradi svazovali s časovým omezením použití přístroje. Jde o velice individuální záležitost. Závisí na více faktorech: intenzita vakuového sání, vybraná partie těla, věku, citlivosti pleti, celkové kondici uživatele. Vždy začínejte s kratší délkou použití. Prodlužte čas mezi jednotlivým použitím přístroje. Pokud se s přístrojem nejprve seznamujete, začínejte s použitím v délce několika minut. Sledujte, jak přístroj na vaši pleť zareagoval. Zda nevytvořil příliš silné červené zbarvení pleti až podlitinu (jde o přirozený efekt působení nasávání). Pravidelným používáním přístroje si můžete sami určit délku a frekvenci použití, která vám vyhovuje.

ZBARVENÍ PLETI

Působením podtlakové masáže mohou na pleti vznikat červené fleky až téměř podlitiny (v případě použití opravdu silného výkonu podtlakové masáže). Jedná se o zcela přirozený jev. V průběhu několika hodin (v závislosti na výkonu podtlakové masáže) zbarvení pleti postupně zmizí. V případě nejvyšších hodnot podtlakové masáže se mohou červené fleky proměnit až v modřiny. V tomto případě trvá návrat do přirozené barvy pleti déle v řádu několika dní. Při velmi vysokém výkonu podtlaku a dlouhé době použití se na pleti mohou objevit až stopy krve. Pokud s přístrojem začínáte a s účinky baňkování se teprve seznamujete, začínejte na nejnižších hodnotách působení podtlaku.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití vnitřek aplikátoru důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Tímto přípravkem čistěte výhradně vyměnitelné baňky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou uvnitř aplikátoru nečistoty. Mohly by být během používání nasáty přístrojem



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí li-ion baterii. Pro plnohodnotné použití by měla být baterie dostatečně nabita.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel s adaptérem, který najdete v balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu pro napájení přístroje na boční straně přístroje.
3. Druhý konec kabelu připojte k 220V adaptéru.
4. Průběh nabíjení indikuje blikání světelného indikátoru. Jakmile je baterie plně nabita, blikání ustane.
5. Délka nabíjení závisí na stavu vybití baterie.
6. Snažte se vyhnout situaci, kdy by byl přístroj připojen k nabíjecímu kabelu déle než 8 hodin. Z dlouhodobého hlediska tím výrazně snižujete životnost baterie.
7. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj VACUFORM COMPACT TWIN

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2898**

EAN: **8594166121706**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015

EN 62233:2008

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.3.2023