

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na celulitidu

**BeautyRelax BR-2950**

**Rollskin Madero Ultimate**





## OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
MADEROTERAPIE	5
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE PRODUKTU	9
OBSAH BALENÍ	9
MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
POPIS PŘÍSTROJE	12
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	13
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
EU DISTRIBUTOR	15
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 20 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Rollskin Madero Ultimate je inovativní masážní přístroj, který vychází z populární prastaré metody maderoterapie. Základ tvoří masážní rotační hlavice, která je tvořena menší sadou válečků. Na ovládacím panelu si můžete snadno nastavit rychlost otáček. Přístroj má ergonomický tvar, díky kterému snadno ošetříte sami sebe. Velká madla umožňují celou velkou variabilitu úchopů. Cílená stimulace lokálního lymfatického systému. Tlakem si může uživatel sám zvolit sílu masáže. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Napomáhá ke zvýšení pružnosti pleti. Příjemné uvolnění svalového napětí na vybraných částech těla. Zcela neinvazivní charakter ošetření. Určeno zejména pro: břicho, boky, hýždě, stehna, lýtka. BeautyRelax Rollskin Madero Ultimate přináší benefity z oblastí masáže a estetiky. Pro boj s pomerančovou pokožkou musíte mít účinnou zbraň. Objevte benefity přístroje BeautyRelax Rollskin Madero Ultimate ještě dnes!

## MADEROTERAPIE


Maderoterapie (terapie dřevem) je masážní technika, která využívá anatomicky navržené dřevěné nástroje ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Tyto nástroje umožňují vysoce cílený tlak na problematické partie (např. stehna, hýždě, boky nebo břicho). Tlak zintenzivňuje odbourávání tukových zásob a vláknité celulitidy.

Masáž stimuluje lymfatický odvodňovací systém a odstraňuje z těla nepotřebnou vodu a toxické látky. Také zlepšuje vzhled celulitidy a zároveň vypíná pokožku. Anticelulitidní ošetření se doporučuje provádět každý druhý den (alespoň třikrát týdně). Přináší rychlé výsledky tvarování těla, redukci a snížení projevů celulitidy.

Tento typ masáže provádět prakticky na celém těle: na nohou, bříše, pase, bocích, zádech a pažích, stejně jako na obličeji a části krku (dvojité brada). Jednou z velkých výhod tohoto ošetření je, že je zcela přirozené, protože se provádí dřevěnými nástroji a je neinvazivní.

### **Hlavní výhody masážní metody:**

- Potlačení projevů celulitidy.
- Aktivuje krevní a lymfatický oběh.
- Zvýraznění kontur a tvarování postavy.
- Odvodnění a tonizace pokožky.
- Dosažení relaxačního účinku na svaly.
- Dodatečná hydratace pokožky.
- Stimulace energetické rovnováhy.

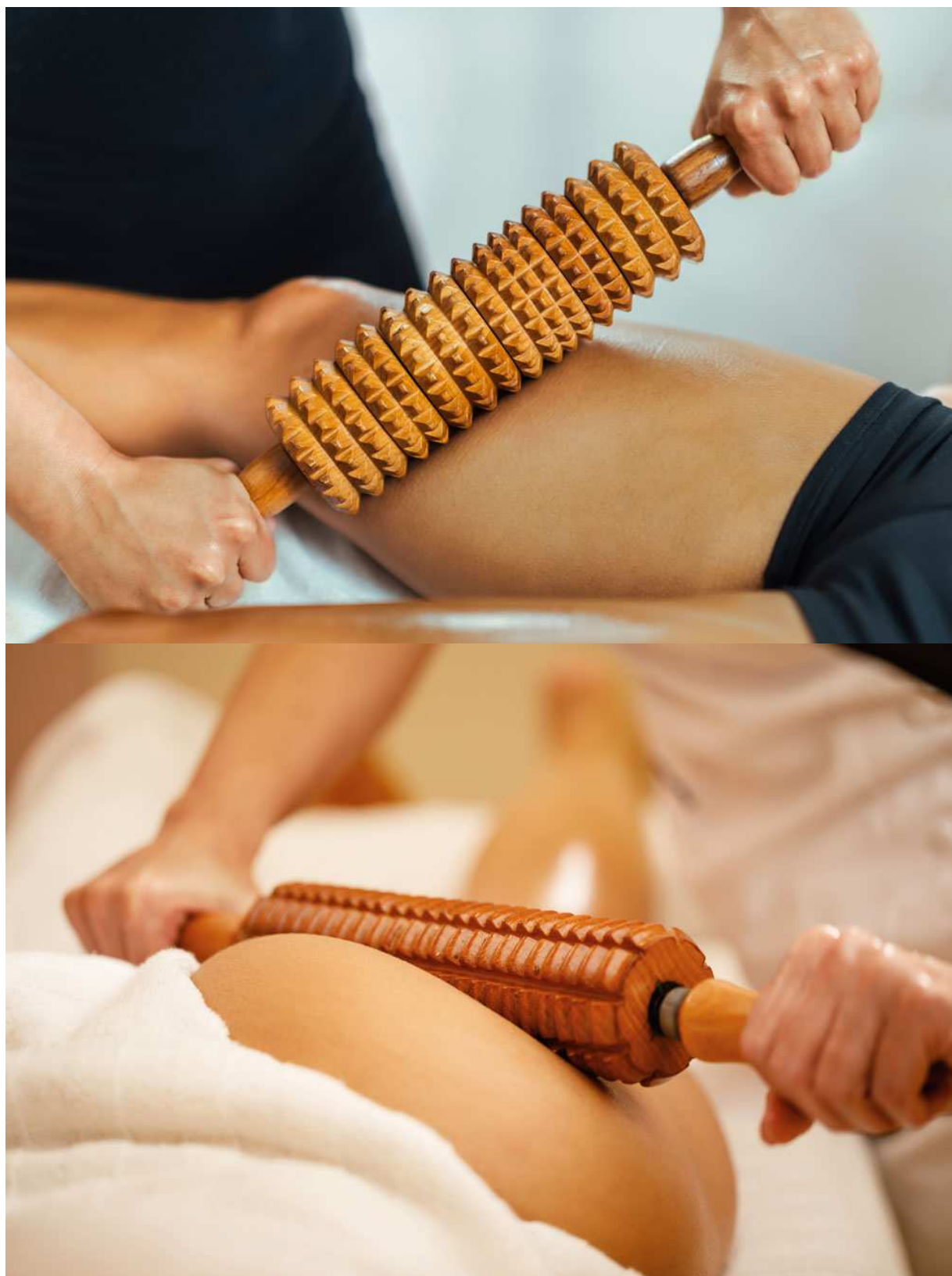







## **VLASTNOSTI & SPECIFIKACE PRODUKTU**

- Vysoce efektivní metoda pro potlačení projevů celulitidy
- Cílená stimulace lokálního lymfatického systému
- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- Napomáhá ke zvýšení pružnosti pleti
- Příjemné uvolnění svalového napětí na vybraných částech těla
- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Určeno zejména pro partie: břicho, boky, hýždě, stehna, lýtka
- 5 rychlostí otáček masážního válce
- Červené světlo
- Ergonomický tvar přístroje
- Barva: červená
- Napájení: kabelem ze sítě 220V
- Celkové rozměry přístroje: 40x25x15cm
- Hmotnost: 4,7kg

## **OBSAH BALENÍ**

- 1x Masážní přístroj na celulitidu BeautyRelax BR-2950 Rollskin Madero Ultimate.
- 1x Prodlužovací kabel.
- 1x Návod k obsluze.

## MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



## MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



## POPIS PŘÍSTROJE

1. Rotační válec
2. Rukojeť
3. Napájecí kabel
4. Ovládací panel
5. Mřížka chlazení přístroje
6. Červené světlo přístroje



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** rychlosti
2. Tlačítko **SNÍŽENÍ** rychlosti
3. Tlačítko **ČERVENÉ SVĚTLO**
4. Tlačítko **ON/OFF**



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přístroj pomocí kabelu do zásuvky.
2. V případě potřeby použijte prodlužovací kabel, který je součástí balení.
3. V průběhu použití vždy dbejte na to, aby se vám kabel adaptéru nezamotal do masážního válce.
4. Před použitím přístroje vizuálně ověřte, zda se mezi masážními válečky nenachází žádný předmět, který by tvořil fyzickou překážku v rotaci celého masážního bloku.
5. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Masážní váleček začne rotovat. Pomocí tlačítek **SNÍŽENÍ** a **ZVÝŠENÍ** si můžete nastavit rychlost pohybu válečku. K dispozici je celkem 5 rychlostí.
6. Pomocí stisku **ČERVENÉ SVĚTLO** si můžete zapnout nebo vypnout působení červeného světla.
7. Přístroj používejte dle ilustračních obrázků v pasáži **MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE**.
8. Použití přístroje musí být uživateli příjemné a musí se cítit komfortně. Podle toho je třeba upravit sílu tlaku, kterým se působí na tělo.
9. Vždy je dobré začínat na nižších otáčkách masážního mechanismu. Otáčky je možné přidávat postupně s plynulým dávkováním.
10. Délku a místo masáže upravte podle potřeby uživatele, který přístroj používá. Snažte se v průběhu použití pokrýt nejvíce problematické partie. Masáž je optimální opakovat ve frekvenci 3x až 4x do týdne.
11. Konstrukce přístroje je navržena tak, abyste jej mohli použít sami na sobě. Pokud do situace vyžaduje a máte tu možnost, požádejte druhou osobu o masáž na pro vás hůře dostupných partiích těla.
12. Po použití přístroje může pleť zarudnout. Jde o přirozený projev působení masážního mechanismu. Čím je v průběhu ošetření použita větší rychlost a tlak, tím je zásah na tělo intenzivnější a může se to projevit zarudnutím pleti na větší ploše.
13. Na pleť není třeba nanášet žádné krémy, oleje nebo gely. Rotačním pohybem dojde k samotné mechanické masáži.
14. Masážní válec přístroje pravidelně čistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Přístroj není vodotěsný. Žádnou část přístroje nevystavujte proudu tekoucí vody.
15. Po použití odpojte přístroj ze zásuvky.
16. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí dlouhého stisku **ON/OFF**.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní přístroj na celulitidu BeautyRelax Rollskin Madero Ultimate**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2950**

EAN: **8594166122291**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN55014-1:2017 EN550-4-2:2015**

**EN51000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013**

**EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017**

**EN60335-2-23:2003+A2:2015 EN62233:2008**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.1.2024