

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní podtlakový přístroj  
**BeautyRelax model BR-2837**

## VACUFORM DELUXE EMS





## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
KONTRAINDIKACE	6
ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ	6
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	7
LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM	8
ÚROVNĚ INTENZITY NASÁVÁNÍ	8
EMS ELEKTRICKÉ PULZY	9
INFRAČERVENÉ VYHŘÍVÁNÍ	9
HLAVNÍ VÝHODY	10
CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
OBSAH BALENÍ	10
POPIS PŘÍSTROJE	11
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	12
POPIS DISPLEJE	13
VÝMĚNA FILTRAČNÍHO VÁLEČKU	14
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	15
POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE	16
JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT	17
POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ	19
DÉLKA OŠETŘENÍ	20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20
ZBARVENÍ PLETI	21
DOBÍJENÍ BATERIE	21
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	22
RYCHLOST POHYBU PO PLETI	22
SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE	23
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	24
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	26
CERTIFIKACE	26
DOVOZCE	26
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	27

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj na vakuovou drenáž BeautyRelax Vacuform Deluxe EMS. Vysoce výkonný nástroj pro intenzivní potlačení projevů celulitidy. Skutečně funkční podtlaková vakuová drenáž. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Praktická funkce vyhřívání pro lokální podporu krevního oběhu. Technologie EMS pulzů pro stimulaci svalových vláken. Možnost plynulého dávkování výkonu. Zatočte s pomerančovou kůží působením účinných technologií!



## UPOZORNĚNÍ

- před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod k použití
- přístroj nepoužívejte v prostředí, kde se nachází přítomnost kouře, prachu, nečistot nebo tam, kde by mohl přístroj spadnout do vody
- dodržujte přesně délku a způsob ošetření
- pokud se budete během používání cítit jakkoliv nestandardně, přístroj vypněte a jeho použití zkonzultujte se svým lékařem
- kabel adaptéru neohýbejte; na přístroj nepokládejte ostré, těžké nebo vlhké předměty
- během používání přístroje se vyhněte kontaktu s předměty, jako jsou svíčky, cigarety, lihoviny
- pokud bude mít přístroj jakékoliv technické problémy, využijte kontaktní formulář na adrese [www.beautyrelax.cz](http://www.beautyrelax.cz)
- přístroj se nepokoušejte sami rozebírat ani opravovat – mohli byste se zranit a došlo by ke ztrátě záruky
- pokud nastane některá z těchto situací, přístroj nikdy nepoužívejte:
  - napájecí kabel je poškozen
  - do elektroniky přístroje vnikla voda (týká se to zejména displeje)
  - na přístroj spadl těžký předmět nebo spadl z velké výšky na zem
- přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti jiného elektrického zařízení
- pokud přístroj používá více osob, aplikační hlavici dezinfikujte po každém použití pomocí jemně navlhčené hadříčky v lihovém roztoku



## KONTRAIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění na oblasti použití přístroje
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Cévní poruchy nebo arteroskleróza
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



**Doporučení:** Masážní přístroj Vacuform Deluxe EMS má vliv na činnost lymfatického systému a krevního oběhu. Pokud máte zdravotní diagnózu se špatnou funkcí lymfatického systému, srdečním onemocněním, případně trpíte zvýšeným krevním tlakem, konzultujte první použití přístroje s vaším lékařem.

## ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- Hlava
- Krk (přední i zadní strana)
- Oblast, kde je srdce
- Podpaží
- Loket
- Zápěstí
- Kolena
- Kotník
- Dlaně
- Chodidla
- Zákolenní oblast
- Páteř



## **PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE**

Masážní přístroj na vakuovou drenáž BeautyRelax Vacuform Deluxe EMS. Vysoce výkonný nástroj pro intenzivní potlačení projevů celulitidy. Skutečně funkční podtlaková vakuová drenáž. Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie. Zcela neinvazivní charakter ošetření. Praktická funkce vyhřívání pro lokální podporu krevního oběhu. K dispozici vám budou 4 úrovně intenzity vakuového nasávání a 4 úrovně působení EMS pulzů. Pomerančová kůže nemá proti modelu Vacuform Deluxe EMS žádnou šanci!



## LOKÁLNÍ MASÁŽ PODTLAKEM

Lymfatická masáž patří mezi nejúčinnější způsoby pro redukcí projevů celulitidy. Rytmické hnětení svalů zajišťuje správné proudění lymfy v těle. Přispívá k odvádění nečistot z krve. Prostřednictvím podtlakové terapie lze tělo zbavit nežádoucích otoků a nevzhledně vypadající pomerančové kůže.



## ÚROVNĚ INTENZITY NASÁVÁNÍ

Masážní přístroj BeautyRelax Vacuform Deluxe EMS nabízí 4 úrovně síly podtlaku. Každá tělesná partie vyžaduje jiné nastavení výkonu nasávání. Vyšší výkon pro skutečně hloubkovou intenzivní masáž. Jemnější nasávání oceníte na menších tělesných partiích se zvýšenou citlivostí na dotyk.





## EMS ELEKTRICKÉ PULZY

Působením času svaly ztrácí přirozenou pružnost a elasticitu. Pleť působí fádním a unaveným dojmem. Do aplikační hlavice přístroje je integrováných 10 kontaktních ploch, které generují EMS elektrické pulzy. Pulzy, které pronikají přes svrchní část pokožky přímo ke svalům. Pleť má omlazený a prozářený vzhled. To vše neinvazivně a bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů. 4 úrovně intenzity.



## INFRAČERVENÉ VYHŘÍVÁNÍ

Po obvodu aplikační hlavice jsou zabudované světelné zářiče. Infračervené paprsky pronikají do těla o vlnové délce v rozsahu 8 až 12nm. Infračervené záření má ve srovnání s ostatními zdroji tepla lepší schopnost pronikat hlouběji do podkožní tkáně. Infračerveným teplem je výrazně podpořen krevní oběh. Tělo je tak schopno rychleji se zbavit škodlivin a odpadních látek. Rozsah od 35°C do 50°C.



## HLAVNÍ VÝHODY

- Zcela neinvazivní charakter ošetření
- Bezpečné, bezbolestné používání
- Bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů
- Skutečně funkční podtlaková masáž

## CO MŮŽETE POUŽÍVÁNÍM OČEKÁVAT

- Okamžité zlepšení krevního oběhu a látkové výměny ošetřené partie
- Pokožka je pružnější a jemnější na dotyk
- Při pravidelném používání a přiměřeném stravování zjemnění příznaků celulitidy
- Tvarování a zpevňování stehen, hýždí, břicha

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vyhřívání: ano
- Rozsah: 35°C až 50°C
- Vakuové sání: 4 úrovně
- Maximální výkon podtlaku: 120KPa
- Možnost nastavený výkonu EMS pulzů
- Podsvícený digitální displej: ano
- Indikace stavu baterie
- Napájení: vestavěná baterie li-ion
- Kapacita baterie: 3000mAh
- Nabíjení: USB kabel (součást balení)
- Rozměry: 15x10x12cm
- Hmotnost: 590g

## OBSAH BALENÍ


- 1x BeautyRelax model BR-2837 VACUFORM DELUXE EMS
- 1x Nabíjecí síťový adaptér
- 1x Sada náhradních filtračních válečků
- 1x Hadička
- 1x Návod k obsluze



## POPIS PŘÍSTROJE

1. Umístění filtračního tampónku
2. Otvor pro vakuové nasávání
3. Aplikátor pro EMS elektrické pulzy
4. Zdroj infračerveného tepla
5. Vstup pro napájecí kabel
6. Ovládací panel s tlačítky
7. Displej
8. Madlo pro snadné používání

### SPODNÍ STRANA PŘÍSTROJE APLIKAČNÍ HLAVICE

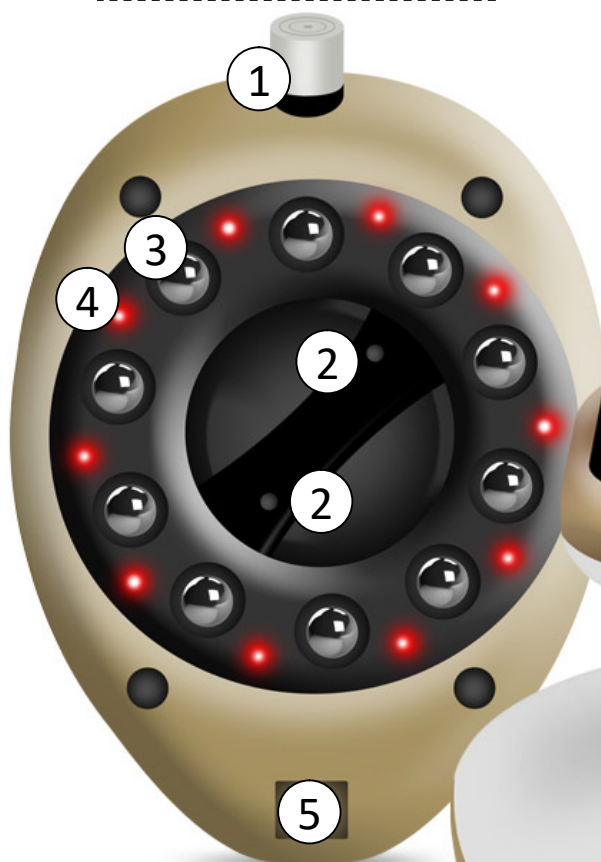

### BOČNÍ STRANA PŘÍSTROJE



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

### **1. Tlačítko HEATING**

Tlačítko pro aktivaci působení funkce tepla.

### **2. Tlačítko EMS**


Tlačítko pro aktivaci působení funkce EMS. K dispozici jsou celkem 4 úrovně.

### **3. Tlačítko VACUUM**

Tlačítko pro aktivaci působení funkce vakuového sání. K dispozici jsou celkem 4 úrovně.


### **4. Tlačítko ON/OFF**

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje.

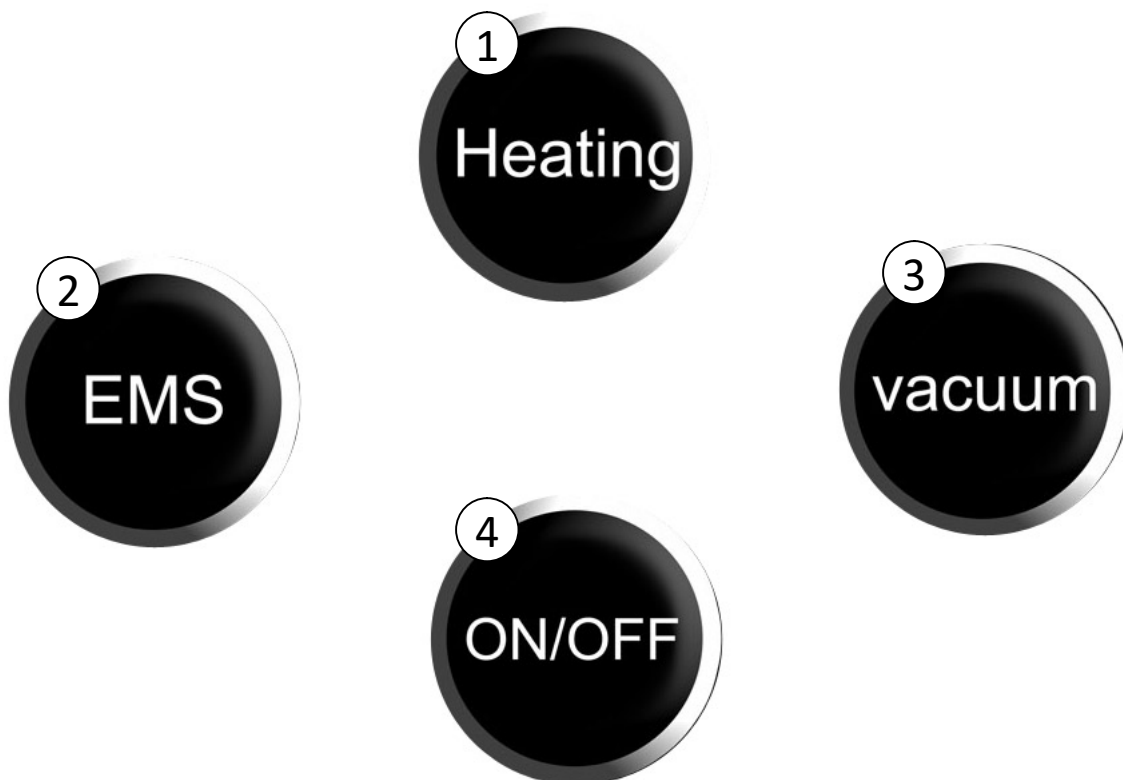

## POPIS DISPLEJE

1. Indikace stavu baterie
2. Aktuální dosažená teplota na povrchu aplikátoru
3. Indikace funkce vyhřívání
4. Indikace funkce vakuového sání
5. Indikace úrovně výkonu vakuového sání
6. Indikace úrovně výkonu EMS pulzů

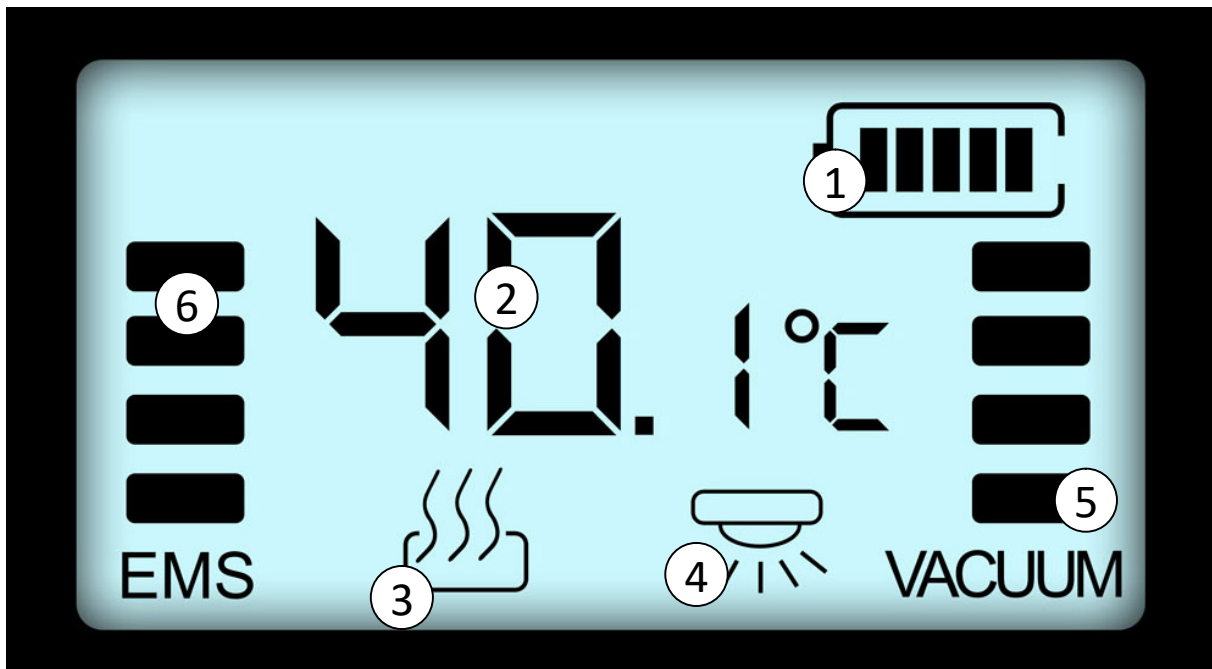

## VÝMĚNA FILTRAČNÍHO VÁLEČKU

Součástí balení jsou filtrační válečky. Válečky vytváří mechanickou bariéru, která zabraňuje vniknutí nečistot do cirkulace vzduchu uvnitř přístroje. Váleček je vyroben ze speciálního materiálu, který umožňuje proudění vzduchu, ale zároveň zabrání průniku částic nečistot. Kompresní vzduchový systém přístroje je tak chráněn, aby nedošlo k nasátí nečistot a poškození přístroje. Filtrační válečky není třeba měnit po každém použití přístroje. Mají poměrně dlouhou životnost. Doporučujeme provést pravidelně vizuálně kontrolu jeho stavu. V případě znečištění proveďte jeho výměnu za nový. Délka životnosti opět závisí na frekvenci použití přístroje. Pokud je znečištěný, proveďte výměnu za nový. V případě potřeby kontaktujte prodejce s možností zakoupení nové sady spotřebního materiálu.



- 1. Z balíčku vyberte filtrační váleček*
- 2. Odstraňte průhlednou krytku filtru. Stačí zatáhnout. Kryt není upevněn na závit.*
- 3. Vyjměte použitý filtrační váleček za nový.*
- 4. Vložte nový filtrační váleček a kryt nasadte nazpět nadoraz.*

### ***Jak poznat, kdy filtr vyměnit?***

Filtr je po vizuální stránce velmi znečištěn nebo již nepropouští cirkulaci vzduchu. To můžete ověřit, pokud v průběhu činnosti přístroje s funkcí vakuovým váním neucítíte na prstu v blízkosti krytu tampónku proudění vzduchu. Pokud vzduch neproudí, je správný čas na výměnu filtračního válečku.

## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF**. Aktivuje se displej. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Zapnutí přístroje doprovází zvuková signalizace.
- 2.** Pomocí tlačítka **VACUUM** si můžete nastavit výkon působení vzduchového sání. Výkon si můžete nastavit mačkáním tlačítka **VACUUM**.  
Funkce vakuového sání má tyto režimy: vypnuto - 1 - 2 - 3 - 4 - vypnuto. Úroveň intenzity působení vakua je zobrazena v pravé části displeje.
- 3.** Pomocí tlačítka **EMS** si můžete nastavit výkon působení EMS pulzů. Výkon si můžete nastavit mačkáním tlačítka **EMS**.  
Funkce EMS pulzů má tyto režimy: vypnuto - 1 - 2 - 3 - 4 - vypnuto. Úroveň působení EMS pulzů je zobrazena v levé části displeje.
- 4.** Pomocí krátkého stisku tlačítka **HEATING** si můžete zapnout nebo vypnout působení funkce tepla. Funkci vyhřívání indikuje ikona vyhřívání uprostřed displeje.
- 5.** Pomocí dlouhého stisku tlačítka **HEATING** se dostanete do režimu nastavení teploty. K dispozici je rozsah od 35°C do 50°C. Úroveň teploty můžete měnit krátkým mačkáním tlačítka **HEATING**. Jakmile mačkat přestanete, vyčkejte několik vteřin. Přístroj si nastavenou teplotu zapamatuje. Dále již na displeji zobrazuje aktuální teplotu povrchu aplikátoru.
- 6.** Displej také zobrazuje aktuální teplotu povrchu aplikační hlavičky. Trvá několik minut, než se plocha aplikátoru zahřeje na maximální teplotu.
- 7.** Pokud je přístroj v pohotovostním režimu déle než 30 minut, přístroj se automaticky vypne.
- 8.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.

## **POZNÁMKY K POUŽITÍ PŘÍSTROJE**

- 1.** Přístroj nepoužívejte nikdy na sucho. Vždy na pleť aplikujte jakýkoliv masážní olej nebo krém. Cokoliv, co umožní, aby aplikační hlavice po pleti dobře klouzala. Ideální je olejíček. Na pleti vysychá pomalu a má skvělou konzistenci.
- 2.** Při nastavení výkonu postupujte vždy se zvýšenou opatrností. Platí to jak pro úroveň výkonu vakuového sání, tak pro funkci EMS pulzů. Vždy nastavte nejprve úroveň 1. Přidávejte postupně podle vašeho pocitu. Technologie přístroje musí být na pokožce cítit. Přesto by používání přístroje nemělo překročit mez, kdy už to pro vás nebude snesitelné.
- 3.** Při použití přístroje není třeba mít všechny funkce zapnuté. Můžete mít bez problémů zapnuté pouze vakuové sání. Funkci EMS pulzů a vyhřívání aktivujete podle potřeby.
- 4.** Čím více nastavíte výkon vakuového sání, tím intenzivněji bude na vaši pleti probíhat mechanická podtlaková masáž. O to více mohou na vaši pleti zůstat stopy v podobě zarudnutí, které může v krajním případě přejít až v lehké podlitiny. V případě zarudnutí se pleť dostane do normálu v řádu hodin. Pokud zarudnutí přejde v podlitinu modré barvy, návrat do normálu vezme několik dní. Proto je vždy na každém uživateli, jaké individuální nastavení přístroje zvolí.
- 5.** Než se s přístrojem podrobně seznámíte a získáte jistou zkušenost, provádějte po těle krátké táhlé pohyby. Vybranou partii je možné také ošetřit staticky - s přístrojem zůstanete na jednom místě a necháte tukovou tkáň přístrojem nasát po delší dobu. Čím delší čas je přístroj k tukové tkáni nasátý, tím se více projeví zarudnutí až modřiny. Tento efekt snížíte přidáním masážního oleje nebo snížením úrovně působení vakuové masáže.



## JAK PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT

- Před každým použitím je třeba důkladně očistit pokožku. Ideální je načasovat ošetření po celkové koupeli těla. Pleť je krásně zahřátá a vláčná.
- Naneste na partii, kterou chcete ošetřit, jemnou vrstvu pleťového krému, krému proti celulitidě nebo jakýkoliv druh **esenciálního masážního oleje** (doporučujeme spíše přípravek na olejové bázi). Hlavním důvodem je lepší pohyb masážní hlavice po těle. Během masáže mají navíc tyto přípravky mnohem lepší schopnost absorbování do podkožní tkáně. **Bez podobného přípravku přístroj NEPOUŽÍVEJTE.**

### pohybová masáž


Přístrojem se pohybujte po těle delšími i kratšími úseky - viz. obrázek. Pomocí volné ruky si - pokud je to možné - pokožku co nejvíce napněte. Pohyb po pleti bude mnohem snadnější. Vždy dbejte na to, aby byla pokožka **co nejlépe hydratovaná** pomocí krému nebo oleje. **Nikdy nepoužívejte masáž přístrojem na sucho.** Při pohybové masáži je důležité nastavit **sílu nasávání na co nejmenší úroveň**. Pokud přístroj nasaje část těla až příliš silně, s přístrojem už nebude možné pohnout. Rychlost pohybu hlavice po pleti upravte podle nastaveného výkonu vakuové masáže.

### bodová masáž

Bodová masáž spočívá v ošetření konkrétní tělesné partie po částech – viz. obrázek. Přístroj zapněte a přiložte aplikátor k pleti. Po nastavení všech parametrů spustí přístroj funkci nasávání v síle, kterou si sami zvolíte. Při bodové masáži může po ošetření pleť zarudnout. Pokud si nastavíte nasávání příliš silné, mohou se na pleti objevit i mírné otoky až modřiny, které však v průběhu několika dní zcela zmizí. Vždy začínejte na nižší síle působení vakua a postupně si přidávejte dle vašeho pocitu. **Rozhodně hned nezačínajte na nejvyšších hodnotách!**



Při ošetření ostatních částí těla postupujte podle následující grafické vizualizace. Rozdíl mezi pohybovou a bodovou masáží spočívá nejen v odlišné technice, ale v účinku působení na tělo. **Pohybová masáž** přispívá zejména ke zlepšení činnosti lymfy. Tělo získá lepší odvádět nadbytečnou vodu z končetin. Při **bodové masáži** podpoříte lokální krevní oběh, což přispívá k celkové efektivnější látkové výměně a odvodu škodlivin. Ideální na použití partií s výskytem příznaků celulitidy (pomerančové kůže).

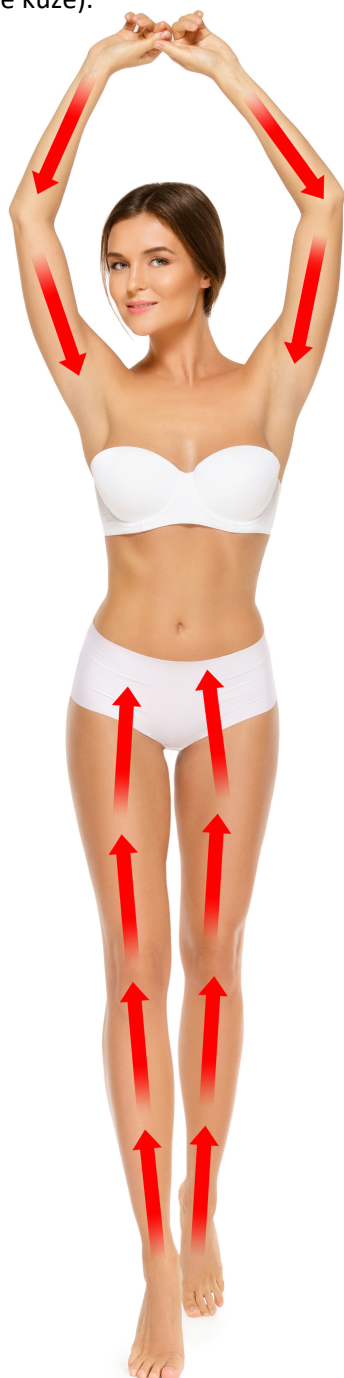

**pohybová masáž**



**bodová masáž**

## POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ

- předloktí
- paže
- břicho
- stehna
- zadeček
- lýtka



## DÉLKA OŠETŘENÍ

Pro každou partii je doporučeno ošetření v maximální délce 15 až 20 minut. Ošetření partií můžete libovolně kombinovat. Je vhodné rozložit si masáž těla do celého týdne. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.). Určitě nedoporučujeme ošetření přístrojem stejnou partii každý den.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití vnitřek aplikátoru důkladně očistěte. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Zejména, pokud přístroj používá více osob. Jednou za čas je dobré provést kompletní čištění vnitřního systému přístroje. Postupujte následovně:



1. Odšroubujte spodní krytku aplikační hlavice.
2. Odstraňte průhlednou krytku a filtr.
3. K přístroji připojte hadičku.
4. Připravte si dvě sklenice. Následně zapněte přístroj a aktivujte funkci působení vakua. Přístroj tekutinu přečerpá z jedné sklenice do druhé.
5. Přístroj nechte několik hodin vyschnout. Poté vraťte zpět filtrační váleček a kryt.

## **ZBARVENÍ PLETI**

Působením podtlakové masáže mohou na pleti vznikat červené fleky až téměř podlitiny (v případě použití opravdu silného výkonu podtlakové masáže). Jedná se o zcela přirozený jev. V průběhu několika hodin (v závislosti na výkonu podtlakové masáže) zbarvení pleti postupně zmizí. V případě nejvyšších hodnot podtlakové masáže se mohou červené fleky proměnit až v modřiny. V tomto případě trvá návrat do přirozené barvy pleti déle.



## **DOBÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. K nabíjení používejte výhradně síťový adaptér, který je součástí balení. Stav baterie indikuje ikona baterie na displeji.

### ***Postup nabíjení:***

1. Pro nabíjení používejte nabíjecí síťový adaptér, který je součástí balení.
2. Délka nabíjení závisí na aktuální kondici baterie.
3. Průběh nabíjení indikuje blikající symbol baterie.
4. Délka nabíjení závisí na stavu vybití baterie.
5. Jakmile je baterie nabita, blikání ustane.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Masážní přístroj dosahuje poměrně velkého výkonu. Ten i můžete snadno nastavit pomocí ovládacího panelu. K dispozici jsou na výběr 4 úrovně - nejnižší, nízká, střední, vysoká. I v případě použití nejnižšího výkonu může být při delším nasátí komplikovanější opět aplikační hlavici z pokožky odstranit. Nejlepší metoda je šikmé naklonění přístroje. Při kolmém směru by se odpojení aplikační hlavice od pokožky mohlo jevit jako problematické.

## **RYCHLOST POHYBU PO PLETI**

Jednou z masážních technik použití přístroje je tzv. razítkování. Metoda spočívá v nasátí aplikační hlavice pokožky na jednom místě. Poté se aplikační hlavice odstraní a stejný proces provedete o kousek vedle. Rozpojení aplikační hlavice s pleť je nejlépe provádět šikým náklonem. Při používání masážního přístroje je třeba zohlednit působení vakuového nasávání v čase. S délkou kontaktu aplikační hlavice s pleť na jednom místě vakuové nasátí postupně graduje (při nastavení libovolného výkonu). Pokud se s hlavicí přístroje budete pohybovat po pleť v rychlejších táhlých pohybech, gradování působení vakua v případě stání na jednom místě výrazně eliminujete. Jednoduše řečeno. Při rychlejším pohybu hlavice po pleť se vám bude pohyb provádět snadněji, avšak s nižší mírou působení vakua. Znovu zdůrazňujeme, že je vždy třeba pleť dostatečně hydratovat. Ideálně masážním olejíčkem. Pokud pokožku dostatečně „promažete“, má to na komfort použití přístroje zcela zásadní vliv.

## SOUVISEJÍCÍ DOPORUČENÉ PŘÍSTROJE

Boj s celulitidou představuje běh na dlouhou trať. Přesto však existují účinné technologie, které z dlouhodobého hlediska napomáhají k potlačení projevů pomerančové pleť. Optimální je kombinace ultrazvukové kavitace a podtlakové vakuové drenáže. Ultrazvuk se aktivně zaměřuje na stimulaci tukových buněk. Vakuová drenáž stimuluje vhodným způsobem krevní oběh a lymfatický systém. V masážních salonech se jedná o běžný postup ošetření. V první fázi ošetříte vybranou partii ultrazvukem a ve druhé fázi vakuovou drenáží. Účinek působení ultrazvuku je tak maximálně podpořen.



BEAUTYRELAX 3V1



CAVIMAX



CAVIMAX OPTIMAL



CELLUFORM



CELLUFORM ULTIMATE



CAVIMAX ULTIMATE

## **NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI**

### **Jak by mělo ošetření správně probíhat v domácím prostředí?**

Před zahájením ošetření si velice pečlivě prostudujte veškeré podrobnosti uvedené v tomto návodu k obsluze. Zvýšenou pozornost věnujte zejména kontraindikacím. Pokud si nejste jisti, konzultujte použití se svým praktickým lékařem. Prostudujte si také seznam partií, které jsou pro vakuovou masáž přesně vymezeny. Během ošetření zaujměte polohu vleže nebo vsedě. Vytvořte si dostatečné pohodlí. Oblečte si něco lehčího, pohodlného.

### **Jaké opatření je před a po ošetření nutno dodržovat?**

Minimálně 4 hodiny před ošetřením nejzte těžká nebo mastná jídla. Doporučujeme lehká jídla (např. zeleninový salát, jogurt). Den před ošetřením, v den ošetření a několik dní po ošetření zvyšte váš pitný režim na 2 až 2,5 litru čisté vody denně. Vyhýbejte se perlivým a slazeným vodám. Týden po ošetření ultrazvukem byste se měli vyvarovat konzumaci alkoholu, kofeinu, nikotinu, těžkých a mastných jídel.

### **Bolí ošetření masážním přístrojem?**

Ošetření je zcela bezbolestné a při dodržení veškerých pokynů v návodu i bezpečné. Při nastavení síly vakuového sání vždy začínejte na nejnižší hodnotě.

### **Mohu používat masážní přístroj bez předchozího ošetření pokožky?**

Před použitím masážního přístroje je nezbytné nanést na pokožku jakýkoliv typ pleťového krému nebo oleje. Jednoduše vytvořit kontaktní vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Pohyb aplikátoru bude mnohem snadnější. Navíc se účinné látky z krémů a olejů účinně vmasírují do podkoží.

### **Co mohu od používání masážního přístroje očekávat?**

Pravidelným používáním bude vaše pokožka pevnější a hladší zejména v oblastech postižené negativním působením celulitidy. Při celulitidě dochází k zvětšení objemu podkožních tukových buněk, které jsou vytlačovány proti povrchu kůže, a vytváří tak na ní nevzhledné drolíčky, připomínající právě strukturu pomerančové kůry. Masáž přístrojem zlepší proudění mízy k odvádění nečistot z krve. Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků a vyřešit tak zdravotní problémy, kterým by klasická sportovně-rekondiční masáž spíše uškodila.

### **Je používání masážního přístroje bezpečné?**

Masážní přístroj nemá žádné ostré hrany. Neměl by vás jakýmkoliv způsobem zranit. Dbejte však zvýšenou pozornost nastavení síly vakuového sání. Začínejte na nízkých hodnotách a postupně navyšujte dle vašeho pocitového vnímání. Zvýšená intenzita sání může způsobit mírné otoky až modřiny, které by měli během hodin až dní zmizet. Po dokončení ošetření může pokožka zrudnout. Tento efekt však také sám zmizí.

### **Jaký je důvod čištění/dezinfekce čištění aplikační hlavice?**

Aplikátor je třeba po použití důkladně očistit. Očištěním zabráníte případnému vniknutí do přístroje a zajistíte co nejlepší hygienu provozu.

### **Jak dlouho by mělo trvat individuální ošetření pleti?**

Doporučená délka ošetření jedné partie by měla být v rozsahu od 10 do 15 minut. Jako partie je bráno (jedna paže, jedno stehno, jedno lýtko, atd.).



**V jakých případech přístroj nepoužívat?**

V tomto návodu k obsluze je v pasáži „kontraindikace“ uveden seznam zdravotního omezení, kdy přístroj není možné používat. Dbejte prosím zvýšenou pozornost na případné kožní defekty. Věnujte pozornost dokončení léčby. Poté není problém přístroj znovu používat.

**Je přístroj zdravotnický prostředek?**

Nikoliv. Spadá do kategorie masážních přístrojů.

**Jak postupovat, když baterie ztratí po delší době kapacitu?**

Pokud se postupem času kapacita baterie výrazně sníží, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Zašleme informace, jakým způsobem lze výměnu baterie řešit.

**Má přístroj nějakou certifikaci?**

Přístroj na standardní evropskou certifikaci. Splňuje veškeré normy, které jsou kladeny na přístroje tohoto typu. V případě potřeby nás kontaktujte na emailové adrese: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Prohlášení o shodě vám pošleme elektronicky.

**Může přístroj používat více osob?**

Primárně to nedoporučujeme. Pakliže se však jedná o rodinné příslušníky a je po každém ošetření dodržen proces čištění a dezinfekce aplikační hlavice, druhá osoba přístroj použít může.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

## Masážní podtlakový přístroj VACUFORM DELUXE EMS

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-2837**

EAN **8594166120556**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 60601-1-2:2007**

**EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009**

**EN 61000-3-3:2008**

**EN 60601-1:2006+A11:2011**

**EN 60825-1:2007**

### Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



  
**SANTADRIA** s.r.o.  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Místo vydání: Brno  
Datum vydání: 1.10.2022

.....  
Martin Hrbek, jednatel