

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na formování postavy

BeautyRelax BR-1940

CELLUFORM SMART



OBSAH:

SLOVO ÚVODEM	4
UPOZORNĚNÍ	6
POUŽITÍ SONOGELU	8
KDY NENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOPORUČENO	9
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	11
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	13
TECHNICKÉ PARAMETRY	17
OBSAH BALENÍ	17
POPIS PŘÍSTROJE	18
OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	20
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ	23
TEST PLETI	27
SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	27
DOPORUČENÉ SMĚRY POHYBU PO PLETI	28
NABÍJENÍ BATERIE	29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	30
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	32
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	36
CERTIFIKACE	36
EU DISTRIBUTOR	36
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	37

SLOVO ÚVODEM

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto estetického přístroje. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, upozorněním a kontraindikacím. Dodržování doporučených postupů přispívá k bezpečnému používání přístroje a k dosažení co nejlepšího uživatelského komfortu. V tomto návodu naleznete informace o použitých technologiích, správném způsobu používání, doporučených postupech ošetření i důležitých bezpečnostních doporučeních. Doporučujeme návod uschovat pro případné budoucí použití.

Důležité informace před prvním použitím

- Veškeré pokyny uvedené v tomto návodu jsou určeny k zajištění bezpečného a správného používání přístroje.
- Přístroj využívá kombinaci kosmetických technologií, které jsou určeny pro domácí péči o pokožku těla. Při používání podle tohoto návodu poskytuje komfortní a neinvazivní kosmetické ošetření.
- Přestože je přístroj navržen s důrazem na bezpečnost, je důležité dodržovat všechna doporučení uvedená v tomto návodu. Nedodržení pokynů, bezpečnostních upozornění nebo používání navzdory uvedeným kontraindikacím může zvýšit riziko nežádoucích reakcí nebo snížit účinnost ošetření.
- Přístroj byl navržen pro běžné domácí používání a jeho ovládání nevyžaduje odbornou kvalifikaci. Před prvním použitím doporučujeme věnovat dostatek času seznámení se s jednotlivými funkcemi a režimy.

Základní informace o přístroji

- Estetický přístroj **BeautyRelax** je určen pro domácí kosmetickou péči o pokožku těla. Nejedná se o zdravotnický prostředek ani prostředek určený k diagnostice, léčbě nebo prevenci onemocnění.
- Přístroj využívá kombinaci technologií, jako jsou radiofrekvence (RF), EMS mikroproudy, ultrazvuk, vibrační masáž a LED světelná terapie. Tyto technologie jsou určeny ke kosmetické péči o pokožku, podpoře jejího vzhledu, pružnosti a komfortní masáži vybraných partií těla.
- Pravidelné používání může přispět ke zlepšení vzhledu pokožky, její pružnosti a celkového komfortu během kosmetické péče. Dosažené výsledky jsou individuální a mohou se lišit v závislosti na typu pokožky, četnosti používání i životním stylu.
- Přístroj poskytuje **neinvazivní kosmetické ošetření**, při kterém nedochází k narušení povrchu pokožky ani k pronikání aplikační hlavice do tkání.
- Díky své konstrukci je přístroj určen pro bezpečné používání v domácím prostředí při dodržení všech pokynů uvedených v tomto návodu.
- Přístroj byl vyroben v souladu s příslušnými požadavky na bezpečnost elektrických spotřebičů a před uvedením na trh prošel předepsaným procesem posouzení shody podle platných právních předpisů.

Vodivý gel

Pro správnou funkci přístroje doporučujeme používat vodivý ultrazvukový nebo RF gel určený pro kosmetické přístroje.

Vodivý gel:

- zajišťuje optimální kontakt mezi hlavicí a pokožkou,
- usnadňuje plynulý pohyb přístroje,
- zvyšuje komfort během ošetření,
- podporuje efektivní přenos energie mezi hlavicí a pokožkou.

Vodivé gely jsou běžně dostupné v lékárnách, prodejnách zdravotnických potřeb nebo u prodejců kosmetických přístrojů. Pro správnou funkci není nutné používat drahé přípravky; důležité je, aby byl gel určen pro tento typ použití.

Doporučená četnost používání

Vyšší četnost používání automaticky neznamená lepší výsledky. Doporučujeme dodržovat intervaly uvedené v tomto návodu a ponechat pokožce dostatek času na přirozenou regeneraci mezi jednotlivými ošetřeními. Pravidelnost používání je zpravidla důležitější než příliš vysoká intenzita nebo nadměrná frekvence ošetření.

Potřebujete poradit?

Pokud si nejste jisti správným používáním přístroje nebo máte jakékoli dotazy týkající se jeho funkcí, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu.

Telefon: 737 196 160

E-mail: mh@santadria.cz

Rádi Vám poskytneme potřebné informace a pomůžeme se správným používáním přístroje. Doporučujeme tento návod pečlivě uschovat pro případné budoucí použití.

Věříme, že Vám přístroj bude dlouhodobě sloužit a stane se součástí Vaší pravidelné péče o pokožku.

Tým BeautyRelax.cz

UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění bezpečného používání přístroje dodržujte následující doporučení:

- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, seznamte se s jednotlivými funkcemi přístroje a prohlédněte si všechna vyobrazení. Návod uschovejte pro případné budoucí použití.
- Pokud trpíte závažným kožním onemocněním, otevřenými ranami nebo jiným zdravotním problémem v místě plánovaného ošetření, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti vhodností používání s ohledem na svůj zdravotní stav, poraďte se před použitím se svým ošetřujícím lékařem.
- Přístroj je určen především pro osobní použití. Pokud jej používá více osob, doporučujeme po každém použití důkladně očistit aplikační hlavici a dodržovat běžné hygienické zásady.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený, vykazuje známky závady nebo nefunguje správně.
- Pokud přístroj spadl do vody nebo došlo k jeho zaplavení, okamžitě jej přestaňte používat. Před dalším použitím jej nechte zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Je-li kryt přístroje poškozen nebo otevřen, nedotýkejte se vnitřních elektrických částí. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Dojde-li k pádu přístroje na zem, zkontrolujte, zda není mechanicky poškozen. V případě jakýchkoli pochybností přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, například ve vaně, sprše, sauně nebo u bazénu.
- Přístroj není vodotěsný. Nikdy jej neponořujte do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Po každém použití přístroj vypněte a uložte na bezpečné a suché místo.
- Přenesete-li přístroj z chladného prostředí do teplé místnosti, ponechte jej před zapnutím alespoň 2 až 3 hodiny aklimatizovat, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení.

- Příklad: Přístroj není určen pro děti. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby nebo po důkladném seznámení s bezpečným způsobem používání.
- Příklad: Přístroj nepokládejte na horké povrchy ani do jejich blízkosti (radiátory, kamna, krby, varné desky apod.).
- Příklad: Přístroj nerozebírejte, neupravujte ani se nepokoušejte provádět vlastní opravy. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Příklad: Přístroj skladujte na suchém, čistém a dobře větraném místě. Chraňte jej před prachem, nadměrnou vlhkostí a mechanickým poškozením.
- Příklad: Nevystavujte přístroj dlouhodobému přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Příklad: Přístroj používejte výhradně způsobem popsáním v tomto návodu. Použití v rozporu s doporučeným účelem nebo bezpečnostními pokyny může vést ke snížení funkčnosti přístroje nebo ke vzniku nežádoucích účinků.
- Příklad: Výrobce ani distributor neodpovídají za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v rozporu s tímto návodem, neodborných úprav, neoprávněných oprav nebo používání k jinému účelu, než ke kterému je přístroj určen. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

POUŽITÍ SONOGELU

Použití přístroje je vždy spojeno s aplikací vodivého gelu na vodní bázi (není součástí balení). Doporučujeme používat čirý ultrazvukový nebo radiofrekvenční vodivý gel, často označovaný jako SONOGEL nebo ultrazvukový gel. Tyto gely jsou běžně dostupné v lékárnách, prodejnách zdravotnických potřeb nebo u prodejců kosmetických přístrojů. Použití vodivého gelu je nezbytné pro správnou funkci přístroje. Gel vytváří vodivou kontaktní vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou, zajišťuje plynulý skluz hlavice po ošetřované oblasti a přispívá k efektivnímu přenosu energie z přístroje do povrchu pokožky. Současně pomáhá zvyšovat komfort během ošetření. Používejte pouze gely určené pro ultrazvukové, radiofrekvenční nebo EMS kosmetické přístroje. Nedoporučuje se nahrazovat vodivý gel běžnými tělovými krémy, oleji, vazelínou ani kosmetickými přípravky obsahujícími alkohol, protože nemusí zajistit dostatečný kontakt mezi hlavicí a pokožkou a mohou snížit účinnost ošetření. Po ukončení ošetření doporučujeme zbytky gelu z pokožky odstranit a hlavicí přístroje očistit měkkým vlhkým hadříkem.



KDY NENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE DOPORUČENO

Přístroj nepoužívejte, pokud:

- používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zdravotnické zařízení,
- máte implantovaný defibrilátor nebo neurostimulátor,
- jste těhotná,
- jste krátce po porodu a váš zdravotní stav ještě není stabilizovaný (o vhodnosti použití se poraďte s lékařem),
- trpíte aktivním nádorovým onemocněním,
- máte epilepsii,
- máte závažné poruchy srdečního rytmu nebo jiné závažné srdeční onemocnění,
- proděláváte horečnaté nebo akutní infekční onemocnění,
- trpíte poruchou srážlivosti krve nebo užíváte antikoagulační léčbu, pokud lékař nedoporučí jinak,
- máte trombózu nebo tromboflebitidu,
- trpíte poruchou citlivosti pokožky v ošetřované oblasti.

Stav pokožky

Přístroj nepoužívejte na místech, kde se nachází:

- otevřené rány,
- čerstvé jizvy,
- popáleniny,
- aktivní kožní infekce,
- ekzém nebo lupénka v aktivní fázi,
- zanícená nebo podrážděná pokožka,
- krvácivé nebo mokvající kožní projevy,
- čerstvé tetování nebo permanentní make-up, dokud není pokožka zcela zahojená.

Oblasti těla, které neošetřujte

Nepoužívejte přístroj:

- na obličej (pokud není výrobcem výslovně určen i pro ošetření obličeje),
- na oční víčka a oční okolí,
- přímo přes oči,
- na krk v oblasti štítné žlázy,
- na sliznice,
- na genitálie,
- na prsní bradavky,
- přímo přes páteř,
- na oblast s výraznými křečovými žilami,
- na kostní výčnělky nebo klouby.

Kovové implantáty

Nepoužívejte přístroj přímo nad oblastí, kde se nachází:

- kovové implantáty,
- kloubní náhrady,
- osteosyntetický materiál (šrouby, dlahy, hřeby),
- jiné trvale implantované kovové součásti.

V případě pochybností se poraďte s lékařem.

Po kosmetických nebo lékařských zákrocích

Přístroj nepoužívejte:

- bezprostředně po plastické operaci,
- po invazivních estetických zákrocích,
- po aplikaci výplňových materiálů nebo botulotoxinu, dokud lékař nedoporučí jinak,
- po chemickém peelingu nebo laserovém ošetření, dokud není pokožka zcela zhojená.

Další doporučení

Přístroj nepoužívejte:

- během nabíjení,
- ve vaně, sprše nebo jiném mokré prostředí,
- pokud je poškozen napájecí kabel nebo samotný přístroj,
- pokud přístroj vykazuje známky závady,
- pokud jste pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, které mohou ovlivnit schopnost bezpečného používání.

Kdy ošetření okamžitě přerušte

Používání ihned ukončete, pokud během ošetření zaznamenáte:

- výraznou bolest,
- silné pálení,
- intenzivní zarudnutí přetrvávající delší dobu,
- otok,
- závratě nebo nevolnost,
- jakoukoli jinou neobvyklou reakci organismu.

Pokud obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, obraťte se na svého lékaře.

Důležité upozornění

Tento přístroj je určen výhradně pro kosmetickou péči o tělo. Nenahrazuje lékařské vyšetření, léčbu ani odbornou zdravotní péči. Pokud si nejste jisti, zda je pro Vás používání přístroje vhodné s ohledem na Váš zdravotní stav, doporučujeme před použitím konzultaci s lékařem.

VLASTNOSTI & SPECIFIKACE

Kombinace 5 kosmetických technologií v jednom přístroji.

- Ergonomický tvar pro pohodlné držení a snadnou manipulaci.
- Bezdrátový provoz díky vestavěnému dobíjecímu akumulátoru.
- Jednoduché ovládání pomocí dvou tlačítek.
- Tři přednastavené pracovní režimy.
- Tři úrovně intenzity stimulace.
- Integrované LED světelné indikátory provozu.
- Automatické vypnutí po uplynutí pracovního cyklu.
- Kompaktní rozměry vhodné pro domácí použití i cestování.
- Neinvazivní kosmetické ošetření bez narušení povrchu pokožky.

Použité technologie

Přístroj využívá kombinaci následujících technologií:

- **Radiofrekvence (RF)** – vytváří příjemný tepelný efekt a podporuje pružnost pokožky.
- **EMS mikroproudy** – jemnými elektrickými impulzy stimulují svalová vlákna.
- **Ultrazvuk 3 MHz** – zajišťuje mikromasáž pokožky a podporuje přenos energie prostřednictvím vodivého gelu.
- **LED světelná terapie** – využívá červené, modré a fialové světlo pro kosmetickou péči.
- **Vibrační masáž** – zvyšuje komfort ošetření a podporuje masážní účinek.

Pracovní režimy

Přístroj nabízí tři přednastavené režimy kombinující jednotlivé technologie:

Režim 1

- Ultrazvuk
- Vibrace
- Modré LED světlo

Režim 2

- Radiofrekvence (RF)
- EMS mikroproudy
- Vibrace
- Červené LED světlo

Režim 3

- Radiofrekvence (RF)
- EMS mikroproudy
- Ultrazvuk
- Vibrace
- Fialové LED světlo

Nastavení intenzity

Každý pracovní režim umožňuje nastavení tří úrovní intenzity.

- **Úroveň 1** – vhodná pro začátečníky a citlivější pokožku.
- **Úroveň 2** – doporučena pro běžné pravidelné používání.
- **Úroveň 3** – určena zkušenějším uživatelům podle individuální snášenlivosti.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

Estetický přístroj využívá kombinaci několika moderních kosmetických technologií určených pro domácí péči o pokožku těla. Spojením **radiofrekvenční energie (RF)**, **EMS mikroproudů**, **ultrazvuku**, **vibrační masáže** a **LED světelné terapie** nabízí komplexní kosmetické ošetření zaměřené na zlepšení vzhledu pokožky a zvýšení komfortu při pravidelné péči. Jednotlivé technologie působí na pokožku odlišným způsobem a vzájemně se doplňují. Radiofrekvence vytváří příjemný tepelný efekt, EMS stimuluje svalová vlákna jemnými elektrickými impulzy, ultrazvuk podporuje mikromasáž pokožky, vibrace zpřijemňují ošetření a LED světlo doplňuje kosmetickou péči o pokožku. Při pravidelném používání v souladu s tímto návodem může přístroj přispět ke zlepšení vzhledu pokožky, její pružnosti, podpoře mikrocirkulace a celkovému komfortu při péči o vybrané partie těla. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při pravidelném používání v kombinaci se zdravým životním stylem, dostatečným pitným režimem a vhodnou péčí o pokožku.

Následující kapitoly podrobně vysvětlují princip fungování jednotlivých technologií a jejich doporučené použití.

Radiofrekvenční technologie (RF)

Radiofrekvenční technologie (RF – Radio Frequency) patří mezi nejčastěji využívané technologie v moderní kosmetické péči. Princip spočívá ve vytváření vysokofrekvenční elektromagnetické energie, která způsobuje řízené zahřívání hlubších vrstev pokožky.

Vznikající tepelný efekt podporuje přirozené procesy probíhající v pokožce a přispívá k její regeneraci. Současně dochází ke zvýšení mikrocirkulace a lepšímu prokrvení ošetřované oblasti.

Hlavní přínosy RF technologie

- příjemné zahřívání pokožky,
- podpora mikrocirkulace,
- podpora tvorby kolagenu a elastinu,
- zlepšení pružnosti pokožky,
- podpora pevnějšího vzhledu pokožky,
- podpora kosmetické péče při pravidelném používání.

Během ošetření je běžné pociťovat příjemné teplo. Intenzita tepelného účinku závisí na individuální citlivosti pokožky.

EMS mikroproudy

EMS (Electrical Muscle Stimulation) využívá jemné elektrické impulzy, které stimulují svalová vlákna pod pokožkou.

Elektrické impulzy napodobují přirozené nervové signály vysílané do svalů. Díky tomu dochází k jejich rytmické stimulaci bez nutnosti aktivního pohybu. EMS technologie je dlouhodobě využívána nejen v kosmetice, ale také při sportovní regeneraci a rehabilitačních cvičeních pod odborným dohledem.

Hlavní přínosy EMS technologie

- stimulace svalových vláken,
- podpora svalového tonusu,
- podpora mikrocirkulace,
- podpora lymfatického systému,
- příjemná svalová masáž,
- zvýšení komfortu při kosmetické péči.

Během používání můžete cítit jemné brnění nebo lehké svalové stahy. Jedná se o běžný projev správně fungující EMS technologie.

Ultrazvuková technologie

Přístroj využívá ultrazvuk o frekvenci **3 MHz**, který vytváří vysokofrekvenční mechanické vibrace. Ultrazvuk není lidským sluchem slyšitelný. Působí formou jemné mikromasáže povrchových vrstev pokožky a je běžně využíván v kosmetické péči.

V kombinaci s vodivým gelem dochází k efektivnímu přenosu ultrazvukové energie mezi hlavicí přístroje a pokožkou.

Hlavní přínosy ultrazvuku

- jemná mikromasáž pokožky,
- podpora mikrocirkulace,
- podpora vstřebávání kosmetických přípravků aplikovaných na povrch pokožky,
- zvýšení komfortu při ošetření,
- doplnění účinku ostatních technologií.

Pro správnou funkci ultrazvuku je nezbytné používat vodivý gel určený pro tento typ přístrojů.

LED světelná terapie

Přístroj je vybaven LED světelnou terapií, která využívá světlo různých barevných spekter. LED světlo představuje neinvazivní způsob kosmetické péče o pokožku bez vytváření UV záření.

Jednotlivé barvy světla mají odlišné využití.

Červené světlo

Červené světlo je spojováno především s péčí o zralou pokožku.

Pomáhá:

- podporovat přirozenou regeneraci pokožky,
- podporovat tvorbu kolagenu,
- zlepšovat pružnost pokožky,
- přispívat ke svěžejšímu vzhledu pokožky.

Modré světlo

Modré světlo je vhodné především pro problematickou pokožku.

Používá se zejména pro:

- zklidnění pokožky,
- kosmetickou péči o pleť se sklonem k nedokonalostem,
- doplnění běžné péče o pokožku.

Fialové světlo

Fialové světlo představuje kombinaci červeného a modrého světelného spektra.

Slouží jako univerzální režim kombinující vlastnosti obou barev.

Vibrační masáž

Součástí přístroje je vibrační systém, který vytváří jemné mechanické vibrace.

Ty zpříjemňují ošetření a současně podporují masážní efekt.

Přínosy vibrační masáže

- uvolnění svalového napětí,
- podpora mikrocirkulace,
- příjemný masážní efekt,
- zvýšení komfortu při používání,
- lepší skluz hlavice po pokožce.

Vibrace jsou aktivní ve většině pracovních režimů přístroje.

Synergický účinek technologií

Největší výhodou přístroje je současné využití několika kosmetických technologií. Jejich kombinace umožňuje působit na pokožku různými způsoby během jednoho ošetření.

- **Radiofrekvence (RF)** vytváří tepelný efekt a podporuje pružnost pokožky.
- **EMS mikroproudy** stimulují svalová vlákna jemnými elektrickými impulzy.
- **Ultrazvuk** zajišťuje mikromasáž pokožky a podporuje účinek vodivého gelu.
- **LED světelná terapie** doplňuje kosmetickou péči o pokožku pomocí světelných vlnových délek.
- **Vibrace** zvyšují komfort ošetření a podporují masážní účinek.

Pravidelné používání přístroje podle doporučení uvedených v tomto návodu může přispět ke zlepšení vzhledu pokožky, její pružnosti, podpoře mikrocirkulace a celkovému komfortu při kosmetické péči. Dosažené výsledky jsou individuální a závisí mimo jiné na typu pokožky, četnosti používání, věku, životním stylu a celkové péči o organismus.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Použité technologie: Radiofrekvence (RF), EMS mikroproudy, ultrazvuk, LED světelná terapie, vibrační masáž
- Počet pracovních režimů: 3
- Počet úrovní intenzity: 3
- Ultrazvuková frekvence: 3 MHz
- Výstupní napětí RF: 120 Vpp
- Napájecí napětí: DC 5 V
- Nabíjecí proud: 1 A
- Jmenovitý výkon: 5 W
- Typ akumulátoru: Li-Ion (lithium-iontový)
- Kapacita akumulátoru: 800 mAh
- Jmenovité napětí akumulátoru: 7,4 V
- Způsob nabíjení: USB & síťový adaptér
- Automatické vypnutí: po 5 minutách provozu
- Ovládání: Tlačítkové
- Světelná signalizace: LED indikace provozu a zvoleného režimu
- Materiál těla přístroje: ABS plast
- Materiál aplikační hlavice: Kovová vodivá slitina
- Rozměry přístroje: 85 × 85 × 84 mm
- Hmotnost: přibližně 226 g
- Stupeň krytí: IPX0 (přístroj není vodotěsný)
- Délka pracovního cyklu: 5 minut
- Doporučená doba ošetření jedné oblasti: 5–10 minut
- Doporučená frekvence používání: 2–3× týdně


OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj na formování postavy BR-1940
- Nabíjecí kabel.
- Síťový adaptér 220V.
- Návod k obsluze.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Tlačítko **ON/OFF/MODE**
2. Tlačítko **LEVEL**
3. Vstup pro napájecí kabel
4. Aplikační plocha přístroje

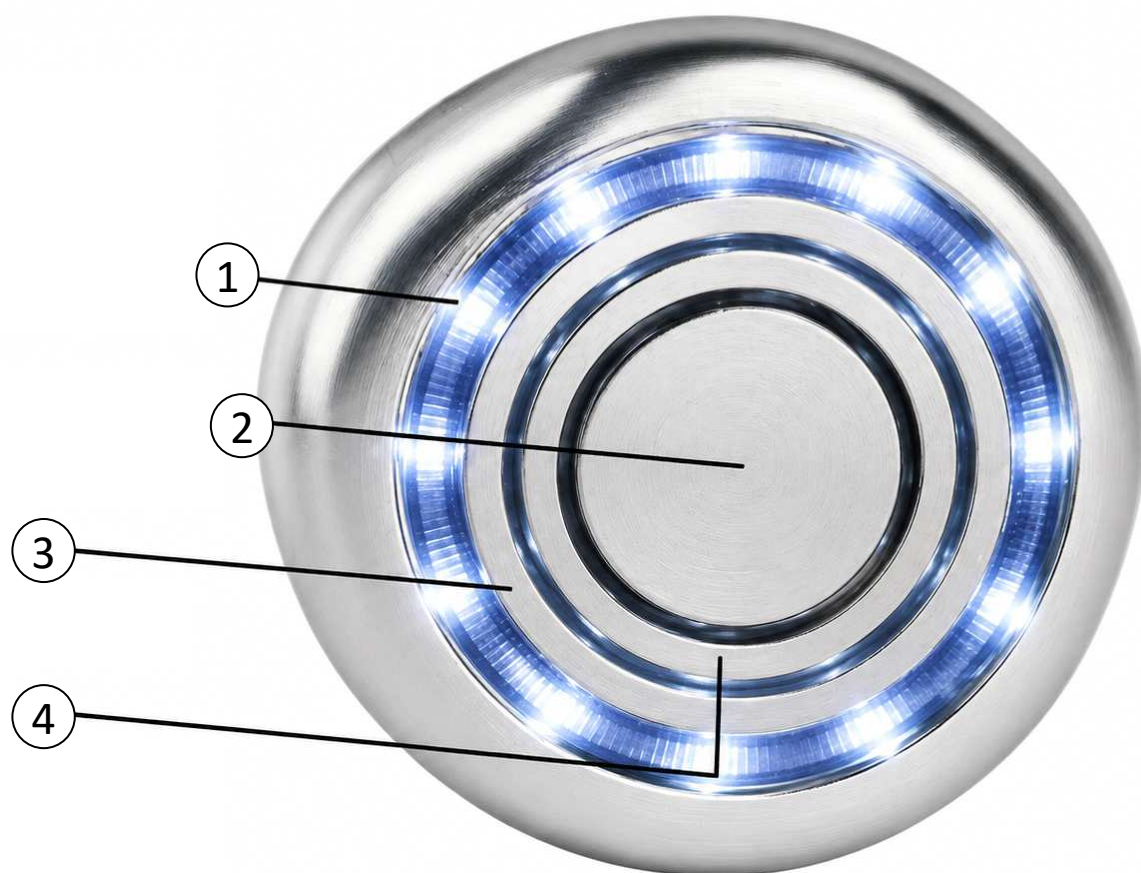

- 1. LED světelná terapie
- 2. Ultrazvuk
- 3. Radiofrekvence
- 4. EMS mikroproudy

OVLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Krok 1 – Nabití přístroje

Před prvním použitím přístroj plně nabijte pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu a síťového adaptéru. Doba úplného nabití vždy závisí na stavu a kondici baterie. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.

Krok 2 – Příprava pokožky

Před ošetřením důkladně očistěte ošetřovanou oblast od:

- nečistot,
- potu,
- make-upu,
- tělového mléka,
- olejů.

Pokožka by měla být čistá, suchá a bez poranění. Odstraňte také šperky nebo kovové doplňky z ošetřované oblasti.

Krok 3 – Nanesení vodivého gelu

Na pokožku naneste dostatečné množství čirého vodivého gelu určeného pro ultrazvukové nebo radiofrekvenční přístroje. Gel vytvoří vodivou kontaktní vrstvu mezi aplikační hlavicí a pokožkou a zajistí správnou funkci všech použitých technologií. Nikdy nepoužívejte přístroj na suché pokožce.

Krok 4 – Zapnutí přístroje

Podržte tlačítko **ON/OFF** přibližně **2 sekundy**. Přístroj začne ihned pracovat v režimu 1.

Krok 5 – Výběr pracovního režimu

Krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF** přepínáte mezi jednotlivými režimy

Vyberte režim podle požadovaného typu ošetření.

Režim 1

- Ultrazvuk
- Vibrace
- Modré LED světlo

Režim 2

- Radiofrekvence (RF)
- EMS
- Vibrace
- Červené LED světlo

Režim 3

- Radiofrekvence (RF)
- EMS
- Ultrazvuk
- Vibrace
- Fialové LED světlo

Krok 6 – Nastavení intenzity

Pomocí tlačítka **LEVEL** nastavte požadovanou intenzitu. Přístroj nabízí tři úrovně výkonu. Pro první použití doporučujeme zvolit **nejnižší intenzitu** a podle vlastních pocitů ji postupně zvyšovat.

Krok 7 – Zahájení ošetření

Přiložte aplikační hlavici na pokožku. Po celou dobu musí být hlavice v kontaktu s vrstvou vodivého gelu.

Krok 8 – Pohyb hlavice

Během ošetření hlavicí **neustále pohybujte**.

Doporučený způsob vedení:

- pomalé krouživé pohyby,
- plynulé tahy,
- směrem vzhůru,
- podél svalových linií.

Na jednom místě hlavicí nepřidržujte déle než několik sekund. Nepoužívejte nadměrný tlak. Hlavice by měla po pokožce plynule klouzat.

Krok 9 – Doporučená doba ošetření

Maximální doporučená doba na jednu oblast je **20 minut během jednoho dne**.

Krok 10 – Ukončení ošetření

Po dokončení ošetření přístroj vypněte. Pokud se nevypne automaticky, podržte tlačítko **ON/OFF** přibližně **2 sekundy**.

Krok 11 – Očištění pokožky

Zbytky vodivého gelu odstraňte čistým ručníkem nebo vlhkým hadříkem. Následně doporučujeme aplikovat hydratační nebo zpevňující tělový krém.

Krok 12 – Vyčištění přístroje

Po každém použití očistěte aplikační hlavici měkkým navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte:

- abrazivní čisticí prostředky,
- rozpouštědla,
- alkoholové přípravky.

Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Doporučená frekvence používání

- **První měsíc:** 2–3 ošetření týdně.
- **Udržovací péče:** 1–2 ošetření týdně.

Stejnou oblast neošetřujte častěji než jednou za 48 hodin.

Doporučení pro dosažení nejlepších výsledků

- používejte přístroj pravidelně,
- vždy používejte dostatečné množství vodivého gelu,
- dodržujte doporučenou dobu ošetření,
- během ošetření hlavici neustále pohybujte,
- po ošetření dopřejte pokožce čas na regeneraci,
- dodržujte dostatečný pitný režim,
- kombinujte používání přístroje s pravidelným pohybem a vyváženou stravou.

Doporučení: Při prvním použití zvolte nejnižší intenzitu a kratší dobu ošetření, abyste si ověřili, jak Vaše pokožka na jednotlivé technologie reaguje. Intenzitu zvyšujte postupně podle vlastní snášenlivosti a vždy respektujte doporučené časy ošetření.

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ

Přístroj nabízí **tři přednastavené pracovní režimy**, které kombinují jednotlivé technologie odlišným způsobem. Každý režim je vhodný pro jiný typ kosmetické péče. Výběr závisí na požadovaném účinku a individuálních preferencích uživatele.

Přístroj umožňuje také nastavení **tří úrovní intenzity**, které lze přizpůsobit citlivosti pokožky.

Režim 1

Ultrazvuk + Vibrace + Modré LED světlo

Charakteristika

Jedná se o nejjemnější pracovní režim. Kombinuje ultrazvukovou mikromasáž, vibrační masáž a modré LED světlo. Je vhodný zejména pro pravidelnou kosmetickou péči nebo pro uživatele, kteří s přístrojem začínají.

Doporučené použití

- první seznámení s přístrojem,
- pravidelná kosmetická péče,
- jemná masáž pokožky,
- péče o citlivější partie těla,
- uvolnění svalového napětí po fyzické aktivitě.

Doporučená intenzita

- začátečníci – úroveň 1,
- běžné používání – úroveň 2,
- zkušenější uživatelé – úroveň 3.

Režim 2

Radiofrekvence (RF) + EMS + Vibrace + Červené LED světlo

Charakteristika

Tento režim kombinuje radiofrekvenční technologii s EMS mikroproudy. Současně je aktivní vibrační masáž a červené LED světlo.

Během používání můžete cítit příjemné zahřívání pokožky a jemné svalové impulzy.

Doporučené použití

- kosmetická péče o oblasti se ztrátou pružnosti pokožky,
- pravidelná péče o břicho,
- boky,
- stehna,
- paže,
- hýždě.

Doporučená intenzita

Začněte nejnižší intenzitou a postupně ji upravujte podle vlastní snášenlivosti.

Režim 3

Radiofrekvence (RF) + EMS + Ultrazvuk + Vibrace + Fialové LED světlo

Charakteristika

Tento režim využívá současně všechny hlavní technologie přístroje.

Je určen pro uživatele, kteří jsou již na používání přístroje zvyklí a preferují komplexní kosmetickou péči.

Doporučené použití

- pravidelná kosmetická péče,
- péče o větší tělesné partie,
- dlouhodobá udržovací péče,
- kombinace všech dostupných technologií během jednoho ošetření.

Doporučená intenzita

První použití provádějte na úrovni 1.

Po několika ošetřeních lze intenzitu zvýšit podle individuální snášenlivosti.

Jak režimy správně kombinovat

Pro dosažení optimálního komfortu doporučujeme jednotlivé režimy během používání střídat. Není nutné používat vždy pouze jeden režim.

Varianta A – Kompletní ošetření jedné oblasti

1. **Režim 1** – 2 až 3 minuty
 - příprava pokožky,
 - jemná mikromasáž,
 - zahájení kosmetického ošetření.
2. **Režim 2** – 5 minut
 - hlavní část ošetření,
 - radiofrekvence a EMS.
3. **Režim 3** – 2 až 3 minuty
 - závěrečná komplexní péče,
 - uvolnění pokožky.

Celková doba ošetření by neměla překročit doporučený čas uvedený v tomto návodu.

Varianta B – Střídání při pravidelném používání

1. ošetření v týdnu

Režim 2

2. ošetření v týdnu

Režim 1

3. ošetření v týdnu

Režim 3

Tímto způsobem jsou všechny technologie využívány rovnoměrně.

Varianta C – Pro začátečníky

První dva týdny:

- používejte pouze Režim 1,
- intenzita 1.

Následně:

- zařadte Režim 2,
- intenzita 1 nebo 2.

Po získání zkušeností:

- používejte všechny režimy podle potřeby.

Jak zvolit správný režim

Pokud chcete především...

Doporučený režim

Jemnou kosmetickou péči

Režim 1

Příjemné zahřátí pokožky

Režim 2

Svalovou stimulaci EMS

Režim 2 nebo 3

Komplexní ošetření

Režim 3

První seznámení s přístrojem

Režim 1

Udržovací pravidelnou péči

Střídat všechny režimy

Doporučení pro nejlepší výsledky

- Používejte vždy dostatečné množství vodivého gelu.
- Hlavici přístroje neustále plynule pohybujte.
- Začínajte na nejnižší intenzitě a výkon zvyšujte postupně.
- Stejnou oblast neošetřujte častěji než 2–3× týdně.
- Mezi jednotlivými ošetřeními ponechte pokožce alespoň 48 hodin na regeneraci.
- Pro dosažení dlouhodobých výsledků doporučujeme pravidelné používání v kombinaci se zdravým životním stylem, dostatečným pitným režimem a vhodnou péčí o pokožku.

Doporučení pro tento typ přístroje: Z pohledu uživatelského komfortu je jako univerzální vhodné používat především **Režim 2** (RF + EMS) jako hlavní ošetření a **Režim 1** nebo **Režim 3** zařazovat podle potřeby jako doplněk. Tento postup odpovídá tomu, jak jsou obdobné domácí estetické přístroje běžně používány.


TEST PLETI

Každý jsme originál. Existuje celá řada typů pleti. Přestože je používání přístroje naprosto bezpečné, je doporučeno provést test pleti, zda použití nevyvolá případné nežádoucí podráždění pleti či alergickou reakci.

1. Naneste na pleť tenkou vrstvičku vodivého gelu.
2. Ošetřete malou část pleti krouživými pohyby postupně střídáním technologií ultrazvukových vln, radiofrekvence a EMS v délce 3 minut.
3. Pokud se v průběhu 24 hodin na pleti neobjeví jakékoliv nestandardní zbarvení vlivem alergické reakce, přístroj můžete bez obav používat dle instrukcí v tomto návodu k obsluze.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Při používání vždy dbejte na to, aby byla aplikační plocha v plném rozsahu s pletí. V opačném případě nebude přístroj působit správně.

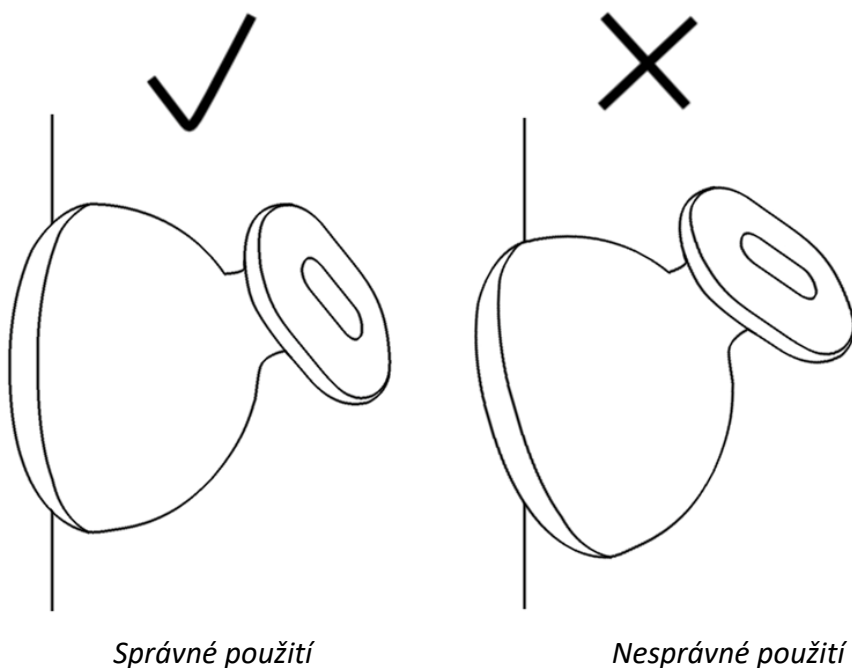

DOPORUČENÉ SMĚRY POHYBU PO PLETI

1. BŘICHO 	1 KROUŽIVÉ POHYBY ve směru hodinových ručiček 2 POSTUPUJTE SMĚREM od spodní části břicha směrem nahoru 3 POKRYJTE CELOU OBLAST ROVNOMĚRNĚ
3. PAS 	1 POHYBY SMĚREM VZHŮRU PODÉL LINIÍ PASU 2 POSTUPUJTE OD SPODNÍ ČÁSTI ZAD SMĚREM NAHORU 3 OPAKUJTE NA OBOU STRANÁCH
5. STEHNA – PŘEDNÍ ČÁST 	1 POMALÉ TAHY směrem vzhůru 2 POHYBUJTE OD KOLENE SMĚREM K TRÍSLOM 3 OPAKUJTE NA OBOU STEHNECH
7. PAŽE – VNITŘNÍ ČÁST 	1 POMALÉ TAHY směrem vzhůru 2 POHYBUJTE OD LOKTE SMĚREM K PODPAŽÍ 3 OPAKUJTE NA OBOU PAŽÍCH
9. LÝTKA 	1 POMALÉ TAHY směrem vzhůru 2 POHYBUJTE OD KOTNÍKU SMĚREM KE KOLENU 3 OPAKUJTE NA OBOU LÝTKÁCH
2. BOKY 	1 POMALÉ TAHY směrem vzhůru 2 POSTUPUJTE OD DOLNÍ ČÁSTI BOKŮ SMĚREM NAHORU 3 OPAKUJTE NA DRUHÉ STRANĚ
4. HÝŽDĚ 	1 KROUŽIVÉ POHYBY směrem vzhůru 2 POSTUPUJTE OD SPODNÍ ČÁSTI HÝŽDÍ SMĚREM NAHORU 3 OPAKUJTE NA OBOU STRANÁCH
6. STEHNA – ZADNÍ ČÁST 	1 POMALÉ TAHY směrem vzhůru 2 POHYBUJTE OD PODKOLENNÍ JAMKY SMĚREM K HÝŽDÍM 3 OPAKUJTE NA OBOU STEHNECH
8. PAŽE – VNĚJŠÍ ČÁST 	1 POMALÉ TAHY směrem vzhůru 2 POHYBUJTE OD LOKTE SMĚREM K RAMENI 3 OPAKUJTE NA OBOU PAŽÍCH
10. ZÁDA 	1 POHYBY SMĚREM VZHŮRU PODÉL PÁTEŘE 2 OD PÁTEŘE SMĚREM DO STRAN 3 POHYBUJTE POMALU A PLYNULE

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. K nabíjení používejte výhradně kabel a nabíjecí adaptér, které jsou součástí balení.

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel s adaptérem, které jsou součástí balení.
2. Druhý konec připojte do síťového adaptéru 220V.
3. Průběh nabíjení doprovází blikající světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie nabita, světelná signalizace přestane blikat.
5. Délka nabíjení závisí na stavu a kondici baterie.
6. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění aplikační hlavice je důležitou součástí správné údržby přístroje. Pomáhá zachovat optimální funkčnost jednotlivých technologií, prodlužuje životnost přístroje a přispívá k hygienickému používání.

Čištění po každém použití

Po dokončení ošetření postupujte následovně:

1. Vypněte přístroj.
2. Pokud byl přístroj používán, nechte aplikační hlavici několik minut vychladnout.
3. Měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou odstraňte zbytky vodivého gelu z aplikační hlavice.
4. Následně hlavici otřete měkkým hadříkem lehce navlhčeným čistou vodou.
5. Nakonec hlavici osušte suchým měkkým hadříkem bez vláken.

Před uložením přístroje musí být aplikační hlavice vždy čistá a suchá.

Dezinfekce

Pokud přístroj používá více osob nebo je vyžadována zvýšená úroveň hygieny, lze kovovou aplikační hlavici otřít měkkým hadříkem navlhčeným dezinfekčním prostředkem určeným pro čištění povrchů zdravotnických nebo kosmetických přístrojů.

Po dezinfekci nechte hlavici zcela oschnout.

Nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující agresivní rozpouštědla, aceton nebo chlor.

Čemu se vyhnout

Při čištění nikdy:

- neponořujte přístroj ani aplikační hlavici do vody,
- neoplachujte přístroj pod tekoucí vodou,
- nepoužívejte abrazivní houbičky nebo kartáče,
- nepoužívejte písky ani čisticí prášky,
- nepoužívejte technický benzín, aceton ani jiná organická rozpouštědla,
- nepoužívejte parní čističe ani vysokotlaké čisticí zařízení.

Tyto prostředky mohou poškodit povrch aplikační hlavice nebo elektronické součásti přístroje.

Pravidelná kontrola

Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat:

- čistotu aplikační hlavice,
- zda na hlavici nejsou praskliny nebo deformace,
- zda není poškozen kryt přístroje,
- stav nabíjecího konektoru,
- stav nabíjecího kabelu.

Zjistíte-li jakékoli poškození, přístroj dále nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis nebo svého prodejce.

Správné skladování

Po vyčištění uložte přístroj:

- na čisté a suché místo,
- mimo přímé sluneční záření,
- mimo dosah zdrojů tepla,
- při pokojové teplotě,
- mimo dosah dětí.

Přístroj doporučujeme skladovat v originálním obalu nebo v ochranném pouzdře, aby byla aplikační hlavice chráněna před mechanickým poškozením a prachem.

Doporučení pro dlouhou životnost

- Po každém použití vždy odstraňte zbytky vodivého gelu.
- Nepoužívejte přístroj se znečištěnou hlavicí.
- Zabraňte pádu přístroje na tvrdý povrch.
- Nevystavujte přístroj dlouhodobě vysokým teplotám ani vlhkému prostředí.
- Nabíjejte přístroj pouze doporučeným napájecím adaptérem (5 V / 1 A).
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme akumulátor přibližně každé 3 měsíce dobít, aby byla zachována jeho optimální životnost.

Dodržováním těchto doporučení přispějete k bezpečnému provozu přístroje a zachování jeho spolehlivé funkce po dlouhou dobu.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. K čemu je přístroj určen?

Přístroj je určen pro domácí estetickou péči o vybrané části těla. Kombinuje technologii radiofrekvence (RF), EMS mikroproudů, ultrazvuku, vibrační masáže a LED světelné terapie pro podporu vzhledu pokožky a zvýšení komfortu při pravidelné péči.

2. Jaké části těla mohu ošetřovat?

Přístroj je vhodný zejména pro:

- břicho,
- pas,
- boky,
- hýždě,
- stehna,
- paže,
- lýtka,
- záda.

Nepoužívejte jej na obličej, krk, oblast štítné žlázy, oční okolí ani na sliznice.

3. Jak často mohu přístroj používat?

Doporučujeme používat přístroj **2–3× týdně**. Stejnou oblast neošetřujte častěji než jednou za **48 hodin**, aby měla pokožka dostatek času na regeneraci.

4. Jak dlouho mám ošetřovat jednu oblast?

Doporučená doba ošetření je **20 minut na jednu oblast**.

5. Musím používat vodivý gel?

Ano. Vodivý gel je nezbytný pro správnou funkci přístroje. Zajišťuje optimální kontakt mezi aplikační hlavicí a pokožkou a podporuje účinný přenos energie.

6. Mohu místo vodivého gelu použít tělový krém nebo olej?

Ne. Běžné krémy ani oleje nejsou vhodnou náhradou. Doporučujeme používat pouze vodivé gely určené pro ultrazvukové, radiofrekvenční nebo EMS kosmetické přístroje.

7. Jaký režim mám použít jako první?

Při prvním použití doporučujeme zvolit **Režim 1** a nejnižší intenzitu. Jakmile si na používání přístroje zvyknete, můžete postupně využívat i ostatní režimy.

8. Co znamenají jednotlivé režimy?

- **Režim 1** – Ultrazvuk + vibrace + modré LED světlo.
- **Režim 2** – RF + EMS + vibrace + červené LED světlo.
- **Režim 3** – RF + EMS + ultrazvuk + vibrace + fialové LED světlo.

Každý režim kombinuje různé technologie pro odlišný typ kosmetické péče.

9. Jakou intenzitu zvolit?

Začněte vždy na **1. stupni**. Jakmile si pokožka na ošetření zvykne, můžete intenzitu postupně zvýšit podle vlastní snášenlivosti.

10. Je normální, že cítím teplo nebo jemné brnění?

Ano. Během používání můžete pociťovat:

- mírné zahřátí pokožky,
- jemné vibrace,
- lehké brnění,
- svalové impulzy při režimech s EMS.

Jedná se o běžný projev správně fungujícího přístroje.

11. Mohu přístroj používat každý den?

Nedoporučuje se. Pokožka potřebuje čas na regeneraci. Pravidelné používání 2–3× týdně je zpravidla dostačující.

12. Mohu přístroj používat během nabíjení?

Ne. Přístroj během nabíjení nikdy nepoužívejte. Před použitím jej vždy odpojte od nabíječky.

13. Jak poznám, že je baterie nabitá?

Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení. Po úplném nabíjení blikání ustane. Délka nabíjení vždy záleží na stavu a kondici baterie.

14. Jak správně vést aplikační hlavici?

Po celou dobu ošetření hlavici plynule posouvejte po pokožce pomalými krouživými nebo plynulými tahy. Nepřidržíte ji na jednom místě déle než několik sekund.

15. Je normální zarudnutí pokožky po ošetření?

Ano. Mírné zarudnutí nebo pocit tepla mohou být přirozenou reakcí pokožky na zvýšené prokrvení a obvykle během krátké doby odezní.

16. Jak přístroj čistit?

Po každém použití:

- vypněte přístroj,
- odstraňte zbytky gelu,
- hlavici otřete měkkým vlhkým hadříkem,
- osušte ji měkkým hadříkem.

Přístroj nikdy neponořujte do vody.

17. Mohu přístroj používat, pokud mám citlivou pokožku?

Ano, pokud nemáte žádnou z uvedených kontraindikací. Doporučujeme začít na nejnižší intenzitě a před prvním použitím provést krátké ošetření na menší ploše pokožky.

18. Kdo by přístroj neměl používat?

Přístroj není vhodný pro osoby:

- s kardiostimulátorem nebo jiným implantovaným elektronickým zařízením,
- během těhotenství,
- s aktivním nádorovým onemocněním,
- s epilepsií,
- s otevřenými ranami nebo aktivním kožním onemocněním v místě ošetření.

V případě pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.

19. Jak dosáhnou nejlepších výsledků?

Pro dosažení co nejlepšího efektu doporučujeme:

- používat přístroj pravidelně,
- vždy používat vodivý gel,
- dodržovat doporučenou dobu ošetření,
- po každém použití pokožku hydratovat,
- dbát na dostatečný pitný režim,
- kombinovat používání přístroje se zdravým životním stylem.

20. Nahrazuje přístroj odbornou kosmetickou nebo lékařskou péčí?

Ne. Přístroj je určen pro domácí kosmetickou péči o pokožku těla. Nejedná se o zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění. Slouží jako doplněk pravidelné péče o pokožku a zdravého životního stylu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Masážní přístroj na formování postavy

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax Celluform Smart BR-1940**

EAN 8594166118683

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013

EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015

Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného onemocnění.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.6.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Hrbek', is written over a dotted line.

Martin Hrbek, obchodní ředitel