

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na formování postavy
BeautyRelax BR-3080

PULSEMAX HEAT PROFESSIONAL



OBSAH:

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX	4
UPOZORNĚNÍ	5
KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT	6
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ	7
VAROVÁNÍ	8
POUŽITÍ SONOGELU	8
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	9
DŮLEŽITÉ POKYNY	9
ZAKÁZANÉ UMÍSTĚNÍ ELEKTROD	9
UPOZORNĚNÍ	10
DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ	10
STIMULACE SVALŮ POMOCÍ EMS PULZŮ	12
TECHNICKÉ PARAMETRY	13
OBSAH BALENÍ	13
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	14
POPIS PŘÍSTROJE	15
MOŽNOSTI APLIKACE EMS ELEKTROD	16
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	24
DOPORUČENÝ PLÁN POUŽITÍ	26
ŽIVOTNOST A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	27
ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU	27
ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	28
INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA	29
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	30
CERTIFIKACE	30
EU DISTRIBUTOR	30
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	31

VÍTEJTE VE SVĚTĚ BEAUTYRELAX

BeautyRelax – Špičková technologie krásy pro domácí i profesionální použití

Vítejte ve světě profesionální estetiky v pohodlí domova! BeautyRelax je ryze česká značka, která od roku 2010 přináší inovativní přístroje pro péči o pleť, tělo a vlasy. Naše zařízení kombinují nejmodernější technologie s jednoduchým ovládáním, takže si můžete dopřát salonní péči bez nutnosti návštěvy kosmetického studia.



Proč si vybrat BeautyRelax?

Vysoká účinnost – Používáme stejné technologie jako profesionální salony (radiofrekvence, ultrazvuk, IPL, galvanický proud).

Univerzální použití – Vhodné pro domácí i komerční využití.

Odborné poradenství – Pomůžeme vám vybrat ideální přístroj na míru vašim potřebám.

Nadstandardní služby – Rychlé doručení, záruční a pozáruční servis.

Naše kategorie přístrojů

Kosmetické přístroje – Pro dokonalou pleť bez vrásek, akné nebo pigmentace.

Přístroje na formování postavy – Redukce celulitidy, lifting a modelace kontur.

Masážní technologie – Lymfatické masáže, relaxace a regenerace svalů.

IPL depilace – Trvalé odstranění chloupků šetrnou cestou.

Salonní péče v domácích podmínkách

Díky pokrokům v estetických technologiích si nyní můžete dopřát stejně účinná aplikace jako v kosmetickém studiu – bez bolestivých zákroků a dlouhého čekání. Ať už řešíte:

- Vrásky, povadlou pleť nebo nedostatek elasticity
- Celulitidu, ochablé kontury nebo otoky
- Nechtěné chloupky nebo problematickou pokožku

S BeautyRelax dosáhnete viditelných výsledků šetrně, bezpečně a bez nepříjemných pocitů.

Vize zakladatele

„Od začátku naší cesty je naší prioritou zpřístupnit špičkové estetické technologie každému. Ať už hledáte přístroj pro osobní péči, nebo profesionální studio, nabízíme řešení s vysokou užitnou hodnotou, dlouhou životností a rychlou návratností investice.“

Martin Hrbek, zakladatel a odborný konzultant BeautyRelax

Ušetřete čas i peníze

Pravidelným používáním přístrojů BeautyRelax můžete výrazně snížit náklady na kosmetické procedury a zároveň mít svou péči plně pod kontrolou.

- Výsledky bez bolesti a zbytečného stresu
- Šetrná neinvazivní řešení pro všechny typy pleti
- Vybírejte z desítek modelů pro různé potřeby

Objevte kouzlo moderní estetiky a vyberte si svůj ideální přístroj v naší kompletní nabídce. Těšíme se, že s námi budete sdílet vášně pro krásu a inovace!



(+420) 737 196 160
mh@santadria.cz
shop.beautyrelax.cz
www.beautyrelax.cz
facebook.com/BeautyRelaxEquipment

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

MARTIN HRBEK odborný konzultant a školitel
SANTADRIA s.r.o. Mojžírovo nám. 75/2 Brno 62100 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k použití, seznamte se se všemi vyobrazeními a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud trpíte závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Nejste-li si jisti svým aktuálním zdravotním stavem, konzultujte první použití s praktickým lékařem nebo odborníkem.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozený, nefunguje správně nebo pokud spadl do vody.
- V případě poškození přístroje se nedotýkejte jeho vnitřních částí, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud přístroj spadne na zem, může dojít k jeho skrytému poškození. V takovém případě jej dále nepoužívejte a obraťte se na servisní oddělení prodejce.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna, vana, sprcha, bazén apod.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořen do vody ani vystaven proudu tekoucí vody.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Po každém použití jej vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do teplého prostředí, vyčkejte před jeho použitím alespoň 3 hodiny, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti.
- Přístroj není určen k používání dětmi ani osobami, jejichž fyzický nebo duševní stav neumožňuje bezpečné ovládání spotřebiče bez dozoru.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla (radiátor, kamna, otevřený oheň apod.).
- Nepokoušejte se přístroj sami rozmontovat, upravovat nebo opravovat. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Přístroj skladujte v suchém, čistém prostředí a chraňte jej před prachem.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani extrémním teplotám.
- Distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním přístroje v rozporu s tímto návodem k použití ani za následky nedodržení uvedených bezpečnostních pokynů.
- Za škody na zdraví či majetku vzniklé jiným než určeným způsobem použití nenese distributor odpovědnost.



KDY PŘÍSTROJ NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- **Použití v oblasti srdce nebo hlavy** – EMS elektrody **nesmí** být umístovány nad srdcem ani na hlavě.
- Z návodu k obsluze vyplývá, že je důležité přístroj používat přesně podle pokynů a umísťovat elektrody jen na povolené partie těla.



Obecné kontraindikace u EMS / elektrické svalové stimulace

1. **Implantované elektronické zdravotnické přístroje** – např. **kardiostimulátor (pacemaker), ICD, neurostimulační zařízení** – EMS stimulace může ovlivnit jejich fungování.
2. **Těhotenství** – zvláště v oblasti břicha a pánve se EMS nedoporučuje bez lékařského dohledu.
3. **Epilepsie / neurologické poruchy** – riziko spouštění záchvatů nebo nežádoucích reakcí.
4. **Akutní zánět nebo infekce v oblasti použití** – např. aktivní zánět, otevřené rány, silné zarudnutí, popáleniny.
5. **Těžká kardiovaskulární onemocnění / neovladatelná hypertenze** – zhoršení stavu při stimulaci svalů může být rizikové.
6. **Hluboká žilní trombóza nebo aktivní flebitida** – stimulace by mohla zvýšit riziko uvolnění trombu.
7. **Malignity / tumory v místě použití** – zvyšování metabolismu či cirkulace může být teoreticky nežádoucí.
8. **Těžké cukrovka s komplikacemi / špatná cirkulace** – může ovlivnit bezpečnost EMS.
9. **Břichová nebo tříselná kýla** – tlak a kontrakce mohou zhoršit stav.
10. **Kožní onemocnění a poškozená kůže v místě použití** – dráždivost, záněty, ekzémy, poranění atd.

Ostatní obecná bezpečnostní upozornění


- Nepoužívat přístroj, pokud je poškozený nebo byl vystaven vlhkosti.
- Nepoužívat během nemoci s vysokou horečkou.
- Nepoužívat v mokřem prostředí (koupelna apod.).

Doporučení

- Pokud máte **zdravotní potíže nebo zdravotní diagnózu**, poraďte se před použitím se **svým lékařem**, fyzioterapeutem nebo jiným odborníkem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Přístroj BeautyRelax je možné používat pouze v oblasti hýždí. Je striktně zakázáno používat přístroj v oblasti srdce!

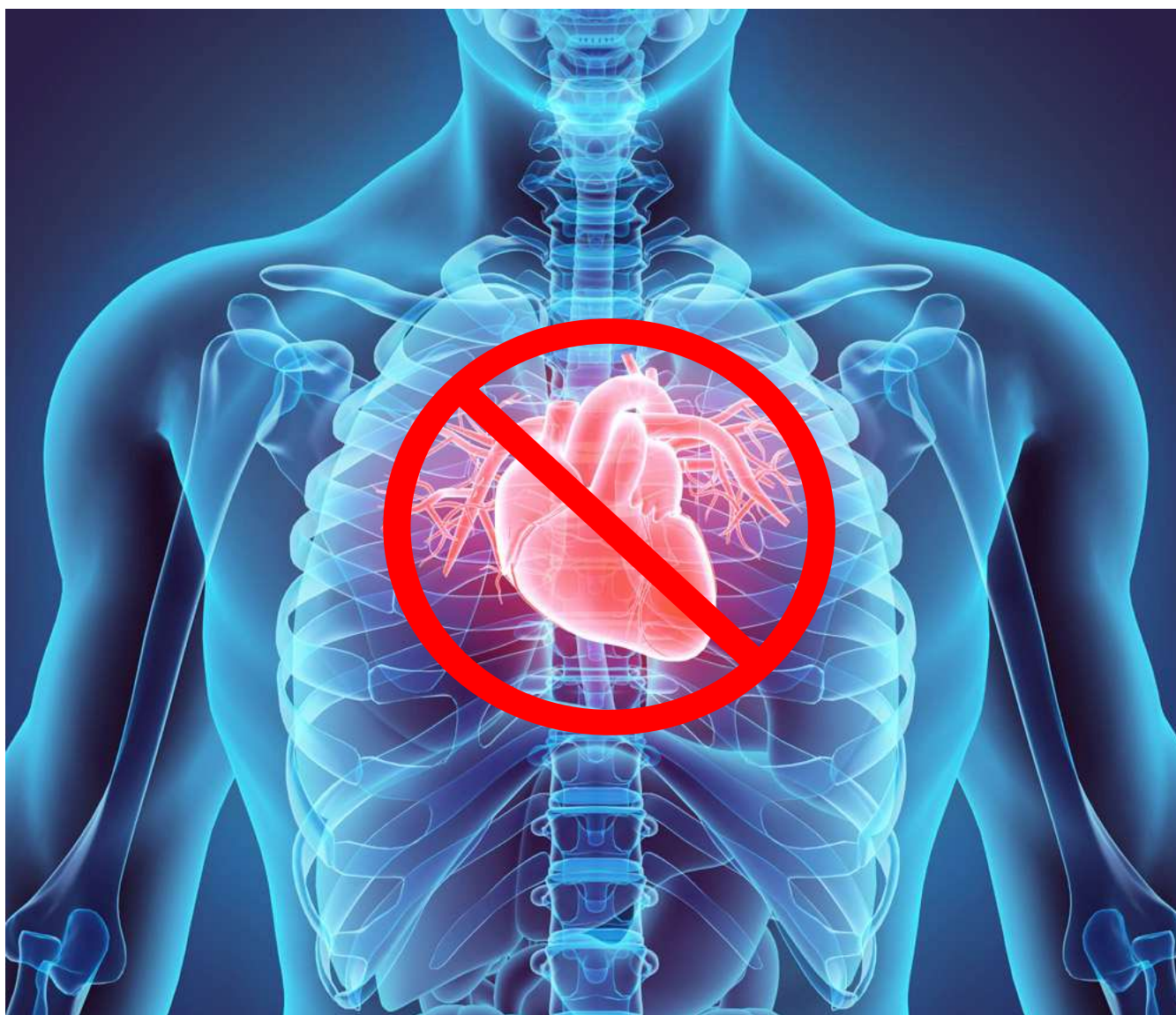

VAROVÁNÍ

1. Pás **nepoužívejte v blízkosti srdce**.
2. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.
3. Přístroj je určen pouze k vnějšímu použití.
4. Přístroj mohou používat pouze osoby starší 16 let.

Velmi pečlivě dbejte o úroveň intenzity elektrických impulzů pro jednotlivé oblasti těla. Vždy začněte od nejnižší hodnoty, tj. od hodnoty 1. Intenzitu masáže zvyšujte pomalu a POSTUPNĚ! Pokud budete cítit, že vám aktuálně nastavená intenzita není příjemná, snižte ji nebo přístroj vypněte!

POUŽITÍ SONOGELU

Je doporučeno používat přístroj v kombinaci s vodivým gelem. Kontaktní gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakémkoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i v lékárně). Ideálně bez přidaných látek. Na značce nezáleží. Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří pojivou vrstvu mezi aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže aplikační hlavici přístroje poškodit. Užití kontaktního gelu je nezbytné. Technologie EMS pulzů se tak mohou na pleť lépe navázat.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazníku, ochrana vašeho zdraví je pro nás při používání přístrojů z naší nabídky na prvním místě. Proto jsme vám uvedli podrobný seznam případů, za kterých by přístroj neměl být používán. Berte prosím na vědomí, že se jedná o případy, které jsou v závažném a pokročilém stavu. Pokud jste aktivní člověk, který nemá od svého lékaře žádné přímo zakázané pohybové aktivity, přístroj používat můžete.

Rozhodně doporučujeme, aby u vás byla v průběhu používání přístroje přítomna druhá dospělá osoba. Pokud by se vám v jakýkoliv okamžik použití přístroje udělalo nevolno, pomůže vám okamžitě odstranit aplikační elektrody z těla. Pokud začnete v průběhu požití přístroje vnímat jakékoliv nestandardní pocity - výrazné bušení srdce, pot na čele, nevolnost, motolici, cítíte byste pocity žízně nebo byste cítili, že je intenzita EMS masáže příliš silná, použití přístroje okamžitě ukončete a ve spolupráci s druhou osobou odstraňte aplikační elektrody pryč z těla.


Z použití přístroje nemějte žádné obavy. Jeho konstrukce a vlastnosti jsou navrženy za účelem formování postavy, redukce celulitidy a zlepšení tonusu pleti.

DŮLEŽITÉ POKYNY

1. Je zakázáno umísťovat elektrodu na oblast srdce, krku, hlavy, do oblasti genitálií. Elektrody nepoužívejte na oblast, které trpí kožními chorobami nebo odřeninami.
2. Přístroj se nesmí používat v kombinaci s jinými lékařskými přístroji. Před používáním nepoužívejte krémy nebo spreje. Mohlo by dojít k poškození pokožky.
3. Přístroj používejte podle přesně daných pokynů v tomto návodu. Přístroj se nesmí používat k jiným účelům než tlumení svalové bolesti, napětí a posilování svalů.
4. Elektrody, které jsou součástí balení, nepřipojujte do jiného zařízení nebo dokonce zdroje elektrického proudu 220V. Jsou určeny výhradně k připojení do zdířky přístroje.

ZAKÁZANÉ UMÍSTĚNÍ ELEKTROD

Gelové elektrody nikdy nenalepujte na tělo ve výše zobrazených kombinacích. Elektrické impulzy by proudily přímo přes srdce, což je striktně zakázáno!

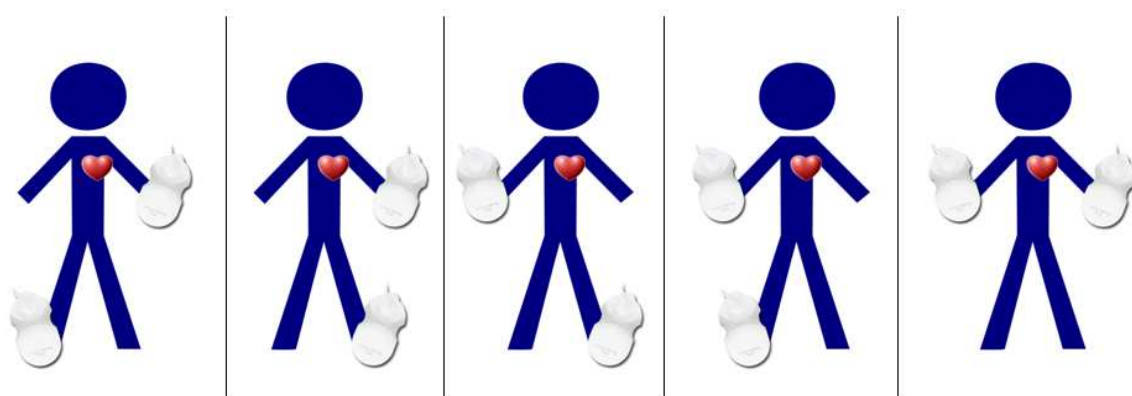

UPOZORNĚNÍ

1. Pokud se necítíte při používání přístroje dobře nebo se vyskytnou nečekané zdravotní komplikace, činnost přístroje okamžitě vypněte.
2. Pokud chcete elektrodu umístit na jinou část těla, nejprve činnost přístroje vypněte. Poté můžete bezpečně elektrodu přesunout a přístroj znovu zapnout.
3. Vzhledem k zajištění maximální účinnosti přístroje vypněte veškerá elektronická zařízení, která případně používáte (MP3 přehrávač, mobilní telefon při telefonování).
4. Přístroj se nesmí používat ve spánku, kdy nejste schopni mít přístroj plně pod kontrolou. Mohlo by dojít k vážnému zranění.
5. Elektrodu nepoužívejte na jednom místě déle než 40 minut.
6. Dbejte na to, aby se během používání elektroda nedostala do kontaktu s kovovými vodivými předměty (řetízky, náramky, prsteny, ...)



DŮLEŽITÉ RADY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Přístroj používejte výhradně za přítomnosti další dospělé osoby. V případě potřeby vám tato osoba pomůže s aplikací elektrod i jejich bezpečným odstraněním. Používání přístroje bez přítomnosti druhé osoby je striktně zakázáno.
- Pokud se během používání nebudete cítit komfortně, objeví se výrazné zrychlení dýchání, silné bušení srdce, pocity úzkosti nebo jiný nepříjemný stav, okamžitě přerušete použití. Požádejte přítomnou osobu, aby přístroj vypnula a elektrody odstranila z těla.
- Elektrody pomocí upevňovacích pásek neutahujte příliš pevně. Upevnění má být pohodlné, bez omezení krevního oběhu, přičemž celá aktivní plocha elektrody musí plynule přiléhat k vybrané tělesné partii.
- První použití vždy zahajujte na nejnižší úrovni intenzity. Intenzitu zvyšujte pouze velmi pozvolna a s ohledem na vlastní pocity.
- Pokud je stimulace nepříjemná nebo bolestivá i při nejnižší úrovni EMS pulzů, použití přístroje okamžitě ukončete.
- Maximální celková doba používání přístroje by neměla přesáhnout 40 minut během jednoho dne. Pečlivě zvažte četnost a intenzitu používání.
- Doporučené možnosti použití: 1× týdně s vyšší intenzitou, nebo 2–3× týdně s nižší intenzitou EMS pulzů.
- Tato doporučení platí zejména při opakovaném použití na stejné tělesné partii.

- Četnost používání přizpůsobte zvolené intenzitě, svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a míře fyzické aktivity. Nadměrné používání může být kontraproduktivní. Každodenní používání se nedoporučuje.
- Přístroj nikdy nepoužívejte ve stoje ani vsedě. Vždy je nutné zaujmout vodorovnou (horizontální) polohu – například vleže na posteli, pohovce nebo lehátku.
- Pokud se v daný den necítíte zdravotně v pořádku, použití přístroje odložte.
- Přístroj BeautyRelax není zdravotnickým prostředkem a nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Neslouží k léčbě onemocnění indikovaných lékařem. Patří do kategorie masážních přístrojů určených ke sportovní a rekondiční masáži, a to pouze při dodržení podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze.

STIMULACE SVALŮ POMOCÍ EMS PULZŮ

Elektrická stimulace svalů (EMS) je technologie, která používá elektrické impulsy k vyvolání svalové kontrakce. Tato metoda se často používá pro rehabilitaci, posilování svalů, zlepšení sportovního výkonu a kosmetické účely, jako je formování postavy.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ EMS

Generování elektrických impulsů:

Přístroj EMS generuje elektrické impulsy, které jsou přenášeny do těla prostřednictvím elektrod umístěných na kůži nad cílovými svaly.

Přenos impulsů:

Elektrické impulsy se šíří přes kůži a podkožní tkáň do nervových vláken, která inervují svaly.

Svalová kontrakce:

Elektrické impulsy stimulují motorické nervy, což vede k nedobrovolné kontrakci svalových vláken, podobně jako při přirozené svalové činnosti.

Různé frekvence a intenzity:

Pomocí EMS přístroje můžete nastavit různé frekvence a intenzity impulsů, aby cíleně stimulovaly různé typy svalových vláken (rychlá, pomalá) a přizpůsobily se různým účelům (posilování, rehabilitace, relaxace).

HLAVNÍ VÝHODY EMS

Posilování svalů:

EMS je účinné pro posilování svalů, zejména u lidí s omezenou schopností provádět fyzické cvičení.

Rehabilitace:

Pomáhá při rehabilitaci po zraněních, operacích nebo při neurologických poruchách, kdy je nutné znovu aktivovat a posílit svaly.

Zlepšení krevního oběhu:

EMS zlepšuje krevní oběh v stimulovaných oblastech, což podporuje regeneraci tkání a snižuje svalovou únavu.

Redukce bolesti:

Elektrické impulsy mohou pomoci při úlevě od bolesti, zlepšení flexibility a snížení svalového napětí.

Kosmetické účely:

Používá se k formování postavy, redukci celulitidy a zlepšení tonusu kůže.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Model: BeautyRelax BR-3080
- Obchodní název: BeautyRelax Pulsemax Heat Professional
- Napájení: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Typ napájení: síťový adaptér
- Příkon: max. 300 W
- Třída ochrany: II
- Počet kanálů: 10
- Počet elektrod: 22
- Rozsah nastavení času: 0–90 minut
- Doporučená maximální doba použití: 40 minut / den
- Rozsah intenzity EMS: 0–270 stupňů
- Frekvence EMS pulzů: 25 Hz – 800 Hz
- Masážní programy: 4 (F1–F4)
- Vyhřívání: ano
- Rozsah teploty vyhřívání: 0 °C – 60 °C
- Provozní teplota: +10 °C až +35 °C
- Skladovací teplota: 0 °C až +50 °C
- Maximální relativní vlhkost: 80 % bez kondenzace
- Rozměry přístroje: 40 × 27 × 13 cm
- Hmotnost: cca 9 kg

OBSAH BALENÍ

- 1x Hlavní jednotka BeautyRelax BR-3080
- 20x Aplikační hlavice na tělo
- 2x Aplikační hlavice na prsní svaly
- 1x Kovový kufřík
- 1x Sonogel 250ml
- 1x Napájecí kabel 220V
- 1x Sada elastických popruhů pro uchycení aplikačních hlavic
- 1x Návod k obsluze


PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Pulsemax Heat Professional je moderní masážní přístroj určený k formování postavy a svalové relaxaci. Kombinuje technologii EMS (elektrická svalová stimulace) s integrovaným vyhříváním, čímž poskytuje intenzivní a zároveň komfortní masážní zážitek. Elektrická svalová stimulace (EMS) je metoda využívající jemné elektrické impulzy k aktivaci svalových kontrakcí. Elektrody jsou umístěny na pokožku nad cílovou svalovou skupinou, kam přenášejí řízené elektrické signály. Tyto impulzy napodobují přirozenou svalovou aktivitu, což vede ke střídavému stahování a uvolňování svalů podle zvoleného programu a intenzity. Výsledkem je efektivní svalová stimulace, podpora prokrvení a uvolnění svalového napětí. Díky 22 aplikačním hlavicím umožňuje přístroj cílené použití na různé partie těla. Vestavěný časovač zajišťuje pohodlné a bezpečné používání bez nutnosti neustálé kontroly. K dispozici jsou 3 masážní programy a plynulé nastavení intenzity, takže si masáž snadno přizpůsobíte svým potřebám i aktuální kondici. Součástí přístroje je také funkce vyhřívání s nastavitelným rozsahem teploty od 0 °C do 60 °C, která podporuje uvolnění svalů, zvyšuje komfort při používání a přispívá k celkovému regeneračnímu účinku masáže.



POPIS PŘÍSTROJE

1. Displej pro zobrazení času
2. Tlačítka pro zvýšení/snížení času
3. Světelná indikace aktivace funkce EMS
4. Tlačítko **POWER**
5. Tlačítko **SPEED**
6. Světelná indikace rychlosti masáže S (slow), M (medium), F (fast)
7. Světelná indikace masážního programu (F1, F2, F3, F4)
8. Tlačítko **SELECT**
9. Tlačítko **AUTO**
10. Tlačítko pro nastavení teploty
11. Světelná indikace činnosti jednotlivých kanálů (CH1 - CH10)
12. Tlačítka pro nastavení intenzity EMS pro jednotlivé kanály
13. Zdířky pro zapojení konektorů jednotlivých kanálů

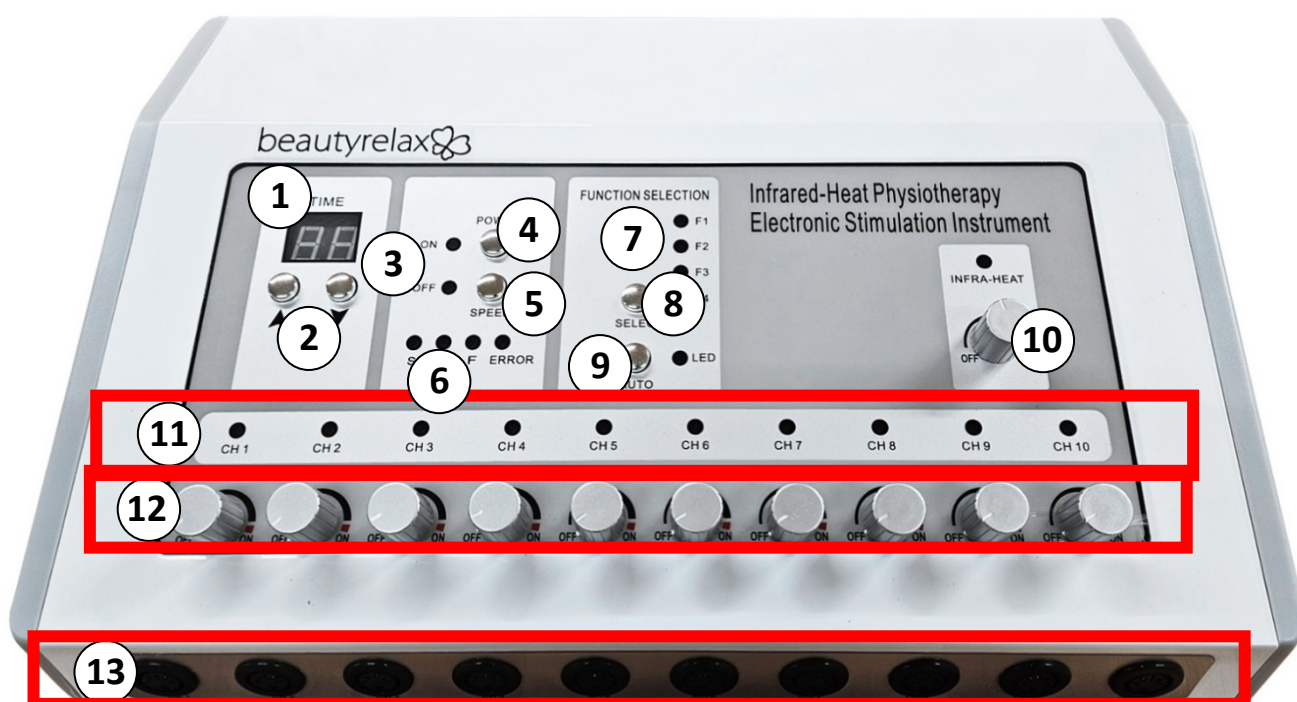

MOŽNOSTI APLIKACE EMS ELEKTROD

















**JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT EMS
ELEKTRODY V OBLASTI SRDCE NEBO HLAVY.**

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte hlavní jednotku pomocí napájecího kabelu do elektrické zásuvky. Umístěte ji tak, aby napájecí kabel nebyl nadměrně napnutý. V případě potřeby použijte prodlužovací kabel.
2. Během používání přístroj **nikdy nezakrývejte**. V oblasti hlavní jednotky musí být zajištěna volná cirkulace vzduchu, aby nedošlo k přehřátí.
3. Zkontrolujte, že je hlavní konektor pevně zapojen do hlavní jednotky. Ověřte také, že jsou všechny kabely a případné vyhřívací hadice správně a zcela zasunuty. Všechny konektory musí být připojeny nadoraz.
4. Kabely připojené k čelní straně hlavní jednotky nesmí být napnuté. Umístěte hlavní jednotku co nejbližší k tělu uživatele tak, aby nedocházelo k jejich nechtěnému odpojení tahem.
5. Aplikujte masážní elektrody na tělo uživatele. Po celou dobu je nutná přítomnost druhé dospělé osoby, která pomůže s aplikací elektrod, nastavením a změnou parametrů masáže a následně s jejich odstraněním.
6. Pokud uživatel přístroj tohoto typu používá poprvé, začněte vždy pouze s **menším počtem elektrod** a ošetřujte jen jednu partii těla. Při každém rozhodnutí přidat další elektrody **přístroj nejprve vypněte**.
7. Během používání doporučujeme průběžně kontrolovat, zda jsou elektrody v plném kontaktu s pokožkou.
8. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **POWER**.
9. Pomocí ovládacího panelu nastavte požadované parametry masáže – dobu masáže, intenzitu, rychlost EMS pulzů a úroveň vyhřívání.
10. Pomocí ovládacích šipek nastavte požadovaný čas použití přístroje.
11. Zapnutý stav přístroje je indikován světelnou kontrolkou **ON**.
12. Pomocí tlačítka **SPEED** nastavíte rychlost působení EMS pulzů:
 - S (Slow – pomalu)
 - M (Medium – středně)
 - F (Fast – rychle)Zvolená rychlost je zobrazena světelnou signalizací.

-
- 13.** Tlačítkem **SELECT** můžete zvolit jeden ze čtyř masážních programů **F1, F2, F3, F4**. Každý program má přednastavené schéma EMS pulzů. Vyberte program, který je vám nejpříjemnější.
 - 14.** Pomocí tlačítka **AUTO** se masážní programy střídají automaticky.
 - 15.** Otočným ovladačem **INFRA-HEAT** nastavíte úroveň vyhřívání elektrod.
 - 16.** Přístroj je vybaven **10 kanály (CH1–CH10)**. Ke každému kanálu lze připojit dvě elektrody – elektrody se vždy používají **v páru**. Aktivujte pouze ty kanály, které skutečně používáte. Aktivní kanály jsou indikovány světelnou signalizací.
 - 17.** EMS elektrody lze používat na oblasti paží, pasu, břicha, stehů a lýtek.
 - 18.** Je **přísně zakázáno** používat elektrody v oblasti srdce, krku a hlavy.
 - 19.** Pod každou elektrodu vždy naneste malé množství kontaktního gelu pro zajištění správné vodivosti.
 - 20.** Po uplynutí nastaveného času se činnost přístroje automaticky ukončí. Masáž lze kdykoliv přerušit také otočením ovladače příslušného kanálu (CH1–CH10) do nulové polohy.
 - 21.** Přístroj vypnete stisknutím tlačítka **POWER**.
 - 22.** Po použití se může v místě aplikace elektrod objevit mírné zarudnutí pokožky. Tento jev je běžný a obvykle vymizí během několika hodin.
 - 23.** Pro prodloužení životnosti přístroje doporučujeme po ukončení masáže ponechat přístroj v pohotovostním režimu alespoň **5 minut**, aby mohlo dojít k dostatečnému ochlazení elektronických součástí.
-

DOPORUČENÝ PLÁN POUŽITÍ

ZAČÁTEČNÍCI

- 1–2× týdně
- Nízká intenzita EMS
- Kratší doba (15–25 minut)

POKROČILÍ UŽIVATELÉ

- 2–3× týdně
- Střední intenzita EMS
- Doba použití 25–40 minut

REGENERACE PO SPORTU

- Nízká až střední intenzita
- Důraz na vyhřívání
- 20–30 minut

FORMOVÁNÍ POSTAVY

- Střední intenzita
- Pravidelnost
- Max. 40 minut / den

Doporučení:

Mezi jednotlivými aplikacemi na stejnou partii dodržujte minimálně 48 hodin pauzu.

ŽIVOTNOST A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

- Elektrody jsou spotřebním materiálem.
- Jejich životnost závisí na četnosti používání, hygieně a skladování.
- Při snížené poškození povrchu nebo zhoršené přilnavosti elektrody vyměňte.
- Používejte výhradně originální nebo kompatibilní elektrody doporučené prodejcem.

ČIŠTĚNÍ - ÚDRŽBA - HYGIENA PROVOZU

Pravidelná a správná údržba přístroje je velmi důležitá, zejména v případech, kdy je přístroj používán více osobami. Dodržováním níže uvedených pokynů zajistíte hygienický provoz, bezpečné používání a dlouhou životnost přístroje.

- Po každém použití důkladně odstraňte zbytky kontaktního (sono) gelu z povrchu elektrod.
- Doporučuje se po každém použití otřít elektrody měkkým hadříkem lehce navlhčeným čisticím roztokem na bázi alkoholu. Po vyčištění elektrody vždy pečlivě osušte.
- K čištění nepoužívejte agresivní, abrazivní ani chemicky silné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch přístroje nebo elektrod.
- Zabraňte proniknutí vlhkosti do hlavní jednotky. Vlhkost **nikdy nesmí** vniknout do vnitřních částí přístroje.
- Žádná část přístroje není určena k praní v pračce ani k jinému strojnímu čištění.
- Přístroj ani žádnou jeho část **nikdy neponořujte do vody** ani jiných kapalin.

ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

PŘÍSTROJ SE NEZAPNE

- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a zásuvky.
- Ověřte, že je stisknuto tlačítko POWER.
- Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.

EMS PULZY NEJSOU CÍTIT

- Zkontrolujte, zda jsou elektrody správně připojeny a aktivní kanál je zapnutý.
- Zvyšte intenzitu EMS.
- Ujistěte se, že byl použit dostatek kontaktního gelu.
- Ověřte, že je kabel pevně připojen k elektrodě.

ELEKTRODY ŠPATNĚ VODÍ

- Zkontrolujte čistotu pokožky a elektrod.
- Použijte nový kontaktní gel.
- V případě opotřebení elektrody vyměňte.

VYHŘÍVÁNÍ NEFUNGUJE

- Ověřte, že je funkce TEPLO aktivována.
- Vyčkejte několik minut – zahřívání má pozvolný náběh.

PŘÍSTROJ SE BĚHEM POUŽITÍ VYPNE

- Může dojít k automatické ochraně proti přehřátí.
- Nechte přístroj vychladnout minimálně 10 minut.

INFORMAČNÍ A SERVISNÍ PODPORA

V průběhu používání přístroje můžete narazit na situaci, kdy budete potřebovat poradit ohledně používání přístroje nebo technického problému. Neváhejte se na nás obrátit. Jsme vám plně k dispozici.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160



737 196 160

mh@santadria.cz

shop.beautyrelax.cz

www.beautyrelax.cz

facebook.com/BeautyRelaxEquipment



Martin Hrbek
odborný konzultant

prodej | servis | poradenství | konzultace | školení

SANTADRIA s.r.o. Mojmírovo nám. 75/2 Brno 61200 Brno 61200 IČO: 29195454 DIČ: CZ29195454

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj

BEAUTYRELAX PULSEMAX HEAT PROFESSIONAL

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3080**

EAN: **8594166123809**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 EN 6100-3-3:2013+A1:2019

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Slouží pro sportovní rekondiční masáž za účelem uvolnění svalů na vybraných částech těla.

Přístroj spadá do kategorie masážních přístrojů - TARIC 90191010

Při komerčním použití je třeba klást důraz na hygienu provozu přístroje.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno

Dne: 1.3.2024

.....
Martin Hrbek, jednatel