

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj hlavy

BeautyRelax BR-2797

Headrelax Air



OBSAH:

| | |
|--------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ | 4 |
| ÚČEL POUŽITÍ | 5 |
| HLAVNÍ VÝHODY | 6 |
| POPIS PRODUKTU | 7 |
| POPIS OVLADAČE | 8 |
| POUŽITÍ PRODUKTU | 9 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 16 |
| NABÍJENÍ BATERIE | 17 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ | 17 |
| ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ | 18 |

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj Headrelax Air je určen pro příjemnou relaxaci hlavy. Jediný přístroj svého druhu na trhu. Nabízí účinnou kompresní vzduchovou masáž pro postupné snížení bolesti hlavy. Jemná, ale vysoce účinná metoda vzduchové komprese. Odbourává napětí z oblasti spánků. Potlačení nepříjemného pocitu pulzování při bolestech hlavy. Nabízí 3 automatické masážní programy a 3 úrovně působení tepla. Snadné nastavení funkcí pomocí dálkového ovladače. Bezdrátové použití díky nabíjecí li-ion baterii. Napomáhá při chronických migrénách. Dopřejte své hlavě relaxaci pro psychickou pohodu.




HLAVNÍ VÝHODY


- Komfortní účinná vzduchová kompresní masáž
- Potlačení nepříjemného pocitu pulzování při bolestech hlavy
- Snižuje bolest hlavy
- Úleva při migréně
- 3 automatické masážní programy
- Vyhřívání: 3 úrovně (40°C, 45°C, 50°C)
- Zapínání na suchý zip
- Přizpůsobí se velikosti každé hlavy (do obvodu až 65cm)
- Návlek je možné vyprat v pračce
- Bezdrátové použití
- Napájení: li-ion baterie
- Kapacita baterie: 4000mAh
- Hmotnost: 650g
- Rozměry přístroje: 75x13x2cm
- Rozměry ovladače: 5,5x1,3x3cm



POPIS PRODUKTU

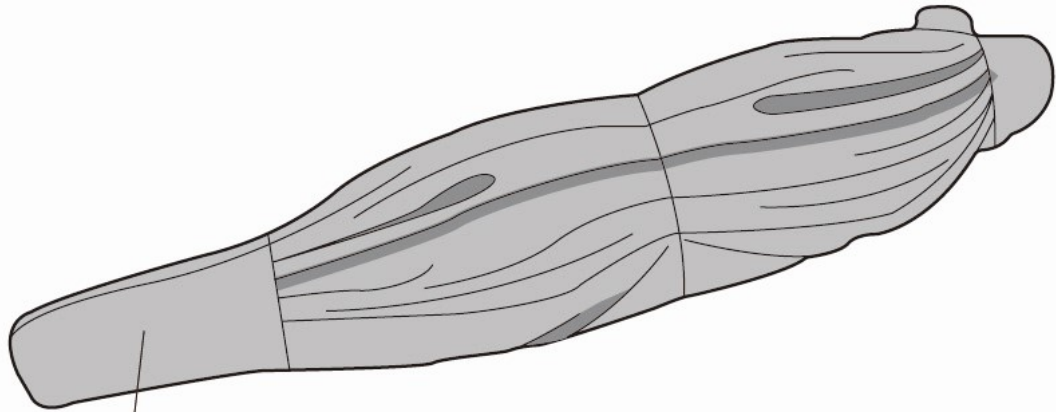


zapínání na suchý zip

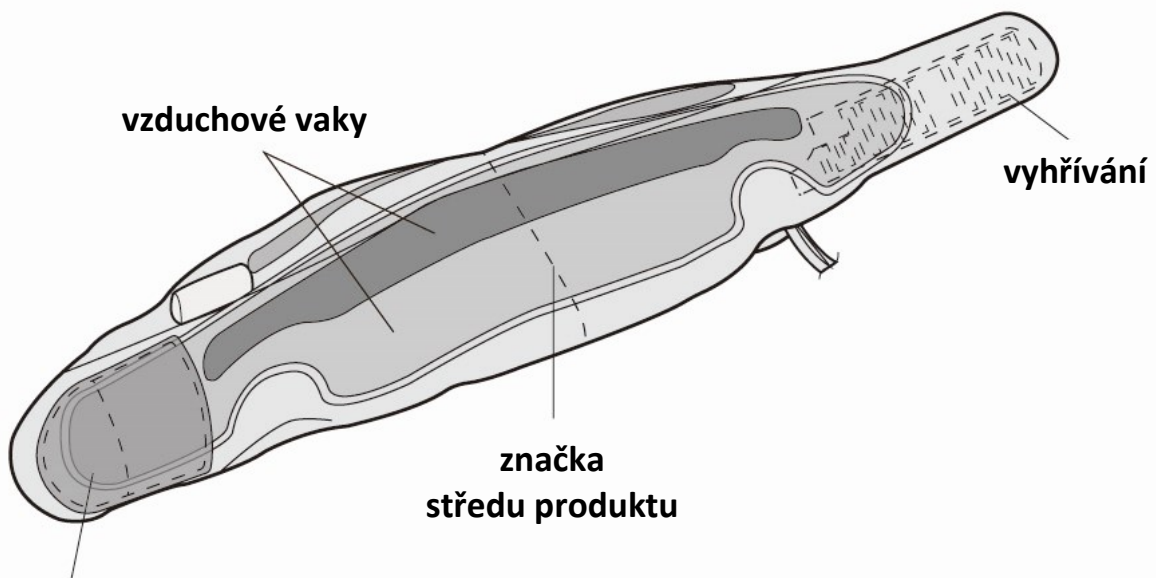


zapínání na suchý zip

POPIS OVLADAČE


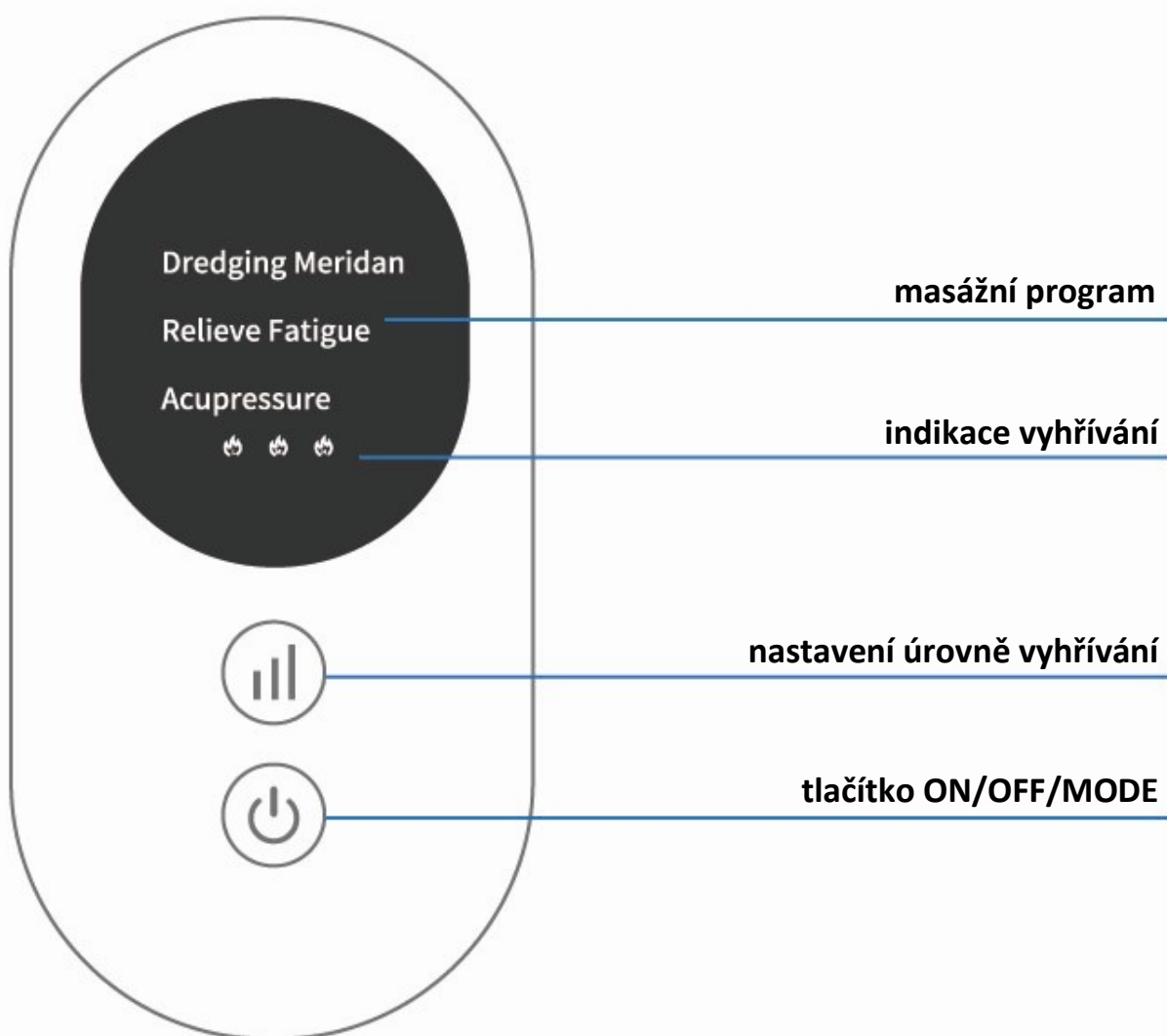


POUŽITÍ PRODUKTU

1. Středovou značku srovnejte se středem čela a spodní okraj zarovnejte s polohou obočí.


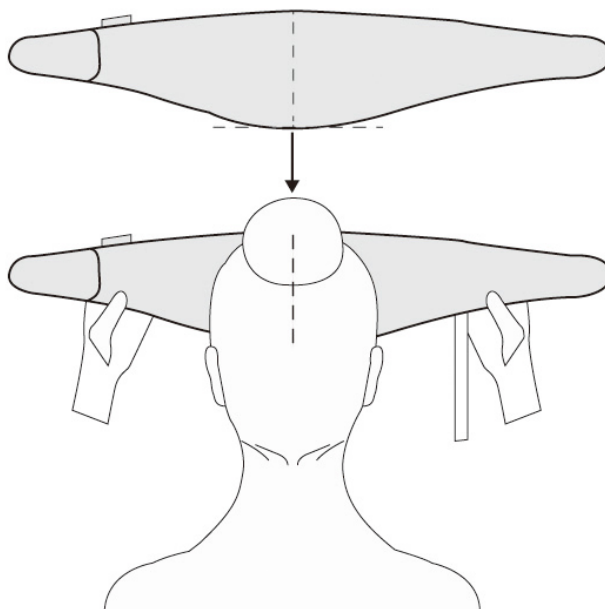


2. Přístroj upevněte na hlavu pomocí zapínání na suchý zip.

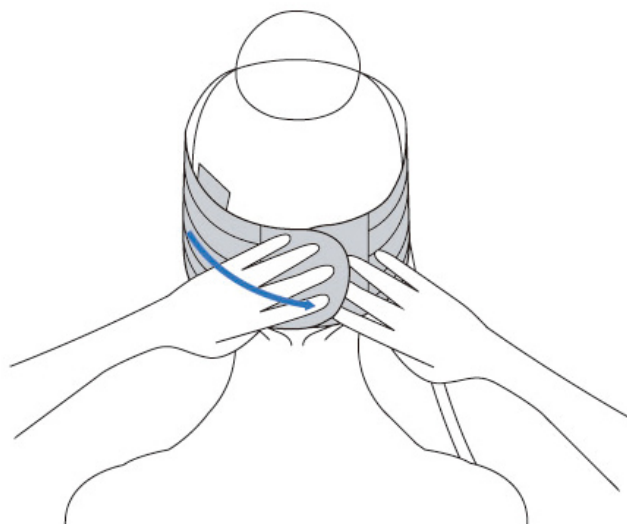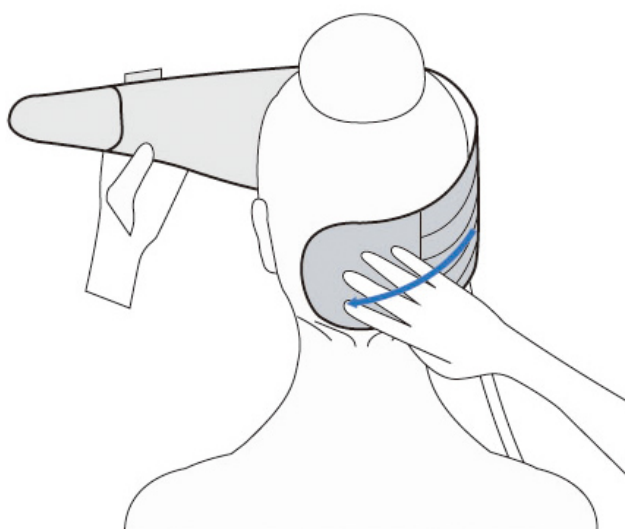

**Zaměřte se na značku ve středu přístroje.
Značka by měla být umístěna uprostřed čela.**

**Přístroj může zakrývat
částečně uši.**

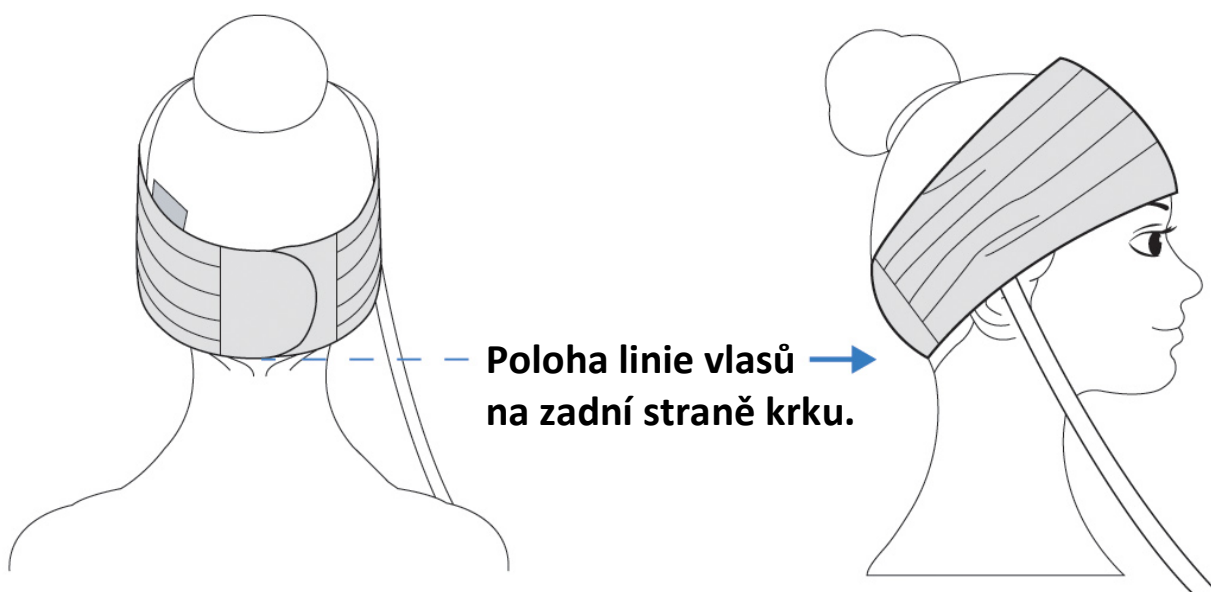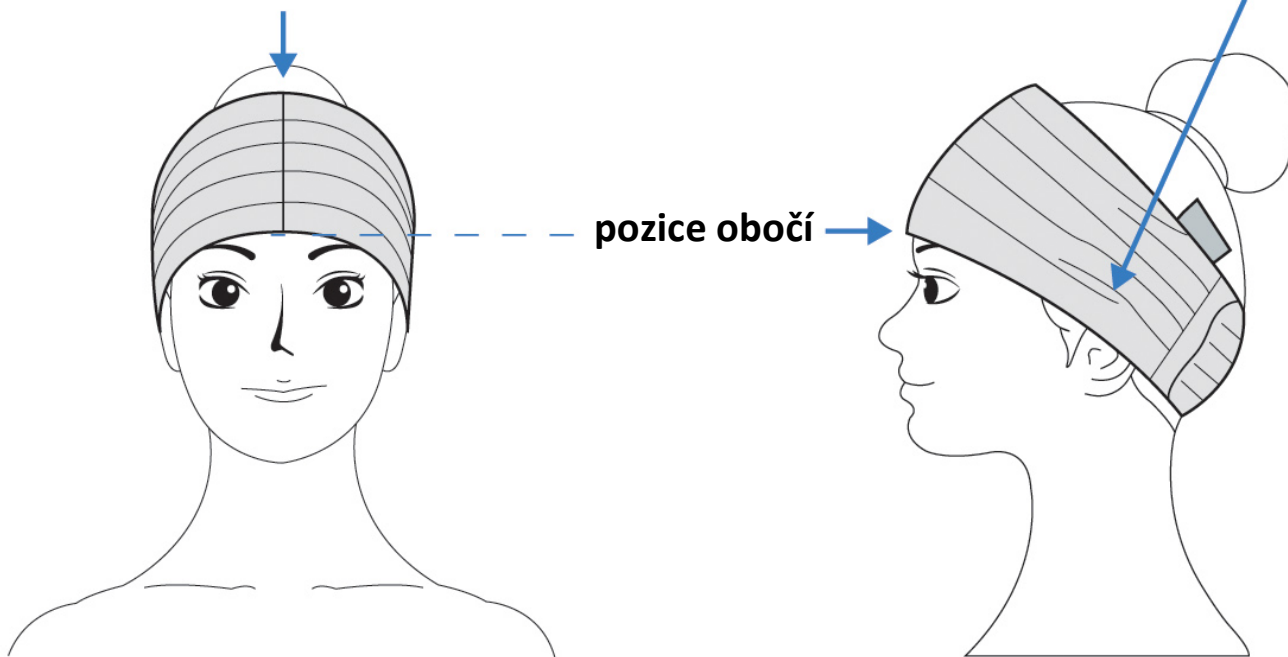

Poznámka: Nesprávný způsob nošení může vést k nízké až žádné efektivitě přístroje. Příliš silné utažení přístroje kolem hlavy může způsobit, že vám přístroj stáhne hlavu kompresní masáží příliš moc. Zapnutí přístroje příliš na volno může vést k poklesu přístroje během používání a nízké efektivitě přístroje. Při zapnutí přístroje berte v úvahu, že se obvod přístroje kolem hlavy zmenší působením nafouknutí vzduchových vaků. Přístroj si přizpůsobte pomocí zapnutí na suchý zip tak, aby vám bylo používání co nejvíce komfortní.


- 3.** Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** v délce alespoň 3 sekund. Na displeji se rozsvítí program „Dredging meridian“.




- 4.** Pomocí tlačítka **ON/OFF** si můžete nastavit jednotlivé módy masáže. K dispozici jsou 3 masážní programy:
MÓD 1: Dredging meridián
MÓD 2: Relieve fatigue
MÓD 3: Acupressure

- 5.** Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete nastavit funkci vyhřívání. K dispozici jsou následující režimy působení tepla:
ÚROVEŇ 1: Nízká úroveň tepla
ÚROVEŇ 2: Střední úroveň tepla
ÚROVEŇ 3: Vysoká úroveň tepla
ÚROVEŇ 4: Vypnuto


- 6.** Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

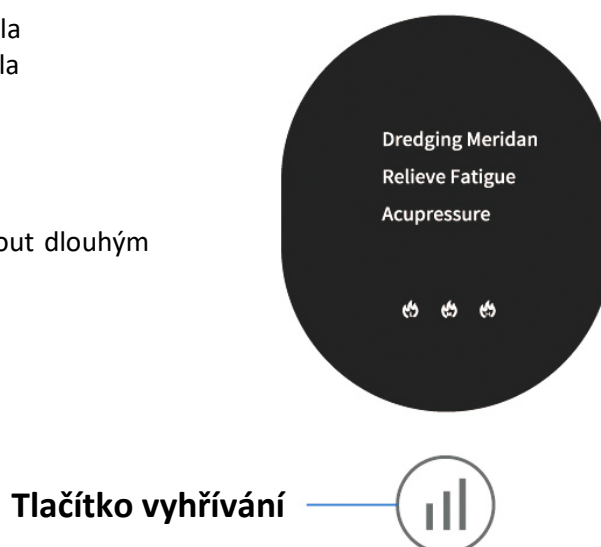


- 7.** Masážní program: **DREDGING MERIDIAN** - vzduchová kompresní masáž směřuje od spodní části hlavy směrem nahoru.

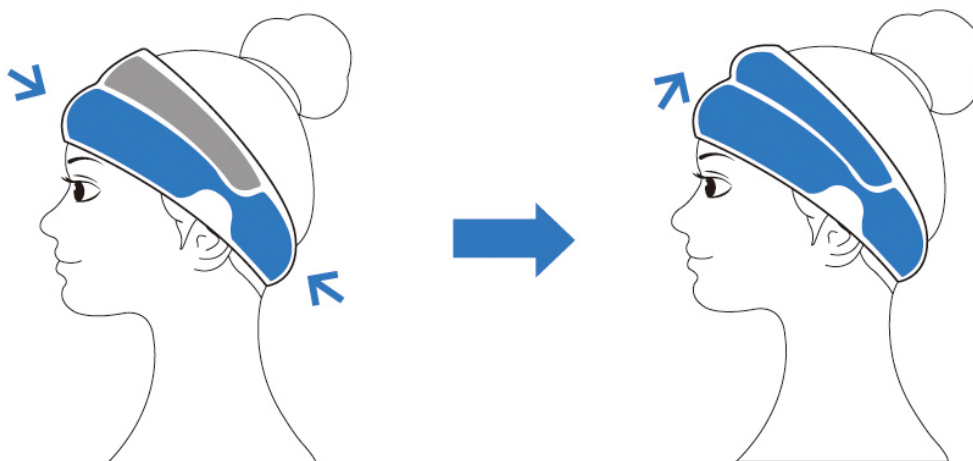

- 8.** Masážní program: **RELIEVE FATIGUE** - střídavé kompresní pohyby horního a spodního vzduchového vaku. Zažijte pocit rytmické masáže.

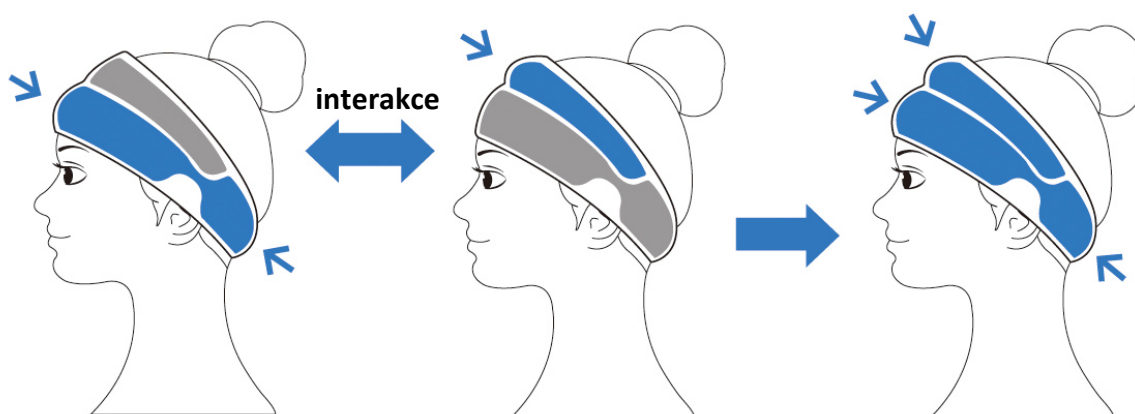

- 9.** Masážní program: **ACUPRESSURE** - kompresní pohyby horního a spodního vzduchového vaku současně. Imituje pohyby prstů po celém obvodu hlavy.

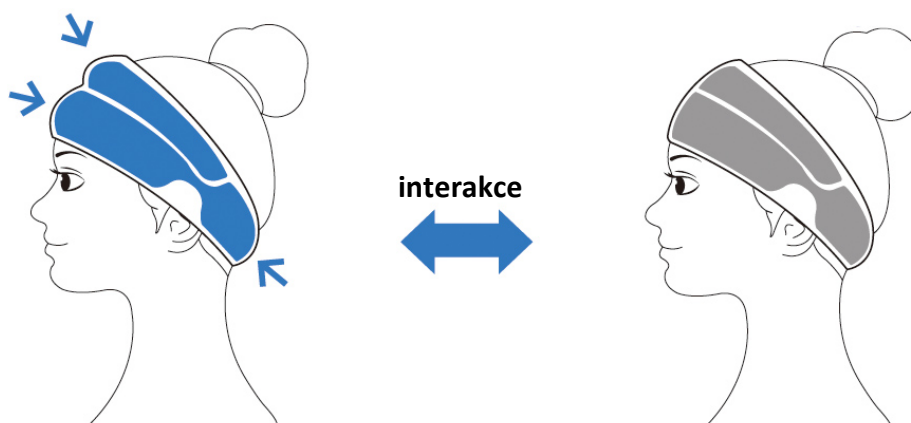










ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Návlek přístroje můžete snadno prát v pračce. Při údržbě postupujte následovně:

- 1.** Rozepněte zip na boční straně přístroje.

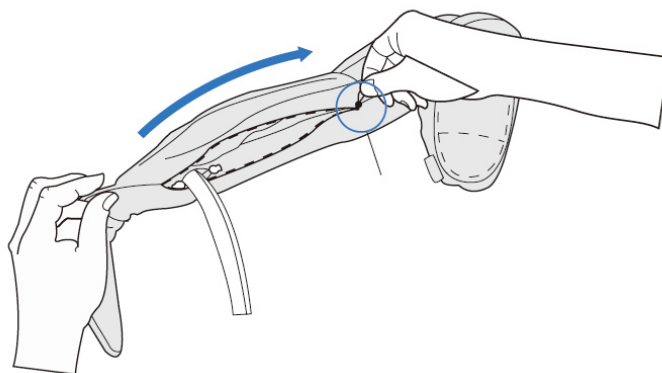


- 2.** Odstraňte z návleku samotné tělo přístroje.

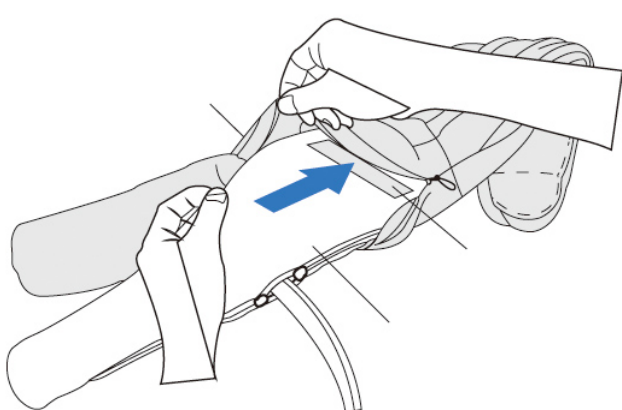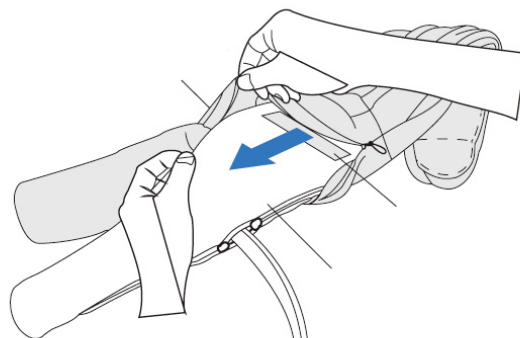

- 3.** Tělo přístroje zasuňte nazpět do návleku.

- 4.** Návlek zapněte pomocí zipu.

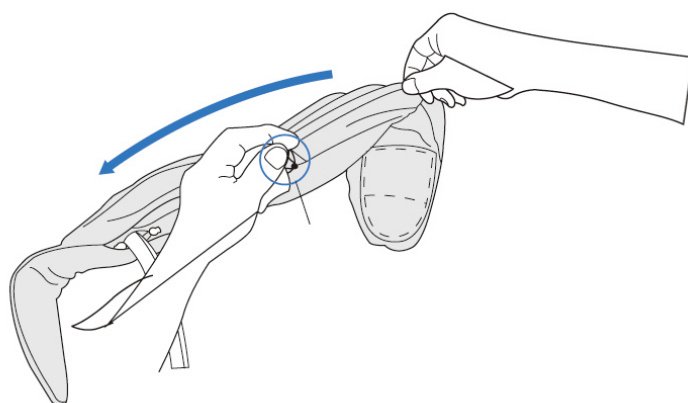

NABÍJENÍ BATERIE

1. Jakmile je nízký stav baterie, světelná signalizace bliká.
2. K nabíjení baterie používejte výhradně USB kabel, který je součástí balení.
3. Adaptér připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Průběh nabíjení baterie je doprovázen světelnou signalizací zelené barvy.
5. Přístroj v průběhu nabíjení nepoužívejte.
6. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie. Může trvat v rozsahu 3 až 4 hodin.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj hlavy Headrelax Air

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2797**

EAN: **8594166119765**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2022