

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj na oblast pasu

**BeautyRelax BR-2798**

**Shape&Relax**





## OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
OBSAH BALENÍ	7
POPIS DISPLEJE OVLADAČE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	10
DOVOZCE	10
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

## ÚČEL POUŽITÍ

Masážní přístroj BeautyRelax Shape&Relax EMS je určen pro aktivní posílení břišních svalů. Využívá elektrických pulzů EMS a působení tepla. Aktivní uvolnění a posílení svalů. K dispozici je 8 masážních programů s možností nastavení 15 úrovní intenzity. Dvě úrovně působení tepla. Bezdrátové použití díky zabudované li-ion baterii. Snadné nastavení funkcí pomocí dálkového ovladače.




**Poznámka:** přístroj můžete použít na přední nebo zadní stranu pasu podle potřeby.

## HLAVNÍ VÝHODY

- EMS elektrické pulzy
- Elektrické pulzy stimulují svaly jako při skutečném pohybu
- Aktivní posilování svalů
- Působení tepla pro účinné uvolnění svalů
- 8 masážních programů
- 15 úrovní intenzity
- 2 úrovně působení tepla (38°C až 42°C, 39°C až 44°C)
- Posílení břišních svalů
- Určeno pro oblast břicha
- Časovač: ano, 30 minut
- Ergonomický design
- Snadné nastavení funkcí pomocí dálkového ovladače
- Bezdrátové použití díky vestavěné li-ion baterii
- Indikace nízkého stavu baterie
- Rozměry: 25x12x3cm
- Hmotnost: 320g




## OBSAH BALENÍ

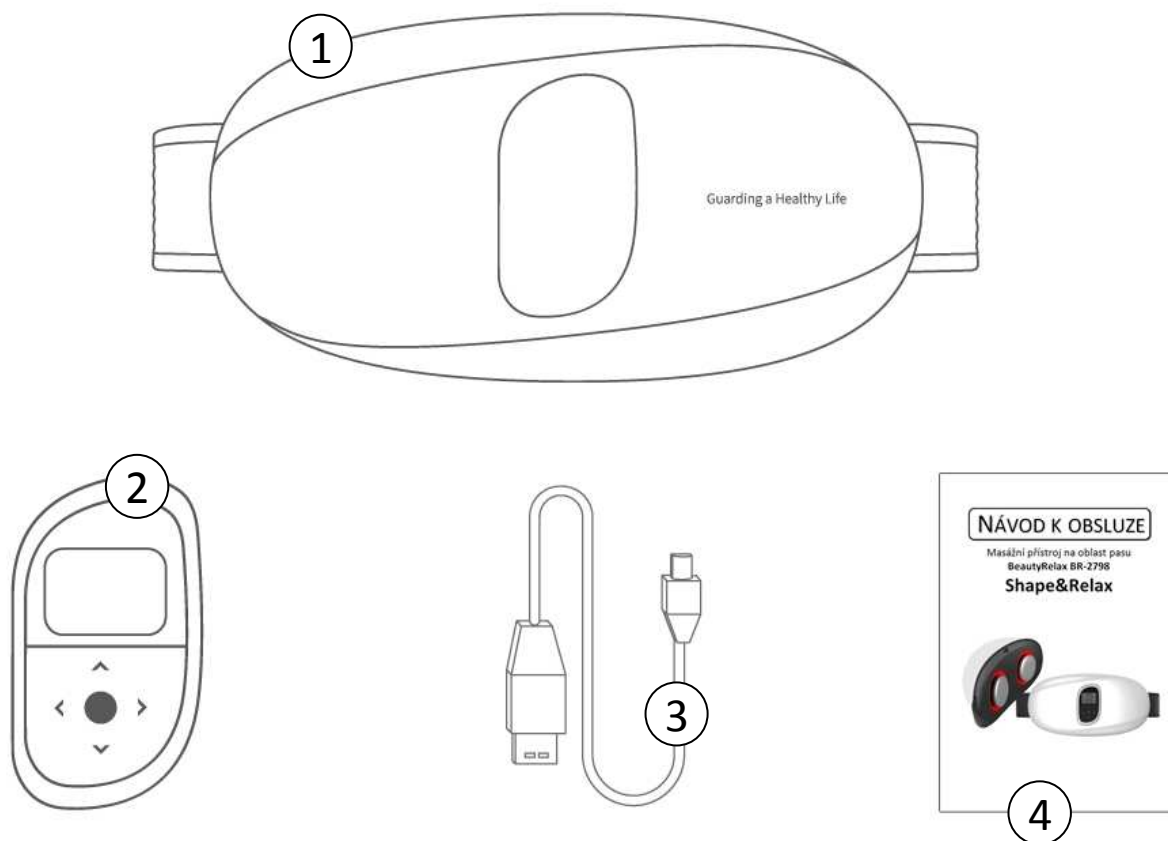

1. Masážní přístroj
2. Dálkový ovladač
3. Nabíjecí kabel
4. Návod k obsluze



## POPIS DISPLEJE OVLADAČE

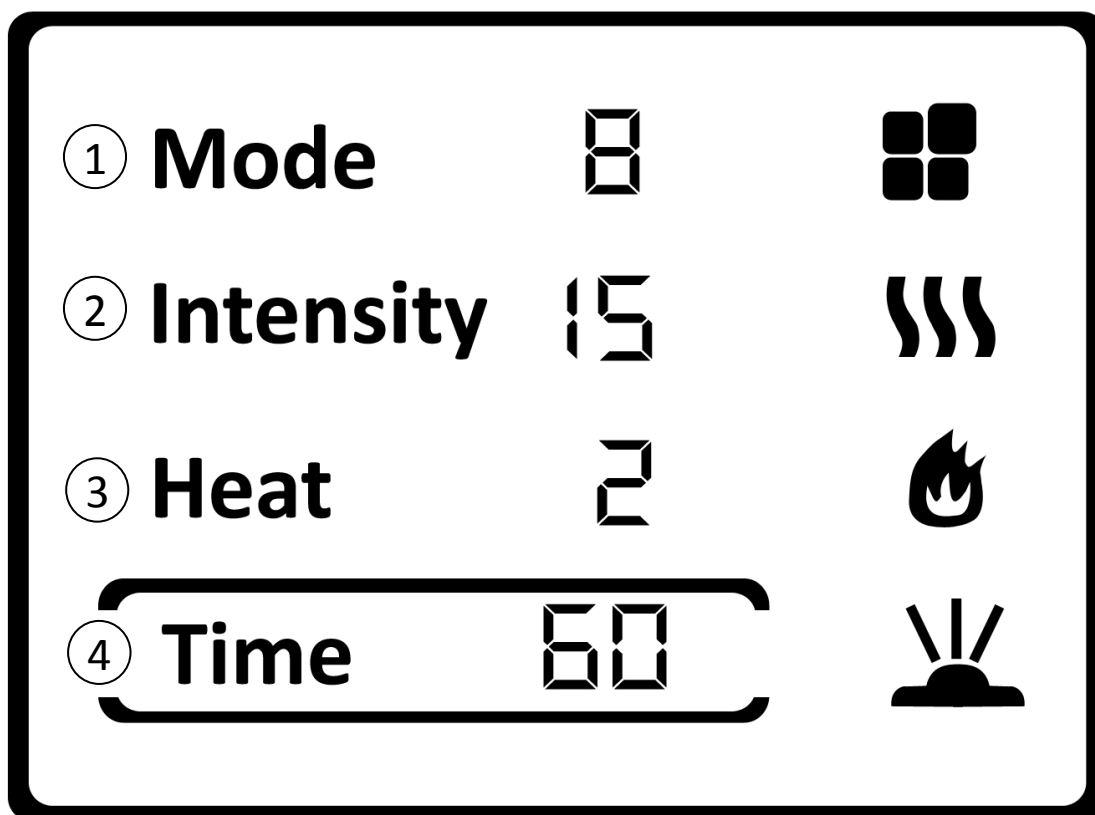

- 1. MODE** - masážní program. V průběhu používání přístroje si můžete snadno nastavit masážní program. K dispozici je na výběr celkem 8 programů. Jejich efektivita a význam je stejný. Uživatel má však možnost na výběr, aby při dlouhodobém používání přístroje nebylo jeho používání příliš monotónní.
- 2. INTENSITY** - intenzita masáže. V průběhu používání přístroje si můžete snadno nastavit intenzitu působení EMS pulzů. K dispozici je na výběr rozsah od 1 do 15. Pohodlně si tak můžete nastavit výkon působení EMS pulzů podle vaší aktuální potřeby.
- 3. HEAT** - vyhřívání. Infračervené teplo proudí do vašeho těla přes dva kulaté aplikátory. V průběh používání přístroje si můžete snadno nastavit úroveň působení vyhřívání - vypnuto, nízká, vysoká.
- 4. TIME** - nastavení času. Přístroj je vybaven časovačem. Můžete si tak nastavit automatické ukončení činnosti přístroje až do 60 minut.



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před použitím vždy ověřte, že jsou obě kontaktní elektrody čisté a nejsou pokryty žádnou mastnotou.
- Stejně tak by se na pokožce neměly vyskytovat žádné nečistoty. Vytvářely by mechanickou bariéru mezi vámi a přístrojem.
- V případě potřeby můžete na pokožku nanést vrstvu sonogelu.
- Přístroj zapnete dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF na přední části přístroje. Není to klasické tlačítko ale dotykový panel. Pro aktivaci je tedy potřeba setrvat prstem v délce několika sekund.
- Zapnutí přístroje indikuje rozsvícení červeného světla kolem aplikátorů. Nyní se přístroj nachází v pohotovostním režimu a můžete ho začít ovládat dálkovým ovladačem. Přístroj můžete vypnout dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF na přístroji nebo dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači (tlačítko ON/OFF na ovladači neslouží k zapnutí přístroje).
- Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF na ovladači zapnete dálkový ovladač.
- Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ si můžete vybrat z nabídky na ovladači.
- PROGRAM MASÁŽE - MODE - Pomocí šipek DOPRAVA a DOLEVA si můžete vybrat masážní program. K dispozici je na výběr celkem 8 programů.
- INTENZITA MASÁŽE - INTENSITY - Pomocí šipek DOPRAVA a DOLEVA si můžete vybrat intenzitu masáže. K dispozici je na výběr celkem 15 úrovní intenzity.
- VYHŘÍVÁNÍ - HEAT - Pomocí šipek DOPRAVA a DOLEVA si můžete zvolit režim působení tepla. K dispozici jsou stavy **VYPNUTO 0** - **NÍZKÁ 1** (38°C až 42°C) - **VYSOKÁ 2** (39°C až 44°C).
- ČAS - TIME - Pomocí šipek DOPRAVA a DOLEVA si můžete nastavit režim časovače. K dispozici je možnost nastavení až do 60 minut - úrovně 10, 20, 30, 40, 50, 60).
- Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF na přístroji nebo ovladači.

## NABÍJENÍ BATERIE

1. Jakmile je nízký stav baterie, světelná signalizace bliká.
2. K nabíjení baterie používejte výhradně USB kabel, který je součástí balení.
3. Adaptér připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
4. Průběh nabíjení baterie je doprovázen světelnou signalizací zelené barvy.
5. Příklad v průběhu nabíjení nepoužívejte.
6. Délka nabíjení se odvíjí od stavu baterie. Může trvat v rozsahu 3 až 4 hodin.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní přístroj na oblast pasu**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2798**

EAN: **8594166119772**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1:2017**

**EN 55014-2:2015**

**EN 61000-3-2:2014**

**EN 61000-3-3:2013**

### **Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2022