

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj pro uvolnění bederní páteře
BeautyRelax BR-2885

LUMBPRESS



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	5
OBSAH BALENÍ	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
UNIKÁTNÍ FUNKCE HOUPÁNÍ	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	8
VÝZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE	9
DOPORUČENÉ POZICE POUŽITÍ PŘÍSTROJE	10
UKONČENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	13
CERTIFIKACE	13
DOVOZCE	13
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	14

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.


UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Pokud jste po vážné operaci bederní páteře, konzultujte možnost použití se svým lékařem.
- Pokud si nejste jisti, zda váš fyziologický zdravotní stav umožňuje použití funkcí přístroje, konzultujte možnosti použití před prvním použitím se svým lékařem.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenesé distributor odpovědnost.
- **Produkt není zdravotnický prostředek.**



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Lumbpress je špičkový masážní přístroj se zaměřením na okamžité uvolnění svalů v oblasti bederní páteře. Pokročilá technologie kompresní masáže. Okamžité uvolnění zatuhlých svalů kolem bederní části zad. Šetrné a bezpečné používání. Speciálně anatomicky tvarovaný. Kompresní masáž, vibrace, světelná terapie, vyhřívání. Podporuje krevní oběh. Dálkové ovládání. Automatické masážní programy. Časovač.

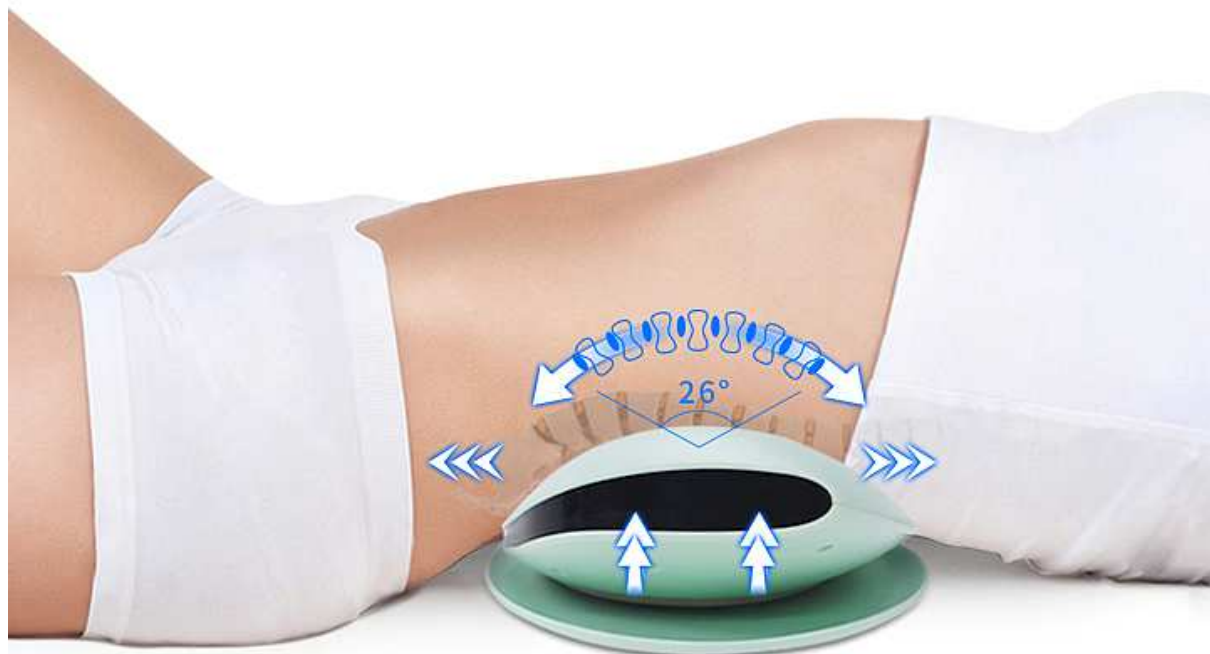

OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj pro uvolnění bederní páteře BeautyRelax BR-2885
- Podložka
- Adaptér do sítě 220V
- Návod k obsluze

HLAVNÍ VÝHODY


- Pokročilá technologie kompresní masáže
- Okamžité uvolnění zatuhlých svalů kolem bederní páteře
- Šetrné a bezpečné používání
- Speciálně anatomicky tvarovaný
- Vibrace, vyhřívání, fotonové světlo, kompresní masáž
- Podporuje krevní oběh
- Možnost nastavení teploty: nízká, střední, vysoká
- Dálkové ovládání
- Dva automatické masážní programy
- Automatický časovač 15 minut
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry: 42x19x8cm
- Hmotnost: 3,9kg

UNIKÁTNÍ FUNKCE HOUPÁNÍ

BeautyRelax Lumbpress nabízí ve srovnání s přístroji obdobného typu unikátní funkci HOUPÁNÍ (SWING). Vzduchové masážní vaky jsou schopny přečerpávat vzduch takovým způsobem, aby došlo k náklonu hlavní plochy přístroje. Funkce SWING umožní nejen zdvih bederní páteře, ale také protažení do strany.




POPIS PŘÍSTROJE

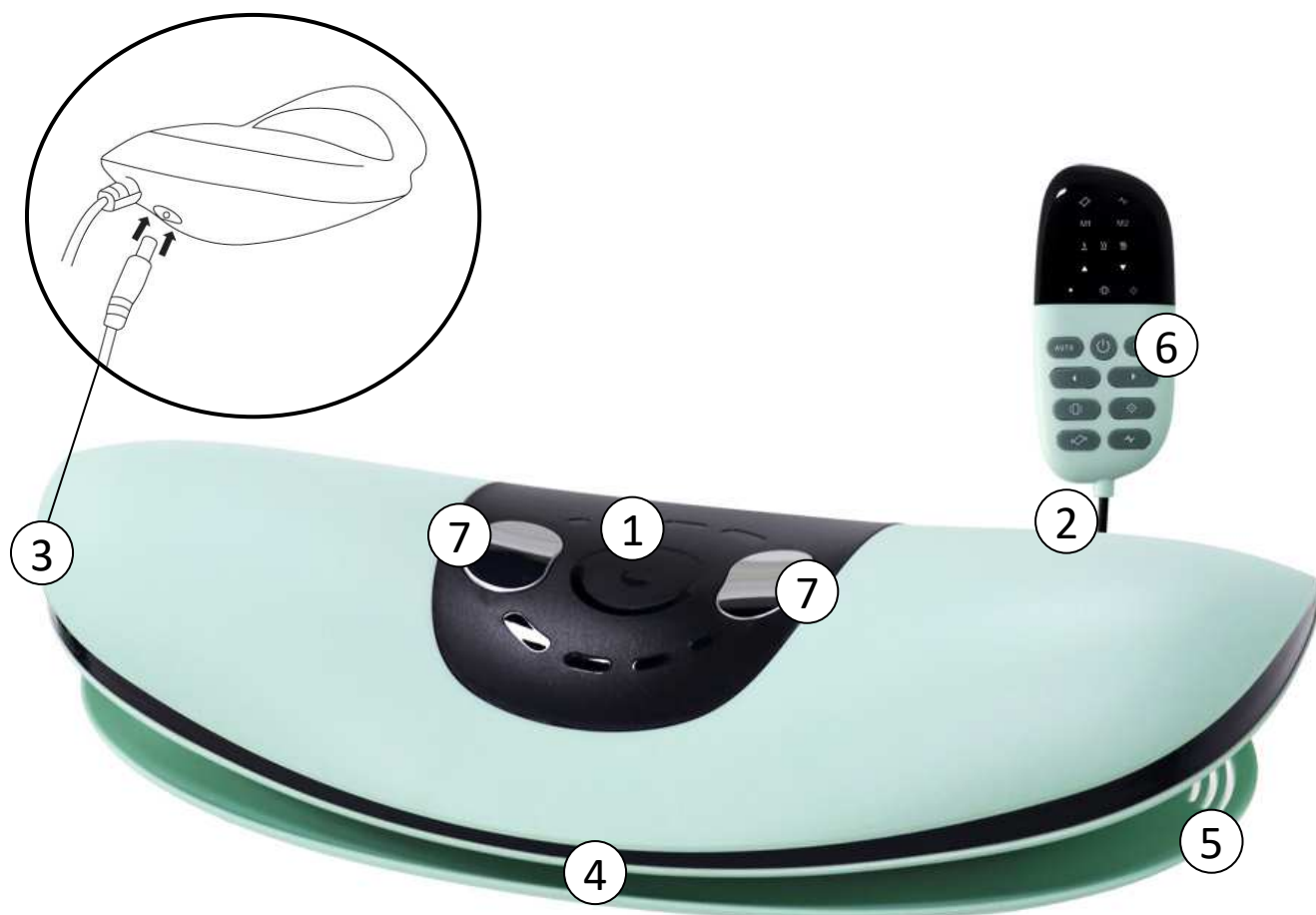

1. Zóna působení tepla
2. Kabel dálkového ovladače
3. Konektor pro napájecí adaptér
4. Spodní část přístroje
5. Balanční podložka
6. Dálkový ovladač
7. Kontaktní plochy EMS pulzů

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

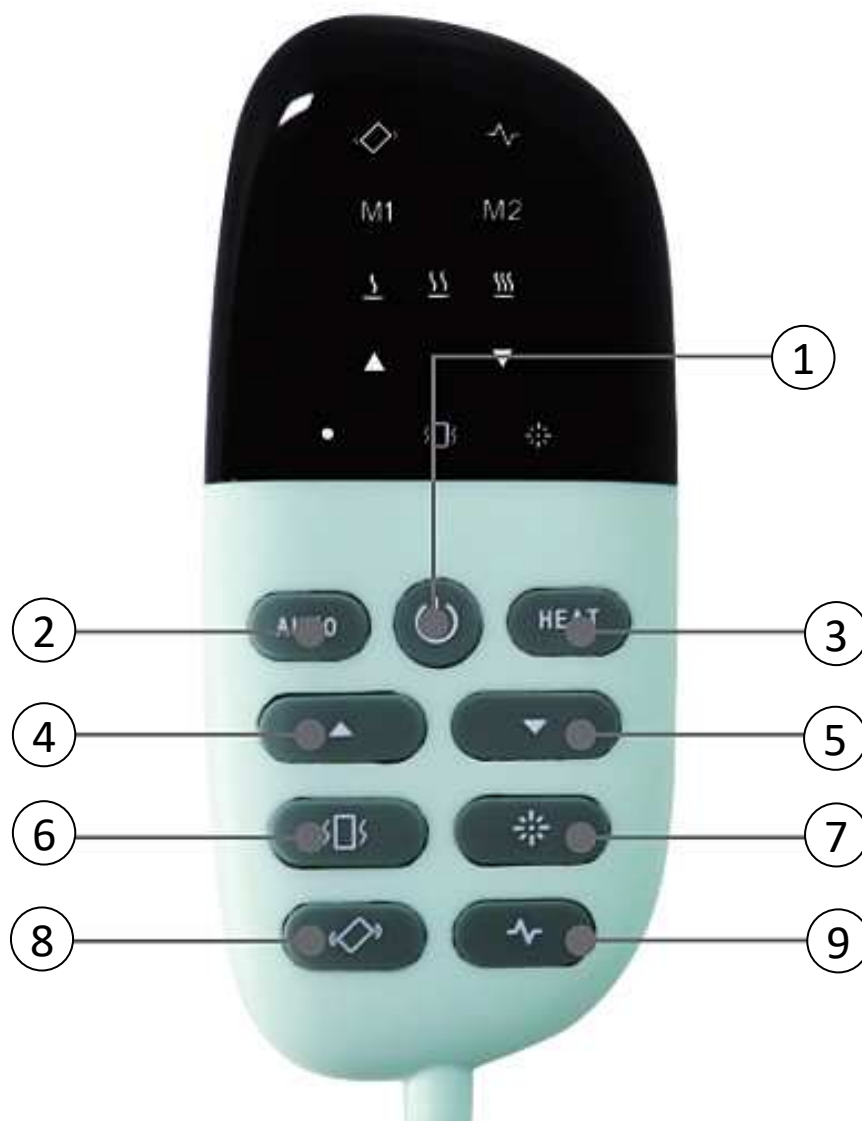

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Tlačítko **AUTOMATICKÝ PROGRAM**
3. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
4. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** vzduchové komprese
5. Tlačítko **SNÍŽENÍ** vzduchové komprese
6. Tlačítko **VIBRACE**
7. Tlačítko **SVĚTELNÁ TERAPIE**
8. Tlačítko **HOUPÁNÍ**
9. Tlačítko **EMS pulzů**

VÝZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE

Pomocí dálkového ovladače můžete nastavit všechny funkce masážního přístroje. Jednotlivé funkce mají následující význam:

Tlačítko ON/OFF (1)

Pomocí tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv zapnout nebo vypnout. Použití tlačítka je podmíněno zapojením přístroje k napájecímu adaptéru.

Tlačítko AUTO (2)

Pomocí tlačítka **AUTO** aktivujete automatický program masáže. K dispozici jsou dva automatické programy. Program M1 a M2.

Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ (3)

Pomocí tlačítka **HEAT** (vyhřívání) můžete zapnout nebo vypnout působení vyhřívání. K dispozici jsou 3 rovně vyhřívání.

Tlačítko NAHORU/DOLŮ (4)+(5)

Pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** si můžete ručně nastavit zdvih přístroje. Funkčnost tlačítka pracuje krátkými stisky nebo dlouhým podržením.

Tlačítko VIBRACE (6)

Pomocí tlačítka **VIBRACE** můžete zapnout nebo vypnout vibrační masáž.

Tlačítko SVĚTELNÉ TERAPIE (7)

Pomocí tlačítka **SVĚTELNÁ TERAPIE** si můžete zapnout nebo vypnout působení světla.

Tlačítko SWING (8)


Pomocí tlačítka **SWING** si můžete aktivovat masážní režim houpání. Tento režim masáže spočívá v pravidelném přečerpávání vzduchu ve vzduchových komorách integrovaných uvnitř přístroje. Pohyb masážního přístroje tak připomíná houpání.

Tlačítko EMS


Pomocí tlačítka **EMS** můžete aktivovat působení EMS elektrických pulzů. Krátkým stiskem tlačítka aktivujete působení EMS pulzů. Dlouhým stiskem tlačítka funkci EMS pulzy vypnete.

DOPORUČENÉ POZICE POUŽITÍ PŘÍSTROJE

(1)

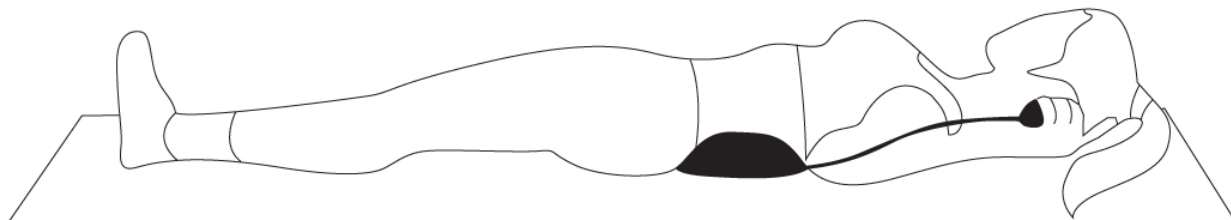


(2)

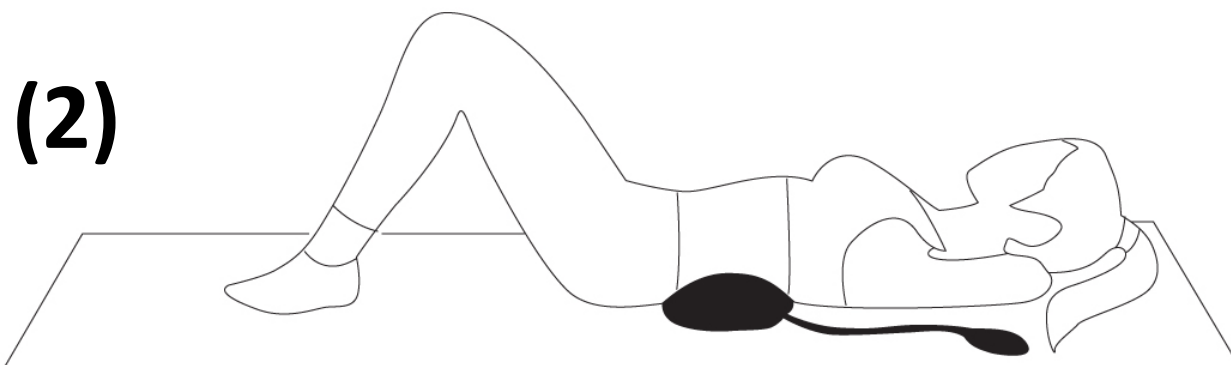


- *Přístroj používejte maximálně 15 minut denně.*
- *Při použití si nastavte takové funkce, které jsou vám příjemné.*
- *Frekvenci použití přístroje upravte podle stavu vaší bederní páteře.*
- *Pokud máte zvýšenou citlivost bederní páteře, ponechejte mezi jednotlivým použitím přístroje delší časový úsek.*
- *Funkci zdvihu přístroje provádějte postupně. Začněte ručním řízením zdvihu pomalu a postupně. Vaše záda se tak mohou zdvihu přístroje průběžně přizpůsobit.*

UKONČENÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

(SPRÁVNÝ ZPŮSOB)

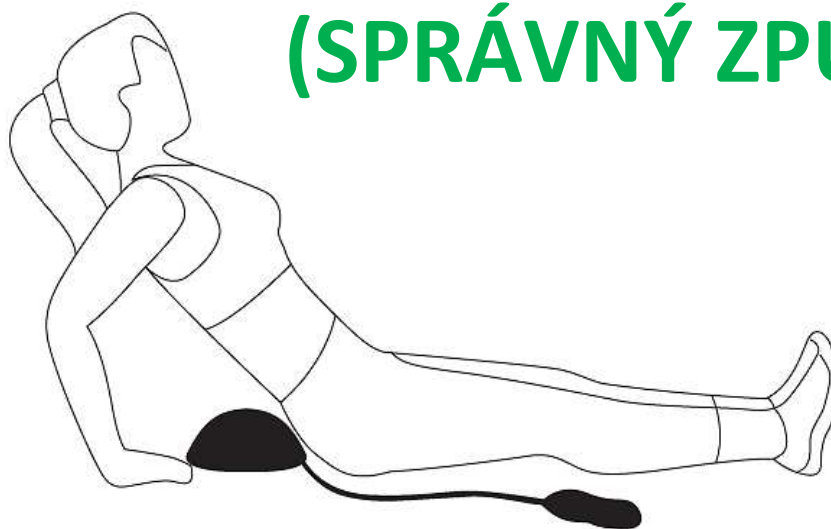


(CHYBNÝ ZPŮSOB)

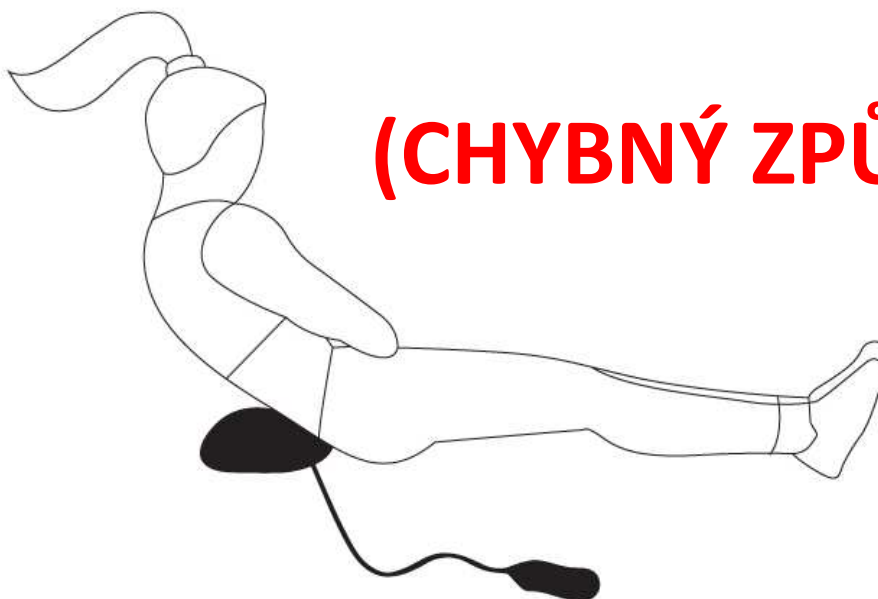

- Po skončení činnosti přístroje vyčkejte ještě 2 až 3 minuty.
- **Zvednutí ze země provádějte velice opatrně a pomalu**
- Vždy si pomáhejte pomocí rukou
- Zvednutí proveďte až v momentě, kdy je vzduchový vak přístroje prázdný a přístroj se tak nachází v nejnižším možném profilu



- V průběhu činnosti přístroje **je zakázáno** si na přístroj sedat.
- Přístroj je určen výhradně pro oblast bederní páteře.

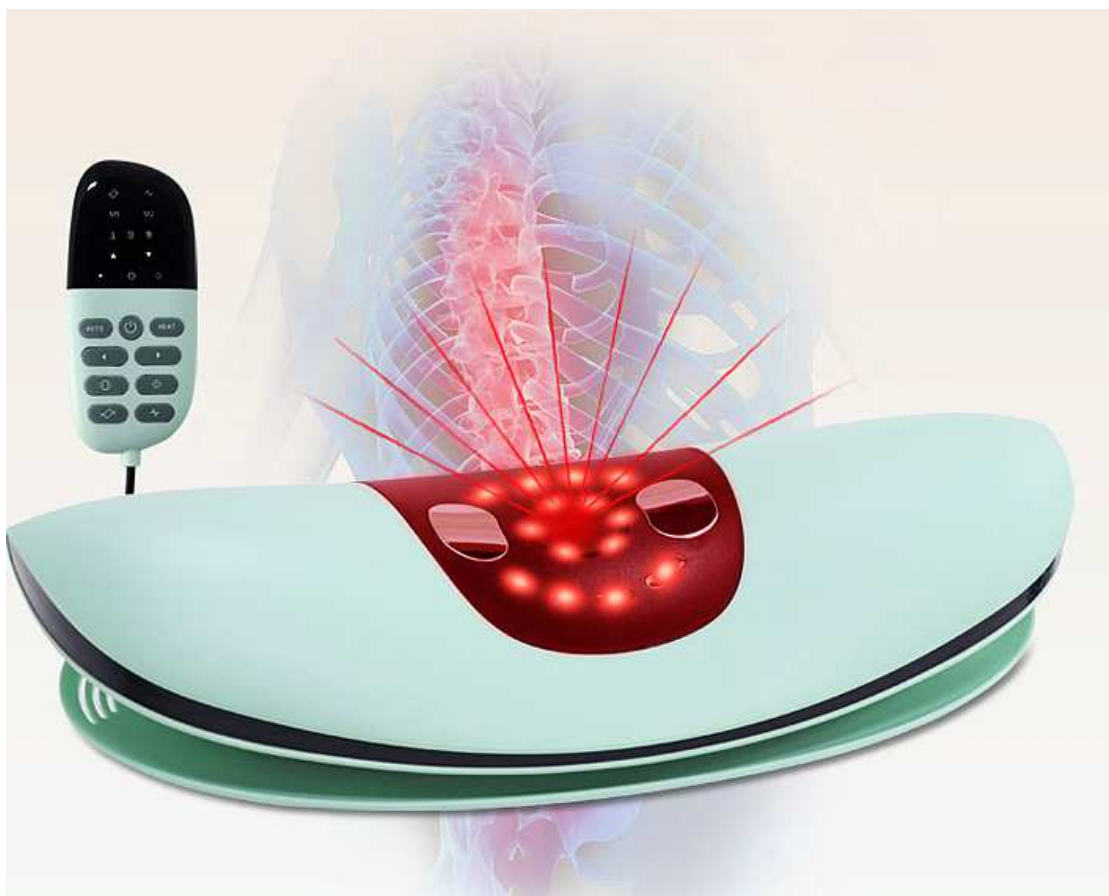

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE

- Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj pro uvolnění bederní páteře

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2885**

EAN: **8594166121577**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

Produkt není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.3.2023