

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj BeautyRelax BR-2940

SHIATSU PREMIUM



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
HLAVNÍ VÝHODY	7
TECHNICKÉ PARAMETRY	8
POPIS PŘÍSTROJE	9
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	10
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12
CERTIFIKACE	12
DOVOZCE	12
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	13

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 20 až 30 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Je striktně ZAKÁZÁNO používat masážní přístroj během jízdy v automobilu. V případě nehody se vystavujete riziku poranění páteře nebo jiné oblasti, která by byla masážním přístrojem masírována.


OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-2940 SHIATSU PREMIUM
- Nabíjecí adaptér 220V
- Návod k obsluze

KONTRAINDIKACE


Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Závažné kožní onemocnění v místě použití přístroje
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem

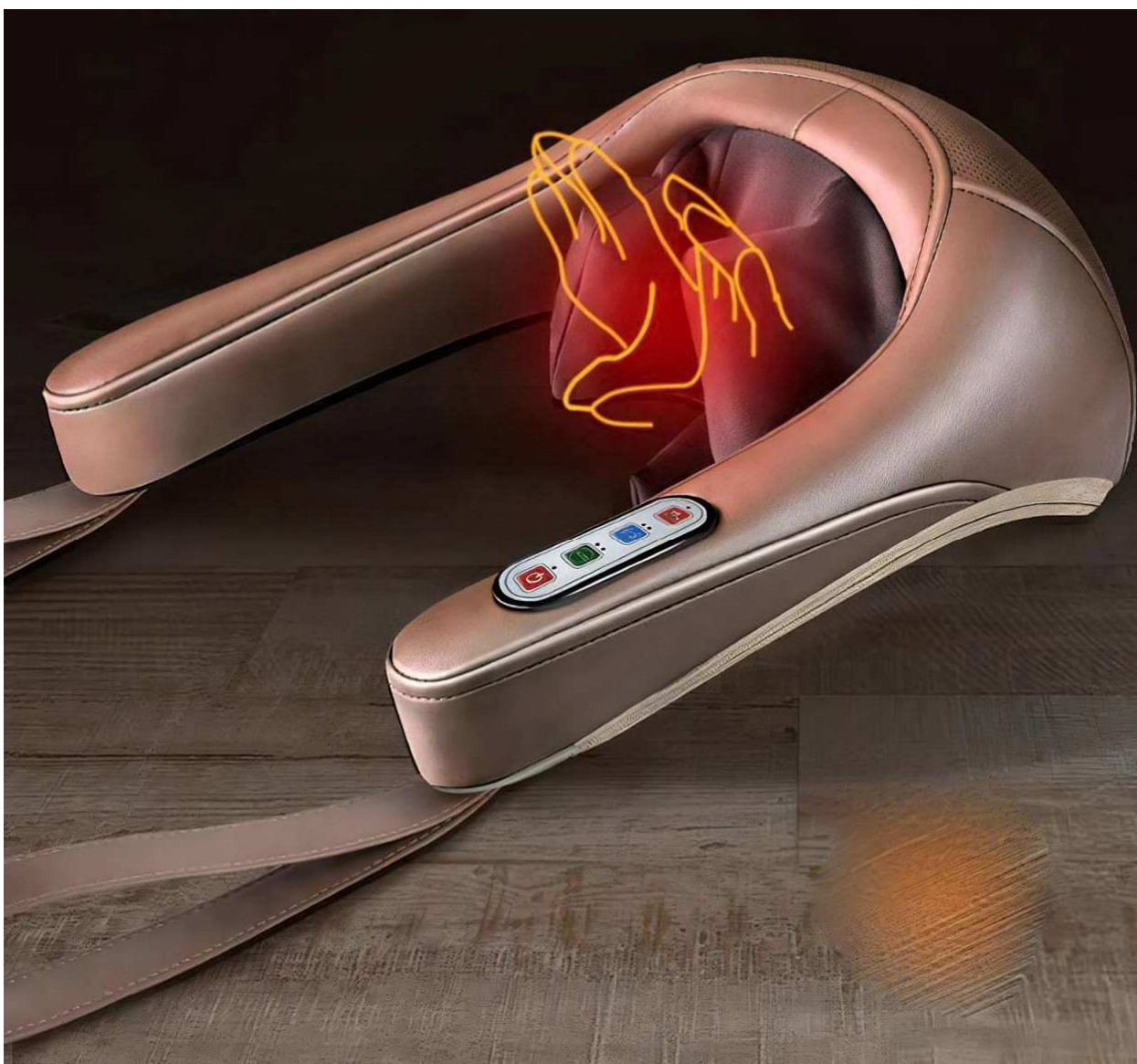

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax shiatsu Premium je masážní přístroj pro vysoce účinnou rehabilitaci zatuhlých krčních svalů. Masážní mechanismus je navržen tak, aby naprosto věrohodně simuloval pohyb lidských rukou. BeautyRelax shiatsu Premium je vysoce šetrný ke krční páteři. Na druhé straně okamžitě potlačí pocity ztuhlosti. Přístroj je určen na krční páteř a oblast ramen. Dvě rychlosti masáže. Dva masážní programy. Funkce vyhřívání. Madla na ruce pro snadnou regulaci působení tlaku masáže. Ergonomický tvar. Přizpůsobí se každému uživateli. Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii. BeautyRelax shiatsu Premium bude hýčkat vaši krční páteř jako v profesionálním masážním studiu!

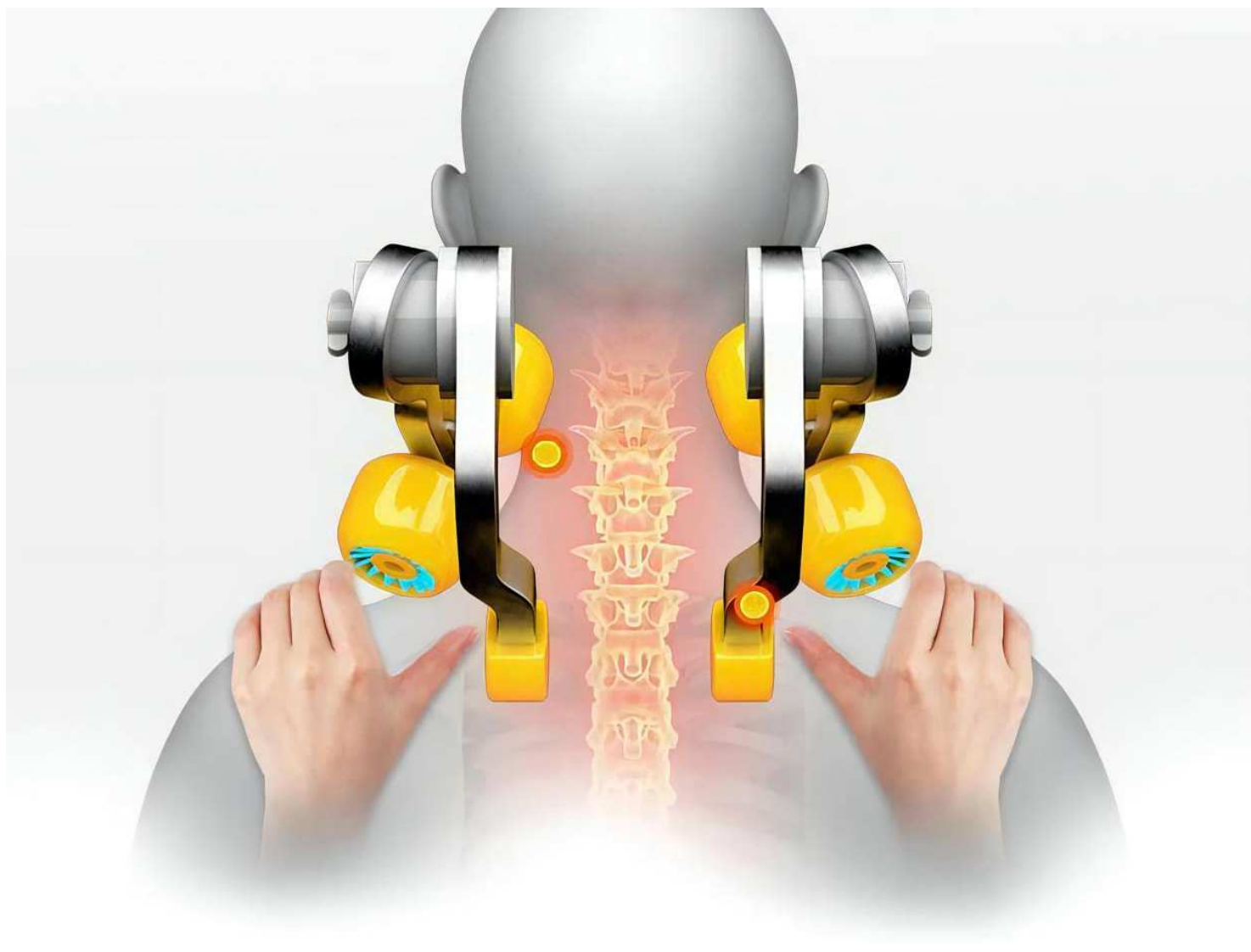

HLAVNÍ VÝHODY

- Okamžité uvolnění pro zatuhlé svaly
- Určeno pro krční páteř a oblast ramen
- Zlepšení krevního oběhu
- Unikátní tvar 4 aplikačních hlavic věrně napodobuje pohyby skutečných rukou
- Dva masážní programy
- Dva směry pohybu masážních hlavic
- Vyhřívání: 45°C
- Časovač: automatické vypnutí po 15 minutách
- Možnost regulace tlaku masáže pomocí madel na obě ruce
- Ergonomický tvar přístroje
- Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii
- Syntetická prošívaná kůže, která se snadno udržuje
- Snadné nastavení funkcí přístroje pomocí ovládacího panelu
- Kvalitní elektromotory pro extrémně dlouhou životnost přístroje



TECHNICKÉ PARAMETRY

- Výkon: 24W
- Masážní hlavice: 4
- Nabíjení: vestavěná baterie Li-ion
- Napájení: síťový adaptér 220V
- Rozměry: 35x18x20cm
- Hmotnost: 980g



POPIS PŘÍSTROJE



1. Pohyblivý masážní mechanismus
2. Ovládací panel
3. Madlo pro ruce

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko vyhřívání
2. Tlačítko změna pohybu masážního mechanismu
3. Tlačítko automatický program
4. Tlačítko ON/OFF




POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou činnost všech funkcí přístroje by měla být baterie dostatečně nabitá. K nabíjení používejte výhradně adaptér, který je součástí balení.
2. Zapněte přístroj pomocí tlačítka **ON/OFF(4)**.
3. Pomocí stisku tlačítka **(4)** si můžete nastavit směr pohybu masážních hlavic. K dispozici jsou dva směry pohybu masážních hlavic.
4. Pomocí tlačítka **AUTO (3)** si můžete nastavit automatický masážní program. K dispozici jsou dva různé automatické programy. Zvolte si ten, který je vám nejvíce příjemný.
5. Funkci vyhřívání můžete zapnout/vypnout pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ(1)**.
6. Pomocí madel na ruce si můžete přizpůsobit intenzitu masáže.
7. Přístroj je ideální používat vsedě.
8. Přístroj nepoužívejte déle než 30 minut denně.
9. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout stiskem tlačítka **ON/OFF(4)**.



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Baterii přístroje pravidelně nabíjejte.

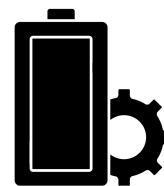

Postup nabíjení:

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí síťový adaptér, který je součástí balení.
2. Připojte přístroj k nabíjecímu síťovému adaptéru.
3. V průběhu nabíjení bliká světelná signalizace.
4. Jakmile je baterie nabitá, blikání ustane.
5. Délka nabíjení závisí na stavu zbývajících energie baterie a její celkové kondici.
6. Pokud je přístroj zapojen k nabíjecímu adaptéru, přístroj nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00 IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní přístroj SHIATSU PREMIUM

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2940**

EAN: **8594166122192**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



.....
Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 9.2.2023