

NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj
na kolena s chronickými bolestmi

BeautyRelax BR-2917

KNEEREHAB COMPACT



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ VÝHODY	5
TECHNICKÉ PARAMETRY	5
OBSAH BALENÍ	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	9
BOLEST KOLENOU JAKO SVĚTOVÝ PROBLÉM	9
POPIS PŘÍSTROJE	10
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	11
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	12
SPRÁVNÁ APLIKACE PŘÍSTROJE NA KOLENO	14
NABÍJENÍ BATERIE	15
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	15
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
DOVOZCE	15

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Kožní onemocnění
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



HLAVNÍ VÝHODY

- Mírní bolest kolenních svalů
- Přispívá ke zmírnění otoků
- Ideální při nepříjemných pocitech chladu v kolenou
- Napomáhá při rehabilitaci po sportovních úrazech
- Technologie vyhřívání a vibrační masáže
- 3 úrovně: nízká (45°C), střední (50°C), vysoká (55°C)
- Časovač: 15 minut
- Dotyková tlačítka na hlavní jednotce
- Bezdrátové použití
- Zabudovaná nabíjecí baterie
- Zapínání na suchý zip
- Snadno se přizpůsobí velikosti nohy každého uživatele

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nabíjecí napětí: 5V
- Kapacita baterie: 2500mAh
- Napájení: USB kabelem s adaptérem (součástí balení)
- Rozměry: 50x28x4cm
- Hmotnost: 600g


OBSAH BALENÍ

- Masážní přístroj BeautyRelax KneeRehab Compact (hlavní jednotka + návlek na koleno)
- Nabíjecí USB kabel
- Síťový adaptér 220V
- Návod k obsluze



KONSTANTNÍ PŮSOBENÍ TEPLA
3 ÚROVNĚ NASTAVENÍ VYHŘÍVÁNÍ

45°C | 50°C | 55°C

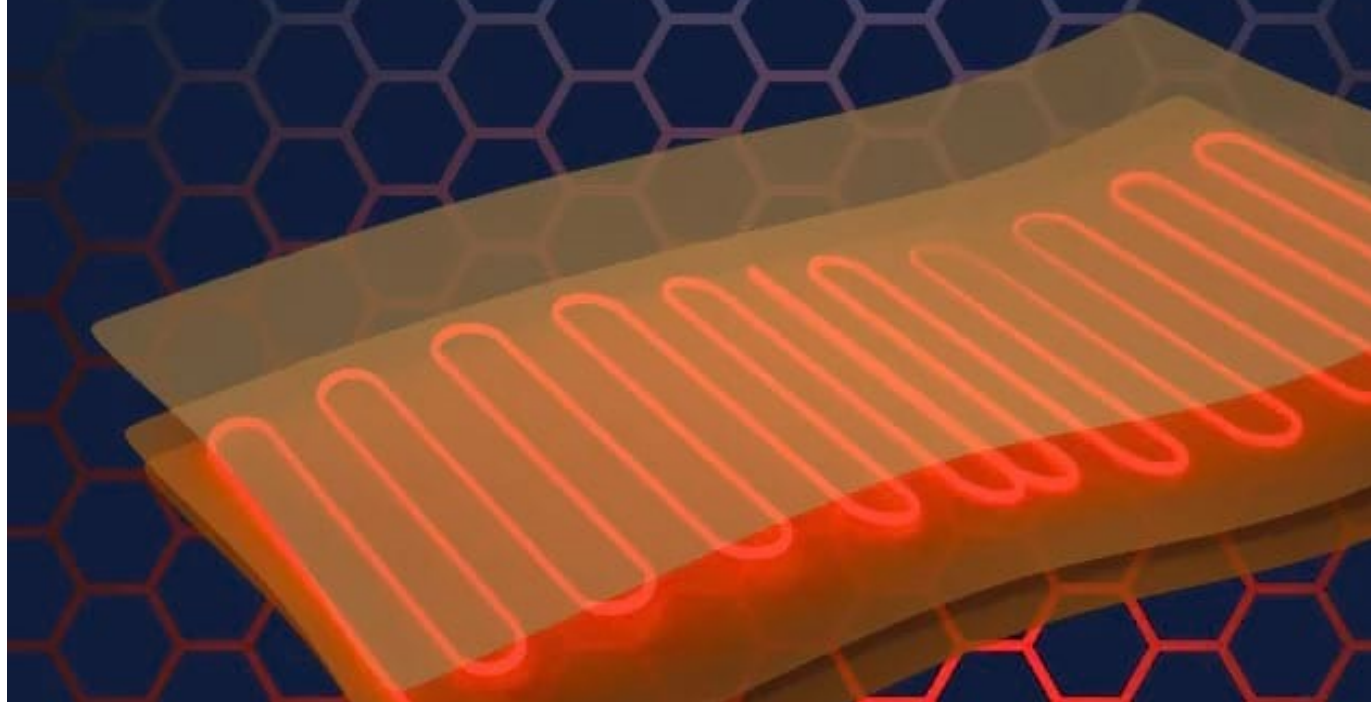

LI-ION BATERIE BEZDRÁTOVÉ POUŽITÍ KAPACITA 2500MAH



PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax KneeRehab Compact je praktická účinná pomůcka v boji proti bolesti kolen. Vývoj se inspiroval na základě reálních zkušeností z praxe a klinických prací zpracovaných lékaři a fyzioterapeuty. BeautyRelax KneeRehab Compact nabízí kombinaci technologií, které výrazným způsobem napomáhají potlačit chronické bolesti kolen. Působení tepla a vibrační masáž. Všechny funkce se snadno nastavují pomocí dotykových tlačítek na hlavní jednotce. Pohodlné bezdrátové použití zajišťuje nabíjecí Li-ion baterie s vysokou kapacitou 2500mAh. Pečujte o svá kolena na špičkové profesionální úrovni!



BOLEST KOLENOU JAKO SVĚTOVÝ PROBLÉM

Na pomyslném žebříčku civilizačních chorob s nejčastějším výskytem se bolest kolen dostala na velmi blízkou úroveň problematice bolesti zad a krční páteře. Věková struktura je rozmanitá. Chronická bolest kolenních kloubů se netýká pouze starší populace. Nadváha, vysoká fyzická monotónní zátěž při práci nebo nadměrné přetěžování při sportu má na klouby negativní účinky, které často vedou z dlouhodobého hlediska k fatálním zdravotním následkům.

Kolenní klouby jsou obecně v průběhu života vystaveny vysoké míře tření a opotřebení. Při zvýšené pohybové aktivitě dochází k zatížení chrupavek v přepočtu až několik set kilogramů na 1 centimetr čtverečný. Proto je nezbytně nutné při prvních příznacích bolesti věnovat kolům zvýšenou pozornost. BeautyRelax KneeRehab Compact je účinné řešení, které vám pomůže v aktivní rehabilitaci kolen ještě dnes!

Voda v kolenu (tzv. kloubní výpotek) je nashromážděná tekutina v kloubním pouzdru a jeho okolí. Kloub, u kterého cítíme bolest a zatuhlost, bývá často nateklý. Příčin může být hned několik: úraz, zánět, poškození vazů nebo nadměrné zatížení. BeautyRelax KneeRehab Compact kombinací více technologií najednou stimuluje neinvazivní cestou buňky v oblasti kolene a tím významně podporuje metabolismus a následnou látkovou výměnu. Přístroj BeautyRelax KneeRehab Compact se aktivně podílí na postupné eliminaci kloubního výpotku. Působení tepla pak napomáhá při pocitech chladu způsobeným špatným krevním oběhem.

POPIS PŘÍSTROJE


1. Hlavní jednotka přístroje
2. Návlek na koleno

Poznámka: Hlavní jednotka je v kontaktu s návlekiem pomocí 5 kovových kontaktů. Pro správnou funkčnost musí být vždy všech 5 kontaktů zacvaknutých do sebe. Nezáleží na otočení (pozici) hlavní jednotky nezáleží.



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko funkce VIBRACE
2. Tlačítko funkce VYHŘÍVÁNÍ
3. Tlačítko změna/zvýšení intenzity vibrační masáže
4. Tlačítko změna/snížení intenzity vibrační masáže
5. Indikace stavu baterie
6. Indikace funkce vyhřívání
7. Indikace funkce vibrací
8. Digitální displej
9. Světelná signalizace funkce vyhřívání
10. Vstup pro napájecí kabel
11. Tlačítko ON/OFF/ZAMČENÍ

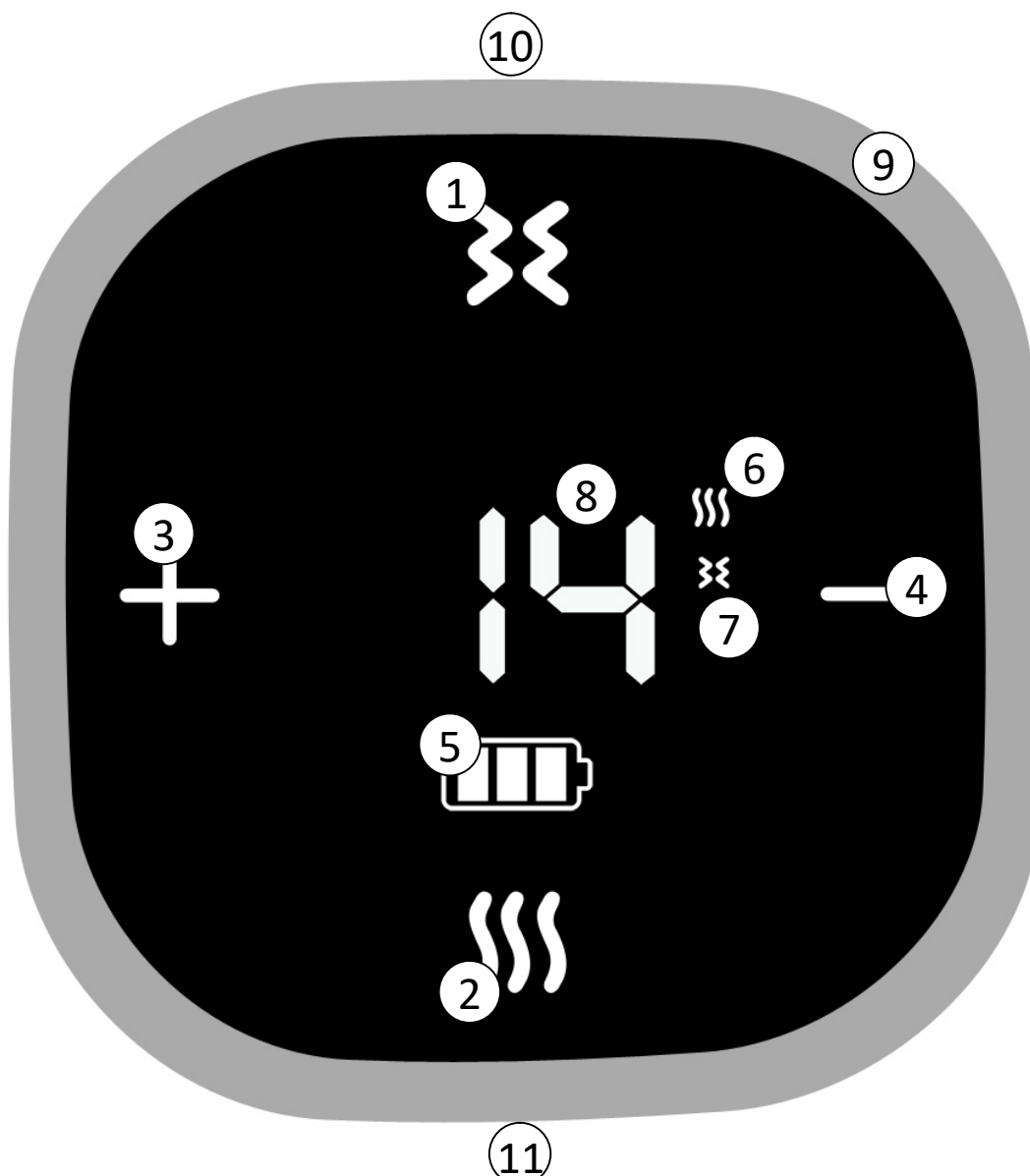

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Nasadte přístroj na koleno. Přístroj používejte vždy na holou pokožku. Mezi přístrojem a pokožkou se nesmí nacházet žádná látka ani jiná tkanina. Pomocí suchého zipu upevněte přístroj na koleno. Popruhy by neměly být příliš utaženy. Utáhněte tak, aby vám bylo použití přístroje příjemné. Pokud bude utažení příliš slabé, sníží se účinek masáže. Pokud naopak silné, použití přístroje vám nebude příjemné.
2. Hlavní jednotka je spojena s návlekiem na koleno pomocí kovových kontaktů. Možnost odepnutí usnadňuje nabíjení jednotky. Před použitím vždy ověřte, že je všech 5 kovových kontaktů připojeno. Hlavní jednotka je tak v plném kontaktu s návlekiem.
3. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** zapnete přístroj. Přístroj se nyní nachází v pohotovostním režimu. Rozsvítí se displej, dotyková tlačítka a modrá světelná indikace po obvodu hlavní jednotky. Nyní je přístroj připraven k použití. Indikace „15“ znamená, že je časovač nastaven na výchozích 15 minut.
4. Stiskněte tlačítko **VIBRACE**. Aktivuje se vibrační masáž. Na displeji se zobrazí krátce „L1“. Jde o jeden ze tří programů vibrací. Dalším stiskem tlačítka **VIBRACE** aktivujete druhý program „L2“. Dalším stiskem tlačítka **VIBRACE** aktivujete třetí program „L3“. Dalším stiskem tlačítka **VIBRACE** vibrační masáž vypnete. Všechny tři programy pracují v různém tempu vibrační masáže. Nastavte si program, který vám pocitově nejlépe vyhovuje. Vibrace tedy pracují v cyklu VYPNUTO + L1 + L2 + L3 + VYPNUTO. Pomocí tlačítek (+) a (-) si můžete nastavit intenzitu vibrační masáže. K dispozici jsou celkem 3 úrovně (01 = nízká, 02 = střední, 03 = vysoká). Při změně intenzity se vždy na displeji zobrazí v délce několika sekund aktuálně nastavená intenzita masáže. Nastavte si takovou intenzitu masáže, která vám nejvíce vyhovuje.
5. Pomocí tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete nastavit úroveň intenzity působení tepla. K dispozici jsou celkem 3 úrovně: 45°C, 50°C a 55°C. Teplo si můžete měnit opakovaným stiskem tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ**. Funkce vyhřívání tedy pracuje v cyklu: VYPNUTO + 45°C + 50°C + 55°C + VYPNUTO. Pokud je funkce vyhřívání aktivní, světelná signalizace po obvodu hlavní jednotky svítí červeně. Pokud je vyhřívání vypnuté, světelná signalizace svítí modře. Pokud je funkce vyhřívání aktivní, vždy chvíli vyčkejte, než přístroj dosáhne nastavené teploty.
6. Pomocí krátkého stisku tlačítka **ON/OFF** hlavní jednotku zamknete. Nebude reagovat na stisk žádného tlačítka na panelu. Pro uvolnění zámku opět stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF**.
7. Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne.
8. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout pomocí dlouhého stisku tlačítka **ON/OFF**.

9. Na displeji je zobrazena indikace stavu baterie. Pokud to situace vyžaduje, baterii nabijte.
10. TIP: Konstrukce přístroje umožňuje snadné použití také na oblast lokte. Pokud si chcete dopřát příjemnou uvolňující masáž v oblasti lokte, postupujte stejným způsobem, jako při aplikaci na koleno.

Poznámka: Přístroj BeautyRelax KneeRehab Compact působí preventivně a napomáhá při výskytu výpotku do určité míry. Pokud je množství vody v těle až příliš velké, je třeba ji odstranit operativně.



SPRÁVNÁ APLIKACE PŘÍSTROJE NA KOLENO



NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Kontinuální působení všech funkcí přístroje umožňuje dostatečně. Symbol baterie na displeji indikuje stav nabití baterie.

Postup nabíjení:

1. Připojte hlavní jednotku k nabíjecímu kabelu.
2. Kabel připojte k nabíjecímu síťovému adaptéru.
3. Průběh nabíjení doprovází blikající symbol baterie na displeji.
4. Jakmile je baterie nabitá, blikání ustane.
5. Délka nabíjení závisí na stavu vybití baterie a její kondici.
6. V průběhu nabíjení baterie přístroj nepoužívejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.