

NÁVOD K OBSLUZE

Pás se světelnou terapií
pro uvolnění bolesti

BeautyRelax BR-2905

Universal



OBSAH:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
ÚČEL POUŽITÍ	5
SPECIFIKACE PRODUKTU	5
OBSAH BALENÍ	5
TERAPIE ČERVENÝM SVĚTLEM	6
POPIS OVLADAČE	7
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	8
MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem nebo fyzioterapeutem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

ÚČEL POUŽITÍ

Pás se světelnou terapií pro uvolnění bolesti BeautyRelax s univerzálním použitím. Intenzivní terapie červených světlem. Blahodárné účinky pro svalové uvolnění po fyzické aktivitě. Podpora krevního oběhu a okysličení. Stimuluje buňky pro lepší průběh regenerace. Napomáhá urychlit ozdravné procesy po úrazu. Podporuje přirozený proces obnovy těla. Určeno pro použití každý den. Praktické zapnutí za suchý zip. Multifunkční použití. Určeno pro: krk, paže, ramena, břicho, lýtko, kotník, zápěstí, loket.

SPECIFIKACE PRODUKTU


- Intenzivní terapie červených světlem
- Blahodárné účinky pro svalové uvolnění po fyzické aktivitě
- Podpora krevního oběhu a okysličení
- Stimuluje buňky pro lepší průběh regenerace
- Napomáhá urychlit ozdravné procesy po úrazu
- Podporuje přirozený proces obnovy těla
- Určeno pro použití každý den
- Napomáhá zmírnit bolesti kolenou
- Dva typy vlnových délek: 660nm a 850nm
- Počet světelných diod: 15ks (660nm & 850nm)
- Praktické zapnutí za suchý zip
- Možnosti použití: krk, lýtko, kotník, zápěstí, loket, koleno, paže
- Časovač: ano
- Výkon: 3W
- Napětí: 5V
- Napájení: síťový adaptér 220V
- Hmotnost: 190g
- Rozměry pásu: 63cm x 10cm
- Rozměry aktivní světelné plochy: 15cm x 9,2cm

OBSAH BALENÍ

- 1x pás se světelnou terapií
- 1x ovladač s digitálním displejem
- 1x síťový adaptér 220V
- 1x kabel pro připojení powerbanky (powerbanka není součástí balení)
- 1x návod k obsluze

TERAPIE ČERVENÝM SVĚTLEM

Světlo je zjednodušeně viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu 390 až 760nm (nanometrů). Lidské oko je schopné vnímat světlo o vlnových délkách v rozsahu od 400 do 800nm. Při fotonové terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Je vědecky prokázáno, že různé vlnové délky světla mají za následek specifické účinky při péči o pleť. Studie ověřily reálný pozitivní terapeutický přínos pro živé tkáně a organismy na buněčné úrovni.

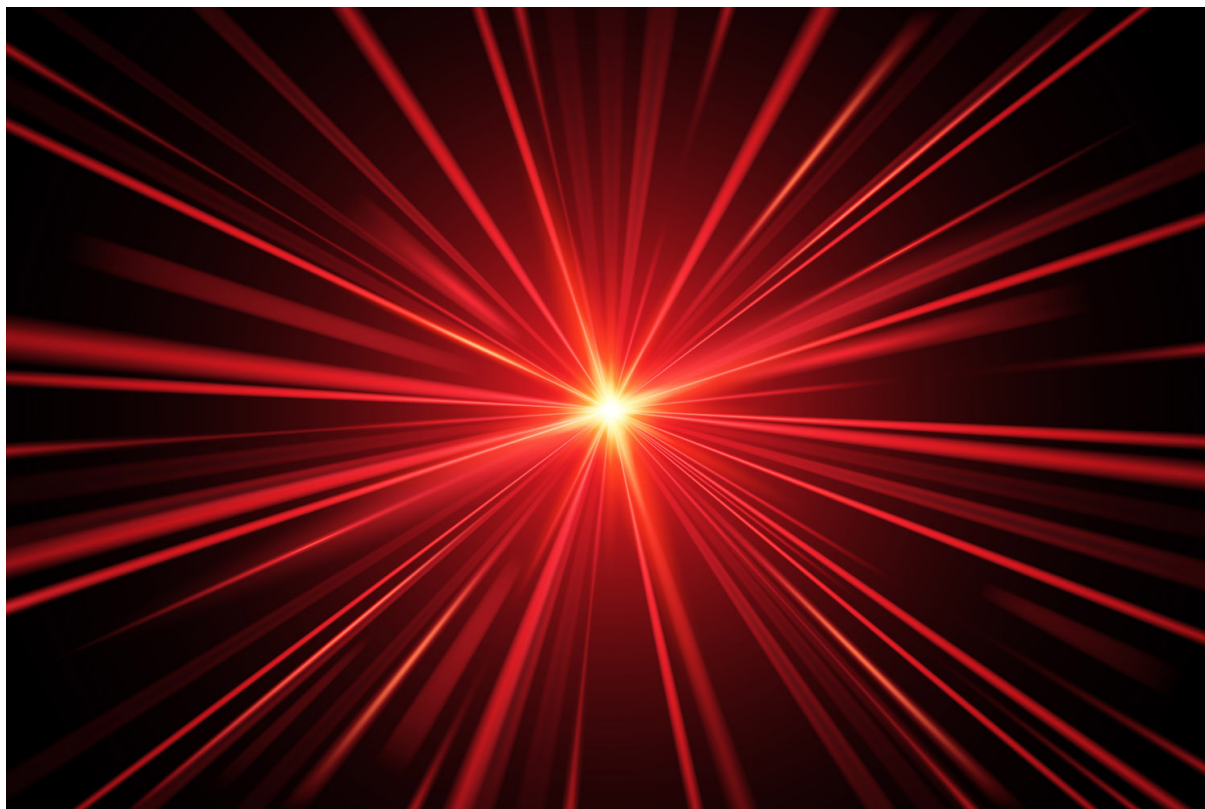

Zánětlivá onemocnění mohou nastat v důsledku onemocnění, úrazu či stresu. Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk. Světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně. Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory. Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu. Díky svým pozitivním účinkům si získala oblibu nejen v oblasti dermatologie, ale také v segmentu kosmetického ošetření pleti.

REÁLNÝ POZITIVNÍ PŘÍNOS PRO ŽIVÉ TKÁNĚ A ORGANISMY NA BUNĚČNÉ ÚROVNI

- Fotonové světlo dokáže vstoupit do nitra buňky a to neinvazivně a bezbolestně.
- Světlo aktivuje v buňkách fotoreceptory.
- Světelná terapie stimuluje přirozenou cestou léčebnou sílu buněk.
- Fotonová terapie nezpůsobuje žádné vedlejší účinky či poškození organismu.
- Řeší zánětlivá onemocnění v důsledku onemocnění, úrazu či stresu.

Pás **BeautyRelax BR-2905 Universal** kombinuje hned dvě vlnové délky zdroje světelné terapie. Do těla pronikají dva proudy světla s vlnovými délkami **660nm** a **850nm**, čímž dochází k podpoře regeneraci buněk a kolagenu. Světelný proud urychluje buněčný metabolismus. Ozdravné procesy při chronických bolestech trvají kratší dobu.

POPIS OVLADAČE

1. Displej
2. Tlačítko nastavení teploty
3. Tlačítko červené světlo
4. Tlačítko pulzní režim červeného světla
5. Tlačítko nastavení času – 10 minut
6. Tlačítko nastavení času – 20 minut
7. Tlačítko nastavení času – 30 minut
8. Tlačítko ON/OFF



POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Ověřte si, kde se nachází elektrická zásuvka ve vaší místnosti. Pokud to situace vyžaduje, doporučujeme připojit k vaší elektrické zásuvce prodlužovací kabel, aby se zásuvka nacházela co nejbližší místu, kde se rozhodnete přístroj používat (není součástí balení). To platí v případě, pokud chcete použít pro napájení pásu síťový adaptér.
2. Pro napájení přístroje pomocí powerbanky (není součástí balení) použijte kabel s koncovkou USB, který je součástí balení. Doporučené napětí powerbanky 12V.
3. Před aktivací červeného světla pás nejprve aplikujte na vybranou část těla. Pás upevněte pomocí suchého zipu. Hlavní pás se zdrojem světla může být ohnutý. Konstrukce to umožňuje.
4. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko **ON/OFF**.
5. Pomocí tlačítka **(R)** si můžete nastavit intenzit působení červeného světla. Intenzit můžete měnit krátkým stiskem tlačítka **(R)**. K dispozici jsou celkem tři úrovně – **L1** (nízká), **L2** (střední), **L3**(vysoká). Doporučujeme pracovat nejčastěji s nejvyšší intenzitou svítivosti.
6. Pomocí tlačítka **(°C)** si můžete nastavit působení úrovně teploty.
7. Pomocí tlačítek **I, II, III** si můžete nastavit čas použití. Každé tlačítko má přednastavený čas použití. **I** = 10 minut, **II** = 20 minut, **III** = 30 minut. Po uplynutí času se působení světla vypne.
8. Doporučená délka použití na jednu konkrétní oblast by se měla pohybovat kolem 20 až 30 minut. Pokud máte problém s více partiemi - např. koleno a loket, délka použití 20 až 30 minut se týká pro každou partii. Optimální frekvence použití 5x až 7x týdně.
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
- 10. Důležité upozornění: zdroj světla vytváří poměrně intenzivní světelný proud. Při použití přístroje není třeba používat žádné ochranné pomůcky pro oči. Snažte se vyhnout přímému kontaktu vašich očí se světlem. Určitě nevádí letmý pohled. Pokud byste se však do zdroje světla dívali po delší čas, pro vaše oči to nebude příjemné a v krajním případě by mohlo dojít ke zhoršení kvality vašeho zraku. Mějte tedy tuto informaci během používání přístroje stále na paměti.**

MOŽNOSTI POUŽITÍ PŘÍSTROJE



NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak může pouhé "nasvícení" vybrané části těla zmírnit bolest a celkově působit blahodárně pro rychlost ozdravného procesu, jak v popisu produktu uvádíte?

Ano, je to skutečně tak. Světlo má prokazatelné reálné účinky v oblasti zdraví. Pouze však za předpokladu, kdy má zdroj světla - v tomto případě speciálně navržené LED diody, dostatečný výkon. Zároveň dioda generuje světlo ve specifické vlnové délce. Správná vlnová délka a výkon. Dva základní technické parametry, díky kterým má terapie fotonovým světlem příznivé účinky při specifických problémech.

Není lepší pro uvolnění bolesti klasická ruční masáž?

Klasická ruční masáž je rozhodně příjemná. A zejména tehdy, pokud ji provádí skutečný profesionál s odbornými znalostmi. Přesto jsou možnosti ruční masáže určitým způsobem limitované. Dojde k uvolnění svalové tenze. Pokud však trpíte chronickými bolestmi dlouhodobě, klasická ruční masáž nepomůže. To je přesně výhoda světelné terapie, která působí přímo na úrovni buněk. Do těla pronikají rovnou dva proudy světla s vlnovými délkami **660nm** a **850nm**, čímž dochází k podpoře regeneraci buněk a kolagenu. Světelný proud urychluje buněčný metabolismus. Ozdravné procesy při chronických bolestech trvají kratší dobu.

Mohu k provozu použít libovolný adaptér, který doma najdu i přesto, že z hlediska zapojení konektory do přístroje pasuje?

Rozhodně ne. Je vždy třeba použít pouze adaptér, který je součástí balení. V opačném případě by mohlo dojít k trvalému poškození přístroje a ztrátě záruky či odpovědnosti za škody distributorem.

Jaká je doporučená délka použití? Jak často mohu přístroj používat?

Délka použití pro jednu vybranou partii by neměla přesáhnout 30 minut. Doporučená frekvence použití je 5x až 7x do týdne.

Červené světlo je poměrně intenzivní. Může mi nějakým způsobem poškodit zrak? Musím používat ochranné pomůcky pro oči?

Zdroj světla vytváří poměrně intenzivní světelný proud. Při použití přístroje není třeba používat žádné ochranné pomůcky pro oči. Snažte se vyhnout přímému kontaktu vašich očí se světlem. Určitě nevádí letmý pohled. Pokud byste se však do zdroje světla dívali po delší čas, pro vaše oči to nebude příjemné a v krajním případě by mohlo dojít ke zhoršení kvality vašeho zraku. Mějte tedy tuto informaci během používání přístroje stále na paměti.

Může přístroj používat více osob?

Ano, může. Je však třeba věnovat zvýšenou pozornost údržbě povrchu přístroje. Průhledný kryt, který je v kontaktu s pleť, je nutné udržovat čistý. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Ideální je použití např. ubrousků, které jsou napuštěny přípravkem na alkoholové bázi. Dojde tak k zahubení bakterií. Povrch vždy pečlivě osušte.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit: Email: mh@santadria.cz Tel: 737196160

beautyrelax

PO - PÁ 11:00 - 18:00
(420) 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Masážní pás Universal

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-2905**

EAN: **8594166121775**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného onemocnění.

Je určen pro vyhřívání vybraných částí těla pomocí světelné terapie.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 1.4.2024