

# NÁVOD K OBSLUZE


Ultrazvuková špachtle

**BeautyRelax**


**PEEL&LIFT PREMIUM**



**BR-1540**

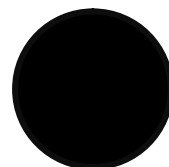

**BR-1530**

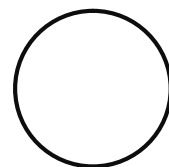



## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
OBSAH BALENÍ	5
KONTRAINDIKACE	5
HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE	6
PŘÍZNIVÉ ÚČINKY PRO VAŠI PLEŤ	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	7
ULTRAZVUKOVÉ VLNY	8
GALVANICKÝ PROUD	9
FOTONOVÉ MODRÉ SVĚTLO	11
VIBRAČNÍ MIKROMASÁŽ	11
VODOTĚSNÁ OCHRANA IPX5	12
POPIS PŘÍSTROJE	13
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	15
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	16
DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	18
DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST	19
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	20
DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE	21
NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	22
NABÍJENÍ BATERIE	25
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	27
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	28
CERTIFIKACE	28
DOVOZCE	28
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	29

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat. Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) **Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

Kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Premium je určen pro nejnáročnější uživatele. V kategorii tzv. „ultrazvukových špachtlí“ představuje naprostou špičku. Ultrazvuk, vibrace, galvanický proud, fotonové světlo, bezdrátové nabíjení, ochrana proti vodě ve standardu IPX5, luxusní designové provedení s nabíjecím stojánkem. Unikátní kombinace funkcí vytvoří plnohodnotné estetické studio přímo u vás doma. Kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Premium zajistí ošetření vaši pleti na skutečně profesionální úrovni!





## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití poté konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Standard ochrany proti vodě IPX5 se vztahuje pouze na přístroj samotný, nikoliv nabíjecí stojánek.



## OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj Ultrazvuková špachtle PEEL&LIFT PREMIUM.
- Nabíjecí stojánek.
- Napájecí kabel.
- Návod k obsluze.

## KONTRAINDIKACE

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů:

- Rakovina, epilepsie, virové onemocnění
- Při stavu vysokých horeček
- Vážné onemocnění ledvin nebo jater
- Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze
- Kovové implantáty v těle
- Cévní poruchy nebo arteoskleróza
- Těhotenství
- Menstruace
- Aknitická keratóza, basaliomy, melanomy, spinaliom, atopický ekzém, kontaktní ekzém, solární dermatitida, lupénka
- Osoby užívající léky proti srážlivosti krve
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



## HLAVNÍ BENEFITY PŘÍSTROJE

- Ultrazvukové vlny 24khz v režimech čištění pleti a liftingu.
- Galvanický proud (kladná a záporná ionizace).
- Fotonové modré světlo o vlnové délce 465nm.
- Vibrační mikromasáž.
- Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli pro extrémně dlouhou životnost.
- Bezdrátové použití díky zabudované nabíjecí baterii.
- Bezdrátové nabíjení pomocí nabíjecí stanice.
- Kompaktní, malý a lehký.
- Luxusní designové provedení.
- Díky hladkému povrchu a tvarování se při používání snadno drží.
- Ochrana proti vodě dle standardu IPX5 (neplatí pro nabíjecí stanici).
- Vysoká míra užité hodnoty.
- Nejvyšší stupeň certifikace a bezpečnosti používání.

## PŘÍZNIVÉ ÚČINKY PRO VAŠI PLEŤ

- Odstranění odumřelých kožních buněk a nežádoucích reziduí.
- Dokonalý peeling pleti až do hloubky kožních pórů.
- Funkční prevence proti vzniku černých teček a ucpávání kožních pórů.
- Účinné zapracování kosmetických přípravků, krémů a sér do pleti.
- Liftingový efekt pro jemné mimické vrásky a posílení pružnosti pleti.
- Neinvasivní bezbolestné ošetření bez jakýchkoliv nepříjemných pocitů.
- Lokální podpora krevního oběhu pro stimulaci lymfatického systému obličeje.

konec trápení s pleť

STOP

premium  
beautyrelax peel&lift

ultra clean nutrition

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Frekvence ultrazvuku: 24khz.
- Vlnová délka modrého světla: 465nm.
- Časovač: automatické vypnutí po 10 minutách.
- Výkon: 2W.
- Provozní napětí: 5V.
- Nabíjecí napětí: 15 až 500mA.
- Kapacita baterie: 600mAh.
- Čas nabíjení: až 2 hodiny.
- Čas používání na jedno nabití: 2 až 3 hodiny (v závislosti na režimu provozu)  
Nejmenší spotřebu elektrické energie má režim přerušovaných ultrazvukových vln.
- Standard ochrany proti vlhkosti: IPX5.
- Nabíjení: bezdrátové pomocí nabíjecí stanice.
- Nabíjecí stanice je připojena k USB kabelu.
- Rozměry: 17,5x5,2x2cm.
- Hmotnost: 99g.



## ULTRAZVUKOVÉ VLNY


Kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Premium generuje prostřednictvím aplikační hlavice ultrazvukové vlny. Frekvenční kmitočet ultrazvuku 24kHz je optimalizovaný pro dosažení požadovaného účinku bez poranění pleti. Veškeré nečistoty, zbytky makeupu a odumřelé kožní buňky ulpí na hrotu aplikátoru. Ultrazvuk pronikne i do těch nejmenších záhybů. Dokonale se přizpůsobí tvaru obličeje. Druhá strana aplikátoru pomocí ultrazvuku v kombinaci s galvanickým proudem napomáhá účinně zapracovat kosmetické přípravky s vysokou mírou efektivity.





## GALVANICKÝ PROUD


Pro dosažení ještě lepších výsledků na cestě k čisté a zářivé pleti je přístroj vybaven funkcí galvanického proudu. Aplikátor generuje galvanický proud s kladným nábojem. Záporně nabité částice nečistot jsou přitahovány aplikátorem jako magnet. Ultrazvukové vlny vytvoří v kombinaci s kladným nábojem vysoce účinný nástroj pro rutinní ošetření pleti. Pravidelné přístrojové čištění významným způsobem přispívá ke zpomalení procesu stárnutí pleti.

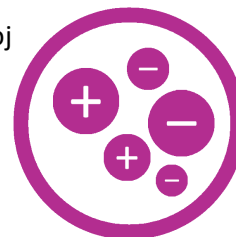

V režimu záporně nabitě aplikační hlavice můžete důkladně zapracovat do pleti kosmetické přípravky, které běžně používáte. Účinné látky tak nevyschnou bez užitku na povrchu pleti, ale proniknou efektivně přes kožní póry do vrstvy dermis. Z běžně dostupných kosmetických přípravků tak vytěžíte maximum!


Různě nabité ionty mají na pleť specifické účinky. Aplikační hlavice se v režimu kladných iontů používá pro fázi čištění pleti (**CLEAN**). Ve druhé fázi záporná ionizace napomáhá násobně lépe penetrovat živiny z kosmetických přípravků (**NUTRITION**).

### Kladná ionizace režim CLEAN


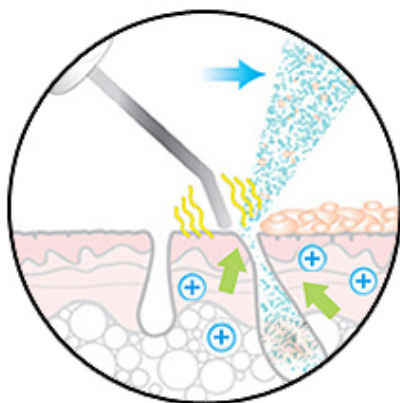


Nečistota je nabitá negativním nábojem. Aplikační hlavice vytváří naopak kladné ionty, které přitahují nečistoty jako magnet a vytahují na povrch, kde ji lze snadno odstranit. Nečistota se zachycuje nejen na povrchu pokožky, ale hluboko v pórech. Přesto hraje zásadní úlohu v čištění pleti ultrazvuk.

### Záporná ionizace režim NUTRITION

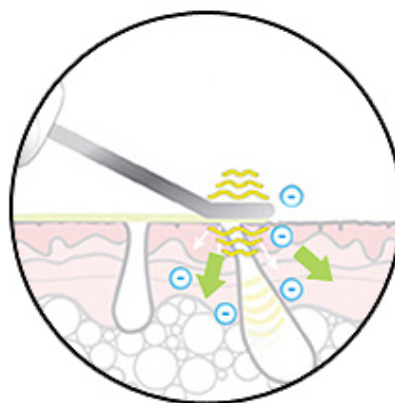

Aplikační hlavice generuje velké množství záporných iontů, které jsou navázány na kladné ionty v kožních buňkách. Vytvoří se tak optimální cesta, aby se živiny z krémů dostaly co nejhlouběji do pokožky. Při běžné aplikaci krému většinu absorbuje svrchní vrstva pokožky (epidermis). Zbytek bez jakéhokoliv dalšího využití vyschne bez užitku. Na zahnuté ploše aplikátoru působí na pleť současně ultrazvuk se záporným nábojem ionizace. Kosmetické krémy pro výživu pleti tak můžete snadno zapracovat pod povrch pleti.

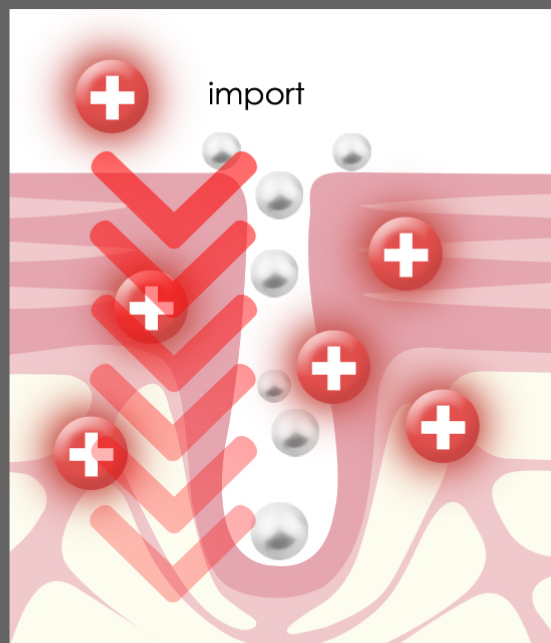
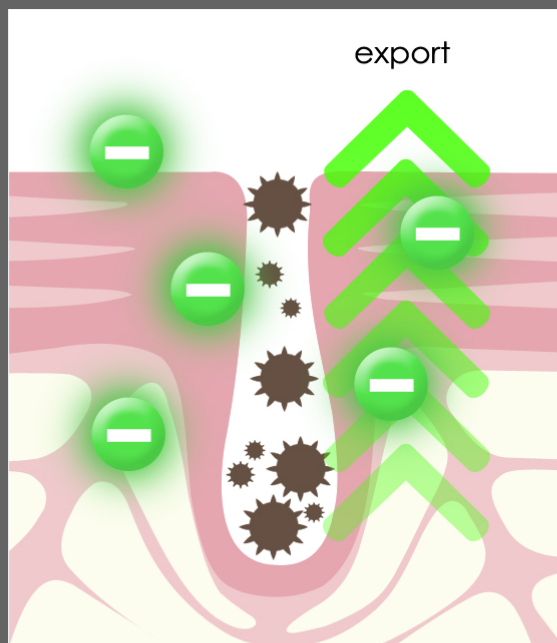


čisticí pleťový  
krém




hydratační pleťové  
sérum



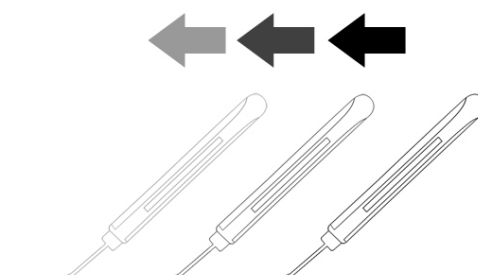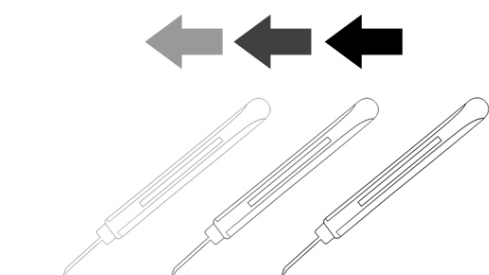


## FOTONOVÉ MODRÉ SVĚTLO

Fotonové světlo modré barvy s vlnovou délkou 465nm má prokazatelně pozitivní účinky v prevenci proti tvorbě akné. Světlo s touto specifickou vlnovou délkou významně přispívá k aktivaci porpyrinů. Ty zjednodušeně přispívají k tvorbě atomárního kyslíku, který cíleně ničí bakterie akné. Působí přímo v lokální oblasti bez negativních vlivů na okolní tkáň.

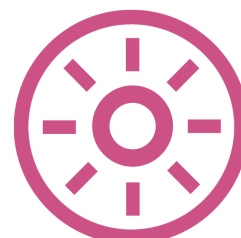

## VIBRAČNÍ MIKROMASÁŽ

Hlavní účinek je zlepšení krevního oběhu prostřednictvím stimulace lymfatického systému obličeje. Výsledkem je hladší, svěží pleť. Lepší tonus (pleť je barevně jednotnější). Zároveň dochází k mechanické stimulaci kolagenních a elastických vláken. Vibrace jsou ruku v ruce s ultrazvukovými vlnami. Po přiložení aplikátoru k pleti můžete cítit jemné kmitání.

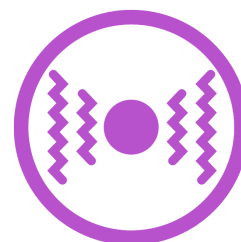



## VODOTĚSNÁ OCHRANA IPX5

Kosmetický přístroj je vodotěsný dle normy IPX5. Přesto vždy dbejte na to, aby byl po jeho použití pečlivě osušen. Výrazně tím prodloužíte životnost přístroje. **Vodotěsnost neplatí pro nabíjecí stojánek.**

# IPX5





## POPIS PŘÍSTROJE



1. Aplikační hlavice  
2. Modré světlo  
3. Informační panel  
ULTRA  
CLEAN  
NUTRITION  
STAV BATERIE

4. Tlačítko ON/OFF  
5. Vodící boční kontakt  
(na obou stranách přístroje)  
6. Kontakty pro nabíjení baterie

## POPIS PŘÍSTROJE




- 7. Kosmetický přístroj
- 8. Nabíjecí stojánek
- 9. Vstup pro nabíjecí USB kabel



- 10. Kosmetický přístroj
- 11. Nabíjecí stojánek
- 12. Vodící boční kontakt (na obou stranách přístroje)

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

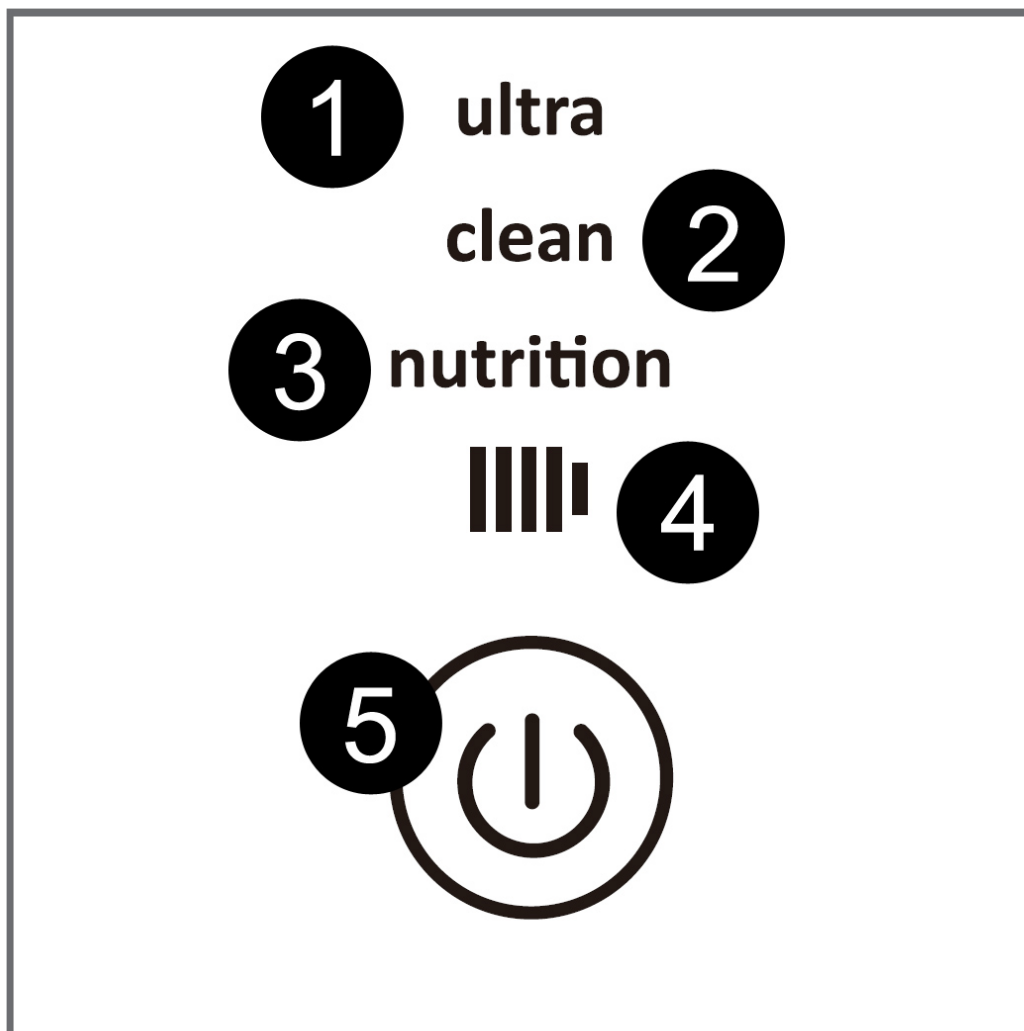

- 1. ULTRA** - ultrazvukové vlny pracují ve dvou režimech (kontinuální a přerušovaný)
- 2. CLEAN** - ultrazvukové vlny doplněné o kladnou ionizaci
- 3. NUTRITION** - ultrazvukové vlny doplněné o zápornou ionizaci
- 4. BATERIE** - indikace stavu baterie
- 5. ON/OFF** - tlačítko zapnutí/vypnutí, nastavení jednotlivých režimů ošetření


## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Pokud se rozhodnete ošetřit přístrojem obličej, odstraňte z něj zbytky makeu-pu běžným způsobem tak, jak jste zvyklá. Obličej opláchněte vlažnou vodou a utřete do sucha.
2. Nyní je pleť ideálně připravena pro použití přístroje. Ujistěte se, že je baterie přístroje dostatečně nabitá.




3. Odstraňte kryt aplikační hlavice a veškerý obalový materiál. Přístroj zapnete krátkým stiskem tlačítka **ON/OFF**. Zazní krátká zvuková signalizace (Beep).
4. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu. Žádná funkce není prozatím aktivní. Všechny tři indikátory (ULTRA, CLEAN, NUTRITION) svítí.
5. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete režim **ULTRA**. Aplikační hlavice generuje **ultrazvukové vlny v kontinuálním režimu** a rozsvítí se **modré světlo**. Světelný indikátor **ULTRA** svítí kontinuálně.
6. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** přepnete režim **ULTRA** do **pulzního módu**. Aplikační hlavice generuje **ultrazvukové vlny přerušovaně**. **Modré světlo** stále svítí. Světelný indikátor **ULTRA** bliká. (kontinuální mód poskytuje maximální výkon čištění pleti).

7. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete režim **CLEAN** (ultrazvukové vlny a kladná ionizace). **Modré světlo** stále svítí. Světelný indikátor **CLEAN** svítí kontinuálně.

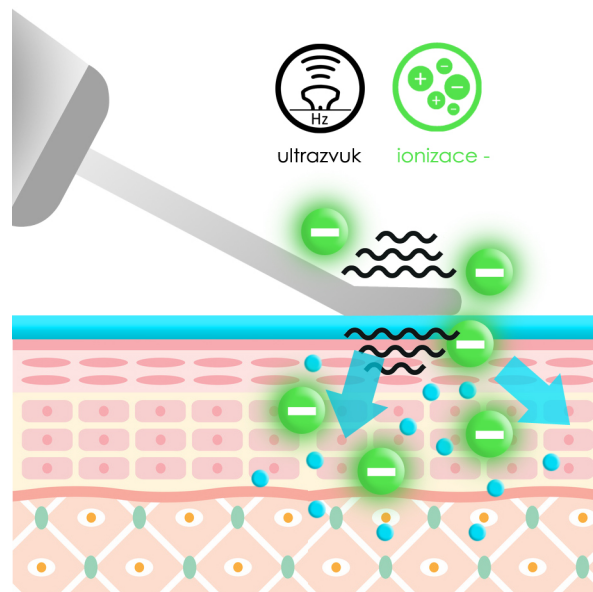

8. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** aktivujete režim **NUTRITION** (kontinuálních ultrazvukových vln a záporné ionizace). **Modré světlo** stále svítí. Světelný indikátor **NUTRITION** svítí kontinuálně.

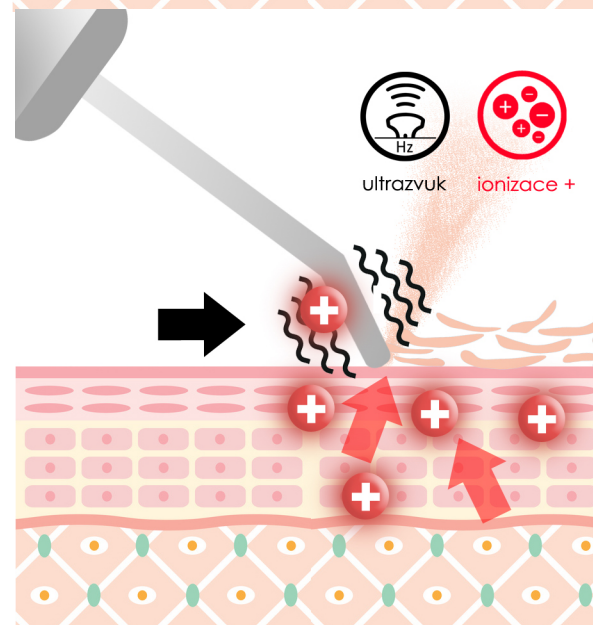


9. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** se vrátíte zpět do pohotovostního režimu. Všechny tři indikátory svítí. Ultrazvukové vlny se vypnou a modré světlo zhasne. Nyní můžete opět zahájit nastavení funkcí od bodu 5. výše.

10. Příklad má automatický přednastavený časovač v délce **10 minut**. Uplynutí času oznámí zvuková signalizace a přístroj se automaticky vypne.

11. Dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF** můžete přístroj kdykoliv vypnout. Zazní dlouhá zvuková signalizace (Beeeeeeeeeeep).

## DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma způsoby. Dvě možnosti, jakými ošetřit povrch pleti:

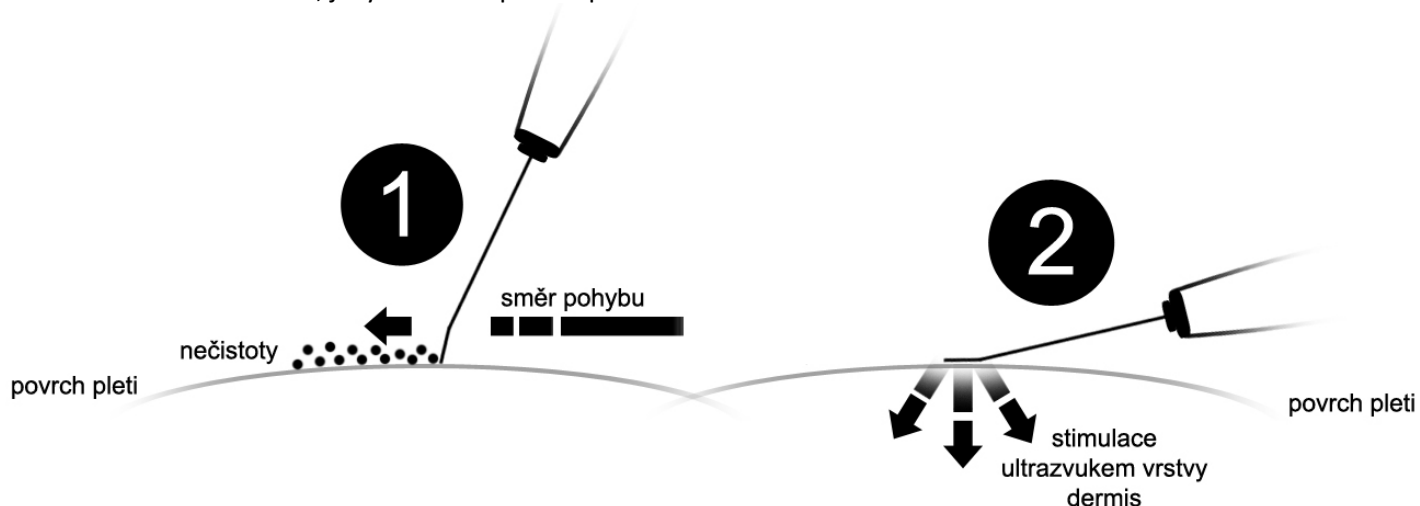

**Obrázek (1)** Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku odumřelých buněk a reziduí – režim **CLEAN**.

**Obrázek (2)** Větší koncová plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými vlnami s cílem podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a elastických vláken. Pro tento typ ošetření jsou vhodné režimy **ULTRA** a **NUTRITION**. Vždy je však nebytné použít větší plochu aplikátoru – viz. obrázek 2. Dochází ke zlepšení lokálního krevního oběhu a navíc můžete lépe zapracovat kosmetické přípravky. Optimální je působení kontinuálních ultrazvukových vln.

2. Pokud je vaše pleť méně hydratovaná (sušší typ), použijte čirý sonogel, který zakoupíte v lékárně a všech prodejnách zdravotnických potřeb. Sonogel vytvoří tenkou vrstvu mezi aplikační hlavicí a povrchem pokožky. Zvýší se vodivost a ultrazvukové vlny mají lepší schopnost proniknout přes svrchní vrstvu pokožky.
3. V režimu **NUTRITION** je ideální nanést na pleť váš oblíbený hydratační krém nebo sérum. Působením ultrazvukových vln a záporné ionizace budou mít výživové látky z krémů a sér lepší schopnost se penetrovat do vrstvy dermis, kde se nachází kolagenní a elastická vlákna.
4. Pro aktivaci kladné či záporné ionizace je nezbytné, aby se vaše prsty nacházely v kontaktu s bočními vodícími kontakty. V opačném případě nebude ionizace správně fungovat!
5. Po každém použití nasadte zpět ochranný kryt pro dlouhou životnost aplikátoru.

## **DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST**

Pro aktivaci funkce galvanického proudu (ionizace) je nezbytné, aby byl ukazováček a palec v kontaktu s bočními vodícími pásy. V opačném případě funkce nebude fungovat!





## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

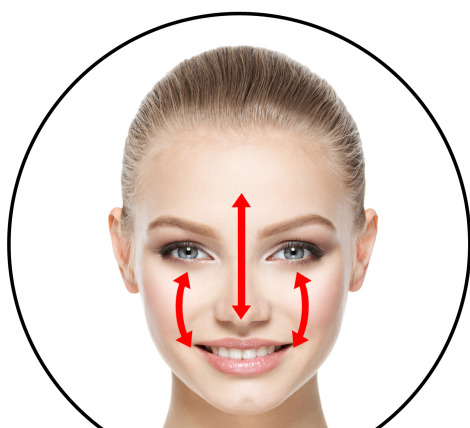

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru



## **DŮLEŽITÉ POKYNY POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE**

- Ultrazvuková špachtle PEEL&LIFT PREMIUM je přístroj nové generace z kategorie kosmetických přístrojů, které jsou určeny pro neinvazivní ošetření pleti. To znamená, že žádná z částí aplikační hlavice fyzicky nepronikne pod kůži.
- Neinvazivní používání je základní předpoklad pro používání přístroje v domácích podmínkách běžným uživatelem. Ovládání přístroje nevyžaduje dohled erudovaného školeného pracovníka z oblasti zdravotnictví nebo kosmetické estetiky.
- Ultrazvuková špachtle PEEL&LIFT PREMIUM je certifikován a splňuje všechny normy, které jsou na přístroj podobného druhu kladeny.
- Při ošetření můžete použít čirý vodivý sonogel. Lze zakoupit v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb. Stojí pár desítek korun. Rozhodně stačí nejlevnější. Neplatí čím dražší, tím lepší. Hlavním účelem nanesení jemné vrstvičky gelu na pleť je zvýšení vodivosti. Ultrazvukové vlny získají lepší schopnost proniknout do vrstvy dermis, kde je struktura kolagenních a elastických vláken.
- Po každém ošetření vždy pečlivě očistěte aplikační hlavici. Ideální je použití čirého lihu pro desinfekci. V poslední fázi aplikátor dokonale osušte. Vlhkost může způsobit oxidaci kontaktů aplikátoru. Výrazně tím zvýšíte životnost aplikační hlavice.
- V režimu galvanického proudu můžete cítit na pleti jemné mravenčení. Zvýšenou pozornost dbejte zejména při ošetření oblastí obličeje, kde je velmi tenká pokožka. Obecně platí, čím je silnější vrstva podkožního tuku, tím je mravenčení méně rozpoznatelné a naopak.
- V režimu čištění pleti, kdy je v kontaktu s pleťí hrot aplikační hlavice, se nebojte na pleť mírně přitlačit. Hrot aplikátoru má speciální zakřivení, aby co nejlépe přilnul k povrchu pleti. Během používání můžete nečistoty z pleti průběžně čistit suchým hadříkem.
- Věnujte zvýšenou pozornost dezinfekci aplikátoru zejména v případech, kdy přístroj používá více lidí. Významně tak předejdete vzájemnému přenosu bakterií.

## NEJČASTEJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

**Proč je před použitím přístroje doporučeno odstranit makeup pomocí kosmetického tampónku? Vždyť přeci je přístroj jako takový určen pro čištění pleti?**

Před použitím přístroje je vhodné odstranit makeup běžným způsobem, jak jste zvyklá. Hlavním smyslem je odstranit nečistoty pleti tzv. „nahrubo“. Pomocí aplikátoru kosmetického přístroje se tak můžete zaměřit na skutečně hloubkové a důkladné vyčištění pleti. Na nečistoty, které nejsou pouhým okem vidět.



**Mohu přístroj použít na pleť „na sucho“ bez použití jakéhokoliv přípravku?**

Ultrazvukové vlny patří do kategorie technologií neinvazivního kosmetického ošetření. Pro tento typ ošetření je lidská pleť příliš suchá. Pokožku je nezbytné dostatečně hydratovat, aby se na ni mohly ultrazvukové vlny lépe navázat. Použitím na suchou pleť je účinek ultrazvuku minimální. V krajním případě můžete pro hydrataci pleti použít kojeneckou nebo destilovanou vodu. V praxi to však není moc praktické. Voda se neudrží na místě, které chcete ošetřit přístrojem. Voda během použití přístroje navíc rychle vysychá. Používejte přístroj, jako skutečný profesionál! K přístroji doporučujeme zakoupit v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb sonogel. Je levný a pro přístrojové ošetření nabízí skvělé vlastnosti. Postačí nanést tenkou vrstvičku. Gel zůstane přesně tam, kde potřebujete. Nestéká a rychle z pleti nevyschne. Mazlavá konzistence umožní hladký pohyb aplikátoru po pleti. Takto můžete snadno provést celý proces čištění pleti, kdy aplikátorem stíráte z pleti nečistoty společně s gelem. Po skončení použití přístroje otřete z pleti zbytky gelu.

**Sonogel, kosmetický krém, sérum.... Jak tedy kosmetické přípravky správně používat nebo kombinovat? Co je nejlepší?**

Je to snadné. Pro čištění a lokální lifting pleti stimulací ultrazvukem je absolutní minimum použít alespoň sonogel. Základní levný sonogel neobsahuje žádné účinné látky, jako např. aloe vera, kyselinu hyaluronovou popř. další složky. V režimu čištění pleti vytvoří vhodné pojivo mezi aplikátorem a pletí. V režimu masírování pleti zakřivenou plochou aplikátoru můžete efektivně stimulovat jemné vlásečnicové vrásky působením ultrazvuku. Na trhu však existují dražší varianty sonogelu, které obsahují další přísady pro blahodárnou pleťovou péči. Záleží na vás, kolik chcete do těchto přípravků investovat. Ať se již rozhodnete pro kterýkoliv, určitě sledujte podíl těchto účinných látek. Pokud takový přípravek obsahuje pouze stopové množství, pro pleť de facto nemá žádný účinek. Můžete použít váš oblíbený kosmetický krém. V tomto případě nastavte na přístroji program NUTRITION. Ultrazvukové vlny ruku v ruce se záporným galvanickým proudem napomohou krém lépe do pleti zapracovat.

Z hlediska použití kosmetických přípravků bychom rádi zmínili důležitý aspekt. Kosmetický přístroj s neinvazivní technologií ošetření pleti si nejvíce rozumí se sonogelem popřípadě sonogelem s obsahem dalších příměsí. Pokud použijete jakýkoliv jiný krém/sérum, uživatelům s velmi citlivou pletí může kombinace ultrazvuku + galvanického proudu + krému/séra vyvolat alergickou reakci v podobě lokálního zarudnutí pleti. Mohou to způsobit další látky, které tyto přípravky obsahují (barviva, aroma, apod.). Před ošetřením obličeje doporučujeme nanést přípravek na malý kousek pleti např. na ruku s použitím přístroje. Pokud po několika minutách nenastane na pleti výrazné zarudnutí, můžete pokračovat s ošetřením obličeje.

**ULTRA, CLEAN, NUTRITION. Jaký je skutečný význam těchto funkcí a jaký je právě pro mě nejlepší?**

Rozhodně nemusíte při jednom použití přístroje použít všechny režimy přesně po sobě. Pojdme si rozebrat podrobně vlastnosti jednotlivých programů:

**1. ULTRA** - ultrazvukové vlny pracují ve dvou režimech (kontinuální a přerušovaný)

V tomto režimu jsou aktivní ultrazvukové vlny. Pracují stále nebo přerušovaně. Přerušované působení je šetrnější. Zvolte, pokud máte pro použití přístroje více času. Režim ULTRA můžete použít pro čištění pleti (špičkou aplikátoru) nebo pro stimulaci konkrétních partií obličeje s dosažením liftingového efektu. Pro režim ULTRA je minimum alespoň jemná vrstvička sonogelu.

**2. CLEAN** - ultrazvukové vlny doplněné o kladnou ionizaci

Režim CLEAN je velice podobný režimu ULTRA. Aplikátor se navíc přepne do kladného náboje galvanického proudu. Je prokázáno, že s galvanickým proudem je čištění ještě více efektivní. Přesto má největší podíl na důkladném peelingu právě ultrazvuk. Kombinujte se sonogelem nebo např. kosmetickým krémem pro čištění pleti.

**3. NUTRITION** - ultrazvukové vlny doplněné o zápornou ionizaci

Tento režim je maximálně přizpůsoben pro zapracování účinných látek v sonogelu nebo kosmetickém krému za předpokladu, že obsahuje větší než stopové množství těchto látek. Použijte zahnutou část aplikátoru.

**Jak často je doporučené přístroj používat?**

Četnost použití by měla vycházet z kvality prostředí, ve kterém se nejvíce pohybujete. Pokud trávíte hodně času v prašném prostředí, intervaly mezi peelingem pleti zkraťte. Neméně důležitý aspekt hraje typ vaší pleti. Pokud máte pleť, která je mastnější a má sklony k častějšímu ucpávání kožních pórů, opět zkraťte intervaly použití. Pokožka by měla být na dotyk hladká a jemná. Pokud ztratí tuto vlastnost, je správný čas na použití přístroje.

**Pro jaké partie je přístroj primárně určen?**

Obličej, krk a dekolt.

**Jakým způsobem vhodně kombinovat čištění pleti (peeling), lifting pleti se zapracováním krémů do pleti?**

Jak již bylo uvedeno výše, není třeba všechny programy skombinovat najednou. Frekvence peelingu pleti nemusí korespondovat s četností použití vašeho kosmetického přípravku. Každá pleť má individuální potřeby. Z počátku vyzkoušejte všechny možné kombinace. Zjistíte, jak vaše pleť na jednotlivé možnosti použití přístroje reaguje. Sami si můžete vytvořit vlastní plán péče o pleť.

**Jaké jsou tedy příklady možného plánu ošetření pleti?****Příklad č. 1**

Přístrojem můžete pouze pleť vyčistit. Odstraňte zbytky makeupu běžným způsobem. Naneste na pleť tenkou vrstvu sonogelu, zvolte program ULTRA nebo CLEAN a pleť vyčistěte. Během 10 až 15 minut máte hotovo.

**Příklad č. 2**

Odstraňte zbytky makeupu běžným způsobem (např. pomocí kosmetického tampónku, čistícího krému nebo micelární vody). Zaměřte se na ty části obličeje, které nejrychleji podléhají působení věku – čelo, vrásky kolem úst, vlásečnicové vrásky kolem očí. Naneste na tyto partie vrstvičku sonogelu nebo jiného kosmetického přípravku. V případě použití sonogelu zvolte program ULTRA – kontinuální nebo přerušované pulzy. V případě použití kvalitního kosmetického krému/séra zvolte režim NUTRITION. 20 minut a máte hotovo.

**Příklad č. 3**



Odstraňte zbytky makeupu běžným způsobem. Naneste na pleť tenkou vrstvu sonogelu, zvolte program ULTRA nebo CLEAN a pleť vyčistěte. Odstraňte hadičkou zbytky sonogelu. Naneste na pleť vyživující krém a zapracujte pomocí programu NUTRITION. Rozdělte si ošetření na polovinu. 10 minut peeling a 10 minut pro zapracování kosmetického přípravku.

*Tento návod k obsluze slouží pouze jako vodítko, jak s přístrojem pracovat. Vytváří však zároveň prostor pro vaši kreativitu vytvořit si vlastní plán použití přístroje, který bude maximálně vyhovovat vaší pleti. Nebojte se trošku experimentovat. Zapojit fantazii. Technologie přístroje jsou pro vaši pleť bezpečné a žádným způsobem si nemůžete ublížit. Pokud si nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás. Tým BeautyRelax*

## **NABÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjí se pomocí nabíjecího stojánku, který je součástí balení.

Jakmile je baterie vybita, zobrazí se na displeji blikající ikona baterie v červené barvě. Přístroj se automaticky vypne.

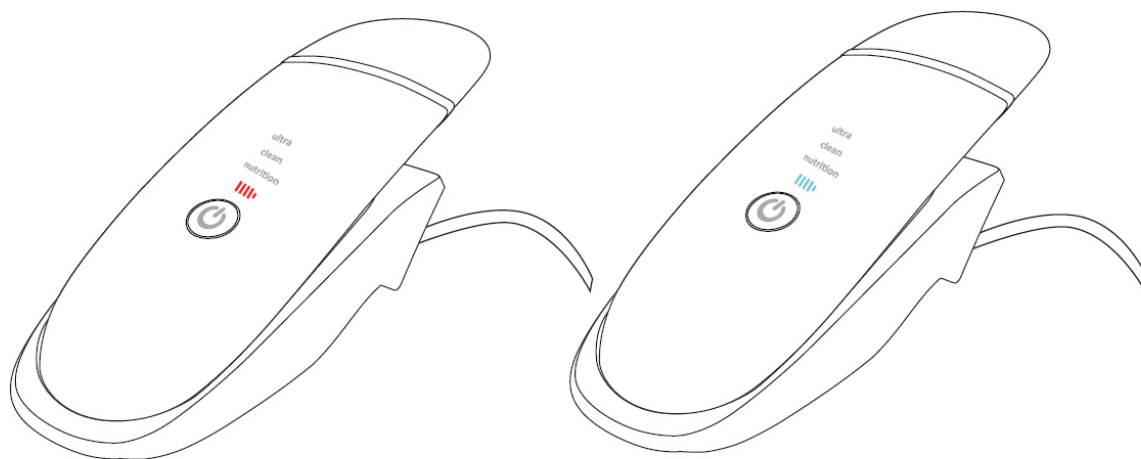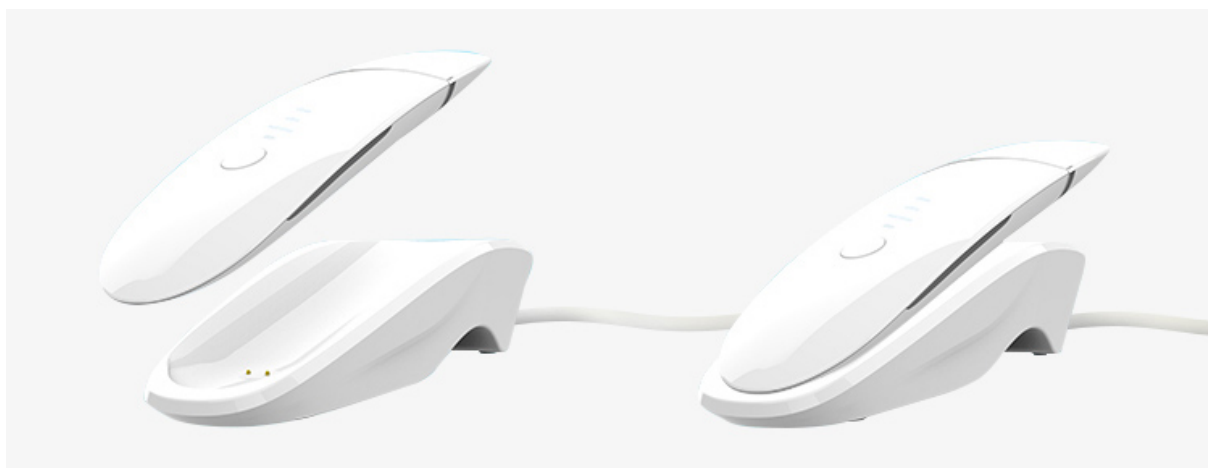

**Postup nabíjení:**

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte k nabíjecímu stojánku. Druhý k USB portu počítače nebo notebooku
3. Během nabíjení bliká červená indikace baterie.
4. Jakmile je baterie plně nabita, indikace baterie na přístroji přestane blikat a rozsvítí se modře.



K nabíjení přístroje nepoužívejte adaptér do sítě 220V. Mohlo by dojít k závažnému poškození přístroje.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.

***Vysoký standard certifikace produktu pro vaši maximální bezpečnost!***



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737196160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

**Ultrazvuková špachtle BeautyRelax PEEL&LIFT PREMIUM**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1530/BR-1540**

EAN: **8594166116955; 8594166116962**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je **ve shodě** s následujícími evropskými normami:

**EN 55014-1: 2017**

**EN 55014-2: 2015**

**Podrobnosti jsou uvedeny v test reportu číslo: SZAHE180319001-01**

## Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno Dne: 14.6.2020

# OVĚŘENÁ SÍLA ULTRAZVUKU



premium

beautyrelax **peel&lift**

